

PHILIPS

Lumea

Prestige



一般家庭用光美容器
フィリップス
ルメア プレステージ

品番 **BRI946/70,**
BRI948/70

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

この製品は、下記肌色チャート内の⊗印がついている肌色・体毛の色には適していません。製品を初めてご使用の際または日焼けをした後は、下記肌色チャートをご確認のうえ、必ず使用前にスキントテストを行い肌の状態を確認してください。光を照射し、温かさや少し熱さを感じる程度であれば問題ありませんが、痛みを感じるような出力レベルでは使用しないでください。下記を確認していただき、適切な出力レベルに設定してからご使用ください。

肌色チャート

肌色 スキントタイプ 特徴	ホワイト スキントタイプ I	ベージュ スキントタイプ II	ライト ブラウン スキントタイプ III	マイルド ブラウン スキントタイプ IV	ダーク ブラウン スキントタイプ V	黒色に近い ブラウン スキントタイプ VI
	きわめて 明るい肌色 日光浴をすると肌が赤くなるか日焼けが残らない	明るい肌色 日光で比較的肌が赤く反応しやすく、日焼けはわずかしこしない	標準的な肌色 日光でまれに赤くなることもあるが、すぐ落ち着いて肌色が濃くなる	小麦色 日光にあたってても皮膚が赤くならず、すぐに肌色が濃くなる	褐色 日光にあたってても皮膚が赤くならず、よく日焼けする・肌色が濃くなる	非常に日焼けしやすい
体毛の色						
白色/灰色	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
赤色	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
明るい金色	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
濃い金色/明るい茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
濃い茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗
黒	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	⊗



注意

- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 健康状態や、服用している薬によっては、製品が使用できない場合があります。
- P.5～8の「必ずお守りください」のページをよくお読みください。

フィリップス ルメアをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

○使用目的

フィリップスルメアプレステージは、顔（鼻下、あご、もみあげ）、ワキの下、脚、ビキニエリアの除毛後のお手入れを目的とした18歳から65歳までの方にご使用いただける家庭用パーソナルケア製品です（男性は顔には使用できません）。

肌の色と体毛の色によってはご使用いただけない場合があります。ご使用前に肌色チャート(P.1)でご自身の肌タイプと体毛色が使用可能かよくご確認ください。安全にご使用いただくために「下記に該当する方はこの製品を使用しないでください」(P.8)をよく読み、該当する項目がある場合には使用をお止めください。また「下記に該当する箇所にはこの製品を使用しないでください」(P.7)に記載されている箇所へは使用しないようご注意ください。


商品のご確認

商品をご確認ください。

本体



電源アダプタ

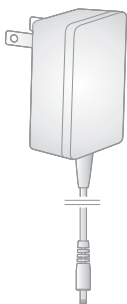

ポーチ



掃除用クロス



からだ用アタッチメント
(専用のフィルターは付いていません)



顔用アタッチメント



ワキ用アタッチメント
※BRI948/70のみ
(専用のフィルターは付いていません)



ビキニアリア用アタッチメント
※BRI948/70のみ



ワキ、ビキニアリア用アタッチメント
※BRI946/70のみ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

● はじめに	商品のご確認 3
	目次 4
	必ずお守りください 5~8
	各部の名称 9・10
● ご使用方法	日焼けについて 11
	お手入れの前に 12・13
	製品の使いかた 14~18
	お手入れのためのガイドライン 19~21
	製品のメンテナンス方法 22
	保管のしかた 23
● 廃棄について	製品を廃棄するとき 23
● 困ったとき	故障かな?と思ったら 24~26
● 保証	保証とアフターサービス 27
	仕様 28
	無料修理規定 30
	保証書/フィリップスサポートセンター 最終ページ

必ずお守り ください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

○絵表示について



記号は、「警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容。

○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。



警告



●メンテナンスの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●電源アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●本体・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●電源コネクタ受部にピンやごみ、ほこりを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしないでください。発熱による火災の原因になります。



●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●お子様がこの製品で遊ばないように管理してください。



●光をのぞきこんだり、人に向けたりしないでください。目を傷める原因となります。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●自分で意思表示ができない人(幼児を含む)に使用させないでください。また、おからだの不自由な人だけでは使用しないでください。事故やケガの原因になります。

注意



●電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源アダプタ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



●この製品が破損または故障した場合は、使用しないでください。ケガの原因になります。



●使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



●製品本体に強いショックを与えたり、落としたり、激しく振ったりしないでください。



●電源アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型部品をお求めください。



●18歳未満および66歳以上の方は使用しないでください。

使用上のご注意

1. この製品は顔(鼻下、あご、もみあげ)、ワキの下、腕、腹部、ビキニエリア、脚の除毛後のお手入れをするためのものです(男性は顔には使用できません)。それ以外の目的で使用しないでください。
2. この製品を浴室、シャワー室のような湿気の多い場所では使用しないでください。
3. この製品の使用は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。
4. 同じ箇所に一度のお手入れで2回以上使用しないでください。また、お手入れ頻度については、P.20「お手入れの頻度」の項をお読みください。
5. 通風孔をふさがないでください。本体が過熱して故障の原因になります。
6. 日焼けをしてから約2週間はこの製品を使用しないでください。詳しくはP.11「日焼けについて」の項をお読みください。
7. 肌以外のものに向けて光を照射しないでください。故障の原因になります。
8. ご自身の肌タイプに合った出力レベル設定でお使いください。それよりも高い出力レベル設定でご使用になると、肌トラブルのリスクが高まります。
9. 暗いところでは使用しないでください。目に一時的な刺激を感じることがあります。
10. 衛生上、この製品を他の人と共有しないでください。

製品メンテナンスの際のご注意

1. この製品は水洗いできません。水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。
2. この製品は、使用の都度、掃除をしてください。

保管時のご注意

1. 直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
2. ポーチに入れてほこりがつきにくい場所で保管してください。詳しくはP.23「保管のしかた」の項をお読みください。



下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください

1. 顔（鼻下、あご、もみあげ以外）、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、膣部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体、男性器
2. シリコン注入物、ベースメーカー、皮下埋め込み式カテーテル（ポート）、ピアス、ボディピアス
3. いぼ、ほくろ、そばかす、大静脈、しみ、濃い色素斑の見られる箇所、傷跡、皮膚に異常の見られる箇所
4. 刺青（タトゥー）、ボディペイント、アートメイクのある箇所
5. 長時間効果が持続する制汗剤を使用している箇所



下記に該当する方は、この製品を使用しないでください

1. 妊娠中、授乳中の方
2. お手入れ箇所の肌色・毛の色が適さない方
 - －生来の毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方
 - －肌タイプV(肌タイプ5)またはVI(肌タイプ6)と診断されたことがある方、または元の肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方
3. 現在医師の治療を受けている方
4. 皮膚がんまたはお手入れしようとする範囲に何らかのがん疾患がある方
5. お手入れしようとする範囲にがんの兆候または異常なホクロがある方
6. 心臓に疾患のある方
7. お手入れしようとする範囲に下肢静脈瘤、血管拡張症などの血管病の既往歴がある方
8. 光に対して過度に敏感または発赤しやすい方、アレルギー反応のある方
9. お手入れしようとする範囲に皮膚感染、アトピー、やけど、毛根の炎症、裂傷、ヘルペスなど皮膚疾患のある方
10. お手入れしようとする範囲を過去3週間以内に手術した方
11. 出血障害のある方
12. 皮膚のケロイド症状、創傷治癒欠損などの膠原病の既往歴がある方
13. 糖尿病、紅斑性狼瘡、ポルフィリン症、うっ血性心臓病などの疾患がある方
14. HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染者、またはAIDS(後天性免疫不全症候群)既往の方
15. ヒアルロン酸、ベータヒアルロン酸、イソトレチノイン、アゼライン酸で皮膚を治療中の方
16. イソトレチノインを使用したにきび・酒さなどの治療を過去6カ月以内に受けた方
17. 鎮痛剤の服用をしている方
18. 感光性を強める性質のある薬を使用している方
19. 抗凝血剤を使用している方やアスピリンを多用する方
20. 免疫抑制剤を使用している方


※ご自分がこの製品の使用に適するかどうか不明な場合、また、使用中に異常を感じた場合は、皮膚科医にご相談ください。

各部の名称


本 体



アタッチメント ▶ P.14

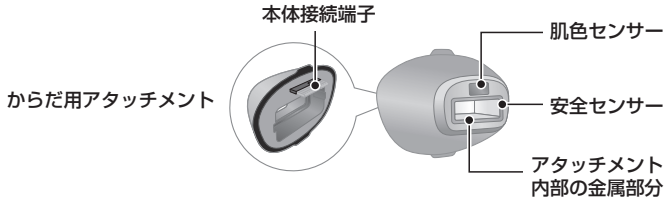


電源アダプタ

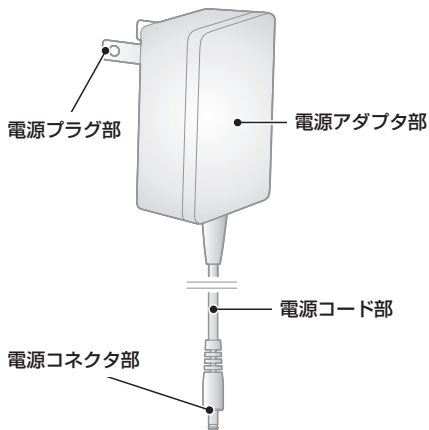

ポーチ



掃除用クロス

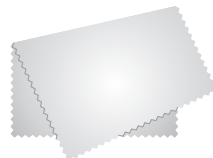

日焼けについて

●製品を使用する前に日焼けをした場合

日焼けをした後は、最低2週間あけてから製品を使用してください。製品を使用する前に、お手入れする箇所にスキントテストをし、日焼けした後の肌色に合わせて適切な出力レベルに調節してください(P.13「スキントテストのしかた」の項をお読みください)。

※短時間、間接的に日光を浴びた程度の場合は、製品をご使用いただくことができます。



●お手入れ後の日焼け

お手入れ後、48時間は日焼けをしないようにしてください。また、外出する際はお手入れした部位にSPF50以上の日焼け止めを塗り、お手入れした箇所が紫外線に当たることを避けてください。48時間経った後でも赤みなどが見られる場合は紫外線を避けてください。その後も約2週間程度はSPF30以上の日焼け止めを塗り、肌を保護してください。

※SPFとはSun Protection Factor (サン プロテクション ファクター)の略で紫外線防御指数とも言います。日焼け止め乳液などに表記されている、紫外線の防止効果を表す指標です。

●クリームによる日焼け


タンニング(日焼け)を促進するクリームなどを使うといった人工的なタンニングをした場合は、その日焼けが引くまで待ってからこの製品をお使いください。また、上記「製品を使用する前に日焼けをした場合」、「お手入れ後の日焼け」の手順に従ってください。

お手入れの前に

お手入れ箇所の準備

お手入れの前に、お手入れする箇所の毛を剃ってください。肌を清潔にし、剃り残しの毛がないこと、水や油分が付着していないことを確認してください。

- 事前に体毛を剃らなかつたり、剃り方が不十分だったりすると肌トラブルが生じるおそれがあります。また、汚れや体毛が製品内にたまります。
- 毛抜き、ワックスなどで脱毛した場合、毛が再び生えてくるまではこの製品を使用しないでください。毛が伸びてきたら、脱毛クリームなどは使わずに毛を剃ってください。毛を適切に剃らずにこの製品を使用すると、本来の効果が得られません。
- 毛を剃った際に切り傷などができた場合、傷が治るまでその箇所はお手入れしないでください。
- 毛を剃った際に皮膚の炎症を起こした場合、炎症が治るまでその箇所はお手入れしないでください。

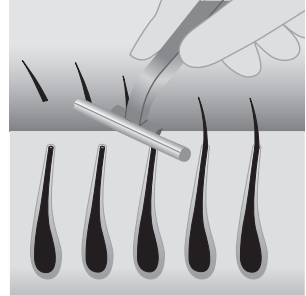

本製品を初めてご使用になる場合、または日焼けをした後にご使用になる場合は、ご使用前にスキントテストを行い、肌の状態を確認してください。

スキントテストは、お手入れしたい部分に近い箇所を選んで行ってください。

スキントテストで製品ご使用後の肌の状態を体の部位ごとにチェックすることで、適正な出力レベルを選ぶことができます。

スキントテストのしかた

- 1 スキントテストする箇所を選びます。
 - ※お手入れしたい部分に適したアタッチメントを選んでください。P.14「適切なアタッチメントを選ぶ」の項をお読みください。
 - ※お手入れしたい箇所に近い部分の肌を選んでください。製品が扱いにくい部分や肌が敏感な箇所(膝や骨のある箇所)では、スキントテストを行わないでください。
 - ※「肌色チャート」については、P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。
- 2 電源ボタンを押して、電源をONにします。
- 3 出力レベルが1に設定されていることを確認します(P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください)。
- 4 製品を肌に直角になるように当てます。こうすることで安全センサーが肌に接触します。
 - ※安全センサーは、製品が肌に接触していない場合に、意図しない照射を防ぐためのものです。安全センサーが肌に正しく接触すると、READY(準備完了)ランプが白色に点灯します。
- 5 照射ボタンを1度押して、光を照射します。
- 6 次の箇所に製品をすべらせて移動します。
- 7 出力レベルを1レベル上げ、照射ボタンを押します。
- 8 再び次の箇所に製品をすべらせて移動させ、照射ボタンを押します。7~8の操作を繰り返し、レベル1から順にご自分の肌の「肌色チャート」に記載の出力レベルまで行います。
- 9 スキントテストが終了したら、電源ボタンを押して、電源をOFFにします。
- 10 スキントテスト後に24時間待ってから、肌の状態を確認します。皮膚に赤み・痛み・水疱などの異常が見られた場合は、異常が起きなかった出力レベルを選んで今後のお手入れを行ってください。
 - ※前回お手入れしたときから、日焼けなどで肌の色が変わった場合は、スキントテストを行ってください。スキントテスト後は、30分程度待ってからお手入れを行ってください。

製品の使いかた

本製品をご使用になる前に必ず、P.12・13「お手入れの前に」の項をお読みください。


※本製品は顔(鼻下、あご、もみあげ)、ワキの下、腕、腹部、ビキニエリア、脚の除毛後のお手入れをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください(男性は顔には使用できません)。

※光のまぶしさをやわらげるため、明るい室内でご使用ください。

適切なアタッチメントを選ぶ


安心して効果的なお手入れをするために、お手入れする体の箇所に合わせてアタッチメントを選んでください。

※アタッチメントのコネクタ部分に汚れなどがあると、エラーとなり動作を停止します。この場合は、アタッチメントのコネクタ部分を清掃してください。詳しい清掃のしかたはP.22「製品のメンテナンス方法」の項をお読みください。

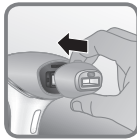

【取り付け方】

アタッチメントを取り付けるときは、本体に「カチッ」と音がするまではめ込みます。

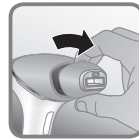

【取り外し方】

アタッチメントを取り外すときは、アタッチメントの上下の突起部分を指で押さえ、やさしく本体から取り外します。



●**からだ用アタッチメント** 体の首より下の部位で広い範囲(脚、腕、腹部など)をケアするためのアタッチメントです。照射範囲が広く、面積の広い部位のお手入れに適しています(専用のフィルターは付いていません)。

※顔には使用しないでください。



●**顔用アタッチメント** 体の特に敏感な部分をケアするためのアタッチメントです。安全性を確保するための特殊光フィルターが採用されています。頬骨より下の顔の部分(鼻下、あご、もみあげ)などのお手入れに適しています。

※目の周り、眉毛の周りには使用しないでください。※男性は顔にはお使いいただけません。※鼻下をお手入れする際には唇に光が当たらないようにしてください。



●**ワキ用アタッチメント** ※BR1948/70のみ

お手入れしにくいワキの下の毛をケアするためのアタッチメントです。(専用のフィルターは付いていません)



●**ビキニエリア用アタッチメント** ※BR1948/70のみ

ビキニエリアをケアするためのアタッチメントです。ビキニエリアをケアするのに適したフィルターが付いています。

※ビキニエリアの毛は足の毛よりは濃くなりがちです。ビキニエリア用アタッチメントには、硬い毛を処理するのに適したフィルターが付いています。



●**ワキ、ビキニエリア用アタッチメント** ※BR1946/70のみ

ワキ、ビキニエリアをケアするためのアタッチメントです。ワキ、ビキニエリア両方のケアに適したデザインになっています。中型サイズの照射窓に透明のフィルターがついており、より効果的なケアを可能にします。

※ビキニエリアの毛は足の毛よりは濃くなりがちです。ビキニエリア用アタッチメントには、硬い毛を処理するのに適したフィルターが付いています。


肌色センサー

本製品は、ご使用前や使用中に肌色センサーで肌の色を測定します。
肌の色が本製品の使用に適さない場合は、READY (準備完了) ランプがオレンジ色に点滅し、照射ボタンを押しても光を照射できません。

出力レベルの設定

本製品は、照射レベルを5段階に設定できます。また、お手入れの途中で出力レベルを変更することもできます。

- 1 電源ボタンを押して電源をONにします。
※電源をONにした直後は、出力レベル1に設定されています。
※出力レベルは、手動で変更することもできます。手動で設定する場合は、スキンのテストの結果を参考に、適切なレベルを設定してください。

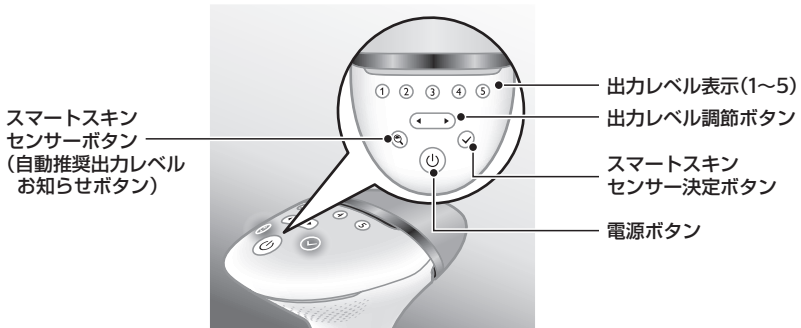

- 2 スマートスキンセンサーボタン(自動推奨出力レベルお知らせボタン)ボタンを押してから、本製品を肌に当てます。
- 3 肌の色を読み取ります。読み取りが完了すると、推奨する出力レベルのランプが白色に点滅します。

- 4 スマートスキンセンサー決定ボタンを押すと、推奨する出力レベルのランプが白色に点灯します。
※肌の色が本製品の使用に適さない場合(スキントイプVI)は、READY(準備完了)ランプがオレンジ色に点滅し、照射ボタンを押しても光を照射できません。
- 5 本製品を使用しても通常は痛みを感じることはありません。痛みなどの不快感がある場合は、出力レベルを下げてご使用ください。
- 6 他の部位へ移動した場合、あるいは、最近日に焼けた箇所へ移動した場合は、適切な出力レベルを選択するために、スキントテストを行ってください。
※お手入れする箇所により肌の色は異なります。それぞれの箇所に応じた出力レベルを設定してください。

肌色チャート

		肌色と特徴					
		ホワイト スキントイプI ／きわめて 明るい肌色 日光浴をすると 肌が赤くなるが 日焼けが 残らない	ページュ スキントイプII ／明るい肌色 日光で比較的 肌が赤く反応 しやすく、日焼け はわずかしか しい	ライト ブラウン スキントイプIII ／標準的な肌色 日光でまれに 赤くなること があるが、すぐ 落ち着いて 肌色が濃くなる	マイルド ブラウン スキントイプIV ／小麦色 日光にあたっ ても皮膚が赤く ならず、すぐに 肌色が濃くなる	ダーク ブラウン スキントイプV ／褐色 日光にあたっ ても皮膚が赤く ならず、よく日 焼けする・肌色 が濃くなる	黒色に近い ブラウン スキントイプVI 非常に 日焼けしやすい
体毛の色	濃い金色 / 明るい茶色 / 茶色 / 濃い茶色 / 黒	4 / 5	4 / 5	4 / 5	3 / 4	1 / 2 / 3	×
	白色 / 灰色 / 赤色 / 明るい金色	×	×	×	×	×	×

ご自身がこの製品の使用に適しているかどうか判断するため、P.8「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」をお読みください。特に自然光や人工的な方法で日焼けを行った方は、肌色が前回のお手入れのときよりも濃くなっている可能性があります。上記「肌色チャート」をお読みいただき、スキントテストを行ってから適切な出力レベルに設定してご使用ください。

※P.1で色をご確認ください。

※肌の状態は、環境などにより普段と異なる反応を示すことがあります。



注意

- 例外として使用できない箇所については、P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。
- お手入れの際、ひどく痛みが生じる場合は、痛みを感じないレベルまで出力レベルを下げてください。赤みや肌トラブルがひどくなった場合には、お手入れをすぐに中止し、P.21「肌トラブルについて」の項をお読みください。


使用方法

本製品は充電式ではないため、電源アダプタをつなげたままお使いください。

※ご使用後は都度コンセントから抜いてください。

- 1 ご使用前には毎回必ず、アタッチメントとUVフィルター付き照射ウィンドウを清潔にしてください。詳しい清掃のしかたは、P.22「製品のメンテナンス方法」の項をお読みください。
※長期間、本製品を使用しなかった場合は、お手入れの前にスキントストを行ってください。

- 2 電源アダプタの電源コネクタ部を本体の電源コネクタ受部に差し込み、電源アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。

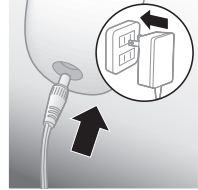

- 3 電源ボタンを押して、電源をONにします。

※使用中に製品が温かくなったり、換気ファンの音がしたりしますが、故障や異常ではありません。


※アタッチメントが正しく取り付けられていないと、出力レベル表示が全て点滅し照射することができません。

- 4 肌の色に合わせた適切な出力レベルを設定します。スマートスキンセンサー機能で、推奨する出力レベルを確認できます。詳しくは、P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。

※健康状態などにより肌の感じかたや反応のしかたが異なる場合があります。特に日焼けの後はご注意ください。詳しくは、P.21「肌トラブルについて」の項をお読みください。

- 5 製品を肌に直角になるように当て、アタッチメントおよびアタッチメントの「安全センサー」が肌に当たるようにします。

※安全センサーは、製品が肌に接触していない場合に、意図しない照射を防ぐためのものです。安全センサーが肌に正しく接触すると、READY（準備完了）ランプが白色に点灯します。

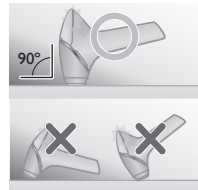

- 6 製品を肌にしっかり押し当てます。「READY（準備完了）ランプ」が白色に点灯したら、お手入れを開始できます。

※肌が特にやわらかい部位には、「安全センサー」がしっかりと当たるように、製品を押し当てます。


【READY（準備完了）ランプ】

本体の背部にあるREADY（準備完了）ランプが白色に点灯すると、製品が肌にきちんと当たっており、光を照射する準備が整ったサインです。

※READY（準備完了）ランプがオレンジ色に点滅した場合は、お手入れしようとしている箇所の肌の色が本製品を使用するのに適していません。

※READY（準備完了）ランプが白色に点灯しない場合は、製品がしっかりと肌に接触していません。製品を肌に直角になるように当ててください。

※ビキニエリア付近などでお手入れ箇所の近くに毛が残っている場合は、肌色センサーが毛の色を感知してしまうことがあります。剃り残しがないようお手入れする箇所の毛を十分に剃ってください。

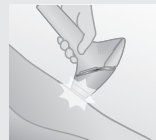

7 照射ボタンを押して光を照射します。照射された箇所は照射により温かく感じられます。

【連射モード】

「安全センサー」が肌に直角に当たっている状態で照射ボタンを押したままにすると、光は一定間隔で自動的に照射され続けます。1箇所に照射したら、次の箇所へとすべらせて移動させます。

※同じ箇所に続けて光を照射しないようご注意ください。
脚のような広い箇所をスピーディーにお手入れする場合など。



【1回ずつ照射する基本モード】

「安全センサー」を肌に当て、照射ボタンを1度押します。1箇所に照射したら、次の箇所に移動させ、再び照射ボタンを押します。 **ひざ、足首などの部位を正確にお手入れする場合など。**

※見えている光は、肌に反射したものですので目に害はありません。使用中にゴーグルなどをかける必要はありません。明るい部屋でご使用いただくとまぶしさは軽減されます。

※この製品にはオーバーヒートプロテクション(過度の温度上昇を防止する)機能がついているため、室内温度が40℃を超すと光を照射することができません。


※1回のお手入れで、同じ箇所を何度も照射しないでください。過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。



※鉛筆やペンで照射する箇所に印をつけないでください。肌トラブルの危険性が高まります。

【照射範囲】

お手入れしたい箇所が隙間なく照射されるよう、少しずつずらして照射してください。

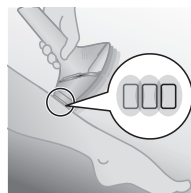※UVフィルター付き照射ウィンドウの「安全センサー」が当たっている部分は、光が照射されません。



-  …UVフィルター付き照射ウィンドウの「安全センサー」が当たる範囲
-  …光が照射される範囲(UVフィルター付き照射ウィンドウの面積)

8 お手入れが完了したら、電源ボタンを押して電源をOFFにします。

●自動電源オフ機能

本体の過度な温度上昇を防ぐため、電源をONにしたまま未使用状態で5分間継続すると、自動的に電源がOFFになります。

9 アタッチメントやUVフィルター付き照射ウィンドウがほこりや毛などで汚れていないことを確認します。


お手入れ後のケア

お手入れ後にほてりやかゆみを感じる場合、保冷剤や濡れタオルなどで肌を冷やしてください。また、肌の乾燥を感じる場合は保湿剤などで肌を保湿してください。

お手入れのための ガイドライン

定期的にお手入れすることでなめらかな肌を維持する効果があります。

お手入れの平均的な所要時間とお手入れ箇所に適したアタッチメント

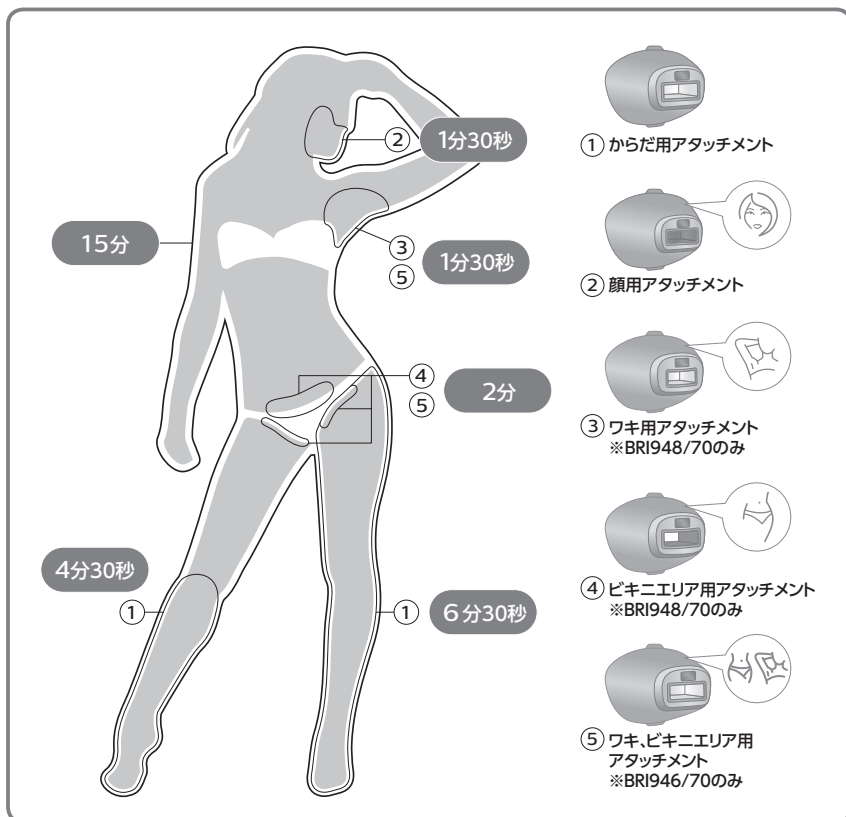

* 平均的な所要時間はからだ用アタッチメントを使用した場合ですが、ワキの下にはワキ用アタッチメント、ビキニエリアにはビキニエリア用アタッチメントをお勧めします。

※ 上記の所要時間はフィリップス社実施のテストにより計算された時間です。実際の処理時間には個人差があります。




注意

- 顔(鼻下、あご、もみあげ以外)、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、臍部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。
- その他の例外として使用できない箇所についてはP.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。

お手入れの頻度

●第1段階【初期(2週間ごと)】

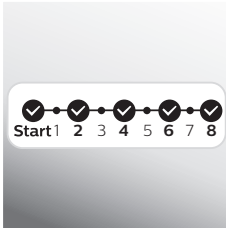


最初の4～5回のお手入れは、全体的にお手入れを十分に行うために2週間に1回のお手入れをお勧めします。

※お手入れした箇所を別の脱毛方法(ワックス脱毛など)に変更した場合は、本来のお手入れ効果を得られないことがあります。

※本製品でのお手入れ期間中に更に脱毛したい場合は、他の一般的な脱毛処理を行ってください。

●第2段階【お手入れ(4～8週間ごと)】

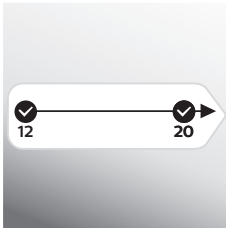

第1段階(最初の4～5回のお手入れ)のあとは、4～8週間に1回のお手入れをお勧めします。これは、お手入れ後の状態を維持するためのお手入れになります。毛の成長度合いやお手入れした箇所などによるため、最適なお手入れの間隔は人により異なります。



注意

本製品を1度使用し、お手入れをした後は、最低2週間は使用しないでください。過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。

※お手入れのスケジュールを忘れないように、日程表などにメモしておくことをお勧めします。

※お手入れの回数を増やしても、お手入れ効果を早めることはできません。

※効果は使用する部位や個人によって異なります。

※お手入れを中止するとムダ毛の量は徐々に元に戻ります。定期的にお手入れすることで、なめらかな肌を維持できます。

肌トラブルについて

- わずかな赤みが出たり、ちくちく、ひりひりしたり、または多少熱く感じるといったことがあります。通常はすぐにこれらの症状は消えて感じなくなります。
- やけどのような状態が少しの間あらわれることもあります。3日以内にこの症状がおさまらない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。
- 肌が乾燥したり、かゆみが出たりすることがありますが、これらの症状は除毛によるものと、光によるものとの組み合わせと考えられます。通常は数日でおさまりますが、かゆみに対しては肌を保冷剤や濡れタオルなどで冷やしてください。肌の乾燥が続く場合は保湿剤などで肌を保湿するなどしてください。

まれに起こる皮膚トラブル

やけど、皮膚の強い赤み、皮膚の腫れは、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。もしもこれらの症状が3日以内に消えない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

再び使用する場合は、完全に皮膚が健康な状態に戻ってから、弱い光で使い始めてください。

皮膚の変色：色素沈着（肌の色が濃くなる）または色素脱色（肌の色が薄くなる）は、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。

これらの症状があらわれた場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

皮膚感染および炎症：除毛の際などにできた傷のある箇所、元々傷があった箇所、埋没毛にこの製品を使用したことが原因で起こる可能性があります。

極度の痛み：お手入れ前に除毛をせずにこの製品を使用すると、強い痛みが生じる場合があります。また、ご自分の肌に適した出力レベルよりも高い設定でご使用になったり、同じ箇所に2回以上照射したり、傷や炎症、感染症、タトゥー（刺青）、やけどなどのある箇所に使用しても、強い痛みが生じる場合があります。より詳しい情報については、P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」、P.8「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。

お手入れ後の注意

- お手入れ直後の箇所に、香水や化粧品を塗布しないでください。
- ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しないでください。赤みが完全に引くまで使用をお控えください。
- 紫外線に当たる際の注意事項、また人工的な日焼けについては、P.11「日焼けについて」の項をお読みください。

本製品は水洗いできません。
水で濡らさないでください。

製品の メンテナンス方法


製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。



注意

- 本体の汚れは、付属の掃除用クロスや乾いた布で拭き取ってください。取れにくい汚れは水を含ませた掃除用クロスや布で拭き取り、その後水分を拭き取ってください。本体を水や液体に浸したり水洗いする事は故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- 電源アダプタは絶対に濡らさないでください。濡れてしまった場合は乾いた布で拭き取り、完全に乾いてから使用してください。
- UVフィルター付き照射ウィンドウやその内部の金属部分に、傷をつけないでください。
- 「安全センサー」に汚れなどをつまらせないでください。

- 1 電源をOFFにし、電源プラグを抜いて製品を冷まします。
※UVフィルター付き照射ウィンドウおよびアタッチメントは使用中熱くなります。清掃を行う前に必ず冷ましてください。

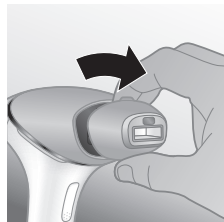


- 2 アタッチメントの上下の突起部分を指で押さえ、やさしく本体から取り外します。

- 3 付属の掃除用クロスを少量の水で湿らせ、下記の部品をきれいにします。

- ・UVフィルター付き照射ウィンドウ
- ・アタッチメントの外側
- ・アタッチメント内部の金属部分
- ・顔用、ワキ用、ビキニエリア用、ワキ、ビキニエリア用アタッチメント内部のフィルター部分
- ・肌色センサー

製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。

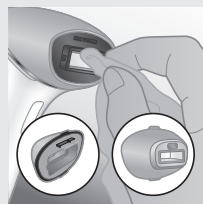

- 4 すべての部品を乾かします。

- 5 必要に応じて、本体外側を乾いた掃除用クロスできれいに拭いてください。

保管のしかた

- 1 電源をOFFにし、電源プラグを抜いて製品を冷まします。
- 2 製品を清掃します。
- 3 製品をポーチに収納します。
- 4 室温：5℃～35℃の範囲の場所で、ほこりや湿気を避けて保管します。



注意

ほこりをふせぐため、ポーチに入れて保管してください。

製品を 廃棄するとき

- 本製品を廃棄するときは、各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

故障かな?と思ったら、
まずは下記をご確認ください。

故障かな? と思ったら

アタッチメントを肌に当てても、白色のREADY(準備完了)ランプが点灯しない

▶アタッチメントの「安全センサー」がしっかりと肌に当たっていますか?

製品を肌に直角になるように当て、「安全センサー」がすべてしっかりと肌に接触していることを確かめてください。
READY(準備完了)ランプが点灯したら、照射ボタンを押します。

上記の方法でうまくいかない場合、例えばびじから下などの肌にびったりと製品を当てやすい箇所と同じ動作を行い確認します。

▶「安全センサー」が汚れていませんか?

「安全センサー」をきれいに清掃してください。

READY(準備完了)ランプがオレンジ色に点滅し、出力レベル1が点滅する

▶オーバーヒートプロテクション機能が起動しているおそれがあります。この症状が見られた場合は以下のことをお試しください。

- ① 製品の電源をいったんOFFにする。
- ② 電源アダプタをコンセントから抜く。
- ③ 5℃~35℃の環境へ製品を移動させる。
- ④ 電源アダプタを再びコンセントに差し込み、製品の電源をONにする。
- ⑤ 上記①~④を行っても問題が解決しない場合は、約30分待ってから再度電源をONにする。

5つの出力レベルランプがすべて点滅する

▶アタッチメントが正しく取り付けられていますか?

アタッチメントが正しく取り付けられているか確認してください。
アタッチメントのコネクタ部分を清掃してください。

からだ用アタッチメントにフィルターがない

▶問題ありません。

からだ用アタッチメントには、フィルターがありません。
顔用、ピキニエリア用アタッチメントのみ特別なフィルターが付いています。

READY(準備完了)ランプがオレンジ色に点滅し、照射ボタンを押しても光が照射できない

▶お手入れしようとしている箇所の肌の色が本製品を使用するのに適していません。

肌の色がうすい、他の箇所で使用してください。

READY(準備完了)ランプがオレンジ色に点滅し、すべての出力レベル表示が交互に点滅する

▶プログラムエラーのおそれがあります。

製品の電源をいったんOFFにし、30分程度製品を冷やしてから再度電源をONにしてリセットしてください。

使用中に製品本体が温くなる

- ▶使用中は、製品本体が温くなります。そのままご使用ください。
- ▶通風孔から風が出ていますか？
アタッチメントが正しく取り付けられているか確認してください。
電源アダプタおよび本体のアタッチメント接続端子を清潔にしてください。
アタッチメントが正しく接続されていて、照射できる場合は、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。
- ▶通風孔が手やタオルで塞がれていませんか？
手やタオルを通風孔から外してください。

使用中に安全センサーが熱くなる

- ▶肌に当たって安全センサーが熱いと感じる場合、いったん製品の電源をOFFにし、製品を冷ましてから使用してください。

製品からおかしな臭いがする

- ▶アタッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウが汚れていませんか？
アタッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウを清潔にしてください。
- ▶お手入れ箇所をしっかりと除毛していますか？
お手入れ箇所の毛を除毛せずにこの製品を使用すると、毛が焦げて臭いがすることがあります。製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。
- ▶製品をほこりの多い場所に保管していませんか？
臭いは数回照射するうちに消えてなくなります。

お手入れの最中に、いつもよりも肌が敏感に感じる

- ▶出力レベルが高すぎませんか？
ご自分にあった出力レベルを選んでいるか確認し、必要があれば出力レベルを低くしてください。
P.15「出力レベルの設定」の項をお読みください。
- ▶お手入れ箇所の除毛をしていますか？
製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。
- ▶UVフィルター付き照射ウィンドウのUVフィルターが壊れていませんか？
UVフィルターが壊れている場合は、製品を使用しないでください。フィルターは交換できないため、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。
- ▶この製品を使用してはいけない箇所に使用していませんか？
顔（鼻下、あご、もみあげ以外）、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、臍部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。

お手入れの後に、皮膚に赤みが出る

- ▶少しの赤みは正常な反応で、通常すぐにおさまります。

いつもよりも、お手入れ後の肌の反応が長く続く

▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？

P15「出力レベルの設定」の項をお読みいただき、適切なレベルを設定してください。肌の反応が3日以上続く場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

この製品を使用して、ひどい痛みを感じた

▶お手入れ箇所の除毛を適切に行っていますか？

この製品を使用する前に除毛処理を行ってください。肌が敏感で除毛によって肌があれてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットし、また出力レベルを低く設定してお使いください。

▶この製品を使用してはいけな箇所を使用していませんか？

顔(鼻下、あご、もみあげ以外)、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、陰部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。

▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？

出力レベルをご自分に適した設定へ下げてください。P15「出力レベルの設定」の項をお読みください。

▶UVフィルター付き照射ウィンドウ、または赤みがかかったガラス部分が壊れていませんか？

UVフィルター付き照射ウィンドウやガラスが壊れている場合は、製品を使用しないでください。フィルターは交換できないため、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。

▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか？

生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

お手入れ効果が自分の満足するレベルではない

▶ご自分に合った出力レベルよりも低い設定で使用していませんか？

P15の「出力レベルの設定」の項をよく読み、出力レベルを適正にセットしてください。

▶お手入れ箇所にまんべんなく光を照射しましたか？

P18「使用方法」の項のステップ7をお読みください。

▶推奨される使用方法に従っていますか？(お手入れと次のお手入れの間隔があきすぎていませんか？)

最初の4~5回は、2週間ごとのお手入れをお勧めしています。その後は、4~8週間ごとにお手入れを続けてください。最適なお手入れの頻度は、個人の体質や、また身体の部位によっても差があります。お手入れの効果が感じられない場合はお手入れの頻度を上げることをお勧めします。

▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか？

生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

お手入れ箇所で、ところどころにまた毛が生えてきた

▶お手入れ箇所にまんべんなく光を照射しましたか？

P18「使用方法」の項のステップ7をお読みください。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせ願います。

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、電源アダプタ(アタッチメント、掃除用クロス、ポーチを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証およびアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国外のフィリップスサービス部門においても保証期間内および保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用のとき、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感ずる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

愛情点検

仕 様

品 名	一般家庭用光美容器 フィリップス ルメア プレステージ
品 番	BRI946/70, BRI948/70
電源アダプタ品番	AD2069320020HF
電 源 方 式	交流式(専用電源アダプタ使用)
消 費 電 力	65W
定 格 電 圧	AC100-240V (50/60Hz)
本 体 質 量	約495g(からだ用アタッチメント装着時・電源アダプタ含まず)

※改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

お問い合わせ

<p>フィリップスサポートセンター 〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9</p>	<p>0120-944-859</p>
<p>受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)</p>	

株式会社 フィリップス・ジャパン

ホームページアドレス
<http://www.philips.co.jp/>

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル



無料修理規定

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
 - 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、製品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
 - 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- ※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/>に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

一般家庭用光美容器 フィリップス ルメア プレステージ 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	一般家庭用光美容器 フィリップス ルメア プレステージ
品番	BRI946/70, BRI948/70
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、電源アダプタ(アタッチメント、掃除用クロス、ポーチを除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒108-8507 東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター 0120-944-859

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

support-da@philips.com

受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.100.8106.1(02/19)

©2019 Philips Japan, Ltd.