




Navodilo za
hitro
uporabo

PHILIPS
sense **and** simplicity




2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane

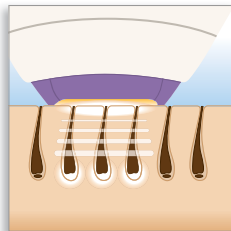

Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Odstranjevanje dlak z uporabo svetlobe je eden izmed najbolj učinkovitih načinov za odstranjevanje neželenih dlak z dalj časa trajajočimi rezultati. Sedaj lahko uporabljate to inovativno tehnologijo udobno v zasebnosti svojega doma, kadarkoli in kjerkoli želite. Philips Lumea Precision omogoča odstranjevanje neželenih dlak na celotnem telesu, vključno z obrazom (zgornja ustnica, brada in zalizci), z dvema prilagojenima nastavkoma.

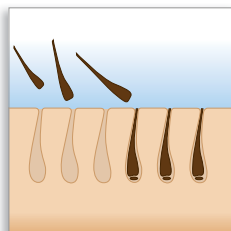

Philips Lumea Precision sistem odstranjevanja dlak uporablja nežne impulze svetlobe, s katerimi segreva dlake ter njihove korenine pod kožo. Rezultat je: dlake naravno odpadejo v dveh tednih, ponovna rasta dlak pa je onemogočena.

Za več informacij o Philips Lumea Precision IPL odstranjevalcu dlak ali registraciji aparata si oglejte spletno stran www.philips.com/lumea.

Pred uporabo



- Pazite!**
Aparat ni primeren za vsakogar. To Navodilo za hitro uporabo ni nadomestilo za Navodilo za uporabo. Da se prepričate ali je Philips Lumea Precision odstranjevalec dlak primeren za vas, in varen za vašo uporabo, *pred prvo uporabo skrbno preberite navodilo za uporabo.*
- Tabela priporočljivih jakosti svetlobe**
Na naslednji strani pregledajte tabelo in določite katera jakost je primerna za vašo kožo in barvo dlak ter preverite, če je ta metoda primerna za vas. Metoda je bolj učinkovita pri višjih jakostih; kljub temu morate zmanjšati jakost svetlobe, če začutite kakršnokoli bolečino ali nelagodje. Svetlobne impulze na koži lahko občutite kot toploto ali vročino, nikoli pa ne kot bolečino.
- V navodilu za uporabo skrbno preberite poglavje 'Kontraindikacije'; določena zdravila ali zdravstvena stanja lahko povzročijo zaradi uporabe aparata neželene učinke.**



Opomba - Vse vrste porjavitve lahko imajo vpliv na varnost obdelave. Po sončenju počakajte najmanj 48 ur, preden uporabite aparat. Aparata Philips Lumea Precision ne uporabljajte na opečenih delih kože. Za dodatne informacije glejte poglavje 'Napotki za porjavenje' v navodilu za uporabo.



Tabela priporočljivih jakosti svetlobe

		Barva kože					
		bela	bež	rahlo rjava	srednje rjava	temno rjava	črnorjava in temna
Barva dlak	×	Ta aparat ni primeren in ni varen za vašo kožo in/ali barvo dlak					
	bela/siva	×	×	×	×	×	×
	rdeča	×	×	×	×	×	×
	svetlo blond	×	×	×	×	×	×
	temno blond / svetlo rjava	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
	rjava	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
	temno rjava	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
	črna	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×

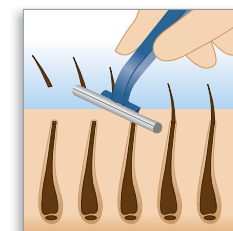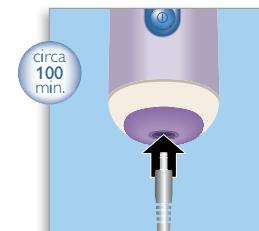



Priprava za uporabo

- Aparat napolnite.
- Obrijte predele, ki jih boste obdelovali.
- Naredite test kože: Izberite predel v bližini predela, ki ga nameravate obdelovati. Uporabite en blisk (glejte korake 4 - 7 spodaj) na najnižji priporočeni jakosti za vaš tip kože. Jakost povečajte za ena v priporočenem območju nastavitve. Po kožnem testu počakajte 24 ur in preverite reakcijo vaše kože. Če vaša koža pokaže reakcije, za nadaljnjo uporabo izberite najvišjo jakost, ki še ni povzročila kožne reakcije.

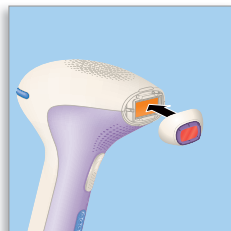
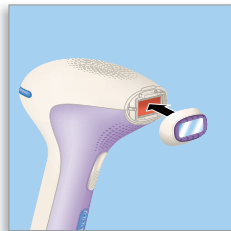


Uporaba



- 1 Preverite, če so nastavki in izhodno okence svetlobe čisti, brez ostankov umazanije, dlak ali vlaken. Če obstaja umazanija, jo očistite s priloženo krpo.
- 2 Izberite ustrezen nastavek.
 - > **Telesni nastavek**
Telesni nastavek lahko uporabljate za obdelavo neželenih dlak na vseh delih telesa pod vratom (za izjeme glejte poglavje "Pomembno", oddelek "Kontraindikacije" v navodilu za uporabo). Telesnega nastavka ne uporabljajte na obrazu.
 - > **Precizni nastavek**
Precizni nastavek vključuje dodatno vgrajen svetlobni filter in se lahko uporablja za izredno varno obdelavo neželenih obraznih dlak na zgornji ustnici, bradi in zalizcih. Lahko se uporablja tudi na drugih občutljivih delih telesa, kot so pazduhe in bikini predel in težko dostopnih območjih.

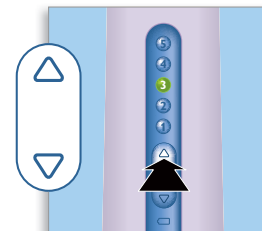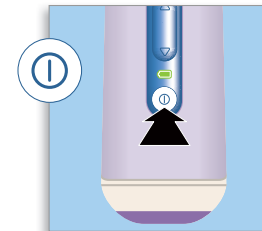


- 3 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop / izklop.
- 4 Za spremembo jakosti (od 1 do 5) pritisnite gumb za povečanje / zmanjšanje jakosti.

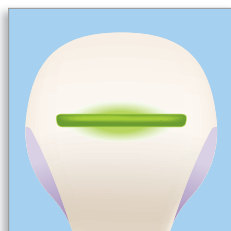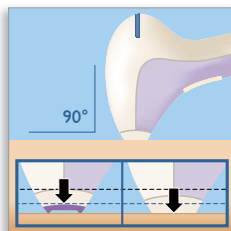

- 5 Aparat postavite pod kotom 90 ° na kožo, tako da sta nastavek in varnostni obroč v stiku s kožo.
- 6 Varnostni obroč z rahlim pritiskom pritisnite popolnoma na kožo. Ko so vsa varnostna stikala v stiku s kožo, indikator 'pripravljen za blisk' na zadnji strani aparata zasveti zeleno.

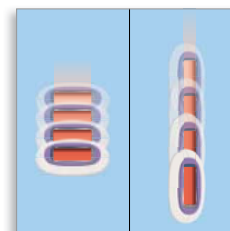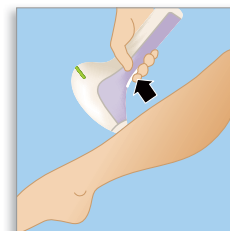


- 7 Pritisnite gumb za sprostitve bliskavice. Ko aparat zabliška gumb spustite. Za naslednji blisk ponovite korake 5, 6, 7. Med eno obdelavo ne obdelujte večkrat istega predela. Pred vsakim bliskom morate aparat dvigniti od kože.
- 8 Da bi se izognili neobdelanim predelom, vedno poskrbite, da rahlo prekrijete predhodno obdelane predele, ko postavite aparat na kožo.
- 9 Aparat izklopite, potem ko ste končali obdelavo.
- 10 Preverite, če so na izhodnem okencu svetlobe in nastavku ostanki dlak in umazanije. Aparat očistite pred shranitvijo v vrečko. Po potrebi navlažite krpo z vodo ali viskoprocentnim čistilnim alkoholom (za dodatne informacije glejte poglavje "Čiščenje in vzdrževanje" v navodilu za uporabo).

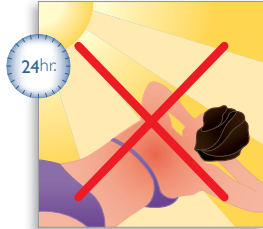


Po obdelavi

Po obdelavi se vsaj 24 ur ali dokler rdečica ne izgine obdelanih področij ne izpostavljajte soncu. Obdelane površine pred izpostavitvijo sončni svetlobi vsaj 2 tedna po obdelavi zaščitite z zaščitno kremo (SPF 30 +).

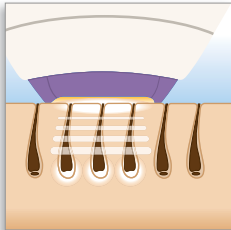


Kako doseči optimalne rezultate

Če želite odstraniti vse dlake in uspešno preprečiti ponovno aktivnost lasnega mešička, je obdelavo treba ponoviti, in sicer je obdelavo treba ponoviti enkrat na dva tedna v prvih dveh mesecih (pogostejše obdelave ne pomenijo hitrejših ali boljših rezultatov).

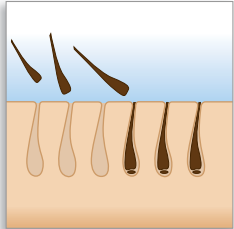

Da bi zagotovili, da ostane vaša koža gladka, vam svetujemo, da obdelavo ponovite na vsakih 4-6 tednov. Čas med obdelavami se lahko spreminja glede na vašo individualno ponovno rast dlak in tudi različnih delov telesa. Če med obdelavami preveč dlak ponovno zraste, preprosto skrajšajte interval ponovne obdelave.

Za učinkovito obdelavo pred uporabo aparata obrijte površine, ki jih boste obdelovali, vsaj toliko časa, dokler zaznavate ponovno rast dlak, kar je primer prvih nekaj obdelav.

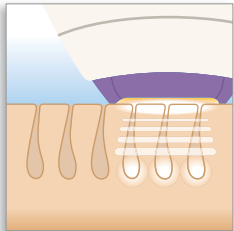


Povprečen čas obdelave ter priporočeni nastavek za področje telesa

Področje	Povprečen čas obdelave	Priporočljiv nastavek
Zgornje ustnice/brada/zalisci	1 minuta	Precizni nastavek
Pazduha	1,5 minut za pazduho	Telesni/precizni nastavek
Bikini rob	1,5 minut na stran	Telesni/precizni nastavek
Celotno bikini področje	5 minut	Telesni/precizni nastavek
Spodnji del ene noge	12 minut	Telesni nastavek
Ena cela noga	20 minut	Telesni nastavek

Vsak dan spremljajte vaše korake do gladke kože

Obdelava št.	Datum	Področje obdelave	Datum naslednje obdelave	Nastavitve	Opomba



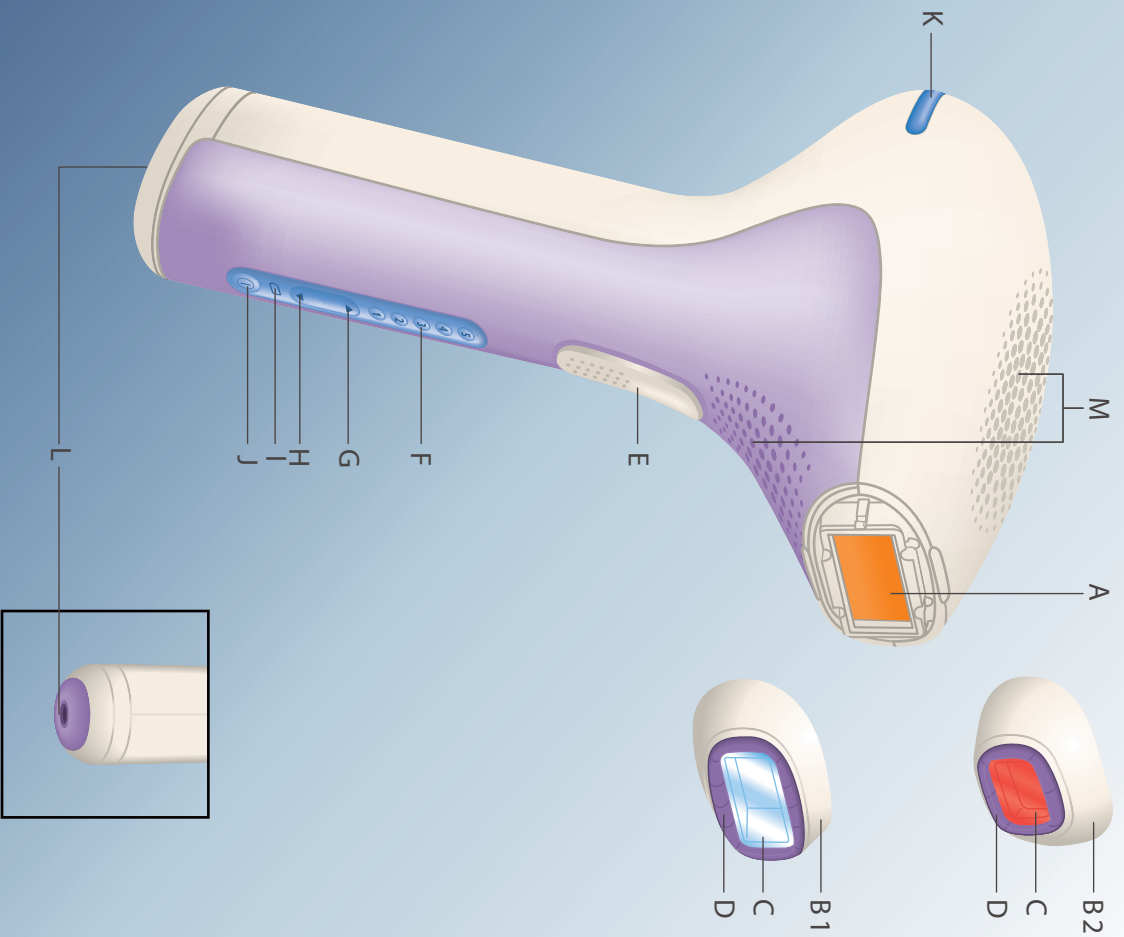

Šplošen opis

- A** Izhodno okence za svetlobo z vgrajenim UV filtrom
- B** Nastavki
 - 1 - Telesni nastavek (primeren za vse dele telesa pod vratom)
 - 2 - Precizni nastavek (z dodatnim svetlobnim filtrom; za uporabo od vratu navzgor ter ostala občutljiva področja)
- C** Kovinski okvir znotraj nastavka
- D** Varnostni sistem (varnostni obroč s kontaktnimi stikali)
- E** Tipka za bližanje
- F** Intenzivnost: luči (1 - 5)
- G** ▲ gumb za povečanje intenzivnosti
- H** ▼ gumb za zmanjšanje intenzivnosti
- I** Indikator polnjenja baterije ter nizkega stanja baterije
- J** Tipka za vklop / izklop
- K** Indikator "Pripravljen za blisk"
- L** Majhen vrtičnica
- M** Prezračevalne šobe