

Expectativas

Ventajas

Prevención eficaz del crecimiento del vello para una suavidad duradera
SatinLux aplica sutiles pulsaciones de luz sobre la raíz del vello, por lo que se inhibe su crecimiento desapareciendo de forma natural. Nuestros estudios han comprobado resultados significantes después de dos tratamientos. Resultados óptimos han sido logrado después de 4-5 tratamientos. Se aprecia una menor densidad del vello con cada tratamiento. La rapidez con que se aprecian resultados visibles y la duración entre cada depilación varía de una persona a otra. Repita este tratamiento cada dos semanas para lograr resultados óptimos y mantener su piel siempre suave. Para que el tratamiento sea eficaz, afeite la zona a tratar antes de usar el aparato cuando el vello empiece a crecer; lo que normalmente sucede después de los primeros tratamientos.

Tecnología IPL profesional para uso en casa

SatinLux usa la tecnología "Luz pulsada intensa" (Intense Pulsed Light, IPL), que también se aplica en los tratamientos de belleza profesionales para la eliminación del vello, y de la que podrá beneficiarse ahora en la comodidad de casa.

Tratamiento delicado, incluso en zonas sensibles

SatinLux se ha desarrollado en estrecha colaboración con importantes dermatólogos para conseguir un tratamiento eficaz y delicado, incluso en las zonas más sensibles del cuerpo. SatinLux está diseñado para eliminar el vello corporal de las mujeres, no el facial, en las siguientes zonas: axilas, línea del bikini y piernas.

Funcionamiento sin cables para una máxima libertad y flexibilidad

El aparato funciona con pilas recargables, por lo que lo podrá llevar a todas partes y usarlo en cualquier lugar.

2

| GRAPHIC DEVELOPMENT • DAP • | | | |
|---|---|----------|---------------|
| Product name | Enterprise | | |
| Project name | SC2000_QSG_ES_Pages | | |
| Project no. | 204421 | | |
| Orderbriefing | 2494409 | | |
| 12-NC.NBR | 4203 000 6127.1 | | |
| Masterdrawing | N/A | | |
| Barcode No. | N/A | | |
| Size | 0% | BWR | 0.00 Type N/A |
| Operator(s) | FH | | |
| VERSION No. | 4.0 | | |
| Date in | 19-08-2008 | Date out | 26-08-2008 |
| Date amended | 26-08-2008 | | |
| Cyan | Magenta | Yellow | Black |
| Diecut | | | |
| Date Check | | | |
| <input type="checkbox"/> Check briefing Traffic | | | |
| Artwork document | | | |
| <input type="checkbox"/> DAP blok | <input type="checkbox"/> Number of colors | | |
| <input type="checkbox"/> 12NC | <input type="checkbox"/> Trapping/Bleed | | |
| <input type="checkbox"/> Barcode | <input type="checkbox"/> Images hires | | |
| <input type="checkbox"/> Cutterguide | <input type="checkbox"/> Jobsizes | | |
| Deliverables | | | |
| <input type="checkbox"/> DCS | <input type="checkbox"/> Sherpa | | |
| <input type="checkbox"/> PDF | <input type="checkbox"/> CD/DVD/RTP | | |
| Approval | | | |
| <input type="checkbox"/> QC Lithographer | Rob Boekelaar | | |
| <input type="checkbox"/> Product Manager | Felix Warstat | | |
| <input type="checkbox"/> Traffic Manager | Lynne Bousie | | |

Preparación para el tratamiento

Consulta la tabla en la pagina 1 para determinar qué intensidad de luz es más apropiada para el color de su vello y piel, y comprobar si este método es adecuado para usted (si no lo es, está indicado con una x en la tabla).

Cargue la batería

Cargue completamente las pilas antes de usar el aparato por primera vez y siempre que se agoten. La luz de carga parpadea en verde para indicar que el aparato se está cargando y permanece fija cuando la batería está completamente cargada. Cuando sea necesario cargar la batería, la luz de carga se ilumina en naranja.



Prepare la piel

Para unos resultados óptimos y una máxima eficacia, prepare las zonas que va a tratar afeitándolas, bien con un método húmedo o bien con un método seco, si el vello sigue creciendo. Limpie la piel y asegúrese de que elimina cualquier resto de grasa, aceite y productos cosméticos.



Ajuste la intensidad de la luz

Tiene que ajustar la intensidad de la luz al color de su vello y piel hasta un nivel que le resulte tolerable. Consulta la tabla en la pagina 1 para determinar qué intensidad de luz es más apropiada para el color de su vello y piel. Ajuste la intensidad de la luz al nivel recomendado. Para obtener los mejores resultados, utilice la mayor intensidad que pueda tolerar dentro del rango recomendado.

3

Cómo utilizar SatinLux

Paso 1

Lea el capítulo "Importante" del manual del usuario antes de comenzar a utilizar el aparato. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato.



Paso 2

Pulse el botón de aumento/disminución de la intensidad hacia arriba o hacia abajo para cambiar la intensidad (de 1 a 5). La luz de intensidad correspondiente empieza a parpadear.



Paso 3

Antes de usar el aparato por primera vez, pruébelo, por ejemplo, en la cadera para acostumbrarse al método de emisión de pulsos de luz. Coloque el aparato en perpendicular sobre la piel, de forma que la ventanilla extraíble y el anillo de seguridad estén en contacto con la piel.



Paso 4

Presione el anillo de seguridad ligeramente para que entre en contacto con la piel. Cuando todos los puntos de contacto se retraen en el interior del aparato por la presión ejercida en el anillo de seguridad, se enciende la luz de "listo para emisión de pulsos" de la parte posterior del aparato.





Paso 5

Pulse el botón de emisión de pulsos de luz para generar un pulso. Cuando el aparato haya emitido un pulso de luz, suelte el botón. Para el siguiente pulso, repita los pasos 3, 4 y 5.



Paso 6

Para que no quede ninguna zona sin tratar, asegúrese siempre de abarcar parte de la zona anteriormente tratada cuando vuelva a colocar el aparato en la piel.

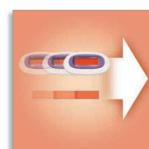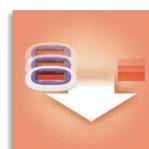

Paso 7

Apague el aparato cuando termine el tratamiento.



5