




Tarjeta de consulta rápida de Lumea Prestige de Philips





Prepare su piel

A Elimine el vello y limpie la piel

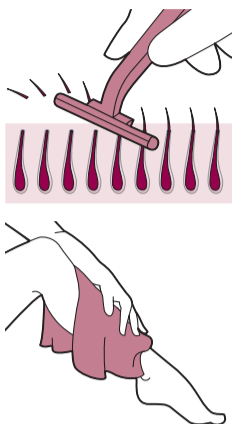

- 1. Elimine todo el vello** visible antes de aplicar cada tratamiento. Puede afeitarse, depilarse o usar cera. Si decide depilarse con cera, espere 24 horas antes de usar Lumea Prestige.
- 2. Limpie y seque su piel.** Asegúrese de que no contenga sustancias grasosas.

B Haga una prueba en la piel 24 horas antes de aplicar el tratamiento




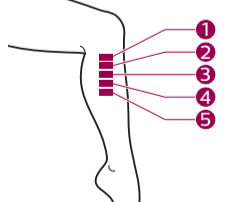
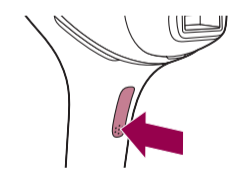
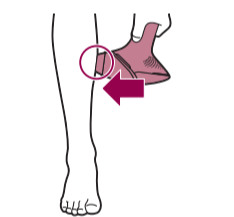
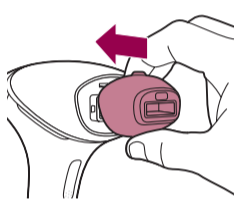


- 1. Haga una prueba en su piel** para encontrar la configuración correcta de la luz:
 - Para cada nueva área del cuerpo.
 - Después de un bronceado reciente.
- Seleccione el accesorio correcto para hacer una prueba en su piel. **Hay una para el cuerpo (debajo de la línea del cuello), las axilas y el área del bikini.** Los accesorios incluidos pueden variar según los diferentes productos.
- Presione el botón de encendido/apagado** para encender el dispositivo.
- Elija un área** de su piel para hacer la prueba.
- Presione el dispositivo **firmemente** sobre su piel y **manténgalo en su lugar**.
- Confirme que se encienda **la luz blanca** de 'READY' para asegurarse de que hay un contacto total con su piel.
 - Si la luz de 'READY' se ilumina en color **naranja**, su piel es demasiado oscura para el tratamiento. Pruebe Lumea en una zona más clara de su piel.
- Trate cada configuración en su piel si la siente cómoda:
 - Cuando la luz del indicador 'Ready to flash' sea blanca, presione el botón de pulso de luz en la manija **una vez** para tratar una parte con esa configuración ①
 - **Verá un haz luminoso** •
 - Pase a la siguiente área. Trate una parte con **la configuración** ②
 - Pase a la siguiente área. Trate una parte con **la configuración** ③
 - Pase a la siguiente área. Trate una parte con **la configuración** ④
 - Pase a la siguiente área. Trate una parte con **la configuración** ⑤
- Espera 24 horas.**
- Revise su piel. La configuración más alta que...
 - aún se sienta cómoda y
 - no cause reacciones en la piel**... es la preparación con la que debe iniciar el tratamiento.**

Aplique tratamiento a su piel







C Tratamiento

IMPORTANTE: Primero termine las secciones A (Elimine el vello y limpie su piel) y B (Haga una prueba en su piel 24 horas antes del tratamiento).

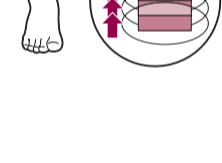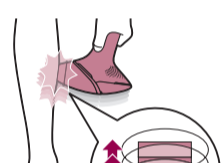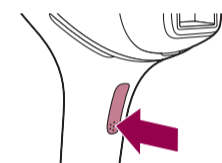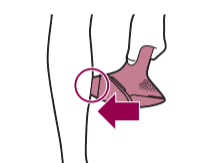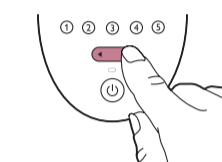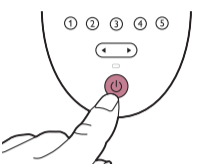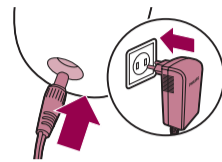

- Conecte el adaptador de energía al dispositivo y enchúfelo a un tomacorriente o cargue el dispositivo y úselo en forma inalámbrica.
- Presione el botón de encendido/apagado para encender el dispositivo.
- Elija la configuración que seleccionó después de la prueba en la piel (sección B, paso 9).
- Presione el dispositivo **firmemente** sobre su piel y manténgalo en su lugar. La luz de 'READY' debe encenderse en **blanco**.
- Presione el botón de destello** para liberar un haz de luz sobre su piel. El haz de luz trata la piel en ese punto.
- Mueva el dispositivo al siguiente punto, cerca del anterior, pero sin superponerse en ninguna parte ya tratada.
- Continúe hasta que haya tratado toda el área.
- Apague el dispositivo cuando termine el tratamiento.
- Elimine todo el vello visible antes de cada tratamiento.**

D Limpie y guarde el dispositivo después del tratamiento

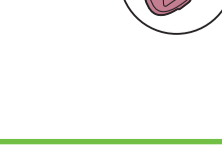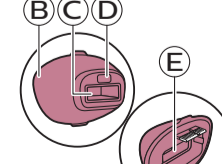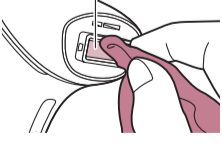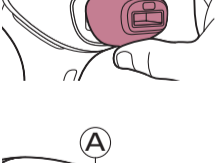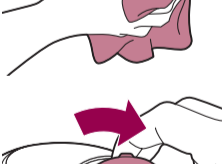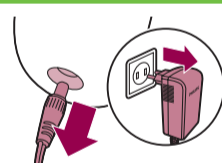

- Desconecte el dispositivo del enchufe de la pared si lo usó con el adaptador de corriente.
- Deje que el dispositivo **se enfríe**.
- Humedezca el paño suave incluido con unas gotas de agua.
- Extraiga el accesorio del dispositivo.
- Limpie la ventanilla de salida de luz del dispositivo (A).**
- Limpie todas las superficies** del accesorio (piezas B, C, D, E), **incluido el reflector de metal (C)** y el filtro transparente del accesorio para el área del bikini (E).
- Deje que las piezas se sequen totalmente.
- Guarde el dispositivo en un lugar sin polvo a temperatura ambiente.




Nota: Este cartão de referência rápida não substitui o manual do usuário. Leia atentamente o manual do usuário antes de usar o Lumea Prestige.

Cartão de referência rápida do Philips Lumea Prestige

Prepare a sua pele

A Remova os pelos e limpe a pele

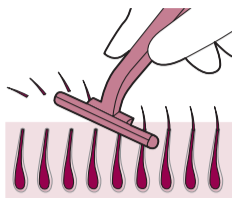

1. Remova o pelo antes de cada tratamento, desde que ele ainda esteja visível. Você pode raspar, depilar ou arrancar com cera. Caso você escolha a depilação com cera, aguarde 24 horas antes de usar o Lumea Prestige.



2. Limpe e seque bem a pele. Não deve haver substâncias oleosas.


B Teste pele 24 horas antes do tratamento

1 2 3 4 5




1. Teste cutâneo para encontrar o ajuste correto da luz:

- Para cada nova área do corpo.
- Após um bronzamento recente.

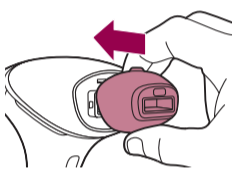


2. Selecione o acessório correto para testar sua pele. Há um para o corpo (abaixo da linha do pescoço), axilas e virilha. Os acessórios fornecidos podem variar para produtos diferentes.

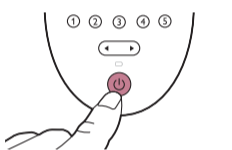

3. Pressione o botão liga/desliga para ligar o dispositivo.




4. Escolha uma área para fazer o teste de pele.

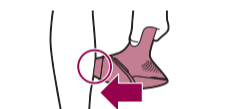


5. Pressione o aparelho com firmeza sobre a pele e segure-o no lugar.



6. Confirme se a luz "PRONTO" está acesa na cor **branca** para garantir que haja contato total com a pele.
- Se a luz "PRONTO" estiver **laranja**, isso significa que sua pele é muito escura para ser tratada. Tente usar o Lumea em uma área mais clara do corpo.

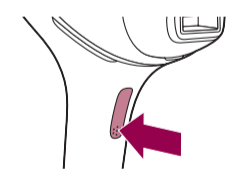


7. Experimente se todos os ajustes ficam confortáveis na sua pele:
- Quando a luz "PRONTO" estiver branca, pressione **uma vez** o botão de emissão de pulso no cabo para tratar o local com o ajuste ①

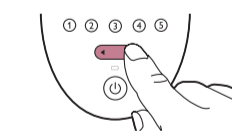

• Você verá um flash de luz •

- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ②
- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ③
- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ④
- Passe para a próxima área. Trate um local com ajuste ⑤

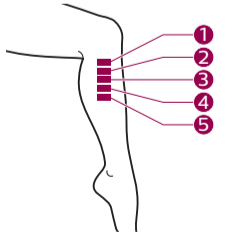

8. Aguarde 24 horas.




9. Verifique sua pele. A configuração mais alta que...
- ainda foi confortável e
- não gerou reação cutânea
... é o ajuste com o qual você deve iniciar o tratamento.


Trate sua pele

C Tratamento


IMPORTANTE: Primeiro termine a seção A (remover os pelos e limpar sua pele) e a seção B (teste cutâneo 24 horas antes do tratamento).

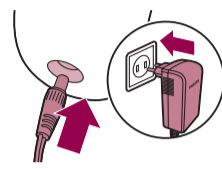


1. Conecte o adaptador de energia ao dispositivo e ligue a uma tomada de energia ou carregue o aparelho e use-o sem fio.

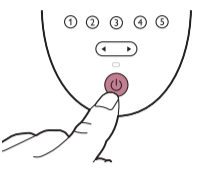


2. Pressione o botão liga/desliga para ligar o dispositivo.

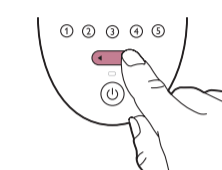


3. Escolha o ajuste selecionado após o teste cutâneo (seção B, etapa 9).

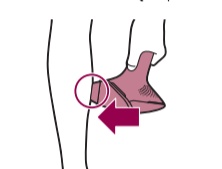


4. Pressione o aparelho com firmeza sobre a pele e segure-o no lugar. A luz "PRONTO" deve se acender na cor **branca**.

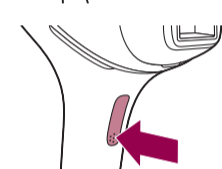

5. Pressione o botão de emissão de pulso para fazer a aplicação na sua pele. O pulso de luz trata a pele nesse ponto.

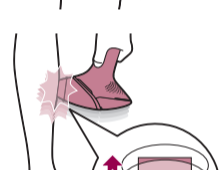

6. Mova o dispositivo para o próximo ponto, mas sem sobrepor o ponto anterior.

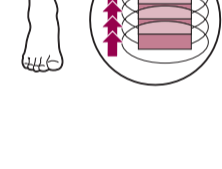


7. Continue até fazer o tratamento na área total.

8. Desligue o dispositivo ao terminar o tratamento.

9. Remova os pelos antes do próximo tratamento, desde que ainda estejam visíveis.

D Limpeza e armazenamento após o tratamento

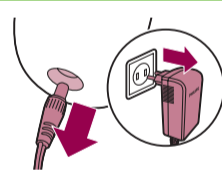


1. Desconecte o dispositivo da tomada caso você o tenha usado com o adaptador de energia.


2. Deixe o dispositivo esfriar.




3. Umedeça o pano macio fornecido com algumas gotas d'água.

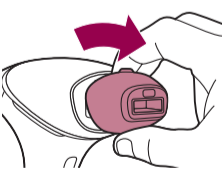

4. Retire o acessório para desligar o dispositivo.

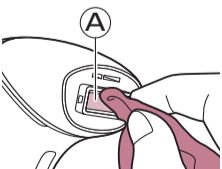

5. Limpe a janela de saída de luz do dispositivo (A).

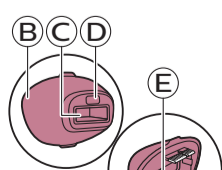

6. Limpe todas as superfícies do acessório (partes B, C, D, E), incluindo o refletor de metal (C) e o filtro transparente do acessório para a virilha (E).

7. Deixe todas as peças secarem por completo.

8. Guarde em um lugar livre de poeira em temperatura ambiente.