



4203 000 6147.1



Quick Start Guide

PHILIPS
sense and simplicity

Parabéns pela compra deste produto e bem-vindo à Philips!

Pode agora utilizar a inovadora tecnologia de depilação a luz confortavelmente e na privacidade da sua casa, sempre que quiser.

Descubra mais acerca da SatinLux ou registe o seu produto em www.philips.com/satinlux

GRAPHICDEVELOPMENT-DAP


Product name [Enterprise](#)
Project name [SC2000_QSG_PT_Cover](#)
Project no. [204411](#)
Orderbriefing [2494571](#)
12-NC.NBR [4203 000 6147.1](#)
Masterdrawing [N/A](#)

Barcode No. [N/A](#)
Size [0%](#) BWR [0.00](#) Type [N/A](#)

Operator(s) [MM](#)

VERSION No. **5.0**

Date in [27-08-2008](#) Date out [27-08-2008](#)
Date amended [27-08-2008](#)

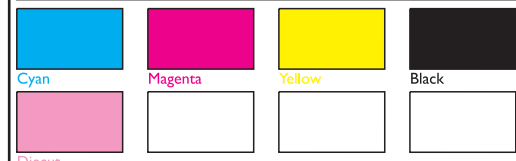

Diecut

Date Check

Check briefing Traffic

Artwork document

DAP blok Number of colors
 12NC Trapping/Bleed
 Barcode Images hires
 Cutterguide Jobsizes

Deliverables

DCS Sherpa
 PDF CD/DVD/RTP

Approval

QC Lithographer [Rob Boekelaar](#)
 Product Manager [Felix Warstat](#)
 Traffic Manager [Lynne Bousie](#)

Para uma óptima experiência, registe o seu produto em www.philips.com/SatinLux ou ligue 00800-5-A-TI-N-L-U-X (72846589) para suporte

Descrição do produto

- A. Janela de saída da luz com vidro de filtro
- B. Janela removível
- C. Sistema de segurança (anel de segurança com interruptores de contacto)
- D. Botão de luz pulsada
- E. Luzes de intensidade (1-5)
- F. ▲ Botão de aumento de intensidade
- G. ▼ Botão de redução de intensidade
- H. Luz indicadora de carga e de bateria fraca
- I. Botão de ligar/desligar
- J. Luz 'Pronto para pulsar'
- K. Tomada do aparelho



Tipos de pêlo e pele adequados


Consulte a tabela em baixo para determinar que intensidades de luz são mais adequadas ao seu tom de pele e de pêlo e para verificar se este método é indicado para si (se não for, é indicado com um x na tabela).

Cor do pêlo	Tons e características da pele				
	Claro (pele muito clara, olhos azuis, cabelo castanho claro)	Claro (pele clara, olhos azuis, cabelo castanho claro)	Claro médio (pele clara, olhos azuis, cabelo castanho claro)	Claro escuro (pele clara, olhos azuis, cabelo castanho escuro)	Escuro (pele clara, olhos azuis, cabelo castanho escuro)
Branco/claro	x	x	x	x	x
Ruivo	x	x	x	x	x
Loiro claro	x	x	x	x	x
Loiro	x	x	x	x	x
Loiro escuro	x	x	x	x	x
Castanho	x	x	x	x	x
Castanho escuro	x	x	x	x	x
Preto	x	x	x	x	x

Como obter os melhores resultados

Para evitar o novo crescimento dos pêlos, tem de repetir o tratamento a cada 2 semanas. Recomendamos que respeite esta frequência. Não são de prever melhores resultados se aumentar ou reduzir a frequência do tratamento.

Depois dos pêlos deixarem de crescer - o que normalmente acontece após alguns tratamentos - não terá de voltar a utilizar a depilação com corte antes de utilizar o aparelho.

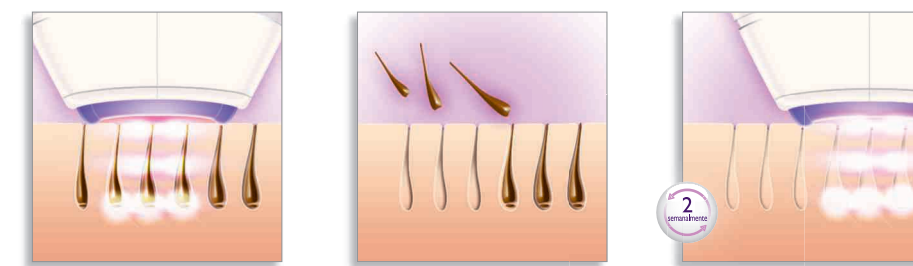

Número de impulsos recomendados e tempo de tratamento

Zona	Número de impulsos aproximado	Tempo de tratamento aproximado
Axilas	25 por axila	3 minutos por axila
Linha do biquini	25 cada lado	3 minutos por lado
Toda a zona do biquini	90 para toda a zona	10 minutos
Uma perna abaixo do joelho	160 - 190	15 minutos
Uma perna inteira	320 - 380	30 minutos

Nota

Uma bateria totalmente carregada oferece, no mínimo, 160 impulsos com uma intensidade de 5, o que representa um tempo de funcionamento sem fios de cerca de 15 minutos.

Para garantir os melhores resultados e uma vida útil duradoura do aparelho, limpe o aparelho após cada tratamento; consulte o capítulo 'Limpeza e manutenção' no manual do utilizador.

O que esperar

Vantagens

Prevenção eficaz do crescimento do pêlo para uma suavidade duradoura

A SatinLux aplica suaves impulsos de luz na raiz do pêlo. Como consequência, o pêlo desfaz-se naturalmente e o crescimento é inibido. Os nossos estudos demonstraram uma redução significativa dos pêlos logo ao fim de dois tratamentos. A máxima redução dos pêlos foi alcançada ao fim de quatro-cinco tratamentos. É visível uma redução da densidade do pêlo de tratamento para tratamento. A rapidez com que o efeito se torna visível e a duração dos resultados varia de pessoa para pessoa. Repita este tratamento de duas em duas semanas para obter ótimos resultados e para manter a sua pele suave para sempre. Para um tratamento mais eficaz, pré-depile a zona da aplicação logo que sentir algum crescimento (só nos primeiros tratamentos).

Tecnologia IPL profissional para utilização em casa

A SatinLux funciona com uma tecnologia à base de luz chamada "Intense Pulsed Light" (IPL, Luz Pulsada Intensa). A IPL também é utilizada nos salões de beleza para a remoção dos pêlos. A SatinLux traz esta tecnologia inovadora para o conforto da sua casa.

Tratamento suave, mesmo em zonas do corpo sensíveis

A SatinLux foi desenvolvida em estreita colaboração com os melhores dermatologistas para um tratamento eficaz e suave, mesmo nas zonas do corpo mais sensíveis. Este aparelho destina-se apenas à remoção de pêlos corporais femininos em zonas abaixo do pescoço: axilas, linha do biquíni e pernas.

Funcionamento sem fios para máxima liberdade e flexibilidade

Uma vez que o aparelho funciona com baterias recarregáveis, é portátil e pode ser utilizado em qualquer lugar.

2

GRAPHIC DEVELOPMENT • DAP •			
Product name	Enterprise		
Project name	SC2000_QSG_PT_Pages		
Project no.	204411		
Orderbriefing	2494409		
12-NC.NBR	4203 000 6147.1		
Masterdrawing	N/A		
Barcode No.	N/A		
Size	0%	BWR 0.00	Type N/A
Operator(s)	FH		
VERSION No.	4.0		
Date in	19-08-2008	Date out	26-08-2008
Date amended	26-08-2008		
Cyan	Magenta	Yellow	Black
Diecut			
Date Check			
<input type="checkbox"/> Check briefing Traffic			
Artwork document			
<input type="checkbox"/> DAP blok	<input type="checkbox"/> Number of colors		
<input type="checkbox"/> 12NC	<input type="checkbox"/> Trapping/Bleed		
<input type="checkbox"/> Barcode	<input type="checkbox"/> Images hires		
<input type="checkbox"/> Cutterguide	<input type="checkbox"/> Jobsizes		
Deliverables			
<input type="checkbox"/> DCS	<input type="checkbox"/> Sherpa		
<input type="checkbox"/> PDF	<input type="checkbox"/> CD/DVD/RTP		
Approval			
<input type="checkbox"/> QC Lithographer	Rob Boekelaar		
<input type="checkbox"/> Product Manager	Felix Warstat		
<input type="checkbox"/> Traffic Manager	Lynne Bousie		

Preparação para o tratamento

Consulte a tabela na primeira página para determinar que intensidades de luz são mais adequadas ao seu tom de pele e de pêlo e para verificar se este método é aplicável para si (se não for, é indicado com um x na tabela).


Carregue a bateria

Carregue totalmente a bateria antes de utilizar o aparelho pela primeira vez e quando a bateria estiver gasta. A luz de carga fica verde intermitente e acende-se a verde fixo quando a bateria está completamente carregada. Quando a bateria tiver de ser recarregada, a luz de carga acende-se a laranja.



Prepare a sua pele

Para obter os melhores resultados, depile as zonas que pretende tratar com a lâmina antes de cada tratamento, utilizando um método molhado ou a seco. Limpe a pele e certifique-se de que está completamente seca e sem resíduos de gordura, óleo ou cosméticos.

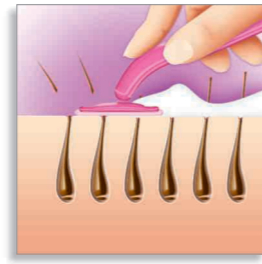

Regular a intensidade da luz

Tem de ajustar a intensidade da luz ao tom da sua pele e dos seus pêlos e a um nível que se sinta confortável. Consulte a tabela na primeira página para determinar que intensidades de luz são mais adequadas ao seu tom de pele e de pêlo. Regule a intensidade da luz para o nível recomendado. Para alcançar os melhores resultados, tente utilizar a intensidade mais alta dentro do intervalo recomendado e com a qual se sinta confortável.

3

Como utilizar a SatinLux

Passo 1

Leia o capítulo 'Importante' no manual do utilizador antes de começar a utilizar o aparelho. Prima o botão ligar/desligar para ligar o aparelho.



Passo 2

Prima o botão de aumentar/reduzir intensidade para cima ou para baixo para alterar a intensidade (de 1 a 5). A luz da intensidade correspondente começa a piscar.



Passo 3

Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, experimente-o, por exemplo, na coxa para se acostumar ao método da luz. Coloque o aparelho numa posição perpendicular em relação à pele, de modo a que a janela amovível e o anel de segurança fiquem em contacto com a pele.



Passo 4

Prima o anel de segurança totalmente na pele com uma ligeira pressão. Quando todos os interruptores de contactos do anel de segurança forem pressionados no aparelho, a luz 'pronto à pulsar' na parte posterior do aparelho acende-se.





Passo 5

Prima o botão de impulso para libertar um impulso. Depois do aparelho ter pulsado uma vez, solte o botão de impulso. Para o impulso seguinte, repita os passos 3, 4 e 5.



Passo 6

Para evitar zonas não tratadas, certifique-se de que existe alguma sobreposição da zona tratada previamente ao colocar o aparelho na pele.

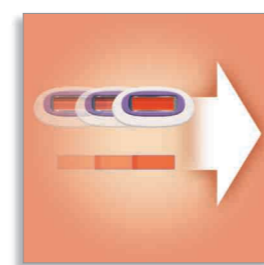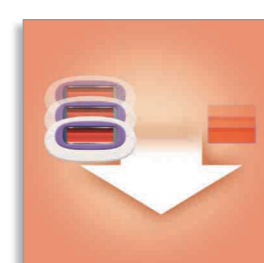

Passo 7

Desligue o aparelho depois de ter concluído o tratamento.



5