

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome





www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

0000.0000.00.00

PHILIPS

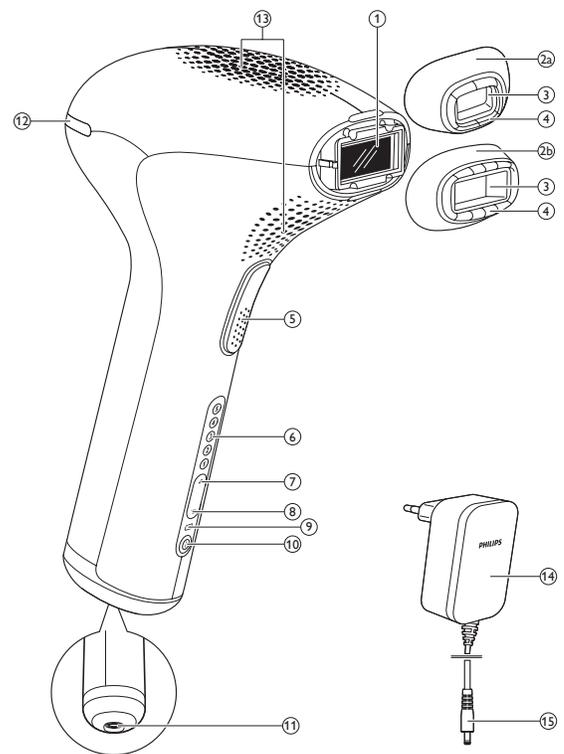

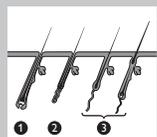

1 Фаза на растежа (анагенна фаза)

Косъмът расте активно от корена нагоре. През тази фаза концентрацията на меланин е най-висока. На меланина се дължи пигментацията на косъма. Концентрацията на меланин е и определящият фактор за ефикасността на този метод. Третирането със светлина въздейства само на косми във фазата на растеж.

2 Фаза на разрушаване (катагенна фаза)

Растежът на косъма спира и коренът изсъхва, след което косъмът пада.

3 Фаза на покой (телогенна фаза)

Старите косми се отделят от космения фоликул и опадват. Фоликулът остава в покой, докато биологичният часовник не му "каже" да се активира отново и от него да порасне нов косъм.

Принцип на работа

- Уредът работи чрез нагряване на косъма и корена под кожата. Меланинът в косъма и корена на косъма абсорбира излъчените светлинни импулси. Колкото по-тъмен е косъмът, толкова повече светлина се абсорбира. Този процес стимулира косъма да премине във фазата на покой.

- Между третиранията космите падат естествено и повторното им изравняване се потиска. Космите може да паднат след една или две седмици.

- Оптималното премахване на окосмяването не може да се постигне с един сеанс, понеже на третиране със светлина се поддават само космите във фаза на растеж. По време на процедурата космите в третираната зона обикновено са в различни фази на растеж. За ефикасно третиране на всички косми трябва да повторите процедурата няколко пъти през две седмици.

Вграденният оптичен филтър гарантира, че до кожата няма да стигне ултравиолетова светлина и че уредът е безопасен за кожата.

Общо описание (фиг. 5)

- 1 Прозорец за светлинния лъч с вграден ултравиолетов филтър
- 2 Приспособления
- 3 Приставка за прецизно третиране (подходяща за всички части на тялото, включително горната устна, брадичката и бакенбардите)
- 4 Приставка за тяло (подходяща за всички части на тялото от врата надолу)
- 3 Метална рамка в приставката
- 4 Система за безопасност (предпазен пръстен с контактни превключватели)
- 5 Бутон за импулс
- 6 Индикатори за интензивност (1-5)
- 7 ▲ Бутон за увеличаване на интензивността
- 8 ▼ Бутон за намаляване на интензивността

Съдържание

Въведение

- Предимства
 - Професионална IPL технология за домашна употреба
 - Ефикасно предотвратяване на повторното израстване на косми за гладка кожа всеки ден
 - Безболезнено третиране, дори в чувствителните зони на тялото

Работа без кабели, позволяваща максимална свобода и гъвкавост

Дълготрайна батерия за третиране на цялото тяло и лице

Няма нужда от резервни части, няма скрити разходи

Как работи технологията за интензивна импулсна светлина на Philips

Растеж на космите

Принцип на работа

Общо описание

Важно

Опасност

Предупреждение

За да избегнете повреда

Внимание

Имайте предвид следното, за да не съкратите живота на

вашия уред Philips Lumea Precision Plus:

За кого HE е подходящ уредът Philips Lumea Precision Plus?

Противопоказания

Никога не използвайте уреда при бременност или кърмене.

Никога не използвайте уреда, ако имате неподходяща кожа и/или

цвет на окосмяването, напр:

Никога не използвайте уреда, ако страдате от някое от

заболяванията, изредени по-долу:

Никога не използвайте уреда, ако приемате някой от

медикаментите, изредени по-долу:

Никога не използвайте уреда в следните области:

Никога не използвайте уреда върху изгоряла от слънцето кожа,

кожа с получен наскоро тен (последните 48 часа) или кожа с

изкуствен тен:

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Зареждане

Подготовка за употреба

Подготовка на областите за третиране

Регулиране на интензивността на светлината

Препоръчителна интензивност на светлината (1-5)

Важно

Съвети за придобиване на тен

Използване на уреда

Избиране на правилната приставка

Първо използване и тест на кожата

Следващо използване

Указания за третирането

Средна продължителност на процедурата

Области, които смятате да третирате

Използване на уреда върху краката

Използване на уреда върху бикини линията
Използване на уреда върху подмишниците
Използване на уреда върху лицето (горната устна, брадичката, бакенбардите)
Как да постигнете оптимални резултати
Фаза на поддържане
Възможни странични ефекти и кожни реакции
След употреба

Почистяване и поддръжка
Съхранение
Поръчване на аксесоари
Резервни части
Опазване на околната среда
Изваждане на акумулаторните батерии
Гаранция и сервизно обслужване
Технически данни
Отстраняване на неизправности

Въведение

Поздравления за вашата покупка и добре дошли във Philips! За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на адрес www.philips.bg. Отстраняването на окосмяване със светлина е един от най-ефективните методи за третиране на нежеланото телесно окосмяване, при това с дълготраен резултат. То се различава от досегашните начини за отстраняване на окосмяване в домашни условия, тъй като съществено намалява повторното израстване на космите. Philips изследва този метод с помощта на водещи дерматолози в продължение на повече от 10 години. Сега вече можете да използвате тази иновативна технология далече от чужди очи, удобно у дома си, когато и където пожелаете. Този уред е разработен и оптимизиран за използване от жени, но може да се използва и от мъже. Philips Lumea Precision Plus позволява третиране на нежеланото окосмяване по цялото тяло, включително лицето (горната устна, брадичката и бакенбардите), като се използват две специални приставки. Уредът Philips Lumea Precision Plus е предназначен за използване само от един човек. За повече информация относно Philips Lumea Precision Plus, вижте www.philips.bg. Проверявайте редовно нашата начална страница за актуализации.

Предимства

Уредът предлага следните предимства:

Професионална IPL технология за домашна употреба

Philips Lumea Precision Plus използва технология със светлина, наречена "интензивна импулсна светлина" (IPL). IPL се използва от професионалните козметични за премахване на окосмяване през последните 15 години. Philips Lumea Precision Plus ви предоставя тази

иновативна технология за безопасно и ефективно използване в уюта на собствения ви дом.

Ефикасно предотвратяване на повторното израстване на косми за гладка кожа всеки ден

Този метод предотвратява повторното израстване на косми и осигурява копринено гладка кожа за дълъг период от време. Нашите изследвания показват значително намаляване на космите още след две процедури. Оптимални резултати обикновено се постигат след четири до пет процедури. При това след всяка следваща процедура се забелязва намаление в гъстотата на окосмяването. След колко време ще се забележи този ефект и за колко време ще се запазят резултатите - това зависи от човека. За повече информация вижте раздел "Как да постигнете оптимални резултати" в глава "Използване на уреда".

Безболезнено третиране, дори в чувствителните зони на тялото

Philips Lumea Precision Plus е създаден в тясно сътрудничество с водещи дерматолози и е тестван от 2000 жени за ефикасно и деликатно третиране дори на най-чувствителните места на тялото и лицето.

Работа без кабели, позволяваща максимална свобода и гъвкавост

Понеже работи с акумулаторни батерии, уредът е преносим и може да се използва навсякъде.

Дълготрайна батерия за третиране на цялото тяло и лице

Напълно заредената батерия осигурява третиране на цялото тяло и лице (горната устна, подмишниците, бикини линията и подбедриците) наведнъж, без прекъсвания за зареждане.*

*На базата на средните времена за третиране за всяка област препоръчителната интензивност за един потребител.

Няма нужда от резервни части, няма скрити разходи

Уредът Philips Lumea Precision Plus е снабден с мощна лампа, която не изисква смяна. Тази лампа може да генерира над 100 000 импулса и би трябвало да ви позволи да поддържате постоянно резултатите за повече от 5 години**, като същевременно спестите разходите за скъпи лампи за смяна.

**На базата на средните времена за третиране за всяка област препоръчителната интензивност за един потребител.

Как работи технологията за интензивна импулсна светлина на Philips

Растеж на космите

Скоростта на израстване на космите е различна при различните хора в зависимост от възрастта, метаболизма и други фактори. Космите на всеки обаче обикновено растат на 3 фази.

Никога не използвайте уреда в следните области:

- Около очите или в близост до веждите.
- Зърната на гърдите, ареолите, срамните устни, влагалището, ануса и във вътрешността на ноздрите и ушите.
- Мъжете не трябва да го използват върху скротума и лицето.
- Върху или в близост до всичко с изкуствен произход, като силиконови импланти, пейсмейкъри, отвори за подкожни вливания (при инсулиновите помпи) или пийрсинг.
- Върху области с бенки, лунички, изпъкнали вени, по-тъмна пигментация, белези и кожни аномалии, преди да се консултирате с лекар. Това може да доведе до изгаряне и промяна на цвета на кожата, което потенциално затруднява установяването на заболявания, свързани с кожата (например рак на кожата).
- Върху брадавици, татуировки или перманентен грим. Това може да доведе до изгаряне и промяна на цвета на кожата (хипопигментация или хиперпигментация).
- В области, където използвате дезодоранти с дълготраен ефект. Това може да доведе до кожни реакции. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции".

Никога не използвайте уреда върху изгоряла от слънцето кожа, кожа с получен наскоро тен (последните 48 часа) или кожа с изкуствен тен:

- Всички типове тен могат да повлияят на безопасността на третирането. Това важи както за излагането на слънце, така и за методите за придобиване на изкуствен тен, като лосиони за тен, уреди за тен и т.н. Ако имате или планирате да придобиете тен, вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Съвети за придобиване на тен".

Забележка: Този списък не е изчерпателен. Ако не сте сигурни дали можете да използвате уреда, ви съветваме да се консултирате с лекар.

Електромагнитни излъчвания (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти по отношение на електромагнитните излъчвания (EMF). Ако се употребява правилно и съобразно напътствията в Ръководството, уредът е безопасен за използване според наличните досега научни факти.

Зареждане

Заредете напълно батериите, преди да използвате уреда за пръв път и когато батериите са изтощени. Пълното зареждане на батериите отнема до 1 час и 40 минути. Заредете уреда, когато индикаторът за зареждане започне да свети в оранжево по време на работа, което показва, че батерията е изтощена и скоро зарядът ѝ ще свърши. Напълно заредените батерии позволяват поне 370 импулса с интензивност на светлината 5. Заредяйте уреда докрай на всеки 3-4 месеца, дори когато не сте го използвали продължително време.

Заредете уреда по следния начин:

- 9 Индикатор за зареждане и индикация за изтощена батерия
 - 10 Бутон за вкл./изкл.
 - 11 Гнездо за захранване
 - 12 Индикатор "Готовност за импулс"
 - 13 Вентилационни отвори
 - 14 Адаптер
 - 15 Малък жак
- Приложени: калъф (SC2003/00) или торбичка (SC2003/11) и кърпичка за почистване.

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за потребителя и го запазете за справка в бъдеще.

Опасност

- Водата и електричеството са опасна комбинация. Не използвайте този уред във влажна среда (напр. до пълна вана, до пуснат душ или пълен плувен басейн).
- Пазете уреда и адаптера от влага.
- Ако уредът е счупен, не докосвайте вътрешните части, за да избегнете токов удар.
- Никога не пхайте никакви предмети в уреда.

Предупреждение

- Този уред не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически възприятия или умствени недъзи, ако са оставени без наблюдение и не са инструктирани от страна на отговарящо за тяхната безопасност лице относно начина на използване на уреда.
- Наглеждайте децата, за да не си играят с уреда.
- Уредът не е предназначен за деца под 15 години. Тийнейджърите между 15 и 18 години могат да използват уреда със съгласието или съдействието на родителите си или хората, които имат родителски права над тях. Възрастни на 19 и повече години могат да използват уреда без ограничения.
- Заредяйте уреда само с приложения към него адаптер.
- Не използвайте уреда или адаптера, ако са повредени.
- В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг шепсел, тъй като това е опасно.
- С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- Не използвайте уреда, ако ултравиолетовият филтър на прозореца за светлинния лъч е счупен.
- Не използвайте приставката за прецизно третиране, ако червеникавото ѝ стъкло е счупено.

За да избегнете повреда

- Уверете се, че нищо не пречи на въздушния поток през процеците за вентилация.

- Никога не подлагайте уреда на силни сътресения, не го друсайте и не го изпускате.
- Ако внесете уреда от много студено в много топло помещение или обратно, изчакайте около 3 часа, преди да го използвате.
- Съхранявайте уреда в калъфа или торбичката, за да не се цапа.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен. Винаги изключвайте уреда след употреба.
- Не излагайте уреда на пряка слънчева или ултравиолетова светлина в продължение на часове.
- Не насочвайте импулси към друга повърхност освен кожата. Това може да доведе до сериозна повреда на приставките и/или прозорца за светлинния лъч. Насочвайте импулси само когато уредът е в контакт с кожата.

Внимание

- Никога не използвайте уреда около очите или в близост до веждите, за да избегнете опасност от увреждане на очите.
- Използвайте този уред само при настройки, подходящи за вашия тип кожа. Използването на по-високи настройки от препоръчаните може да увеличи риска от кожни реакции и странични ефекти.
- Този уред е предназначен само за отстраняване на нежеланото телесно окосмяване на места от скулите надолу с двете предоставени приставки. Не го използвайте за никакви други цели.

Имайте предвид следното, за да не съкратите живота на вашия уред Philips Lumea Precision Plus:

- По време на работа не излагайте уреда на температури, по-ниски от 15°C или по-високи от 35°C.
- Уредът е оборудван с вградена защита срещу прегряване. Ако уредът прегрее, той престава да излъчва импулси. Не изключвайте уреда, а го оставете да се охлади за около 15 минути, преди да продължите да работите с него.
- За проверка или ремонт носете уреда само в упълномощен от Philips сервиз. Ремонт, извършен от неквалифицирани лица, може да доведе до изключително опасни за потребителя ситуации.
- Никога не използвайте уреда в някой от случаите, изброени в раздел "Противопоказания".

За кого НЕ е подходящ уредът Philips Lumea Precision Plus?
Philips Lumea Precision Plus не е създаден за всеки. Ако за вас важи някое от следните, тогава **не** е подходящо да използвате уреда!

Противопоказания

Никога не използвайте уреда при бременност или кърмене.

Никога не използвайте уреда, ако имате неподходяща кожа и/или цвят на окосмяването, напр:

- Ако естественият цвят на окосмяването в областта на третиране е светлорус, бял, сив или червен.
- Ако типът на кожата ви е VI (вие рядко или никога не изгаряте на слънце и почервявате много; цветът на кожата ви е чернокафяв или по-тъмен). В този случай има голям риск от кожни реакции, като промяна на цвета, силно зачервяване или изгаряния,

когато използвате Philips Lumea Precision Plus. Вижте също глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции".

Никога не използвайте уреда, ако страдате от някое от заболяванията, изброени по-долу:

- Ако имате кожно заболяване, като активен рак на кожата, ако имате предистория на кожен рак или друг вид рак, локализиран в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако имате увреждания с показания за рак или голям брой атипични брадавици в зони, които предстои да бъдат третирани.
- Ако имате предистория на колагенни смущения, в това число образувания от келоидни белези или проблеми със заздравяването на рани.
- Ако имате предистория на съдови смущения, като разширени вени или съдова екстазия в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако кожата ви е чувствителна към светлина, която лесно предизвиква обрив или алергична реакция.
- Ако имате инфекции, екзема, изгаряния, възпаление на фоликулите на космите, открити рани, охлузвания, обичновен херпес, рани или увреждания и хематоми в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако сте претърпели операция в зоните, които предстои да бъдат третирани.
- Ако имате епилепсия, която се предизвиква от чувствителност към мигаща светлина.
- Ако страдате от диабет, лупус еритематодес (или вълчанка), порфирия или конгестивно сърдечно заболяване.
- Ако имате някаква кръвене.
- Ако имате предистория на имunosупресивно заболяване (вкл. серопозитивна инфекция или СПИН).

Никога не използвайте уреда, ако приемате някой от медикаментите, изброени по-долу:

- Ако кожата ви в момента се третира или неотдавна е била третирана с алфа хидрокси киселини (AHA), бета хидрокси киселини (BHA), локален изотретиноин и азелаинова киселина.
- Ако сте приемали под някаква форма изотретиноин (Accutane® или Roaccutane®) през последните шест месеца. Това лечение може да направи кожата по-склонна към напухване, рани и възпаления.
- Ако приемате болкоуспокояващи, които притъпяват чувствителността на кожата към топлина.
- Ако приемате светлосензитивни агенти или медикаменти, проверете предписанията към лекарството и никога не използвайте уреда, ако е указано, че той може да предизвика фотоалергични реакции, фототоксични реакции или ако след приемане на това лекарство се изисква да избягвате излагането на слънчева светлина.
- Ако приемате антикоагуланти, вкл. значителни дози аспирин, в дозировка, която не позволява изчезване на ефекта от приемането им за поне една седмица преди всяка процедура.
- Ако приемате имunosупресивни медикаменти.

- че повече няма никакви признаци за зачервяване на кожата от третирането, преди да я изложите на слънце.
- Покривайте третираните области, когато излезете на слънце, или използвайте слънцезащитен крем (SPF 30+) две седмици след третирането.
 - Излагането на третираните области на слънце без защита непосредствено след третирането може да увеличи риска от вредни странични ефекти и кожни реакции. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции".

Придобиване на тен с изкуствена светлина

- Следвайте инструкциите в "Излагане на слънце преди третиране" и "Излагане на слънце след третиране" по-горе.

Придобиване на тен с кремове

- Ако сте използвали лосион за изкуствен тен, изчакайте изкуственият тен да изчезне напълно, преди да използвате Philips Lumea Precision Plus.

Забележка: За повече информация за нежеланите кожни реакции вижте глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции".

Използване на уреда

Прегледайте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава "Подготовка за употреба", раздел "Регулиране на интензивността на светлината", за да определите каква интензивност на светлината е най-подходяща за вашата кожа и цвят на окосмяване. Използвайте уреда в **добре осветено** помещение; това намалява възприеманата яркост на импулса. Избърснете мястото, което искате да третирате, преди да използвате уреда (вж. глава "Подготовка за употреба", раздел "Подготовка на областите за третиране").


Ако в даден момент третирането стане нетърпимо болезнено, намаляете настройката за интензивност на светлината, докато отново се почувствате комфортно. Ако забележите по-силни кожни реакции от леко зачервяване, веднага спрете третирането и прочетете раздела "Възможни странични ефекти и кожни реакции" в тази глава.

Избиране на правилната приставка

- Приставка за тяло

Приставката за тяло може да се използва за третиране на нежеланото телесно окосмяване по всички части на тялото от врата надолу (за изключенията вж. глава "Важно", раздел "Противопоказания"). Приставката за тяло може да обхване зона от 4 cm² и е създадена специално за по-бързо третиране на по-големи области, като например краката.

Не използвайте приставката за тяло върху лицето си.

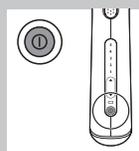

1 Изключете уреда.



2 Включете малкия жак в уреда и включете адаптера в контакта. Индикаторът за зареждане мига в зелено, което показва, че уредът се зарежда.

Когато батериите са напълно заредени, индикаторът за зареждане светва постоянно в зелено.

Забележки:

- Адаптерът и уредът са топли по време на зареждане. Това е нормално.
- Не можете да използвате уреда по време на зареждане.
- Този уред е оборудван със защита срещу прегряване и не се зарежда, ако температурата в помещението е над 40°C.

Никога не покривайте уреда и адаптера по време на зареждане.

3 След зареждане изключете адаптера от контакта и извадете малкия жак от уреда.

Подготовка за употреба

За оптимални резултати и най-висока ефикасност, подгответе зоните, върху които ще използвате уреда, както е описано по-долу.


Подготовка на областите за третиране

1 Избърснете местата, които смятате да третирате, ако по тях продължават да нискат коси.

Забележка: Ако последният ви метод за депилация е включвал премахване на космите от корен (напр. епилиране, кола маска и др.), изчакайте, докато космите пораснат значително, преди да използвате Philips Lumea Precision Plus. Не използвайте гелиаторен крем вместо бръснене.

Имайте предвид, че третирането на неизбърснати или неправилно избърснати области има редица нежелани ефекти:

- Прозорецът за светлинния лъч и приставката може да се замърсят с косъмчета и прах. Замърсените прозорец и приставка може да намалят живота и ефективността на уреда. Освен това, прегарянията или черните петна, които се появяват на прозореца за светлинния лъч и приставките поради замърсявания, може да направят третирането болезнено или да доведат до кожни реакции например зачервяване и промяна на цвета.
- Космите по кожата ви може да изгорят, което ще доведе до неприятна миризма.

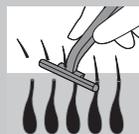

2 Почистете кожата и се уверете, че тя е без косми, напълно суха и без мазни вещества (напр. в резултат от употребата на козметични продукти, като дезодоранти, лосиони, парфюми, кремове за изкуствен тен и слънцезащитни кремове).

3 Проверете уреда, особено прозорца за светлинния лъч и приставката, за захванати косми, прах и влакна. Ако видите някакво замърсяване, почистете уреда съобразно инструкциите в глава "Почистване и поддръжка".

Забележки:

- Ако избърсването причини рани или лезии, това може да направи кожата ви по-чувствителна и третирането със светлина може да понякога да причини лек дискомфорт.
- След като космите престанат да израстват отново, което обикновено се случва след 4-5 процедури, повече няма да се налага да се бръснете, преди да използвате уреда.

Регулиране на интензивността на светлината

Philips Lumea Precision Plus е уред, разработен за използване в домашни условия, и следователно не може да се сравнява с професионалните уреди със светлина по отношение на усещането за болка. Светлинните импулси на Philips Lumea Precision Plus са по щадящи от тези на професионалните уреди, затова можете да очаквате **удобно и ефикасно** третиране.

Трябва сами да регулирате интензивността на светлината в съответствие с типа на вашата кожа и цвета на окосмяването до ниво, което не ви причинява неудобства.

Таблицата по-долу с препоръчителните нива на интензивност на светлината ще ви помогне да определите правилна интензивност

1 Вижте таблицата по-долу, за да определите каква интензивност на светлината е най-подходяща за вашата кожа и цвят на окосмяване и за да проверите дали този метод е подходящ за вас (ако не е, това е обозначено в таблицата със знака "x").

2 Всяка област от тялото, а понякога дори различните части от една област на тялото, може да изискват отделна, подходяща за тях интензивност на светлината, съобразно таблицата по-долу. Методът е по-ефективен при по-висока интензивност на светлината, но трябва да я намалите, ако изпитвате болка или дискомфорт.

Забележка: Различните области от тялото може да изискват различна интензивност на светлината, поради различния цвят на кожата. Може например кожата на подбедриците да е по-тъмна от кожата на подмишниците, ако е излагана повече на слънце.

При хората с по-тъмна кожа рискът от кожно възпаление е по-висок, тъй като тяхната кожа абсорбира повече светлина. Затова за хора с по-тъмна кожа се препоръчват по-ниски нива на интензивността.

Светлинният импулс може да предизвика усещане за топлина или горещина по кожата, но никога не трябва да е болезнен. За да се предотвратят кожни реакции, вижте глава "Използване на уреда", раздел "Възможни странични ефекти и кожни реакции".

Препоръчителна интензивност на светлината (1-5)

В таблицата по-долу "x" означава, че уредът не е подходящ за вас.

Цвят на кожата и характеристики:	Бяла (винаги изгаря от слънцето, без да получи загар)	Бежова (лесно изгаря от слънцето, минимален загар)	Светло-кафява (появява се изгаряване от слънцето, добър загар)	Средно-кафява (рядко изгаря от слънцето, бърз и хубав загар)	Тъмно-кафява (рядко изгаря от слънцето, много добър загар)	Чернокафява и по-тъмна (рядко/никога не изгаря от слънцето, много тъмен загар)
----------------------------------	---	--	--	--	--	--

Цвят на телесното окосмяване:

тъмнорусо/светло-кестеняво/кестеняво/тъмнокестеняво/черно	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	x
бяло/сиво/червено/светлорусо	x	x	x	x	x	x

Важно

За да проверите дали уредът Philips Lumea Precision Plus е подходящ за вас, вижте раздела "За кого не е подходящ уредът Philips Lumea Precision Plus".

Ако сте излагали кожата си на слънце или сте използвали метод за придобиване на изкуствен тен, кожата ви може да е по-тъмна, отколкото при предишното третиране. Вижте таблицата по-горе, за да определите кои настройки са подходящи за цвета на кожата ви.


Съвети за придобиване на тен

Излагане на слънце преди третиране

- Ако имате тен, направете тест на кожата (вижте глава "Използване на уреда", раздел "Първо използване") в областта, която ще третирате, за да определите подходящата интензивност на светлината. Ако не направите това, рискувате появата на кожни реакции след третиране с Philips Lumea Precision Plus.
- Изчакайте поне 48 часа след излагането на слънце, преди да използвате уреда. Излагането на слънце може да предизвика потъмняване на кожата (тен) и/или изгаряне от слънцето (зачервяване на кожата).
- След тези 48 часа проверете кожата за следи от слънчево изгаряне. Не използвайте Philips Lumea Precision Plus, докато има такива следи.
- Когато слънчевото изгаряне изчезне, направете тест на кожата (вижте глава "Използване на уреда", раздел "Първо използване") в областта, която ще третирате, за да определите подходящата интензивност на светлината.

Излагане на слънце след третиране

- Изчакайте поне 24 часа след третиране, преди да изложите третираните области на слънце. Дори след 24 часа се уверете,

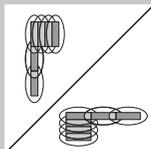

9 За да не пропуснете места при третирането, старайте се винаги да има леко застъпване с вече третирани области, когато поставяте уреда върху кожата. Използваемата светлина се излъчва само през прозореца за светлина. Внимавайте импулсите да са генерирани близо един до друг.

10 След като приключите с процедурата, изключете уреда.

11 Проверете дали по прозореца за светлинния лъч и приставката няма косми и прах и почистете уреда след използването му (вижте глава "Почистяване и поддръжка").

Указания за третирането

Средна продължителност на процедурата

Област	Прибл. продължителност на процедурата	Препоръчителна приставка
Подмишници	1 минута на подмишница	Приставка за тяло/прецизно третиране
Бикини линия	1 минута от всяка страна	Приставка за тяло/прецизно третиране
Цялата бикини линия	4 минути	Приставка за тяло/прецизно третиране
Една подбедрица	8 минути	Приставка за тяло
Един цял крак	14 минути	Приставка за тяло
Горна устна/брадичка/бакенбарди	1 минута	Приставка за прецизно третиране

Забележка: Средната продължителност на третиране, посочена по-горе, е спазвана по време на изследванията и тестовете. Индивидуалната продължителност на третиране може да е различна при различните хора.

Забележка: Напълно заредените батерии позволяват поне 370 импулса с интензивност 5. Колко дълго можете да използвате уреда зависи от размера на областта за третиране и от използваната настройка за интензивност.

Области, които смятате да третирате

Уредът е предназначен за третиране на нежелано окосмяване по горната устна, брадичката, бакенбардите, подмишниците, ръцете, корема, бикини линията и краката.

Използване на уреда върху краката

Вижте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава "Подготовка за употреба", раздел "Регулиране на интензивността на светлината", за да разберете кои настройки са подходящи за вашите крака.



Приставка за прецизно третиране

Приставката за прецизно третиране има допълнителен вграден филтър за светлина и може да се използва за съвсем безопасно третиране на нежеланото окосмяване по лицето - на горната устна, брадичката и бакенбардите. Може да се използва и в други чувствителни части на тялото, като подмишниците и бикини линията, или в труднодостъпните зони.

Никога не използвайте около очите или в близост до веждите.


Първо използване и тест на кожата




1 Изберете приставката, подходяща за областта, която ще третирате.

2 Изберете област, близка до областта, която ще третирате.

Забележка: Преди да използвате уреда върху горната устна, брадичката или бакенбардите, изберете област без бенки и косми под ухото, за да извършите теста на кожата.

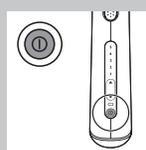

3 Натиснете бутона вкл./изкл., за да включите уреда. Уредът винаги се включва автоматично на най-ниската настройка.

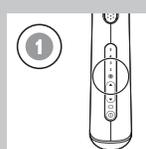


4 Приложете един импулс с най-ниската препоръчителна интензивност за вашия тип кожа (за инструкции как да генерирате импулс, вижте стъпки от 6 до 9 в раздел "Следващо използване" в тази глава).

5 Докато се чувствате комфортно (не изпитвате болка), увеличавайте настройката с едно ниво в препоръчителния диапазон за вашия тип кожа и прилагайте по един импулс за всяка настройка. Не прилагайте повече от един импулс на едно и също място.

6 След теста на кожата изчакайте 24 часа и проверете дали няма някаква кожна реакция. Ако има кожни реакции, за следващото използване изберете най-високата настройка, която не е причинила кожна реакция.

Когато използвате уреда за първи път, ви съветваме да извършите тест на кожата в областта, която ще третирате, за да проверите реакцията на кожата и да свикнете с третирането със светлина.

Следващо използване

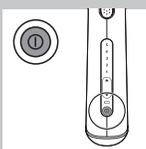


1 Преди всяко третиране почиствайте приставките, прозореца за светлинния лъч и металната рамка в приставките на Philips Lumea Precision Plus. За повече информация вижте глава "Почистване и поддръжка".

2 Изберете приставката, подходяща за областта, която ще третирате.


3 Натиснете бутона за вкл./изкл., за да включите уреда.

Забележка: По време на работа е нормално уредът и приставката леко да се загреят.

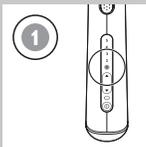


4 Започвайте всяко третиране, като изберете много внимателно интензивността на светлината въз основа на чувствителността на кожата ви и на комфорта при третиране.


Възможно е кожата ви да реагира различно в различни дни или ситуации поради редица причини и особено след придобиване на тен. За повече информация вижте раздела "Възможни странични ефекти и кожни реакции" в тази глава.

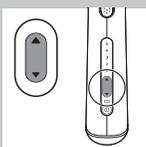

5 Натиснете бутона ▲, за да увеличите интензивността. За да намалите интензивността, натиснете бутона ▼. При всяко натискане на бутона започва да мига индикаторът за съответната интензивност. Това отнема няколко секунди.

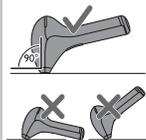

6 Поставете уреда под ъгъл 90° към кожата, така че приставката и предпазният пръстен да са в контакт с кожата.

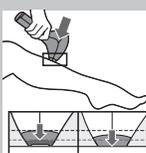

7 Натиснете леко предпазния пръстен, за да легне изцяло върху кожата.

Забележка: Предпазният пръстен има контактни превключватели, които съвместно образуват системата за безопасност на уреда. Този предпазен пръстен предотвратява нежеланото генериране на импулс, когато няма контакт с кожата.



Индикаторът "Готовност за импулс" на гърба на уреда светва в зелено, когато всички контактни превключватели на предпазния пръстен са в контакт с кожата и уредът е зареден. Това може да отнеме няколко секунди.

Свет: За по-лесно използване опънете участъка от кожата, който искате да третирате. На места с по-мека кожа може да се наложи да упражните по-силен натиск върху уреда, за да натиснете всички контактни превключватели.



8 Натиснете бутона за импулс, за да генерирате импулс. Сега имате 2 опции за генериране на следващия импулс:



A Задръжте бутона за импулс натиснат. Уредът генерира импулс след импулс, докато предпазният пръстен е в пълен контакт с кожата. Незабавно след като уредът е генерирал импулс, го плъзнете към следващата област. Предпазният пръстен трябва да е притиснат плътно към кожата.

Този "режим на плъзгане и генериране на импулс" е особено подходящ за третиране на по-големи области, например краката.

B Отпуснете бутона за импулс след всеки импулс. За следващия импулс поставете уреда върху областта, която е непосредствено до предишната област, върху която е приложен импулс.

Предпазният пръстен трябва да е притиснат плътно към кожата. Този "метод на преместване с една стъпка и генериране на импулс" гарантира прецизно третиране, например на горната устна, коленете или глезените.

Забележка: След няколко секунди уредът е готов за нов импулс, така че непременно трябва да го преместите в следващата област веднага след като е генерирал импулс.

Не третирайте една и съща област няколко пъти по време на една сесия. Това не подобрява ефикасността на третирането, но увеличава риска от кожни реакции.

Забележка: Видимата светлина от уреда се дължи на отражението на импулса от кожата и е безопасна за човешкото око. Не е необходимо да слагате защитни очила по време на работа.

съветваме да се консултирате с лекар. Не третирайте областите с променен цвят, докато проблемът не изчезне и кожата не възстанови нормалния си цвят.

- Възпаление и инфекция на кожата: това се случва много рядко и може да се дължи на използването на уреда върху рани или порязвания при бръсненето, върху стари рани или врснати косъмчета.
- Прекалена болка: може да се появи по време на или след третиране, ако сте използвали уреда върху неизбръсната кожа, ако сте използвали уреда с интензивност на светлината, която е твърде висока за цвета на вашата кожа, ако сте генерали импулс върху една и съща област повече от веднъж и ако сте използвали уреда върху отворени рани, възпаления, инфекции, татуировки, изгаряния и др. Вижте глава "Важно", раздел "Противопоказания" за повече информация.

След употреба

- Не използвайте ароматизирани козметични продукти върху третираните области непосредствено след процедурата.
- Не използвайте дезодорант непосредствено след третиране на подмишниците. Изчакайте, докато зачервяването на кожата изчезне напълно.
- Вижте глава "Подготовка за употреба", раздел "Съвети за придобиване на тен" за информация относно излагането на слънце и придобиването на изкуствен тен.

Почистване и поддръжка

За да си осигурите оптимални резултати и продължителен живот на уреда, почиствайте го преди и след всяко използване и при необходимост по време на третирането. Уредът губи ефективността си, ако не го почистите, както трябва.

Никога не почиствайте уреда или коята и да е от частите му с течаща вода или в съдомиялна машина.

Никога не почиствайте уреда с абразивни гъби, абразивни почистващи препарати или агресивни течности, като бензин или ацетон.


Никога не драскайте прозореца за светлинния лъч или металната рамка вътре в приставките.

Забележка: Уверете се, че контактните превключватели на предпазния пръстен не са задръстени от замърсяване.

Забележка: Спрете да използвате уреда, когато почистването на прозореца за светлинния лъч или приставките стане невъзможно. За подмяна вижте глава "Поръчване на принадлежности".

1 Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.

Забележка: Прозорецът за светлинния лъч се заграва по време на работа. Уверете се, че е изстинал, преди да го почистите.

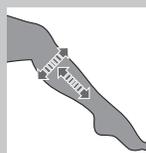

- Можете да движите уреда нагоре-надолу или настрани върху крака, както ви е по-удобно.

Забележка: Областите с кост, като пищяла и глезените, са по-чувствителни от други области на тялото. Когато натиснете силно приставката към тези области, е възможно кожата да е по-податлива към кожни реакции, като възпаление и зачервяване. Вижте раздела "Възможни странични ефекти и кожни реакции" в тази глава. Притиснете приставката към кожата толкова силно, колкото е необходимо, за да светне индикаторът "Готовност за импулс", но не повече.

Съвет: Възможно е уредът да оставя отпечатаци върху кожата. Те могат да ви покажат къде да направите застъпването на третираните области.

Напълно заредената батерия осигурява третиране на цялото тяло и лице (горната устна, подмишниците, бикини линията и подбедриците) наведнъж.* Ако използвате уреда за третиране на подбедриците и бедрата, може да се наложи да заредите уреда по време на третирането. Това е нормално. Колко дълго можете да използвате уреда зависи от размера на областта за третиране и от използваната настройка за интензивност.

*На базата на средните времена за третиране за всяка област и препоръчителната интензивност за един потребител.

Съвет: Много потребители съчетават третирането на краката с други дейности въкъщи, като гледане на телевизия или слушане на музика. Можете също да се опитате да направите тази дейност по-приятна и релаксираща.

Използване на уреда върху бикини линията

Вижте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава "Подготовка за употреба", раздел "Регулиране на интензивността на светлината", за да разберете кои настройки са по-подходящи за вашата бикини линия.

По принцип уредът Philips Lumea Precision Plus е достатъчно безопасен и щадящ, за да позволи третиране на цялата бикини линия (напр. за "бразилски" или "холивудски" стил). Използвайте по-

ниска настройка върху по-тъмната, по-чувствителна кожа на бикини линията. Не използвайте уреда по срамните устни, влагалището и ануса. Мъжете, които искат да третираат слабините си, не трябва да използват уреда по скротума.

Забележка: От хигиенни съображения, винаги почиствайте използваната приставката, преди да започнете да третирате друга област от тялото.

Използване на уреда върху подмишниците
Вижте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава "Подготовка за употреба", раздел "Регулиране на интензивността на светлината", за да разберете кои настройки са подходящи за вашите подмишници.

Преди третиране непременно отстранете от подмишниците всякакви дезодоранти, парфюми, кремове или други козметични продукти.

Съвет: За да постигнете оптимални резултати при подмишниците, стойте пред огледало, за да виждате добре областта, която ще третирате, и индикатора "Готовност за импулс". Вдигнете ръката си и я поставете на тила, за да опънете кожата в областта на подмишницата. Така предпазният пръстен може да бъде притиснат по-лесно към кожата, което улеснява третирането.

Забележка: Отразената светлина няма да навреди на очите ви. Ако разсеяната светлина е неприятна, затворете очи, когато генерирате импулс.

Използване на уреда върху лицето (горната устна, брадичката, бакенбардите)

Вижте таблицата с препоръчителните нива на интензивност на светлината в глава "Подготовка за употреба", раздел "Регулиране на интензивността на светлината", за да разберете кои настройки са подходящи за вашето лице (горната устна, брадичката, бакенбардите). Винаги използвайте само **приставката за прецизно третиране**, когато третирате горната устна, брадичката и бакенбардите. Никога не използвайте уреда около очите или в близост до веждите. Когато третирате горната устна, брадичката и бакенбардите, не трябва да излагате лицето си на пряка слънчева светлина в следващите 24 часа. Използвайте слънчезащитен крем (SPF 30+) две седмици след третирането, когато излагате лицето си на пряка слънчева светлина.

Съвет: За да постигнете оптимални резултати на горната устна, брадичката и бакенбардите, стойте пред огледало, за да виждате добре областта, която ще третирате, и индикатора "Готовност за импулс".

Съвет: Поради контура на челюстта може да е трудно да осигурите пълен контакт между предпазния пръстен и кожата, за да генерирате импулс. Поставете езика между зъбите и горната устна или надуйте бузите си, за да улесните процедурата.



Съвет: Отразената светлина няма да навреди на очите ви. Ако разсеяната светлина е неприятна, затворете очи, когато генерирате импулс.

Как да постигнете оптимални резултати

- Нормално е още да се виждат косми след първите няколко процедури (вижте глава "Въведение", раздел "Принцип на работа" за повече информация).
- За успешно премахване на всички косми и за предотвратяване на последващо активиране на космения фоликул, процедурите трябва да се повтарят веднъж на всеки две седмици през първите два месеца. Дотогава кожата ви трябва да е станала гладка. Прочетете раздела "Фаза на поддържане", за да разберете как можете да запазите тези резултати.

Фаза на поддържане

- За да запазите кожата си гладка, ви съветваме да повтаряте третирането на всеки 4 до 8 седмици. Времето между третиранятия може да варира в зависимост от индивидуалното повторно израстване на космите, а също и в различните части на тялото. Ако между процедурите порастват твърде много косми, съкъсете отново интервала на третиране, но не третирайте никоя област по-често от веднъж на две седмици. Когато използвате уреда по-често, отколкото е препоръчително, не увеличавате ефикасността, но увеличавате риска от кожни реакции.

Възможни странични ефекти и кожни реакции

Често срещани кожни реакции:

- Кожата може леко да се зачерви и/или да почувствате бодяк, сърбеж или топлина. Тази реакция е абсолютно безвредна и бързо ще изчезне.
- За кратко време върху третираната област може да се получи кожна реакция, сходна с тази при слънчево изгаряне. Ако не изчезне до 3 дни, ви съветваме да се консултирате с лекар.
- Може да усетите сухота и сърбеж по кожата поради комбинацията от избърсване и третиране със светлина. Това е безвредно и изчезва за няколко дни. Можете да охладите зоната с леден пакет или мокра кърпа за лице. Ако сухотата продължава, може да намажете третираната област с неароматизиран овлажняващ продукт 24 часа след третирането.

Рядко срещани странични ефекти:

- Изгаряния, прекалено зачервяване и подуване: тези реакции възникват много рядко. Те се дължат на използването на светлина с интензивност, твърде висока за цвета на вашата кожа. Ако тези реакции не изчезнат в рамките на 3 дни, ви съветваме да се консултирате с лекар. Изчакайте със следващата процедура, докато кожата бъде излекувана напълно, и задължително използвайте по-ниска интензивност на светлината.
- Промяна на цвета на кожата: това се случва много рядко. Промяната на цвета се проявява като по-тъмно (хиперпигментация) или по-светло петно (хипопигментация) спрямо околната област. Това се дължи на използването на светлина с интензивност, твърде висока за цвета на вашата кожа. Ако промяната на цвета не изчезне в рамките на 2 седмици, ви


Модел SC2003

Номинално напрежение	100 V - 240 V
Номинална честота	50 Hz - 60 Hz
Номинална консумирана мощност	7,5 W
Защита срещу електрически удар	Клас II Q
Ниво на защита	IP 30 (EN 60529)
Условия на експлоатация	Температура: от +15° до +35°C
	Относителна влажност: от 25% до 95%
Условия на съхранение	Температура: от 0° до +60°C
	Относителна влажност: от 5% до 95%
Спектър на приставката за тяло	> 570 nm
Спектър на приставката за прецизно третиране	> 600 nm
Литиево-йонна батерия	2 x 3,7 V, 1500 mAh

Отстраняване на неизправности

В тази глава са обобщени най-често срещаните проблеми, които може да срещнете при използване на уреда. Ако не можете да разрешите проблема с помощта на информацията по-долу, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес www.philips.bg или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

Проблем	Възможна причина	Решение
Уредът не работи.	Акумулаторните батерии са изтощени.	Заредете уреда (вж. раздела "Зареждане").
	Уредът е дефектен.	Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Уредът внезапно се изключва.	Акумулаторните батерии са изтощени.	Заредете уреда (вж. раздела "Зареждане").
Адаптерът се загрива по време на зареждане.	Това е нормално.	Не се изисква никакво действие.
Индикаторът за зареждане не светва, когато включат малкия шекер в гнездото на уреда.	Не сте включили адаптера в контакта.	Включете малкия жак в гнездото на уреда и включете адаптера в контакта.

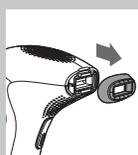


2 За да свалите приставката, поставете пръстите си в процепите от горната и долната страна и внимателно изтеглете. Приставката би трябвало да излезе лесно.

3 Навлажнете меката кърпичка, предоставена с уреда, с няколко капки вода и почистете с нея следните части:

- прозореца за светлинния лъч
- външната повърхност на приставките
- металната рамка вътре в приставките
- червеникавото стъкло на филтъра на приставката за прецизно третиране


Забележка: Ако водата не почисти ефективно, използвайте няколко капки спирт с висок процент, за да почистите горепосочените части.

Забележка: Замърсените прозорец за светлинния лъч и/или приставка изглеждат като на тази фигура. Задължително почиствайте уреда преди и след всяко използване и при необходимост по време на третирането съгласно инструкциите в този раздел.

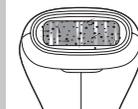

Съвет: Ако ръбовете на приставките вече не могат да се почистят с предоставената кърпичка за почистване, вместо нея използвайте клечка с памук. Уверете се, че по приставките или прозореца за светлинния лъч не са останали мъх или влакна.

4 Ако е необходимо, почистете външността на уреда със сухата мека кърпичка, предоставена с уреда.

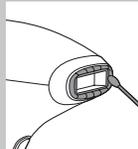

Съхранение

- 1 Изключете уреда, извадете щепсела от контакта и оставете уреда да изстине.
- 2 Винаги почиствайте уреда, преди да го приберете.
- 3 Приберете уреда в приложението калф или торбичка. Приставката за прецизно третиране трябва да е поставена на уреда.
- 4 Съхранявайте уреда на сухо място при температура между 0°C и 60°C.

Поръчване на аксесоари

За да закупите аксесоари за този уред, посетете нашия онлайн магазин на адрес www.shop.philips.com/service. Ако онлайн магазинът не е достъпен във вашата страна, посетете търговец на уреди Philips или сервиз на Philips. Ако срещнете затруднения при снабдяването с аксесоари за уреда, обърнете се към Центъра за обслужване на потребители на Philips във вашата страна. Данните за контакт ще намерите в международната гаранционна карта.

Резервни части

Предлагат се следните резервни части:

- Приставка за тяло
- Приставка за прецизно третиране
- Адаптер
- Калъф
- Торбичка

Опазване на околната среда



- След края на срока на експлоатация не изхвърляйте уреда заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда.






- Вградените акумулаторни батерии съдържат вещества, които замърсяват околната среда. Винаги изваждайте батериите, преди да изхвърлите уреда или да го предадете в официален пункт за събиране. Изхвърляйте батериите в официален пункт за събиране на батерии. Ако имате проблеми при изваждане на батериите, можете също да занесете уреда в сервизен център на Philips. Там служителите ще извадят батериите и ще ги изхвърлят по начин, опазващ околната среда.


Изваждане на акумулаторните батерии

Изваждайте акумулаторните батерии само когато са напълно изтощени.


- 1 Изключете уреда от адаптера.
- 2 Оставете уреда да работи, докато батериите се изтощат напълно. Включете уреда и генерирайте импулси, докато повече не можете да включите уреда.
- 3 Вмъкнете шило или друг остър инструмент в капачето на дъното на уреда и отделете капачето.
- 4 Развийте с отвертка двата винта в долната част на дръжката.

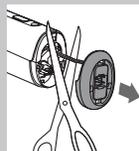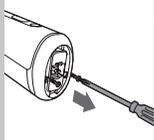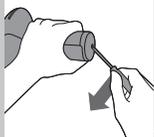


- 5 Свалете долната част на дръжката и срежете двете жици, които свързват дъното към уреда.

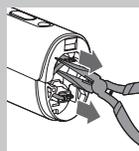

- 6 Извадете съединителите на батерията от клемите на батерията с клещи с дълги челюсти.

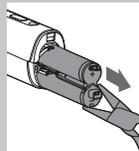

- 7 Извадете акумулаторните батерии от уреда с клещите с дълги челюсти.

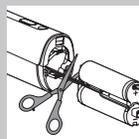

- 8 Срежете двете жици една по една, за да е сигурно, че няма да възникнат злополуки поради вероятни остатъчни заряди.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от сервизно обслужване или информация или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес www.philips.com/support или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Телефонния му номер ще намерите в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди Philips.


Технически данни

Проблем	Възможна причина	Решение
Реакцията на кожата след процедурата продължава по-дълго от обикновено.	Използвали сте интензивност на светлината, която е твърде висока за вас.	Следващия път изберете по-висока интензивност на светлината. Вж. глава "Подготовка за употреба", раздел "Регулиране на интензивността на светлината". Ако реакцията на кожата продължи по-дълго от три дни, се консултирайте с лекар.
Резултатите от премахването на окосмяването не са задоволителни.	Използвали сте интензивност на светлината, която е твърде ниска за вас.	Следващия път изберете по-висока интензивност на светлината.
	Не сте направили достатъчно застъпвания, когато сте използвали уреда.	За добри резултати при премахване на окосмяването, трябва да има застъпвания, когато използвате уреда. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Следващо използване", стрълка 9.
	Не използвате уреда толкова често, колкото е препоръчително.	За успешно премахване на всички косми и за предотвратяване на последващо активиране на корена на косъма, процедурите трябва да се повтарят веднъж на всеки две седмици през първите два месеца. За да запазите кожата си гладка, ви съветваме да повтаряте третирането на всеки 4 до 6 седмици. Времето между третиранията може да варира в зависимост от индивидуалното повторно израстване на космите, а също и в различните части на тялото. Ако между процедурите порастват твърде много косми, скъсете отново интервала на третиране, но не третирайте ниска област по-често от веднъж на две седмици. Когато използвате уреда по-често, отколкото е препоръчително, не увеличавате ефикасността, но увеличавате риска от кожни реакции.
	Уредът не е подходящ за вашето окосмяване или за цвета на кожата ви.	Не използвайте уреда, ако окосмяването на тялото ви е светлорусо, червено, сиво или бяло. Не използвайте уреда и ако имате много тъмна кожа.
Космите поникват отново на някои места в третираните области.	Не сте направили достатъчно застъпвания, когато сте използвали уреда.	За добри резултати при премахване на окосмяването, трябва да има застъпвания, когато използвате уреда. Вижте глава "Използване на уреда", раздел "Следващо използване", стрълка 9.
	Космите поникват отново в резултат на нормалния цикъл на растеж на косъма.	Това е нормално. Космите поникват отново вследствие на нормалния цикъл на растежа им. Новопоникналите косми обаче са по-меки и по-тънки.

Проблем	Възможна причина	Решение
	В контакта няма ток.	Включете друг уред в контакта, за да проверите дали в него има напрежение. Ако контактът работи, но уредът продължава да не се зарежда, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
	Адаптерът не е включен правилно в контакта и/или малкият щекер не е включен правилно в гнездото на уреда.	Уверете се, че адаптерът е включен правилно в контакта и/или малкият щекер е включен правилно в гнездото на уреда.
	Уредът е дефектен.	Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Включих уреда, но не мога да увелича или намаля интензивността на светлината.	Уредът трябва да бъде нуиран.	За да нуирате уреда, изключете го и го включете отново. Ако и сега не можете да регулирате интензивността на светлината, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Индикаторът "Готовност за импулс" не светва, когато поставя уреда върху кожата.	Не сте опрели правилно върху кожата приставката с предпазния пръстен.	Поставете уреда под ъгъл 90° спрямо кожата така, че всички контактни превключватели да докосват кожата. След това проверете дали свети индикаторът "Готовност за импулс" и натиснете бутона за импулс.
		Ако това не помогне, поставете уреда върху част от тялото си, където той лесно може да опре изцяло върху кожата, например ръката между лакътя и китката, и проверете дали индикаторът "Готовност за импулс" работи. Ако и сега индикаторът "Готовност за импулс" не светва при пълно опиране на уреда върху кожата, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
	Предпазният пръстен е замърсен.	Внимателно почистете предпазния пръстен. Ако не можете да почистите предпазния пръстен както трябва, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips, за да подмените приставката.

Проблем	Възможна причина	Решение
Индикаторът "Готовност за импулс" не светва, когато поставя приставка върху кожата, но охлаждащият вентилатор работи.	Задействана е защитата срещу прегряване.	Когато се задейства защитата срещу прегряване, вентилаторът продължава да работи. Не изключвайте уреда и го оставете да се охлади в продължение на около 15 минути, преди да продължите да го използвате. Ако индикаторът "Готовност за импулс" не светва при опиране на уреда върху кожата, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Индикаторът "Готовност за импулс" свети в зелено, но уредът не генерира импулс при натискане на бутона за импулс.	Уредът трябва да бъде нулиран.	За да нулирате уреда, изключете го и го включете отново. Ако индикаторът "Готовност за импулс" свети в зелено, но и сега не се генерира импулс при натискане на бутона за импулс, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Уредът се загрева по време на работа.	Това е нормално.	Не се изисква никакво действие.
След включване уредът не показва ниво на интензивност 1.	Уредът трябва да бъде нулиран.	За да нулирате уреда, изключете го и го включете отново. Ако и сега не показва ниво на интензивност 1, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
От уреда се разнася странна миризма.	Приставката и/или стъклото на филтъра са замърсени.	Внимателно почистете приставката. Ако не можете да почистите приставката добре, се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips, за да подмените приставката.
	Не сте избърснали добре мястото, което искате да третирате.	Ако на мястото, което искате да третирате, има косъмчета, те може да изгорят, когато използвате уреда. В резултат на това се получава странна миризма. Избърснете добре областта, която искате да третирате, преди да използвате уреда. Ако избърсването води до възпаление на кожата, подстрижете косъмчетата колкото е възможно по-близо до кожата и използвайте подходяща настройка.
	Съхранявали сте уреда на прашно място.	Странната миризма изчезва след няколко импулса.
Кожата е почувствителна от обикновено по време на третирането.	Използваната интензивност на светлината е твърде висока.	Проверете дали сте задали правилна интензивност на светлината. Ако се налага, задайте по-ниско ниво на интензивността.

Проблем	Възможна причина	Решение
	Не сте избърснали местата, които ще третирате.	Преди да използвате уреда, избърснете местата, които искате да третирате. Ако избърсването води до възпаление на кожата, подстрижете косъмчетата колкото е възможно по-близо до кожата и използвайте подходяща настройка.
	Ултравиолетовият филтър на прозореца за светлинния лъч е счупен.	Ако ултравиолетовият филтър на прозореца за светлинния лъч е счупен, свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
	Уредът е дефектен.	Свържете се с Центъра за обслужване на потребители във вашата страна, с търговеца на уреди Philips или със сервизен център на Philips.
Усещам недопустимо силна болка, когато използвам уреда.	Не сте избърснали местата, които ще третирате.	Преди да използвате уреда, избърснете местата, които искате да третирате. Ако избърсването води до възпаление на кожата, подстрижете косъмчетата колкото е възможно по-близо до кожата и използвайте подходяща настройка.
	Третирани сте област, за която уредът не е предназначен.	Не трябва да използвате уреда по срамните устни, влагалището, ануса, гърдите, ареолите, устните, във вътрешността на ноздите и ушите, в областта около очите и веждите. Мъжете не трябва да го използват върху лицето и скротума.
	Използвали сте интензивност на светлината, която е твърде висока за вас.	Намалете интензивността на светлината до ниво, което не ви носи дискомфорт. Вж. глава "Подготовка за употреба", раздел "Регулиране на интензивността на светлината".
	Прозорецът за светлинния лъч или червеникавото стъкло на филтъра на приставката са счупени.	Ако прозорецът за светлинния лъч или червеникавото стъкло на филтъра на приставката са счупени, спрете да използвате уреда с тази приставка. Обърнете се към вашия търговец на уреди или сервизен център на Philips или се свържете с Центъра за обслужване на потребители, за да подмените приставката.
	Уредът не е подходящ за цвета на кожата ви.	Не използвайте уреда, ако имате много тъмна кожа. Не използвайте уреда и ако окосмяването на тялото ви е светлоорусо, червено, сиво или бяло.
Третирани области се зачервяват след процедурата.	Лекото зачервяване е безопасно и нормално и изчезва бързо.	Не се изисква никакво действие.

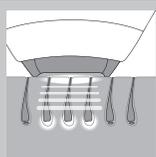

Părul vechi se separă de foliculul său și cade. Foliculul rămâne latent până când ceasul biologic îi transmite să devină activ din nou și să permită creșterea unui fir de păr nou.

Principiu de funcționare

- Aparatul funcționează prin încălzirea firului de păr și a rădăcinii acestuia de sub piele. Melanina din păr și din rădăcina părului absoarbe impulsurile de lumină emise. Cu cât este mai închisă culoarea părului, cu atât mai multă lumină poate fi absorbită. Acest proces stimulează părul să intre în faza latentă.



- Între tratamente, părul cade în mod natural și creșterea părului este inhibată. Căderea naturală a părului poate dura de la una până la două săptămâni.



- Îndepărtarea optimă a părului nu poate fi obținută într-o singură sesiune, deoarece doar firele de păr în faza de creștere sunt susceptibile la tratamentul cu lumină. În timpul unui tratament, firele de păr de pe zona tratată sunt, de obicei, în etape diferite ale ciclului de creștere a părului. Pentru a trata în mod eficient toate firele, trebuie să repetați tratamentul la fiecare două săptămâni, de câteva ori.

Un filtru optic încorporat se asigură că nicio lumină UV nu ajunge la piele și garantează faptul că aparatul este sigur pentru piele.

Descriere generală (fig. 5)

- 1 Fereastră de ieșire lumină cu filtru UV încorporat
 - 2 Accesorii
Accesoriu pentru precizie (potrivit pentru toate zonele corpului, inclusiv buza superioară, bărbie și perciuți)
Accesoriu pentru corp (potrivit pentru toate zonele corpului aflate mai jos de gât)
 - 3 Cadru metalic din interior accesoriului
 - 4 Sistem de siguranță (inel de siguranță cu întrerupătoare de contact)
 - 5 Buton luminare intermitentă
 - 6 Lumini intensitate (1- 5)
 - 7 ▲ Buton creștere intensitate
 - 8 ▼ Buton reducere intensitate
 - 9 Led de încărcare și indicator pentru baterie descărcată
 - 10 Butonul Pornit/Oprit
 - 11 Mufă aparat
 - 12 Lumină "Pregătit pentru luminare intermitentă"
 - 13 Orificii de ventilare
 - 14 Adaptor
 - 15 Conector mic
- Mai sunt incluse: carcasă (SC2003/00) sau husă (SC2003/11) și o cârpă de curățat.

Cuprins

Introducere

Beneficii

Tehnologie cu Lumină Intens Pulsată (IPL) pentru uz casnic
Prevenirea eficientă a reapariției părului, pentru delicatețe zilnică
Tratament delicat, chiar și în zonele sensibile ale corpului
Funcționare fără fir pentru libertate și flexibilitate maxime
Baterie cu durabilitate mare pentru tratamente complete, atât pe corp cât și pe față

Fără piese de schimb, fără costuri ascunse

Cum funcționează tehnologia pe bază de Lumină Intens Pulsată, de la Philips

Creșterea părului

Principiu de funcționare

Descriere generală

Important

Pericol

Avertisment

Pentru a preveni deteriorarea

Precauție

Rețineți următoarele lucruri pentru a evita compromiterea duratei de funcționare a aparatului dvs. Philips Lumea Precision Plus:

Pentru cine NU este adecvat Philips Lumea Precision Plus?

Contraindicații

Nu utilizați niciodată aparatul dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

Nu utilizați aparatul dacă aveți o piele și/sau o culoare a părului necorespunzătoare, de exemplu:

Nu utilizați niciodată aparatul dacă suferiți de oricare dintre bolile enumerate mai jos, de exemplu:

Nu utilizați niciodată aparatul dacă luați oricare dintre medicamentele enumerate mai jos, de exemplu:

Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele zone:

Nu utilizați niciodată aparatul pe suprafețe ale pielii care prezintă arsuri solare, sunt bronzate recent (ultimele 48 de ore) sau sunt acoperite cu bronz artificial:

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Încărcare

Pregătirea pentru utilizare

Pregătirea zonelor de tratament

Setarea intensității luminoase

Intensități luminoase recomandate (1-5)

Important

Sfaturi pentru bronzare

Utilizarea aparatului

Alegerea accesoriului corect

Prima utilizare și testul de piele

Utilizare ulterioară

Recomandări pentru tratament

Durată medie de tratament

Zonele ce urmează a tratate

Utilizarea aparatului pe picioare

Utilizarea aparatului în zona inghinală
 Utilizarea aparatului în zonele axilare
 Utilizarea aparatului pe față (buza superioară, bărbie, perciuni)
 Cum se obțin rezultate optime
 Etapa de întreținere
 Efecte secundare și reacții posibile ale pielii
 După utilizare
 Curățare și întreținere
 Depozitarea
 Comandarea accesoriilor
 Componente de schimb
 Protecția mediului
 Îndepărtarea bateriilor reîncărcabile
 Garanție și servicii
 Specificații tehnice
 Depanare

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/lumea.

Îndepărtarea părului pe bază de lumină este una dintre cele mai eficiente metode de a trata părul nedorit de pe corp, cu rezultate de durată. Aceasta este diferită de metodele existente de îndepărtare a părului practicabile acasă, deoarece reduce semnificativ părul care crește la loc. Philips cercetează această metodă împreună cu dermatologi renumiți de peste 10 ani. Acum puteți să utilizați această tehnologie inovatoare în mod confortabil, în intimitatea propriei locuințe, oriunde și oriunde doriți. Acest aparat a fost special conceput și optimizat pentru utilizarea de către femei, dar poate fi utilizat și de către bărbați.

Philips Lumea Precision Plus vă permite tratarea părului nedorit de pe întregul corp, inclusiv de pe față (buza superioară, bărbie și perciuni), cu ajutorul celor două accesorii adaptate.

Philips Lumea Precision Plus este conceput pentru utilizarea de către o singură persoană. Pentru mai multe informații despre Philips Lumea Precision Plus, accesați www.philips.com/lumea. Verificați pagina noastră principală în mod regulat, pentru actualizări.

Beneficii

Acest aparat oferă următoarele avantaje:

Tehnologie cu Lumină Intens Pulsată (IPL) pentru uz casnic

Philips Lumea Precision Plus utilizează o tehnologie bazată pe lumină numită "Lumină Intens Pulsată" (Intense Pulsed Light - IPL). IPL este de asemenea utilizată pe piața de înfrumusețare profesională pentru îndepărtarea părului, fiind utilizată în ultimii cincisprezece ani. Philips Lumea Precision Plus vă oferă acum această tehnologie inovatoare pentru utilizarea sigură și eficientă a aparatului, în confortul propriei dvs. locuințe.

Prevenirea eficientă a reparației părului, pentru delicatețe zilnică

Această metodă vă oferă o prevenire de lungă durată a reparației părului și o piele mătăsoasă și netedă. Studiile noastre arată o reducere semnificativă a părului după doar două tratamente. Rezultatele optime au fost obținute în general după patru sau cinci tratamente. O reducere a densității părului este vizibilă de la un tratament la altul. Cât de rapid devine vizibil efectul și cât de mult durează rezultatele, depinde de la o persoană la alta. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Cum se pot obține rezultate optime" din capitolul "Utilizarea aparatului".

Tratament delicat, chiar și în zonele sensibile ale corpului

Philips Lumea Precision Plus a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu dermatologi renumiți și a fost testat de peste 2000 femei pentru un tratament eficient și delicat, chiar și pe cele mai sensibile zone ale corpului și ale feței.

Funcționare fără fir pentru libertate și flexibilitate maxime

Deoarece acest aparat funcționează cu baterii reîncărcabile, acesta este portabil și poate fi utilizat oriunde.

Baterie cu durabilitate mare pentru tratamente complete, atât pe corp cât și pe față

O baterie complet încărcată asigură un tratament complet, atât al corpului cât și al feței (buza superioară, zonele axilare, zona inghinală și partea inferioară a picioarelor) dintr-o singură mișcare, fără pauze pentru reîncărcare.*

* Pe baza duratelor medii ale tratamentelor pentru fiecare zonă, la intensitățile recomandate, pentru un singur utilizator.

Fără piese de schimb, fără costuri ascunse

Philips Lumea Precision Plus este echipat cu o lampă de înaltă performanță care nu necesită înlocuire. Această lampă poate genera peste 100.000 de pulsații și ar trebui să vă permită să obțineți aceleași rezultate, timp de cel puțin 5 ani**, economisind astfel banii pe care i-ați cheltui pentru lămpile de schimb scumpe.

* Pe baza duratelor medii ale tratamentelor pentru fiecare zonă, la intensitățile recomandate, pentru un singur utilizator.

Cum funcționează tehnologia pe bază de Lumină Intens Pulsată, de la Philips

Creșterea părului

Viteza de creștere a părului diferă de la o persoană la alta, în funcție de vârstă, metabolism și alți factori. Cu toate acestea, părul crește în mod normal în 3 faze.


1 Faza de creștere (faza anagenă)

Părul crește în mod activ de la rădăcină. În această fază concentrația de melanină este cea mai ridicată. Melanina este responsabilă pentru pigmentarea părului. Melanina este, de asemenea, factorul determinant pentru eficacitatea acestei metode. Doar firele de păr aflate în faza de creștere sunt susceptibile la tratamentul cu lumină.

2 Faza de degradare (faza catagenă)

Creșterea părului încetează iar rădăcina se reduce înainte ca părul să cadă.

3 Faza latentă (faza telogenă)

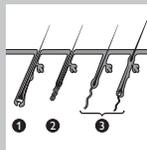

- arsuri și modificarea culorii pielii, ceea ce poate îngreuna identificarea afecțiunilor dermatologice (de exemplu cancerul de piele).
- Pe negi, tatuaje sau machiaj permanent. Aceasta poate cauza arsuri și o schimbare a culorii pielii (hipopigmentare sau hiperpigmentare).
 - În zonele unde utilizați deodorante de lungă durată. Aceasta poate cauza reacții ale pielii. Consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii".

Nu utilizați niciodată aparatul pe suprafețe ale pielii care prezintă arsuri solare, sunt bronzate recent (ultimele 48 de ore) sau sunt acoperite cu bronz artificial:

- Toate tipurile de bronzare pot influența siguranța tratamentului. Acest lucru este valabil atât pentru expunerea la lumina naturală a soarelui, cât și pentru bronzarea prin metode artificiale, precum loțiunile sau aparatele de bronzare etc. Dacă sunteți bronzată sau intenționați să vă bronzați, consultați capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Sfaturi pentru bronzare".

Notă: Această listă nu este completă. Dacă nu sunteți sigur(ă) că puteți utiliza aparatul vă sfătuim să consultați un medic.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Încărcare

Încărcați complet bateriile înainte să utilizați aparatul pentru prima dată și atunci când bateriile sunt descărcate. Încărcarea completă a bateriilor durează până la o oră și patruzeci de minute. Încărcați aparatul atunci când LED-ul de încărcare luminează în portocaliu în timpul utilizării, pentru a indica faptul că bateria este descărcată și, în curând, se va descărca complet. Bateriile complet încărcate furnizează cel puțin 370 de pulsații la nivelul 5 de intensitate a luminii. Încărcați complet aparatul la fiecare 3 până la 4 luni, chiar dacă nu utilizați aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp.

Încărcați aparatul în modul următor:



1 Opriiți aparatul.

2 Introduceți ștecherul mic în aparat și adaptorul în priză.

- Ledul de încărcare clipește verde pentru a indica faptul că aparatul se încarcă.
- Când bateriile sunt complet încărcate, LED-ul de încărcare luminează verde continuu.

Note:

- Adaptorul și aparatul se încălzesc în timpul încărcării. Acest lucru este normal.
- Nu puteți utiliza aparatul în timpul încărcării.
- Acest aparat este echipat cu protecție la supraîncălzire a bateriei și nu se încarcă dacă temperatura camerei depășește 40°C.

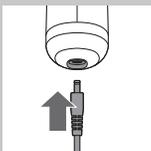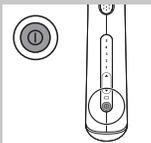

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol



- Apa și electricitatea reprezintă o combinație periculoasă. Nu folosiți acest aparat în medii umede (de ex. în apropierea unei căzi pline cu apă, a unui duș sau a unei piscine).
- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa.
- Dacă aparatul este spart, nu atingeți nicio componentă internă, pentru a evita electrocutarea.
- Nu introduceți niciodată obiecte în aparat.

Avertisment

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului, de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Aparatul nu este destinat utilizării de către copii sub 15 ani. Adolescenții cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani pot utiliza aparatul cu acordul și/sau supravegherea părinților sau a persoanelor care au autoritate legală asupra acestora. Adulții în vârstă de cel puțin 19 ani pot utiliza aparatul, fără nicio restricție.
- Încărcați aparatul numai cu adaptorul furnizat.
- Nu folosiți aparatul sau adaptorul dacă sunt deteriorate.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru conduce la situații periculoase.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Nu utilizați aparatul dacă filtrul UV sau fereastra de ieșire a luminii sunt deteriorate.
- Nu utilizați accesoriul de precizie dacă geamul acestuia, de culoare roșiatică, este spart.

Pentru a preveni deteriorarea

- Asigurați-vă că nimic nu poate obstrucționa fluxul de aer prin fantele de ventilație.
- Nu supuneți niciodată aparatul la șocuri puternice, nu îl scuturați și nu îl scăpați.
- Dacă duceți aparatul dintr-un mediu foarte rece într-un mediu foarte cald sau invers, așteptați aproximativ 3 ore înainte de a-l utiliza.
- Depozitați aparatul în carcasă sau husă, pentru a-l proteja de praf.
- Nu lăsați aparatul nesupravegheat când este pornit. Opriiți întotdeauna aparatul după utilizare.
- Nu expuneți aparatul la lumina directă a soarelui sau la lumină UV, timp de câteva ore.
- Nu folosiți aparatul pe nicio altă suprafață în afară de piele. Acest lucru poate cauza deteriorarea gravă a accesoriilor și/sau a ferestrei de ieșire

a luminii. Folosiți aparatul numai atunci când acesta este în contact cu pielea.

Precauție

- Nu utilizați niciodată aparatul în jurul ochilor și în apropierea sprâncenelor, pentru a evita riscul de vătămare a ochilor.
- Utilizați acest aparat numai la setările potrivite pentru tipul dvs. de piele. Utilizarea la valori mai mari decât cele recomandate poate mări riscul apariției reacțiilor pielii și efectelor secundare.
- Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru îndepărtarea părului nedorit din zonele aflate mai jos de pomeți, cu ajutorul celor două accesorii furnizate. Nu-l folosiți în niciun alt scop.

Rețineți următoarele lucruri pentru a evita compromiterea duratei de funcționare a aparatului dvs. Philips Lumea Precision Plus:

- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai scăzute de 15°C sau mai înalte de 35°C în timpul funcționării.
- Aparatul este dotat cu o protecție la supraîncălzire încorporată. Dacă aparatul se supraîncălzeste, acesta nu mai emite pulsații. Nu opriți aparatul, ci lăsați-l să se răcească pentru aproximativ 15 minute înainte de a continua tratamentul.
- În cazul în care aparatul necesită examinare sau reparații, acesta trebuie returnat la un centru autorizat de Philips. Repararea aparatului de către o persoană necalificată poate duce la provocarea unor accidente foarte grave în timpul utilizării.
- Nu utilizați aparatul în niciunul dintre cazurile menționate în secțiunea "Contraindicații".

Pentru cine NU este adecvat Philips Lumea Precision Plus?

Philips Lumea Precision Plus nu a fost proiectat pentru toată lumea. Dacă una dintre următoarele situații este valabilă pentru dvs., atunci acest aparat nu este adecvat utilizării de către dvs.!

Contraindicații

Nu utilizați niciodată aparatul dacă sunteți însărcinată sau alăptați.

Nu utilizați aparatul dacă aveți o piele și/sau o culoare a părului necorespunzătoare, de exemplu:

- Dacă culoarea naturală a părului dvs. în zona de tratament este blond deschis, alb, gri sau roșu.
- Dacă aveți tipul de piele VI (rareori sau niciodată nu suferiți arsuri și vă bronzăți foarte mult; culoarea pielii dvs. este maro închis sau mai închisă). În acest caz, prezentați un risc ridicat de a dezvolta reacții ale pielii, cum ar fi decolorare, înroșire sau arsuri puternice atunci când utilizați Philips Lumea Precision Plus. Consultați, de asemenea, capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii".

Nu utilizați niciodată aparatul dacă suferiți de oricare dintre bolile enumerate mai jos, de exemplu:

- Dacă aveți o boală de piele precum cancerul de piele activ, aveți antecedente de cancer de piele sau orice alt cancer, localizat în zonele care vor fi tratate.
- Dacă aveți leziuni pre-canceroase sau alunițe atipice multiple în zonele care vor fi tratate.
- Dacă aveți antecedente de tulburări legate de colagen, inclusiv antecedente de formare a cheloidului sau antecedente de vindecare grea a rănilor.
- Dacă aveți antecedente de boli vasculare, precum prezența varicelor sau ectaziei vasculare în zonele care vor fi tratate.
- Dacă pielea dvs. este sensibilă la lumină și dezvoltă cu ușurință eczeme sau reacții alergice.
- Dacă aveți infecții, eczeme, arsuri, foliculi inflamați, lacerări deschise, abraziuni, operații, herpes, răni sau leziuni și hematoame în zonele care vor fi tratate.
- Dacă ați suferit intervenții chirurgicale în zonele care vor fi tratate.
- Dacă aveți epilepsie cu sensibilitate la lumină intermitentă.
- Dacă aveți diabet, lupus eritematos, porfirie sau insuficiență cardiacă congestivă.
- Dacă aveți probleme cu procesul de coagulare a sângelui.
- Dacă aveți antecedente de boli imunosupresive (inclusiv infecție cu HIV sau SIDA).

Nu utilizați niciodată aparatul dacă luați oricare dintre medicamentele enumerate mai jos, de exemplu:

- Dacă pielea dvs. este tratată sau a fost tratată recent cu Alfa-Hidroxi Acizi (AHA), Beta-Hidroxi Acizi (BHA), izotretinoin administrat topic și acid azelaic.
- Dacă ați luat orice formă de izotretinoin Accutane® sau Roaccutane® în ultimele șase luni. Acest tratament poate face pielea mult mai susceptibilă la fisuri, răni și iritații.
- Atunci când luați analgezice, care reduc sensibilitatea pielii la căldură.
- Dacă luați agenți fotosensibilizatori sau medicamente, verificați prospectul medicamentului dvs. și nu utilizați niciodată aparatul dacă se menționează că acesta poate cauza reacții foto-alergice, reacții foto-toxice sau dacă trebuie să evitați expunerea la soare atunci când luați acest medicament.
- Dacă luați medicamente anticoagulante, inclusiv în cazul utilizării aspirinei în cantități mari, într-un mod care nu permite o perioadă de curățare de cel puțin o săptămână înainte de fiecare tratament.
- Dacă luați medicamente imunosupresive.

Nu utilizați niciodată aparatul în următoarele zone:

- În jurul ochilor și în apropierea sprâncenelor.
- Pe mameloane, areole, labia minoră, vagin, anus și interiorul nărilor și urechilor.
- Bărbați nu trebuie să îl utilizeze pe scrot și față.
- Deasupra sau în apropierea oricăror elemente artificiale precum implanturi cu silicon, stimulatoare cardiace, porturi de injecție subcutanate (distribuitor de insulină) sau piercing-uri.
- Pe alunițe, pistrii, vene mari, zone pigmentate mai închise, cicatrice, anomalii ale pielii fără să consultați medicul dvs. Aceasta poate cauza

utiliza aparatul (consultați capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Pregătirea zonelor de tratament").

Dacă la un anumit moment tratamentul devine insuportabil de dureros, reduceți setarea de intensitate luminoasă până când tratamentul este confortabil din nou. În cazul în care observați reacții ale pielii mai puternice decât o ușoară înroșire, opriți imediat tratamentul și citiți secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii", din acest capitol.

Alegerea accesoriului corect



- Accesoriu pentru corp

Accesoriul pentru corp poate fi utilizat pentru tratarea părului nedorit de pe corp din toate zonele corpului aflate mai jos de gât (pentru excepții, consultați capitolul "Important", secțiunea "Contraindicații"). Accesoriul pentru corp poate acoperi o zonă de 4 cm² și a fost special conceput pentru tratarea mai rapidă a zonelor mai mari, precum picioarele.

Nu utilizați accesoriul pentru corp pe față.



- Accesoriu pentru precizie

Accesoriul de precizie include un filtru suplimentar de lumină integrat și poate fi utilizat pentru tratarea și mai sigură a părului nedorit de pe față, pe buza superioară, bărbie și perniuni. De asemenea, acesta poate fi folosit și în alte zone sensibile ale corpului, cum ar fi zonele axilare și zona inghinală sau în zonele greu-accesibile.

Nu utilizați niciodată aparatul în jurul ochilor și în apropierea sprâncenelor.


Prima utilizare și testul de piele



1 Alegeți accesoriul adecvat pentru zona pe care intenționați să o tratați.

2 Alegeți o zonă apropiată de zona pe care intenționați să o tratați.

Notă: Înainte de a utiliza aparatul pe buza superioară, bărbie sau perniuni, alegeți o zonă fără alunițe și fără păr de sub ureche, pentru a efectua testul de piele.

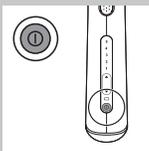

3 Apăsăți butonul Porni/Oprit pentru a porni aparatul.
Aparatul va porni întotdeauna automat, la setarea minimă.

Nu acoperiți aparatul și adaptorul în timpul încărcării.

3 După încărcare, îndepărtați adaptorul din priză și scoateți conectorul mic din aparat.

Pregătirea pentru utilizare

Pentru rezultate optime și eficiență maximă, pregătiți zonele pe care intenționați să utilizați aparatul, conform celor descrise mai jos.

Pregătirea zonelor de tratament

1 Radeți zonele în care intenționați să tratați atât timp cât încă părul crește la loc.

Notă: Dacă ultima dvs. metodă de epilare implică îndepărtarea firelor de păr din rădăcină (de exemplu epilare, epilare cu ceară etc.), așteptați până când veți observa o creștere semnificativă a părului înainte de a utiliza Philips Lumea Precision Plus. Nu utilizați creme depilatoare în loc de radere.

Vă rugăm să rețineți că tratamentul în zonele nerase sau rase necorespunzător, are un număr de efecte nedorite:

- Fereastra de ieșire a luminii și accesoriul pot fi contaminate cu fire de păr și murdărie. Contaminarea ferestrei de ieșire a luminii și a accesoriului poate reduce durata de viață și eficiența aparatului. În plus, punctele negre sau arsurile apărute pe fereastra de ieșire a luminii și pe accesoriu, din cauza murdăriei, pot face ca tratamentul să fie dureros sau pot cauza reacții ale pielii, precum înroșirea sau decolorarea.
- Firele de păr de pe pielea dvs. pot arde, ceea ce poate duce la un miros neplăcut.

2 Curățați-vă pielea și asigurați-vă că aceasta nu prezintă niciun fir de păr, este complet uscată și lipsită de substanțe uleioase (de genul celor prezente în produsele cosmetice precum deodorante, loțiuni, parfumuri, creme bronzante și ecrane solare).

3 Verificați aparatul, în special fereastra de ieșire a luminii și accesoriul, pentru a identifica eventuale fire de păr, praf și fibre. Dacă acesta este murdar, curățați aparatul în conformitate cu instrucțiunile din capitolul "Curățarea și întreținerea".

Note:

- Dacă raderea cauzează răni sau leziuni, pielea dvs. se poate să fie mai sensibilă iar tratamentul cu lumină poate uneori să provoace o stare de disconfort.
- Odată ce firele de păr nu mai cresc la loc, lucru care se întâmplă de obicei după 4 sau 5 tratamente, nu va mai trebui să vă radeți înainte de a utiliza aparatul.

Setarea intensității luminoase

Philips Lumea Precision Plus este un aparat conceput pentru utilizarea de către consumatori, la domiciliu, așadar nu se poate compara cu aparatele profesionale pe bază de lumină, din punct de vedere al senzației de durere. Impulsurile de lumină produse de Philips Lumea Precision Plus sunt mai delicate comparativ cu cele emise de aparatele profesionale, în consecință, vă puteți aștepta la un tratament **comod și eficient**. Trebuie să reglați intensitatea luminii în funcție de culoarea pielii și a părului de pe corp și la un nivel pe care-l considerați confortabil.



Tabelul de mai jos, cu intensitățile luminoase recomandate vă ajută să stabiliți intensitatea luminoasă corectă

1 Consultați tabelul de mai jos pentru a stabili ce intensități luminoase sunt cele mai potrivite pentru culoarea pielii și a părului dvs. de pe corp și pentru a verifica dacă această metodă este adecvată pentru dvs. (dacă nu este, acest lucru este marcat cu un x în tabel).

2 Fiecare zonă a corpului sau poate chiar anumite părți ale unei zone a corpului pot necesita o intensitate corespunzătoare diferită a luminii, în conformitate cu intensitățile luminoase recomandate din tabelul de mai jos. Metoda este mult mai eficientă la intensități mai ridicate, dar trebuie să reduceți intensitatea luminoasă dacă simțiți durere sau disconfort.

Notă: Intensitatea luminoasă necesară pentru diverse zone ale corpului poate varia în funcție de culoarea pielii. De exemplu, pielea de pe partea inferioară a picioarelor poate fi mai închisă decât pielea din zonele axilare, datorită expunerii mai frecvente la soare.

Persoanele cu piele de culoare mai închisă prezintă un risc mai ridicat de iritare a pielii, deoarece pielea acestora absoarbe mai multă lumină. Prin urmare, pentru persoanele cu piele de culoare mai închisă sunt recomandate intensitățile mai joase.

Pulsajul de lumină se poate simți ca fiind cald sau fierbinte pe piele, dar nu ar trebui să fie niciodată dureroasă. Pentru a preveni reacțiile pielii, consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii".

Intensități luminoase recomandate (1-5)

În tabelul de mai jos, "x" înseamnă că aparatul nu este adecvat pentru dvs.

Culori și caracteristici ale pielii:	Albă (întotdeauna arsuri, fără bronzare)	Bej (arsuri ușoare, bronzare minimă)	Brună deschisă (uneori arsuri, bronzare agreabilă)	Brună medie (arsuri rare, bronzare rapidă și agreabilă)	Brună închisă (arsuri rare, bronzare excelentă)	Maro închis și mai închisă (arsuri rare sau inexistente, bronzare foarte închisă la culoare)
--------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	---	--

Culoarea părului de pe corp:

blond închis/castaniu/maro închis/negru	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	X.
alb/gri/roșu/blond deschis	X.	X.	X.	X.	X.	X.

Important

Pentru a verifica dacă Philips Lumea Precision Plus este adecvat pentru dvs., consultați secțiunea "Pentru cine nu este adecvat aparatul Philips Lumea Precision Plus?".

Dacă pielea dvs. a fost expusă la lumina naturală a soarelui sau la o metodă artificială de bronzare, aceasta poate fi mai închisă decât în timpul tratamentului anterior. Verificați tabelul de mai sus, pentru a stabili care sunt setările potrivite pentru culoarea pielii dvs.

Sfaturi pentru bronzare

Expunerea la soare înainte de tratament

- Dacă pielea dvs. este bronzată, efectuați un test de piele (consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Prima utilizare") în zona care va fi tratată, pentru a stabili intensitatea corespunzătoare a luminii. În caz contrar, există riscul apariției unor reacții ale pielii, după tratamentul cu Philips Lumea Precision Plus.
- După expunerea la soare așteptați cel puțin 48 de ore înainte de a utiliza aparatul. Bronzarea poate provoca înnegrirea pielii (bronz) și/sau poate provoca arsuri solare (înroșiri ale pielii).
- După aceste 48 de ore, verificați pielea pentru a identifica eventuale arsuri rămase. Nu utilizați Philips Lumea Precision Plus atât timp cât arsurile persistă.
- Atunci când arsurile au dispărut, efectuați un test de piele (consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Prima utilizare") în zona care va fi tratată, pentru a stabili intensitatea corespunzătoare a luminii.

Expunerea la soare după tratament

- Așteptați cel puțin 24 de ore după tratament, înainte de a expune la soare zonele tratate. Chiar și după 24 de ore, asigurați-vă că pielea tratată nu mai prezintă nicio înroșire în urma efectuării tratamentului, înainte de a o expune la soare.
- Acoperiți zonele tratate atunci când vă expuneți la soare sau folosiți o cremă protectoare (factor protecție solară 30+) în cele două săptămâni de după tratament.
- Expunerea zonelor tratate la lumina solară fără protecție, imediat după tratament, poate mări riscul de apariție a efectelor secundare și a reacțiilor pielii. Consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii".

Bronzarea cu lumină artificială

- Urmați instrucțiunile din secțiunile "Expunerea la soare înainte de tratament" și "Expunerea la soare după tratament", de mai sus.

Bronzarea cu creme

- Dacă ați utilizat o loțiune bronzantă artificială, așteptați până când bronzul artificial a dispărut complet, înainte de a utiliza Philips Lumea Precision Plus.

Notă: Pentru mai multe detalii privind reacțiile nedorite ale pielii, consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii".

Utilizarea aparatului

Verificați intensitățile luminoase recomandate din tabelul prezentat în capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Setarea intensității luminoase", pentru a stabili ce intensități luminoase sunt cele mai potrivite pentru culoarea pielii și a părului dvs. de pe corp. Utilizați aparatul într-o încăpere bine iluminată, acest lucru reduce senzația de luminozitate a pulsajilor. Radeți zona pe care intenționați să o tratați înainte de a



- Puteți deplasa aparatul în sus și în jos sau transversal pe picior, în funcție de care este mișcarea mai comodă pentru dvs.

Notă: Părțile osoase ale piciorului, precum tibia și gleznele sunt mai sensibile decât alte zone ale corpului. Atunci când apăsați accesoriul tare pe aceste zone, pielea poate fi mult mai susceptibilă la reacțiile pielii, cum ar fi iritarea și înroșirea. Consultați secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii", din acest capitol. Apăsați accesoriul pe piele suficient de tare pentru ca LED-ul "pregăt pentru pulsații" să se aprindă, dar nu mai tare.

Sugestie: Este posibil ca aparatul să lase urme pe piele în zonele tratate. Aceste urme vă pot indica unde puteți suprapune zonele tratate.


O baterie complet încărcată asigură un tratament complet, atât al corpului cât și al feței (buza superioară, zonele axilare, zona inghinală și partea inferioară a picioarelor) dintr-o singură mișcare.* Dacă utilizați aparatul pentru a vă trata atât partea de sus cât și partea de jos a picioarelor, este posibil să fie nevoie să reîncărcați aparatul în timpul tratamentului. Acest lucru este normal. Cât timp puteți utiliza aparatul depinde de dimensiunea zonei de tratament și de setarea de intensitate utilizată.

* Pe baza duratelor medii ale tratamentelor pentru fiecare zonă, la intensitățile recomandate, pentru un singur utilizator.

Sugestie: Mulți utilizatori combină tratamentele pentru picioare cu alte activități în casă, precum vizionarea programelor TV sau ascultarea de muzică. De asemenea, puteți încerca acest lucru, pentru a face ca această experiență să fie mai plăcută și mai relaxantă.

Utilizarea aparatului în zona inghinală

Verificați tabelul cu intensitățile luminoase recomandate din capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Setarea intensității luminoase", pentru a vedea care sunt setările adecvate pentru zona dvs. inghinală. În principiu, Philips Lumea Precision Plus este suficient de sigur și de delicat pentru efectuarea tratamentelor în întreaga zonă inghinală (de exemplu pentru stilurile "Brazilian" sau "Hollywoodian"). Utilizați o setare mai mică pe pielea pigmentată mai închisă și mai sensibilă din zona inghinală. Nu

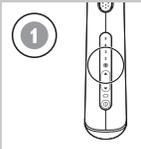


- 4 Aplicați o pulsație la cea mai scăzută intensitate recomandată pentru tipul dvs. de piele (pentru instrucțiuni privind modalitatea de a emite o pulsație, consultați pașii de la 6 la 9 din secțiunea "Utilizare ulterioară", din acest capitol).

- 5 Atât timp cât senzația este confortabilă (nu doare), măriți setarea cu câte o treaptă, în intervalul recomandat pentru tipul dvs. de piele și aplicați câte o pulsație pentru fiecare setare. Nu aplicați mai mult de o pulsație în același loc.

- 6 După efectuarea testului de piele, așteptați de 24 de ore și verificați-vă pielea pentru identificarea oricărei reacții. Dacă pielea dvs. prezintă reacții, alegeți setarea cea mai mare care nu a determinat nicio reacție a pielii, pentru utilizare ulterioară.

Atunci când utilizați aparatul pentru prima dată, vă sfătuim să efectuați un test de piele în zona care va fi tratată, pentru a verifica reacția pielii dvs. la tratament și pentru a vă acomoda cu tratamentul pe bază de lumină.

Utilizare ulterioară

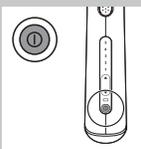


- 1 Înainte de fiecare tratament, curățați accesoriile, fereastra de ieșire a luminii și cadrul metalic din interiorul accesoriilor aparatului Philips Lumea Precision Plus. Pentru mai multe informații consultați capitolul "Curățare și întreținere".

- 2 Alegeți accesoriul adecvat pentru zona pe care intenționați să o tratați.


- 3 Apăsați butonul pornit/oprit pentru a porni aparatul.

Notă: Este normal ca aparatul și accesoriul să se încălzească în timpul utilizării.

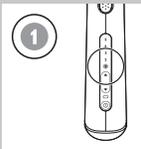

- 4 Începeți fiecare tratament prin selectarea foarte atentă a intensității luminii, în funcție de sensibilitatea pielii dvs. și de cât de confortabil vi se pare tratamentul.

Pielea dvs. poate reacționa diferit în zile sau cu prilejuri diferite, dintr-o serie de motive și în special după bronzare. Pentru mai multe informații consultați secțiunea "Efecte secundare și reacții posibile ale pielii", din acest capitol.

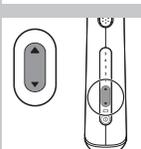

- 5 Apăsați butonul ▲ pentru a crește intensitatea. Pentru a reduce intensitatea, apăsați butonul ▼.

De fiecare dată când apăsați butonul, lumina de intensitate corespunzătoare începe să lumineze intermitent. Aceasta durează câteva secunde.




- 6** Poziționați aparatul perpendicular pe piele, astfel încât accesoriul și inelul de siguranță să fie în contact cu pielea.



- 7** Apăsăți inelul de siguranță complet pe piele cu presiune ușoară.

Notă: Inelul de siguranță are întrerupătoare de contact care împreună constituie sistemul de siguranță a aparatului. Acest inel de siguranță împiedică luminarea intermitentă fără contactul cu pielea.

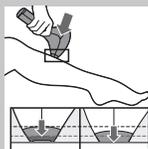


LED-ul "pregătit pentru pulsații" situat pe partea posterioară a aparatului se aprinde verde când toate întrerupătoarele de contact ale inelului de siguranță sunt în contact cu pielea iar aparatul este încărcat. Aceasta poate dura câteva secunde.

Sugestie: Pentru o utilizare mai ușoară, întindeți zona de piele pe care doriți să o tratați. Pe zonele cu piele mai fină, este posibil să fie nevoie să exercitați o presiune mai mare pe aparat, pentru a împinge înăuntru toate întrerupătoarele de contact.



- 8** Apăsăți butonul de pulsații pentru a emite o pulsație. Acum aveți 2 opțiuni pentru a emite următoarea pulsație:

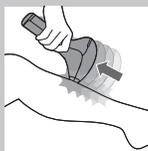

A Mențineți butonul de pulsații apăsat. Aparatul va emite pulsații succesive, atât timp cât inelul de siguranță este în contact complet cu pielea. Imediat după ce aparatul a pulsat, glisați aparatul pe următoarea zonă. Asigurați-vă că inelul de siguranță este în contact complet cu pielea.

Acest "Mod glisare și pulsare" este deosebit de comod pentru tratarea zonelor mai mari, precum picioarele.

B Eliberați butonul de pulsații după fiecare pulsație. Pentru următoarea pulsație, poziționați aparatul pe zona din imediata apropiere a zonei tratate anterior. Asigurați-vă că inelul de siguranță este în contact complet cu pielea.

Acest "Mod pas și pulsare" garantează o tratare precisă a buzei superioare, genunchilor sau gleznelor.

Notă: După câteva secunde, aparatul este pregătit pentru a emite o nouă pulsație, așadar asigurați-vă că deplasați aparatul în următoarea zonă, imediat după ce a pulsat.

Nu tratați exact aceeași zonă de mai multe ori în timpul unei singure sesiuni. Acest lucru nu îmbunătățește eficacitatea tratamentului, ci crește riscul de apariție a reacțiilor pielii.

Notă: Lumina vizibilă produsă de aparat este reflectarea luminării intermitente pe piele și este inofensivă pentru ochii dvs. Nu este necesar să purtați ochelari în timpul utilizării.

9 Pentru a evita zonele netratate, asigurați-vă întotdeauna că există o ușoară suprapunere cu zona tratată anterior atunci când poziționați aparatul pe piele. Lumina eficientă iese doar prin fereastra de ieșire a luminii. Asigurați-vă că pulsațiile sunt produse aproape unele de altele.

10 Opriiți aparatul după ce ați terminat tratamentul.

11 Verificați fereastra de ieșire a luminii și accesoriul pentru identificarea firelor de păr și murdăriei și curățați aparatul după utilizare (consultați capitolul "Curățare și întreținere").

Recomandări pentru tratament

Durată medie de tratament

Zonă	Timp de tratare aprox.	Accesoriu recomandat
Zonele axilare	1 minut pentru fiecare zonă axilară	Accesoriu pentru corp/precizie
Zona inghinală	1 minut pentru fiecare parte	Accesoriu pentru corp/precizie
Întreaga zonă inghinală	4 minute	Accesoriu pentru corp/precizie
O gambă	8 minute	Accesoriu pentru corp
Un picior întreg	14 minute	Accesoriu pentru corp
Buza superioară/ bărbie/ perniuni	1 minut	Accesoriu pentru precizie

Notă: Duratele medii de tratament de mai sus au fost respectate în timpul etapelor de cercetare și testare. Duratele individuale de tratament pot varia de la o persoană la alta.


Notă: Bateriile complet încărcate furnizează cel puțin 370 de pulsații la intensitatea 5. Cât timp puteți utiliza aparatul depinde de dimensiunea zonei care va fi tratată și de setarea de intensitate utilizată.

Zonele ce urmează a fi tratate


Acest aparat este destinat exclusiv tratării firelor de păr nedorite de pe buza superioară, bărbie, perniuni, zonele axilare, brațe, abdomen, zona inghinală și picioare.

Utilizarea aparatului pe picioare

Verificați tabelul cu intensitățile luminoase recomandate din capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Setarea intensității luminoase", pentru a vedea care sunt setările adecvate pentru picioarele dvs.

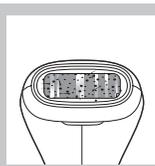

Notă: O fereastră de ieșire a luminii contaminată și/sau un accesoriu murdar pot arăta ca în această imagine. Asigurați-vă că ați curățat aparatul înainte și după fiecare utilizare și, dacă este necesar, chiar și în timpul tratamentului, în conformitate cu instrucțiunile din această secțiune.

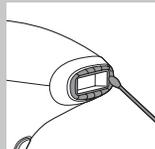

Sugestie: Dacă nu mai este posibilă curățarea marginilor accesoriului cu ajutorul cârpei de curățare furnizate, utilizați un bețisor pentru urechi în loc. Asigurați-vă că pe accesoriu sau pe fereastra de ieșire a luminii nu rămân resturi de puș sau de fibre.

4 Dacă este necesar, curățați exteriorul aparatului cu cârpa de curățare uscată și moale, furnizată împreună cu aparatul.

Depozitarea

- 1** Opriti aparatul, deconectați-l și lăsați să se răcească.
- 2** Curățați aparatul înainte să-l depozitați.
- 3** Păstrați aparatul în carcasa sau husa furnizată. Asigurați-vă că accesoriul pentru precizie nu este montat pe aparat.
- 4** Depozitați aparatul într-un loc uscat, la o temperatură între 0°C și 60°C.

Comandarea accesoriilor

Pentru a achiziționa accesoriu pentru acest aparat, vizitați magazinul nostru online la www.shop.philips.com/service. Dacă magazinul online nu este disponibil în țara dvs., mergeți la dealerul dvs. Philips sau un centru de service Philips. Dacă întâmpinați dificultăți în obținerea accesoriilor pentru aparatul dvs., contactați centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Găsiți detaliile de contact în garanția internațională.

Componente de schimb

Sunt disponibile următoarele componente de schimb:

- Accesoriu pentru corp
- Accesoriu pentru precizie
- Adaptor
- Carcasă
- Husă

utiliza și aparatul pe labia interioară, vagin și anus. Bărbații care doresc să-și trateze zona pubiană nu trebuie să utilizeze aparatul pe scrot.

Notă: Din motive de igienă, curățați întotdeauna accesoriul utilizat înainte de a începe să tratați o altă zonă a corpului.

Utilizarea aparatului în zonele axilare

Verificați tabelul cu intensități ale luminoase recomandate din capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Setarea intensității luminoase", pentru a vedea care sunt setările adecvate pentru zonele axilare. Asigurați-vă că îndepărtați orice deodorant, parfum, cremă sau alt produs de îngrijire a pielii din zonele axilare înainte de tratament.

Sugestie: Pentru a obține rezultate optime în zona axilară, stați în picioare în fața unei oglinzi pentru a putea vedea mai bine zona care va fi tratată și LED-ul "pregătire pentru pulsații". Ridicați brațul și așezați-vă mâna la gât, pentru a întinde pielea în zona axilară. În acest mod, inelul de siguranță poate fi apăsat mai ușor pe piele, ceea ce va face ca tratamentul să fie mai ușor de realizat.

Notă: Lumina reflectată nu este dăunătoare pentru ochi. Dacă lumina este neplăcută, țineți ochii închiși atunci când produceți o pulsație.

Utilizarea aparatului pe față (buză superioară, bărbie, perniuni)

Verificați tabelul cu intensități ale luminoase recomandate din capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Setarea intensității luminoase", pentru a vedea care sunt setările adecvate pentru fața dvs. (buză superioară, bărbie, perniuni).

Utilizați întotdeauna numai **accesoriul pentru precizie** pentru tratarea buzei superioare, bărbiei și perniunilor. Nu utilizați niciodată aparatul în jurul ochilor sau în apropierea sprâncenelor. Când tratați buza superioară, bărbia sau perniuni, asigurați-vă că nu vă expuneți fața la lumina directă a soarelui în următoarele 24 de ore după tratament. Aplicați o cremă protectoare (factor de protecție solară 30+) pentru următoarele două săptămâni după tratament, atunci când vă expuneți fața la lumina directă a soarelui.

Sugestie: Pentru a obține rezultate optime pe buza superioară, bărbie și perniuni, stați în picioare în fața unei oglinzi pentru a putea vedea mai bine zona care va fi tratată și LED-ul "pregătire pentru pulsații".



Sugestie: Din cauza conturului maxilarelor, este posibil să fie dificil să aduceți inelul de siguranță în contact complet cu pielea, pentru a emite o pulsație. Poziționați limba între dinți și buza superioară sau umflați-vă obraji, pentru a facilita acest lucru.

Sugestie: Lumina reflectată nu este dăunătoare pentru ochi. Dacă lumina este neplăcută, țineți ochii închiși atunci când produceți o pulsație.

Cum se obțin rezultate optime

- Este normal ca firele de păr să fie încă vizibile după primele câteva tratamente (consultați capitolul "Introducere", secțiunea "Principiul de funcționare", pentru mai multe informații).
- Pentru a îndepărta toate firele de păr cu succes și pentru a preveni situația în care foliculul firului de păr devine activ din nou, tratamentele

trebuie să fie repetate o dată la două săptămâni, pentru primele două luni. După aceea, pielea dvs. ar trebui să fie fină. Vă rugăm să citiți secțiunea "Etapă de întreținere", pentru a afla cum puteți păstra aceste rezultate.

Etapă de întreținere

- Pentru a vă asigura că pielea dvs. rămâne fină, vă sfătuim să repetați tratamentul la fiecare 4 până la 8 săptămâni. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de ritmul de reparație al părului dvs. și, de asemenea, de diferitele zone ale corpului. Dacă între tratamente reapar prea multe fire de păr; trebuie doar să scurtați intervalul de tratament din nou, dar nu tratați nicio zonă mai des decât o dată la două săptămâni. Atunci când utilizați aparatul mai des decât este recomandat, nu sporțiți gradul de eficiență ci măriți riscul de apariție a reacțiilor pielii.

Efecte secundare și reacții posibile ale pielii

Reacții frecvente ale pielii:

- Pielea dvs. se poate înroși ușor și/sau poate să usture, să prezinte furnicături sau să dea senzația de căldură. Această reacție este absolut inofensivă și dispăre rapid.
- O reacție a pielii, similară arsurii solare, poate să apară la nivelul zonei tratate pentru o scurtă perioadă de timp. Dacă aceasta nu dispăre în 3 zile, vă sfătuim să consultați un medic.
- Pielea uscată și mâncărimea pot să apară datorită combinației dintre radere și tratamentul cu lumină. Acest lucru este inofensiv și dispăre în câteva zile. Puteți răci zona cu ajutorul unei pungi cu gheață sau a unui prosop de față umed. Dacă senzația de piele uscată persistă, puteți aplica o cremă hidratantă inodoră pe zona tratată, la 24 de ore după tratament.

Efecte secundare rare:

- Arsură, înroșire excesivă și inflamare: aceste reacții au loc foarte rar. Acestea sunt rezultatul utilizării unei intensități a luminii care este prea ridicată pentru culoarea pielii dvs. Dacă aceste reacții nu dispar în termen de 3 zile, vă sfătuim să consultați un medic. Așteptați următorul tratament până când pielea s-a vindecat complet și asigurați-vă că utilizați o intensitate mai redusă a luminii.
- Decolorarea pielii: această situație apare foarte rar. Decolorarea pielii se manifestă printr-o pată de culoare mai închisă (hiperpigmentare) sau mai deschisă (hipopigmentare), comparativ cu zona înconjurătoare. Acesta este rezultatul utilizării unei intensități a luminii care este prea ridicată pentru culoarea pielii dvs. Dacă decolorarea nu dispăre în termen de 2 săptămâni, vă sfătuim să consultați un medic. Nu tratați zonele de piele decolorate până când decolorarea nu dispăre iar pielea dvs. își recapătă culoarea normală.
- Infecții și inflamații ale pielii: Această situație apare foarte rar și poate fi cauzată de utilizarea aparatului pe răni sau tăieturi rezultate în urma raderii, pe răni deja existente sau pe firele de păr crescute sub piele.
- Dureri excesive: acestea pot să apară în timpul sau după tratament, dacă ați utilizat aparatul pe piele nerasă, dacă utilizați aparatul la o intensitate a luminii care este prea ridicată pentru culoarea pielii dvs., dacă emiteți mai mult de o pulsație în aceeași zonă și dacă utilizați aparatul pe răni deschise, inflamații, infecții, tatuaje, arsuri, etc...

Consultați capitolul "Important", secțiunea "Contraindicații", pentru mai multe informații.

După utilizare

- Nu aplicați produse cosmetice parfumate pe zonele tratate, imediat după tratament.
- Nu utilizați deodorant imediat după tratarea zonei axilare. Așteptați până când orice înroșire a pielii a dispărut complet.
- Consultați capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Sfaturi pentru bronzare", pentru informații privind expunerea la soare și bronzarea artificială.

Curățare și întreținere

Pentru a obține rezultate optime și o durată prelungită de viață a aparatului, curățați aparatul înainte și după fiecare utilizare și, dacă este necesar, chiar și în timpul tratamentului. Aparatul își pierde eficacitatea dacă nu-l curățați în mod corespunzător.

Nu spălați niciodată aparatul sau părțile componente cu apă de la robinet sau în mașina de spălat vase.

Nu folosiți niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Nu zgâriați niciodată fereastra de ieșire a luminii sau cadrul metalic din interiorul accesoriilor.

Notă: Asigurați-vă că întrepruțoarele de contact ale inelului de siguranță nu sunt blocate cu impurități.

Notă: Oprțiți folosirea aparatului atunci când curățarea ferestrei de ieșire a luminii sau a accesoriilor nu mai este posibilă. Pentru înlocuirea acestora, consultați capitolul "Comandarea accesoriilor".

1 Oprțiți aparatul, deconectați-l și lăsați să se răcească.


Notă: Fereastra de ieșire a luminii se încălzește în timpul utilizării. Asigurați-vă că aceasta s-a răcit înainte de a o curăța.

2 Pentru a îndepărta accesoriul, introduceți degetele în adânciturile din partea de sus și de jos și trageți ușor. Accesoriul trebuie să iasă ușor.

3 Umeziți cărpa moale furnizată împreună cu aparatul cu câteva picături de apă și utilizați-o pentru a curăța următoarele componente:

- fereastra de ieșire a luminii
- suprafața exterioară a accesoriilor
- cadrul metalic din interiorul accesoriilor
- sticla de culoare roșie a filtrului, din interiorul accesoriului pentru precizie

Notă: Dacă apa nu curăță eficient, utilizați câteva picături de alcool cu concentrație ridicată pentru a curăța componentele menționate mai sus.

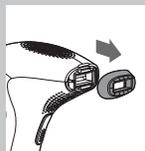

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Aparatul este defect.	Contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
Am pornit aparatul dar nu pot să cresc sau să reduc intensitatea luminoasă.	Aparatul trebuie resetat.	Pentru a reseta aparatul, opriți aparatul și apoi porniți-l din nou. Dacă totuși nu puteți să reglați intensitatea luminoasă, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
Lumina "pregătit pentru luminare intermitentă" nu se aprinde când pun aparatul pe piele.	Nu ați pus accesoriul cu inelul de siguranță corect pe piele.	Așezați aparatul perpendicular pe piele, astfel încât toate întrerupătoarele de contact să atingă pielea. Apoi verificați dacă LED-ul "pregătit pentru pulsații" este aprins și apăsați butonul de pulsații. Dacă aceasta nu are niciun efect, plasați aparatul pe o parte a corpului dvs. unde este ușor de stabilit, contactul complet cu pielea, de exemplu pe antebraț. Apoi verificați dacă ledul "pregătit pentru luminare intermitentă" funcționează. Dacă ledul "pregătit pentru luminare intermitentă" totuși nu se aprinde când plasați aparatul pe piele, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
	Inelul de siguranță este murdar.	Curățați inelul de siguranță cu grijă. Dacă nu puteți să curățați inelul de siguranță în mod corespunzător, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul dvs. Philips sau un centru de service Philips, pentru înlocuirea accesoriului.
LED-ul "pregătit pentru pulsații" nu se aprinde atunci când pun un accesoriu pe piele, dar ventilatorul funcționează.	Protecția la supraîncălzire a fost activată.	Când protecția la supraîncălzire a fost activată, ventilatorul funcționează în continuare. Nu opriți aparatul și lăsați-l să se răcească pentru aprox. 15 minute înainte de a continua să-l utilizați. Dacă ledul "pregătit pentru iluminare intermitentă" totuși nu se aprinde atunci când plasați aparatul pe piele, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
Ledul "pregătit pentru iluminare intermitentă" este verde dar aparatul nu produce lumină intermitentă când apăsați butonul de luminare intermitentă.	Aparatul trebuie resetat.	Pentru a reseta aparatul, opriți aparatul și porniți-l din nou. Dacă ledul "pregătit pentru iluminare intermitentă" este verde dar aparatul nu produce lumină intermitentă când apăsați butonul de luminare intermitentă, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
Aparatul se încălzește în timpul funcționării.	Acest lucru este normal.	Nicio acțiune necesară.

Protecția mediului




- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoii menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.




- Bateriile reîncărcabile integrate conțin substanțe care pot polua mediul. Scoateți întotdeauna bateriile înainte de a scoate din uz aparatul și de a-l preda la un centru de colectare oficial. Predați bateriile la un punct de colectare oficial pentru baterii. Dacă nu reușiți să scoateți bateriile, puteți duce aparatul și la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va îndepărta bateriile și le va recicla în conformitate cu normele de protecție a mediului.

Îndepărtarea bateriilor reîncărcabile

Îndepărtați bateriile reîncărcabile doar dacă sunt complet descărcate.

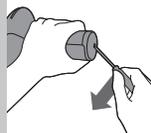


1 Deconectați aparatul de la adaptor.

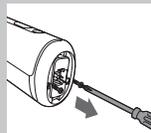


2 Lăsați aparatul să funcționeze până când bateriile se descarcă complet. Porniți aparatul și emiteți pulsații până când nu mai puteți porni aparatul.


3 Introduceți o sulă sau un alt instrument ascuțit în capacul inferior al aparatului și împingeți în jos capacul inferior.

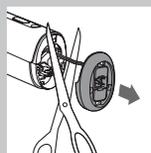

5 Scoateți partea inferioară a mânerului și întrerupeți cele două fire care conectează partea inferioară la aparat.

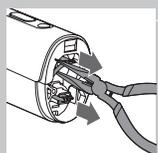

6 Scoateți conectorii bateriei din bornele bateriei cu ajutorul unui clește cu vârf ascuțit.

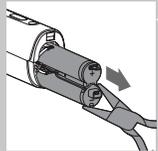

7 Scoateți bateriile reîncărcabile din aparat cu ajutorul unui clește cu vârf ascuțit.



8 Tăiați cele două fire, unul câte unul, pentru a preveni producerea unor evenimente nefericite cauzate de posibile sarcini remanente.

Garanție și service

Dacă aveți nevoie de service sau de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul web Philips la adresa www.philips.com/support sau contactați centrul Philips de asistență pentru clienți din țara dvs. Găsiți numărul de telefon în garanția internațională. Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, deplasați-vă la furnizorul dvs. Philips local.

Specificații tehnice

Model SC2003

Tensiune nominală	100V-240V
Frecvență nominală	50 Hz-60 Hz
Consum nominal	7,5 W
Protecție împotriva șocului electric	Clasa II Q
Protecție nominală	IP 30 (EN 60529)
Condiții de funcționare	Temperatură: +15° până la +35°C Umiditate relativă: 25% până la 95%

Model SC2003

Condiții de depozitare	Temperatură: 0° până la +60°C Umiditate relativă: 5% până la 95%
Spectrul accesoriului pentru corp	>570 nm
Spectrul accesoriului pentru precizie	>600 nm
Baterie litiu ion	2 x 3,7V 1500 mAh

Depanare

Acest capitol prezintă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva o problemă cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Bateriile reîncărcabile sunt descărcate.	Încărcați aparatul (vezi capitolul Încărcarea).
	Aparatul este defect.	Contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
Aparatul se oprește brusc.	Bateriile reîncărcabile sunt descărcate.	Încărcați aparatul (vezi capitolul Încărcarea).
Adaptorul devine fierbinte în timpul încărcării.	Acest lucru este normal.	Nicio acțiune necesară.
Lumina de încărcare nu se aprinde când introduc conectorul mic în mufa aparatului.	Nu ați conectat adaptorul la priză.	Introduceți ștecherul mic în mufa aparatului și adaptorul în priză.
	Priza de perete nu este alimentată.	Conectați un alt aparat la priză pentru a verifica dacă aceasta este sub tensiune. Dacă priza se află sub tensiune, dar aparatul totuși nu se încarcă, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., distribuitorul dvs. Philips sau un centru de service Philips.
	Adaptorul nu este introdus corect în priză și/sau conectorul mic nu este introdus corect în mufa aparatului.	Asigurați-vă că adaptorul este introdus corect în priză și/sau conectorul mic este introdus corect în mufa aparatului.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Aparatul nu indică intensitatea luminoasă 1 atunci când îl pornesc.	Aparatul trebuie resetat.	Pentru a reseta aparatul, opriți-l și porniți-l din nou. Dacă aparatul totuși nu indică intensitatea luminoasă 1, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
Aparatul emană un miros ciudat.	Accesorii și/sau sticla filtrului sunt murdare.	Curățați accesoriul cu grijă. Dacă nu puteți să curățați accesoriul în mod corespunzător, contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul dvs. Philips sau un centru de service Philips, pentru înlocuirea accesoriului.
	Nu ați ras corect zona care va fi tratată.	Dacă există fire de păr în zona care va fi tratată, aceste fire de păr pot fi arse atunci când utilizați aparatul. Ca rezultat, veți remarca un miros ciudat. Radeți în mod corespunzător zona care va fi tratată, înainte de a utiliza aparatul. Dacă raderea cauzează iritații ale pielii, tundeți firele de păr cât mai scurt posibil și folosiți o setare confortabilă.
	Ați depozitat aparatul într-un mediu prăfos.	Mirosul ciudat dispare după câteva luminări intermitente.
Pielea este mai sensibilă decât de obicei, în timpul tratamentului.	Intensitatea luminoasă pe care o utilizați este prea ridicată.	Verificați dacă ați selectat intensitatea luminoasă corectă. Dacă este necesar, selectați o intensitate luminoasă inferioară.
	Nu ați ras zonele care vor fi tratate.	Radeți zonele care vor fi tratate înainte de a utiliza aparatul. Dacă raderea cauzează iritații ale pielii, tundeți firele de păr cât mai scurt posibil și utilizați o setare confortabilă.
	Filtrul UV al ferestrei de ieșire a luminii este spart.	Dacă filtrul UV al ferestrei de ieșire a luminii este spart, nu mai utilizați deloc aparatul. Contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul dvs. Philips sau un centru de service Philips.
	Aparatul este defect.	Contactați centrul de asistență pentru clienți din țara dvs., reprezentantul Philips sau un centru de service Philips.
Simt o senzație inacceptabilă de durere, atunci când utilizez aparatul.	Nu ați ras zonele care vor fi tratate.	Radeți zonele care vor fi tratate înainte de a utiliza aparatul. Dacă raderea cauzează iritații ale pielii, tundeți firele de păr cât mai scurt posibil și utilizați o setare confortabilă.
	Ați tratat o zonă pentru care aparatul nu este destinat.	Nu trebuie să utilizați aparatul pe labia interioară, vagin, anus, mameloane, areole, buze, în interiorul nărilor și urechilor, în regiunea ochilor și a sprâncenelor. Bărbații nu trebuie să utilizeze aparatul pe față sau pe scrot.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Ați utilizat o intensitate a luminii care este prea puternică pentru dvs.	Reduceți intensitatea luminoasă la un nivel care este confortabil pentru dvs. Consultați capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Setarea intensității luminoase".
	Fereastra de ieșire a luminii sau sticla roșiatică a filtrului accesoriului este spartă.	Dacă fereastra de ieșire a luminii sau sticla roșiatică a filtrului accesoriului este spartă, nu mai utilizați aparatul cu acest accesoriu. Mergeți la reprezentantul dvs. sau la un centru de service Philips sau contactați centrul de asistență pentru clienți, pentru înlocuirea accesoriului.
	Aparatul nu este adecvat pentru culoarea pielii dvs.	Nu utilizați aparatul dacă pielea dvs. are o culoare foarte închisă. Nu-l folosiți nici dacă părul de pe corpul dvs. este blond deschis, roșcat, cărunt sau alb.
Zonele tratate devin roșiatice după tratament.	Roșeața ușoară este inofensivă după tratament.	Nicio acțiune necesară.
Reacția pielii după tratament durează mai mult decât de obicei.	Ați utilizat o intensitate a luminii care este prea puternică pentru dvs.	Selectați o intensitate luminoasă inferioară data următoare. Consultați capitolul "Pregătirea pentru utilizare", secțiunea "Setarea intensității luminoase". Dacă reacția pielii durează mai mult de 3 zile, contactați medicul dvs.
Rezultatele de îndepărtare a părului nu sunt satisfăcătoare.	Ați utilizat o intensitate a luminii care este prea scăzută pentru dvs.	Data următoare selectați o intensitate luminoasă mai ridicată.
	Nu ați efectuat suficiente suprapuneri când ați utilizat aparatul.	Pentru rezultate satisfăcătoare de îndepărtare a părului, trebuie să efectuați suprapuneri când utilizați aparatul. Consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Utilizare ulterioară", pasul 9.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Nu utilizați aparatul suficient de des, conform recomandărilor.	Pentru a îndepărta toate firele de păr cu succes și pentru a împiedica rădăcina părului să devină activă din nou, tratamentele trebuie să fie repetate o dată la două săptămâni, în primele două luni. Pentru a vă asigura că pielea dvs. rămâne fină, vă sfătuim să repetați tratamentul la fiecare patru până la șase săptămâni. Intervalul de timp dintre tratamente poate varia în funcție de ritmul de reparație al părului dvs. și, de asemenea, de diferitele zone ale corpului. Dacă între tratamente reapar prea multe fire de păr, trebuie doar să scurtați intervalul de tratament din nou, dar nu tratați nicio zonă mai des decât o dată la două săptămâni. Atunci când utilizați aparatul mai des decât este recomandat, nu sporiți gradul de eficiență ci măriți riscul de apariție a reacțiilor pielii.
	Aparatul nu este adecvat pentru culoarea părului sau pielii dvs.	Nu utilizați aparatul dacă părul de pe corpul dvs. este blond deschis, roșcat, cărunt sau alb. Nu utilizați aparatul nici dacă aveți piele de culoare foarte închisă.
Părul începe să reapeară în unele dintre zonele tratate.	Nu ați efectuat suficiente suprapuneri când ați utilizat aparatul.	Pentru rezultate satisfăcătoare de îndepărtare a părului, trebuie să efectuați suprapuneri când utilizați aparatul. Consultați capitolul "Utilizarea aparatului", secțiunea "Utilizare ulterioară", pasul 9.
	Părul începe să crească din nou ca parte a ciclului natural de creștere a părului.	Acest lucru este normal. Reparația părului face parte din ciclul natural al creșterii părului. Cu toate acestea, firele de păr care reapar tind să fie mai moi și mai subțiri.