

Het apparaat gebruiken

Lees de gebruiksaanwijzing, inclusief alle veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen, voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt om er zeker van te zijn dat u het apparaat juist, veilig en goed gebruikt. U vindt de gebruiksaanwijzing onder in de doos. Deze snelstartgids vervangt de gebruiksaanwijzing niet, maar maakt het voor u zo eenvoudig mogelijk om dit product te gebruiken. We raden u aan om de snelstartgids in het etui te bewaren, zodat u de gids later nog eens kunt raadplegen.



Scheer het te behandelen gebied.

Wanneer de haren niet meer zichtbaar teruggroeien (doorgaans na 4-5 behandelingen), hoeft u zich niet meer te scheren voor het gebruik van het apparaat.




Maak het apparaat en de opzetstukken schoon.

Controleer of de opzetstukken en het lichtvenster schoon zijn. Maak ze voor gebruik schoon met de meegeleverde doek als er zich vuil, haren of vezels op bevinden.



Kies het lichaams- of precisieopzetstuk.

Zorg ervoor dat u het opzetstuk op de juiste manier plaatst.

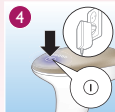

Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in.



Kies de juiste lichtintensiteit.

Pas de lichtintensiteitsinstelling aan door een of meerdere keren op de aan/uitknop te drukken tot de benodigde instelling is bereikt.


Opmerking: Raadpleeg de tabel op de achterzijde van deze snelstartgids voor de juiste stand.



Plaats de Philips Lumea Essential op uw huid.

Plaats het apparaat loodrecht op de huid en zorg ervoor dat het apparaat volledig contact maakt met de huid. Het apparaat voert vervolgens een huidskleuranalyse uit en het 'klaar om te flitsen'-lampje gaat branden.

Opmerking: Het 'klaar om te flitsen'-lampje gaat alleen branden als het apparaat volledig in contact staat met de huid.

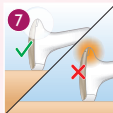

Huidskleuranalyse.

Als het 'klaar om te flitsen'-lampje op de achterzijde van het apparaat wit wordt, kunt u uw huid behandelen met het apparaat en kunt u doorgaan.

Als het 'klaar om te flitsen'-lampje oranje wordt, kunt u uw huid niet behandelen met het apparaat. Het flitsen wordt automatisch gedeactiveerd.*



Druk op de flitsknop om een flits af te geven.

Laat de flitsknop los zodra het apparaat heeft geflits en til het apparaat van uw huid. Plaats het apparaat op het volgende te behandelen gebied. Zorg er daarbij voor dat er wat overlap is, maar behandel hetzelfde gebied niet tweemaal. Druk vervolgens opnieuw op de flitsknop.



TIP: gebruik de 'Verplaats- & flitsmodus' voor een snellere behandeling.

Voor een efficiëntere behandeling houdt u de flitsknop ingedrukt terwijl u het apparaat over uw huid verplaatst. Na elke flits duurt het maximaal 3,5 seconden tot het apparaat klaar is voor een nieuwe flits. Tijdens deze oplaadtijd knippert het 'klaar om te flitsen'-lampje zolang het apparaat volledig in contact staat met uw huid.

* U kunt de Philips Lumea Essential mogelijk gebruiken op minder gebruikte of natuurlijk lichtere lichaamsdelen. Neem contact op met Philips Consumer Care als dit niet werkt.

Huidtint

Kleur van lichaamsharen

	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
	4/5	4/5	4/5	1/2/3	×	×
	×	×	×	×	×	×

1/2/3/4/5 Deze standen zijn geschikt voor deze huidtint.

×

 Dit apparaat is niet veilig of geschikt voor uw huidtint en haartype.

De Skin Tone-sensor zal de behandeling verhinderen op donkerdere huidtinten

Aanbevolen lichtintensiteit

Dit apparaat is niet voor iedereen geschikt. We raden u aan een huidtest uit te voeren als u de Philips Lumea Essential voor het eerst gaat gebruiken of na recent bruinen. Zo kunt u de juiste stand voor uw huid bepalen (zie gebruiksaanwijzing, hoofdstuk 'Het apparaat gebruiken'). Wacht na de huidtest 24 uur en controleer uw huid op reacties. Als uw huid reacties vertoont, kiest u de volgende keer de hoogste stand die niet tot huidreacties heeft geleid. Voer altijd een huidtest uit om de juiste stand te bepalen. De bovenstaande tabel geeft slechts een indicatie. De Philips Lumea Essential is doeltreffender bij hogere intensiteiten, maar u moet de lichtintensiteit verlagen als u pijn of ongemak ervaart. De lichtpuls kan warm of heet aanvoelen op de huid, maar mag nooit pijnlijk zijn.

Belangrijk

Laat het apparaat niet onbeheerd achter en houd het buiten het bereik van kinderen.



Registratie en ondersteuning

Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

4222.100.2347.1

