


PHILIPS

Lumea

SC1994, SC1997,
SC1998, SC1999



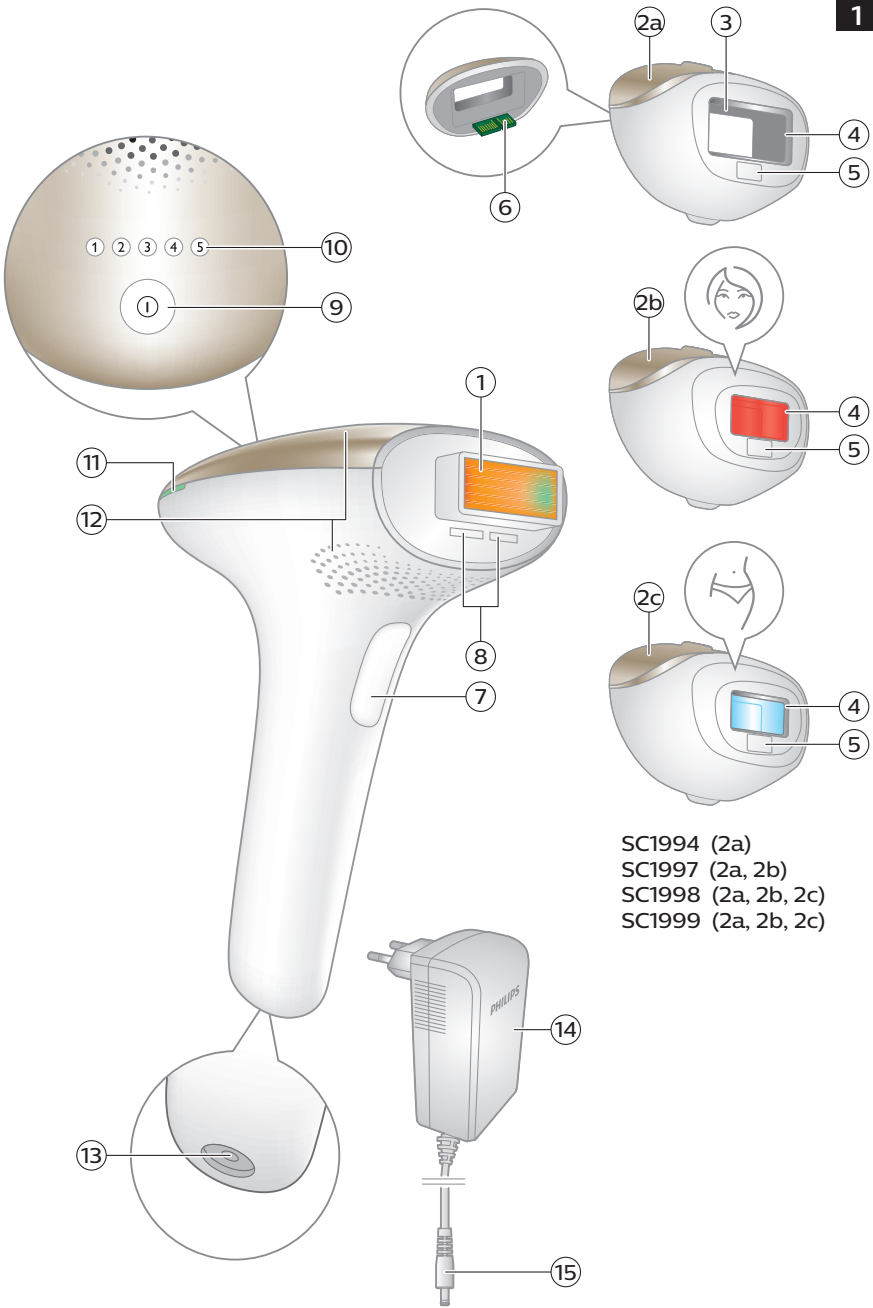

SC1994 (2a)
SC1997 (2a, 2b)
SC1998 (2a, 2b, 2c)
SC1999 (2a, 2b, 2c)

Tabelu nijansi kože



Tabelu nijansi dlačica



Srpski 6

Dobro došli

Dobrodošli u Lumea svet lepote! Za samo nekoliko nedelja imaćete svilenkasto glatku kožu.

Philips Lumea koristi tehnologiju intenzivnog pulsirajućeg svetla (Intense Pulsed Light – IPL), poznatu kao jednu od najboljih metoda za kontinuirano sprečavanje ponovnog rasta dlačica. Blisko saradujući sa licenciranim dermatolozima, prilagodili smo ovu tehnologiju koja se zasniva na svetlu i koja se prvenstveno koristila u profesionalnim salonima lepote kako biste je jednostavno i efikasno koristili u sigurnosti vašeg doma. Philips Lumea je nežan aparat koji nudi praktičan i efikasan tretman pri intenzitetu svetlosti pri koji vam prija. Neželjene dlačice su konačno stvar prošlosti. Uživajte u osećaju bez dlačica i izgledajte i osećajte se neverovatno svakoga dana.

Da biste najbolje iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na: www.philips.com/welcome. Za dodatne informacije, posetite www.philips.com/lumea i pronađite savete naših stručnjaka, video zapise sa uputstvima i često postavljana pitanja kako biste maksimalno iskoristili Lumea aparat.

Prikaz aparata (sl. 1)

- 1 Prozor za emitovanje svetlosti sa ugrađenim UV filterom
- 2 Dodaci
 - a Dodatak za telo
 - b Dodatak za lice (SC1997, SC1998 i SC1999)
 - c Dodatak za bikini (SC1998, SC1999)
- 3 Reflektor unutar dodatka
- 4 Ugrađeni bezbednosni sistem
- 5 Senzor nijanse kože
- 6 Elektronski kontakti
- 7 Dugme za emitovanje svetlosti
- 8 Otvor za elektronske kontakte
- 9 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 10 Indikatori intenziteta (1–5)
- 11 Indikator 'spremno za emitovanje svetlosti'
- 12 Ventilacioni otvori
- 13 Utičnica za aparat
- 14 Adapter
- 15 Mali utikač
- 16 Tašna (nije prikazano)

Ko ne sme da koristi Lumea aparat? Kontraindikacija

Opšti uslovi

- Nikada ne koristite aparat ako je tip vaše kože V ili VI (retko ili nikada ne izgorite na suncu, veoma tamna preplanulost). U ovom slučaju postoji rizik od nastanka reakcija na koži, kao što su hiperpigmentacija i hipopigmentacija, jako crvenilo ili opekotine.

Napomena: Da biste proverili da li vaš tip kože dozvoljava upotrebu ovog uređaja, pogledajte tabelu nijansi kože sa brojem 2 na rasklopioj stranici.



- Nikada ne koristite aparat ako ste trudni ili dojite jer on nije testiran na trudnicama i dojiljama.
- Nikada ne koristite aparat ako imate bilo kakve aktivne implantate kao što su pejsmejker, neurostimulator, insulinska pumpa itd.

Lekovi/istorija

Nikada nemojte da koristite aparat ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

- Ukoliko vam je koža u skorije vreme tretirana alfa-hidroksi kiselinama (AHA), beta-hidroksi kiselinama (BHA), topikalnim isotretinoinom i azelaičnom kiselinom.
- Ukoliko ste u bilo kojem obliku uzimali isotretinoin Accutane ili Roaccutane u poslednjih šest meseci. Ovaj tretman čini kožu osetljivijom na kidanje, ozleđivanje i iritiranje.
- Ukoliko uzimate fotosenzitivne preparate ili lekove, proverite uputstvo za primenu leka i nikada nemojte da koristite aparat ukoliko je navedeno da može doći do alergijske reakcije na svetlost, fototoksične reakcije ili je zabranjeno izlaganje sunčevoj svetlosti kada uzimate lek.

- Ukoliko uzimate antikoagulanate, što obuhvata i čestu upotrebu aspirina, tako da se ne dozvoljava pauza u uzimanju od najmanje jedne nedelje pre primene tretmana.

Nikada ne koristite aparat:

- Ukoliko ste primali terapiju zračenjem ili hemoterapiju u poslednja tri meseca.
- Ukoliko uzimate lekove protiv bolova koji smanjuju osetljivost kože na toplotu.
- Ukoliko uzimate imunosupresivne lekove.
- Ukoliko ste imali hirurški zahvat u poslednje tri nedelje na oblastima koje će biti tretirane.

Poremećaji/bolesti

Nikada ne koristite aparat:

- Ukoliko imate dijabetes ili druge sistemske ili metaboličke bolesti.
- Ukoliko imate kongestivnu srčanu slabost.
- Ukoliko imate bolest povezanu sa fotosenzitivnošću, kao što je polimorfna svetlosna erupcija (PMLE), solarna urtikarija, porfirija itd.
- Ukoliko imate istoriju bolesti kolagena, uključujući stvaranje keloidnih ožiljaka ili istoriju teškog zarastanja rana.
- Ukoliko imate epilepsiju sa osetljivošću na svetlost.
- Ukoliko je vaša koža osetljiva na svetlost, uz laku pojavu osipa ili alergijske reakcije.
- Ukoliko imate oboljenje kože kao što je aktivni rak kože i ako imate istoriju raka kože ili neki drugi rak lokalizovan u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko imate istoriju vaskularnih oboljenja, kao što je prisustvo proširenih vena ili vaskularne ektazije u zonama koje će biti tretirane.
- Ukoliko imate neko hematološko oboljenje.
- Ukoliko imate istoriju imunosupresivnih oboljenja (što podrazumeva HIV infekciju ili AIDS).

Stanje kože

Nikada ne koristite aparat:

- Ukoliko imate infekcije, ekceme, opekotine, upaljene folikule, otvorene razderotine, abrazije, herpes simpleks (bolne afte), rane ili lezije i hematome u zonama koje će biti tretirane.
- Na iritiranoj (pocrveneloj ili posečenoj), izgoreloj, nedavno preplanuloj ili samopotamnjenoj koži.
- Na sledećim zonama: na mladežima, pegama, proširenim venama, zonama tamne pigmentacije, ožiljcima, anomalijama na koži bez konsultacije sa lekarom. To može da izazove opekotine i promenu boje kože, što može da oteža identifikovanje kožnih bolesti.
- Na sledećim zonama: na izraslinama, tetovažama ili trajnoj šminki.

Oblasti/zone

Nikada nemojte da koristite aparat na sledećim zonama:



- Oko očiju i na obrvama ili blizu njih.
- Na usnama, bradavicama, areolama, usminama, vagini, anusu niti u unutrašnjosti nozdrva i ušiju.
- Muškarci ne smeju da koriste aparat na licu i vratu, uključujući i čitavu zonu rasta brade niti u oblasti genitalija.
- Na oblastima gde koristite dugotrajne dezodoranse. Može doći do reakcija na koži.
- Preko ili u blizini bilo čega veštačkog, kao što su silikonski implantati, potkožni priključci (npr. za insulin) ili pirsing.

Napomena: Ova lista nije sveobuhvatna. Ako niste sigurni da li smete da koristite aparat, savetujemo vam da se obratite svom lekaru.

Važno

Opasnost



- Vodite računa da ne pokvasite aparat i adapter.
- U slučaju da se aparat polomi, nemojte da dodirujete unutrašnji deo kako biste izbegli strujni udar.
- Voda i struja predstavljaju opasnu kombinaciju. Nemojte da koristite ovaj aparat u vlažnim okruženjima (npr. blizu napunjene kade, tuša ili napunjenog bazena).

Upozorenje

- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe odgovorne za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala aparatom.
- Aparat nije namenjen za decu mlađu od 15 godina. Tinejdžeri starosti između 15 i 18 godina mogu da koriste aparat uz saglasnost i/ili pomoć roditelja ili staratelja. Odrasle osobe starije od 18 godina mogu slobodno da koriste aparat.
- Uvek proverite aparat pre nego što počnete da ga koristite. Nemojte da koristite aparat ili adapter (uključujući kabl) ako su oštećeni.
- Nemojte da koristite aparat ako je polomljen UV filter na prozoru za emitovanje svetlosti.
- Nemojte da menjate ili odsecate nijedan deo adaptera ili kabla, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Nemojte da koristite nikakvu običnu ili hemijsku olovku da biste označili oblasti koje se tretiraju. Ovo može da izazove opekotine na koži.

- Uklanjanje dlaka izvorima intenzivne pulsne svetlosti može kod nekih osoba da prouzrokuje povećani rast dlaka. Na osnovu trenutno dostupnih podataka, grupe sa najvećim rizikom od pojave ove reakcije su žene poreklom sa Mediterana, Bliskog Istoka i Južne Azije kojima su tretirane zone na licu i vratu.
- Prozor za emitovanje svetlosti može da postane veoma topao nakon korišćenja. Nemojte dodirivati unutrašnji deo prozora za emitovanje svetlosti pre nego što se ohladi.
- Ovaj aparat se napaja električnom energijom. Adapter treba da bude priključen na zidnu utičnicu da bi aparat radio. Ovaj adapter pruža dodatne funkcije kako bi se obezbedio bezbedan rad i ne sme se zameniti drugim tipom adaptera. Koristite samo jedinicu za napajanje koja može da se skida (S036Nx2400150, pri čemu x zavisi od tipa utičnice), a koja se isporučuje sa ovim aparatom (vidi simbol). Referentni broj se nalazi na adapteru.



Napomena: Ukoliko primetite promenu nijanse kože od prethodnog tretmana (npr. zbog sunčanja), preporučujemo vam da obavite testiranje kože i da sačekate 30 minuta pre sledećeg tretmana.

Da biste sprečili oštećenja:

- Proverite da li vazduh slobodno teče kroz ventilacione otvore na aparatu.
- Nemojte nikada da izlažete aparat udarima niti da ga drmate ili bacate.
- Ukoliko unosite aparat iz veoma hladnog u veoma toplo okruženje ili obrnuto, sačekajte približno 3 sata pre nego što ga budete koristili.
- Odlazite aparat na suvom mestu na kom nema prašine.
- Nemojte koristiti aparat na temperaturama koje su niže od 15°C ili više od 35°C.
- Aparat odlazite na temperaturi između 25°C i 60°C kako mu ne biste skratili vek trajanja.

- Da biste sprečili oštećenja, nemojte da dugo izlažete aparat direktnoj sunčevoj ili drugoj UV svetlosti.

Oprez

- Ovaj aparat je namenjen isključivo za uklanjanje neželjenih dlaka iz zona ispod jagodičnih kostiju. Nemojte ga koristiti u bilo koje druge svrhe. Ako tako uradite, izlažete se opasnoj situaciji. Muškarci ne smeju da koriste aparat na licu i vratu, uključujući i čitavu zonu rasta brade i oblast genitalija.



- Ovaj aparat ne može da se pere. Nikada ne uranjajte aparat u vodu i nemojte ga prati pod mlazom vode.
- Iz higijenskih razloga, aparat bi trebalo da koristi samo jedna osoba.
- Ovaj aparat koristite samo sa postavkama koje su pogodne za vaš tip kože. Upotreba sa višim postavkama od preporučenih može da poveća rizik od reakcija na koži i sporednih efekata.
- Za čišćenje aparata nemojte da koristite kompresovani vazduh, jastučice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton.
- Difuzna svetlost koja se emituje iz aparata je bezopasna za oči. Nemojte da gledate u bljesak dok koristite aparat. Nije neophodno da nosite naočare tokom upotrebe. Koristite aparat u dobro osvetljenoj prostoriji tako da vas svetlost manje zaslepljuje.
- U slučaju ispitivanja ili popravke uvek vratite aparat u ovlašćeni Philips servisni centar. Popravke od strane nekvalifikovanih osoba mogu da izazovu opasnost po korisnika.
- Nikad ne ostavljajte aparat bez nadzora kada je uključen. Nakon upotrebe obavezno isključite aparat.
- Nemojte da koristite aparat ako se neki od uslova iz poglavlja „Ko ne sme da koristi Lumea aparat? Kontraindikacije“ odnosi na vas.


- Sunčanje korišćenjem prirodnog ili veštačkog svetla može da utiče na osetljivost i boju vaše kože. Obavite testiranje kože da biste odredili odgovarajuće postavke za intenzitet svetlosti.
- Pre nego što koristite aparat Lumea, treba da očistite kožu i proverite da li je bez dlačica, potpuno suva i bez masnoća.
- Nemojte da tretirate istu zonu na koži više od jednom tokom sesije. Ovo ne povećava efikasnost tretmana, ali povećava rizik od pojave reakcija na koži.
- Aparat Lumea nikad ne bi trebalo da izaziva bol. Ako se ne osećate prijatno, smanjite postavku za intenzitet svetlosti.

Elektromagnetna polja (EMF)


Ovaj Philips aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.


Kako IPL funkcioniše

Pomoću IPL tehnologije, nežni svetlosni impulsi se primenjuju na kožu i koren dlake ih apsorbuje. Što su dlačice tamnije, bolje se apsorbuju svetlosni impulsi.

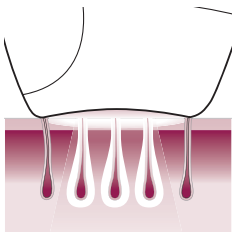

Svetlosni impulsi stimulišu folikule da pređu u fazu mirovanja. Kao rezultat, dlačice prirodno ispadaju i sprečen je njihov ponovni rast, ostavljajući vašu kožu neprekidno svilenkasto glatkom.

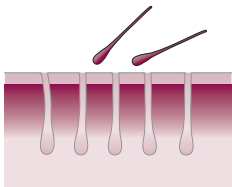

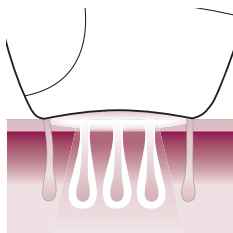


Ciklus rasta dlačica se sastoji od različitih faza. IPL tehnologija je efikasna jedino kada su dlačice u svojoj fazi rasta. Nisu sve dlačice u fazi rasta u isto vreme. Iz tog razloga preporučujemo raspored tretmana u trajanju od 8 nedelja uz obnavljanja, da biste osigurali da su sve dlačice efikasno tretirane u fazi rasta.

Napomena: Tretman aparatom Lumea nije efikasan ako imate plave ili svetlo plave dlačice jer one ne apsorbuju dovoljno svetlosti. U nastavku možete da vidite boje dlačica za koje je aparat Lumea podesan i efikasan.

Pogodna boja dlačica na telu

Napomena: Da biste proverili da li boja dlačica na telu dozvoljava upotrebu ovog uređaja, pogledajte tabelu nijansi dlačica sa brojem 3 na rasklopivoj stranici.

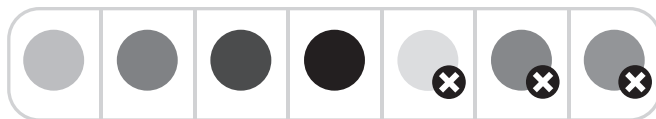

Šta možete da očekujete

Odmah nakon prvog tretmana

Nakon prvog tretmana, može proći 1 do 2 nedelje dok dlačice ne otpadnu. U prvoj nedelji nakon početnih tretmana, i dalje ćete videti da neke dlačice rastu. Ovo su po svoj prilici dlačice koje nisu bile u svojoj fazi rasta tokom prvih tretmana.

Nakon 2–3 tretmana


Nakon 2–3 tretmana, trebalo bi da vidite primetno smanjenje rasta dlačica. Međutim, da biste efikasno tretirali sve dlačice, važno je da nastavite sa tretmanima prema preporučenom rasporedu.

Nakon 4–5 tretmana

Nakon 4–5 tretmana, trebalo bi da vidite značajno smanjenje rasta dlačica u oblastima koje ste tretirali aparatom Lumea. Smanjenje gustine dlačica bi takođe trebalo da bude vidljivo. Nastavite tretiranje sa čestim doterivanjima (svakih 4–8 nedelja) da biste održali postignute rezultate.

Saveti za sunčanje

Sunčanje pomoću prirodne ili veštačke sunčeve svetlosti

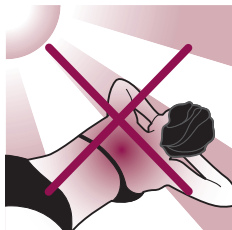

Namerno izlaganje kože prirodnoj ili veštačkoj sunčevoj svetlosti u cilju sunčanja utiče na osetljivost i boju vaše kože. Stoga je važno da znate sledeće:

- Nakon svakog tretmana, sačekajte najmanje 48 sata pre sunčanja. Čak i nakon 48 sati, uverite se da na tretiranoj koži nema nikakvog crvenila koje je posledica tretmana.
- U slučaju izlaganja kože suncu (bez namernog sunčanja) u periodu od 48 sati nakon tretmana, koristite preparat za sunčanje SPF 50+ na tretiranim oblastima na telu. Nakon ovog perioda, možete da koristite preparat za sunčanje SPF 30+ za dve nedelje.
- Nakon sunčanja, sačekajte najmanje dve nedelje pre korišćenja aparata Lumea. Obavite testiranje kože da biste odredili odgovarajuće postavke za intenzitet svetlosti.
- Nemojte da koristite aparat Lumea na delovima tela sa opekotinama od sunca.


Napomena: Povremeno i indirektno izlaganje sunčevim zracima se ne karakteriše kao sunčanje.

Preplanulost pomoću krema


Ukoliko ste koristili losion za veštačko potamnjenje kože, sačekajte da veštačka preplanulost potpuno nestane pre korišćenja ovog aparata.

Pre korišćenja aparata Lumea

Prethodno tretirajte kožu

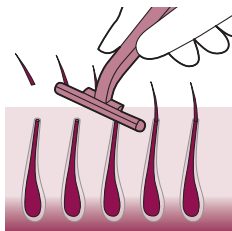

Pre korišćenja aparata Lumea, trebalo bi da prethodno tretirate svoju kožu uklanjanjem dlačica sa njene površine. Ovo omogućava da delovi dlačica ispod površine kože apsorbuju svetlost, što osigurava efikasnost tretmana. Možete da ih obrijete, podrežete trimmerom, epilirate ili uklonite voskom. Nemojte da koristite kreme za uklanjanje dlačica jer hemikalije mogu da izazovu reakcije na koži.

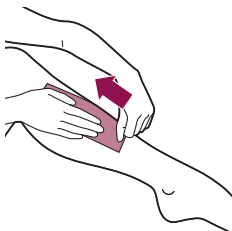


Ukoliko odlučite da voskom uklonite dlačice, sačekajte da prođe 24 sata pre nego što budete koristili aparat Lumea kako bi se koža odmorila. Preporučujemo vam da se pre tretmana istuširate kako biste uklonili sve moguće ostatke voska sa kože.

- 1 Prethodno tretirajte oblasti koje planirate da tretirate aparatom Lumea.
- 2 Očistite kožu i proverite da li je bez dlačica, potpuno suva i bez masnoća.

Napomena: Kada dlačice prestanu da ponovo rastu, što se obično dešava nakon 4-5 tretmana, više nećete morati da prethodno tretirate kožu pre korišćenja aparata.

Testiranje kože

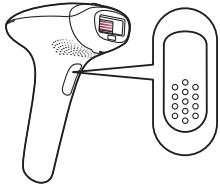

Prilikom prvog korišćenja aparata Lumea ili nakon nedavnog sunčanja, obavite testiranje kože na svakoj oblasti koju ćete da tretirate. Testiranje kože je neophodno da biste proverili njenu reakciju na tretman i da biste odredili ispravne postavke za intenzitet svetlosti za svaku oblast na telu.

- 1 Odaberite zonu u blizini zone koju nameravate da tretirate.
- 2 Isključite aparat. Uverite se da ste izabrali postavku broj 1.
- 3 Stavite aparat na kožu i pritisnite dugme za emitovanje svetlosti.
- 4 Prelazite aparatom preko kože i dodite do sledeće oblasti koju želite da tretirate.
- 5 Povećajte postavku za jedan nivo, emitujte svetlost i predite aparatom do sledeće oblasti. Ponovite ovo za sve nivoe u okviru preporučenog opsega za vaš tip kože.
- 6 Nakon testiranja kože, sačekajte 24 sata i proverite da li se na koži primećuje reakcija. Ukoliko ima reakcija, odaberite najveću postavku koja nije izazvala reakciju na koži za naredno korišćenje. Testiranje kože se izvodi na svim područjima koja želite da tretirate.

Upotreba aparata Philips Lumea


Senzor nijanse kože

Za dodatnu bezbednost integrisani senzor nijanse kože meri nijansu na početku svake sesije i povremeno tokom nje. Ako detektuje nijansu kože koja je suviše tamna za tretman aparatom Lumea, aparat se automatski isključuje kako bi sprečio pojavu reakcija na koži. Ovo znači da on ne emituje impulse kada pritisnete dugme za emitovanje svetlosti.


Dodaci

Postavljanje i uklanjanje

Da biste postavili dodatak, jednostavno ga natakните na prozor za emitovanje svetlosti.

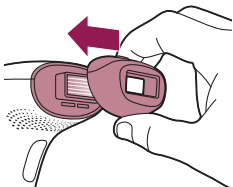

Da biste uklonili dodatak, skinite ga sa prozora za emitovanje svetlosti.

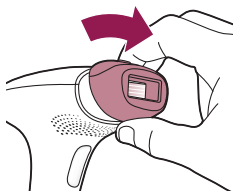

Dodatak za telo

Možete da koristite dodatak za telo da biste tretirali neželjene dlačice na nekoliko oblasti na telu ispod vrata. Možete da ga koristite za brzi tretman većih oblasti kao što su, na primer, noge.

Dodatak za lice (SC1997, SC1998, SC1999)


Dodatak za lice ima ugrađen dodatni filter za svetlost za posebnu bezbednost i stoga može da se koristi za tretiranje neželjenih dlačica na gornjoj usni, bradi i zulfima.

Oprez:

- Nemojte da tretirate obrve pomoću aparata Lumea.
- Kada tretirate oblast iznad gornje usne, budite pažljivi da ne emitujete svetlost na usnu.

Dodatak za bikini (SC1998, SC1999)


Dodatak za bikini zonu ima specijalni filter za tretiranje grubljih dlačica u ovoj zoni.

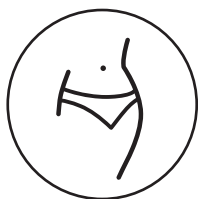

Izbor odgovarajućeg intenziteta svetlosti

Aparat Lumea pruža 5 različitih intenziteta svetlosti. U zavisnosti od tipa vaše kože i nivoa intenziteta svetlosti koji vam najviše odgovara, možete da izaberete pravu postavku za intenzitet svetlosti.

- 1 Pogledajte tabelu u nastavku da biste izabrali odgovarajuće postavke.

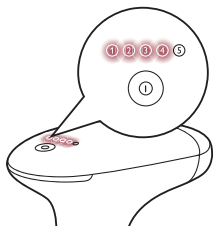

- 2** Da biste podesili postavku intenziteta svetlosti, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje jednom ili više puta dok ne dodete do željene postavke. Svetlo odgovarajućeg intenziteta svetli belo.

Napomena: Aparat se automatski isključuje kada je nijansa vaše kože suviše tamna, kako bi sprečio pojavu reakcija na koži. Integrisani senzor nijanse kože vam ne daje obaveštenje koju postavku intenziteta svetlosti da koristite, jer vam Philips Lumea daje slobodu da izaberete intenzitet svetlosti koji je najpogodniji za vas.

- 3** Aparat Lumea nikad ne bi trebalo da izaziva bol. Ako se ne osećate prijatno, smanjite postavku za intenzitet svetlosti.
- 4** Nakon nedavnog sunčanja, obavite testiranje kože da biste odredili pravu postavku za intenzitet svetlosti.


Tip kože	Nijansa kože	Postavka intenziteta svetlosti
I	Bela; uvek izgorite na suncu i nikada ne postignete preplanulost.	4/5
II	Bež; lako izgorite na suncu i postizete minimalnu preplanulost.	4/5
III	Svetlo braon; lako izgorite na suncu i lagano postizete preplanulost do svetlobraon boje.	4/5
IV	Srednje braon; retko izgorite i lako pocrnite.	3/4
V	Tamnobraon; retko izgorite na suncu i vrlo lako pocrnite.	Ne možete da koristite aparat
VI	Braon-crna ili tamnija; retko ili nikada ne izgorite na suncu i postizete veoma tamnu preplanulost.	Ne možete da koristite aparat

Napomena: Da biste proverili da li vaš tip kože dozvoljava upotrebu ovog uređaja, pogledajte tabelu nijansi kože sa brojem 2 na rasklopivoj stranici.




Napomena: Vaša koža može različito da reaguje tokom različitih dana/prilika iz nekoliko razloga.


Rukovanje aparatom

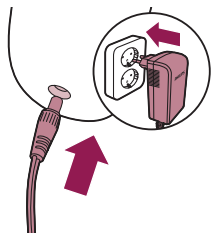

- 1 Pre upotrebe, očistite dodatke i prozor za emitovanje svetlosti.
- 2 Uključite mali utikač u aparat i uključite adapter u zidnu utičnicu.
- 3 Uključite aparat i izaberite pravi intenzitet svetlosti za vašu nijansu kože.

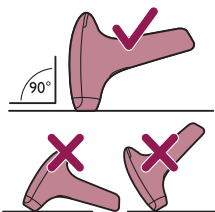


- 4 Aparat postavite na kožu pod pravim uglom i pritisnite čvrsto, tako da dodatak i integrisani bezbednosni sistem budu u kontaktu sa kožom. Integrisani bezbednosni sistem sprečava slučajno emitovanje svetlosti bez dodira sa kožom.

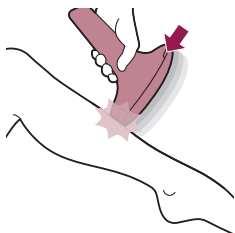

- 5 Pritisnite aparat čvrsto na svoju kožu da biste obezbedili pravilan dodir sa njom. Aparat zatim automatski obavlja analizu nijanse kože i indikator „spremno za emitovanje“ treperi belom bojom kako bi ukazao na to da možete da nastavite sa tretmanom.


Napomena: Kada indikator „spremno za emitovanje“ svetli narandžasto, vaša koža nije pogodna za tretman. U ovom slučaju, aparat se automatski isključuje. Možete da pokušate da koristite aparat na drugim oblastima sa svetlijom nijansom kože.

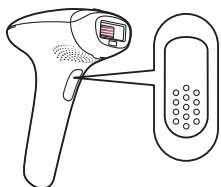

- 6 Pritisnite dugme za emitovanje svetlosti da biste emitovali svetlost. Trebalo bi da osetite toplotu usled emitovanja svetlosti.

Napomena: Svetlost koja se emituje iz aparata je štetna za oči. Nije neophodno da nosite naočare tokom upotrebe. Koristite aparat u dobro osvetljenoj prostoriji tako da vas svetlost manje zaslepljuje.

- 7 Postavite aparat na sledeću oblast koju želite da tretirate. Aparatu je nakon svakog svetlosnog impulsa potrebno i do 3,5 sekunde da se pripremi za sledeći impuls. Možete da otpustite svetlosni impuls kada se indikator „spremno za emitovanje“ ponovo upali.

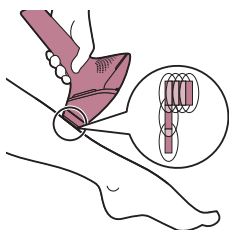

- 8 Da biste bili sigurni da ste tretirali sve oblasti, otpustite svetlosne impulse blizu jedan drugome. Delotvorna svetlost emituje samo iz prozora za emitovanje svetlosti, stoga bi trebalo da bude određenih preklapanja. Budite sigurni, međutim, da istu oblast tretirate samo jednom. Emitovanje svetlosti na istoj oblasti dva puta ne povećava efikasnost tretmana, ali povećava rizik od pojave reakcija na koži.

SAVET: Ako koristite aparat Lumea na bikini zoni i želite da ostavite neke dlačice, uverite se da senzor nijanse kože nije postavljen na preostalim dlačicama tokom tretmana, jer to može da izazove blokadu aparata.

- 9 Kada završite sa tretmanom, pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga dve sekunde da biste isključili aparat.

Dva režima tretmana: „Tapkanje i emitovanje svetlosti“ i „Prevlačenje i emitovanje svetlosti“

Aparat Philips Lumea ima dva režima tretmana za praktičniju upotrebu na različitim oblastima na telu:

- Režim „Tapkanje i emitovanje svetlosti“ je idealan za tretiranje malih ili oblih oblasti, poput kolena i pazuha. Jednostavno pritisnite i otpustite dugme za emitovanje svetlosti da biste emitovali svetlosni impuls.

- Režim „Pomeranje i emitovanje” omogućava praktičnu upotrebu na većim oblastima poput nogu. Držite dugme za emitovanje svetlosti pritisnutim dok prelazite aparatom preko kože da biste otpustili nekoliko svetlosnih impulsa u nizu.

Preporučeni raspored tretmana

Početna faza

Za prvih 4 do 5 tretmana, savetujemo vam da koristite aparat Philips Lumea jedanput na svake dve nedelje da biste osigurali tretiranje svih dlačica.




Faza doterivanja

Nakon faze početnog tretmana (4–5 tretmana), preporučujemo vam doterivanje na svakih 4 do 8 nedelja kada primetite da dlačice ponovo rastu. Ovo vam pomaže da održavate postignute rezultate i uživajte u glatkoj koži mesecima. Vreme između tretmana može da se razlikuje u zavisnosti od ponovnog rasta dlačica i od različitih delova tela.



Preporučeni dodaci i trajanje tretmana prema delu tela

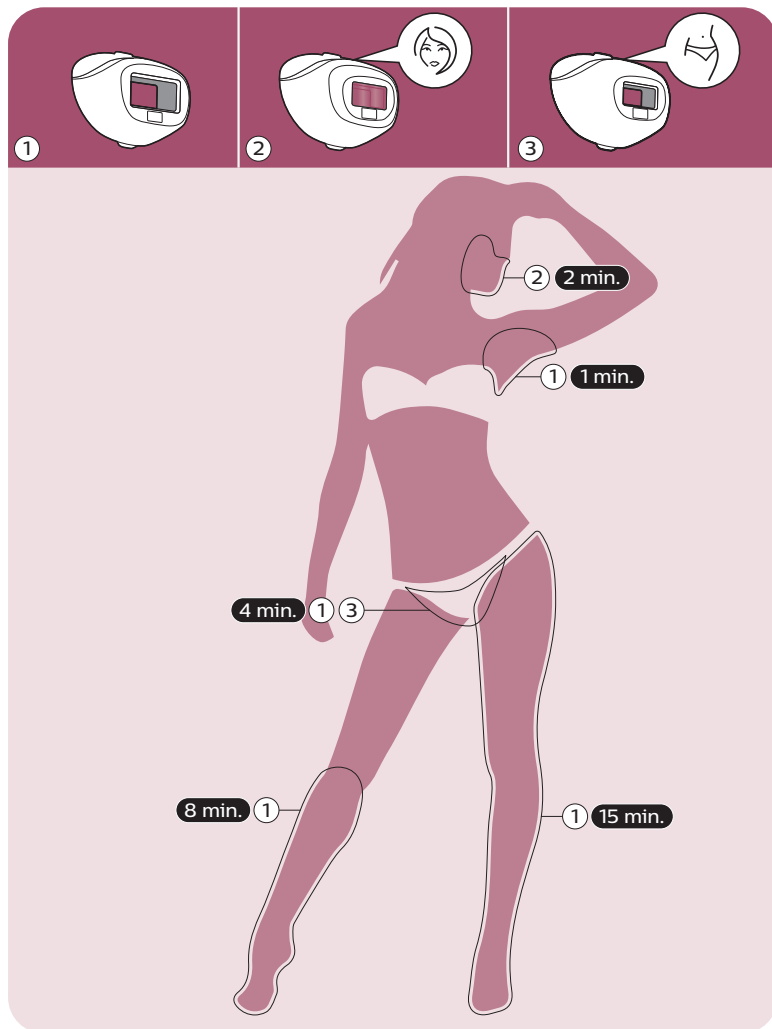

SC1994 (①)

SC1997 (①, ②)

SC1998, SC1999 (①, ②, ③)

Nakon upotrebe

Uobičajene reakcije na koži

Na koži može da se pojavi blago crvenilo i/ili koža može da pecka, bridi ili da bude vruća. Ova reakcija je sasvim bezopasna i brzo nestaje.

Usled brijanja ili kombinacije brijanja i tretmana svetlom može da dođe do pojave suve kože i svraba. Tu zonu možete da ohladite ledom ili navlaženom maramicom. Ako koža ostane suva, na tretiranu zonu možete da naneseite hidrantnu kremu bez mirisa 24 sata nakon tretmana.

Retki sporedni efekti

- Opekotine, preterano crvenilo (npr. oko folikula dlake) i otok: do ovih reakcija dolazi retko. One nastaju kao rezultat korišćenja prevelikog intenziteta svetlosti za vašu boju kože. Ako te reakcije ne nestanu u roku od tri dana, savetujemo vam da se obratite lekaru. Sačekajte sa sledećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i obavezno koristite manji intenzitet svetlosti.
- Promena boje kože: do ovoga dolazi veoma retko. Promena boje kože manifestuje se tamnijim (hiperpigmentacija) ili svetlijim delom (hipopigmentacija) od okolne zone. Ovo je rezultat korišćenja prevelikog intenziteta svetlosti za vašu boju kože. Ako promena boje ne nestane u roku od dve nedelje, savetujemo vam da se obratite lekaru. Nemojte da tretirate zone koje su promenile boju dok promena ne nestane i dok koža ne vrati normalnu boju.
- Infekcija kože je veoma retka ali predstavlja mogući rizik nakon (mikro)rana, opekotina, iritacija itd.
- Epidermalno zagrevanje (jasno definisana smeđa površina koja se često javlja sa tamnijim tonovima kože i koju ne prati suva koža): Do ove reakcije dolazi veoma retko. U slučaju da ova reakcija ne nestane u roku od jedne nedelje, savetujemo vam da se obratite lekaru. Sačekajte sa sledećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i obavezno koristite manji intenzitet svetlosti.
- Stvaranje mehura (izgledaju kao mali mehurići na površini kože): do ovoga dolazi veoma retko. U slučaju da ova reakcija ne nestane u roku od jednog meseca ili da se koža inficira, savetujemo vam da se obratite lekaru. Sačekajte sa sledećim tretmanom dok se koža potpuno ne oporavi i obavezno koristite manji intenzitet svetlosti.
- Ožiljci: često su sekundarni efekat opekotina, a zarastanje može da potraje i duže od mesec dana.

- Folikulitis (oticanje oko folikula dlake u kombinaciji sa formiranjem bubuljice): ova reakcija se javlja veoma retko i rezultat je prodiranja bakterija u oštećenu kožu. U slučaju da dođe do ove reakcije, savetujemo vam da se obratite lekaru, pošto folikulitis možda zahteva antibakterijsku mast.
- Bol: do ovoga može da dođe tokom ili nakon tretmana ako ste aparat koristili na koži sa dlačicama, ako uređaj koristite uz intenzitet svetlosti koji je prejak za vašu boju kože, ako istu zonu tretirate više puta i ako aparat koristite na otvorenim ranama, upaljenim delovima, infekcijama, tetovažama, opekotinama itd.

Naknadna nega


Nakon upotrebe, možete bezbedno da nanese losione, kreme, dezodorans, hidrantnu kremu ili kozmetiku na tretirane oblasti. Ako se pojavi iritacija ili crvenilo na koži nakon tretmana, sačekajte da ono nestane pre nanošenja bilo kakvog proizvoda na kožu. Ako se pojavi iritacija nakon primene proizvoda na koži, isperite proizvod vodom.

Napomena: može doći do reakcija na koži čak i kada sledite sva uputstva. U tom slučaju prekinite da koristite aparat i kontaktirajte centru za podršku korisnicima u vašoj zemlji.

Čišćenje i odlaganje

Nakon upotrebe isključite aparat, izvucite utikač iz utičnice i ostavite ga da se ohladi.


- 1 Skinite dodatak.

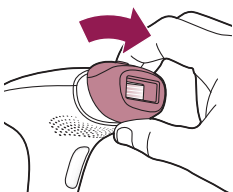

- 2 Navlažite mekanu krpu koju ste dobili sa aparatom pomoću nekoliko kapi vode i upotrebite je za čišćenje sledećih delova:
 - prozor za emitovanje svetlosti;
 - spoljna površina dodatka;
 - reflektor unutar dodatka.
 - crvenkasto filtersko staklo unutar dodatka za lice.

- 3 Ostavite sve delove da se potpuno osuše na vazduhu.

- 4 Aparat odložite na suvom mestu bez prašine, na temperaturi između -25°C i 60°C.

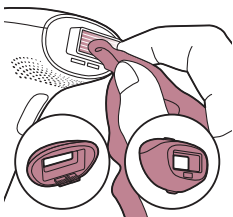

Garancija i podrška

Ako su vam potrebne informacije ili podrška, posetite stranicu www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni garantni list.

Reciklaža



- Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom (2012/19/EU).
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem otpadnih električnih i elektronskih proizvoda. Pravilno odlaganje pomaže u sprečavanju negativnih posledica po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Tehničke specifikacije

SC1994, SC1997, SC1998, SC1999

Nominalni napon	100 V – 240 V
Nominalna frekvencija	50 Hz – 60 Hz
Nominalna ulazna snaga	36 W
Zaštita od strujnog udara	Klasa II
Stepen zaštite	IP 30 (EN 60529)
Uslovi rada	Temperatura: od +15°C do 35 °C
Temperatura prostorije za odlaganje	-25°C do 60°C
Vlažnost u prostoriji za odlaganje	manja od 90% (bez kondenzacije)
Radni pritisak	700 hPa – 1060 hPa
Visina	Najviše 2000 m
Emitovane talasne dužine	530 nm – 1400 nm
Optičko izlaganje	2,5 - 5,0 J/cm ² , u zavisnosti od odabranog podešavanja
Maksimalna optička energija	20 J
Trajanje pulsiranja	<1,5 ms
Vreme ponavljanja	1 – 3,5 s, u zavisnosti od odabranog podešavanja
Optička homogenost	Maks. odstupanje od prosečne optičke izloženosti na zoni primene tretmana je +/- 20%

Rešavanje problema

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite Centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Aparat/adapter se zagreva tokom upotrebe	To je normalno.	Nije potrebno reagovati.
Kada postavim uređaj na kožu, on ne otpušta svetlosni impuls. Indikator „spremno za emitovanje“ treperi narandžasto, a zatim se pali neprekidno narandžasto svetlo.	Nijansa vaše kože na delu tela koji treba da se tretira je suviše tamna.	Tretirajte druge delove tela gde je nijansa kože svetlija pomoću aparata Lumea.
Indikator „spremno za emitovanje“ se ne uključuje kada dodatak postavim na kožu, ali ventilator za rashlađivanje radi.	Aparat nije potpuno u kontaktu sa vašom kožom.	Aparat postavite na kožu pod pravim uglom, tako da integrisani bezbednosni sistem bude u kontaktu sa kožom.
Indikator „spremno za emitovanje“ svetli belom bojom, ali aparat ne emituje svetlost kada pritisnem dugme za emitovanje svetlosti.	Aparat treba da se resetuje.	Da biste resetovali aparat, isključite ga, a zatim ga ponovo uključite.
Indikatori intenziteta trepere naizmjenično, počev od 1 do 5, a zatim od 5 do 1.	Zaštita od pregrevanja je aktivirana.	Ostavite aparat da se ohladi dok svi indikatori ne prestanu da trepere. Nakon približno 5 minuta aparat će se automatski isključiti.
Svi indikatori intenziteta trepere.	Aparat treba da se resetuje.	Da biste resetovali uređaj, isključite ga i isključite adapter iz utičnice. Zatim ga uključite u utičnicu i ponovo ga uključite.
Reakcija kože nakon tretmana traje duže nego obično.	Upotrebili ste postavku za intenzitet svetlosti koja je prevelika za vas.	Sledeći put koristite niži intenzitet svetlosti. Pogledajte poglavlje „Upotreba aparata Philips Lumea“, odeljak „Izbor odgovarajućeg intenziteta svetlosti“.

Problem**Mogući uzrok****Rešenje**

Rezultati tretmana nisu zadovoljavajući.

Upotreбили ste postavku za intenzitet svetlosti koja je premala za vas.

Izaberite viši nivo postavke sledeći put.

Niste emitovali svetlost neposredno pored oblasti koju ste prethodno tretirali.

Morate da otpustite svetlosne impulse blizu jedan drugome.

Aparat nije efikasan sa vašom bojom dlačica.

Ako imate bele, sive, svetloplave, plave ili crvene dlačice, tretman nije efikasan.

Ne koristite aparat dovoljno često.

Da biste uspešno uklonili sve dlačice, savetujemo vam da pratite preporučeni raspored tretmana. Možete da smanjite vreme između tretmana, ali nemojte da obavljate tretmane češće od jednom na svake dve nedelje.

Sporije reagujete na IPL tretman.

Nastavite sa upotrebom aparata bar 6 meseci pošto ponovni rast dlačica ipak može da se smanji tokom ovog perioda.

Moj dodatak za telo nema ugrađeno staklo/filter/prozor.

To je normalno.

Dodatak za telo ne sadrži staklo/filter/prozor.



© 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.



www.philips.com
4222.100.8169.1