


Allgemeine Beschreibung

- A Lichtaustrittsfenster mit integriertem UV-Filter
- B Aufsätze
 - 1 Körperaufsatz (für die Körperpartien unterhalb des Halses geeignet)
 - 2 Präzisionsaufsatz (für alle Körperpartien geeignet, einschließlich Oberlippe, Kinn und Wangen)
- C Metallrahmen im Aufsatz
- D Sicherheitssystem (Sicherheitsring mit Kontaktschaltern)
- **E** Blitztaste
- F Lichtstärkeanzeigen (1 bis 5)
- G ▲ Taste zur Erhöhung der Lichtstärke
- H ▼ Taste zur Senkung der Lichtstärke
- I Ladeanzeige und Akkustandsanzeige
- J Ein-/Ausschalter
- K Bereitschaftsanzeige
- L Buchse für Gerätestecker
- M Lüftungsöffnung



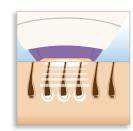

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Enthaarung mit Licht ist eine der wirksamsten Methoden für eine langanhaltende Entfemung von lästigem Körperhaar. Diese innovative, lichtbasierte Technologie, die das Nachwachsen von Körperhaar verhindert, können Sie jetzt ganz komfortabel zu Hause anwenden – wann und wo Sie möchten.

Philips Lumea Precision ermöglicht die Behandlung von lästigen Haaren am gesamten Körper, einschließlich des Gesichts (Oberlippe, Kinn und Wangen), durch die Verwendung von zwei maßgeschneiderten Aufsätzen.

Das Philips Lumea Precision Haarentfernungssystem richtet sanfte Lichtimpulse auf Haare und Haarwurzeln unter der Haut, wodurch das Haar innerhalb von 2 Wochen ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Weitere Informationen zum Philips Lumea Precision IPL Haarentfernungssystem finden Sie unter www.philips.com/Lumea.

Vor dem Gebrauch

1 Passen Sie auf!

Dieses Gerät ist nicht für jede Frau geeignet. Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Benutzerhandbuch. Um sicherzugehen, dass das Philips Lumea Precision Haarentfernungssystem für Sie geeignet ist und Sie es sicher verwenden können, *lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem ersten Gebrauch genau durch.*

2 Tabelle mit Empfehlungen für die Lichtintensität:

Ermitteln Sie anhand der nachstehenden Tabelle, welche Lichtintensität für Ihre Haut- und Haarfarbe am besten geeignet ist, und prüfen Sie, ob dies die richtige Enthaarungsmethode für Sie ist. Die Enthaarung ist bei höheren Einstellungen nachhaltiger, dennoch sollten Sie die Lichtintensität verringern, wenn Sie Schmerzen oder Unbehagen verspüren. Der Lichtimpuls kann sich auf der Haut warm oder heiß anfühlen, sollte aber nie schmerzhaft sein.

Lesen Sie das Kapitel "Wichtige Hinweise" im Benutzerhandbuch. Manche Medikamente und Krankheiten können bei Verwendung des Lumea zu Nebenwirkungen führen.



Hinweis – Jede Art der Bräunung kann die Sicherheit der Behandlung beeinträchtigen. Warten Sie nach einem Sonnenbad mindestens 48 Stunden, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenden Sie Philips Lumea Precision nicht an Körperpartien mit Sonnenbrand an. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Abschnitt "Hinweise zum Bräunen"

"Hinweise zum Bräunen"

Empfohlene Lichtstärken (1 bis 5)

	Hautmerkmale und Hautfarbe					
Anwendung dieses dukts ist bei Ihrem	Weiß	Beige	Hellbraun	Mittelbraun	Dunkelbraun	Schwarzbraun und dunkler
ut- und Haartyp risikoreich						
Weiß/Grau	×	×	×	×	×	×
Rot))) ×	×	×	×	×	×
Hellblond	×	×	×	×	×	×
Dunkelblond	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
Braun	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
Dunkelbraun	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
Schwarz	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	×
	dulds is bei inven Lund Haartyp sisikoreich Weiß/Grau Rot Heilblond Dunkelblond Braun Dunkelbraun	Anwendung dieses studists ist bei Ihrem it- und Haartyp siskoreich Weiß/Grau Rot Hellblond Zunkelblond 4/5 Braun Anset	Anwendung dieses bulds is the ilbrem it- und Haartyp siskoreich Weiß/Grau X X X Hellblond X X Dunkelblond 4/5 4/5 Braun 4/5 4/5 Dunkelbraun 4/5 4/5	Anwendung dieses blukts ist bei ihrem it- und Haartyp siskoreich Weiß/Grau	Anwendung dieses thuts is the linem it- und Haartyp siskoneich Weiß/Grau X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	Anwendung dieses thuts is to be lineren it- und Haartyp siskoreich Weiß/Grau





Für den Gebrauch vorbereiten

1 Laden Sie das Gerät auf

- 2 Rasieren Sie die zu behandelnden Hautpartien.
- Führen Sie einen Hauttest durch. Wählen Sie dafür einen Bereich nahe der zu behandelnden Hautpartie. Lösen Sie einen Lichtimpuls (siehe die unten angegebenen Schritte 4 7) mit der niedrigsten empfohlenen Intensität für Ihre Hautfarbe aus. Erhöhen Sie die Einstellung um eine Stufe innerhalb der empfohlenen Skala. Warten Sie nach dem Test 24 Stunden, und überprüfen Sie dann die behandelte Hautpartie auf Reaktionen. Sollten Hautreaktionen aufgetreten sein, wählen Sie für weitere Anwendungen die höchste Einstellung, die zu keiner Hautreaktion geführt hat.






Das Gerät benutzen


- 1 Überprüfen Sie die Aufsätze und das Lichtaustrittsfenster auf Haare, Schmutz oder Fasern. Reinigen Sie das Fenster oder die Aufsätze bei Verunreinigungen mit dem beiliegenden Tuch.
- 2 Den richtigen Aufsatz wählen
 - > Körperaufsatz

Der Körperaufsatz ist zur Behandlung von lästigem Körperhaar an Partien unterhalb des Halses vorgesehen (Informationen zu Ausnahmen finden Sie im Kapitel "Wichtig" unter Abschnitt "Wichtige Hinweise"). Verwenden Sie den Körperaufsatz nicht im Gesicht.

> Präzisionsaufsatzz


Der Präzisionsaufsatz enthält einen zusätzlichen integrierten Lichtfilter und ist zur Behandlung von lästigen Haaren an Oberlippe, Kinn oder Wangen vorgesehen. Er kann zudem für andere empfindliche Körperpartien eingesetzt werden, wie zum Beispiel Achselhöhlen und Bikinizone oder schwer erreichbare Stellen.

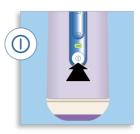

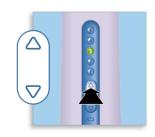

B Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.

4 Drücken Sie die Taste zum Erhöhen oder Verringern der Intensität nach oben bzw. unten, um für die Intensität einen Wert zwischen 1 und 5 einzustellen.

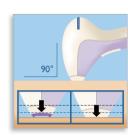


5 Setzen Sie das Gerät in einem 90-Grad-Winkel auf die Haut auf, sodass der Aufsatz und der Sicherheitsring Kontakt zur Haut haben.



6 Drücken Sie den Sicherheitsring unter leichtem Druck ganz gegen die Haut. Sobald alle Kontaktschalter des Geräts Kontakt zur Haut haben, leuchtet die Bereitschaftsanzeige auf der Geräterückseite grün.



7 Drücken Sie die Blitztaste, um einen Lichtimpuls auszulösen. Wurde ein Lichtimpuls ausgelöst, lassen Sie die Taste wieder los. Wiederholen Sie für den nächsten Lichtimpuls die Schritte 5, 6 und 7. Richten Sie immer nur einen Lichtimpuls auf eine Stelle. Nehmen Sie nach jedem Lichtimpuls das Gerät von der Haut.

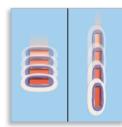

- 8 Um zu verhindern, dass Stellen ausgelassen werden, sollte sich der Behandlungsbereich immer mit einem Teil des zuvor behandelten Bereichs überschneiden.
- 9 Schalten Sie das Gerät nach der Behandlung aus.
- 10 Wenn sich Schmutz am Aufsatz und/oder dem Lichtaustrittsfenster befindet, reinigen Sie den Aufsatz oder das Fenster, bevor Sie das Gerät in der Tasche aufbewahren. Feuchten Sie bei Bedarf das beiliegende Tuch mit Wasser oder hochprozentigem Alkohol zur Reinigung an. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch im Kapitel "Reinigung und Wartung".



Nach der Behandlung


Warten Sie mindestens 24 Stunden, bis alle Rötungen abgeklungen sind, bevor Sie die behandelten Körperpartien der Sonne aussetzen. Bedecken Sie in den zwei Wochen nach der Behandlung die behandelten Bereiche, wenn Sie in die Sonne gehen, oder verwenden Sie einen Sun-Blocker (LSF 30+).



Erzielen optimaler Ergebnisse

Um alle Haare erfolgreich zu entfernen und um zu vermeiden, dass der Haarfollikel wieder aktiv wird, müssen Sie die Behandlungen in den ersten zwei Monaten alle zwei Wochen wiederholen (häufigere Behandlungen führen nicht zu schnelleren oder besseren Ergebnissen).



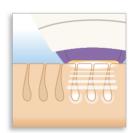

Danach sollte Ihre Haut glatt und haarfrei sein. Um sicherzustellen, dass die Haut glatt und haarfrei bleibt, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier bis sechs Wochen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs und nach Körperpartie variieren. Wenn zwischen den Behandlungen zu viele Haare nachwachsen, verringern Sie einfach den Zeitraum zwischen den Behandlungen wieder.

Für eine wirksame Behandlung sollten Sie den zu behandelnden Bereich vor der Anwendung des Geräts rasieren, solange noch Haare nachwachsen (in der Regel nach den ersten Behandlungen)

Durchschnittliche Behandlungsdauer und empfohlener Aufsatz pro Körperbereich:

Bereich	Ungefähre Behandlungszeit	Empfohlener Aufsatz		
Oberlippe / Kinn / Wangen	1 Minute	Präzisionsaufsatz		
Achselhöhlen	1,5 Minuten pro Achselhöhle	Körper-/Präzisionsaufsatz		
Bikinizone	1,5 Minuten pro Bikinirand	Körper-/Präzisionsaufsatz		
Gesamter Bikinibereich	5 Minuten	Körper-/Präzisionsaufsatz		
Ein Unterschenkel	12 Minuten	Körperaufsatz		
Ein Bein 20 Minuten		Körperaufsatz		





©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Document order number: 4203 000 6815.1