




Guide



de démarrage

PHILIPS
sense and simplicity

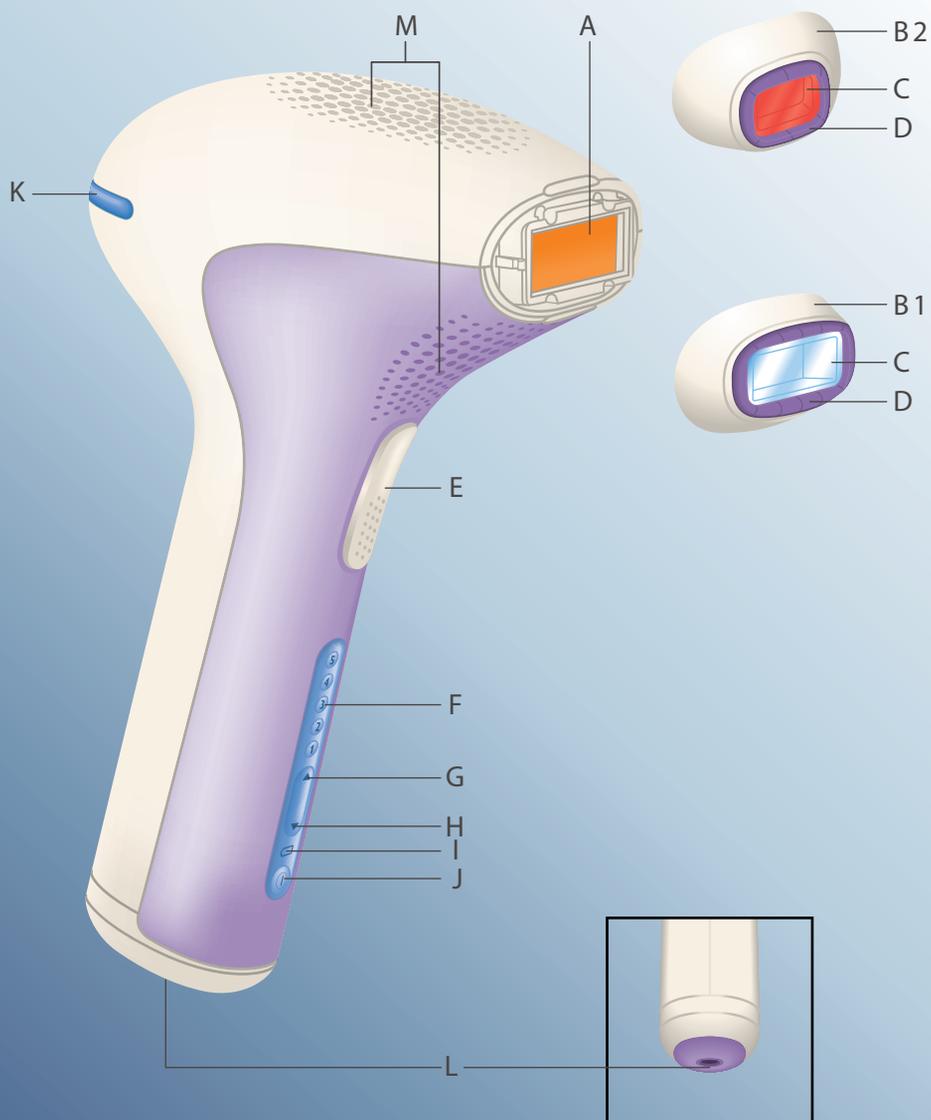

Description générale

- A** Verre filtrant avec filtre UV intégré
- B** Accessoires
 - 1 - Accessoire corps (pour toutes les parties du corps au-dessous du cou)
 - 2 - Accessoire de précision (pour toutes les parties du corps, y compris la lèvre supérieure, le menton et les pattes)
- C** Cadre métallique à l'intérieur de l'embout
- D** Système de sécurité (anneau de sécurité avec interrupteurs de contact)
- E** Bouton Flash
- F** Voyants d'intensité (1- 5)
- G** ▲ Bouton d'augmentation de l'intensité
- H** ▼ Bouton de diminution de l'intensité
- I** Voyant de charge et indication de batterie faible
- J** Bouton marche/arrêt
- K** Voyant « Prêt-à-flasher »
- L** Prise de l'appareil
- M** Fentes de ventilation

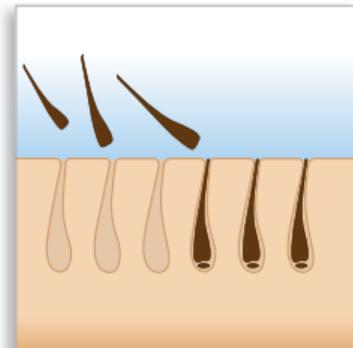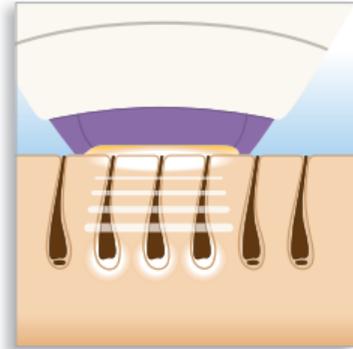

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips!

L'épilation à lumière pulsée est l'une des méthodes les plus efficaces pour épiler durablement les poils indésirables. Désormais, vous pouvez bénéficier de la technologie innovante de prévention de la repousse des poils à domicile, dès que vous le souhaitez.

Grâce à deux accessoires adaptés, Philips Lumea Precision permet de flasher les poils indésirables sur l'ensemble du corps, y compris le visage (la lèvre supérieure, le menton et les pattes).

L'épilateur Philips Lumea Precision envoie de légères impulsions lumineuses vers les poils et à leur racine, directement sous la peau. Ces impulsions provoquent la chute des poils en deux semaines environ et préviennent la repousse.

Pour plus d'informations sur l'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Precision ou pour enregistrer votre produit, rendez-vous sur www.philips.com/Lumea.

Avant l'utilisation


1 À savoir!

Cet appareil ne convient pas à tous. Ce guide de mise en route ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation de l'appareil. Afin de déterminer si vous pouvez utiliser l'épilateur Philips Lumea Precision en toute sécurité, **lisez attentivement le manuel d'utilisation avant la première utilisation.**

2 Tableau récapitulatif des intensités lumineuses recommandées:

Consultez le tableau ci-dessous pour déterminer les intensités lumineuses les plus adaptées à la couleur de votre peau et de vos poils, et pour vérifier que cette méthode d'épilation vous convient. La méthode est plus efficace à intensité élevée, mais nous vous invitons à réduire l'intensité lumineuse en cas de douleur ou d'inconfort. L'impulsion lumineuse peut produire des sensations de chaleur plus ou moins importantes sur la peau, mais ne doit jamais être inconfortable.



3 Reportez-vous à la section « Contre-indications » du manuel d'utilisation; certains médicaments ou problèmes de santé peuvent entraîner des réactions indésirables lors de l'utilisation de l'appareil.

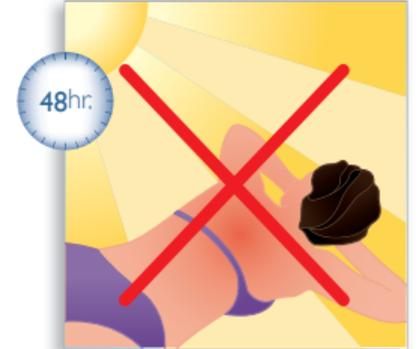

Remarque – Tous les types de bronzage peuvent influencer sur la sécurité de la séance. Après un bain de soleil, attendez au moins 48 heures avant d'utiliser l'appareil. N'utilisez pas Philips Lumea Precision sur des coups de soleil. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Conseils de bronzage » du manuel d'utilisation


Intensités lumineuses recommandées (1-5)

		Caractéristiques et couleur de votre peau					
		Blanc	Beige	Brun clair	Brun moyen	Brun foncé	Brun très foncé / noir
X Ce produit ne vous convient pas							
Couleur des poils:	Blanc / gris	X	X	X	X	X	X
	Roux	X	X	X	X	X	X
	Blond clair	X	X	X	X	X	X
	Blond foncé	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	X
	Brun	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	X
	Brun foncé	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	X
	Noir	4/5	4/5	4/5	3/4	1/2/3	X

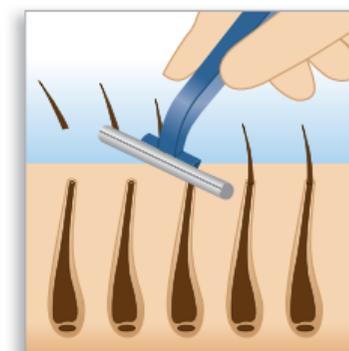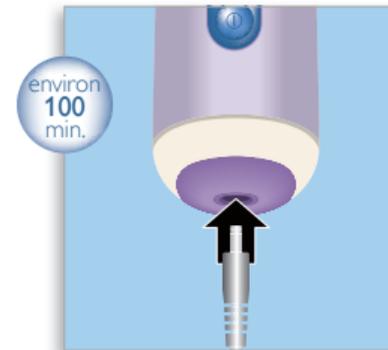

Avant l'utilisation

- 1 Chargez l'appareil
- 2 Rasez les zones que vous souhaitez flasher.
- 3 Effectuez un test cutané. Pour cela, choisissez une zone à proximité de celle que vous souhaitez flasher. Appliquez un flash (voir les étapes 4-7 ci-dessous) à l'intensité la plus faible recommandée pour votre couleur de peau. Augmentez l'intensité d'un niveau dans la plage recommandée pour votre type de peau. Après le test, attendez 24 heures et vérifiez si votre peau a réagi. Si votre peau présente des réactions, lors des utilisations ultérieures, choisissez l'intensité la plus élevée n'ayant pas provoqué de réaction cutanée.

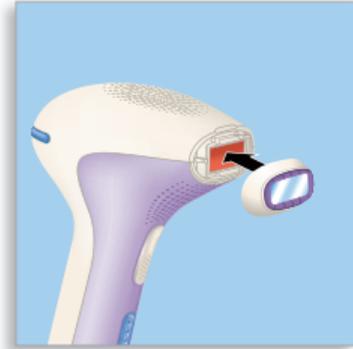

Utilisation de l'appareil

1 Vérifiez si de la poussière, des poils ou des fibres ne sont pas présents sur les accessoires et le verre filtrant. Si c'est le cas, nettoyez l'élément à l'aide du tissu de nettoyage fourni.


2 Choix du bon accessoire

> Accessoire corps


L'accessoire corps peut être utilisé pour flasher les poils indésirables sur toutes les parties du corps situées en dessous du cou (pour connaître les exceptions, reportez-vous au chapitre « Important », section « Contre-indications »). N'utilisez pas l'accessoire corps sur le visage.

> Accessoire de précision


L'accessoire de précision comprend un filtre intégré supplémentaire et peut être utilisé pour flasher les poils du visage (sur la lèvre supérieure, le menton et les pattes). Vous pouvez également l'utiliser sur les autres zones sensibles du corps, comme les aisselles, le maillot ou les zones difficiles à atteindre.

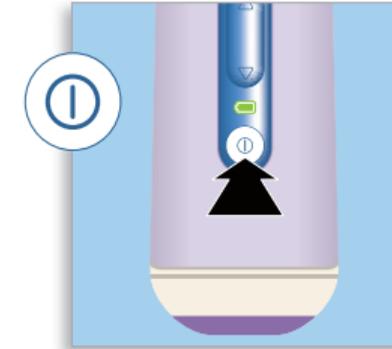


3 Mettez l'appareil en marche en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

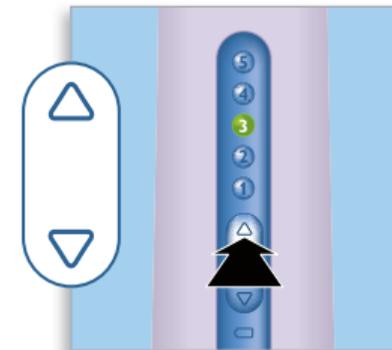


4 Pour modifier l'intensité (de 1 à 5), appuyez sur les boutons d'augmentation/de diminution de l'intensité.

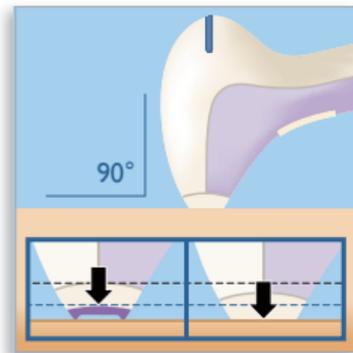


- 5 Placez l'appareil perpendiculairement à la peau de sorte que l'accessoire et l'anneau de sécurité soient en contact avec la peau.

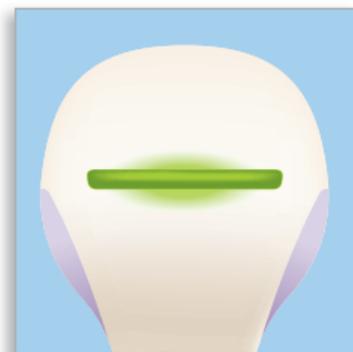

- 6 L'anneau de sécurité doit exercer une légère pression sur la peau. Lorsque tous les interrupteurs de contact de l'appareil sont en contact avec la peau, le voyant « Prêt-à-flasher » situé au dos de l'appareil s'allume en vert.

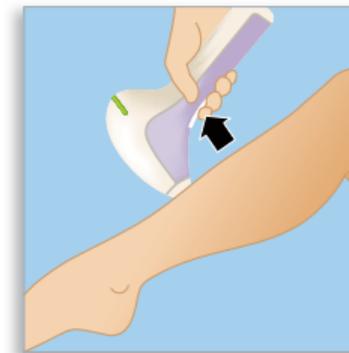

- 7 Appuyez sur le bouton Flash pour émettre un flash. Après le flash, relâchez le bouton Flash. Pour émettre un autre flash, répétez les étapes 5, 6 et 7. N'appliquez pas plus d'un flash à un même endroit. Veillez à décoller l'appareil de la peau avant chaque flash.

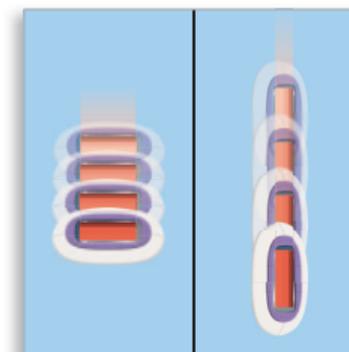


- 8 Pour ne pas oublier des zones à flasher, veillez à toujours chevaucher la zone déjà flashée lorsque vous placez l'appareil sur la peau.
- 9 À la fin de la séance, mettez l'appareil hors tension.
- 10 Si de la poussière s'est déposée sur l'accessoire et/ou le verre filtrant, nettoyez-le avant de ranger l'appareil dans le coffret. Si nécessaire, humidifiez le tissu de nettoyage fourni avec de l'eau ou de l'alcool fort. Pour plus d'informations, reportez-vous au chapitre « Nettoyage et entretien » du manuel d'utilisation.




Après la séance

Attendez au moins 24 heures ou attendez que la peau ne présente plus de rougeurs avant d'exposer les zones flashées au soleil. Pendant les deux semaines qui suivent la séance, couvrez les zones flashées quand vous vous exposez au soleil ou utilisez un écran total d'indice SPF 30+.

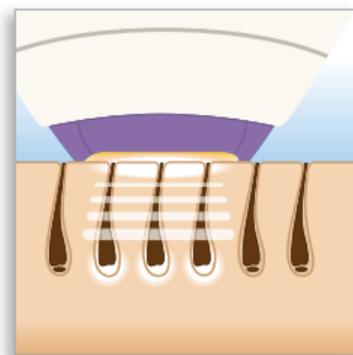


Pour des résultats optimaux

Pour épiler efficacement tous les poils et prévenir la réactivation des follicules pileux, les séances doivent être répétées tous les quinze jours pendant les deux premiers mois (des séances plus fréquentes n'entraînent pas des résultats plus visibles ou plus rapides).

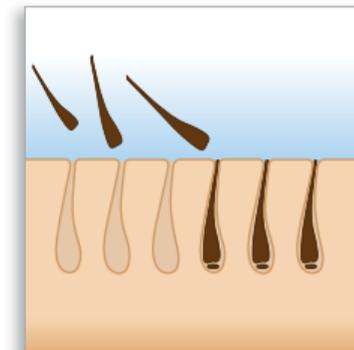

Vous aurez alors une peau douce et nette. Pour une peau durablement douce et parfaitement épilée, nous vous recommandons de répéter la séance toutes les quatre à six semaines. L'intervalle entre les séances peut varier en fonction de la repousse des poils et également en fonction des zones du corps. Si vos poils ont repoussé en abondance, réduisez simplement l'intervalle entre les séances.

Pour une séance plus efficace, rasez la zone à flasher avant d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que vos poils ne repoussent plus, ce qui est généralement le cas après quelques utilisations.

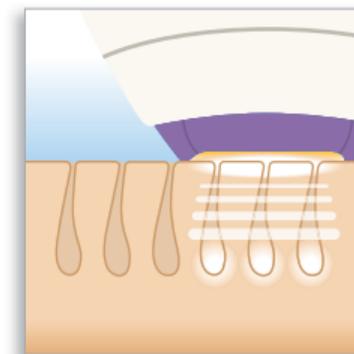

Durée moyenne d'une séance et accessoire recommandé pour chaque partie du corps:

Zone	Durée approximative d'une séance	Accessoire recommandé
Lèvre supérieure/menton/pattes	1 minute	Accessoire de précision
Aisselles	1,5 minute par aisselle	Accessoire corps/de précision
Maillot	1,5 minute pour le maillot	Accessoire corps/de précision
Zone bikini	5 minutes	Accessoire corps/de précision
Demi-jambe	12 minutes	Accessoire corps
Jambe entière	20 minutes	Accessoire corps

Suivez les étapes vers la douceur!

Numéro de la séance	Date	Partie du corps	Date de la prochaine séance	Intensité utilisée	Remarques





©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4203 000 6813.1