

PHILIPS

IPL
Haarentfernungssystem

Lumea Precision

Nur zur Anwendung am Körper
und Gesicht

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Lebensdauer >
100.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design



SC2002/00



Verhindert das Nachwachsen von Haaren Für glatte Haut am ganzen Körper, jeden Tag

Das Philips Lumea IPL Haarentfernungssystem vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am ganzen Körper vorzubeugen. Die sanften Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignete Haar- und Hauttypen

Sanfte und effektive Anwendung im Gesicht und am Körper

- Sogar auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen
- Speziell für mehr Schutz für das Gesicht entwickelt
- Anwendungsgebiete

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile notwendig




asimpleswitch.com



asimpleswitch.com

Besonderheiten

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

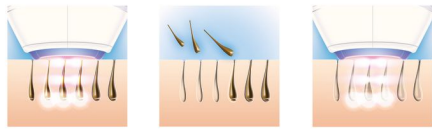

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur zwei Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Optimale haarfreie Ergebnisse wurden nach vier bis fünf Behandlungen im Abstand von zwei Wochen erzielt. Um diese Ergebnisse beizubehalten, wiederholen Sie die Behandlung einfach alle vier bis sechs Wochen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur Entwicklung des bahnbrechenden Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir

haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 1.500 Freiwilligen durchgeführt.

Sichere und sanfte Anwendung



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen. Die Behandlungsdauer und Häufigkeit der Akkuaufladung variieren je nach gewählter Stufe sowie Behandlungsbereich.

Kabelloser Komfort




Dank des einzigartigen kabellosen Designs des Philips Lumea können Sie die gewünschten Körperpartien behandeln wann immer Sie möchten.

Keine Ersatzteile notwendig




Philips Lumea ist eine Komplettlösung, die sofort einsatzbereit ist. Was noch wichtiger ist: Es muss kein Ersatzleuchtmittel oder Gel verwendet werden.

Anwendungsgebiete

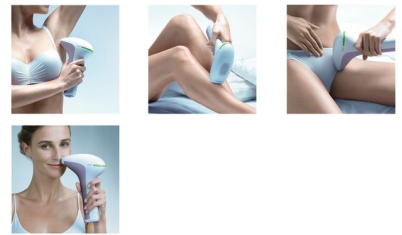

Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, dem Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Für Gesicht und Körper

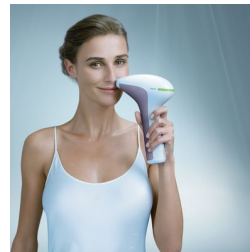

Der Präzisionsaufsatz wurde speziell für die Anwendung im Gesicht entwickelt. Er verfügt über einen integrierten Lichtfilter, der zusätzlichen Schutz für das Gesicht bietet. Der kleinere Behandlungsbereich eignet sich hervorragend für die Anwendung auf der Oberlippe und an anderen schwer erreichbaren Stellen.



asimpleswitch.com

Das "Grüne Logo" von Philips

Philips Produkte mit dem "Grünen Logo" können Kosten, Energieverbrauch und CO₂-Ausstoß senken. Wie? Diese Produkte sorgen für eine deutliche Verbesserung des Klimaschutzes auf mindestens einem der grünen Schwerpunktgebiete von Philips: Energieeffizienz, Verpackung, gefährliche Substanzen, Gewicht, Recycling und Entsorgung sowie lebenslange Verlässlichkeit.

Daten

Technische Daten

Lichtfluenz (J/cm^2): Körperaufsatz: 2 bis 6,5,
Präzisionsaufsatz: 2 bis 5,5

Lichtspektrum: Körperaufsatz > 570 nm,
Präzisionsaufsatz > 600 nm

High Performance-Lampe: Bietet >
80.000 Lichtimpulse

Anwendungsgebiete

Körperbereiche: Beine, Arme, Achselhöhlen,
Bauch, Bikini

Gesichtsbereiche: Oberlippe, Kinn, Koteletten

Aufsätze

Körperaufsatz (3 cm^2): Für den Gebrauch
unterhalb des Halses

Präzisionsaufsatz (2 cm^2): Zur sicheren
Anwendung im Gesicht

Mitgelieferte Artikel

Ladestation: Multispannungs-Ladegerät

Gebrauchsanweisungen: Demo-DVD,
Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

Aufbewahrung: Beauty Case

Leistung

Ladezeit: 100 Min.

Betriebszeit: Mind. 320 Lichtimpulse

Spannung: 100–240 V

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor
UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren
Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung
unbeabsichtigter Lichtimpulse

Service

Garantie: 2 Jahre Garantie

Anwendungszeit

Achselhöhle: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

Gesichtsbereiche: 1 Min.

Unterschenkel: 8 Min.

Anwendungsmodus

Mit Kabel/kabellos einsetzbar: Kabellos

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung
kurviger Bereiche

