

PHILIPS

IPL matiņu
likvidēšanas ierīce

Lumea Prestige

Ar SenseIQ tehnoloģiju

Ķermenis un seja

Ar SmartSkin sensoru

Lietošana bez vada un ar vadu



BRI950/00



Izbaudiet gludu ādu bez matiņiem 6 mēnešus* 2 inteligēntie piederumi — optimāliem rezultātiem

Philips Lumea Prestige ar SenseIQ tehnoloģiju ir mūsu efektīvākā IPL ierīce. Lumea inteligēntie uzgaļi, kas izstrādāti ērtai lietošanai mājās, izcili pieguļ katram ķermeņa izliekumam un pielāgo programmas katrai ķermeņa zonai.

Ilgstoši gluda āda ar Lumea IPL tehnoloģiju

- Profesionāla līmeņa IPL tehnoloģija mājās apstākļos, izstrādāta sadarbībā ar dermatologiem
- Pierādīti saudzīga un efektīva procedūra
- Piemērota dažādiem matiņu un ādas tiem
- SenseIQ tehnoloģija personalizētai matiņu likvidēšanai
- Izmantojiet bez vada vai ar vadu

Profesionāla ķermeņa zonu IPL apstrāde

- Inteligēntie uzgaļi pielāgo programmas katrai ķermeņa zonai
- Ieliekta dizaina uzgalis ķermenim
- Precīzs sejas uzgalis ar papildu filtru

Maksimāla brīvība, minimāla piepūle


- Ar SmartSkin sensoru
- Lumea IPL lietotne. Kopā ar jums ik uz soļa
- Bez apmaināmām daļām, bez slēptām izmaksām



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

Lumea novērš matiņu ataugšanu*

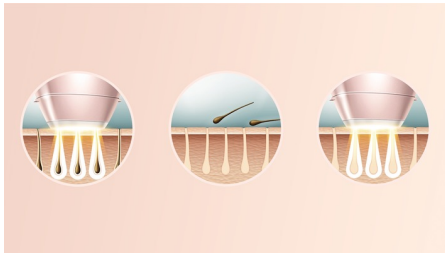


Apzīmējums IPL tulkojumā nozīmē "intensīvi gaismas impulsi" (Intense Pulsed Light). Philips Lumea apstrādā matiņa sakni ar saudzīgiem gaismas impulsiem, liekot folikulam pāriet miera fāzē. Tā rezultātā jūsu ķermeņa apmatojuma daudzums pakāpeniski samazinās. Atkārtotot procedūru, jūsu āda tiek atbrīvota no liekā apmatojuma un kļūst zīdaini maiga. Procedūra ir droša un saudzīga — arī apstrādājot jutīgākās ķermeņa zonas. Philips Lumea ir klīniski pārbaudīts un izstrādāts sadarbībā ar dermatologiem, nodrošinot efektīvu risinājumu apmatojuma likvidēšanai mājās apstākļos.

Pierādīta efektivitāte




Neatkarīgi pētījumi pierāda līdz pat 92 % matiņu samazinājumu pēc 3 procedūrām**. Veiciet pirmās 4 procedūras ik pēc divām nedēļām, bet nākamās 8 procedūras — ik pēc 4 nedēļām. Pēc 12 procedūrām 6 mēnešus varēsiet baudīt gludu ādu bez matiņiem*.

Piemēroti matiņu un ādas tipi

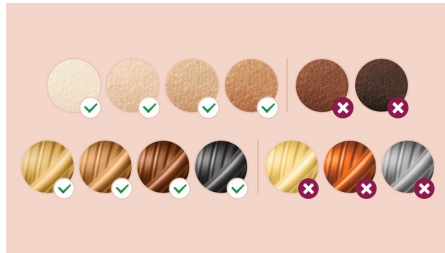

Philips Lumea Prestige ir efektīva dažādiem matiņu un ādas tiptiem. Tā iedarbojas uz dabīgi tumši blondiem, brūniem un melniem matiņiem, kā arī uz ādas toņiem no ļoti balta līdz tumši brūnam. IPL nepieciešams kontrasts starp matiņu krāsas pigmentu un ādas toņa pigmentu, tāpēc (tāpat kā citas IPL ierīces) Lumea nevar izmantot baltu, pelēku, gaiši blondu vai sarkanu matiņu apstrādei. Ierīce nav piemērota arī ļoti tumšai ādai.

SenseIQ tehnoloģija

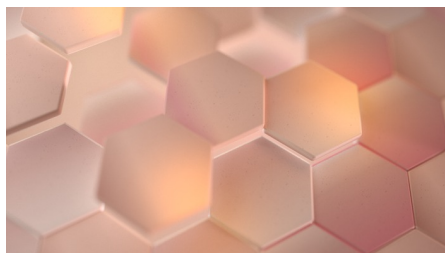

Sajūt. Lumea SmartSkin sensors nosaka jūsu ādas toni un norāda jums piemērotāko gaismas iestatījumu. Pielāgojas. Intelīgie uzgaļi pielāgo programmas katrai ķermeņa zonai. Rūpējas. Ierīce ir izstrādāta kopā ar dermatologiem un izveidota, iedvesmojoties no jums, lai nodrošinātu saudzīgu, ilgnoturīgu matiņu likvidēšanu pat jutīgās zonās***.

Ķermeņa zonu apstrāde



Jūsu ķermenis ir unikāls. Arī tā āda, izliekumi un kontūras jāapstrādā unikālā veidā. Lumea uzgaļi visam ķermenim ir izveidoti tā, lai tie

izcili piegultu ikvienam izliekumam, un programmas tiek pielāgotas katrai ķermeņa zonai. Apstrādes logi ir izveidoti, lai palielinātu saskari ar ādu un nepieļautu gaismas noplūdi, tādējādi nodrošinot efektīvu un saudzīgu apstrādi pat delikātās un jutīgās zonās.

Ķermeņa uzgalis



Intelīgtajam ķermeņa uzgalim ir lielākais apstrādes lodziņš — 4,1 cm², tāpēc tas ir izcili piemērots ātrai lielāku ķermeņa zonu apstrādei, piemēram, kājām, rokām un vēderam. Ieliektais korpuss cieši piekļaujas ķermeņa kontūrām, nodrošinot maksimālu saskari ar ādu. Pievienojot uzgaļi, tas pielāgo programmu ķermeņa zonai. 83 % sieviešu ir apmierinātas ar matiņu samazinājumu uz kājām****.



asimpleswitch.com

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO₂ izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, otrreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Izmantošanas zonas

Ķermeņa zonas: Rokas, Kājas, Vēders

Sejas zonas: Zods, Augšlūpa, Žokļa līnija

Jutīgās zonas: Paduses, Bikini

Piederumu tehniskās specifikācijas

Ķermeņa kopšanas uzgalis: Loga izmērs: 4,1 cm², Forma: izliekts uz ārpusi, Ķermenim piemērota procedūra

Sejas kopšanas uzgalis: Loga izmērs: 2 cm², papildu filtrs, Forma: plakans, Sejai piemērota procedūra

Lietošanas režīms

Slīdēšana un apstrāde: Ātrai izmantošanai "Stamp and Flash" tehnoloģija: Nelielu zonu apstrādei

Lietošana ar vadu / bez vada: Lietošana bez vada un ar vadu

Drošības un regulējamie iestatījumi

5 gaismas enerģijas iestatījumi: Pielāgojiet savam ādas tipam

SmartSkin sensors: Atbilstošais iestatījums pēc pieprasījuma

Iebūvēta drošības sistēma: Sargā no neparedzētiem zibšņiem

Iebūvēts UV filtrs: Aizsargā ādu pret UV gaismu

Ādas toņa sensors: Nosaka ādas toni

Izmantošanas laiks

Paduse: 2,5 min

Sejas zonas: 1,5 min

Bikini zona: 2 min

Apakšstilbi: 8,5 min

Tehniskā specifikācija:

Augstas veiktspējas lampa: Rada > 250 000 zibšņus****

Strāvas padeve

Spriegums: 100-240 V

Komplektā iekļautie piederumi

Adapteris: 19,5V/4000 mA

Lietošanas pamācības: Lietotāja rokasgrāmata

Uzglabāšana: Eleganta somiņa

Serviss

Garantija: 2 gadu garantija visā pasaulē

