



フィリップス 光美容器
ルメア アドバンス

品番 **SC1993/70**

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

この製品は、下記肌色チャート内の⊗印がついている肌色・体毛の色には適していません。製品を初めてご使用の際または日焼けをした後は、下記肌色チャートをご確認のうえ、必ず使用前にスキントテストを行い肌の状態を確認してください。光を照射し、温かさや少し熱さを感じる程度であれば問題ありませんが、痛みを感じるような出力レベルでは使用しないでください。下記を確認していただき、適切な出力レベルに設定してからご使用ください。

肌色チャート(推奨出力レベル)

肌色 スキンタイプ 特徴	ホワイト スキンタイプ I	ベージュ スキンタイプ II	ライト ブラウン スキンタイプ III	マイルド ブラウン スキンタイプ IV	ダーク ブラウン スキンタイプ V	黒色に近い ブラウン スキンタイプ VI
	きわめて 明るい肌色 日光浴をすると肌が赤くなるが日焼けが残らない	明るい肌色 日光で比較的肌が赤く反応しやすく、日焼けはわずかしかない	標準的な肌色 日光でまれに赤くなることもあるが、すぐ落ち着いて肌色が濃くなる	小麦色 日光にあたってても皮膚が赤くならず、すぐに肌色が濃くなる	褐色 日光にあたってても皮膚が赤くならず、よく日焼けする・肌色が濃くなる	非常に日焼けしやすい
体毛の色						
白色/灰色	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
赤色	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
明るい金色	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
濃い金色/明るい茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	⊗	⊗
茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	⊗	⊗
濃い茶色	4/5	4/5	4/5	3/4	⊗	⊗
黒	4/5	4/5	4/5	3/4	⊗	⊗



注意

- ご使用前に、必ず取扱説明書をお読みください。
- 健康状態や、服用している薬によっては、製品が使用できない場合があります。
- P.5～8の「必ずお守りください」のページをよくお読みください。

フィリップス ルメアをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく
お使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところ
に必ず保管してください。


商品のご確認

商品をご確認ください


本体



からだ用アタッチメント

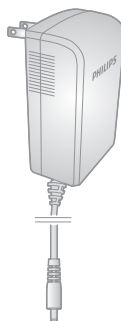

電源アダプタ

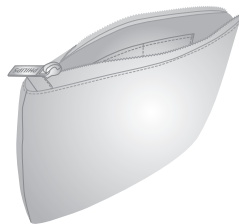

ポーチ



掃除用クロス

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

●はじめに	商品のご確認 3
	目次 4
	必ずお守りください 5~8
	各部の名称 9・10
●ご使用方法	日焼けについて 11
	お手入れの準備 12・13
	製品の使い方 14~16
	お手入れのためのガイドライン 17~19
	製品のメンテナンス方法 20
	保管の仕方 21
●廃棄について	製品を廃棄するとき 21
●困ったとき	困ったとき 22~25
●保証	保証とアフターサービス 27
	仕様 28
	無料修理規定 30
	保証書／フィリップスサポートセンター 最終ページ

必ずお守り ください

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

○絵表示について



記号は、「警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

警告



●メンテナンスの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●電源アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●電源アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●本体・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●電源コネクタ受部にピンやごみ、ほこりを付着させしないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。発熱による火災の原因になります。



●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●お子様がこの製品で遊ばないように管理してください。










●光をのぞきこんだり、人に向けたりしないでください。目を傷める原因となります。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。

⚠ 注意

-  ●電源アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ●電源アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型部品をお求めください。
-  ●使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
-  ●この製品が破損または故障した場合は、使用しないでください。ケガの原因になります。
-  ●使用するときは、専用の電源アダプタを使用してください。
-  ●製品本体に強いショックを与えたり、落としたり、激しく振ったりしないでください。
-  ●15歳未満の方は使用しないでください。15～18歳の方は保護者同意の上、保護者監視のもとでお使いください。

使用上のご注意

1. この製品はワキの下、腕、腹部、ビキニエリア、脚の除毛後のお手入れをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。

2. この製品をシャワー中に使用しないでください。

3. この製品には、機器の過度な温度上昇を防ぐためのオーバーヒートプロテクション機能がついています。オーバーヒート(過度な温度上昇)した場合、すべての出力レベル表示が同時に点滅し、照射ボタンを押しても照射ができません。この症状が見られた場合は以下のことをお試しください、それでも正常に作動しない場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)までご連絡ください。

- ① 製品の電源をいったん切る。
- ② 電源アダプタをコンセントから抜く。
- ③ 15℃～35℃の環境へ製品を移動させる。
- ④ 電源アダプタを再びコンセントに差し込み、製品の電源を入れる。
- ⑤ 上記①～④を行っても問題が解決しない場合は、約30分待ってから再度電源を入れる。

4. 同じ箇所に1日に2回以上使用しないでください。

5. 通風孔をふさがらないでください。本体が過熱して故障の原因になります。

6. 日焼けをしてから約2週間はこの製品を使用しないでください。詳しくはP.11「日焼けについて」の項をお読みください。

7. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、製品をその環境下で3時間ほど慣らしてからお使いください。

8. 肌以外のものに向けて光を照射すると故障の原因になります。
9. ご自身の肌タイプに合った出力レベル設定でお使いください。それよりも高い出力レベル設定でご使用になると、肌トラブルのリスクが高まります。
10. 暗いところでは使用しないでください。目に一時的な刺激を感じる場合があります。
11. 衛生上、この製品を他の人と共有しないでください。

お手入れの際のご注意

1. この製品を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。また、食洗機で洗わないでください。
2. この製品は、使用の都度、掃除をしてください。

保管時のご注意

1. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
2. ほこりがつきにくい場所でポーチに入れて保管してください。
3. 使用しない時は電源を入れたままで放置しないでください。



下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください

1. 顔、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、陰部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体、男性器
2. シリコン注入物、ペースメーカー、皮下埋め込み式カテーテル（ポート）、ピアス、ボディピアス
3. いぼ、ほくろ、そばかす、大静脈、しみ、濃い色素斑の見られる箇所、傷跡、皮膚に異常の見られる箇所
4. 刺青（タトゥー）、ボディペイント、アートメイクのある箇所
5. 長時間効果が持続する制汗剤を使用している箇所




下記に該当する方は、この製品を使用しないでください

1. 妊娠中、授乳中の方
2. お手入れ箇所の肌色・毛の色が適さない方
 - －生来の毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方
 - －肌タイプV（肌タイプ5）またはVI（肌タイプ6）と診断されたことがある方、または元の肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方
3. 現在医師の治療を受けている方
4. 皮膚がんまたはお手入れしようとする範囲に何らかのがん疾患がある方
5. お手入れしようとする範囲にがんの兆候または異常なホクロがある方
6. 心臓に疾患のある方
7. お手入れしようとする範囲に下肢静脈瘤、血管拡張症などの血管病の既往歴がある方
8. 光に対して過度に敏感または発赤しやすい方、アレルギー反応のある方
9. お手入れしようとする範囲に皮膚感染、アトピー、やけど、毛根の炎症、裂傷、ヘルペスなど皮膚疾患のある方
10. お手入れしようとする範囲を過去3週間以内に手術した方
11. 光に対して過敏症な方
12. 出血障害のある方
13. 皮膚のケロイド症状、創傷治癒欠損などの膠原病の既往歴がある方
14. 糖尿病、紅斑性狼瘡、ポルフィリン症、うっ血性心臓病などの疾患がある方
15. HIV（ヒト免疫不全ウイルス）感染者、またはAIDS（後天性免疫不全症候群）既往の方
16. ヒアルロン酸、ベータヒアルロン酸、イソトレチノイン、アゼライン酸で皮膚を治療中の方
17. イソトレチノインを使用したにきび・酒さなどの治療を過去6カ月以内に受けた方
18. 鎮痛剤の服用をしている方
19. 感光性を強める性質のある薬を使用している方
20. 抗凝血剤を使用している方やアスピリンを多用する方
21. 免疫抑制剤を使用している方


※ご自分がこの製品の使用に適するかどうか不明な場合、また、使用中に異常を感じた場合は、皮膚科医にご相談ください。

各部の名称

本体

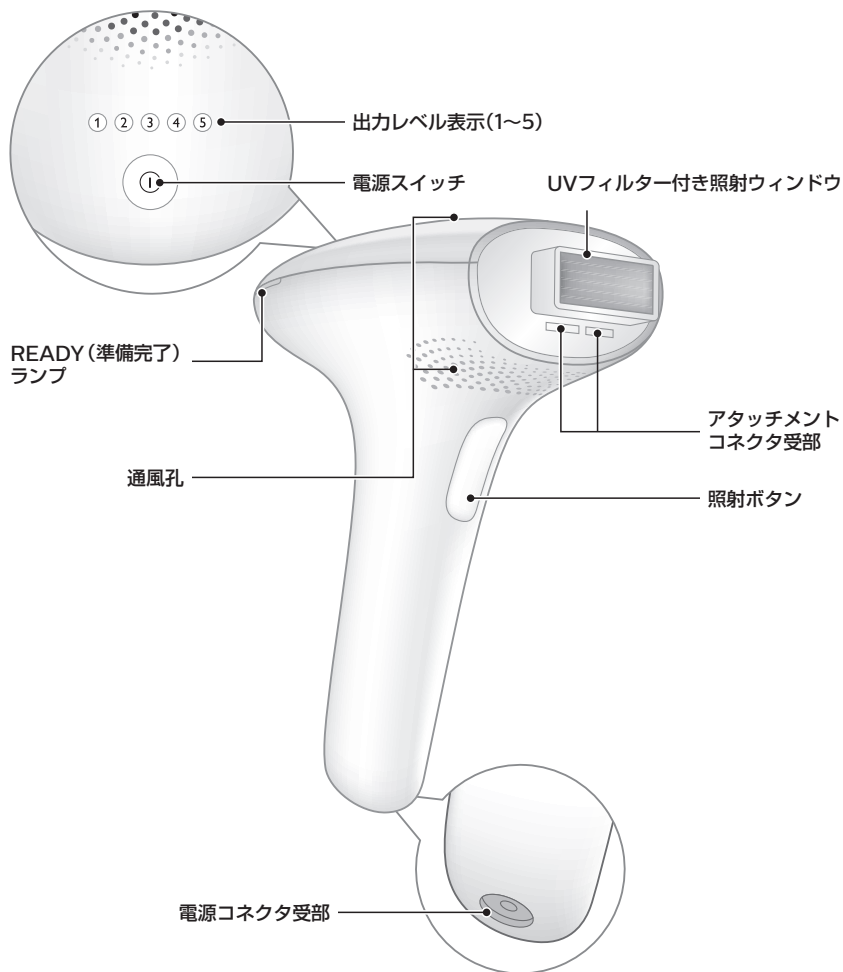

アタッチメント

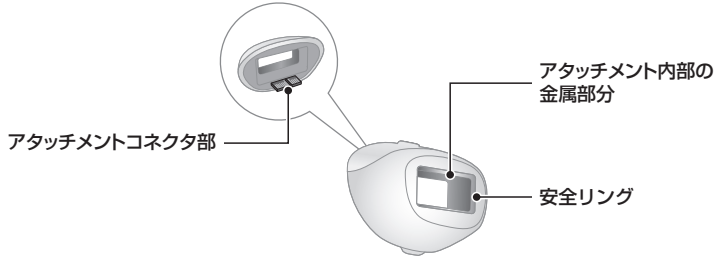

からだ用アタッチメント

※アタッチメントを本体に取り付ける際にはアタッチメントコネクタ部を傷つけないようにご注意ください。

電源アダプタ



ポーチ



掃除用クロス



日焼けについて

●製品を使用する前に日焼けをした場合

日焼けをした後は、最低2週間あけてからこの製品を使用してください。製品を使用する前に、お手入れする箇所にスキんテストをし、日焼けした後の肌色に合わせて適切な出力レベルに調節してください(P.13「スキんテストの仕方」の項をお読みください)。



●お手入れ後の日焼けと紫外線ケア

お手入れ後、48時間は日焼けをしないようにしてください。また、外出する際はお手入れした部位にSPF50以上の日焼け止めを塗り、お手入れした箇所が紫外線に当たることを避けてください。48時間経った後でも赤みなどが見られる場合は紫外線を避けてください。その後も約2週間程度はSPF30以上の日焼け止めを塗り肌を保護してください。

※SPFとはSun Protection Factor (サン プロテクション ファクター)の略で紫外線防御指数とも言います。日焼け止め乳液などに表記されている、紫外線の防止効果を表す指標です。

●クリームによる日焼け


タンニング(日焼け)を促進するクリームなどを使うといった人工的なタンニングをした場合は、その日焼けが引くまで待ってからこの製品をお使いください。また、上記「製品を使用する前に日焼けをした場合」、「お手入れ後の日焼けと紫外線ケア」の手順に従ってください。

お手入れの準備

お手入れ箇所の準備

お手入れする部位の毛を剃ります。

- 事前に体毛を剃らなかつたり剃り方が不十分だったりすると肌トラブルが生じるおそれがあります。また、汚れや体毛が製品内にたまりやすくなります。
- 毛抜き、ワックスなどで脱毛をした場合、毛が再び生えてくるまではこの製品を使用しないでください。毛が伸びてきたら、脱毛クリームなどは使わずに毛を剃ってください。毛を適切に剃らずにこの製品を使用すると、本来の効果が得られません。
- 毛を剃った際に切り傷などができた場合、傷が治るまでその箇所はお手入れしないでください。

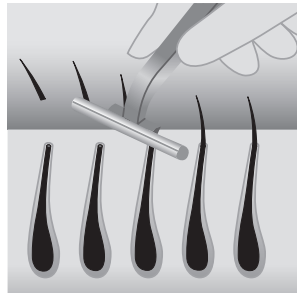

製品を初めてご使用の際または日焼けをした後は、使用前にスキントテストを行い、肌の状態を確認してください。スキントテストは、お手入れしたい部分に近い箇所を選んで行ってください。

スキントテストの仕方

- 1 電源アダプタの電源コネクタ部を製品本体の電源コネクタ受部に差し込み電源アダプタをコンセントに差し込みます。
- 2 電源スイッチを押して電源を入れます。出力レベルが1に設定されていることを確認してください。
- 3 製品を肌に直角になるように当て、照射ボタンを押します。
- 4 次の箇所へとすべらせて移動させ再び照射ボタンを押します。
- 5 ご自分が快適に感じられる(痛みなどを感ぜない)範囲内で徐々に出力レベルを上げ、適切なレベルを選んで使用します。電源スイッチを押すと、出力レベルを変更できます。1度のお手入れで1カ所に2回以上光を当てないようにしてください。
- 6 本製品をご使用后、電源スイッチを2秒以上押し続けて電源を切ります。
- 7 スキントテスト後、24時間待ち、肌の状態を確認します。もし皮膚に赤み・痛み・水泡などの異常が見られた場合は、異常が起きなかった出力レベルを選んで今後のお手入れを行ってください。

本製品は充電式ではありません。
電源アダプタをつなげてからご使用ください。

製品の使い方

この製品をご使用になる前に必ず、P.12「お手入れの準備」の項をお読みください。

※この製品はワキの下、腕、腹部、ピキニエリア、脚の除毛後のお手入れをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。

※光のまぶしさをやわらげるため、明るい室内でご使用ください。

出力レベルの設定

- 1 下記「肌色チャート」をお読みいただき、出力レベルをご自身の肌や体毛の色に適した高さ、またご自身が快適に感じる(痛みを感じない)レベルに設定してください。
「肌色チャート」の×印に当てはまる場合は、この製品の使用に適しません。
- 2 体の部位によっては出力レベルを変える必要があります。出力レベルが高いほどお手入れは効率的ですが、ご自分に合った無理のない出力レベルでご使用ください。光を照射し、温かさや少し熱さを感じる程度であれば問題ありませんが、痛みを感じるような出力レベルでは使用しないでください。肌の色が濃い方は、肌が光を吸収しやすい性質のため、無理な出力レベルで使用すると肌トラブルのリスクが高くなります。そのため、低い出力レベルでの使用をおすすめしています。肌トラブルについては、P.18「肌トラブルについて」をお読みください。

肌色チャート(推奨出力レベル)

		肌色と特徴					
		ホワイト スキントイプI ／きわめて 明るい肌色 日光浴をすると 肌が赤くなるが 日焼けが 残らない	ベージュ スキントイプII ／明るい肌色 日光で比較的 肌が赤く反応 しやすく、日焼け はわずかしが しない	ライト ブラウン スキントイプIII ／標準的な肌色 日光でまれに 赤くなること があるが、すぐ 落ち着いて 肌色が濃くなる	マイルド ブラウン スキントイプIV ／小麦色 日光にあたって も皮膚が赤く ならず、すぐに 肌色が濃くなる	ダーク ブラウン スキントイプV ／褐色 日光にあたって も皮膚が 赤くならず、 よく日焼けする ・肌色が濃くなる	黒色に近い ブラウン スキントイプVI 非常に 日焼けしやすい
体毛の色	濃い金色 / 明るい茶色 / 茶色 / 濃い茶色 / 黒	4 / 5	4 / 5	4 / 5	3 / 4	×	×
	白色 / 灰色 / 赤色 / 明るい金色	×	×	×	×	×	×

ご自身がこの製品の使用に適しているかどうか判断するため、P.8「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」をお読みください。特に自然光や人工的な方法で日焼けを行った方は、肌色が前回のお手入れの時よりも濃くなっている可能性があります。上記「肌色チャート」をお読みいただき、スキントイプを行ってから適切な出力レベルに設定してご使用ください。

※P.1の「肌色チャート」で色をご確認ください。




注意

- 例外として使用できない箇所については、P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。
- お手入れの際、ひどく痛みが生じる場合は、痛みを感じないレベルまで出力レベルを下げてください。赤みや肌トラブルがひどくなった場合には、お手入れをすぐに中止し、P.18「肌トラブルについて」の項をお読みください。

使用方法

- 1 ご使用前には毎回必ずアタッチメント部分（UVフィルター付き照射ウィンドウとアタッチメント内部の金属部分）を清潔にしてください。詳しい清掃の仕方はP.20「製品のメンテナンス方法」の項をお読みください。
- 2 P.1、P.14「肌色チャート」からご自分に適した出力レベルを選び、肌の状態や反応の仕方を注意深く見ながら使用してください。
※健康状態などにより肌の感じ方や反応の仕方は異なる場合があります。特に日焼けの後はご注意ください。
詳しくはP.18「肌トラブルについて」の項をお読みください。
※すべての出力レベル表示が交互に点滅し、出力レベルを変更できない場合はP.22「困ったとき」をご確認ください。

- 3 製品を肌に直角になるように当て、アタッチメントおよびアタッチメントの「安全リング」が肌に当たるようにします。

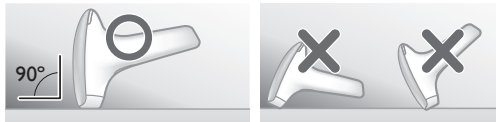


【READY（準備完了）ランプ】

本体の背部にあるREADY（準備完了）ランプが緑色に点滅すると光を照射する準備を始めます。点灯になると、製品が肌にきちんと当たっており、光を照射する準備が整ったサインです。

※「安全リング」がきちんと肌に当たらないとREADY（準備完了）ランプは点灯しません。

※1回1回の照射の間に、3～5秒ほどかかる場合もあります。

※READY（準備完了）ランプが緑色に点灯しているのに照射ボタンを押しても光を照射できない場合はP.22「困ったとき」をご確認ください。

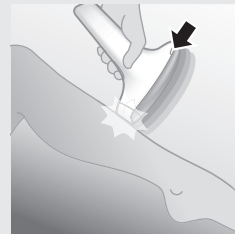

4 照射ボタンを押して光を照射します。1箇所を照射したら、次の箇所へ移動させ、再び照射ボタンを押します。

※見えている光は、肌に反射したものですので目に害はありません。使用中にゴーグルなどをかける必要はありません。明るい部屋でご使用いただくとまぶしさは軽減されます。

※この製品にはオーバーヒートプロテクション(過度の温度上昇を防止する)機能がついているため、製品の温度が上がるとすべての出力レベルが同時に点滅し、照射ボタンを押しても光を照射することができません。この場合は、P.23「困ったとき」をご確認ください。



※1回のお手入れで、同じ箇所を何度も照射をしないでください。過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。




【照射範囲】

お手入れしたい箇所が隙間なく照射されるよう、少しずつずらして照射してください。

※UVフィルター付き照射ウィンドウの「安全リング」が当たっている部分は、光が照射されません。

-  …UVフィルター付き照射ウィンドウの「安全リング」が当たる範囲
-  …光が照射される範囲(UVフィルター付き照射ウィンドウの面積)

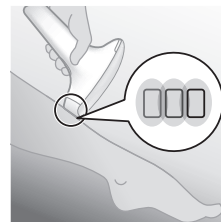

5 お手入れが終了したら、電源スイッチを長押しして電源を切ってください。

※電源を入れたまま放置すると約5分後に製品の電源が自動的に切れます。

6 アタッチメントや、UVフィルター付き照射ウィンドウがほこりや毛などで汚れていないことを確認してください。


お手入れ後のケア

お手入れ後にほてりやかゆみを感じる場合、保冷剤や濡れタオルなどで肌を冷やしてください。また、肌の乾燥を感じる場合は、お手入れ後24時間以上経ってから、無香料の保湿剤などで肌を保湿してください。

お手入れのための ガイドライン

この製品は、永久脱毛をするためのものではありません。定期的にお手入れすることでなめらかな肌を維持できます。

お手入れの平均的な所要時間

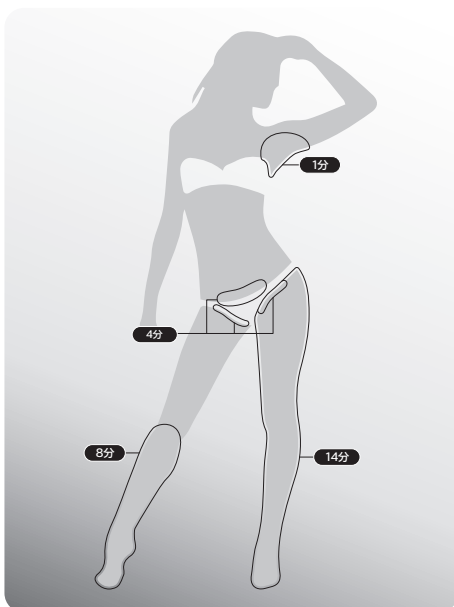

※左記の所要時間はフィリップス社実施のテストにより計算された時間です。実際の処理時間には個人差があります。



注意

- 顔、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、臍部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。
- その他の例外として使用できない箇所についてはP.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。

お手入れの頻度

最初の4~5回は2週間ごとにお使いください。その後は、4~8週間の間隔でお使いください。最適なお手入れの頻度は、個人の体質や身体的部位によっても差があります。お手入れの効果が感じられない場合はお手入れの頻度を上げることをおすすめします。



注意

1度お手入れをした後は、最低2週間は使用しないでください。過度にお手入れをしても効果は変わらず、肌トラブルの危険性が高まります。

※効果は使用する部位や個人によって異なります。

※永久脱毛とは異なり、お手入れを中止するとムダ毛の量は徐々に元に戻ります。

肌トラブルについて

- わずかな赤みが出たり、ちくちく、ひりひりしたり、または多少熱く感じるといったことがあります。通常はすぐにこれらの症状は消えて感じなくなります。
- やけどのような状態が少しの間あらわれることもあります。3日以内にこの症状がおさまらない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。
- 肌が乾燥したり、かゆみが出たりすることがありますが、これらの症状は除毛によるものと、光によるものとの組み合わせと考えられます。通常は数日でおさまりますが、かゆみに対しては肌を保冷剤や濡れタオルなどで冷やしてください。肌の乾燥が続く場合は、お手入れ後24時間以上経ってから、無香料の保湿剤などで肌を保湿するなどしてください。

まれに起こる皮膚トラブル

やけど、皮膚の強い赤み、皮膚の腫れは、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。もしもこれらの症状が3日以内に消えない場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

再び使用する場合は、完全に皮膚が健康な状態に戻ってから、弱い光で使い始めてください。

皮膚の変色：色素沈着(肌の色が濃くなる)または色素脱色(肌の色が薄くなる)は、ご自身の肌色に対して光の強さが強すぎる場合にまれに起こることがあります。

これらの症状があらわれた場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

皮膚感染および炎症：除毛の際などにできた傷のある箇所、元々傷があった箇所、埋没毛にこの製品を使用したことが原因で起こる可能性があります。

極度の痛み：お手入れ前に除毛をせずにこの製品を使用すると、強い痛みが生じる場合があります。また、ご自分の肌に適した出力レベルよりも高い設定でご使用になったり、同じ箇所に2回以上照射したり、傷や炎症、感染症、タトゥー(刺青)、やけどなどのある箇所に使用しても、強い痛みが生じる場合があります。より詳しい情報については、P.7「下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください」、P.8「下記に該当する方は、この製品を使用しないでください」の項をお読みください。

お手入れ後の注意

- お手入れ直後の箇所に、香水や化粧品を塗布しないでください。
- ワキの下のお手入れをした直後に制汗剤を使用しないでください。赤みが完全に引くまで使用をお控えください。
- 紫外線に当たる際の注意事項、また人工的な日焼けについては、P.11「日焼けについて」の項をお読みください。

本製品は水洗いできません。
水や液体につけないでください。

製品の メンテナンス方法

製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。




注意

- 本体の汚れは、付属の掃除用クロスや乾いた布で拭取ってください。取れにくい汚れは水を含ませた掃除用クロスや布で拭取り、その後水分を拭取ってください。本体を水や液体に浸したり水洗いする事は故障の原因となりますので絶対におやめください。
- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- 電源アダプタは絶対に濡らさないでください。
濡れてしまった場合は乾いた布で拭取り完全に乾いてから使用してください。
- UVフィルター付き照射ウィンドウやその内部の金属部分に、傷をつけないでください。
- アタッチメントやUVフィルター付き照射ウィンドウの清掃ができない場合は、製品の使用は控えてください。

- 1 電源を切り、電源プラグを抜いて製品を冷まします。
※UVフィルター付き照射ウィンドウは使用中熱くなります。清掃を行う前に必ず冷ましてください。

- 2 アタッチメントの上下のくぼみを指で押さえ、やさしく本体から取り外します。無理な力を加えなくても、アタッチメントは外れます。

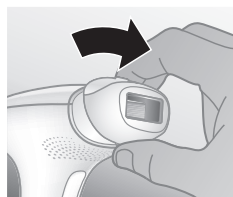


- 3 付属の掃除用クロスを少量の水で湿らせ、下記の部品をきれいにします。

- ・UVフィルター付き照射ウィンドウ
- ・アタッチメント内部の金属部分
- ・アタッチメントの外側

※製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行ってください。

※アタッチメントの細かな部分が付属の掃除用クロスで清掃しづらい場合は、綿棒を使って結構ですが、繊維などが残らないように気をつけてください。

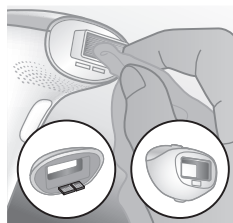

- 4 必要に応じて、本体外側を乾いた掃除用クロスできれいに拭いてください。

保管の仕方

- 1 電源を切り、電源プラグを抜いて製品を冷まします。
- 2 製品を清掃します。
- 3 製品をポーチに収納します。
- 4 0°C～60°Cの範囲の場所で、ほこりと多湿を避けて保管します。



注意

ほこりをふせぐため、ポーチに入れて保管してください。

製品を 廃棄するとき

- 古くなった本製品を廃棄するときは、各自治体の処理方法に従い廃棄してください。

ご使用中お困りになったとき、
まずは下記をご確認ください。

困ったとき

電源スイッチを押しても作動しない

▶電源アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？

本体の電源コネクタ受部に電源アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれているか確認してください。

電源を入れたが、出力レベルの調節(強弱の変更)ができない/すべての出力レベル表示が交互に点滅する

▶プログラムエラーのおそれがあります。

製品の電源をいったん切り、再度電源を入れてリセットしてください。

アタッチメントを肌に当てても、緑色のREADY(準備完了)ランプが点灯しない

▶アタッチメントの「安全リング」がしっかりと肌に当たっていますか？

製品を肌に直角になるように当て、「安全リング」がすべてしっかりと肌に接触していることを確かめてください。
READY(準備完了)ランプが点灯したら、照射ボタンを押します。

上記の方法でうまくいかない場合、例えばひじから下などの肌にぴったりと製品を当てやすい箇所と同じ動作を行い確認します。

緑色のREADY(準備完了)ランプが点灯するのに、照射ボタンを押しても光が照射できない

▶プログラムエラーのおそれがあります。

製品の電源をいったん切り、再度電源を入れてリセットしてください。

使用中に製品本体が温くなる

▶使用中製品本体が温かくなります。そのままご使用ください。

出力レベル表示がレベル1で点滅し設定を変更できない

- ▶ アタッチメントが製品にきちんとはまっていますか。

すべての出力レベル表示が同時に点滅し、照射ボタンを押しても光を照射できない

- ▶ オーバーヒートプロテクション機能が起動しているおそれがあります。この症状が見られた場合は以下のことをお試しください。

- ① 製品の電源をいったん切る。
- ② 電源アダプタをコンセントから抜く。
- ③ 15℃～35℃の環境へ製品を移動させる。
- ④ 電源アダプタを再びコンセントに差し込み、製品の電源を入れる。
- ⑤ 上記①～④を行っても問題が解決しない場合は、約30分待ってから再度電源を入れる。

製品からおかしな臭いがする

- ▶ アタッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウが汚れていませんか？

アタッチメント、またはUVフィルター付き照射ウィンドウを清潔にしてください。

- ▶ お手入れ箇所をしっかりと除毛していますか？

お手入れ箇所の毛を除毛せずにこの製品を使用すると、毛が焦げて臭いがすることがあります。製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。

- ▶ 製品をほこりの多い場所に保管していませんか？

臭いは数回照射するうちに消えてなくなります。

お手入れの最中に、いつもよりも肌が敏感に感じる

▶出力レベルが高すぎませんか？

ご自分にあった出力レベルを選んでいるか確認し、必要があれば出力レベルを低くしてください。
P.14「出力レベルの設定」の項をお読みください。

▶お手入れ箇所の除毛をしていますか？

製品を使用する前に、除毛をしてください。もし除毛によって肌が負けてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットしてください。

▶UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れていませんか？

UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れている場合は、製品を使用しないでください。ウィンドウは交換できないため、フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。

▶この製品を使用してはいけない箇所に使用していませんか？

顔、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、陰部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。

お手入れの後に、皮膚に赤みが出る

▶少しの赤みは正常な反応で、通常すぐにおさまります。

いつもよりも、お手入れ後の肌の反応が長く続く

▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？

P.14「出力レベルの設定」の項をお読みいただき、適切なレベルを設定してください。肌の反応が3日以上続く場合は、皮膚科医の診察を受けてください。

この製品を使用して、ひどい痛みを感じた

▶お手入れ箇所の除毛を適切に行っていますか？

この製品を使用する前に除毛処理を行ってください。肌が敏感で除毛によって肌があれてしまう場合は、できるだけ毛を短くカットし、また出力レベルを低く設定してお使いください。

▶この製品を使用してはいけない箇所に使用していませんか？

顔、耳、乳首、乳輪、へそ内部、外陰部、膣部、肛門、男性はこれらに加えて顔全体と男性器には使用できません。

▶ご自分に合った出力レベルよりも高い設定で使用していませんか？

出力レベルをご自分に適した設定へ下げてください。P.14「出力レベルの設定」の項をお読みください。

▶UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れていませんか？

UVフィルター付き照射ウィンドウが壊れている場合は、製品を使用しないでください。ウィンドウは交換できないため、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。

▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか？

生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

お手入れ効果が自分の満足するレベルではない

▶ご自分に合った出力レベルよりも低い設定で使用していませんか？

P.14の「出力レベルの設定」の項をよく読み、出力レベルを適正にセットしてください。

▶お手入れ箇所にまんべんなく光を照射しましたか？

P.16「使用方法」の項のステップ4をお読みください。

▶推奨される使用方法に従っていますか？（お手入れと次のお手入れの間隔があきすぎていませんか？）

最初の2～3カ月間は、2週間ごとのお手入れをおすすめしています。その後は、4～8週間ごとにお手入れを続けてください。最適なお手入れの頻度は、個人の体質や、また身体の部位によっても差があります。お手入れの効果が感じられない場合はお手入れの頻度を上げることをおすすめします。

▶生来の肌色、体毛の色はこの製品の使用に適していますか？








生来の体毛の色が、明るい金色、白色、灰色、赤色の方や、肌の色が濃い褐色・黒に近い色の方はこの製品を使用しないでください。

お手入れ箇所で、ところどころにまた毛が生えてきた

▶お手入れ箇所にまんべんなく光を照射しましたか？

P.16「使用方法」の項のステップ4をお読みください。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、
フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせ願います。

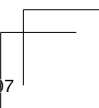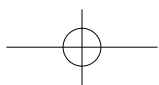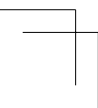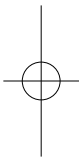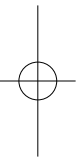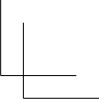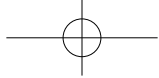

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、電源アダプタ(アタッチメント、掃除用クロス、ポーチを除く)

【補修用性能部品の最低保有期間】

- 補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。
尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。
尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

愛情点検

仕 様

品 名	光美容器 ルメア アドバンス
品 番	SC1993/70
電源アダプタ品番	S036NU2400150
電 源 方 式	交流式(専用電源アダプタ使用)
消 費 電 力	40W
定 格 電 圧	AC100V~240V (50/60Hz)
本 体 質 量	約360g(アダプタを除く)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についてわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>



無料修理規定

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
- 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス 光美容器 ルメア アドバンス 保証書

持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	光美容器 ルメア アドバンス
品番	SC1993/70
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、電源アダプタ（アタッチメント、掃除用クロス、ポーチを除く）
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

日本販売代理店 **小泉成器株式会社** 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター 0120-944-859

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

support-da@philips.com

受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.100.4206.1

©2015 Philips Electronics Japan, Ltd.

キリトリ線

キリトリ線