

PHILIPS



Épilateur à lumière
pulsée

Lumea Advanced

Pour le corps, le visage et le
maillot

15 minutes pour les demi-jambes

<gt/> 250 000 flashes

Cordon extra-long



SC1999/00

Une peau soyeuse, tout simplement, sur le long terme

L'épilateur à lumière pulsée Philips Lumea Advanced évite la repousse des poils du corps, du visage et du bikini. De légères impulsions lumineuses, en applications régulières, vous garantissent une peau douce et nette, pendant 2 mois. Lumea Advanced offre une solution pratique pour une épilation longue durée du corps et du visage. Jusqu'à 75% de réduction de la pilosité après seulement 3 séances.** Philips Lumea a été spécialement développé en collaboration avec des dermatologues pour une utilisation sans danger à domicile.

Épilation longue durée grâce à la technologie de lumière pulsée

- Une peau douce et nette jour après jour
- Adapté pour une utilisation sûre et efficace chez vous
- L'efficacité sans effort
- Convient à de nombreux types de peau et de poils

Sûr, rapide, efficace sur le corps, le visage, la zone du maillot

- Sûr et efficace, même sur les zones sensibles
- Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide
- Accessoire de précision pour plus de sécurité sur le visage
- Capteur intégré de teint de peau
- Accessoire spécial pour l'épilation de la zone du maillot
- Utilisation tout en douceur

Liberté absolue, contraintes minimales

- Aucune pièce de rechange, aucun coût supplémentaire
- Mode flash Continu & Manuel pour un flashage facilité


Points forts

Technologie de lumière intense pulsée




Philips Lumea utilise une technologie innovante basée sur la lumière pulsée, utilisée dans les instituts de beauté. Philips a adapté cette technologie pour une utilisation à domicile, sécurisée et efficace. Philips a travaillé en étroite collaboration avec des experts de la peau renommés pour développer cet épilateur révolutionnaire. Pendant plus de 10 ans, nous avons mené des tests consommateurs poussés avec plus de 2 000 utilisateurs.

Une peau douce et nette jour après jour

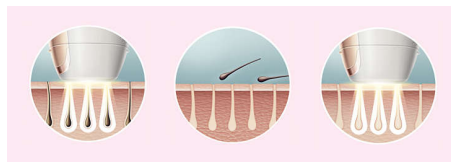

Philips Lumea envoie de légers flashes à la racine du poil réduisant graduellement votre pilosité naturelle. Répétez les séances pour garder une peau lisse et exempte de poils.

L'efficacité sans effort

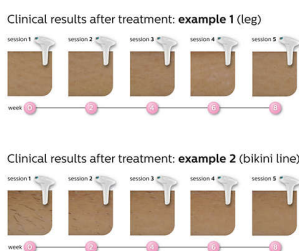

Nos études cliniques ont démontré une réduction significative de la pilosité, avec une peau parfaitement lisse dès quatre séances toutes les deux semaines. Pour maintenir ces résultats, répétez simplement la séance lorsque cela est nécessaire. L'intervalle entre les séances dépend de votre repousse. - Pour agrandir cette image, cliquez dessus dans la galerie en haut de cette page.

Types de peaux et de poils adaptés



Philips Lumea est particulièrement efficace sur les poils blond foncé, bruns ou noirs. Comme toute épilation par la lumière, Philips Lumea n'est PAS efficace sur les poils roux, blond clair, gris ou blancs. De plus, ce produit n'est PAS adapté aux peaux très foncées.

Zones d'application

Vous pouvez l'utiliser en toute confiance pour épiler votre visage (lèvre supérieure, menton et joues) et votre corps, notamment les aisselles, le maillot, le ventre et les bras.

Flashage rapide des jambes



Grande fenêtre de flashage pour une utilisation rapide sur les zones étendues telles que les jambes.

Une sécurité accrue sur le visage



Grâce au filtre de lumière intégré supplémentaire, il peut être utilisé pour épiler les poils du visage en toute sécurité sur la lèvre supérieure, le menton, les joues et les autres zones sensibles.

Accessoire maillot



Accessoire spécial maillot pour un traitement efficace de la zone du maillot, dont les poils sont généralement plus épais que ceux des jambes.

Capteur de teint de peau



Le capteur intégré de teint de peau mesure le teint de la peau à flasher au début de chaque séance, puis ponctuellement en cours de séance. S'il détecte un teint trop foncé pour ce produit, il arrête automatiquement d'émettre des flashes.

Utilisation tout en douceur



Respecte votre peau.

Points forts

Aucune pièce de rechange nécessaire




Philips Lumea est une solution complète, vendue prête à l'emploi. Plus important encore, il ne nécessite ni lampe de remplacement, ni gel.

Mode flash Continu & Manuel



Le mode principal de flashage permet de faire glisser l'appareil sur la peau, pour une épilation plus confortable en continu.

Cinq niveaux d'intensité lumineuse

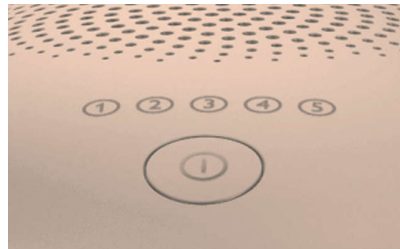

Philips Lumea a cinq niveaux d'intensité lumineuse réglables pour garantir une épilation à la fois douce et efficace. Utilisée correctement, l'épilation à la lumière pulsée du Philips Lumea est douce et sans danger, même pour les peaux délicates ou les zones sensibles.

Caractéristiques

Sites d'application

Zones corporelles: Bras, Jambes, Ventre, Maillot, Aisselles

Zones du visage: Menton, Joues, Lèvre supérieure

Sécurité et paramètres réglables

Filtre UV intégré: Protège votre peau des rayons UV

5 réglages d'intensité lumineuse: S'adapte à votre teint de peau

Système de sécurité intégré: Évite les flashes accidentels

Capteur de teint de peau: Détecte votre teint de peau

Mode d'application

Flash Continu & Manuel: Pour une application pratique

Flash & Manuel: Pour une utilisation sur les courbes

Utilisation avec ou sans fil: Sur secteur

Alimentation

Tension: 100-240 V

Fonctionnement sur secteur

Spécificités techniques

Lampe haute performance: Produit <gt/> 250 000 flashes

Accessoires

Embout de précision (2 cm²): Pour une utilisation en toute sécurité sur le visage

Embout pour le corps (4 cm²): Pour l'utilisation

sur les zones en dessous du cou

Accessoire maillot (2 cm²): Pour une utilisation sur la zone du maillot

Entretien

Garantie: Garantie mondiale de 2 ans

Accessoires inclus

Conditions d'utilisation: Mode d'emploi

Rangement: Étui

Adaptateur: 24 V / 1 500 mA

Accessoire: Tissu de nettoyage

Durée d'utilisation

Maillot: 4 min

Demi-jambe: 8 min

Aisselle: 1 min

Parties du visage: 2 min

