

PHILIPS

IPL Lichtontharing

Lumea Advanced

Voor gebruik op het lichaam

Behandeling onderbenen in 15 minuten

> 250.000 lichtflitsen

Extra lang snoer

SC1993/00



Zachte haarvermindering op de lange termijn

Philips Lumea Advanced verricht wonderen om teruggroei van haar op het lichaam te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

Haar blijft lang weg met IPL-technologie

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief
- Aangepast voor veilig en effectief gebruik in uw eigen huis
- Geschikt voor een grote verscheidenheid aan haar- en huidtypen

Veilig, snel en doeltreffend voor het lichaam

- Voor gebruik op het lichaam
- Groot behandelvenster voor snel gebruik
- Zachte behandeling

Maximale vrijheid, geen gedoe

- Geen vervangingsonderdelen, geen verborgen kosten
- Vijf instelbare lichtsterktes


Kenmerken

IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 2000 vrijwilligers.

Elke dag een zijdezachte huid

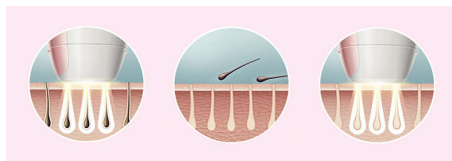

Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Als gevolg hiervan neemt de hoeveelheid haar die teruggroeit geleidelijk af. Door herhaling van de behandeling wordt uw huid prachtig haarvrij en voelbaar glad.

Moeiteloos en effectief

Clinical results after treatment: **example 1 (leg)**



Clinical results after treatment: **example 2 (bikini line)**



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts vier

behandelingen elke twee weken. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts wanneer nodig te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar teruggroeit. - U kunt deze afbeelding vergroten door boven aan deze pagina op de afbeelding te klikken in de fotogalerij

Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is dit product NIET geschikt voor een donkere huid.

Toepassingsgebieden



Verwijder met een gerust hart ongewenst haar op lichaamsdelen onder de neklijn: benen, oksels, bikinilijn, armen en buik.

Snelle behandeling van benen

Groot behandelvenster voor snelle toepassing op grote gebieden, zoals de benen.

Zachte behandeling


Zacht voor uw huid.

Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

Vijf lichtsterktes

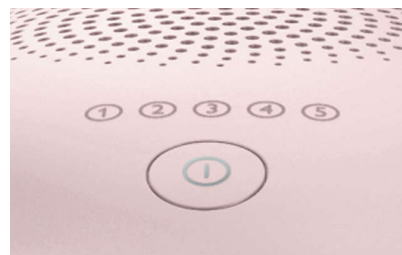

Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig.

Specificaties

Toepassingsgebieden

Lichaamsdelen: Armen, Benen, Buik, Bikini, Oksels

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermt uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Toepassingsmodus

Met of zonder snoer te gebruiken: Met snoer

Stap en Flits: Voor behandeling van lichaamscontouren

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Technische specificaties

Lamp met hoge prestaties: Kan meer dan 250.000 pulsen afgeven

Accessoires

Lichaamsopzetstuk (4 cm²): Voor gebruik onder de neklijn

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie

Meegeleverde artikelen

Gebruiksaanwijzing: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Etui

Adapter: 24 V / 1500 mA

Accessoire: Schoonmaakdoekje

Behandeltijd

Onderbeen: 8 min.

Oksel: 1 min

Bikinilijn: 1 min

