

# PHILIPS

## Фотоэпилиятор IPL для удаления волос

### Lumea Advanced

Для лица и тела

Обработка голени занимает 15 минут

> 250 000 вспышек

Ультрадлинный шнур

SC1997/00



### Наслаждайтесь гладкой кожей без волос минимум 3 месяца\*

Philips Lumea Advanced помогает предотвратить повторный рост волос на теле и лице. При регулярном воздействии световых импульсов кожа остается гладкой и шелковистой каждый день.

#### Удаление волосков на длительный период с помощью технологии IPL

- Гладкая кожа каждый день
- Адаптировано для безопасного и эффективного использования в домашних условиях
- Эффективная эпиляция без усилий
- Подходит для большинства типов волос и кожи

#### Быстрое, безопасное, эффективное удаление волос на лице и теле

- Безопасное и эффективное воздействие даже на чувствительных зонах
- Большое световое окошко для быстрого результата
- Насадка для лица обеспечивает дополнительную безопасность
- Встроенный датчик оттенка кожи
- Бережное воздействие

#### Максимум свободы, минимум проблем

- Не нужно покупать дополнительные запасные части, никаких лишних расходов
- Режим "Slide and Flash" для удобства использования
- Пять настроек интенсивности светового импульса


# Основные особенности

## Технология IPL




В основе работы фотоэпилятора Philips Lumea лежит технология интенсивного светового импульса (IPL), которая используется для удаления волос в профессиональных салонах красоты. Компания Philips адаптировала эту технологию для безопасного использования в комфортной домашней обстановке. Эта уникальная система удаления волос от Philips была разработана в сотрудничестве с ведущими дерматологами. Более 10 лет мы активно проводили испытания этой технологии с участием более 2000 женщин.

## Гладкая кожа каждый день

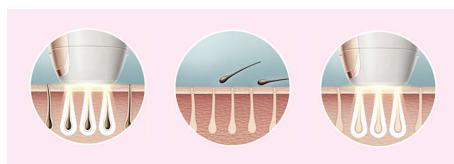

Philips Lumea бережно воздействует на корень волоса при помощи технологии светового импульса. В результате рост волос на теле постепенно сокращается. При проведении повторных процедур кожа сохраняет превосходную гладкость надолго.

## Эффективная эпиляция без усилий

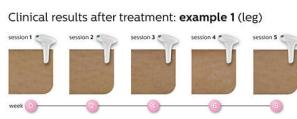

Клинические исследования показали, что после проведения четырех сеансов с частотой раз в две недели количество волос заметно сокращается, и кожа становится более гладкой. Для поддержания

результатов просто повторяйте процедуру по мере необходимости. Интервал зависит от индивидуальных особенностей роста волос.

## Типы волос и кожи



Система Philips Lumea эффективно удаляет (натуралистичные) русые, каштановые и черные волосы. Как и другие фотоэпиляторы, Philips Lumea HE эффективен для удаления рыжих, светло-русых и седых волос. Также прибор HE подходит для темной кожи.

## Области применения



Прибор подходит для удаления волос на лице (область над верхней губой, подбородок и виски) и теле, например на ногах, животе и руках, в области подмышек и зоне бикини.

## Быстрое удаление волос на ногах



Увеличенное световое окошко для быстрой обработки больших участков кожи.

## Усиленная защита лица



Благодаря дополнительному световому фильтру прибор можно использовать для удаления волос над верхней губой, на подбородке, щеках и других чувствительных участках лица.

## Датчик цвета кожи



Перед началом и периодически во время процедуры встроенный датчик определяет оттенок кожи на обрабатываемом участке. Если кожа очень темная, прибор автоматически перестает генерировать световые импульсы.

## Бережное воздействие



Бережное воздействие на кожу.

# Характеристики

## Области применения

**Участки тела:** Руки, Ноги, Живот, Область бикини, Область подмышек

**Участки лица:** Подбородок, Бакенбарды, Верхняя губа

## Безопасность и регулируемые настройки

**Встроенный УФ-фильтр:** Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей

**5 настроек мощности света:** Выбор настройки в зависимости от типа кожи

**Встроенная система безопасности:** Предотвращает случайные вспышки

**Датчик оттенка кожи:** Определяет оттенок кожи

## Режим применения

**Подача вспышек при скольжении:** Для удобства использования

**Подача вспышек при прижатии:** Для сложных в

обработке участков

**Проводной / беспроводной режим работы:**

Проводные

## Мощность

**Напряжение:** 100–240 В

**Питание от сети**

## Технические характеристики

**Высокоэффективная лампа:** Обеспечивает > 250 000 вспышек

## Аксессуары

**Насадка для точечного удаления волос (2 см<sup>2</sup>):** Для безопасного воздействия на кожу лица

**Насадка для тела (4 см<sup>2</sup>):** Для обработки областей ниже шеи

## Обслуживание

**Гарантия:** Международная гарантия сроком на 2 года

## В комплекте

**Инструкция по эксплуатации:** Инструкция по эксплуатации

**Хранение:** Чехол

**Адаптер:** 24 В/1500 мА

**Аксессуары:** Очищающая ткань

## Время эксплуатации

**Голень:** 8 мин.

**Подмышечная впадина:** 1 мин.

**Линия бикини:** 2 мин.

**Участки лица:** 2 мин.

