

PHILIPS

ルメア アドバンス

Lumea Advanced

からだ用

約 16 分で両ひざ下のお手入れ完了

照射回数 約25万回 (レベル5の時)

長めのコード

SC1993/70



2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。

ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*光美容器「ルメア アドバンス」。素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。

IPL技術でムダ毛の少ない状態を維持

- なめらかな肌ですてきな毎日を
- ご自宅でのお手入れにも安心かつ効果的
- 片手で簡単に操作が可能で使いやすい
- さまざまな毛色・肌色に対応

全身（顔以外）をすばやく効果的にお手入れ

- からだ用
- 大きな照射ウィンドウでお手入れ時間を短縮
- やさしくお手入れ

簡単な手間で大きな自由を

- 交換部品がないため、追加購入が不要
- 光の強さを 5 段階で調節

特長

光美容器




フィリップスの光美容器ルメアは、肌の表面の毛に反応する光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安心、かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と共同開発を行っています。10年以上の時間をかけ、2,000人以上の消費者に対して調査を行っています。

なめらかな肌ですてきな毎日



Philips Lumeaは刺激の少ないパルス光を毛根に照射します。そのため、生えてくる体毛の量がだんだん少なくなり、お手入れを繰り返すことで、なめらかでムダ毛のない美しい肌を手に入れることができます。

片手で簡単に操作が可能で使いやすい

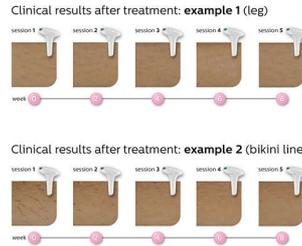

2週間に一度のお手入れを4~5回続けると、なめらかな肌を実感できます。その後は必要に応じてお手入れを繰り返してください。

さまざまな毛色・肌色に対応



フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

照射エリア



首から下の全身（脚、ワキ、ビキニエリア、腕、お腹の部分）のご使用も安心。

両脚のお手入れにかかる時間は約16分

大きな照射ウィンドウで、脚など広範囲のお手入れもすばやく

やさしくお手入れ


肌にやさしい

交換部品がないため、追加購入が不要



フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

光の強さは5段階

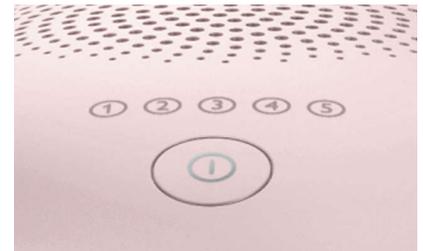

フィリップスの光美容器ルメアは、やさしく確実な効果を発揮できるように照射レベルを5段階に調節できます。ルメア光美容器は、正しく使用することで敏感な肌や部位のお手入れにもやさしく安心。

仕様

適用部位

からだ: 腕, 脚, へそ, ビキニエリア, ワキ

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護

5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能

内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

アプリケーションモード

コンセントに接続して使用可能: 交流式

スタンプモード/フラッシュモード: からだのカーブにフィット

電源

対応電圧: AC100~240 V (海外電圧対応可能)

技術仕様

高性能ランプ: 約 25 万回照射可能

アタッチメント

からだ用アタッチメント (4cm²): 首から下の部分用

サービス

保証: 2 年のグローバル本体保証

品目

取扱説明書: 取扱説明書

ストレージ: 収納ケース

アダプタ: 24V/1500mA

アクセサリー: 掃除用クロス

アプリケーション時間

ひざ下 (片側): 8 分

ワキ (片側): 1 分

ビキニエリア: 1 分

