

DiamondClean

300 series

Rechargeable
sonic toothbrush



ソニッケアー ダイヤモンドクリーン
300シリーズ
音波式電動歯ブラシ

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますのでお買い求めの際に記入を受けてください。

PHILIPS
sonicare

商品のご確認

ソニックアーク ダイヤモンドクリーン 300シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

*改良のため、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

●はじめに	商品のご確認	1
	目次	2
	必ずお守りください	3・4
	各部の名称	5
	ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法 ソニックア어의保管	6
	充電の仕方	7
	各国の電圧	8
●ご使用方法	ソニックア어의機能	9・10
	使い方	11・12
	上手なみがき方	13
	モード設定	14
	ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方	15
●廃棄するとき	リチウムイオン電池のリサイクルについて	16
●困ったとき	故障かな?と思ったら	17・18
●保証	保証とアフターサービス	19
	仕様	20
	無償修理規定	21
	保証書	最終ページ

必ずお守り ください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱をしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

	警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)を示します。



・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

警告



●製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの歯科医院またはソニッケアーコール(0120-418-608)にご相談ください。



●お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。再度コンセントを差し込み際には、充電器が濡れていないことを確認してください。また、濡れている手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。



●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、電源コードを熱したものの上に置いたり、屋外で使用しないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●浴室での使用は絶対にしないでください。感電する場合があります。



●充電器を浴室で保管しないでください。水の中に落ちた充電器には絶対に触れないでください。



●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電のおそれがあります。



●ハンドルを充電する時は専用の充電器以外では行わないでください。



●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。

警告



●歯や歯ぐきに歯ブラシを強く当てたり、1か所に長く当てすぎないでください。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。



●電源プラグをコンセントから抜くときは、充電器の電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



●器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●歯ブラシのプラスチック部分を歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。



●治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。





●乳幼児（乳歯）や自分で操作ができない方、口腔の感覚が弱い方などは使用しないでください。

使用上のご注意



1. 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2カ月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。
2. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
3. ペースメーカーをお使いの方が本製品をご使用になる場合は、あらかじめかかりつけの医師にご相談ください。また、その他健康面で不安なことがある場合も同様にご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。
4. 本製品は、歯、歯ぐき、および舌の洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。
5. お子様をご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。
6. 炭酸ナトリウムを含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドをよく水洗いしてください。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。
7. メーカーが推奨している以外の付属品は使用しないでください。
8. 本製品は食器洗浄機や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。

各部の名称

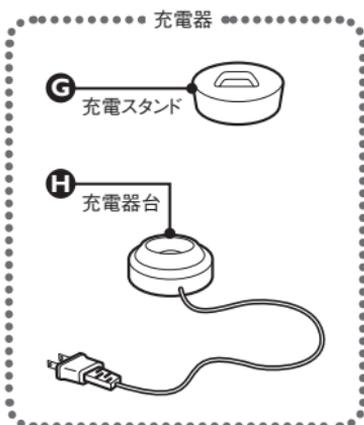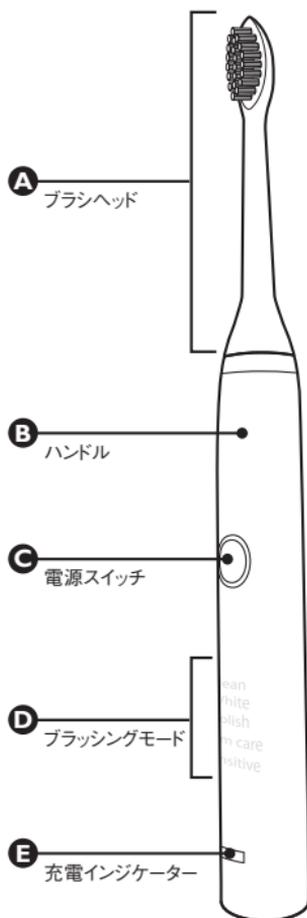



ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法

1. 毛先がハンドルの正面を向くようにブラシヘッドの向きをそろえてください。
2. ブラシヘッドが止まるまで、金属シャフトにヘッドをしっかり差し込んで固定してください。
※ブラシヘッドとハンドルの間にはわずかなすき間があります。

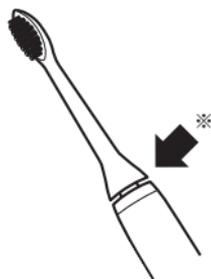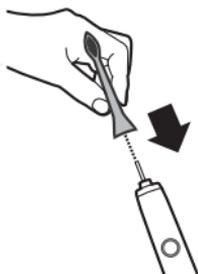

ソニックア어의保管 (長期間使用しない場合)


1. 充電器の電源プラグをコンセントから抜き、お手入れをします (P15を参照してください)。
2. 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

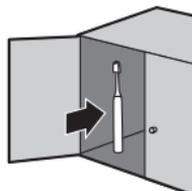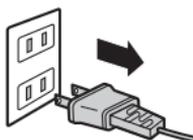


充電の仕方

ソニックアーは充電しないと使用できません。初めてお使いになるときや、使用中に動作が停止したときは、24時間充電してください。ソニックアーをフル充電するには最低24時間必要です。

1. 充電器台に充電スタンドをセットし、充電インジケーターが見えるようにハンドルを立てます。

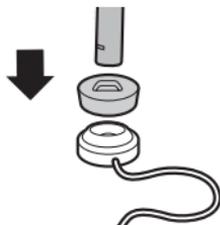

2. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。

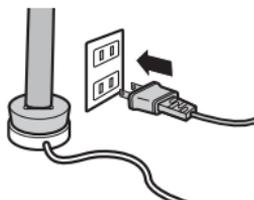

充電表示

充電催促表示

電池残量が少なくなると、黄色のライトが点滅し、ブラッシングの最後にピープ音が3回鳴ります(残りの使用時間は約3分)。

電池残量がなくなると、電源スイッチを押したときにピープ音が10回鳴るので、充電してください。



充電中

充電中はライトが緑色に点滅します。フル充電したソニックアーは、2分間のブラッシングを1日2回使用した場合約3週間使うことができます。

※途中充電器に立てることなく保管された場合



注意

- 充電器はソニックアー ダイヤモンドクリーン 300シリーズ用です。他のシリーズのものはお使いになれません。
- 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。

※充電中は本体が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

※フル充電したソニックアーのブラッシング可能回数は、時間経過による充電電池の劣化に伴い減少します。

各国の電圧

海外でのご使用も可能です。
ただし、アダプタや電圧など
現地で充分お確かめのうえ
ご使用ください。

1. プラグアダプタなしで使える国(地域)と電圧

No plug adapter required.




アメリカ U.S.A.	120V	タイ Thailand	220V	台湾 Taiwan	110V
カナダ Canada	120V	フィリピン Philippines	220V	中国 China	220V
グアム Guam	120V	ベネズエラ Venezuela	120V	日本 Japan	100V
サイパン Saipan	110V	メキシコ Mexico	125V		

2. プラグアダプタ(C-2)を使用する国(地域)と電圧

Plug adapter required.

C-2プラグアダプタ

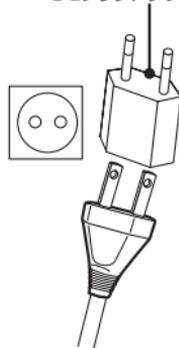

アルゼンチン Argentina	220V	オランダ Netherlands	220V	ノルウェー Norway	230V
イギリス U.K.	220V	ギリシャ Greece	220V	ハンガリー Hungary	220V
イスラエル Israel	230/127V	スイス Switzerland	230V	フィンランド Finland	220V
イタリア Italy	220V	スウェーデン Sweden	220V	ブラジル Brazil	220V
イラン Iran	220V	スペイン Spain	220V	フランス France	220V
インド India	230V	チリ Chile	220V	ベルギー Belgium	220V
インドネシア Indonesia	120V	チュニジア Tunisia	220V	ポーランド Poland	220V
エチオピア Ethiopia	220V	デンマーク Denmark	220V	韓国 Korea	100/220V
オーストラリア Australia	240V	ドイツ Germany	220V	旧ソビエト連邦 C.I.S.	127/220V
オーストリア Austria	220V	ニューカレドニア New Caledonia	220V	南アフリカ South Africa	220V

注意：プラグアダプタは別途
ご購入ください。

上記はC-2プラグアダプタを使用する主な国(地域)の例です。
国によっては地域、ホテルにより電圧・プラグの形状が異なる場合がありますので、
ご確認の上お使いください。

ソニックアー の機能

イージースタート機能

イージースタートとは、ソニックアーに慣れていただくまでの間、通常より弱いパワーでお使い頂き、段階的に上げていく機能です。初めてソニックアーをお使い頂いてから15回目のブラッシングで通常のブラッシングパワーになります。

なお、1回のブラッシング時間が1分未満の場合、1回とカウントされない場合があります。

また、イージースタート機能は工場出荷時にオンになっています。

14回目のブラッシングまでは必ず最低1分間の歯みがきを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

【イージースタートのオンおよびオフ設定】

- ① ブラシヘッドをハンドルに装着してください。
 - ② コンセントに充電器の電源コードが差し込まれているのを確認して、ハンドルを充電器に立ててください。
- イージースタート機能をオフにする。
電源スイッチを2秒間押し続けると、ビープ音が1度鳴り、イージースタート機能がオフになります。
 - イージースタート機能を再びオンにする。
電源スイッチを2秒間押し続けると、ビープ音が2度鳴り、イージースタート機能が再びオンに設定されます。
- ※ソニックアーの優れた歯垢除去効果が損なわれますので、慣れるための最初の準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはおすすめしません。

スマートタイマー機能

スマートタイマー機能は、設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。

※米国の歯科専門家は1日2回各2分以上のブラッシング時間を推奨しています。


カドペーサー機能

カドペーサー機能は、時間の区切りをピープ音でお知らせする機能です。お口の中を均等にくまなくブラッシングすることができます。


一定の間隔で短いピープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。お口の中をイラストのように4箇所に分け、それぞれを一定の間隔で磨くことができます。それぞれのモード設定によってピープ音の鳴る間隔は異なります。使い方(P11)およびモード設定(P14)のページもご参照ください。

— 磨き方参考例 —

- ① 上あご右側表裏
- ② 上あご左側表裏
- ③ 下あご右側表裏
- ④ 下あご左側表裏

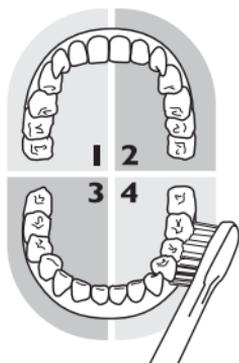

- ① 上あご表側(頬側)
- ② 上あご裏側(舌側)
- ③ 下あご表側(頬側)
- ④ 下あご裏側(舌側)

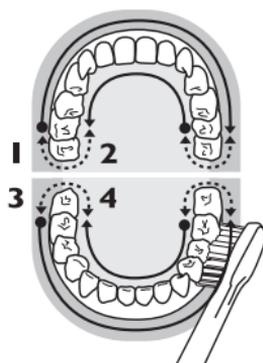

使い方

1. ブラシを取り付ける。

ブラシの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシを金属シャフトにまっすぐはめ込んでください。

P6(ブラシヘッドをハンドルに取り付ける方法)を参照してください。



2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。

お好みにより、歯磨き粉をつけます。


※ブラシヘッドのキャップはご使用前に外してください。



3. 歯磨き粉が飛び散らないように、ブラシヘッドを口に入れてから電源スイッチを押します。

ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に少し角度をつけて軽く当てて、ゆっくりと移動させます。長い毛が歯間に届くよう気をつけて、同じ箇所です約2秒間ずつブラッシングしてください。ブラシで歯を強く磨かないでください。

※カドペーサー機能(P10を参照してください)を使うと、お口の中の上下の歯の表裏、4つのセクションをまんべんなくブラッシングできます。

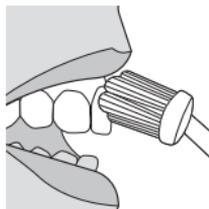

4. ブラッシングが終わったら、かみ合わせ部分や着色汚れ(ステイン)がある部位を追加でブラッシングすることも可能です。また、お好みによりパワーオンもしくはオフの状態でのクリーニング用にもお使いいただけます。

※ソニックケアは下記の部位にも安心してお使いいただけます。

- 歯列矯正装置(ブラシヘッドの消耗が早まります)
- 歯科補綴物(詰め物、クラウン、ラミネートベニア)



- ソニックアークを初めてお使いいただくと、少しくすぐったい感じや、ちくちくした感じを受けることがあります。慣れるにつれ、この感じは少なくなっていきます。
- ソニックアークの動きに任せてください。力を入れてこすったりすると、逆効果です。


5. ブラッシングを終えると、自動的にスイッチが切れます。

さらに磨きたい場合は、もう一度スイッチを入れます。

6. ブラッシング後は、口を水でゆすぎます。

7. 使用後は、必ずブラシヘッドを水で洗ってください。水道蛇口から水を出して、ブラシヘッドに残っている歯磨き粉を洗い流してください。

電源を入れてブラシヘッドを振動させると、よりきれいになります。

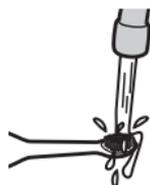

※ブラシが消耗すると、青色のブラシ毛が白くなり交換時期をお知らせします。最良のブラッシング効果を得るため、ブラシを約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。

上手なみがき方

以下のポイントに注意していただくと、効果的なブラッシングができます。

ソニックアーの効果的なブラッシング方法

ブラシを少し斜めにあててください。




歯と歯ぐきの境目

ブラシを少し立てるようにあててください。



奥歯の奥

かみ合わせ面に対して垂直にあててください。

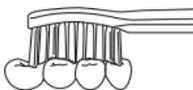

かみ合わせ

ブラシをたてにあててください。




前歯の裏(タテにあてる)

ブラシを歯の表面に少し斜めにあててください。



歯の表面

ブラシを歯の表面に少し斜めにあててください。

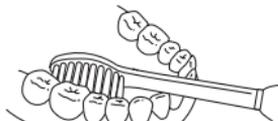

奥歯の裏側

ヒント

- ・歯磨き粉をお使いになる場合、飛び散るのを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源を入れてください。
- ・ソニックアーの性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽く当ててブラッシングしてください。
- ・カドペーサー機能を利用するとお口の中を均等にまんべんなくブラッシングできます。
- ・ソニックアーをはじめとお使いいただく方は、慣れるまでくすぐったく感じることがあります。慣れるとものにこの感覚は減少します。
- ・お好みによって舌のブラッシングにもお使いいただけます。

このような場合

●歯列矯正装置をつけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を少し斜めに当てるようにして磨きます。
歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。

●治療後の歯科補綴物


詰め物、クラウン、ラミネートベニア等々の歯科補綴物にも安心してご使用いただけますが、何か異常を感じた場合、歯科医師にご相談ください。

※ブラシが消耗すると、青色のブラシ毛が白くなり交換時期をお知らせします。
最良のブラッシング効果を得るため、ブラシを約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。

モード設定

本製品にはブラッシングのモードを選べる設定機能があります。お好みに合わせて下記のようにモード設定を変更してください。

モード設定の切り替え

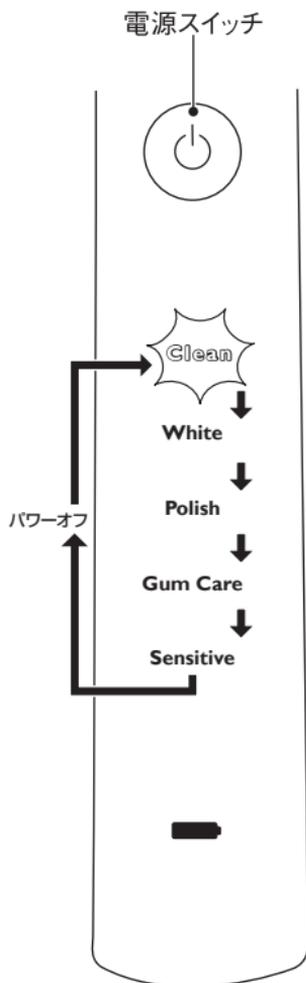

- 電源スイッチを押すごとに、1つずつモードが切り替わります。選択されたモードの白色ランプが点灯します。
- モードを切り替えたいときは、5秒以内にボタンを押してください。
- 5秒以上経ってからボタンを押すと、電源が切れます。
- 使用したモードは次回まで記憶されます。

押す回数	モード
①回押す	クリーンモード
②回押す	ホワイトモード
③回押す	ポリッシュモード
④回押す	ガムケアモード
⑤回押す	センシティブモード
⑥回押す	パワーオフ

- ボタンを押す ↓
- ① クリーンモード** 歯垢をしっかり落とす通常のブラッシング
ブラッシング時間：2分
 - ② ホワイトモード** 歯の表面のステインを落とす動作(2分間)の後に、歯を磨きあげ光沢を与えます(30秒)
ブラッシング時間：2分30秒
 - ③ ポリッシュモード** 歯を磨きあげ光沢を与えます
ブラッシング時間：1分
 - ④ ガムケアモード** 歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き(2分間のクリーンモード)の後に歯と歯ぐきの境目をやさしくマッサージし(1分間)歯ぐきの健康を向上させます
 - ⑤ センシティブモード** 敏感な歯と歯ぐきをやさしくブラッシング
ブラッシング時間：2分
 - ⑥ パワーオフ** 動作が止まります

ボタンを押す

ハンドルおよび充電器のお手入れの仕方




注意

本製品は食器洗浄機や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。


ハンドル

1. ブラシヘッドを外して金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してください。
※金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さないようにしてください。破損する可能性があります。
2. ハンドル表面を湿らせた布で全体的にむらなく拭いてください。

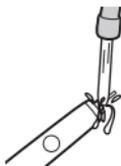

ブラシヘッド

1. ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い自然乾燥させてください。
2. ハンドルからブラシヘッドを外して接合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗浄してください。

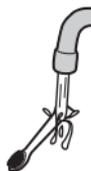

充電器

1. 充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 湿らせた布で充電器の表面をきれいに掃除してください。



注意

充電器は決して水の中に入れてください。



注意

お手入れの際、シンナー、ベンジン、アルコール類を使用すると、変色、変形の原因にもなりますので、絶対に使用しないでください。充電器のお掃除の時に、電源コード・プラグを調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、プラグをコンセントから抜いてソニックアーコール 0120-418-608 までご相談ください。

廃棄するとき

リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。

※ご不明な場合は、ソニックアーコール
(0120-418-608)までお問い合わせください。




- ・製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- ・一度分解したハンドルは安全上の理由から、絶対に再使用しないでください。

充電電池の取り外し方

- ・必ず1～4の手順に従って作業を行ってください。
- ・作業を行う際は目、手、指などをけがされないように注意してください。


1. ハンドルを充電器から取り出し、スイッチを“ON”にして完全に動作しなくなるまで電池を放電させてください。何度もこのステップを繰り返して完全に動作しなくなったことをご確認ください。

3. ハンドル下部を叩いて外部カバーを壊し(1)、充電電池ホルダーを引き抜きます(2)。

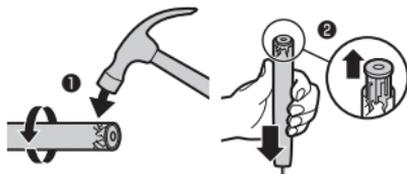

2. ハンドルを布で包み表面の頑丈な場所に置き、ハンドルの底から2センチの位置をハンマーで軽く叩きます(1)。ハンドルを90度回転させ(2)、底のキャップが外れるまで1②を繰り返します。底のキャップを外します(3)。

4. 充電電池の端のあたりで回路基盤の下にドライバーの先を入れてドライバーをひねり、充電電池と回路基盤の接続部を壊してください。回路基盤を取り除き、ドライバーを使って充電電池を完全に取り外してください。

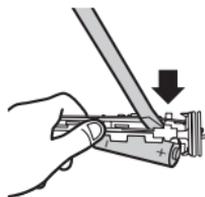

故障かな?と 思ったら

故障かな?と思ったら
お調べください。

作動しない。

- 充電残量をご確認ください(詳しくはP7をご覧ください)。
- 電源にプラグがきちんとささっていることを確認してください。
- 場合によっては、ブラシヘッドを再度装着、あるいは交換する必要があるかもしれません。

動作がおかしい(例: 動きにムラがある、ブラッシング中にブラッシング力が弱くなった)。

- 充電電池を活性化するために24時間以上充電してください。

充電しても数分しか使えない。

- ハンドルの底が充電スタンドに接触するようにまっすぐ立ててください。
- 充電時間が短い可能性があります。充電電池を活性化するために24時間以上充電してください。

ブラッシングの力が弱く感じる。

- ブラシヘッドを押し当てすぎると、ブラシの振幅が小さくなります。
ブラシヘッドは歯に軽く当てるようにしてください。
- イージースタート機能が働いている可能性があります。
詳しくはP9をご覧ください。
- 充電が不十分な場合もありますので、再度24時間以上充電してください。
- ブラシヘッドが3カ月に一度交換されているかどうかご確認ください。

ブラッシング中、一瞬毛先の動きが止まる。

- カドペーサー機能により、お口の中を均等にくまなく磨けるよう30秒または15秒ごとに短いピーブ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。
詳しくはP10をご覧ください。

使い始めてから1分～3分程度でブラシヘッドの動作が止まる。

- スマートタイマー機能により、電源スイッチを入れてから1分～3分経過すると自動的に動作がとまります。詳しくはP9をご覧ください。
- モード設定により1分(ポリッシュモード)、2分30秒(ホワイトモード)、3分(ガムケアモード)のブラッシング時間の設定が可能です。詳しくはP14をご確認ください。

ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がする。

- ブラシを少し斜め(45°)にあててください。詳しくはP13をご覧ください。

変なにおいがする。

- ハンドル、ブラシヘッド、充電器をお手入れしてください。
詳しくはP15をご覧ください。

* 以上の処置により、正常な状態に戻らない場合は、ソニックアーコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 下記の保証は、本製品を購入された方のみ適用されます。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売歯科医院名」等の記入をお確かめのうえ、販売歯科医院から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証期間……お買い上げ日から2年間

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ソニックアークコール(0120-418-608 以下省略)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼されるまえに、この取扱説明書をよく読みいただき、再度点検のうえ、尚、異常のあるときはご使用中を中止し、ソニックアークコールへご依頼ください。

【保証期間中は】

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
- 保証書の規定に従って修理させていただきます。

【保証期間が過ぎているときは】

- ソニックアークコールにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有償で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便 利 メ モ

お買い上げ日	年 月 日	販 売 歯科医院名	TEL. ()
--------	-------	--------------	----------

ご使用の時このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感ずる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずして、必ずソニックアーコールにご相談ください。

仕 様

品 名	音波式電動歯ブラシ
形 名	ソニックアー ダイヤモンドクリーン 300シリーズ
定 格 電 圧	AC100V-240V、50-60Hz
ブ ラ シ 振 動 数	約31,000ストローク/分
充 電 時 間	約24時間
使 用 時 間	フル充電後、通常使用 (2分間のブラッシングを1日2回)で約3週間
使 用 充 電 池	リチウムイオン電池 (Li-ion)
消 費 電 力	充電器 1.4-1.6W(充電時)

フル充電したソニックアーのブラッシング回数は、時間経過による充電電池の劣化に伴い減少します。

● ブラシヘッド ●

最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッドは約3カ月に1回交換してください。

破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。

ソニックアー ダイヤモンドクリーン 300シリーズのブラシヘッドは、ダイヤモンドクリーン 300シリーズ専用のものをお使い下さい。

- ソニックアーの修理受付はソニックアーコールが承ります。
- 修理サービス等についてわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

ソニックアーコール **0120-418-608**

(祝日を除く月～金10:00～18:00)

ホームページアドレス www.sonicare.jp

製造元

Philips Oral Healthcare, Inc.

221000 Bothell Everett Hwy,
Bothell, WA 98021-8431 U.S.A.

輸入販売代理店

 株式会社 **ソニカ**

〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9

無償修理規定

〈無償修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、無償修理します(ブラシ、充電スタンドを除く)。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、ソニックアークール(0120-418-608、以下省略)にご依頼ください。
3. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売歯科医院名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
4. 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ソニックアークールにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

ソニックアー 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、ソニックアーコールに修理をご依頼ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	音波式電動歯ブラシ
形名	ソニックアー ダイヤモンドクリーン 300シリーズ
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル、充電器台(ブラシ、充電スタンドを除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所〒
	ご芳名
	電話番号
★販売歯科医院	歯科医院名・住所・電話番号

★ ご販売歯科医院様へ

この保証書は患者様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印して患者様にお渡しください。

お問い合わせ 修理のご依頼は

ソニックアーコール
(祝日を除く月～金10:00～18:00)

0120-418-608

輸入販売代理店

 株式会社 **ヨシダ**

この印刷物は再生紙を使用しております。 100% recycled paper 

4235.020.47901

©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.(KPENV) All rights reserved.
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips Electronics N.V.
の商標または登録商標です。

Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.