

PHILIPS

sonicare

Interdental - laetav

AirFloss

1 otsakuga



HX8241



Ei kasuta hambaniiti? Võtke appi AirFloss.

Eemaldab hambakatu sealt, kuhu harjased ei pääse

Nende jaoks, kes ei kasuta regulaarselt hambaniiti, on AirFloss hõlbus viis hakata oma hambavahesid puhastama. AirFlossi saab kasutada nii suuvee kui tavalise veega ning selle ainulaadne õhu ja veepiisakeste tehnoloogia aitab eemaldada hambakatu raskesti ligipääsetavatest kohtadest.

Hambavahed puhtaks vaid 30 sekundiga

- Puhastab kogu suu vaid 30 sekundiga
- Suuna. Vajuta. Puhasta!

Aitab kujundada tervislikke harjumusi

- Hõlbus viis hambavahede puhastamise parandamiseks

Parandab suuhügieeni


- Eemaldab rohkem kattu hammaste vahelt
- Aitab parandada igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Aitab vältida hambaauke hambavahedes

Lihtne kasutada

- Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia
- Mugav ergonomiline käepide
- Juhtots tagab õige paigutuse
- Otsak igale pereliikmele


Esiletõstetud tooted

Hõlbus viis alustamiseks

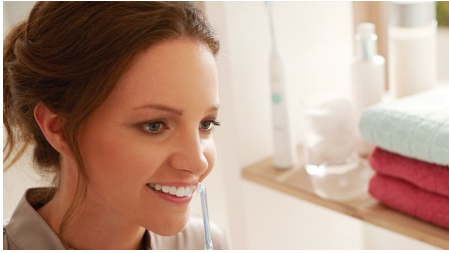


Hambavahede puhastamine on üldise suuhügieeni seisukohast väga tähtis. AirFloss on hõlbus viis hambavahede põhjalikumaks puhastamiseks, aidates kujundada tervislikku harjumust. Pärast kolmekuulist AirFlossi kasutamist jätkas 96% ebaregulaarsetest hambaniidikasutajatest AirFlossi kasutamist vähemalt neljal päeval nädalas.

Eemaldab rohkem kattu hammaste vahelt

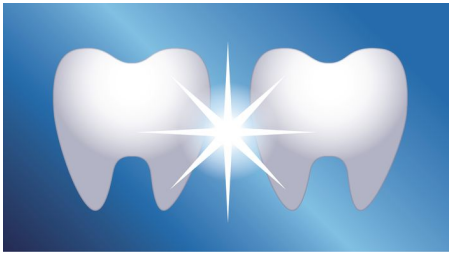

Eemaldab rohkem kattu hammaste vahelt

Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia

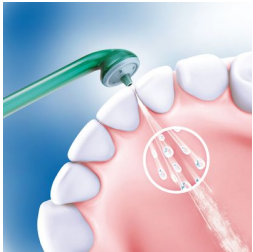

Õhu ja veepiisakeste tehnoloogia

Juhtots



Peenike, nurga all olev otsak ja juhtots lihtsustavad õige paigutuse leidmist. Lihtsalt libistage juhtotsa piki hambapinda igemeserva lähedal, kuni ots kinnitub hammaste vahele.

30-sekundiline puhastus



Tänu AirFlossile kulub kogu suu puhastamiseks vaid 30 sekundit. Lihtsalt vajutage korra nuppu ühekordse voo tekitamiseks, seejärel liikuge edasi ja korrake tegevust. Uudse automaatvoo funktsiooni kasutamiseks hoidke nuppu all ja liigutage juhtotsa ühest hambavahest teise. See purskab vett automaatselt iga sekund.

Lihtsalt täidetav nõu



Täitke käepidemes olev nõu suuvee või veega värskendava puhtuse saavutamiseks, seejärel suunake ja pritsige. Nõu mahutab vedelikukoguse, millest piisab kuni kaheks kasutuskorraks.

Igemete parem tervis



Sonicare AirFlossi puhul on kliiniliselt tõestatud, et see parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.

Aitab vältida hambauuke



Sonicare AirFloss aitab vältida hambaukude teket hambavahedes, eemaldades õrna veejoa abil kattu, mis jäi harjamisel märkamata.

Ergonoomiline käepide

AirFlossil, mis on loodud kitsastes kohtades liikumise hõlbustamiseks, on mugav ergonoomiline ja mittelibiseva kattega käepide.

Värvilised otsakud

Tänu värvilistele otsakutele ja käepärasele otsaku hoidikule on AirFlossi kasutamine kogu perele kätitegu.

Spetsifikatsioon

Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Akunäidik: Vilkumine annab märku aku tühjenemisest

Aku tööiga: Kuni kaks nädalat

Otsakute süsteem: Lihtne peale lükata ja ära võtta

Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg: Vahetage otsakut iga kuue kuu järel

Aku tüüp: Liitumioon

Laadimisaeg: Täislaadimiseks kulub 24 tundi

Võimsus

Pinge: Mitmevoldiline laadija

Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

Kaasolevad tarvikud

AirFlossi käepide: 1

AirFloss Nozzle: 1, 3

Laadija: Üks mitmevoldiline laadija

Otsaku hoidik: 1

Puhastusjõudlus

Jõudlus: Eemaldab kuni viis korda rohkem kattu*

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Automaatvoo funktsioon: Puhastab kogu suu 30 sekundiga

Otsakud: Parimate tulemuste saamiseks vahetage iga 6 kuu tagant

Projektlahenduse spetsifikatsioon

Värvus(-ed): Valge, rohelise varjundiga

