

PHILIPS

sonicare

Zahnzwischenraumreinigung
– wiederaufladbar

AirFloss

mit 1 Düse



HX8241



Sie verwenden keine Zahnseide? Dann verwenden Sie den AirFloss.

Entfernt Plaque gründlicher als eine Zahnbürste

Für alle, die ihre Zähne nicht regelmäßig mit Zahnseide reinigen, ist AirFloss eine einfache Möglichkeit der Zahnzwischenraumreinigung. AirFloss kann mit Mundwasser oder Wasser verwendet werden und bietet eine einzigartige Kombination aus Luftstößen und Mikrotröpfchen zur Entfernung von Plaque an schwer erreichbaren Stellen.

Reinigung in 30 Sekunden

- Reinigt Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden
- Ausrichten. Drücken. Sauber!

So wird gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit

- Eine einfache Möglichkeit für eine verbesserte Reinigung zwischen den Zähnen

Verbessert die Mundgesundheit


- Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen
- Hilft dabei, die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen zu verbessern
- Hilft dabei, Karies zwischen den Zähnen zu vermeiden

Einfache Bedienung

- Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen
- Komfortabler ergonomischer Griff
- Führungsspitze für richtige Platzierung
- Eine Düse für jedes Mitglied der Familie


Besonderheiten

Für den einfachen Einstieg

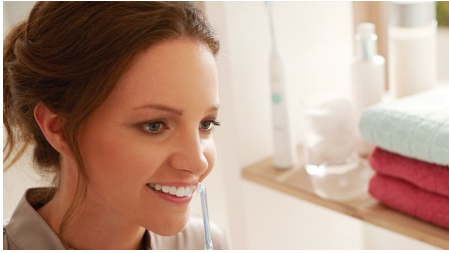

Die Reinigung der Zahnezwischenräume ist sehr wichtig für die gesamte Mundgesundheit. AirFloss macht es Ihnen leicht, die Zahnezwischenräume gründlich zu reinigen und gesunde Zahnpflege zur Gewohnheit werden zu lassen. Nach drei Monaten Verwendung des AirFloss verwenden 96 % der Personen, die unregelmäßig Zahnseide benutzen, den AirFloss weiterhin vier Mal pro Woche oder häufiger.

Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen

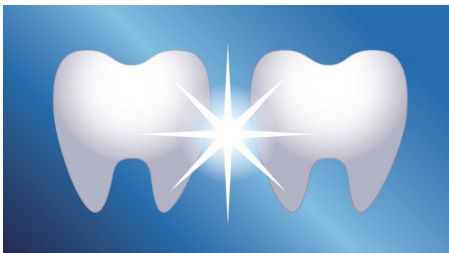

Entfernt mehr Plaque zwischen den Zähnen

Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen



Kombination aus Luft und Mikrotröpfchen

Führungsspitze



Die schlanke, angewinkelte Düse und die Führungsspitze erleichtern die richtige Positionierung. Führen Sie sie einfach an der Oberfläche des Zahns nahe dem Zahnfleisch entlang, bis die Spitze auf einen Zwischenraum zwischen den Zähnen trifft.

Reinigung in 30 Sekunden



Mit AirFloss können Sie Ihren ganzen Mund in nur 30 Sekunden reinigen. Drücken Sie die Taste einmal für einen einzelnen Stoß, dann bewegen Sie die Spitze weiter und drücken wieder die Taste. Um die neue Autoburst-Funktion zu verwenden, halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie die Führungsspitze von Zwischenraum zu Zwischenraum. Es wird automatisch jede Sekunde ein Druckluftstoß ausgelöst.


Behälter für einfaches Befüllen



Füllen Sie den Behälter auf dem Griff entweder mit einem Mundwasser oder mit Wasser für eine erfrischende Reinigung, dann richten Sie

die Spitze aus und los geht's. Der Behälter enthält genug Flüssigkeit für bis zu zwei Verwendungen.

Bessere Gesundheit des Zahnfleischs

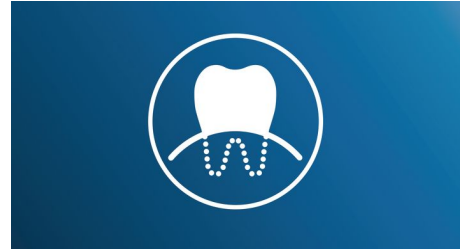

Es ist klinisch erwiesen, dass Sonicare AirFloss die Gesundheit des Zahnfleischs in nur zwei Wochen verbessert.

Hilft dabei, Karies zu vermeiden



Indem Plaque, die beim Zähneputzen nicht gelöst wurde, sanft mit Druckluft entfernt wird, verhindert Sonicare AirFloss Karies zwischen den Zähnen.

Ergonomischer Griff

Entwickelt für die einfache Benutzung in den Zahnezwischenräumen bietet die AirFloss einen komfortablen ergonomischen Griff und ist rutschfest.

Farbige Düsenspitzen

Farbige Düsenspitzen und ein handlicher Düsensbehälter machen die Verwendung von AirFloss für die ganze Familie zum Kinderspiel.

Daten

Einfach zu bedienen

Griff: Schlankes, ergonomisches Design
Akkuanzeige: Blinken zeigt einen niedrigen Akku an
Akkulaufzeit: Bis zu 2 Wochen
Düsenystem: Leichtes Aufstecken und Abnehmen

Technische Daten

Akku: Wiederaufladbar
Betriebszeit: Tauschen Sie die Düse alle 6 Monate aus
Batterietyp: Lithium-Ionen
Ladezeit: Vollständig geladen in 24 Stunden

Leistung

Spannung: Multispannungs-Ladegerät

Service

Garantie: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Mitgelieferte Artikel

AirFloss-Griff: 1
AirFloss-Düse: 1, 3
Ladegerät: 1 Multispannungs-Ladegerät
Düsenbehälter: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 5 Mal mehr Plaque*
Vorteile für die Gesundheit: Erhält die Gesundheit Ihres Zahnfleisches
Autoburst-Funktion: Reinigt den ganzen Mund in 30 Sekunden
Düsen: Für beste Ergebnisse alle 6 Monate austauschen

Designspezifikationen

Farbe(n): Weiß mit Farbakzenten in Grün

