

PHILIPS

sonicare

Skirtas tarpdantėms,
įkraunamas

AirFloss

su 1 antgaliu



HX8241



Nenaudojate siūlo? Naudokite „AirFloss“.

Pašalina apnašas, kurių nepasiekiate valydami šepetėliu.

Tiems, kurie nenaudoja siūlo reguliariai, „AirFloss“ yra lengviausias būdas išvalyti tarpdančius. „AirFloss“ gali būti naudojamas su burnos skalavimo skysčiu arba vandeniu; su unikalia oro ir mikrolašelių technologija pašalinsite apnašas sunkiai pasiekiamose vietose.

Išsivalykite dantis per 30 sekundžių

- Visą burną išvalysite per 30 sekundžių
- Nukreipkite. Spauskite. Švaru!

Ugdykite sveiką įprotį

- Lengvas būdas geriau išvalyti tarpdantes

Gerina burnos sveikatos būklę


- Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų
- Sveikesnės dantenos vos per dvi savaites
- Padeda išvengti ertmių tarpdantėse

Paprasta naudoti

- Oro ir mikrolašelių technologija
- Patogi ergonomiška rankenėlė
- Kreipiamuoju galiuku pasieksite reikiamą vietą
- Atskiras antgalis kiekvienam šeimos nariui


Ypatybės

Lengva pradėti

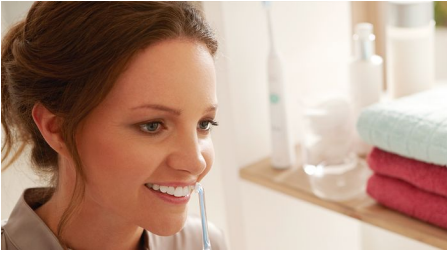

Interproksimalinis valymas labai svarbus visos burnos sveikatai. Naudodami „AirFloss“ lengvai išvalysite giliose tarpdantėse esančias sritis ir išsiugdysite sveiką įprotį. 96 % žmonių, nenuosekliai naudojusių tarpdančių siūlą, po trijų mėnesių „AirFloss“ naudojimo ir toliau juo valėsi tarpdantes keturis ar daugiau kartų per savaitę.

Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų

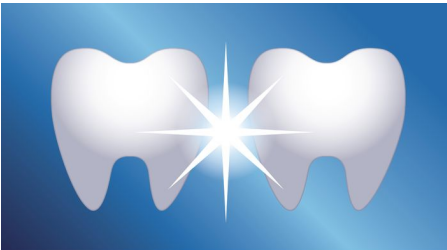

Iš tarpdančių pašalinama daugiau apnašų

Oro ir mikrolašelių technologija



Oro ir mikrolašelių technologija

Kreipiamasis galiukas



Naudodami ploną, kampu pakreiptą antgalį ir kreipiamąjį galiuką lengvai pasieksite reikiamą vietą. Tiesiog slinkite danties paviršiumi šalia dantenų linijos, kol galiukas įsispraus į griovelį tarp dantų.

Švara per 30 sekundžių




Naudodami „AirFloss“ visą burną išvalysite per 30 sekundžių. Jei norite paleisti vieną oro ir mikrolašelių srovę, spauskite mygtuką ir valykites, po to vėl kartokite šiuos veiksmus. Norėdami įjungti automatinį srovės režimą, laikykite nuspaudę mygtuką ir kreipiamuoju galiuku slinkite iš vienos vietos į kitą. Įrenginys automatiškai kas sekundę paleis srovę.

Lengvai pripildomas rezervuaras




Pripildykite rezervuarą burnos skalavimo skysčio arba vandens, nukreipkite į norimą vietą ir spauskite mygtuką. Rezervuaro turinio pakanka iki dviejų kartų.

Sveikesnės dantenos

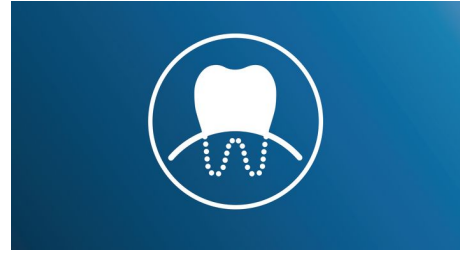

Klinikiniais tyrimais patvirtinta, kad naudojant „Sonicare AirFloss“ dantenos tampa sveikesnės vos per dvi savaites.

Padeda išvengti ertmių

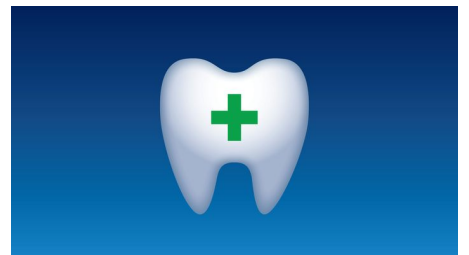

Su „Sonicare AirFloss“ švelniai išvalysite apnašas, kurių nepasiekėte šepetėliu, todėl tarpdantėse nesiformuos ertmės.

Ergonomiška rankenėlė

„AirFloss“ rankenėlė yra ergonomiška ir neslystanti, todėl lengvai manevruosite sunkiai pasiekiamose vietose.

Spalvoti antgalių galiukai

Spalvoti „Airfloss“ antgalių galiukai ir patogus antgalių laikiklis – puikus sprendimas visai šeimai.

Specifikacijos

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Akumulatoriaus indikatorius: Mirksi: senka akumulatorius

Baterijos naudojimo laikas: Iki 2 savaičių

Antgalio sistema: Lengva uždėti ir nuimti

Techniniai duomenys

baterija: Pakartotinai įkraunamas

Veikimo laikas: Pakeiskite antgalį kas 6 mėnesius

Baterijos tipas: Ličio jonų

Įkrovos laikas: Visiškai įkraunama per 24 val.

Maitinimas

Įtampa: Kelių įtampų kroviklis

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Pridėti priedai

„AirFloss“ rankenėlė: 1

AirFloss antgalis: 1, 3

Įkroviklis: 1 kelių įtampų įkroviklis

Antgalio laikiklis: 1

Valymo veiksmingumas

„Performance“: Pašalina iki 5 kartų daugiau apnašų*

Nauda sveikatai: Pagerina dantenu sveikatą vos per dvi savaites

Automatinis srovės režimas: Visą burną išvalysite per 30 sekundžių

Antgaliai: Norėdami geriausio rezultato, keiskite kas 6 mėn.

Projektinės specifikacijos

Spalva (-os): Balta su žaliais akcentais

