

PHILIPS

sonicare

치간세정기 - 충전식

AirFloss

노즐 1개 포함



HX8221/02



치간 세정을 하지 않으세요? 그렇다면 에어플로스로 규칙적인 치간 세정을 시작해보세요.

칫솔이 닿지 않는 깊숙한 곳의 플라그를 한번에 제거

치간 세정을 불규칙적으로 하는 분들께 소닉케어 에어플로스는 건강한 치간 세정 습관을 배양할 수 있는 쉽고 간편한 방법입니다. 에어플로스는 구강 세정액이나 물과 함께 사용할 수 있으며 소닉케어만의 미세분사기술로 칫솔이 닿기 어려운 곳의 플라그를 제거하는데 도움이 됩니다.

30초 안에 이루어지는 구강케어

- 단 30초 만에 구강 전체 세정
- 원하는 위치에 대고, 누르고, 세정하세요!

구강 건강 개선

- 단 2주 만에 잇몸 건강 개선
- 치간 충치 예방 효과
- 최대 5배 더 우수한 치아 사이의 플라그 제거 효과*

편리한 사용

- 버튼 하나로 세정하는 기술
- 가이드스 팁은 치간에 정확하게 위치를 잡을 수 있도록 도와줍니다.
- 편안한 그립감을 위한 인체공학적 핸들

건강한 구강 관리 습관 형성에 도움이 됩니다.


- 효율적인 치간 세정을 위한 간편한 방법



asimpleswitch.com

주요 제품

공기와 물방울의 미세분사 기술

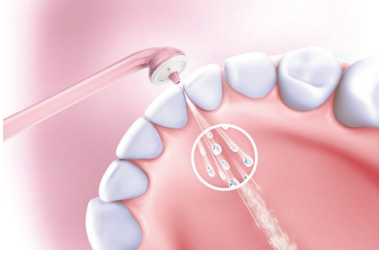


치간 클리너는 공기와 물방울을 미세분사하는 특수한 기술을 이용하여 치아 사이에 압축된 공기와 물 또는 구강 세정액을 분사합니다. 원터치 작동 버튼은 마우스를 클릭하는 것만큼 간단합니다.

30초 세정



에어플로스를 사용하면 단 30초 만에 구강 전체를 세정할 수 있습니다. 작동버튼을 누르면 공기와 물 또는 구강세정액이 1회 분사됩니다. 노즐을 옆으로 이동하여 이 기능을 반복합니다. 새롭게 선보이는 자동 분사 기능을 사용하려면 동작버튼을 누른 상태에서 치아 사이로 가이드스 팁을 이동합니다. 그러면 1초마다 자동으로 분사됩니다.

잇몸 건강 개선

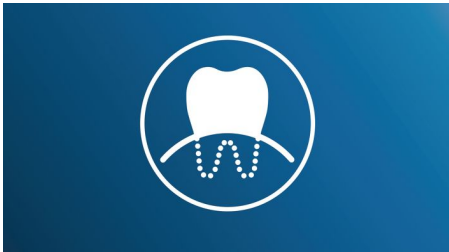

소닉케어 에어플로스는 단 2주 만에 잇몸 건강 개선 효과를 보여 그 성능을 임상적으로 입증하였습니다.

채우기 쉬운 급수통




상쾌한 세정을 위해 핸들의 급수통에 구강 세정액 또는 물을 채운 후 원하는 위치에 대고 누릅니다. 급수통을 가득 채우시면, 최대 2회 사용하실 수 있습니다.

가이드스 팁



슬림하고 어금니 구석까지 쉽게 닿을 수 있도록 고안된 노즐과 가이드스 팁은 에어플로스가 정확한 위치에 놓여 치간세정을 쉽게 할 수 있도록 도와줍니다. 가이드스 팁을 치아 사이에 안착했다고 느낄 때까지 잇몸선을 따라 부드럽게 밀어 자리를 잡아주세요.

인체공학적 핸들

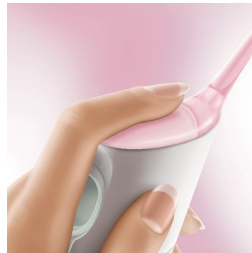

에어플로스의 인체공학적 핸들과 미끄럼방지 핸들은 치아 틈새의 플라그 및 음식 잔여물을 쉽게 제거할 수 있도록 고안되었습니다.

충치 예방 효과



소닉케어 에어플로스는 양치시 닿지 않는 부분의 플라그를 부드럽게 제거하여 치간 충치 예방 효과에 탁월합니다.

더 많은 플라그 제거



치아 사이를 세정하는 것은 구강 건강에 매우 중요합니다. 소닉케어 치간 세정기는 공기와 물방울의 미세분사 기술을 사용하여 수동 칫솔로만 양치할 때보다 최대 5배 우수한 치아 사이 플라그 제거 효과를 보여줍니다.



asimpleswitch.com

필립스 친환경 로고

필립스 친환경 제품은 비용, 에너지 소비 및 이산화탄소(CO2) 배출을 절감해 줍니다. 필립스는 친환경을 위한 에너지 효율, 포장, 유해 물질, 무게, 재활용 및 폐기, 수명 안전성 중 한 가지 이상을 개선함으로써 의미 있는 환경 개선 효과를 제공합니다.

사양

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체공학적 디자인

배터리 표시등: 충전 표시등이 노란색으로 깜빡이면 배터리가 부족한 것이므로 재충전해 주세요.

배터리 수명: 완전히 충전하면 최대 3주까지 사용 가능

노즐 액세서리: 간편한 탈부착

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간: 노즐은 6개월마다 교체

배터리 유형: 리튬 이온

충전 시간: 완전 충전 시 24시간 소요

소비전력

전압: 다중 전압 충전기

구성품

에어플로스 노즐: 1 개

충전기: 다중 전압 충전기 1개

노즐 홀더: 1 개

세정 성능

성능: 5배 더 우수한 플라그 제거*

구강 건강 관리 효과: 단 2주 만에 잇몸 건강 개선

자동 분사 기능: 30초 내 구강 전체 세정

노즐: 최상의 효과를 위해 6개월마다 교체 권장

디자인 및 마감

색상: 핑크

노즐 색상: 화이트 팀의 핑크

