

PHILIPS

IPL prístroj na
odstraňovanie chĺpkov

Lumea Prestige

S technológiou SenseIQ

Telo a tvár

So senzorom SmartSkin



BRI950/00



Užívajte si 6 mesiacov hodvábne hladkú
pokožku bez chĺpkov.*

2 inteligentné nastavce – pre optimálne výsledky

Philips Lumea Prestige s technológiou SenseIQ je naše najúčinnjšie zariadenie využívajúce intenzívne pulzné svetlo IPL. Je navrhnuté pre pohodlné domáce ošetrovanie, inteligentné nastavce dokonale kopírujú krivky a prispôbia programy ošetrovania jednotlivým častiam tela.

Maximálna sloboda, minimálne ťažkosti

- So senzorom SmartSkin
- Aplikácia Lumea IPL. S vami pri každom kroku ošetrovania
- Žiadne náhradné diely, žiadne skryté náklady

Hladká pokožka na dlhú dobu vďaka technológii Lumea IPL


- Špičková technológia IPL na domáce používanie, vyvinutá v spolupráci s dermatológmi
- Používajte bez kábla alebo s káblom
- Preukázateľne jemné a účinné ošetrovanie
- Vhodné pre množstvo rôznych typov chĺpkov a pokožky
- Technológia SenseIQ pre odstraňovanie chĺpkov na mieru

Profesionálne ošetrovanie technológiou IPL pre všetky partie tela

- Inteligentné nastavce prispôbujú programy jednotlivým častiam tela
- Nastavec na telo s vnútorným zakrivením
- Precízny nastavec na tvár s prídavným filtrom


Hlavné prvky

Prístroj Lumea obmedzuje dorastaniu chĺpkov*

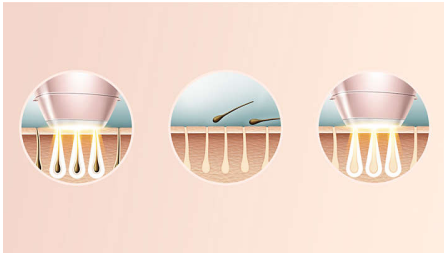


IPL je skratka pre intenzívne pulzné svetlo. Zariadenie Philips Lumea aplikuje na koreňky chĺpkov jemné pulzujúce svetlo uvádzajúce folikuly chĺpkov do fázy zastaveného rastu. Vďaka tomu sa množstvo chĺpkov, ktoré rastú na tele, postupne zníži. Opakovaným používaním získate krásnu pokožku bez chĺpkov a jemnú na dotyk. Ošetrovanie zabráňujúce dorastaniu chĺpkov je bezpečné a šetrné aj v citlivých oblastiach tela. Zariadenie Philips Lumea je klinicky testované a vyvinuté v spolupráci s dermatológmi na jednoduché a účinné ošetrovanie v pohodlí vášho domova.

Dokázaná účinnosť

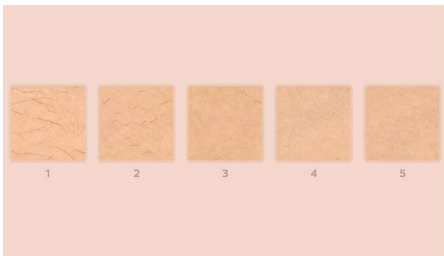


Objektívne štúdie dokazujú, že po troch ošetrovaniach sa zbavíte až 92 % chĺpkov**. Prvé štyri ošetrovania vykonávajte každé dva týždne a nasledujúcich osem ošetrovaní každé štyri týždne. Po 12 ošetrovaniach si môžete užiť 6 mesiacov hladkej pokožky bez chĺpkov*.

Vhodné typy chĺpkov a pokožky

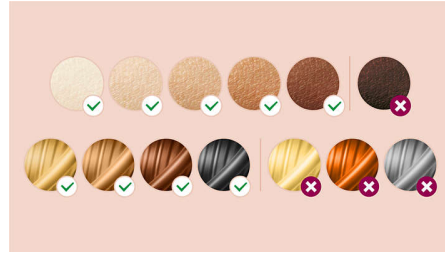

Použitie Philips Lumea Prestige je účinné so širokou škálou typov vlasov a pleti. Hodí sa na prirodzene tmavé blond, hnedé a čierne vlasy a na odtiene pokožky od veľmi bielej po tmavohnedú. IPL si vyžaduje kontrast medzi pigmentom vo farbe vlasov a pigmentom v odtieni pleti, preto (rovnako ako pri iných ošetrovaniach na báze IPL) zariadenie Lumea nemožno použiť na ošetrovanie bielych, šedých, svetlých blond alebo červených chĺpkov. Nie je vhodné na veľmi tmavú pokožku.

Technológia SenseIQ

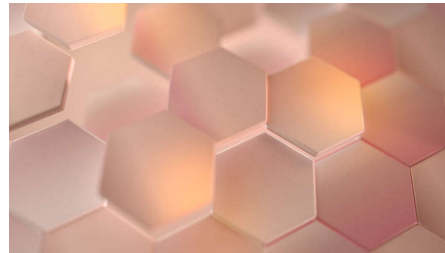

Vníma. Senzor SmartSkin zariadenia Lumea rozpoznáva tón vašej pleti a navrhuje najpohodlnejšie nastavenie intenzity ošetrovania pre vašu potrebu. Prispôsobuje. Inteligentné nastavenie prispôsobujú programy šité na mieru každej partii tela. Chráni. Vyvinuté v spolupráci s dermatológmi a inšpirované vami pre jemné a dlhotrvajúce odstránenie chĺpkov, a to aj na citlivých miestach ***.

Ošetrovanie partii tela



Vaše telo je jedinečné. K ošetrovaniu jeho pokožky a kriviek by sa preto malo pristupovať jedinečne. Nastavenie zariadenia Lumea na

celé telo sú tvarované tak, aby perfektne kopirovali každú jeho krivku a prispôbili programy ošetrovania každej oblasti tela. Svetelné priezory sú navrhnuté tak, aby maximalizovali kontakt s pokožkou v snahe zabrániť únikom svetla. Umožní to účinné a šetrné ošetrovanie aj v chĺpkových alebo citlivých oblastiach.

Nastavenie na telo



Inteligentný nastaviteľ na telo má náš najväčší ošetrovací prierez (4,1 cm²), priam ušitý na rýchle ošetrovanie väčších častí tela, napríklad nôh, paží a bruška. Vďaka dizajnu s vnútorným zakrivením nastaviteľ presne kopíruje kontúry vášho tela a zaisťuje maximálny kontakt s pokožkou. Kliknite na nastaviteľ, ktorý na mieru prispôbi program jednotlivým oblastiam vášho tela. S redukciou množstva chĺpkov na nohách je spokojných až 83 % žien****.

Nastavenie na ošetrovanie tváre



Tento nastaviteľ odstraňuje chĺpky na tvári jemne a efektívne – má špeciálne navrhnutý malý a zároveň plochý prierez veľkosti 2 cm². Nastaviteľ disponuje integrovaným prídavným filtrom ideálnym na ošetrovanie oblasti hornej pery, brady a línie dolnej čeluste. Po nasadení na zariadenie inteligentný nastaviteľ automaticky prispôbi ošetrovanie svetlom vašej tvári. S redukciou množstva chĺpkov na tvári je spokojných až 84 % žien ****.

Technické údaje

Technické špecifikácie, nastavce

Nadstavec na ošetrovanie tela: Plocha priezoru: 4,1 cm², Tvar: konvexný, Špeciálne vyvinutý na ošetrovanie tela

Nadstavec na ošetrovanie tváre: Plocha priezoru: 2 cm², prídavný filter, Tvar: plochý, Špeciálne vyvinutý na ošetrovanie tváre

Príkon

Napätie: 100 – 240 V

Servis

Záruka: 2-ročná celosvetová záruka

Technické špecifikácie

Vysokovýkonná lampa: Výkon <gt/> 250 000 zábleskov****

Oblasti aplikácie

Oblasti tela: Ruky, Nohy, Brucho

Oblasti tváre: Brada, Horná pera, Brada

Citlivé partie: Podpazušia, Oblasť bikín

Príbalené príslušenstvo

Návod na použitie: Návod na použitie

Skladovanie: Luxusné puzdro

Adaptér: 19,5 V/4 000 mA

Bezpečnostné a upravitelné nastavenia

Integrovaný UV filter: Chráni pokožku pred UV žiarením

5 nastaviteľných stupňov svetelnej energie:

Prispôsobiteľné typu pokožky

Integrovaný bezpečnostný systém: Zabraňuje neúmyselnej aktivácii zábleskov

Senzor tónu pokožky: Rozpoznáva odtieň vašej

pokožky

Senzor SmartSkin: Vhodné nastavenie na požiadanie

Čas aplikácie

Podpazušie: 2,5 min.

Oblasť bikín: 2 min.

Oblasti tváre: 1,5 min.

Časť nôh od kolien dole: 8,5 min.

Druh použitia

Aktivácia záblesku pri postupnom posúvaní:

Na rýchle použitie

Použitie s káblom aj bez kábla: Používanie bez kábla aj s káblom

Aktivácia záblesku priložením: Na ošetrovanie malých oblastí

