

PHILIPS

ルメア プレシジョン
プラス

Lumea Precision
Plus

顔、からだ用

約 15 分で両ひざ下のお手入れ完了

約 14 万回の照射が可能

コードレス設計



SC2008

2回*で実感。使うほどに、肌、なめらか。 自宅でなめらかなお肌に

ご自宅で簡単に、わずか2回のケアで効果を実感できる*2光美容器「ルメア プレシジョンプラス」。素肌にそってルメアをすべらせていくだけで、やさしい光による除毛後の肌のお手入れができます。

長期間なめらかな肌が持続

- 片手で簡単に操作が可能で使いやすい
- なめらかな仕上がりが持続

光美容器によるムダ毛ケア

- ご自宅での使用も快適で安心。
- さまざまなタイプのムダ毛とお肌に対応

からだ、顔、ビキニライン用


- 敏感なエリアにも安心で効果的
- ビキニエリア専用アタッチメント
- 顔のうぶ毛ケアにも安心な顔専用のアタッチメント付き
- 大きいからだ用アタッチメントで短時間のお手入れが可能
- 光の強さを 5 段階で調節

簡単な手間で大きな自由を

- 便利なコードレスタイプ
- 交換部品がないため、追加購入が不要

特長

便利なコードレスタイプ

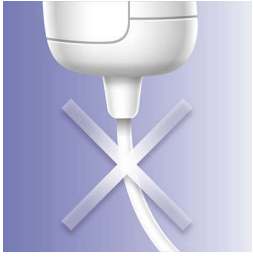

コードレス設計のため、気になる部分をいつでも必要なときにお手入れできます。

光美容器




フィリップスの光美容器ルメアは、エステティックサロンなどで使用されている IPL（インテンスパルスライト）と呼ばれる革新的な光を利用した技術を採用しています。フィリップスは、この技術をご家庭で快適で安全かつ効果的にお使いいただけるように、第一線で活躍する皮膚科医と連携して画期的な脱毛システムを開発しました。大規模な消費者リサーチに 10 年以上の時間をかけ、2,000 人以上の女性にご協力いただいています。

片手で簡単に操作が可能で使いやすい



フィリップスの臨床研究では、隔週のお手入れを 4 回続けると、目に見えた脱毛効果が表れ、すべすべのお肌になることが確認されています。この効果を維持するには、必要に応じてお手入れを繰り返してください。お手入れの間隔は、ムダ毛が生えてくる時期など、個人差があります。

長期間なめらかな肌が続

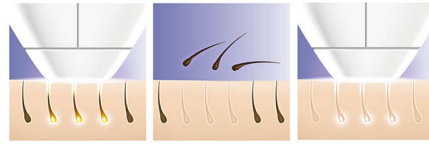

フィリップスの光美容器ルメアは、弱い光を毛根に照射します。使用を続けると、ムダ毛は自然に抜け落ち再生が抑制されます。定期的にお手入れをすることで、ツルスべのお肌を保ちます。

交換部品なし



フィリップスの光美容器ルメアは、箱から出してすぐにご使用いただけます。ランプの交換やジェルは不要です。

処理に適したムダ毛とお肌のタイプ

本製品の使用に適しているかどうか、ご自分の肌の色と毛の色で確認してください。

肌の色	ホワイト または極めて 明るい肌色	ペーパージュ 明るい肌色	ライトブロウ シブシブ的 な肌色	マイルドブ ロウシブシ ブ系色	ダークブ ロウ系色	黒色に近い ブラウン
黒	●	●	●	●	●	○
濃い茶色	●	●	●	●	●	○
茶色	●	●	●	●	●	○
濃い金色	●	●	●	●	●	○
明るい金色	○	○	○	○	○	○
赤色	○	○	○	○	○	○
白色灰色	○	○	○	○	○	○

● 本製品の使用に適しています ○ 本製品の使用に適していません

フィリップスの光美容器ルメアは、色の濃い毛（濃い金色、濃い茶色、黒）により効果的に反応します。他の光美容器と同様に、ルメアも、赤色、明るい金色、白色の毛には効果がありません。また、肌の色がきわめて濃い方にも適していません。

照射エリア



顔（鼻の下、あご、もみあげ）と、脚、ワキ、ビキニエリア、腹部、腕などの部分のムダ毛ケアにも安心。

両脚のお手入れを短時間で



大きいからだ用アタッチメントを使うと、脚のような広い範囲をすばやくお手入れできます。

ビキニエリア用アタッチメント



ビキニエリアを効果的にお手入れするためのビキニエリア専用アタッチメント。ビキニエリアのムダ毛は、通常、脚のムダ毛よりも硬くて太い傾向があります。

顔のうぶ毛ケアにも安心して使える



顔専用アタッチメントには独自に設計された光フィルターが搭載されているため、鼻の下、あご、もみあげのお手入れにも安心。またワキなどの敏感な部分や手の届きにくい部分にもお使いいただけます。

仕様

適用部位

からだ: 脚, ヘソ, ビキニエリア, ワキ
顔: あご, もみあげ, 鼻下

調整可能な設定

内蔵 UV フィルター: 紫外線から肌を保護
5段階のエネルギー設定: お肌のタイプに合わせて調整可能
内蔵セーフティシステム: 誤照射防止機能

アプリケーションモード

連続照射モード/単回照射モード: 連続照射、単回照射が選べて使いやすい
ステップ&フラッシュ: からだのカーブにフィット
コンセントに接続して使用可能: コードレス

電源

充電時間: 100 分
対応電圧: AC100~240 V (海外電圧対応可能)
満充電時の照射可能回数: 370 回以上

技術仕様

高性能ランプ: 約 14 万回照射可能
光スペクトル: からだ用アタッチメント <gt/> 570nm, ビキニエリア用アタッチメント, 顔用アタッチメント <gt/> 600nm
光エネルギー (J/cm²): からだ用アタッチメント: 2.5-5.6, ビキニエリア用アタッチメント: 2.9-6.5, 顔用アタッチメント: 2.6-5.9

アタッチメント

からだ用アタッチメント (4cm²): 首から下の部分用
ビキニエリア用アタッチメント (2cm²): ビキニ

エリア専用

顔用アタッチメント (2cm²): 顔のうぶ毛ケアにも安心

サービス

保証: 2 年のグローバル本体保証

品目

充電器: 海外使用対応充電器
取扱説明書: クイックスタートガイド, 取扱説明書
ストレージ: 収納ケース

アプリケーション時間

ひざ下 (片側): 8 分
ワキ (片側): 1 分
ビキニエリア: 1 分
顔: 1 分

