

PHILIPS

IPL
Haarentfernungssystem

Lumea Precision Plus

Nur für Körper, Gesicht,
Bikinizone

15 Minuten für beide
Unterschenkel

Lebensdauer > 140.000 Lichtimpulse

Kabelloses Design



SC2008/11



Der beste Weg, um das Nachwachsen von Haaren zu verhindern für glatte Haut zu Hause

Das Philips Lumea IPL ist das effektivste Haarentfernungssystem und vollbringt wahre Wunder, um dem Nachwachsen von Haaren am Gesicht und Körper vorzubeugen. Sanfte Lichtimpulse sorgen bei regelmäßiger Anwendung für eine seidenglatte Haut an jedem Tag.

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

- Genießen Sie jeden Tag glatte Haut
- Einfach wirksam

Haarentfernung mit IPL-Technologie

- Zur sicheren Verwendung zu Hause
- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen

Sanft und effektiv am Körper, im Gesicht und in der Bikinizone


- Sicher und effektiv, selbst an sensiblen Körperstellen
- Größerer Körperaufsatz für schnelle Anwendung
- Aufsatz für eine sichere Behandlung des Gesichts
- Aufsatz speziell zur Behandlung der Bikinizone
- Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen

Maximale Freiheit, minimaler Aufwand

- Kabelloser Komfort
- Keine Ersatzteile, keine versteckten Kosten

Besonderheiten

Lang anhaltend glatte Ergebnisse

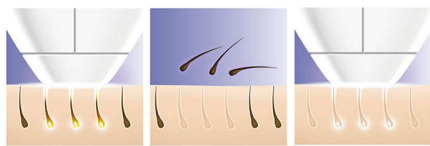

Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen, wodurch das Haar ausfällt und Nachwachsen verhindert wird. Eine regelmäßige Wiederholung hält Ihre Haut lang anhaltend glatt.

Einfach wirksam



Unsere klinischen Studien haben eine deutliche Haarreduzierung nach nur vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen gezeigt. Wiederholen Sie die Behandlung einfach bei Bedarf, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Der Zeitraum zwischen den Behandlungen kann je nach individuellem Haarwuchs variieren.

IPL-Technologie



Philips Lumea arbeitet mit einer lichtbasierten Technologie namens "IPL" (Intense Pulsed Light), die in professionellen Schönheitssalons zur Haarentfernung verwendet wird. Mit Philips Lumea können Sie diese innovative Technologie nun jederzeit sicher und effektiv zu Hause nutzen. Philips arbeitete zur

Entwicklung des innovativen Haarentfernungssystems sehr eng mit führenden Dermatologen zusammen. Wir haben über 10 Jahre umfassende Verbraucherstudien mit mehr als 2000 Frauen durchgeführt.

Geeignete Haar- und Hauttypen

Suitable hair and skin tones

Skin Tone	White	Beige	Light brown	Medium brown	Dark brown	Brownish black and darker
Hair Color						
Black	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Brown	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Dark blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Light blond	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Red	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
White/grey	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ This product is suitable for you to use ⊗ This product is neither suitable nor safe for your skin and hair type

Philips Lumea kann bei (von Natur aus) dunkelblonden, braunen und schwarzen Haaren verwendet werden. Philips Lumea ist, wie auch alle anderen lichtbasierten Behandlungen, bei roten, hellblonden oder weißen/grauen Haaren NICHT effektiv. Philips Lumea ist NICHT geeignet für sehr dunkle Haut.

Anwendungsgebiete



Gesichtshaare (Oberlippe, Kinn und Wangen) und Körperhaare, z. B. an den Beinen, den Armen, am Bauch, im Achselbereich oder in der Bikinizone werden mühelos entfernt.

Schnelle Anwendung an den Beinen



Größerer Körperaufsatz für schnelle Behandlung großer Körperpartien, z. B. Ihrer Beine.

Zusätzliche Sicherheit für das Gesicht



Der Aufsatz fürs Gesicht verfügt über seinen eigenen speziellen integrierten Lichtfilter für eine sichere und praktische Verwendung auf der Oberlippe, dem Kinn und an den Koteletten. Er kann auch in anderen empfindlichen Bereichen des Körpers verwendet werden, z. B. an den Achseln und anderen schwer erreichbaren Stellen.

Aufsatz für die Bikinizone



Aufsatz für die Bikinizone für eine effektive Behandlung der Haare in diesem Bereich. Diese sind in der Regel stärker und dicker als Beinhaar.

Fünf unterschiedliche Intensitätsstufen



Philips Lumea bietet fünf unterschiedliche Intensitätsstufen für eine wirksame und sanfte Behandlung. Bei richtiger Anwendung erzielen Sie mit Philips Lumea glänzende Ergebnisse, selbst auf empfindlicher Haut und an sensiblen Körperstellen.

Daten

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Beine, Arme, Bauch, Bikini, Achselhöhlen

Gesichtsbereiche: Kinn, Koteletten, Oberlippe

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für komfortable Anwendung

Schritt und Blitzen: Für die Behandlung kurviger Bereiche

Mit Kabel/kabellos: Kabellos

Leistung

Ladezeit: 100 Min.

Stromspannung: 100–240 V

Betriebszeit: Mindestens 370 Blitze

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet <gt/> 140.000 Lichtimpulse

Aufsätze

Körperaufsatz (4 cm²): Für den Gebrauch unterhalb des Halses

Aufsatz für die Bikinizone (2 cm²): Besondere Behandlung der Bikinizone

Aufsatz fürs Gesicht (2 cm²): Zur sicheren Anwendung im Gesicht

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Garantie

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Schnellstartanleitung, Bedienungsanleitung

Ladegerät: Multispannungs-Ladegerät

Lagerung: Aufbewahrungsetui

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8 Min.

Achselhöhle: 1 Min.

Bikinizone: 1 Min.

Gesichtsbereiche: 1 Min.

