

PHILIPS


Aparat IPL pt.
îndepărtarea părului

Lumea Advanced

Pentru corp și față

Cu senzor de nuanță a pielii

Număr total pulsații: 250.000

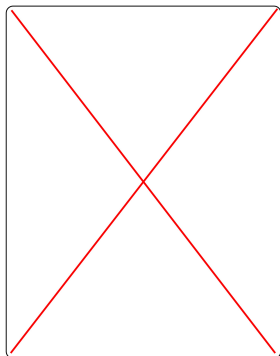

SC1998/00



Piele epilată timp de cel puțin 3 luni*

Reduce creșterea părului cu cel puțin 85 % după 3
tratamente**

Lumea Advanced de la Philips este minunat pentru a preveni reapariția părului pe corp. Impulsurile delicate de lumină, aplicate cu regularitate, păstrează pielea netedă ca mătasea în fiecare zi.

Îndepărtare de lungă durată a părului cu tehnologie IPL

- Adecvat pentru o largă varietate de tipuri de păr și de piele
- Aplicația GRATUITĂ Lumea, un consultant personal mereu disponibil
- Tehnologie IPL profesională la tine acasă, dezvoltată cu ajutorul dermatologilor

Sigur, rapid și eficient pentru corp și față

- Senzor integrat de nuanță a pielii
- Tratament dovedit a fi sigur și eficient

Tratament specializat pentru zone diferite ale corpului

- Sigur și eficient chiar și în zonele sensibile
- Accesoriu de tratare mare pentru aplicare rapidă
- Accesoriu de precizie oferă siguranță în plus pentru față
- Accesoriu special pentru părul din zona inghinală

Repere

Catifelare de durată

IPL înseamnă lumină intens pulsată. Philips Lumea aplică pulsații delicate de lumină la rădăcina firului de păr, punând foliculul într-o fază de repaus. Drept urmare, cantitatea de păr de pe corp se reduce în mod gradual. Repetarea tratamentului îți lasă pielea frumoasă și fără păr, fină la atingere. Tratamentul de prevenire a creșterii părului este sigur și delicat, chiar și în zonele sensibile. Philips Lumea este testat clinic și dezvoltat cu ajutorul dermatologilor pentru un tratament ușor și eficient, în confortul propriei locuințe.

Eficacitate dovedită

Studiile obiective arată o reducere de cel puțin 85 % a părului după numai 3 tratamente**. Primele 4 tratamente trebuie efectuate o dată la 2 săptămâni, după care deja ar trebui să observi rezultatele dorite. Pentru a-ți menține rezultatele, nu trebuie decât să retușezi o dată la 4 săptămâni. După numai 8 tratamente de retușare, te poți bucura de cel puțin 3 luni fără păr*. Pentru a mări această imagine, fă clic pe imaginea din galeria de imagini din partea de sus a acestei pagini.

Toate tipurile de păr și piele

Philips Lumea Prestige acționează eficient, ușor și sigur pe o gamă largă de tipuri de păr și de piele. Funcționează pe păr natural blond închis, șaten și negru și pe tonuri de piele variind de la piele foarte albă la cafeniu închis. Ca și alte tratamente bazate pe IPL, Philips Lumea nu poate fi utilizat pentru a trata păr alb/grizonat, blond deschis și roșcat și nu este potrivit pentru piele foarte închisă la culoare. Acest lucru se datorează contrastului înalt necesar între pigmentul culorii părului și pigmentul nuanței pielii.

Senzor de nuanță a pielii

Senzorul integrat pentru nuanța pielii măsoară culoarea pielii tratate la începutul fiecărei ședințe și ocazional în timpul ședinței. Dacă

detectează o nuanță de piele prea închisă pentru acest produs, senzorul oprește automat emiterea de impulsuri.

Zone de aplicare

Utilizează cu încredere pentru a îndepărta părul de pe față (buza superioară, bărbie și perciuni) și de pe părțile corpului, inclusiv de pe picioare, zona axilară, zona inghinală, abdomen și brațe.

Tratament rapid pe picioare

Accesoriu de tratare mare pentru aplicare rapidă pe suprafețe mari, cum ar fi picioarele.

Siguranță suplimentară pentru față

Cu filtrul suplimentar de lumină integrat, poate fi utilizat pentru tratarea în siguranță a părului facial de pe buza superioară, bărbie, obraji și alte zone sensibile.

Accesoriu pentru zona inghinală

Accesoriu pentru zona inghinală pentru eliminarea eficientă a părului din această zonă. Părul din această zonă este în general mai puternic și mai gros decât cel de pe picioare.

Aplicația GRATUITĂ Lumea

Aplicația Lumea se poate descărca gratuit și oferă o experiență IPL unică și personalizată – doar pentru tine. Este consultantul tău personal, care îți permite să profiți la maximum de dispozitivul Lumea și să îl utilizezi corect pentru a obține rezultate pe termen lung. Aplicația te ajută să-ți crezi planul de tratament personalizat pentru fiecare zonă a corpului, cu indicații și recomandări în timpul fiecărui tratament. Nu trebuie decât să verifici periodic aplicația pentru a te asigura că ești la curent cu toate notificările sau mementourile.

Specificații

Putere

Voltaj: 100-240 V

Serviciu

Garanție: 2 ani garanție internațională

Zone de aplicare

Zonele corpului: Brațe, Picioare, Ombric, Axile, Zona inghinală

Zonele feței: Bărbie, Perciuni, Buza superioară

Atașamente

Fixare corp (4cm2): For use below the neckline

Atașamentul feței (2cm2): Pentru utilizare în zona de sub ochi (perciuni, pomeți, obraji, bărbie, deasupra buzei superioare)

Accesorii pentru zona inghinală (2 cm2): Special treatment bikini hair

Articole incluse

Instrucțiuni de folosire: Manual de utilizare

Depozitare: Husă

Adaptor: 24 V/1500 mA

Accesorii: Cleaning cloth

Putere

Utilizare cu cablu: Yes

Siguranță și setări reglabile

Filtru UV integrat: Îți protejează pielea de lumina UV

5 setări pentru energia luminii: Reglabil în funcție de tipul de piele

Sistem de siguranță integrat: Previne pulsarea neintenționată

Senzor ton de piele: Detectează nuanța pielii tale

Timpe de aplicare

Bikini: 4min

Membrului inferior: 15 min

Subsuoară: 2,5 min

Zonele feței: 2 min

Mod de aplicare

Slide și Flash: Pentru o aplicare ușoară prin mișcare

Utilizare cu cablu / fără fir: Cu fir

Stamp și Flash: Pentru tratarea zonelor curbate



* Rezultat mediu reducere de 71 % a părului de pe picioare după un ciclu de tratament complet (12 tratamente), studiu obiectiv pe 48 de femei din Țările de Jos și Austria

** Măsurat pe picioare, 67 % din cele 45 de femei obțin rezultate de 85 % sau superioare.

* Bărbații nu trebuie să folosească dispozitivul pe față și gât, în zonele în care crește barba și nici în zona genitală.