

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ダイヤモンド
クリーン スマート

DiamondClean
Smart

ソニックケアアプリと連動し、最適な
オーラルケアをリアルタイムでガイド

ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッド認識機能

4つのモード、3段階の強さ設定

HX9911/66



高い歯垢除去力*¹と多彩な機能・アクセサリーを求
める方へ

より優れたブラッシング体験*²を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、より優れたオーラルケア*²を実現する高性能*²電動歯ブラシです。／製品イメージ（上記製品写真）について：アプリの内容は予告なく変更することがあります。スマートフォンは含まれません。*¹手磨きと比べ/フィリップス調べ。 *²弊社製品ラインナップでの比較

より優れたブラッシング体験*²を実現

- ・ より優れたケア*²を提供するオールインワンブラシヘッド *²弊社製品ラインナップでの比較

ソニックケアアプリと連動し、最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド


- ・ 磨き方をサポート
- ・ 問題がある箇所に注目、目標を設定
- ・ 過圧防止センサー機能
- ・ ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ
- ・ 磨き残しを見つけてしっかり磨き上げる

ブラッシングを最適化

- ・ ブラシヘッド認識機能
- ・ ブラシヘッド交換お知らせ機能
- ・ 4つのモード、3段階の強さ設定から選べる


特長

過圧防止センサー機能

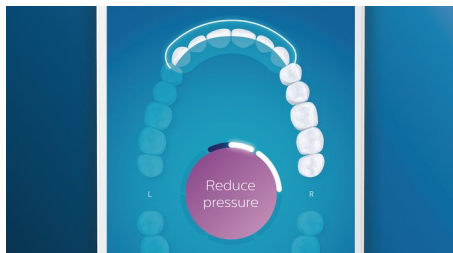


歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

ブラシヘッド認識機能

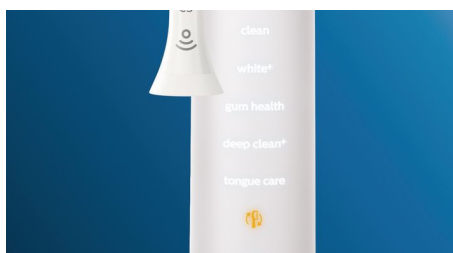

ブラシヘッドに内蔵された RFID 機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）


4つのモード、3段階の強さ設定

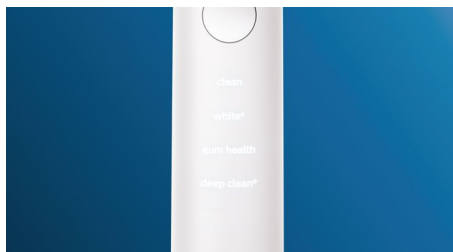

ダイヤモンドクリーンスマートは4つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス


（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）の4つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も3段階からお選びいただけます。

磨き方をサポート

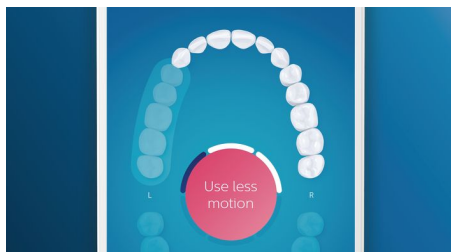

位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。


プレミアムオールインワンブラシヘッド

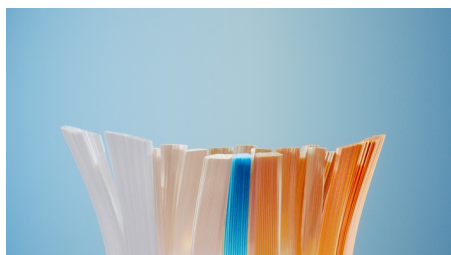

プレミアムオールインワンブラシヘッドで、きれいな仕上がりを実現します。角度のついたアングル毛先は、届きにくい場所でも手磨きの最大20倍の歯垢を除去できます*3。先端はトライアングルカットで、2日間で最大2倍のステイン（着色汚れ）を除去できます*4。そして長めの毛先は歯と歯ぐきの境い目を深く洗浄し、2週間で歯ぐきの健康を推進します*5。ブラシヘッドの効果は3ヶ月ほどで低下していきませんが、ブラシヘッド認識機能なら交換時期にお知らせします。毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、使用状況を把握して交換時期のタイミングを教えてください。*3手磨きと比べ/フィリップス調べ。*4実験的


試験における効果/手磨きと比べ/フィリップス調べ。*5クリーンモード使用時/手磨きと比べ/フィリップス調べ。

問題がある箇所に注目、目標を設定

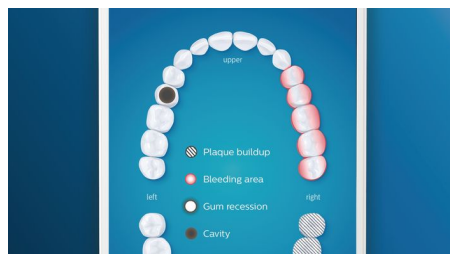


アプリの3D 口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

仕上げ磨き機能

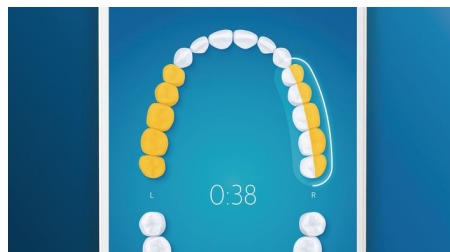

磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ

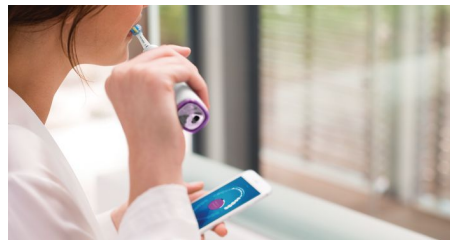

ブラッシングはハンドルに任せてしまいましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

仕様

モード

クリーン: 基本のブラッシングモード

ホワイトプラス: ステインを落とし磨き上げる

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

ディープクリーンプラス: 心地よい振動で歯垢をしっかりと除去

3段階の強さ設定: 強、弱、中

内容・付属品

ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1本

ブラシヘッド: プレミアムオールインワンブラシヘッド(ホワイト) 1本

充電器 / 充電器用グラス / 充電スタンド: 1個

ブラシヘッド認識機能

プレミアムオールインワンブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

プレミアムガムケアブラシヘッド(別売): ガムヘル

スモードを自動選択

プレミアムホワイトブラシヘッド(別売): ホワイトプラスモードを自動選択

アプリ対応

Bluetooth®*6: Philips Sonicare アプリに接続

互換性

Android*7, iOS*8: Google PlayもしくはApp Storeにアクセスして、お持ちのデバイスが対応機種であることを確認してください。

デザイン

色: ホワイト

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

使いやすさ

ブラシヘッド自動認識: ○ ※RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合

充電電池表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ハンドル: にぎりやすいスリムなデザイン

仕様

電源方式: 充電式

充電電池の種類: リチウムイオン充電電池

使用時間: 約2週間 (クリーンモードで、2分間のブラッシングを1日2回)

電源

対応電圧: AC 100-240V (海外電圧対応可能)

サービス

本体2年保証: ○

