

PHILIPS

Dispositivo de depilación
IPL con SenseIQ

Lumea IPL Serie 8000
Prestige

Sensor SmartSkin

4 accesorios inteligentes: cuero,
cara, zona del bikini y axilas

Aplicación Lumea IPL

Uso con cable



BRI948/00

Disfruta de hasta 12 meses* de suavidad sin vello

Disfruta de una piel suave y sin vello durante 12 meses*

Philips Lumea IPL Serie 8000 Prestige se ha desarrollado para adaptarse a las curvas del cuerpo y el uso doméstico más sencillo. Los exclusivos accesorios curvos inteligentes se adaptan a la perfección a las curvas y modifican los programas de tratamiento según la zona del cuerpo.

Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo

- Resultados rápidos con tratamientos solo cada 2 semanas
- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo
- Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Solución completa para cara y cuerpo

- Solución completa para la cara y el cuerpo con 4 accesorios inteligentes
- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello

Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello

- Suavidad y comodidad con SenseIQ
- Optimiza tu rutina con la app Philips Lumea IPL

Lumea IPL Serie 8000 Prestige

Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI948/00

Destacados

2 veces al mes para obtener resultados rápidos



Comienza con la fase inicial de 4 tratamientos solo cada 2 semanas, es decir, la mitad de tratamientos que otras marcas. Luego, basta con retocar cada mes para mantener el resultado.

Tecnología SenseIQ



Lumea serie 8000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Cable extralargo



Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.

4 accesorios inteligentes




Los accesorios especialmente diseñados se adaptan perfectamente a las curvas del cuerpo y activan los programas más eficaces para cada zona del cuerpo cuando están conectados. Cara: diseño plano y pequeña ventana con filtro UV. Cuerpo: curvado hacia dentro con una ventana grande. Bikini y axilas: curvado hacia fuera para zonas de difícil acceso.

Desarrollado junto con dermatólogos



Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

Aplicación Philips Lumea IPL

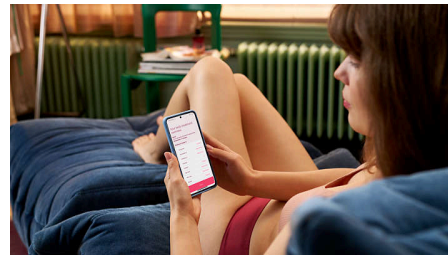

Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita te ayuda a planificar y cumplir tu programa de tratamiento, y te guía paso a paso en cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

Para la mayoría de tipos de piel y vello



IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I- V).

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento del cuerpo: Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

Accesorio para tratamiento de la cara: Forma: plana, Tamaño de la ventana: 2 cm², filtro adicional, Tratamiento personalizado para la cara: labio superior, barbilla y mandíbula

Accesorio para el tratamiento de la zona del bikini: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para la sensible zona del bikini

Accesorio para el tratamiento en las axilas: Forma: curvada cóncava, Tamaño de la ventana: 3 cm², Tratamiento personalizado para las axilas

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se produzcan pulsaciones de luz accidentales

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Uso con/sin cable: Uso con cable

Especificaciones técnicas

Tensión: 100-240 V

Bombilla de alto rendimiento: Proporciona 450 000 pulsos

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de belleza

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Axilas: 2,5 minutos

Línea del bikini: 2 min

Zonas de la cara: 1,5 minutos

Medias piernas: 8,5 min.

