

Philips Sonicare
AirFloss Ultra (na skúšku)

1 hubica



HX8341/01

Trojité vstreknutie pre zdravšie ďasná

Efektívna a vhodná pre ľudí, ktorí nepoužívajú často zubnú niť

Je klinicky dokázané, že Philips Sonicare AirFloss Ultra**** pôsobí na ďasná rovnako účinne ako zubná niť.* Dokonca až 97 % osôb, ktoré nepoužívajú pravidelne zubnú niť a vyskúšali AirFloss Ultra, potvrdilo, že sa stav ich ďasien zlepšil.*

Improves patients' oral health

- Klinicky overená rovnaká účinnosť pre zdravie ďasien ako zubná niť***
- Pomáha predchádzať vzniku zubného kazu v medzizubných priestoroch
- Odstraňuje až 99,9 % povlaku***

Superior technology

- Vysoko výkonná tryska
- Technológia zmesi vzduchu a mikrovapôčiek
- Vlastné nastavenia trojitého prestreku


The easiest way to effectively clean between teeth

- Jednoduchý spôsob na účinnejšie čistenie medzizubných priestorov
- Trvá to len 60 sekúnd: nasmerujte, stlačte a čistite!
- Svieže a čisté vďaka ústnej vode

PHILIPS
sonicare

Hlavné prvky

Odstaňuje až 99,9 % povlaku

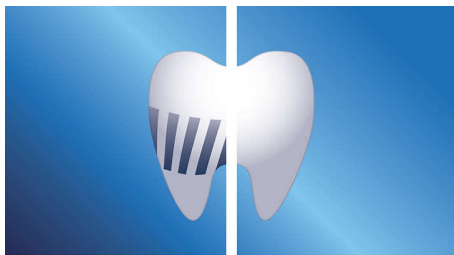


AirFloss Ultra odstráni až 99,9 % povlaku z ošetrovaných miest.**

Technológia mikrovapôčok



Naše klinicky overené výsledky sú možné vďaka jedinečnej technológii, ktorá kombinuje vzduch a ústnu alebo čistú vodu na silné a zároveň jemné čistenie medzizubných priestorov a pozdĺž línie ďasien.

Jednoduchý spôsob, ako začať

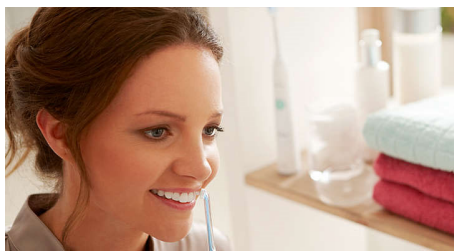

Čistenie medzizubných priestorov je veľmi dôležité pre celkovú ústnu hygienu. AirFloss predstavuje jednoduchý spôsob hĺbkového čistenia medzizubných priestorov, čím pomáha vytvoriť si zdravé návyky. Po troch mesiacoch používania kefkы AirFloss až 96 % ľudí, ktorí používali nepravidelne zubnú nit', aj naďalej používali kefkы AirFloss štyri alebo viac dní do týždňa.

Zdravšie ďasná



Je klinicky overené, že prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra zlepšuje zdravie ďasien rovnako ako zubná nit'.** Pomáha zlepšiť zdravie ďasien už do dvoch týždňov.

Vyčistí len za 60 sekúnd



S prístrojom medzizubnej hygieny AirFloss Ultra si pacienti vyčistia celú ústnu dutinu už za menej ako 60 sekúnd denne. Pacienti si jednoducho vyberú požadovanú frekvenciu streknutí (jedno, dve alebo tri) a stlačením a podržaním aktivačného tlačidla spustia plynulé automatické striekanie, prípadne stlačením a uvoľnením tlačidla môžu používať manuálny režim striekania.

Svieže a čisté vďaka ústnej vode



Používanie s ústnou vodou prináša pacientom zážitok neprekonateľnej sviežosti a zároveň má prospešný antimikrobiálny účinok.

Pomáha predchádzať vzniku zubných kazov




Prístroj medzizubnej hygieny Philips Sonicare AirFloss Ultra jemne vypláčne povlak, ktorý neodstránila zubná kefka, a pomáha tak predchádzať vzniku zubných kazov v medzizubných priestoroch pacientov.

Vysoko výkonná tryska



Nová vysokovýkonná preplachovacia tryska AirFloss Ultra zvyšuje výkon našej technológie na báze zmesi vzduchu a mikrovapôčok a je ešte účinnejšia a efektívnejšia ako kedykoľvek predtým.

Prispôsobenie trojitého prestreku

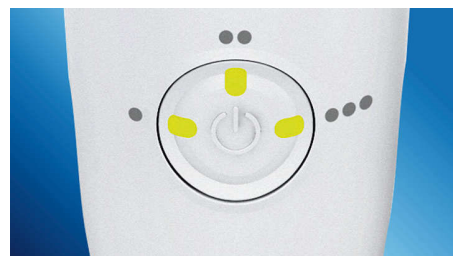

Účinný prúd trysky AirFloss Ultra je možné nastaviť podľa preferencií pacienta na jedno, dve alebo tri streknutia pri každom stlačení aktivačného tlačidla.

Technické údaje

Príkon

- Napätie: Multinapät'ová nabíjačka

Technické špecifikácie

- Batéria: Nabíjateľná
- Typ batérie: Lítium-iónová
- Čas nabíjania: 24 hodín na úplné nabitie

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Strieborná

Servis

- Záruka: 2-ročná obmedzená záruka

Jednoduché použitie

- Telo: Štíhly ergonomický tvar
- Ukazovateľ stavu batérie: Diódy LED na rukoväti zobrazujú úroveň nabitia
- Prídavný nástavec: Ľahko sa nasúva a odpája
- Životnosť batérie: 1 – 3 týždne*****

Príbalené príslušenstvo

- Nabíjacia jednotka: 1
- Rúčka AirFloss Ultra: 1
- Tryska AirFloss Ultra: 1

Výsledky čistenia

- Prínosy pre zdravie: Vyčistí celé ústa za 60 s, Zdravšie ďasná do 2 týždňov*
- Charakteristika: Odstraňuje až 99,9 % povlaku**
- Klinicky overené výsledky: Rovnako účinné ako zubná niť, na zlepšenie zdravia ďasien, na redukciu krvácania ďasien, na redukciu povlaku
- Prispôsobiteľné nastavenia: Automatický alebo manuálny prestrek, Jednoduchý/dvojitý/trojitý prestrek***
- Pre tie najlepšie výsledky: Vymeňte trysku každých 6 mesiacov



Dátum vydania
2023-04-11

Verzia: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Ak sa používa spolu s manuálnou zubnou kefkou a antimikrobiálnou ústnou vodou u pacientov s miernym až stredne vážnym zápalom ďasien. Ústna sprcha AirFloss má slúžiť ako pomôcka pre ľudí, ktorí nepoužívajú zubnú niť pravidelne, aby si vytvorili každodenný zdravý návyk čistenia medzizubných priestorov. Ďalšie informácie nájdete na stránke www.philips.com/airfloss/faq.

*** AirFloss Ultra a Pro sú rovnaké výrobky, avšak môžu byť rozdielne pomenované v závislosti od krajiny a kanála.

***** v závislosti od použitého nastavenia striekania