




Philips Sonicare AirFloss
Zobstarpu - uzlādējama

1 uzgalis

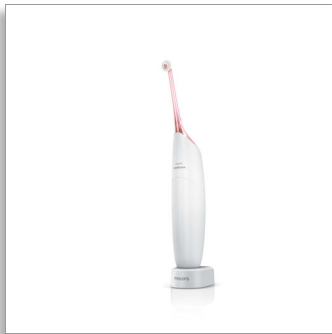

HX8221/02

Vai nepatīk tīrīt ar zobu diegu? Izmantojiet AirFloss.

Likvidē aplikumu vietās, kur to nespēj zobu birste

Cilvēkiem, kas regulāri netīra zobus ar zobu diegu, AirFloss ir vienkāršs paņēmieni zobstarpu tīrīšanai. AirFloss var izmantot kopā ar mutes skalošanas līdzekļiem vai ūdeni, un tam ir unikāla gaisa un mikropilienu tehnoloģija, kas palīdz likvidēt aplikumu grūti aizsniedzamās vietās.

Uzlabo mutes veselību

- Palīdz uzlabot smaganu veselību tikai divās nedēļās
- Palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem
- Likvidē līdz 5x vairāk aplikuma starp zobiem*

Achieve a 30-second clean

- Iztīra visu muti tikai 30 sekundēs
- Novietojiet. Nospiediet. Notīriet!

Easy to use

- Pieskāriena tehnoloģija
- Zobu starpu tīr. uzgalis nodrošina pareizu novietojumu
- Ērts ergonomisks rokturis


Helps build a healthy habit

- Viegls veids, kā uzlabot zobstarpu tīrību

PHILIPS
sonicare

Izceltie produkti

Gaisa un mikropilienu tehnoloģija

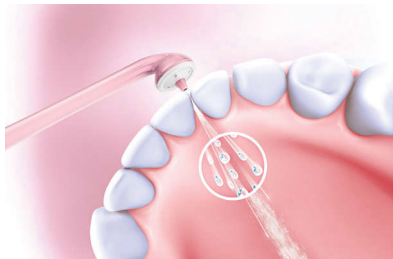

AirFloss izmanto unikālu gaisa un mikropilienu tehnoloģiju, kas nodrošina zobstarpu tīrīšanu ar ātru saspiesta gaisa un ūdens vai mutes skalošanas līdzekļa plūsmu. Turklāt izmantot viena skāriena aktivizācijas pogu ir tikpat vienkārši kā izmantot datora peles pogu.

30 sekunžu tīrīšana



Izmantojot AirFloss, visas mutes tīrīšana ilgst tikai 30 sekundes. Vienkārši vienreiz nospiediet pogu vienai tīrīšanas darbībai, pēc tam pārejiet pie nākamās zobstarpas un atkārtojiet. Lai izmantotu jauno automātiskās strūkles funkciju, turiet pogu nospiestu un pārvietojiet zobstarpu tīr. uzgali. Ierīce izdos strūklu ik pēc sekundes.

Labāka smaganu veselība



Klīniski apstiprināts, ka Sonicare AirFloss uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās.

Viegli uzpildāms nodalījums




Uzpildiet nodalījumu rokturī ar vai nu mutes skalošanas līdzekli, vai ūdeni mutes dobuma svaigumam, pēc tam novietojiet uzgali un nospiediet pogu. Nodalījumā ietilpst pietiekami daudz šķidruma divām lietošanas reizēm.

Zobu starpu tīr.




Plānā izliktā sprausla un zobu starpu tīr. uzgalis ļauj viegli atrast pareizo pozīciju. Vienkārši virziet gar zoba virsmu smaganu līnijas tuvumā, līdz uzgalis iesēžas gropē starp zobiem.

Ergonomisks rokturis

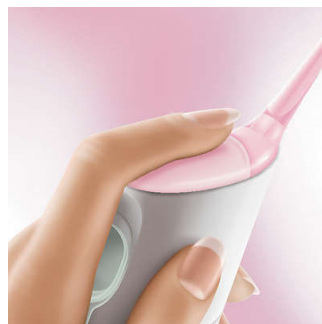

Izstrādāta ērtai lietošanai šaurās vietās, AirFloss ir ērts ergonomisks rokturis un neslidoša virsma.

Palīdz novērst caurumu veidošanos

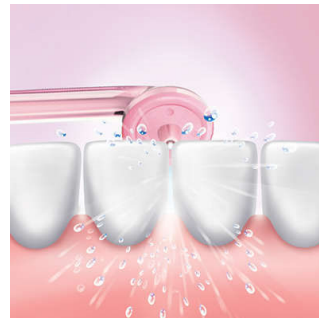


Saudzīgi noskalojot aplikumu, ko nevar iztīrīt ar zobu birsti, Sonicare AirFloss palīdz novērst caurumu veidošanos starp zobiem.

Notīra vairāk aplikuma



Zobstarpu tīrīšana ir svarīga jūsu mutes veselības daļa. Sonicare AirFloss izmantots gaisa un mikropilienu tehnoloģija, lai noņemtu līdz 5x vairāk aplikuma starp zobiem, nekā tīrot tikai ar zobu birsti.

Viegls sākums

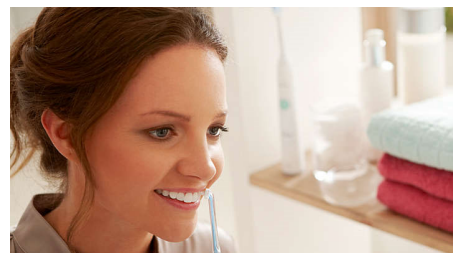

Zobstarpu tīrīšana ir ļoti svarīga kopējai mutes veselībai. AirFloss ir viegls veids, kā iztīrīt dziļi starp zobiem, palīdzot veidot veselīgus ieradumus. Pēc trīs mēnešu ilgas AirFloss izmantošanas 96% cilvēku, kas pirms tam neregulāri tīrīja zobus ar zobu diegu, turpināja izmantot AirFloss četras vai vairāk reizes nedēļā.

Specifikācijas

Strāvas padeve

- Spriegums: Daudzspriegumu lādētājs

Tehniskā specifikācija

- Darbības laiks: Nomainiet uzgali ik pēc 6 mēnešiem
- Akumulators: Uzlādējams
- Akumulatora tips: Litija jonu
- Uzlādes ilgums: 24 stundas līdz pilnai uzlādei

Dizains un apdare

- Krāsa: Rozā
- Uzgaļa krāsa: Rozā ar baltu galu

Vienkārša lietošana

- Rokturis: Plāns ergonomisks dizains
- Akumulatora indikators: Mirgošana norāda zemu baterijas līmeni

- Baterijas darbmūžs: Līdz 3 nedēļām pēc pilnas uzlādes
- Uzgaļa piederums: Viegla uzspraušana un noņemšana

Komplektā iekļautie piederumi

- Lādētājs: 1 daudzspriegumu lādētājs
- AirFloss uzgalis: 1
- Uzgaļu tureklis: 1

Tīrīšanas veiktspēja

- Sniegums: Likvidē līdz pat 5X vairāk aplikuma*
- Veselības ieguvumi: Uzlabo smaganu veselību tikai divās nedēļās
- Uzgaļi: Lai iegūtu vislabākos rezultātus, mainiet ik pēc 6 mēn
- Autom. strūkļas funkcija: Iztīra visu muti 30 sek.



Izlaides datums
2024-03-02

Versija: 5.5.1

EAN: 87 10103 68992 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* nekā tikai ar zobu birsti