

Philips Sonicare
DiamondClean Smart
ソニックケア ダイヤモ
最適なオーラルケアを実現
プロフェッショナル

ブラシヘッド交換時期お知らせ機能
ブラシヘッド認識機能
5つのモード、3段階の強さ設定

HX9949/09



ソニックケア史上最高*のブラッシング体験をあなたに！

より優れたブラッシング体験を実現

ダイヤモンドクリーン スマートは、理想的なオーラルケアを実現する高性能電動歯ブラシです。／歯科医院で販売中

スマートセンサーテクノロジーが各自に合ったアドバイスを提供

- 磨き方をサポート
- 過圧防止センサー機能
- ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ
- 仕上げ磨き機能
- 問題がある箇所に注目、目標を設定

直感的なブラッシング体験

- ブラシヘッド認識機能
- 5つのモード、3段階の強さ設定
- ブラシヘッド交換お知らせ機能


PHILIPS

sonicare

ソニックアーダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナル
最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能, ブラシヘッド
認識機能, 5つのモード、3段階の強さ設定


特長

問題がある箇所注目、目標を設定

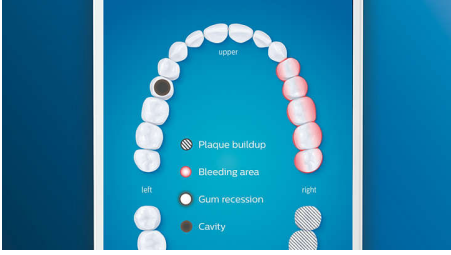

アプリの3D口腔マップにその箇所を示して、特に注意すべき箇所をお知らせすることができます。

磨き方をサポート

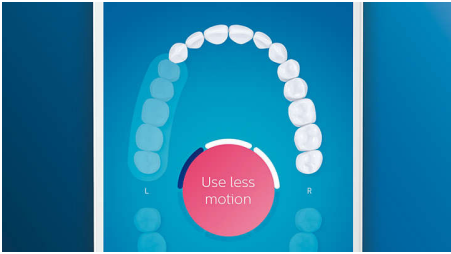


位置センサーを使用すれば、磨いた部分と磨いていない部分をいつでも確認できます。Philips Sonicare アプリで歯磨きをリアルタイムに追跡することで、隅々までしっかり磨けたことを確認するだけでなく、さらにガイドに従いしっかり歯を磨くことができます。

ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせ




ブラッシングはハンドルに任せてしましましょう。ハンドル内蔵の動作センサーが、ハンドルの動かしすぎを検知してお知らせします。上手に磨いて、効果的なブラッシングを。

ブラシヘッド認識機能

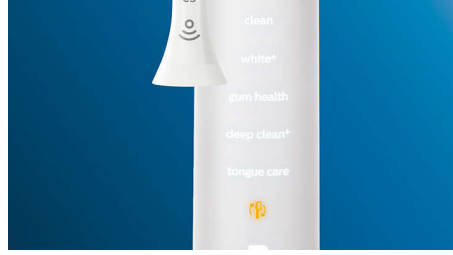

ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能

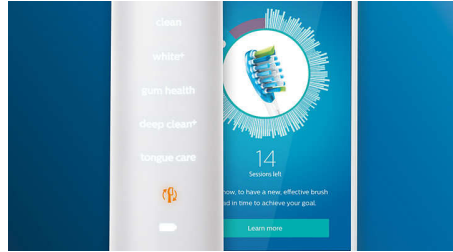

ブラシヘッドには毎回のブラッシング時間とブラシ圧が記録され、交換時期になるとハンドル下部にあるお知らせランプが光り、ブラシヘッド交換のタイミングをお知らせします（RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合）。


5つのモード、3段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーンスマートは5つのブラッシングモードを搭載。クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、


ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかりと除去）、舌磨き（きれいな息が長続き）の5つのモードが、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

過圧防止センサー機能

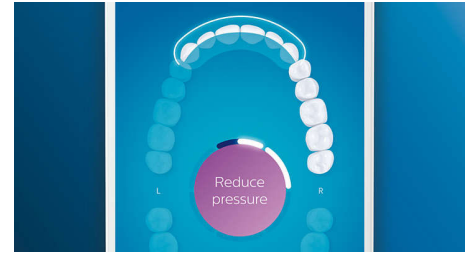

歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。ライトリングが紫色に点滅したら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

仕上げ磨き機能

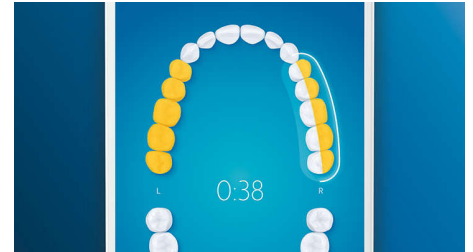

磨き残しがあれば、アプリの仕上げ磨き機能が教えてくれます。すべて磨いたあと、もう一度磨き残しを確認できます。

ソニックアー ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナル
最適なオーラルケアをリアルタイムでガイド ブラシヘッド交換時期お知らせ機能, ブラシヘッド
認識機能, 5つのモード、3段階の強さ設定

仕様

デザインと仕上げ

- 色: ホワイト

コネクティビティ

- Bluetooth®: Philips Sonicare アプリに接続

電源

- 対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

- 充電機: 充電式
- 使用時間: 14 日間*****
- 充電機の種類: リチウムイオン充電機

サービス

- 本体保証: 2 年間保証

互換性

- Android: Android4.4.2 以上 (Bluetooth4.0 以降搭載機種) *iPad Pro 等一部の機種では正常に動作しない場合があります。 (Bluetooth 4.0 以降搭載機種)
- iOS: iOS 9.3 以上, (iPhone 6 以降), iOS 9.3 以上 (iPhone6 以降)

使いやすさ

- 充電機表示ランプ: ランプで充電機残量を表示
- ディスプレイ: 照明付きディスプレイ
- ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド
- ハンドル: スリムなデザイン
- ブラシヘッド自動認識: ○ *RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合
- シェービングヘッド交換時期お知らせ機能: ○ *RFID 内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンの点灯

内容

- ハンドル: ダイヤモンドクリーン スマート 1

- 本
- 充電スタンド: 1

洗浄性能

- ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分
- タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー
- 過圧に関するフィードバック: 紫色のライトリングが点灯, ハンドルが振動してお知らせ
- 仕上げ磨き: ○

モード

- 3段階の強さ設定: 強, 中, 弱
- クリーン: 歯をキレイに
- ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す
- ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を
- 舌磨き: きれいな息が長続き
- ホワイトプラス: スタインを落とし磨き上げる

ブラシヘッド認識機能

- プレミアムクリーン: クリーンモードを自動選択
- G3 プレミアムガムケアブラシヘッド: ガムヘルスモードを自動選択
- プレミアムホワイトブラシヘッド: ホワイトプラスモードを自動選択
- 舌磨きブラシヘッド: クリーンモードを自動選択

スマートセンサーテクノロジー

- 過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ
- 位置センサー: ブラシヘッドの位置を追跡して改善
- 摩擦センサー: 摩擦を減らすように指導
- 3D 口腔マップ: 問題の箇所をハイライト
- 仕上げ磨き: 磨き残しに対処



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-03-21

バージョン: 2.0.7

EAN: 08 71010 38903 24

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2022 Philips Japan, Ltd.
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社

www.philips.com

* モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較
** Bluetooth® のワードマークおよびロゴは Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。 *** クリーンモードで2分間のブラッシングを1日2回