

PHILIPS

sonicare

음파칫솔

ProtectiveClean 4700

압력 감지 센서 장착

2가지 양치모드, 3단계 강도 조절

1 x BrushSync 기능



HX6434/01



더욱 건강한 잇몸, 부드러운 세정.

일반 칫솔 대비 최대 100%의 잇몸 건강 개선.

일반 칫솔 대비 최대 100% 잇몸 건강을 개선하면서도 압력 센서로 자극 없이 부드럽게 닦여지는 차이를 느껴 보세요.

검증된 구강 건강 개선

- 최대 100% 잇몸 건강 개선*
- 민감한 부분, 치아 교정, 치과 치료 시에도 사용할 수 있는 안전하고 부드러운 칫솔모

사용자를 고려한 디자인

- 빈틈없이 꼼꼼한 양치 권장
- 칫솔모 교체 시기 알림

혁신적인 기술


- 양치 시 과도한 압력을 알려주는 알림 기능
- 필립스 소닉케어의 고급 음파 기술
- 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모의 연결

최적의 양치질

- 2가지 모드, 3단계 강도 조절


주요 제품

잇몸 건강 개선

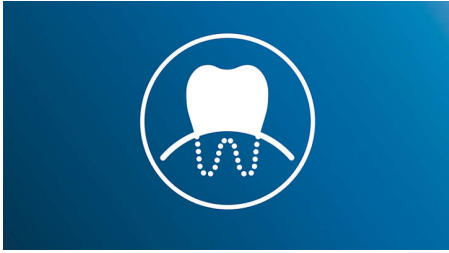

조밀하게 식모된 고품질 칫솔모로 잇몸선을 따라 플라그가 더욱 효과적으로 제거되므로 일반 칫솔에 비해 잇몸 건강 개선 효과가 최대 2배 더 우수합니다. 또한 곡선 형태의 파워 팁으로 구강 안쪽 치아까지 개운하게 닦을 수 있습니다.

원하는 방식으로 양치하기

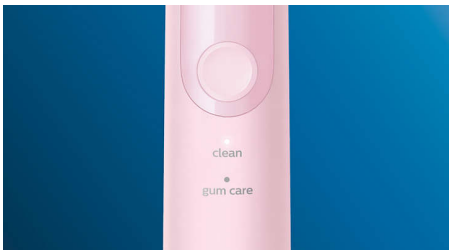

이 칫솔을 이용하면 2가지 모드와 3단계 강도 중 선택하여 원하는 대로 양치질을 할 수 있습니다. Clean 모드는 뛰어난 세정력을 제공하는 표준 모드입니다. Gum Care 모드에서는 낮은 강도로 보다 오랫동안 양치를 하며 부드럽게 잇몸을 마사지할 수 있습니다. 세 가지 강도는 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 바뀌며 '높은 강도'에서 '낮은 강도' 순으로 정렬됩니다.

안전하고 부드러움



안전한 양치 경험을 보장합니다. 필립스 음파 기술은 치아 교정기, 신경 치료, 크라운, 라미네이트를 한 경우에도 적합하며 충치 예방 및 잇몸 건강 개선에도 효과적입니다.

단 하나의 진정한 음파 기술



필립스 소닉케어의 고급 음파 기술이 물살을 만들어 치아 사이를 통과시키고, 칫솔모가 움직여 플라그를 제거해, 놀라운 깨끗함을 선사합니다.

양치 압력 모니터링



칫솔질을 너무 세게 하면 치아와 잇몸이 손상될 수 있습니다. 이를 방지하고자 필립스 소닉케어 프로텍티브클린은 부드러운 진동 소리를 내서 힘을 빼도록 알려줍니다.

BrushSync 기술




마이크로칩 내장 기술로 스마트 칫솔모를 감지하고 스마트 칫솔 핸들과 동기화할 수 있습니다. 스마트 칫솔 핸들과 스마트 칫솔모 연결의 강력한 조합은, 스마트 모드 페어링과 스마트 교체 알림 기능을 활성화 시켜줍니다.

BrushSync 교체 알림



모든 칫솔모는 시간이 지나면 마모되기 마련입니다. 필립스 BrushSync 기술은 칫솔모 사용 기간과 양치 강도를 추적해 교체 시기가 되면 핸들에서 나는 짧은 경고음으로 사용자에게 알려 줍니다. 이를 통해 사용자는 언제나 좋은 상태의 칫솔모로 양치할 수 있습니다.

유용한 타이머 기능

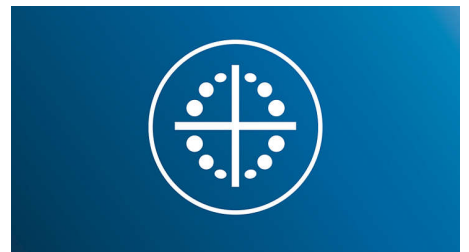

타이머가 있는 음파 칫솔이 필요하신가요? 필립스의 퀵드레이서는 작동하는 동안 입안 각 영역을 적절하게 시간 분배하여 세정할 수 있도록 알림을 울리며, 스마트타이머는 권장 양치 시간인 2분을 유지할 수 있도록 시간이 되었을 때 알려줍니다.

사양

소비전력

전압: 110~220V

기술 사양

배터리: 충전식

작동 시간(방전 상태에서 완전 충전까지): 최장 2주

배터리 유형: 리튬 이온

디자인 및 마감

색상: 파스텔 핑크

서비스

보증: 구입 후 2년

편리한 사용

핸들: 슬림한 인체 공학적 디자인

핸들 호환성: 탈부착이 쉬운 클릭온 칫솔모

배터리 표시등: 표시등이 배터리 상태를 나타냄

칫솔질 시간: 최장 2주

교체 알림: 언제나 보장되는 최적의 효과, 칫솔모 교체 알림등 켜짐

구성품

충전기: 1개

칫솔모: G2 옅티멀 잇몸케어 1개

핸들: 프로텍티브클린 1개

세정 성능

구강 건강 관리 효과: 잇몸 건강 개선을 도와줌**, 충치 예방 효과

타이머: 쿼드페이스 및 스마트 타이머

압력 피드백: 핸들 진동으로 알림

모드

세정: 매일매일 깨끗한 양치

3단계 강도 조절: 낮음, 일반, 높음

잇몸 케어: 부드러운 잇몸 마사지

스마트 센서 기술

압력 감지 센서: 양치 압력이 너무 강할 때 알림

BrushSync 교체 알림: 칫솔모 교체 시기, 알림

