



PHILIPS

RéAura


Laser skin rejuvenation

Breakthrough
anti-ageing
technology.
Visible results.

Developed with the makers
of Fraxel® laser technology



User
manual

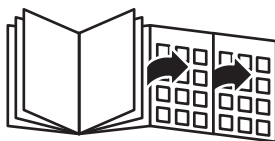




Overzicht van een RéAura-behandeling

1 Voorbereiden

1 Voordat u Philips RéAura gaat gebruiken, leest u de gebruiksaanwijzing grondig, bekijkt u de bijgevoegde instructie-DVD en stelt u uw doelen op www.philips.nl/myreaura. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Philips Skincare-expertteam.

2 Laad het apparaat op.

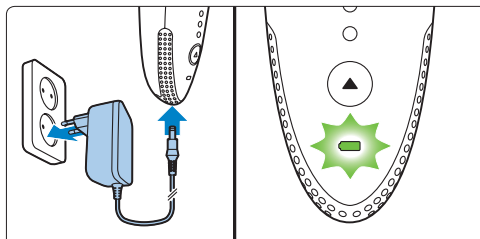

3 Reinig uw huid met een milde huidreiniger.




4 Breng per zone maximaal een hoeveelheid laser performance gel aan ter grootte van een erwt.




2 Het apparaat instellen


1 Klik de behandelkop op het apparaat.

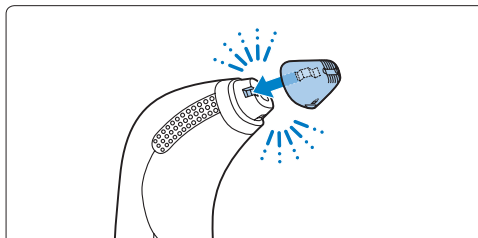

2 Schakel het apparaat in. De statusindicator en het lampje van de intensiteitsselectieknop gaan branden.

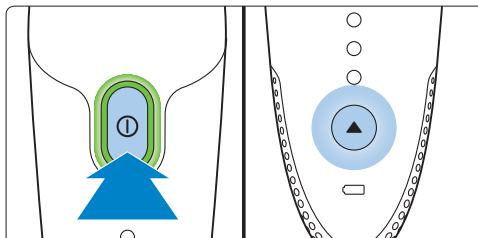



3 Kies intensiteitsstand 2 of 3 voor een effectieve behandeling.

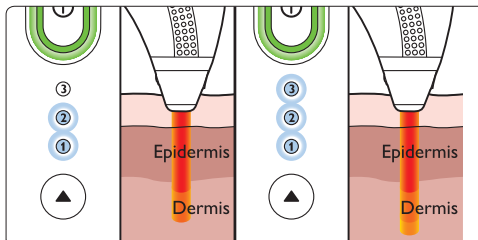

Overzicht van een RéAura-behandeling

3 Treat


- 1 Plaats de behandelkop op uw huid onder een hoek van 90 graden. Zorg voor volledig huidcontact

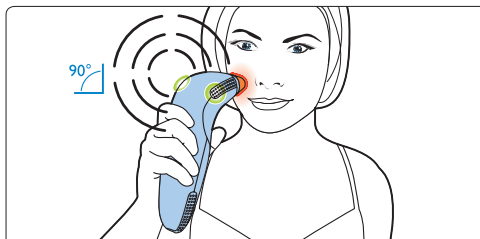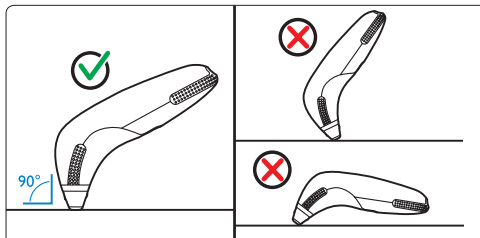


Opmerking:

Wanneer er goed huidcontact is, gaat de behandelkop rood branden. Wanneer u het apparaat met de juiste snelheid beweegt, worden de behandelingslampjes groen, gaat de laser zoemen en voelt u de laser op uw huid.

- 2 Maak met het apparaat lange verticale en horizontale bewegingen over uw huid.

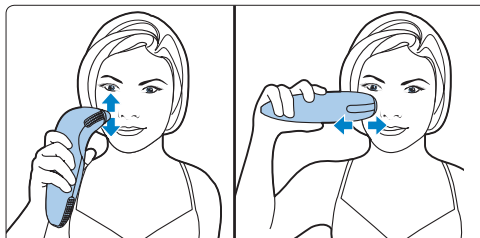


- 3 Behandel één wangzone totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort. Blijf een zone altijd behandelen totdat u dit geluid hoort. Als u dat niet doet, is de behandeling niet effectief.

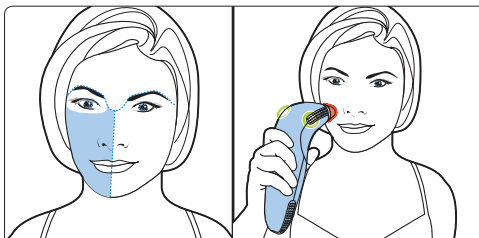


- 4 Behandel de andere wangzone totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.



- 5 Behandel het voorhoofd door één dosis toe te passen totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.

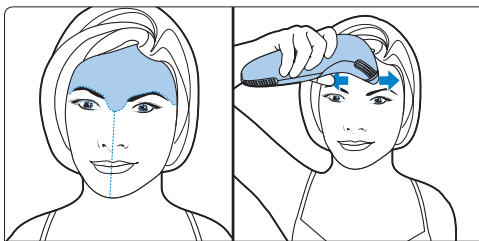

- 6 Schakel het apparaat uit.

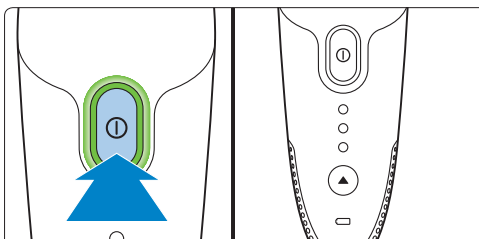


Overzicht van een RéAura-behandeling

4 Uw huid verzorgen


- 1 Verwijder de gel met koud water of een milde huidreiniger.




- 2 Gebruik het laser aftercare complex om uw huid te hydrateren.

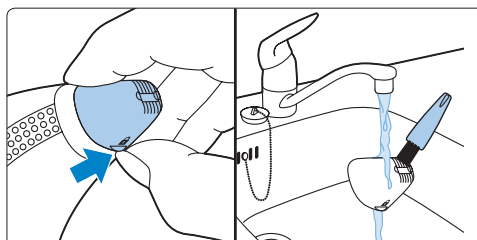

- 2 Laad uw apparaat op voor een volgend gebruik.

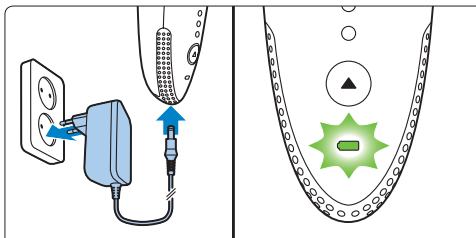

- 3 Berg het apparaat veilig in het etui op.

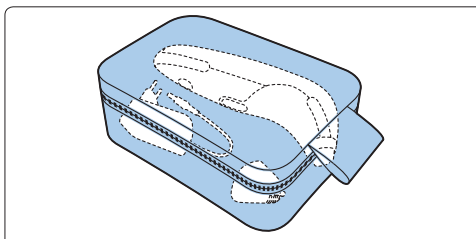

5 Het apparaat reinigen en opbergen

- 1 Maak de behandelkop los en spoel deze af onder een lopende kraan. Reinig de kop met de borstel. Reinig het apparaat met het schoonmaakdoekje. Reinig het laservenster met een nat wattenstaafje en veeg het droog met de doek.



Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinformatie	8	4.5	Gebruik de laser performance gel en het laser aftercare complex	16
1.1	Veiligheidsvoorzieningen	8	4.6	Vraag advies aan het Philips Skincare-expertteam	17
1.2	Belangrijk	8	4.7	Gebruik het MyRéAura-onlinebehandelplan	17
1.3	Contra-indicaties en andere waarschuwingen	9			
1.4	Blijf uit de zon	10	5	Philips RéAura gebruiken	18
1.5	Raadpleeg uw arts	10	5.1	Een RéAura-behandeling van het hele gezicht in detail	18
1.6	Klasse 1M laser	11	5.2	Hoe u één laserdosis per behandelzone toedient	22
1.7	Elektromagnetische velden (EMV)	11	5.3	Overzicht van lampjes en geluidssignalen	23
2	Wat is Philips RéAura laser skin rejuvenation?	11	6	Hoe uw huid op de behandelingen reageert	25
2.1	Inleiding	11	6.1	Zonbescherming	25
2.2	Wat zit er in de doos?	12	6.2	Huidreacties en bijwerkingen	25
2.3	Laser skin rejuvenation-apparaat	12	7	Vervangen	27
3	Welke resultaten kunt u verwachten?	13	8	Milieu	28
3.1	De werking van de laser op de huid	13	9	Garantie en service	28
3.2	Resultaten die u wel en niet kunt verwachten	14	10	Technische specificaties	28
3.3	Huidconditie vastleggen voordat u begint	14	11	Veelgestelde vragen	29
3.4	Hoe u de resultaten kunt beoordelen	14	12	Problemen oplossen	33
3.5	Houd vol	14			
4	Zeven principes om resultaten te bereiken	15			
4.1	Behandel slechts één deel van het lichaam (bijvoorbeeld het gezicht) tijdens de eerste 8 weken	15			
4.2	Gebruik stand 2 of 3	15			
4.3	Voer de behandeling tweemaal per week gedurende 8 weken uit zonder behandelingen over te slaan	15			
4.4	Gebruik één laserdosis per zone per behandeling	16			

1 Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voordat u de Philips RéAura gaat gebruiken, bekijk de bijgevoegde instructie-DVD en stel uw doelen vast op www.philips.nl/myreaura. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Philips Skincare-expertteam.

1.1 Veiligheidsvoorzieningen

1.1.1 Kinderslot

Het apparaat werkt niet zonder de behandelkop, om onbedoeld gebruik door kinderen te voorkomen. Berg de behandelkop apart van het apparaat in het etui op en bewaar het etui op een veilige plaats buiten bereik van kinderen.

1.1.2 Oogbeveiliging

Om de ogen te beschermen, zendt het apparaat alleen laserpulsen uit als de behandelkop volledig in contact is met de huid en het apparaat over de huid wordt bewogen.

1.1.3 Overbehandelingsbeveiliging

Als het apparaat detecteert dat meer dan het aanbevolen aantal doses is toegepast binnen 24 uur, knippert de statusindicator gedurende 30 seconden oranje en schakelt het apparaat automatisch uit. Het apparaat blijft 24 uur vergrendeld om verder gebruik te voorkomen.

1.1.4 Thermische beveiliging

Als de ingebouwde temperatuursensor een te hoge of te lage temperatuur in het apparaat meet, wordt de laser uitgeschakeld. De statusindicator brandt continu rood. De ventilator in het apparaat blijft functioneren om het apparaat te helpen koelen wanneer het te heet is. Wanneer de statusindicator groen gaat branden, is het apparaat weer klaar voor gebruik. Als het apparaat binnen 5 minuten niet genoeg afkoelt, schakelt het volledig uit.

1.2 Belangrijk

1.2.1 Gevaar

- Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Gebruik dit apparaat daarom niet in een vochtige omgeving (bijv. in de buurt van een gevuld bad, een lopende douche of een gevuld zwembad).
- Houd het apparaat en de adapter droog.



- Spoel het apparaat nooit onder de kraan af. Het apparaat is niet waterdicht en ook niet waterbestendig.

1.2.2 Waarschuwing

- Dit apparaat, de laser performance gel en het laser aftercare complex zijn niet bedoeld voor gebruik door personen jonger dan 18 en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Verwijder de behandelkop na gebruik altijd onmiddellijk van het apparaat, reinig hem en berg hem op de juiste plaats in het etui op. Zorg ervoor dat u het etui met het apparaat buiten bereik van kinderen op een droge en stofvrije plaats opbergt.
- Gebruik alleen de bijgeleverde adapter om het apparaat op te laden.
- Bedek het apparaat en de adapter nooit tijdens het opladen.
- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat nooit worden bedekt of geblokkeerd.

- Gebruik het apparaat en de adapter niet als deze beschadigd zijn. Als de adapter beschadigd is, laat u deze altijd vervangen door een origineel exemplaar om gevaar te vermijden.
- De adapter bevat een transformator. Knip de adapter niet af om deze te vervangen door een andere stekker; aangezien dit een gevaarlijke situatie oplevert.
- Gebruik het apparaat niet als het laservenster of de behandelkop gebroken, gebarsten, bekrast, beschadigd of vuil is. Inspecteer de behandelkop altijd voor gebruik.
- Gebruik en bewaar het apparaat uitsluitend in een droge kamer bij een temperatuur tussen +10°C en +40°C.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare of explosieve stoffen of materialen.
- Zorg er altijd voor dat de alcohol met een hoog percentage die wordt gebruikt voor het ontsmetten, volledig is verdampt voordat u het apparaat inschakelt.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de adapter; overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de adapter aansluit.
- De laser performance gel en het laser aftercare complex zijn uitsluitend voor uitwendig gebruik.

het apparaat naar een erkend Philips-servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

- Maak de behandelkop los voordat u deze onder de kraan reinigt.
- Zorg er altijd voor dat de behandelkop droog is voordat u deze opnieuw op het apparaat bevestigt.
- Berg de behandelkop altijd apart van het apparaat op (zie 'Veiligheidsvoorzieningen').
- Zorg ervoor dat de bovenkant van het apparaat en het gebied in de buurt van de groeven onder en boven het laservenster schoon zijn. De behandelkop kan niet goed worden bevestigd als dit oppervlak en de groeven vuil zijn. Reinig ze zo nodig met een vochtige doek.

1.3 Contra-indicaties en andere waarschuwingen

1.3.1 Niet gebruiken

- Als u huidinfecties, open wonden, uitslag, brandwonden, zonnebrand, ontstekingen of actieve acne hebt in de te behandelen gebieden.
- Als uw huid een allergische reactie vertoont op ingrediënten in de laser performance gel of het laser aftercare complex.

1.3.2 Voorzichtig zijn voor gebruik

- Als u een huidaandoening hebt, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gaat gebruiken.
- Als uw huid gevoelig is voor licht en u snel uitslag of een allergische reactie krijgt, raadpleeg dan uw arts voordat u het apparaat gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet als u een medicijn gebruikt waarbij u zonlicht moet vermijden, of dat uw huid gevoelig maakt voor beschadiging door licht, of dat een allergische reactie kan veroorzaken door lichtgevoeligheid. Controleer de bijsluiter van uw medicijn of vraag uw arts of apotheker of het medicijn uw huid 'lichtgevoelig' maakt. Controleer ook of u een medicijn gebruikt dat uw huid kan beïnvloeden, bijvoorbeeld een medicijn dat steroïden bevat. Wacht tot u gestopt bent met het gebruik van het medicijn voordat u het apparaat gaat gebruiken.

1.2.3 Let op

- Dit apparaat is alleen bedoeld voor het verminderen van tekenen van veroudering op gezicht, hals, borst, handen en onderarmen. Gebruik het niet op andere delen van uw lichaam.
- Als het apparaat voor commerciële of professionele doeleinden wordt gebruikt, als het wordt gebruikt voor andere delen van het lichaam dan waarvoor het uitdrukkelijk is bedoeld, of als het door personen wordt gebruikt die uitdrukkelijk worden uitgesloten van gebruik, vervalt de garantie en is Philips niet aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte schade.
- Als het apparaat beschadigd is, gebruik het dan niet langer. Neem contact op met het Philips Skincare-expertteam of breng

- Als uw huid nog herstelt van een cosmetische behandeling, zoals chemische of mechanische peeling, Laser Resurfacing, Botox®-injecties of een behandeling met huid-fillers in de afgelopen twee weken, wacht dan totdat uw huid is hersteld voordat u het apparaat gebruikt.
- Als uw huid nog steeds rood of gezwollen is van een vorige behandeling met het laser skin rejuvenation-apparaat, wacht dan totdat de roodheid en zwelling zijn verdwenen voordat u het gebied opnieuw behandelt.
- Als u onlangs verkleurd bent in de zon, raadpleeg dan 'Blijf uit de zon' hieronder.

Opmerking:

Als u vragen hebt of advies nodig hebt, neem dan contact op met het Philips Skincare-expertteam.

1.3.3 Waar u het apparaat niet moet gebruiken

- Binnen de botrand rond het oog.
- Op andere gebieden dan gezicht, hals, borst, handen of onderarmen.
- Op tepel, tepelhof, kleine schaamlippen, vagina en anus.
- Aan de binnenkant van oren, neus of mond of op de lippen.
- Boven of in de buurt van implantaten, of op of in de buurt van piercings of sieraden of andere metalen die aan het lichaam zijn bevestigd.

1.4 Blijf uit de zon

Blootstelling aan de zon voor en na de behandeling kan het risico op ongewenste pigmentatie en zonnebrand doen toenemen. Vermijd aanzienlijke blootstelling aan de zon (bijvoorbeeld zonnebrand of bruin worden) en kunstmatig bruinen gedurende ten minste 2 weken voor, tijdens en 2 weken na de behandeling. Wanneer u tijdens deze periode naar buiten gaat, gebruik dan een zonbeschermingsfactor van 30 of hoger op de behandelde gebieden. Gebruik ook factor 30 wanneer u gaat zonnebaden of kunstmatig bruinen gedurende ten minste 3 maanden na uw laatste behandeling.

1.5 Raadpleeg uw arts

Gebruik het apparaat niet als u ongunstige reacties ondervindt die niet beschreven zijn in 'Huidreacties en bijwerkingen' in hoofdstuk 'Hoe uw huid op de behandelingen reageert'. Raadpleeg uw arts in de volgende gevallen:

- als reacties langer dan 3 dagen aanhouden
- als u een extreme gevoeligheid van de huid waarneemt
- als u huidbeschadigingen in het behandelgebied hebt die bloeden, niet genezen of onlangs zijn veranderd van afmeting, structuur of kleur
- als u niet zeker weet of het apparaat veilig is op basis van de bovenstaande informatie
- als u voor of na de behandeling een andere medische aandoening of huidaandoening hebt waarover u zich zorgen maakt

Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw arts als het apparaat, de laser performance gel of het laser aftercare complex irritatie veroorzaken.

1.6 Klasse 1M laser

- Dit klasse 1M laserapparaat geeft onzichtbare laserstraling af. Bekijk deze niet rechtstreeks met optische instrumenten zoals microscopen en telescopen.



Opmerking:

Dit apparaat is veilig voor ogen en huid indien het normaal en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt.

1.7 Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

2 Wat is Philips RéAura laser skin rejuvenation?

2.1 Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips RéAura laser skin rejuvenation! Met Philips RéAura herontdekt u uw natuurlijk stralende huid. Philips RéAura zorgt voor een egale teint, verbetert de huidtextuur en vermindert fijne lijntjes in uw gezicht, hals, borst, handen en onderarmen. Met dit baanbrekende antiverouderingsprogramma maakt Philips de geavanceerde lasertechnologie van Fraxel®, het toonaangevende professionele cosmetische laserbedrijf, beschikbaar voor thuisgebruik.


Philips RéAura bestaat uit een doeltreffend, veilig laser skin rejuvenation-apparaat, een laser performance gel voor optimaal huidcontact en het soepel over de huid glijden van het apparaat tijdens behandeling, en een laser aftercare complex voor na de laserbehandeling met ultrahydraterende en kalmerende ingrediënten om uw huid tijdens het proces van celvernieuwing te hydrateren. Verder hebt u als RéAura-gebruiker exclusieve toegang tot de MyRéAura-onlinebehandelgids en het Philips Skincare-expertteam. In deze gebruiksaanwijzing leest u alles over hoe de elementen van Philips RéAura naadloos samenwerken om u te helpen een stralende huid te krijgen.

2.2 Wat zit er in de doos?

- 1 Laser skin rejuvenation-apparaat
- 2 Laser performance gel
- 3 Laser aftercare complex
- 4 Opbergetui
- 5 Adapter met snoer
- 6 Schoonmaakborsteltje
- 7 Schoonmaakdoekje
- 8 Welkomstboekje met instructie-DVD
- 9 Welkomstkaart
- 10 Gebruiksaanwijzing
- 11 Garantievouwblad

2.3 Laser skin rejuvenation-apparaat


- 1 Behandelkop
- 2 Contactpennen
- 3 Kinderslotsymbool
- 4 Vingeruitsparing
- 5 Laservenster
- 6 Ventilatieopeningen
- 7 Behandelampjes
- 8 Statusindicator
- 9 Aan/uitknop
- 10 Intensiteitslampjes
- 11 Intensiteitsselectieknop
- 12 Batterijlampje
- 13 Aansluitopening voor kleine stekker

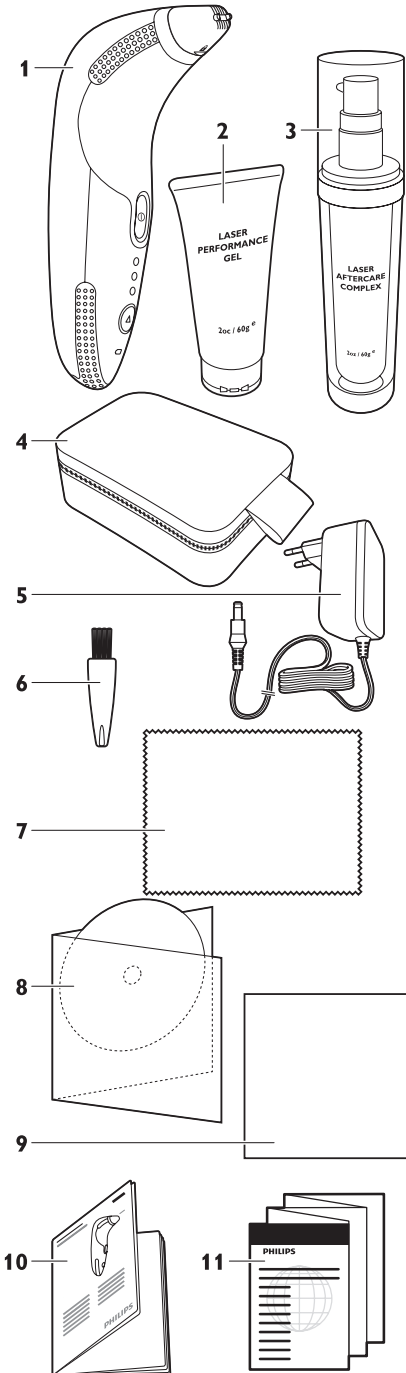


3 Welke resultaten kunt u verwachten?


3.1 De werking van de laser op de huid

- De huid bestaat uit verschillende lagen. De epidermis (opperhuid) is de bovenste, beschermende laag. Daaronder bevindt zich de dermis (lederhuid), met een netwerk van collageenvezels die de huid stevig en glad maken. De collageenproductie neemt af naarmate u ouder wordt en door blootstelling aan de zon raken bestaande collageenvezels beschadigd. Door deze afname van collageen kan de huid minder glad worden en kunnen zich fijne lijntjes en rimpeltjes vormen.
- Tijdens de behandeling gaan duizenden microscopische laserstralen door de epidermis en de dermis. Dit veroorzaakt een natuurlijk proces van celvernieuwing. Oude en beschadigde huidcellen worden vervangen door nieuwe cellen, die meer collageen bevatten. Herhaalde behandelingen stimuleren en versterken het collageennetwerk. Het resultaat: een gladdere huid en minder fijne lijntjes.

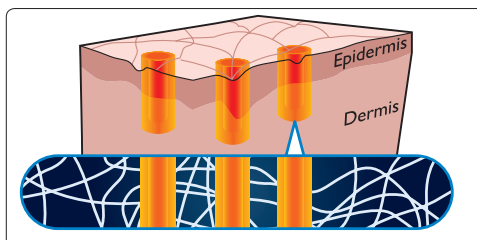

- Tegelijkertijd worden gepigmenteerde huidcellen uit de huid geduwd. Dit geeft uw huid een nog egalere teint.

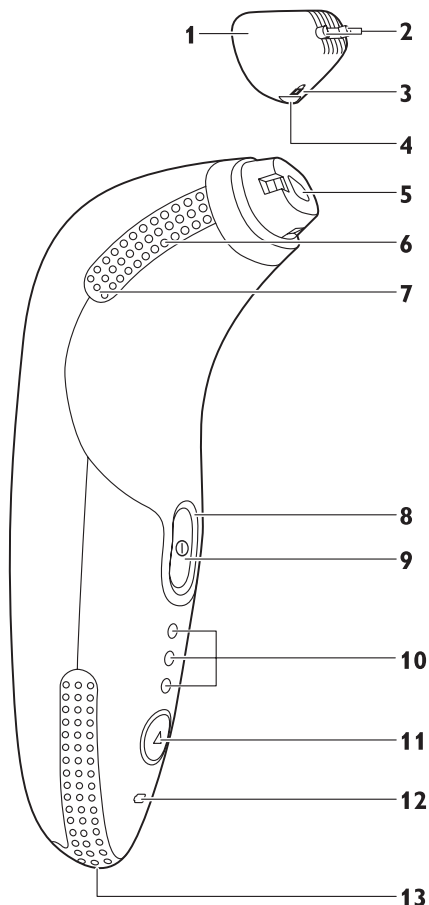

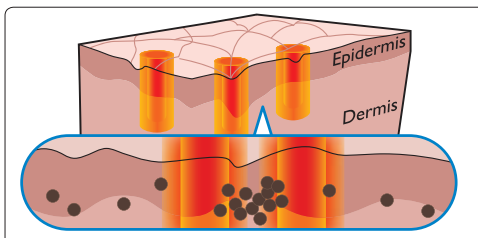

3.2 Resultaten die u wel en niet kunt verwachten

Als u Philips RéAura laser skin rejuvénation volgens de instructies toepast, kunt u aanzienlijke resultaten bereiken in het verminderen van de tekenen van veroudering. Maar het is belangrijk om te begrijpen dat de resultaten voor verschillende tekenen van veroudering en voor individuele gebruikers variëren. Bedenk dat uw huid tijd nodig heeft om te verjongen. Resultaten komen niet onmiddellijk en worden pas na verloop van tijd zichtbaar. Verbeteringen in pigmentatie beginnen meestal pas zichtbaar te worden na 3 tot 4 weken consistent gebruik tweemaal per week. Na 4 of 5 weken begint u verbeteringen in textuur te zien en beginnen de fijne lijntjes gewoonlijk te vervagen. In het welkomstboekje vindt u een paar foto's voor en na de behandeling waarop u kunt zien welke resultaten u kunt verwachten. Hoewel Philips RéAura laser skin rejuvénation u helpt om bepaalde tekenen van veroudering te verminderen, verdwijnen andere tekenen mogelijk niet. Diepe lijnen en rimpels, zoals fronslijnen op het voorhoofd, kunnen bijvoorbeeld verbeteren, maar blijven wel zichtbaar na het gebruik van Philips RéAura.

3.3 Huidconditie vastleggen voordat u begint

Omdat de resultaten van het gebruik van Philips RéAura geleidelijk verschijnen, is het belangrijk dat u uw huidconditie vastlegt voordat u met de behandelingen begint. Daardoor kunt u de resultaten beter zien zodra u het programma van 8 weken hebt voltooid. U kunt de aanvangsconditie van uw huid vastleggen als

onderdeel van uw RéAura-huidconsultatie, die u in de winkel ontvangt of die u op elk moment kunt laten doen op www.philips.nl/myreaura.

3.4 Hoe u de resultaten kunt beoordelen

Resultaten zijn soms moeilijk te zien wanneer veranderingen geleidelijk optreden. Door het vastleggen van de huidconditie voor de eerste behandeling weet u waarmee u begon. Dit helpt u om dezelfde veranderingen te zien die dermatologen zien. Ons Skincare-expertteam heeft vele jaren ervaring met huidverzorgingsadvies. Ze zijn er om u te helpen alle veranderingen in uw huid in de loop van de tijd te zien, veranderingen die u misschien moeilijk kunt zien. Bel hen als u geen veranderingen ziet of als u een bevestiging van uw resultaten wilt.

3.5 Houd vol

Voor de beste resultaten met Philips RéAura hebt u enig doorzettingsvermogen nodig. Laat de huidreacties tijdens of onmiddellijk na de behandeling u niet ontmoedigen. De laser kan enige roodheid van de huid, een warm prikkend en stekend gevoel en misschien enige gezwollenheid veroorzaken. Deze reacties zijn normaal en tonen aan dat de laser werkt. Deze reacties verminderen binnen 12 uur na de behandeling.

Zorg ervoor dat u alle behandelingen in het programma voltooit en dat u bij elke behandeling één dosis per zone toepast. Behandel een zone altijd totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.

⚠️ Opmerking:

Bepaalde medicijnen en aandoeningen kunnen ongunstige reacties veroorzaken wanneer u Philips RéAura laser skin rejuvénation gebruikt. Lees vóór het eerste gebruik 'Contra-indicaties en andere waarschuwingen' in hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsinformatie' om te controleren of het gebruik van Philips RéAura veilig voor u is.

4 Zeven principes om resultaten te bereiken

Voor de beste resultaten met Philips RéAura moet u voldoende laser op uw huid toepassen tijdens uw programma van 8 weken. Denk eraan dat u altijd deze zeven principes volgt:

- 1** Behandel slechts één deel van het lichaam (bijvoorbeeld het gezicht) tijdens de eerste 8 weken.
- 2** Gebruik stand 2 of 3.
- 3** Voer de behandeling tweemaal per week gedurende 8 weken uit zonder behandelingen over te slaan.
- 4** Gebruik één laserdosis per zone per behandeling.
- 5** Gebruik de laser performance gel en het laser aftercare complex.
- 6** Vraag advies aan het Philips Skincare-expertteam.
- 7** Gebruik het MyRéAura-onlinebehandelplan.


4.1 Behandel slechts één deel van het lichaam (bijvoorbeeld het gezicht) tijdens de eerste 8 weken.

Voor uw eigen gemak raden wij aan dat u uw eerste programma van 8 weken beperkt tot het gezicht. Hierdoor kunt u ervaring opdoen in het gebruik van RéAura. Dit zal de duur van de behandelingsessies verlagen voordat u andere gebieden in uw behandelingsessie opneemt.


4.2 Gebruik stand 2 of 3

Het apparaat heeft drie intensiteitsstanden. Hoe hoger de stand, des te dieper dringt de laser in de huid, en des te beter zullen de resultaten zijn. Een hogere stand leidt ook tot meer ongemak (hittegevoel en roodheid). Stand 1 is uitsluitend bedoeld voor oefenen en moet alleen de allereerste keer worden gebruikt. Bij stand 1 bereikt u geen resultaten. Voor resultaten moet u stand 2 (gemiddelde behandelstand) en bij voorkeur stand 3 (hoge behandelstand) gebruiken.


- Stand 1

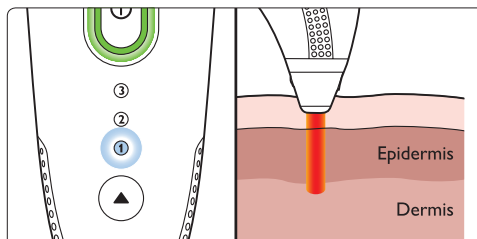

- Stand 2

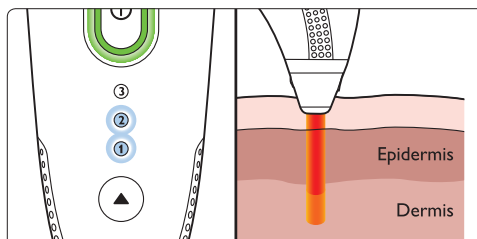

- Stand 3

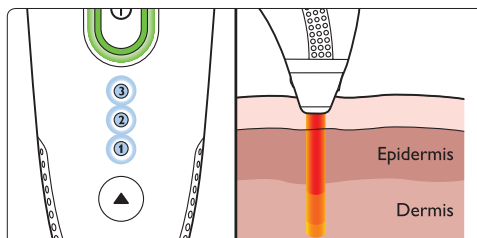


4.3 Voer de behandeling tweemaal per week gedurende 8 weken uit zonder behandelingen over te slaan

Klinische studies tonen aan dat u de beste resultaten krijgt als u Philips RéAura tweemaal per week gebruikt gedurende 8 weken. Houd u aan dit regime en sla geen behandeling over. U kunt Philips RéAura op elk gewenst tijdstip gebruiken, zolang er ten minste 48 uur tussen de behandelingen zit en u de behandeling niet vaker uitvoert dan tweemaal per week. Na het eerste programma van 8 weken kunt u de behandeling naar wens voortzetten om de resultaten te behouden. U kunt ook een pauze inlassen en een nieuwe serie behandelingen beginnen wanneer u wilt.

4.4 Gebruik één laserdosis per zone per behandeling

- Philips RéAura werkt volgens het principe van toediening van precies de juiste hoeveelheid laserenergie (een dosis genoemd) op een bepaalde zone van uw lichaam. Philips heeft specifieke behandelgebieden voor dit apparaat gedefinieerd: gezicht, hals, borst, handen en onderarmen. Elk gebied is in zones verdeeld.

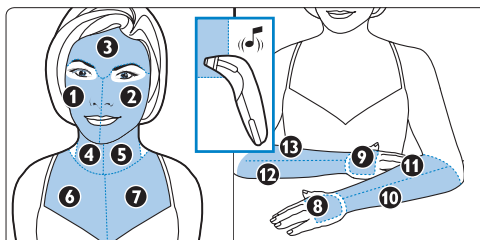

- Om optimaal profijt te hebben van iedere sessie moet elke behandelzone met een volledige laserdosis worden behandeld. Philips RéAura geeft aan dat een volledige dosis is toegepast door een kort 'zone voltooid'-geluid te laten horen. Behandel een zone altijd totdat u dit geluid hoort, voordat u het apparaat naar de volgende zone beweegt. Zie 'Hoe u één laserdosis per behandelzone toedient' in hoofdstuk 'Philips RéAura gebruiken' voor meer informatie over het laserdoseringssysteem.
- Het is belangrijk dat u de hele zone gelijkmatig behandelt en dat u zich niet alleen concentreert op de probleemgebieden, zoals fijne lijntjes rond de ogen en mond, of pigmentvlekken.

4.5 Gebruik de laser performance gel en het laser aftercare complex

4.5.1 Laser performance gel

De gel zorgt voor optimaal huidcontact tussen de behandelkop en uw huid en zorgt ervoor dat het laser skin rejuvénation-apparaat soepel over de huid glijdt. De laser performance gel is speciaal ontwikkeld door de makers van Fraxel®-lasertechnologie voor gebruik met RéAura. Gebruik de gel altijd wanneer u de huid behandelt met het Philips RéAura-apparaat. Zonder de gel wordt de huid mogelijk ongelijk behandeld en kan de behandeling onaangener zijn.

4.5.2 Laser aftercare complex

Het laser aftercare complex zorgt voor de nodige hydratatie van de huid tijdens het celvernieuwingproces. Het bevat kamille voor een kalmerende werking en extracten van sint-janskruid en edelweiss, bekend om hun ontstekingsremmende eigenschappen. Gebruik het laser aftercare complex altijd onmiddellijk na de behandeling van uw huid met het RéAura-apparaat. Breng het laser aftercare complex binnen een uur na de behandeling nogmaals aan en herhaal tussen de laserbehandelingen voor hydratatie naar behoefte.

4.6 Vraag advies aan het Philips Skincare-expertteam

Als u informatie nodig hebt of als u een vraag hebt, kunt u ook contact opnemen met het Philips Skincare-expertteam. Het team bestaat uit schoonheidsadviseurs die jaren ervaring hebben in het adviseren over huidverzorgingsproducten en schoonheidsbehandelingen. Het Skincare-expertteam staat klaar om u persoonlijk advies te geven en ervoor te zorgen dat u optimaal van uw behandelingen profiteert.

U kunt gemakkelijk contact opnemen met het Philips Skincare-expertteam via Freephone, e-mail of chatten via de contactgegevens of koppelingen op MyRéAura.

- Geopend: maandag - vrijdag 8:00-20:00 uur; zaterdag 9:00-18:00 uur.
- Telefoon: 0800-0230076 (gratis)
- Log in op uw persoonlijke onlinebehandelplan op www.philips.nl/myreaura

Als u huidreacties hebt die langer duren dan drie dagen of als u medische vragen hebt, neem dan contact op met uw arts. Licht het Philips Skincare-expertteam in over het resultaat.

4.7 Gebruik het MyRéAura-onlinebehandelplan

Om u te helpen uw behandeldoelen te realiseren zoals vastgesteld tijdens uw huidconsultatie, hebt u toegang tot uw persoonlijke onlinebehandelplan op www.philips.nl/myreaura. Hier kunt u een expert worden in het gebruik van het apparaat, uw behandelingen plannen, de ervaringen van andere gebruikers bekijken en uw eigen ervaringen delen. Als uw behandeldoelen niet zijn vastgesteld bij de aanschaf van uw Philips RéAura laser skin rejuvenation, maakt u zich dan geen zorgen. U kunt snel en gemakkelijk uw behandeldoelen zelf online vaststellen of met hulp van het Philips Skincare-expertteam.


5 Philips RéAura gebruiken

5.1 Een RéAura-behandeling van het hele gezicht in detail

5.1.1 Voorbereiden

- 1 Lees de gebruiksaanwijzing grondig voordat u Philips RéAura gaat gebruiken, bekijk de bijgevoegde instructie-DVD en stel uw doelen vast op www.philips.nl/myreaura. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met het Philips Skincare-expertteam.

- 2 Laad uw apparaat op totdat het batterijlampje niet meer knippert en continu groen brandt.

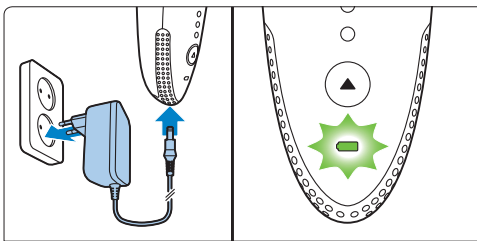

- Wanneer u de batterij voor de eerste keer oplaadt of lange tijd niet hebt gebruikt, laat u deze volledig opladen. Dit duurt 3 uur. Normaal opladen duurt 1 uur.

Opmerking:

U kunt het apparaat niet gebruiken tijdens het opladen.

- 3 Verwijder uw make-up met een milde, niet-agressieve huidreiniger.



- 4 Breng op elke zone een beetje laser performance gel aan ter grootte van een erwt, voor optimaal huidcontact en soepel glijden.



- Voor het behandelen van uw gezicht hebt u 3 van die beetje gel nodig, een voor elk van de 3 zones.

Opmerking:


Zorg ervoor dat u niet te veel gel op uw huid aanbrengt, omdat dit de behandelkop kan verstopen. Wanneer u gel in uw ogen krijgt, voelt u een brandende pijn. Spoel uw ogen met overvloedig warm water. De pijn verdwijnt snel na het spoelen.

Let op:


Gebruik het apparaat niet zonder de gel. Als u zichzelf zonder de gel behandelt, wordt de huid niet gelijkmatig behandeld en zijn de resultaten ongelijkmatig.

5.1.2 Het apparaat instellen

- 1 Klik de behandelkop op het apparaat.

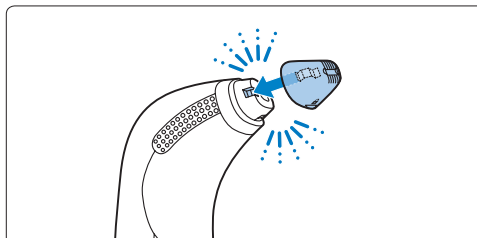

- 2** Druk op de aan/uitknop om het apparaat in te schakelen.

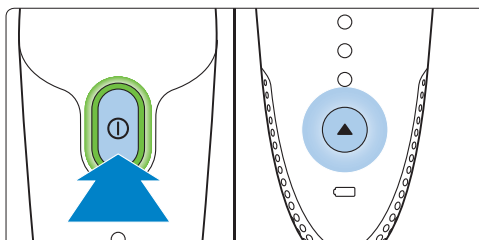

- De statusindicator brandt continu groen.
- De intensiteitsselectieknop brandt wit.

Opmerking:

Het apparaat werkt niet zonder de behandelkop. Als de behandelkop niet bevestigd is, branden de statusindicatorlampjes continu oranje.

- 3** Druk op de intensiteitsselectieknop om de intensiteitsstand te kiezen. De intensiteitslampjes gaan een voor een branden.

- Probeer intensiteit 2 en 3 om te bepalen wat het aangenaamst aanvoelt op een bepaalde zone. Als stand 2 te veel ongemak geeft, gaat u terug naar stand 1. Probeer de intensiteit zo snel mogelijk weer te verhogen, want stand 1 is alleen bedoeld voor oefenen en is niet doeltreffend. Voor de beste resultaten moet u de hoogste intensiteitsstand gebruiken. Als stand 1 pijnlijk blijft, neem dan contact op met het Philips Skincare-expertteam.




Opmerking:

Het rode licht is niet de laser; maar alleen een lampje dat aangeeft dat u goed huidcontact hebt.


- Op gebieden waarop volledig huidcontact moeilijker te bereiken is, zoals het benige deel van het voorhoofd, kunt u andere manieren proberen om het apparaat vast te houden, en verticale en horizontale bewegingen proberen om de beste manier te vinden voor goed huidcontact en de juiste snelheid.

- 2** Wanneer u het apparaat over de huid beweegt, behandelt de laser de huid. De behandellampjes worden groen, u hoort de laser zoemen en u voelt de laser op uw huid.

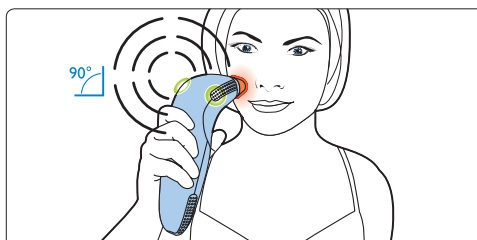


5.1.3 Behandelen

- 1** Plaats de behandelkop op uw huid onder een hoek van 90 graden. Zorg voor volledig huidcontact. De behandelkop gaat rood branden wanneer de contactpennen goed contact met de huid hebben.

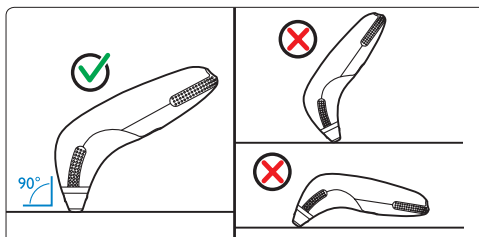


- Beweeg het apparaat niet zijwaarts. Maak lange horizontale of verticale bewegingen met het apparaat over uw huid.
- Zorg er altijd voor dat de volgende beweging zo dicht mogelijk bij de vorige plaatsvindt.

- Zodra u over de zone in een bepaalde richting hebt bewogen, begint u opnieuw, maar in een andere richting. Als u in horizontale richting hebt bewogen, gaat u nu over de zone in verticale richting. Blijf verticale en horizontale bewegingen maken totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.

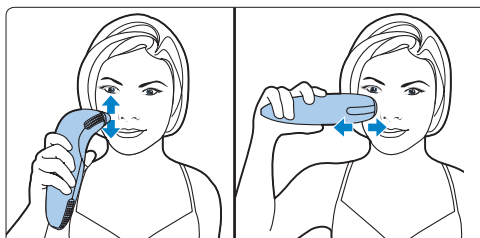

- 3** Behandel een wangzone met één volledige dosis totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.

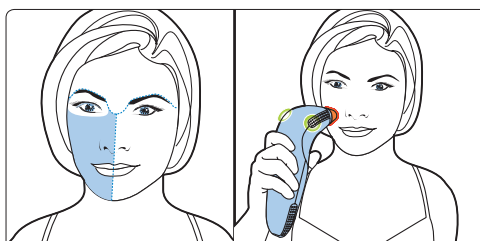

- Ga voor een spiegel staan, zodat u de lampjes van het apparaat kunt zien.
- Controleer voortdurend of de groene behandelampjes en het rode lampje van de behandelkop te zien zijn en of u een zoemend geluid hoort, zodat u weet dat het apparaat een dosis toedient.

Opmerking:

Blijf altijd behandelen totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort. Als u dat niet doet, is de behandeling niet doeltreffend.


Opmerking:

Verdeel de laserdosis gelijkmatig over de volledige zone. Concentreer u niet alleen op de probleemgebieden.


- 4** Behandel de andere wangzone met één dosis totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.



- 5** Behandel het voorhoofd door één dosis toe te passen totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.

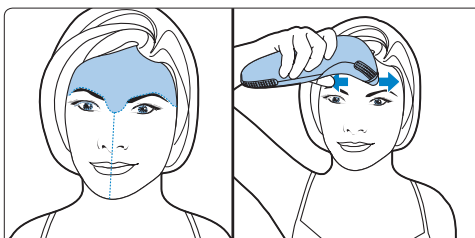

- 6** Druk op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen.

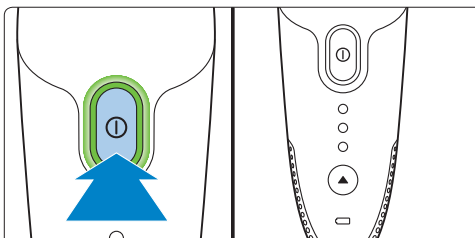

5.1.4 Uw huid verzorgen

- 1 Verwijder de gel van uw gezicht met een wattenschijfje of een reinigingsdoekje. Was de resten van de gel af met koud water of gebruik milde reinigingsgel, -schuim of -lotion. Dep de huid droog.



Opmerking:

Gebruik geen agressieve, op alcohol gebaseerde reinigingsproducten of peelingcrèmes of -schuim. Zorg ervoor dat u geen gel in uw ogen wrijft.


- 2 Breng het laser aftercare complex aan om uw huid tijdens het proces van huidvernieuwing te hydrateren. U kunt het laser aftercare complex opnieuw aanbrengen binnen een uur na de behandeling en op de dagen tussen de laserbehandelingen in.




- Als u meer laser performance gel en laser aftercare complex wilt kopen, raadpleeg dan de winkelzoeker op www.philips.nl/reaura of vraag het Philips Skincare-expertteam.

5.1.5 Het apparaat reinigen en opbergen


- 1 Maak de behandelkop los en spoel deze af onder de lopende kraan. Reinig de kop met de borstel en droog hem af. Reinig het apparaat met het schoonmaakdoekje. Reinig het laservenster met een nat wattenstaafje en veeg dit droog met de doek.

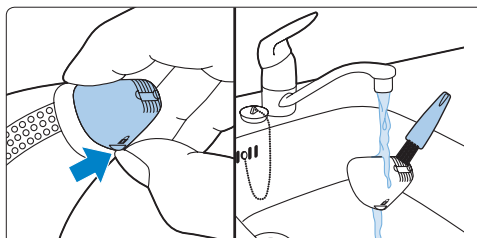

- 2 Laad uw apparaat op totdat het batterijlampje niet meer knippert en continu groen brandt.

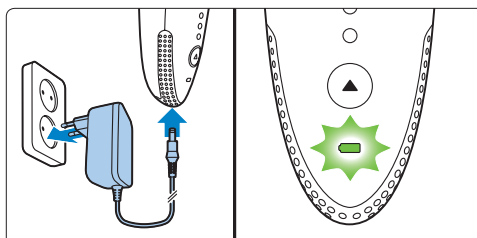

- 3 Berg het apparaat en de behandelkop op in het etui en houd het etui buiten bereik van kinderen.

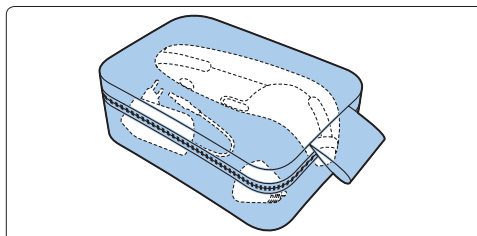

Opmerking:

Zorg ervoor dat het apparaat en de behandelkop schoon en droog zijn wanneer u deze opbergt.

- 4 Maak een dagboekantekening in uw onlinebehandelplan op www.philips.nl/myreaura.




5.2 Hoe u één laserdosis per behandelzone toedient

5.2.1 Laserdoseringssysteem

Het Philips RéAura skin rejuvenation-apparaat werkt niet op basis van behandeltime. Het werkingsprincipe is dat precies de juiste hoeveelheid laserenergie of dosis aan een vooraf bepaald behandelgebied wordt toegediend. Elk behandelgebied (gezicht, hals, borst, handen of onderarmen) is in zones verdeeld. Elke zone wordt behandeld met een vooraf ingestelde hoeveelheid laserenergie of dosis. Als u één dosis op elke zone toepast, ontvangt uw huid precies de juiste hoeveelheid laserenergie die nodig is om resultaten te bereiken. Het sneller bewegen van het apparaat betekent niet dat u eerder klaar bent. U moet nauwkeurig zijn en het apparaat op de correcte manier bewegen.

5.2.2 Behandelzones

Het apparaat kan op het gezicht, de hals, borst, handen en onderarmen worden gebruikt. Het gezicht is onderverdeeld in linkerwang, rechterwang en voorhoofd. De wangzones omvatten de kin, het gebied tussen lippen en neus en het gebied tussen ogen en oren. Het voorhoofd omvat het gebied tussen de ogen.

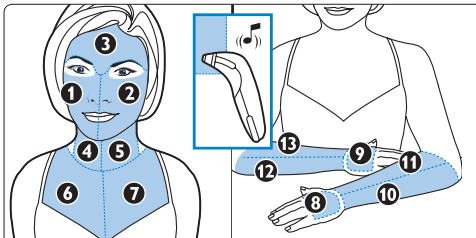

5.2.3 Behandel een zone tot u het 'zone voltooid'-geluid hoort

Wanneer de juiste dosis is toegepast, maakt het laserdoseringssysteem een kort geluid om aan te geven dat u het einde van de dosis hebt bereikt. Dan gaat het apparaat gedurende ongeveer 4 seconden in stand-bymodus om u gelegenheid te geven het naar de volgende zone te bewegen.

Het duurt maximaal 10 minuten om één zone te behandelen (dus 30 minuten voor een volledige gezichtsbehandeling). Behandeltijden worden waarschijnlijk korter na een paar behandelingen, tot ongeveer 6 minuten per zone. Deze tijden zijn slechts indicaties. Baseer de duur van de behandeling van een zone hier niet op, maar ga door met behandelen totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort.

! Let op:

Als u een andere intensiteitsstand kiest, als u de behandelkop losmaakt of als u het apparaat uitschakelt voordat de volledige dosis is toegediend, wordt het laserdoseringssysteem gereset en is de eerstvolgende toegepaste dosis een volledige dosis.

5.2.4 Behandeling van het gezicht

- Breng laser performance gel aan tot aan de rand van het voorhoofd en de jukbeenderen rond uw ogen, zodat u de grens van het behandelgebied kunt zien. Zorg ervoor dat u geen gel in uw ogen krijgt.
- Gebruik een volledige dosis voor elke zone. Bent u rechts, dan begint u om het gemakkelijk voor uzelf te maken met uw rechterwang. Dien vervolgens een dosis toe op de andere wang. Dien ten slotte een dosis toe op uw voorhoofd.

⚠ Opmerking:

Het kan moeilijk zijn het apparaat over uw voorhoofd te bewegen en tegelijk goed huidcontact te behouden. U kunt ook het apparaat stilhouden en uw hoofd bewegen in plaats van de noodzakelijke bewegingen over uw voorhoofd te maken.

! Let op:

Gebruik het apparaat niet op de lippen, de oogleden en op het zachte gebied onder het oog. Behandel alleen het gebied rond het oog waar u bot onder de huid kunt voelen.

5.2.5 Behandeling van de andere lichaamsdelen

- **Hals en borst:** trek de huid strak met uw vrije hand voor betere resultaten.
- **Handen:** maak een vuist om te zorgen voor goed huidcontact. U kunt ook uw vingers behandelen. Goed huidcontact is daar echter moeilijker vanwege het kleine oppervlak.
- **Armen:** steun uw onderarm op een tafel. Behandel het gebied tussen elleboog en pols. Als u langer bent, hebt u langere onderarmen. Omdat het te behandelen oppervlak groter is, hebt u mogelijk meer dan twee doses nodig voor het hele behandelgebied.


Opmerking:

Behandel de binnenkant van uw onderarm niet, aangezien de huid in dit gebied heel gevoelig is. Behandel alleen de buitenkant.

5.3 Overzicht van lampjes en geluidssignalen

5.3.1 Statusindicator


- Continu oranje: behandelkop is niet (goed) aangebracht.
- Continu groen: behandelkop is goed aangebracht.

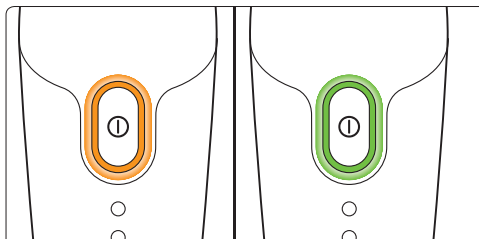

- Continu rood: de temperatuur van het apparaat is te hoog of te laag. Als het apparaat oververhit raakt, blijft de ventilator binnenin functioneren om het apparaat te helpen koelen. Wanneer de statusindicator weer groen brandt, is het apparaat afgekoeld en kunt u het weer gebruiken. Gebruik het apparaat alleen in een droge ruimte bij een temperatuur tussen +10°C en +40°C.
- Knipperend rood en foutgeluid: het apparaat is in foutmodus en schakelt zichzelf automatisch uit. Schakel het apparaat opnieuw in door op de


aan/uitknop te drukken. Als de statusindicator weer groen brandt, kunt u doorgaan met uw behandeling. Als de statusindicator rood blijft knipperen, belt u het Philips Skincare-expertteam op 0800-0230076 (gratis).

- Knipperend oranje gedurende 30 seconden: de overbehandelingsbeveiliging is geactiveerd. Het apparaat wordt 24 uur vergrendeld. U overbehandelt wanneer u meer dan het aanbevolen aantal doses binnen 24 uur op uw huid toepast.

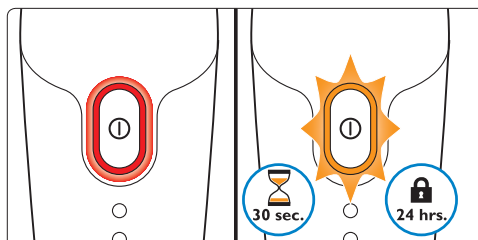


5.3.2 Batterijlampje

- Knipperend groen: batterij laadt op.
- Continu groen: batterij is helemaal opgeladen.

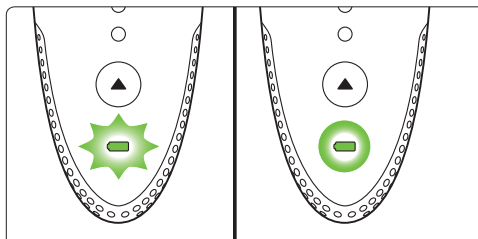


- Batterijlampje uit tijdens gebruik: batterij bevat meer energie dan nodig is voor twee doses.
- Continu rood: batterij bevat minder energie dan nodig voor twee doses.

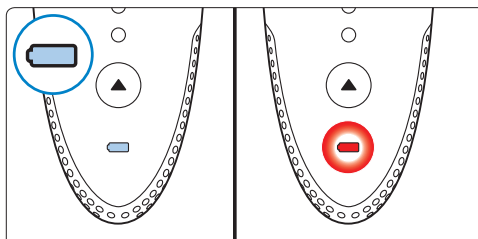


5.3.3 Rood huidcontactlampje

- Als de behandelkop niet rood brandt, is deze niet volledig in contact met de huid. Plaats de behandelkop op de huid zodat de contactpennen volledig in contact met de huid zijn. U kunt iets meer gel gebruiken om het huidcontact te verbeteren.

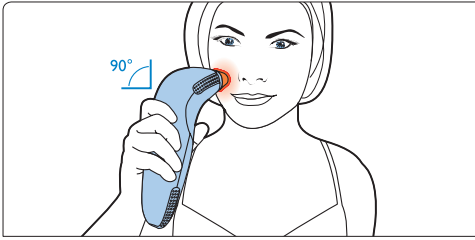

5.3.4 Behandelampjes en zoemend geluid

- Continu groen licht en zoemend geluid: laserenergie wordt onafgebroken toegepast. Dit betekent dat u goed huidcontact hebt, dat het apparaat de juiste hoek heeft en dat u het met de juiste snelheid beweegt.

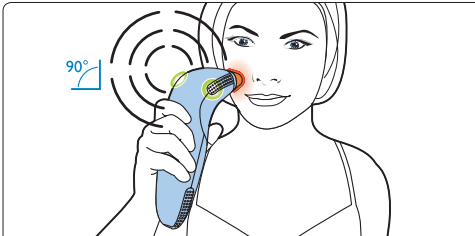

- Knipperend groen licht en zoemend geluid: de laser is onderbroken. Zorg ervoor dat de behandelkop volledig huidcontact heeft, de juiste hoek heeft en met de juiste snelheid wordt bewogen.

5.3.5 'Zone voltooid'-geluid

- Het apparaat produceert een geluid wanneer de juiste laserdosis op een zone is toegepast. Na het geluid gaat het apparaat gedurende 4 seconden in stand-by en u kunt het naar een andere zone bewegen.

Opmerking:

Ga altijd door met de behandeling totdat u het 'zone voltooid'-geluid hoort. Als u dit niet doet, leidt dit tot ongelijke behandelingen en suboptimale resultaten.

6 Hoe uw huid op de behandelingen reageert

6.1 Zonbescherming

Blootstelling aan de zon kan ongewenste pigmentatie veroorzaken, vooral tussen de behandelingen in, wanneer uw huid gevoeliger is voor UV-licht. U kunt uw huid als volgt beschermen en het celvernieuingsproces bevorderen:

- Vermijd significante blootstelling aan de zon (bijv. zonnebrand of bruinen) en kunstmatig bruinen gedurende ten minste 2 weken voor, tijdens en 2 weken na de behandeling. Gebruik buiten deze periode een zonbeschermingsfactor van 30 of hoger op de behandelde gebieden.
- Gebruik ook factor 30 wanneer u gaat zonnebaden of kunstmatig bruinen gedurende ten minste 3 maanden na uw laatste behandeling.

Opmerking:

Om ervoor te zorgen dat de zonbescherming of het huidverzorgingsproduct goed wordt geabsorbeerd door de huid moet u dit ten minste 20 minuten voor het blootstellen van uw huid aan UV-licht aanbrengen. Breng de zonbescherming of het huidverzorgingsproduct iedere twee uur opnieuw aan, vooral buiten, aangezien het in de loop van de dag van de huid kan worden afgeveegd.

Opmerking:

Bedenk dat goede zonbescherming helpt om uw huidverjongingsresultaten te behouden, ook na de behandelperiode.

6.2 Huidreacties en bijwerkingen

6.2.1 Waargenomen sensaties tijdens de behandeling

U kunt een prikkend of stekend gevoel ervaren wanneer de laser uw huid behandelt. Uw huid kan ook warm worden en u kunt ook enige pijn ervaren. Het ongemak neemt af naarmate uw huid aan de behandeling went. Het ongemak dat u ervaart, kan afhangen van het volgende:

- Gebruikte intensiteit
Er is minder ongemak bij lagere intensiteit, maar de doeltreffendheid van de behandeling is ook lager. Stand 1 is alleen bedoeld voor oefenen. U bereikt alleen goede resultaten met stand 2 en 3.
- Behandelgebied
De gevoeligheid van de behandelgebieden varieert. Het gezicht is bijvoorbeeld gevoeliger dan de handen. Zelfs zones binnen een behandelgebied kunnen in gevoeligheid verschillen. Het voorhoofd is bijvoorbeeld minder gevoelig dan het bovenlipgebied.
- Gewenningsniveau
Tijdens de eerste behandelingen zijn normale huidreacties en -sensaties intenser. Dit neemt af naarmate uw huid aan de laser went.
- Duur van de behandeling
Hoe meer bewegingen u met het apparaat over hetzelfde gebied maakt, des te sterker zal de huid in dit gebied reageren.
- Persoonlijke gevoeligheid
Iedereen heeft een andere pijndrempel. Het niveau van ongemak dat een persoon ervaart, kan ook verschillen afhankelijk van factoren als hormoonniveaus, spanning en ziekte.

Opmerking:

Milde tot matige pijn is normaal. Als u ernstig ongemak of pijn ervaart, probeer het apparaat dan te gebruiken met een lagere intensiteit. Gun uzelf enige tijd om vertrouwd te raken met het apparaat en het behandelgevoel. Als stand 1 ernstig ongemak blijft veroorzaken na een aantal behandelingen, gebruik het apparaat dan niet meer en bel het Philips Skincare-expertteam op 0800-0230076 (gratis).

6.2.2 Huidreacties onmiddellijk na behandeling

Wat u tijdens behandeling ervaart (warm, prikkend en stekend gevoel), kan een paar uur na de behandeling doorgaan en kan zelfs intenser worden voordat het afneemt. De meest voorkomende reacties direct na de behandeling zijn de volgende:

- Uw huid kan rood en warm zijn tijdens en onmiddellijk na de behandeling. Dit is een natuurlijke reactie op de laser. Deze reactie kan sterker worden als u het apparaat meermalen over hetzelfde gebied beweegt.
- Een andere veel voorkomende reactie is geringe zwelling van de huid, gewoonlijk in de vorm van geringe gezwollenheid boven de jukbeenderen.
- Bovendien kan uw huid gevoeliger zijn voor aanraking en temperatuurschommelingen.

Deze huidreacties zijn normaal en betekenen dat het cellulaire vernieuwingsproces begonnen is.

De ernst en de duur van de huidreacties hangen af van uw huidtype, uw persoonlijke gevoeligheid en omgevingscondities.

Huidreacties verdwijnen gewoonlijk binnen 12 uur. Niettemin is het niet ongevoel dat sommige ongemakken langer blijven bestaan dan 12 uur als uw huid gevoeliger is. Controleer de reacties van uw huid en leg uw ervaringen vast als referentie voor de toekomst. Als u ongewone reacties ervaart of vragen hebt, aarzel dan niet contact op te nemen met het Philips Skincare-expertteam.

Waarschuwing:

Begin geen nieuwe behandeling als uw huid nog steeds rood of gezwollen is. Dit betekent dat uw huid nog niet van de vorige behandeling is hersteld. Geef de huid meer tijd om te herstellen om bijwerkingen te voorkomen.

6.2.3 Huidreacties in de dagen of weken na de behandeling

Als resultaat van de celvernieuwing in uw huid kunt u het volgende ervaren:

- **Droge en schilferige huid**
U kunt een ruwere en drogere huid hebben die schilfert gedurende enkele dagen of weken na de behandeling. De schilfers zijn dode huidcellen. Dit is normaal en neemt in de loop van de tijd af. Om de droogheid te verminderen brengt u het laser aftercare complex royaal aan wanneer dat nodig is.
- **Gevoelige huid**
Uw huid kan gevoeliger zijn voor aanraking of temperatuurschommelingen gedurende enkele dagen na de behandeling. Dit is ook een normaal teken van celvernieuwing. Ga door met het gebruik van het laser aftercare complex, aangezien dit kalmerende ingrediënten bevat die speciaal zijn bedoeld om deze effecten te neutraliseren.
- **Kleine donkere plekjes**
Op uw huid kunnen tot vier weken na de behandeling kleine donkere plekjes verschijnen. Deze plekken zijn gepigmenteerde huidcellen die uit de huid worden geduwd. Ze zijn gewoonlijk nauwelijks zichtbaar voor het blote oog. Naarmate de natuurlijke biologische processen van uw lichaam uw huid vernieuwen, zullen deze plekjes verdwijnen.

6.2.4 Mogelijke bijwerkingen

Klinische studies hebben aangetoond dat Philips RéAura laser skin rejuvenation heel weinig bijwerkingen veroorzaakt. U kunt de kans op bijwerkingen aanzienlijk verkleinen door de instructies in deze gebruiksaanwijzing te volgen en een goede zonbescherming te gebruiken (zie 'Zonbescherming').

Hoewel het risico op bijwerkingen klein is, zijn de volgende bijwerkingen mogelijk: ontsteking, pigmentatieveranderingen (hyperpigmentatie), koortsblaasjes, reactivering van het Herpes simplex-virus, verergering van acne of eczeem, en allergische reacties op de laser performance gel of het laser aftercare complex. Als deze bijwerkingen optreden, stop dan met de behandeling en neem contact op met uw arts.

6.2.5 Wanneer u contact moet opnemen met uw arts

Neem contact op met uw arts en licht het Philips Skincare-expertteam in de volgende gevallen in:

- Als u twijfels over de veiligheid van het apparaat hebt op basis van informatie in de gebruiksaanwijzing.
- Als u een huid- of andere medische aandoening hebt of medicijnen gebruikt waardoor u twijfelt of het veilig voor u is om het apparaat te gebruiken.
- Als u extreem ongemak tijdens of onmiddellijk na behandeling ervaart.
- Als u andere huidreacties ervaart dan hierboven beschreven.
- Als uw huidreactie langer duurt dan hierboven beschreven.
- Als u bloedingen of niet-genezen verwondingen hebt, of huidbeschadigingen die onlangs van afmeting, textuur en/of kleur zijn veranderd.
- Als u huidirritaties hebt als gevolg van de laser performance gel of het laser aftercare complex.

Opmerking:

U kunt bellen met het Philips Skincare-expertteam op 0800-0230076 (gratis), maandag tot vrijdag van 8:00-20:00 uur en zaterdag van 9:00-18:00 uur. Als u medische problemen of vragen over huidreacties hebt, neem dan contact op met uw arts en licht u het Philips Skincare-expertteam zo snel mogelijk in over het resultaat.


7 Vervangen

Als u meer laser performance gel en laser aftercare complex wilt kopen, raadpleeg dan de winkelzoeker op www.philips.nl/reaura of informeer bij het Philips Skincare-expertteam. U kunt zo nodig ook online nieuwe behandelkoppen of een nieuwe adapter, een nieuw etui, schoonmaakdoekje of schoonmaakborsteltje bestellen.

8 Milieu

Philips hecht eraan om de duurzaamste producten op de markt te brengen. Philips RéAura skin rejuvenation is dan ook ontworpen om u het beste te bieden ten aanzien van alle belangrijke duurzaamheidscriteria, zoals een bijzonder laag energieverbruik of primair gebruik van ecologisch vriendelijke materialen. Aangezien een juiste verwijdering van het apparaat aan het einde van zijn levensduur een integraal deel van ons duurzaamheidsbeleid is, vragen wij u om het volgende in acht te nemen:

- Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.
- Dit apparaat bevat een ingebouwde accu die niet kan worden verwijderd. Deze accu bevat stoffen die de omgeving kunnen vervuilen. Om correcte verwijdering zeker te stellen brengt u het apparaat naar een door de overheid aangewezen inzamelpunt of naar een Philips-servicecentrum. Het personeel van het inzamelpunt of het Philips-servicecentrum zorgt ervoor dat de accu wordt verwijderd en op milieuvriendelijke wijze wordt verwerkt.

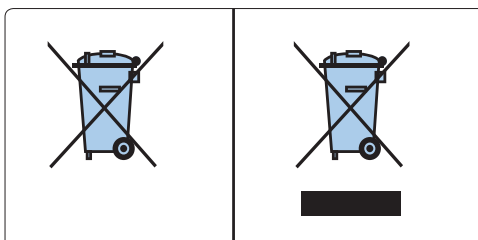

9 Garantie en service

Als u service of informatie nodig hebt of als u een technisch probleem met uw apparaat hebt, ga dan naar de RéAura-website op www.philips.nl/reaura of neem contact op met het Philips Skincare-expertteam.

10 Technische specificaties

10.0.1 Apparaat

SC5000

Nominale spanning	100V-240V
Nominale frequentie	50Hz-60Hz
Nominaal ingangsvermogen	16 W
Beschermingsklasse	IP 30 (EN60529)
Batterij	Lithium-ion, 3,7 V, 1300 mAh

10.0.2 Laser

SC5000

Laserklasse	1M
Lasertype	Diode
Uitvoergolfengte	1435 nm
Maximaal uitvoervermogen	1,5W
Duur pulsuitvoer	<9 ms

Waarschuwing:



Klasse 1M laser. Het apparaat geeft onzichtbare laserstraling af. Kijk niet rechtstreeks naar het behandelproces met optisch vergrotende instrumenten.

11 Veelgestelde vragen

Vraag	Antwoord
Welke resultaten kan ik verwachten?	Philips RéAura laser skin rejuvenation helpt u met het verbeteren van specifieke tekenen van veroudering. Het verwijdert alle tekenen van veroudering niet volledig en de resultaten verschillen van persoon tot persoon.
Zijn de effectiviteit en veiligheid van Philips RéAura laser skin rejuvenation klinisch bewezen?	Ja, de veiligheid en effectiviteit van Philips RéAura zijn klinisch bewezen. De resultaten zijn door een team onafhankelijke dermatologen bevestigd.
Zijn er foto's van mensen voor en na het gebruiken van Philips RéAura laser skin rejuvenation?	Ja, u kunt deze foto's vinden op www.philips.nl/myreaura . Bedenk wel dat de resultaten van persoon tot persoon verschillen.
Welke huidreacties kan ik verwachten tijdens en na de behandeling?	Tijdens behandeling kunt u de laser voelen prikken op uw huid, uw huid kan warm aanvoelen en u kunt enige pijn ervaren. De hoeveelheid ongemak hangt van verschillende factoren af. Na behandeling kan uw huid rood en enigszins gezwollen zijn. Voor meer details raadpleegt u 'Huidreacties en bijwerkingen' in hoofdstuk 'Hoe uw huid op de behandelingen reageert'. Neem contact op met het Philips Skincare-expertteam als u vragen of problemen hebt.
Kan ik het apparaat veilig gebruiken?	Als u medicijnen gebruikt of gezondheidsproblemen hebt, moet u 'Contra-indicaties en andere waarschuwingen' in hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsinformatie' lezen voordat u het apparaat gebruikt. Wij raden iedereen aan dit hoofdstuk te lezen alvorens dit apparaat te gebruiken.
Kan de laser mijn huid beschadigen?	Nee. Het laserdoseringssysteem zorgt ervoor dat slechts een veilige hoeveelheid laserenergie op uw huid wordt toegepast. Volg de instructies in deze gebruiksaanwijzing en u kunt het laser skin rejuvenation-apparaat veilig gebruiken.

Vraag	Antwoord
Kan de laser mijn gezichtsvermogen beschadigen?	Het laser skin rejuvenation-apparaat heeft een geïntegreerd veiligheidssysteem waardoor de laserstraal niet in uw ogen kan schijnen wanneer het apparaat goed en volgens de instructies wordt gebruikt. Voor details over de veiligheidsvoorzieningen raadpleegt u 'Veiligheidsvoorzieningen' in hoofdstuk 'Belangrijke veiligheidsinformatie'. Gebruik het apparaat niet op de oogleden en op het zachte gebied onder het oog. Behandel alleen het gebied rond het oog waar u bot onder de huid kunt voelen.
Kan dit apparaat huidkanker veroorzaken?	Het apparaat is een laserapparaat voor huidverzorging voor thuisgebruik. Het is ontwikkeld met Fraxel®, de toonaangevende laserspecialisten voor laserhuidverzorging. Fraxel®-lasertechnologie staat bekend als de gouden standaard bij laser skin rejuvenation en wordt al bijna 10 jaar gebruikt door professionele dermatologen in de VS. Het is een veilige, niet-invasieve methode waarmee al meer dan een half miljoen behandelingen zijn verricht. Het apparaat gebruikt een lagere lichtintensiteit dan bij professionele schoonheidssalonbehandelingen. Door het regelmatig te gebruiken kunt u zichtbare resultaten bereiken. Klinische studies hebben aangetoond dat het product en de behandeling veilig zijn. De resultaatgegevens van Fraxel® wijzen niet op enige langetermijnbijwerking. Er zijn geen aanwijzingen dat het apparaat bijdraagt aan, of een oorzaak is voor het ontstaan van huidkanker.
Ik heb onlangs een collageen- of Botox®-injectie gehad. Kan ik Philips RéAura laser skin rejuvenation gebruiken?	Nee, wij adviseren u Philips RéAura laser skin rejuvenation niet te gebruiken als u in de afgelopen 2 weken collageen- of Botox®-injecties hebt gehad.
Kan ik Philips RéAura laser skin rejuvenation gebruiken als ik onlangs een professionele peeling of resurfacing heb laten doen?	Nee, gebruik de Philips RéAura niet als u onlangs een professionele mechanische of chemische peeling of resurfacing hebt laten doen. Geef uw huid voldoende tijd om van deze behandelingen te herstellen voordat u Philips RéAura gaat gebruiken.
Kan ik het apparaat gebruiken als ik griep heb of verkouden ben?	Een verkoudheid of griep kan de behandeling pijnlijker maken. We raden u daarom aan te wachten totdat u bent hersteld voordat u de behandeling hervat. U kunt het apparaat veilig gebruiken wanneer u ziek bent.

Vraag	Antwoord
Kan ik het apparaat veilig op een tatoeage gebruiken?	Wij adviseren u om tatoeages niet te behandelen. Wanneer deze met het apparaat worden behandeld, kunnen ze enigszins vervagen. Gebruik het apparaat niet met de bedoeling om tatoeages te doen vervagen of verdwijnen, aangezien het apparaat niet doeltreffend is voor dat doel.
Wat gebeurt er als ik het apparaat over mijn wenkbrauwen of haargrens beweeg?	Er gebeurt niets. De laser heeft geen effect op uw haar of op haargroei.
Is het apparaat geschikt voor mannen?	Ja, mannen kunnen ook Philips RéAura laser skin rejuvenation gebruiken. We raden aan het gezicht en de hals voor behandeling te scheren.
Waar kan ik ondersteuning krijgen als ik vragen heb?	U kunt advies en antwoorden krijgen van het Philips Skincare-expertteam. U kunt ze bereiken per telefoon op 0800-0230076 (gratis) of per e-mail of chat via www.philips.nl/myreaura . De openingstijden zijn maandag tot vrijdag van 8:00-20:00 uur en zaterdag van 9:00-18:00 uur. Voor medische aangelegenheden en vragen moet u contact opnemen met uw arts.
Vereist het apparaat onderhoud en wat is de garantie?	Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd (zie hoofdstuk 'Philips RéAura gebruiken'). Het wordt geleverd met een garantie van twee jaar; mits u het apparaat gebruikt volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing.
Kan ik het apparaat gebruiken zonder de laser performance gel te gebruiken?	Nee, u moet de laser performance gel gebruiken die speciaal voor de lasertechnologie in dit apparaat is ontwikkeld. De gel zorgt ervoor dat uw huid gelijkmatig wordt behandeld en dat u optimale resultaten bereikt.
Waar kan ik meer laser performance gel of laser aftercare complex krijgen?	Raadpleeg de winkelzoeker op www.philips.nl/reaura of informeer bij het Philips Skincare-expertteam.

Vraag	Antwoord
Kan ik een andere gel of crème gebruiken in plaats van de laser performance gel?	Nee, andere gels of crèmes kunnen tot meer pijn, ongewenste bijwerkingen en huidirritatie leiden. De laser performance gel is speciaal ontwikkeld voor de lasertechnologie die in dit apparaat wordt gebruikt. De gel zorgt ervoor dat uw huid gelijkmatig wordt behandeld en dat u optimale resultaten bereikt. Er wordt geen garantie gegeven als u andere crèmes of gels gebruikt.
Kan ik het apparaat gebruiken om mijn dagcrème dieper in mijn huid door te laten dringen?	Nee, het apparaat is hiervoor niet bedoeld. Gebruik alleen de laser performance gel met dit apparaat. Het laser aftercare complex kan na de behandeling worden gebruikt om de huid te kalmeren en vocht in te brengen.
Hoe dikwijls moet ik het apparaat gebruiken na het programma van 8 weken?	U kunt uw huid zo vaak blijven behandelen als nodig is om de resultaten te handhaven, zolang u maar niet vaker behandelt dan tweemaal per week. Zorg ervoor dat er ten minste 48 uur tussen de behandelingen zit. Gebruik niet meer dan één dosis per zone per behandeling.

12 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Philips Skincare-expertteam via 0800-0230076 (gratis).

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	De accu is leeg.	Laad het apparaat op.
	De behandelkop is niet goed bevestigd.	De statusindicator brandt continu oranje om aan te geven dat de behandelkop niet goed is bevestigd. Volg de instructies in 'Een RéAura-behandeling van het hele gezicht in detail' in hoofdstuk 'Philips RéAura gebruiken' om de behandelkop goed te bevestigen.
	De behandelkop zit verstopt met laser performance gel.	U hebt te veel laser performance gel op de huid aangebracht. U moet niet meer dan een hoeveelheid ter grootte van een erwt op elke zone gebruiken. Als de behandelkop verstopt raakt tijdens het gebruik, maakt u de kop los van het apparaat om deze te reinigen. Bedenk dat door het verwijderen van de behandelkop het apparaat wordt gereset. De volgende laserdosis die wordt toegediend, is een volledige dosis. Gebruik maximaal één dosis per zone om overbehandeling te voorkomen.
		U hebt de behandelkop niet goed gereinigd. Verwijder de behandelkop en reinig deze goed volgens de instructies in hoofdstuk 'Philips RéAura gebruiken'.
	U oefent te veel druk uit.	Oefen slechts lichte druk uit om ervoor te zorgen dat de contactpennen volledig in contact zijn met de huid. Als er volledig huidcontact is, gaat de behandelkop rood branden. Als het apparaat met de juiste snelheid wordt bewogen, branden de behandellampjes groen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Het apparaat is blootgesteld aan een belangrijke verandering in temperatuur, druk of vochtigheid.	Laat het apparaat maximaal 3 uur acclimatiseren voordat u het gebruikt. Het apparaat kan alleen worden gebruikt bij temperaturen tussen +10°C en +40°C.
	Het apparaat is defect.	Neem contact op met het Philips Skincare-expertteam.
Het apparaat schakelt plotseling uit.	De batterij is leeg.	Laad het apparaat op.
	Het apparaat is te warm of te koud.	De statusindicator brandt continu rood omdat de temperatuur in het apparaat te hoog of te laag is. De ventilator in het apparaat blijft werken om het apparaat te helpen koelen. Wanneer de statusindicator weer continu groen brandt, is het apparaat afgekoeld en kunt u het opnieuw gebruiken. Als het apparaat zo heet is dat het in korte tijd niet voldoende kan afkoelen, schakelt het na 5 minuten volledig uit. Wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat u het opnieuw gebruikt. Als het apparaat te koud is, brengt u het naar een warmere ruimte, wacht u een tijdje en probeert u het apparaat opnieuw in te schakelen. Wanneer de statusindicator weer continu groen brandt, is het apparaat warm genoeg en kunt u het opnieuw gebruiken.
	Het apparaat is in foutmodus.	Schakel het apparaat in door op de aan/uitknop te drukken. Als de statusindicator weer groen brandt, kunt u de behandeling voortzetten. Als de statusindicator blijft knipperen, neemt u contact met het Philips Skincare-expertteam.
	Het apparaat heeft overbehandeling gedetecteerd en de overbehandelingsbeveiliging is geactiveerd.	De statusindicator knippert oranje gedurende 30 seconden; het apparaat schakelt automatisch uit en blijft 24 uur vergrendeld wanneer binnen 24 uur meer dan het aanbevolen aantal doses is toegediend. U moet 24 uur wachten totdat het apparaat wordt ontgrendeld. Volg de instructies voor het aantal van doses voor elk behandelgebied.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De statusindicator brandt continu rood wanneer ik het apparaat inschakel en ik hoor een ventilator.	De ruimte waarin u het apparaat hebt bewaard, is te warm of te koud.	Als het apparaat te warm is, schakelt u het uit, brengt u het naar een koudere ruimte en wacht u totdat het afkoelt. Na 30 minuten probeert u het apparaat opnieuw in te schakelen. Als het apparaat te koud is, brengt u het naar een warmere ruimte en wacht u een tijdje. Als de temperatuur tot boven de +10°C is gestegen, kunt u het apparaat opnieuw inschakelen en gaat de statusindicator groen branden.
De statusindicator knippert rood wanneer ik het apparaat inschakel. Ik hoor een foutgeluid en dan schakelt het apparaat zichzelf uit.	Het apparaat is te warm of te koud.	Wacht ongeveer 30 minuten om het apparaat te laten afkoelen of opwarmen. Gebruik het apparaat bij temperaturen tussen +10°C en +40°C.
	Het apparaat is in foutmodus.	Schakel het apparaat in door op de aan/uitknop te drukken. Als de statusindicator weer groen brandt, kunt u de behandeling voortzetten. Als de statusindicator blijft knipperen, neem dan contact op met het Philips Skincare-expertteam.
Tijdens het opladen wordt de adapter warm.	Dit is normaal.	U hoeft niets te doen.
Ik hoor het geluid van een ventilator tijdens de behandeling.	Dit is normaal. Het apparaat heeft een ventilator nodig voor het afkoelen.	Geen actie vereist. U kunt doorgaan met uw behandeling.
Het batterijlampje brandt niet wanneer ik de adapter in het stopcontact plaats.	U hebt de kleine stekker niet goed in de aansluitopening van het apparaat geplaatst, of u hebt de adapter niet goed in het stopcontact geplaatst.	Zorg ervoor dat u de kleine stekker goed in de aansluitopening van het apparaat plaatst en de adapter goed in het stopcontact plaatst.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	Het stopcontact werkt niet.	Controleer dit door een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aan te sluiten.
Het batterijlampje brandt continu rood, hoewel ik het apparaat heb opgeladen.	U hebt het apparaat opgeladen op een plaats waar de temperatuur te hoog of te laag was.	Laad het apparaat niet op in een warme ruimte of dicht bij een radiator of andere warmtebron. Laad het niet op in een te koude ruimte. De temperatuur voor opladen en gebruik ligt tussen +10°C en +40°C.
Wanneer ik het apparaat oplaad, knippert de statusindicator rood en hoor ik een foutgeluid.	U laadt het apparaat op een plaats op waar de temperatuur te hoog is.	Laad het apparaat niet op in een warme ruimte of dicht bij een radiator of andere warmtebron. De temperatuur voor opladen en gebruik ligt tussen +10°C en +40°C.
Ik heb het apparaat ingeschakeld, maar kan geen intensiteitsstand kiezen.	U moet het apparaat resetten.	Om het apparaat te resetten schakelt u het uit en dan weer in. Als u nog steeds geen intensiteitsstand kunt kiezen, bel dan het Philips Skincare-expertteam.
Nadat ik een intensiteitsstand heb gekozen, blijft het intensiteitslampje knipperen.	U moet het apparaat resetten.	Om het apparaat te resetten schakelt u het uit en dan weer in. Als u nog steeds geen intensiteitsstand kunt kiezen, bel dan het Philips Skincare-expertteam.
De behandellampjes gaan zelden branden tijdens behandeling.	U beweegt het apparaat vermoedelijk te snel of te langzaam.	Als u geen zoemend geluid hoort, beweegt u het apparaat te langzaam of te snel. Probeer het apparaat sneller of langzamer te bewegen. Als de behandellampjes branden, als de behandelkop continu rood brandt en u een zoemend geluid hoort, beweegt u het apparaat met de juiste snelheid en is er goed huidcontact.
	Het laservenster kan vuil zijn.	Reinig het laservenster (zie hoofdstuk 'Philips RéAura gebruiken').

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
	De contactpenen van de behandelkop zijn niet volledig in contact met de huid.	Oefen lichte druk uit om voor volledig huidcontact te zorgen. Als de contactpenen volledig in contact zijn, gaat de behandelkop rood branden. Als het apparaat met de juiste snelheid wordt bewogen, branden de behandellampjes groen.
	U hebt geen laser performance gel op uw huid aangebracht.	Het is essentieel dat u de gel gebruikt om te zorgen voor goed huidcontact en voor gemakkelijk glijden over de huid.
Ik voel de laserstraal op mijn huid niet tijdens behandeling.	De behandelkop is niet volledig in contact met de huid.	Oefen lichte druk uit om voor volledig huidcontact te zorgen. Als de contactpenen volledig in contact zijn, branden de behandellampjes groen en brandt de behandelkop rood.
	U beweegt het apparaat te snel of te langzaam.	Als u geen zoemend geluid hoort, beweegt u het apparaat te langzaam of te snel. Probeer het apparaat sneller of langzamer te bewegen. Als de behandellampjes branden, als het lampje in de behandelkop continu rood brandt en u een zoemend geluid hoort, beweegt u het apparaat met de juiste snelheid en is er goed huidcontact.
Het apparaat wordt warm tijdens behandeling.	Dit is normaal.	U hoeft niets te doen.



©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Document order number: 4203 000 6785.1