

PHILIPS

VisaBoost



超音波美顔器
フィリップス ビザブースト

品番 **SC2800/20**

取扱説明書

保証書付


保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ビザブーストをお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

フィリップス ビザブーストは、バイブレーションによって肌に心地よい刺激を与えると同時に、独自の超音波技術により、美容液などのスキンケア製品を角質層へ浸透しやすくします。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品をご確認ください

商品のご確認

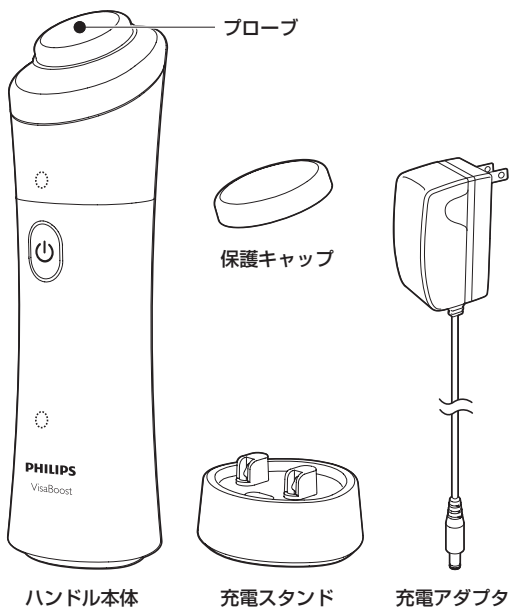

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目次

● はじめに	商品のご確認 2
	目次 3
	必ずお守りください 4~7
	各部の名称 8
● ご使用方法	充電の仕方 9
	基本的な使い方 10
	スキンケア方法 11・12
	トリートメントプログラム 13・14
	お手入れ方法／保管の仕方 15
● 廃棄について	製品を廃棄するとき 16
● 困ったとき	困ったとき 17
● 保証	保証とアフターサービス 19
	仕様 20
	無料修理規定 22
	保証書／フィリップスサポートセンター 最終ページ

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

必ずお守り
ください

○絵表示について



記号は、「警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

警告



●本体ならびに充電アダプタは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップサポートセンター（0120-944-859）にご相談ください。



●メンテナンスの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●本体・充電アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因となります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因となります。












●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですでおやめください。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

-  ● 充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ● 製品本体に強いショックを与えたり、落としたり、激しく振ったりしないでください。
-  ● 充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
-  ● 電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
-  ● ハンドル本体、充電スタンド、充電アダプタなどが破損または故障した場合は、ケガの原因になりますので使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡の上、必ず同型の交換部品を依頼してください。
-  ● 充電は、専用の充電アダプタを使用してください。
-  ● 12歳未満の方は使用しないでください。
-  ● 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
-  ● 耳に直接当てないでください。一時的な難聴になる恐れがあります。

使用上のご注意


1. この製品はフェイシャルケアをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
2. この製品をシャワー中に使用しないでください。
3. 製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境で行ってください(尚、低温や高温で充電すると、充電電池の寿命が短くなります)。
4. 室温、気圧、温度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
5. 睡眠中に使用しないでください。
6. 週に4回以上使用しないでください。
7. 衛生上の理由から他の方と共用しないでください。
8. この製品には、機器の過度な温度上昇を防ぐためのオーバーヒートプロテクション機能がついています。オーバーヒート(過度な温度上昇)した場合、自動的に電源がOFFになります。10分以上放置して冷ましてから再度お使いください。

お手入れの際のご注意

- 1 本体は水洗いできません。本体を水や液体の中に浸けないでください。また、食洗機で洗わないでください。
- 2 この製品は、使用の都度、お手入れをしてください。

保管時のご注意

- 1 室温5℃～35℃の環境で保管してください。直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- 2 保護キャップをつけて、ほごりがつきにくい場所で保管してください。

 下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください


- 1 目や目のまわり、鼻腔・口腔などの粘膜箇所。また、顔以外の箇所
- 2 ひびわれや赤ざれ、傷跡など、皮膚に異常の見られる箇所
- 3 過去2週間以内に行ったケミカル／メカニカルピーリング、レーザー治療、メソセラピー治療、皮膚フィラーを使用したその他の治療などの美容治療から皮膚が回復中の箇所
- 4 ステロイド、ニキビの薬(アキュテイン、イソトレチノイン、ロアキュテイン)など皮膚に影響する医薬品を使用している箇所

 下記に該当する方は、この製品を使用しないでください

1. 妊娠中、授乳中の方
2. 現在医師の治療を受けている方
3. 外耳炎、中耳炎など耳に疾患のある方
4. ペースメーカー等の体内埋め込み型医療機器をお使いの方
5. 重度の皮膚アレルギー、アトピー性皮膚炎の方
6. 傷口や外傷のある方
7. 重度の皮膚疾患のある方
8. 肌に傷、重度のニキビ、日焼け、炎症などが見られる方
9. 皮膚感染症などの皮膚疾患や肌トラブルがある方
10. ステロイド系の薬を服用している方

※ご自分がこの製品の使用に適するかどうか不明な場合、また、使用中に異常を感じた場合は、皮膚科医にご相談ください。

各部の名称

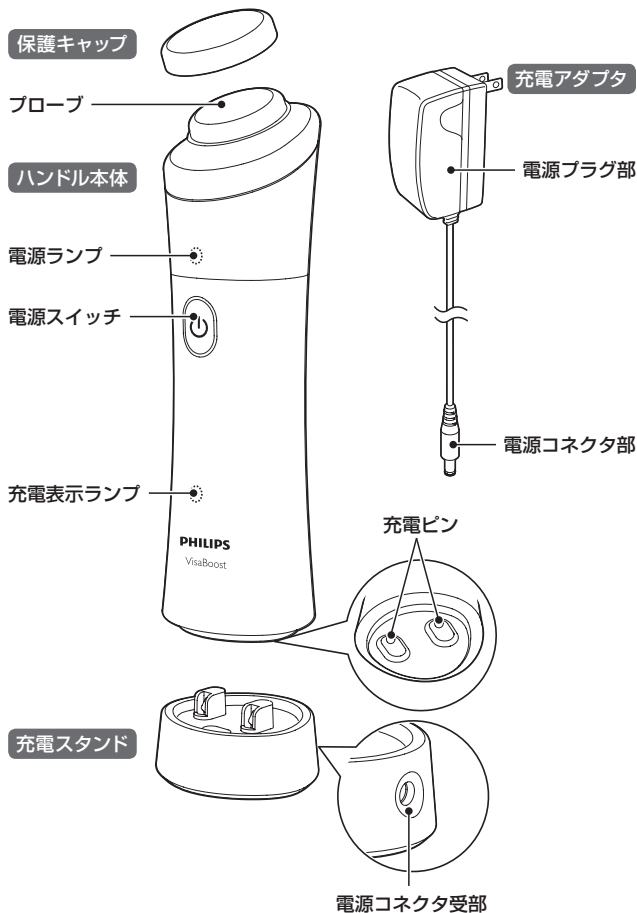

充電の仕方

この製品は通常2時間30分充電です。

1回に10分までの連続使用ができます。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。充電時間は約2時間30分です。この製品は満充電した状態で、約20分間の使用ができます(連続使用はできません)。海外(100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。


1 充電残量がなくなると、充電表示ランプが青色で10回点滅します。この状態になると製品を充電する必要があります。

4 充電スタンドに本体を立てます。

※充電中は充電表示ランプが青色に点灯します。充電が完了すると、青色のランプは消えます。

2 充電する際には、電源スイッチを必ずOFFにしてください。

3 充電アダプタの電源コネクタ部を、充電スタンドの電源コネクタ受部に差し込み(図①)、充電アダプタをコンセントに差し込みます(図②)。

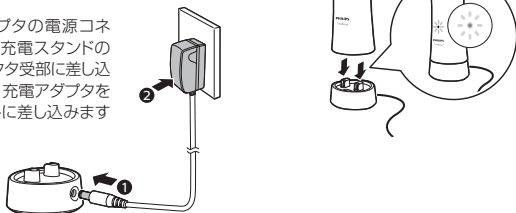

ポイント

- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電中はハンドル本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを避ける為、最後まで充電を使いきってから、充電することをおすすめいたします。



注意

- つぎ足し充電を行うと充電電池の寿命が短くなります。
- 専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合は、充電電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。また、3カ月に一度は充電してください。
- 本製品を24時間以上コンセントに接続したままにしないでください。

週3回を目安にお使いください。

基本的な使い方

1 電源をONにする


電源スイッチを1回押すと電源がONになります。



ON

2 電源をOFFにする

もう一度電源スイッチを押すと電源がOFFになります。

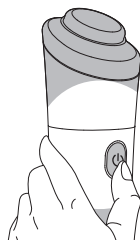

OFF

3 使用後について

ご使用の都度、必ずお手入れしてください(P15「お手入れ方法」)。

●自動電源オフ機能

使いすぎを防ぐため、連続して10分間使用すると、自動的に電源がOFFになります。



注意

- 本製品を初めてお使いになる場合は、腕または脚などでお試しください。
- 炎症やアレルギー症状が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。過敏肌や炎症肌の方はご使用にならないでください。
- ご使用の都度、必ずプローブをお手入れしてください。お手入れを怠りますと、故障の原因となる場合があります。
- 衛生上、他の人とは共用しないでください。

スキンケア方法

週3回を目安にお使いください。

ビザブーストを使用したトリートメントプログラムには、3分間のクイックトリートメントと7分間の集中トリートメントがあります。肌の状態に合わせて使用時間を調整してご使用ください。詳しくはP13・14の「トリートメントプログラム」をご確認ください。

製品を使用する前は、クレンジング製品や洗顔料を使用して、必ず汚れやメイクをきれいに洗い流し、タオルで拭き取ってから使用してください。



⚠️ 注意

- 必ず保護キャップを外してから使用してください。
- シャワーやお風呂の中で使用しないでください。
- 使用前に必ずプローブが破損していないか確認してください。皮膚を傷つける恐れがあります。
- 電源が入った状態で乾いたプローブを肌にあてないでください。皮膚が炎症を起こす恐れがあります。
- プローブを同じ箇所にあてたままにしないでください。

- 1 美容液などを1、2滴プローブにのせ、指先で伸ばしてください。

※電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



- 2 図のように、顔にも少量の美容液などをのせ、指先でやさしくたたきながら肌になじませます。



- 3 電源スイッチを押して、電源をONにします。




- 4 プローブ面全体が顔にあたるようにして、あごから耳方向へゆっくりと5秒間かけて動かします。このステップを左右の頬それぞれ2、3回繰り返してください。トリートメントの方法については、P13・14「トリートメントプログラム」をお読みください。



ポイント

小鼻などプローブ面全体をあてるのが難しい箇所は、ハンドル本体の握る方向を縦横持ち替えたり、スキんケアしたい箇所をもう片方の手で広げたりしてください。あごや額も同様にスキんケアしてください。

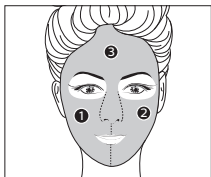

※使いすぎを防ぐため、10分経過すると自動で電源がOFFになります。スキんケア時間は各エリアにつき3分以内、全体で10分以内としてください(①、②、③の各エリア)。

※製品の特性上、連続使用するとプローブ部分が温かくなります。

- 5 額は、円を描くようにくるくると移動させながらスキんケアしてください。



スキんケア後

スキんケアが終了したら、電源スイッチを押して、電源をOFFにします。スキんケア後は、化粧水や美容液、クリームなどを顔にのせ指先で軽くたたか、手のひらを使って、両頬を2、3回やさしく持ち上げてください。



トリートメント プログラム



洗顔後、必ず美容液などのスキンケア製品適量を肌とプローブに直接のせてからご使用ください。

※化粧水、ジェル、美容液、乳液などがお使いいただけますが、クリーム、オイル、オイル状美容液等の油分の多い剤形の化粧品は使用しないでください。

- ・クイックトリートメント(3分間)
- ・集中トリートメント(7分間)







● クイックトリートメント ————— 3分間のお手入れ

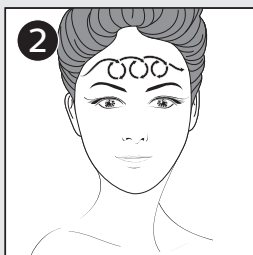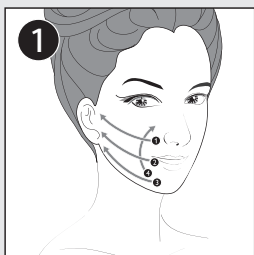

- ① 始めに口角から耳側へ向けてプローブを滑らせます。次にあごから頬骨の下へ滑らせます。各ステップを5秒ずつ、2、3回繰り返します。
- ② 額は、左のこめかみから右のこめかみにかけて、円を描くように滑らせます。こちらも2、3回繰り返します。

● 集中トリートメント ————— 7分間のお手入れ

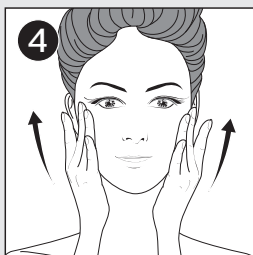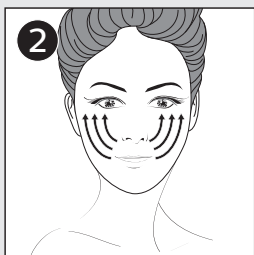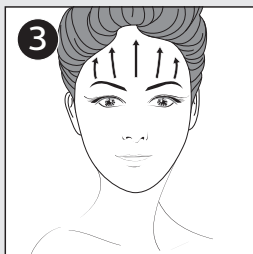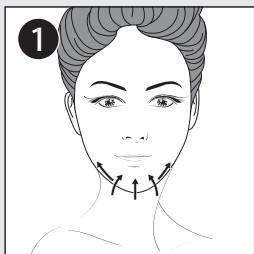

- ① プロープをあごの下から上方向へ滑らせます。各5秒ずつ、3回繰り返します。
- ② プロープを頬骨周辺にあてて、上方向へ滑らせます。各5秒ずつ、2、3回繰り返します。
- ③ プロープを眉の上部へあてて、髪の毛の生え際へ向けて滑らせます。各5秒ずつ、2、3回繰り返します。
- ④ お手入れが終了したら、手のひらを使い、肌を上方向へマッサージしてください。

お手入れ方法

本体は水洗いできません。
水や液体につけないでください。



注意

- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体を絶対に使わないでください。
- プロープに強い衝撃を与えないでください。
- メンテナンスの際には、先の尖ったものを使わないでください。
- 本体を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。
- 充電アダプタや充電スタンドを水につけたり、水をかけないでください。故障やショート・感電の原因になります。

ご使用の都度、必ずお手入れしてください。お手入れを怠りますと、故障の原因となる場合があります。

- 1 お手入れの前に、電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。



- 2 プロープについた汚れは湿った布で拭きとってください。



- 3 ハンドル本体を乾いた布で拭きます。

保管の仕方

- 保護キャップをつけて、保管してください。



注意

- プロープが濡れた状態で、保管しないでください。
- 直射日光のあたる場所には保管しないでください。

※お客様による充電電池の
修理交換はできません。

製品を 廃棄するとき

ニッケル水素電池のリサイクルについて

この製品はニッケル水素電池を使用しています。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。



注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 一度分解したハンドルは安全上の理由から、絶対に再使用しないでください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電電池の取り外し方

電源スイッチをONにして、動作しなくなるまで充電電池を完全に放電させてから、行ってください。

- 1 ハンドル本体の底のねじをドライバーで外し、底蓋を取り外します。




- 3 充電電池ホルダーの上部を注意して引き上げ、ハンドル本体から取り出します。




- 2 紫色のリングとハンドル本体の間に小さなマイナスドライバーを差し込んでこじ開けます。

※作業を行う際には、目、手、指などをケガされないようご注意ください。

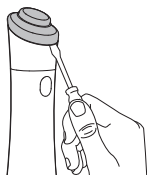

- 4 充電電池ホルダーから充電電池を取り外します。

※充電電池を取り外した後に通電しないでください。

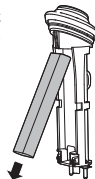

困ったとき

ご使用中お困りになったとき、
まずは下記をご確認ください。

製品が作動しない

- ▶電源スイッチはきちんと押されていますか？
- ▶充電はされていますか？充電中は充電表示ランプが点灯していますか？
充電表示ランプが消えるまで充電を行ってください。
- ▶オーバーヒートプロテクション機能が作動していませんか？
10分以上放置して冷ましてください。

充電できない

- ▶本体が充電スタンドにきちんとセットされていますか？
- ▶充電ピンと充電スタンドの接触部分に問題がないか確認してください。
- ▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？
- ▶充電スタンドの電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか？
- ▶停電してはいませんか？コンセントは通電していますか？

製品が自分の肌に合っているかわからない

- ▶P6・7「必ずお守りください」項をお読みになり、製品がお客様の肌に適しているか確認してください。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、
フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせ願います。

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ (充電スタンド、保護キャップを除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。
Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利×モ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ()
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。



仕 様

品 名	超音波美顔器 フィリップス ビザブースト
品 番	SC2800/20
充電アダプタ品番	HNA120050J
電 源 方 式	充電式(専用充電アダプタ使用)
質 量	約161g(ハンドル本体)
定 格 電 圧	AC100-240V(50/60Hz)
充 電 時 間	約2時間30分
使 用 時 間	満充電後、約20分
使 用 充 電 池	ニッケル水素電池(Ni-MH)
消 費 電 力	7.5W

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>



無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- ※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

超音波美顔器 フィリップス ビザブースト 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	超音波美顔器 フィリップス ビザブースト
品番	SC2800/20
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ (充電スタンド、保護キャップを除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

日本販売代理店 **小泉成器株式会社** 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター 0120-944-859

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

support-da@philips.com

受付時間：平日9：00～18：00（土・日・祝日・年末年始を除く）

