

**PHILIPS**

VisaCare

Prestige



家庭用美顔器  
フィリップス  
ビザケア プレステージ

品番 **SC6250/03**

**取扱説明書**

**保証書付**


保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス ビザケア プレステージをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
フィリップス ビザケア プレステージは、デュアルアクション・エアリフト&角質除去システムを使用しています。肌の表面の古い角質を除去しながら同時に肌に心地よい刺激を与えることで、肌をなめらかにし、ハリを与えます。お使いのスキンケア製品が角質層へ浸透しやすくなります。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※この製品は、衛生上の理由から他の方と共用しないでください。

## 商品のご確認

商品をご確認ください

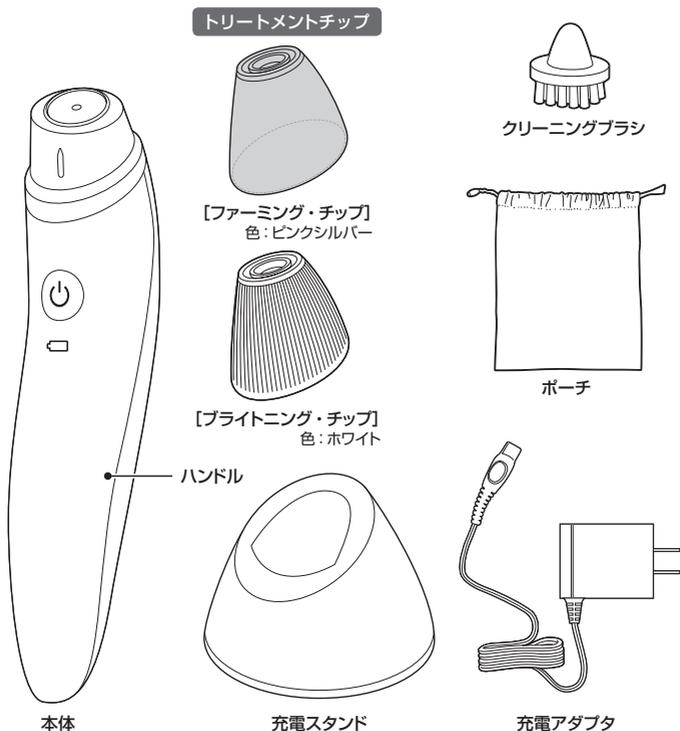

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

# 目次

●はじめに	商品のご確認 ..... 1
	目次 ..... 2
	必ずお守りください ..... 3~5
	各部の名称 ..... 6
●ご使用方法	充電の仕方 ..... 7
	基本的な使い方 ..... 8
	トリートメントの仕方 ..... 9・10
	お手入れ方法／保管の仕方 ..... 11
●廃棄について	製品を廃棄するとき ..... 12
●困ったとき	困ったとき ..... 13・14
●保証証	保証とアフターサービス ..... 15
	仕様 ..... 16
	無料修理規定 ..... 18
	保証書／フィリップスサポートセンター ..... 最終ページ

# 必ずお守り ください

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区別しています。

### ○絵表示について



記号は、「警告、注意」を示します。  
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



**警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



**注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

### ○絵表示の例



●記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

## 警告



●本体・充電アダプタや充電スタンドは改造しないでください。また、分解したり修理をしないでください。火災、感電、ケガの原因となります。修理はフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご相談ください。



●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



●お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やケガをすることがあります。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険です。のでおやめください。



●本体・充電アダプタや充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。

## ⚠ 注意

-  ●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。
-  ●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。
-  ●充電するときは、専用の充電アダプタを使用してください。
-  ●本体、充電スタンド、充電アダプタなどが破損または故障した場合は、ケガの原因になりますので使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡の上、必ず同型の交換部品を依頼してください。
-  ●製品本体に強いショックを与えたり、落としたり、激しく振ったりしないでください。
-  ●8歳未満の方は使用しないでください。

## 使用上のご注意

1. この製品は、顔の皮膚に心地よい刺激を与えながら、古い角質を除去するためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
2. 目、鼻腔・口腔などの粘膜箇所および、耳、首、デコルテには使用しないでください。
3. この製品をシャワー中に使用しないでください。
4. 製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境で行ってください(尚、低温や高温で充電すると、充電電池の寿命が短くなります)。
5. 室温、気圧、温度が急激に変化する環境でご使用になる場合は、製品をその環境下で30分ほどならしてからお使いください。
6. この製品をスクラブ入り洗顔料やケミカルピーリングと一緒に使用しないでください。故障の原因や、皮膚を傷めることがあります。
7. フェーミング・チップを週に3回以上使用しないでください。
8. 日焼けするような場合はフェーミング・チップを使用しないでください。
9. 衛生上の理由から他の方と共用しないでください。
10. フェーミング・チップを使用した日はブライトニング・チップを使用しないでください。
11. 初めて使用する際は、腕の内側で試してからご使用ください。

## お手入れの際のご注意

1. 本体は水洗いできません。本体を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。また、食洗機で洗わないでください。
2. この製品は、使用の都度、お手入れをしてください。

## 保管時のご注意

1. 室温5℃～35℃の環境で保管してください。直接日光のあたる場所での保管や、夏場の車の中に放置しないでください。
2. ポーチに入れてほごりがつきにくい場所で保管してください。
3. 使用しない時は電源を入れたままで放置しないでください。




この製品は顔に使用していただく製品です  
下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください


1. 目、鼻腔・口腔などの粘膜箇所および、耳、首、デコルテ
2. シリコン注入物、ペースメーカー、皮下埋め込み式カテーテル（ポート）、ピアス、ボディピアスをされている箇所
3. いぼ、ほくろ、そばかす、大静脈、しみ、濃い色素斑の見られる箇所、傷跡、皮膚に異常の見られる箇所
4. 過去2週間以内に行ったケミカル／メカニカルピーリング、レーザー・リサーフィニング、フラクショナル・レーザー治療、メソセラピー治療、皮膚フィラーを使用したその他の治療などの美容治療から皮膚が回復中の箇所
5. 刺青（タトゥー）、ボディペイント、アートメイクのある箇所
6. ステロイド、ニキビの薬（アキュテイン、イソトレチノイン、ロアキュテイン）など皮膚に影響する医薬品を使用している箇所

# 各部の名称


## 本体

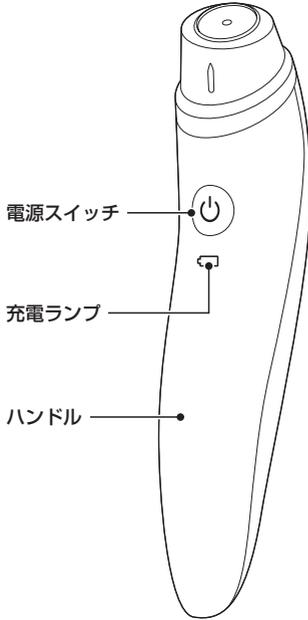

## トリートメントチップ

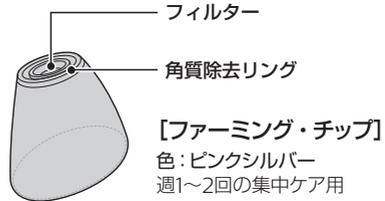


## ポーチ

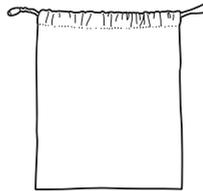


## クリーニング ブラシ



## 充電スタンド

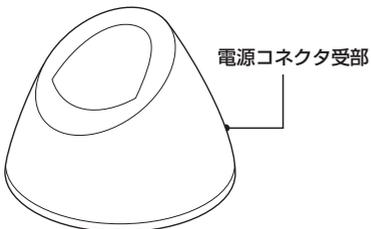

## 充電アダプタ

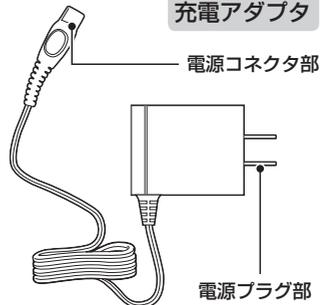

# 充電の仕方

この製品は通常8時間充電です。

満充電で約40分間の使用ができます。

初めてお使いになるときや、長い間で使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。充電時間は約8時間です。この製品は満充電した状態で、約40分間の使用ができます。海外(100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえでご使用ください。


※この製品はリチウムイオン電池を使用していますので、ご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。

- 1 充電残量が残り少なくなると、充電ランプがオレンジ色に点滅します。この状態になると製品を充電する必要があります。



※点滅しても、約5分間は使用できます。充電残量が完全になくなると、自動的に電源が切れてオレンジ色の充電ランプが点滅します。



- 4 充電スタンドに本体を立てます。

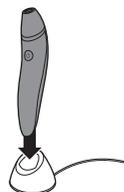

※充電中は充電ランプが白く点滅します。充電が完了すると、白いランプが点灯状態になり、約30分後に消えます。

- 2 充電する際には、電源スイッチを必ずOFFにしてください。

- 3 充電アダプタの電源コネクタ部を、充電スタンドの電源コネクタ受部に差し込み(図①)、充電アダプタをコンセントに差し込みます(図②)。

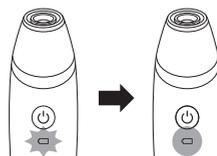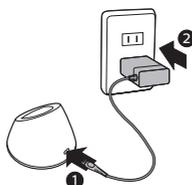

## ポイント

- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電中は本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。




## 注意


- 専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合は、充電電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。また、3カ月に一度は充電してください。

# 基本的な使い方

- 1 電源をONにする**  
電源スイッチを1回押すと電源がONになります。

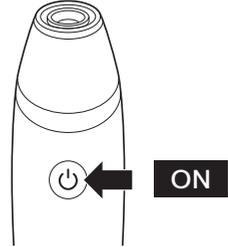


- 2 電源をOFFにする**  
もう一度電源スイッチを押すと電源がOFFになります。

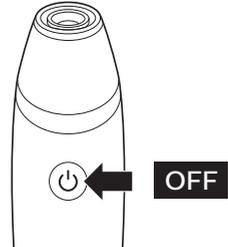


- 3 使用後について**  
ご使用の都度、必ずお手入れしてください(P11「お手入れ方法」)。

## ビザケア プレステージについて

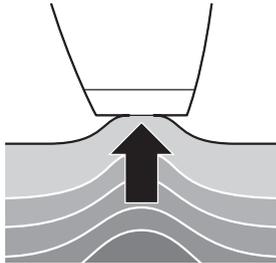

エステサロンから発想を得た、吸い上げて流すエステティシヤンのテクニックを吸引テクノロジーにより再現。内側から弾むような肌へと導きます。

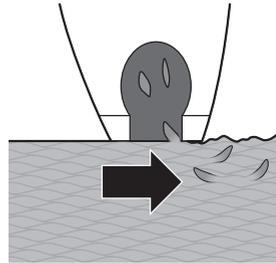

極小クリスタル粒子により、くすみの原因となる肌表面の古い角质をやさしく取り除き、スキンケア成分の肌<sup>\*</sup>への浸透を高めます。

※角质層まで



### 注意

- 炎症やアレルギー症状が見られた場合は、直ちにご使用をおやめください。
- ご使用の都度、必ずトリートメントチップをお手入れしてください。お手入れを怠りますと、故障の原因となる場合があります。
- 衛生上、他の方とはトリートメントチップを共用しないでください。

# トリートメントの 仕方

製品を使用する前に洗顔してください。ビザケアは、乾いた肌にも濡れた肌にもお使いいただけますが、よりスムーズな使い心地のために、化粧水など塗布した肌にお使いになることをおすすめします。初めて使用する際は、腕の内側で試してからご使用ください。肌を吸引する感覚に慣れるまで「ブライティング・チップ」のみを使用してください。赤みなどの反応が起こる可能性があります。数時間で治まります。夕方・夜にご使用することをおすすめします。

## トリートメントチップの選択



### 「ブライティング・チップ」 を使ったトリートメント

- 使用頻度：毎日<sup>\*1</sup>
- 交換目安：2ヶ月毎<sup>\*2</sup>

各部分を2～4往復

肌を吸引する感覚に慣れたら

「ファーマリング・チップ」を使用。



### 「ファーマリング・チップ」 を使ったトリートメント

- 使用頻度：週に2回まで<sup>\*1</sup>
- 交換目安：6ヶ月毎<sup>\*2</sup>

各部分を2～4往復

肌を吸引する感覚に慣れたら

各部分を4～6往復

※1 ブライティング・チップとファーマリング・チップを同じ日に使用しないでください。夏場はブライティング・チップのみの使用をおすすめします。


※2 万が一トリートメントチップが破損した場合は、上記の交換目安期間内でも新品をご購入の上、交換してください。別売のトリートメントチップについては製品をお買い求めになった販売店でフィリップス純正品をご購入してください。「ブライティング・チップ：SC6895/03」「ファーマリング・チップ：SC6891/03」



## 注意


- シャワーやお風呂の中で使用しないでください。
- 使用前に必ずトリートメントチップが破損していないか確認してください。皮膚を傷つける恐れがあります。破損している場合は、新しいものと交換してください。
- トリートメントチップを装着せずに製品を使用しないでください。
- トリートメントチップを1カ所に当てたまにしないでください。
- この製品をスクラブ入り洗顔料やケミカルピーリングと一緒に使用しないでください。故障の原因や、皮膚を傷めることがあります。
- ブライティング・チップとファーマリング・チップを同じ日に使用しないでください。
- ファーマリング・チップは、週に3回以上使用しないでください。
- 日焼けするような場合はファーマリング・チップは使用しないでください。

## トリートメントの順序

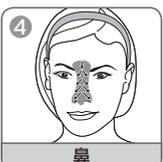

## 使用方法

- 1 電源スイッチを押して、電源をONにします。

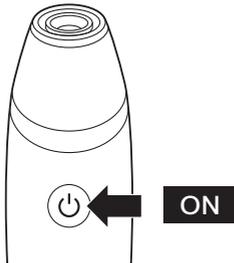

- 2 吸着するようにチップを顔に当ててください。トリートメントを行う部分にトリートメントチップをぴったりと皮膚に密着させます。

※トリートメントチップを皮膚にきつく押し付けしないでください。




- 3 トリートメントチップを直線状にやさしく動かします。あごから始め、頬、額、鼻、目じりへと動かします。必ず顔全体をトリートメントしてください。

- 4 顔全体をトリートメントしたら、電源スイッチを押して、電源をOFFにします。

※顔全体のトリートメント時間の目安は、約5分です。

※肌のタイプによりますが、温かく、ピリピリした感じがしたり、皮膚に少し赤みが出る場合があります。これは一時的なもので、数時間で治まります。24時間以上続く場合はフィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。症状が重い場合は皮膚科医の診察を受けてください。

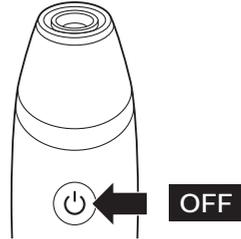

### ポイント

- 製品を持っていないほうの手で皮膚を引っ張るように押さえ、製品をその手と反対方向に動かすと密着しやすくなります。
- 目じり付近の小じわをトリートメントする場合は、製品を持っていないほうの手の指で目じりを押さえ、製品をその指の反対方向に動かします。
- 額など製品を皮膚に密着させづらい箇所では、製品の持ち方を変えてみたり、縦や横に動かしたりし、皮膚に適切に接触させてください。

## トリートメント後

使用後は普段お使いのスキンケア製品で肌をお手入れしてください。ビザケア プレステージを使用後3日間は外出される際にSPF30以上の日焼け止めで肌を紫外線から保護してください。肌が敏感に傾く場合がありますのでケミカルピーリングや脱毛等は行わないでください。トリートメント後すぐにお化粧品いただけます。

## お手入れ方法

本体は水洗いできません。  
水や液体につけないでください。  
(トリートメントチップは水洗い可能です)

※本製品はご使用の都度、お手入れをしてください。  
お手入れを怠りますと、故障の原因となる場合があります。



### 注意

- 圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体を絶対に使わないでください。
- トリートメントチップに強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には、先の尖ったものを使わないでください。
- 本体を水や液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。
- 充電アダプタや充電スタンドを水につけたり、水をかけないでください。故障やショート・感電の原因になります。

- 1 お手入れの前に、電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。

OFF



- 2 本体からトリートメントチップを取り外します。



- 3 トリートメントチップの中をクリーニングブラシで掃除し、水または40℃以下のぬるま湯で洗います。角質除去リングが汚れている場合は、食器用洗剤を入れたぬるま湯に5~10分つけ置きます。トリートメントチップを逆さまにして必ずフィルターに残った汚れを洗い流してください。洗ったあと、トリートメントチップを乾いた布でよく拭いて乾かします。



- 4 本体、充電スタンドは水気を含ませた布で拭きます。トリートメントチップが乾いたら本体に戻して、保管してください。



## 保管の仕方

- 乾燥させたトリートメントチップを本体につけた状態で、充電スタンドに収めて保管してください。



- 旅行などにお持ちの際は、ポーチに収納してください。



### 注意

- トリートメントチップが濡れた状態で、保管したり、ポーチに収納しないでください。
- 直射日光の当たる場所には保管しないでください。

※お客様による充電電池の  
修理・交換はできません。

## 製品を 廃棄するとき

### リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。



#### 注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

### 充電電池の取り外し方


電源スイッチをONにして、動作しなくなるまで充電電池を完全に放電させてから、行ってください。

- 1 本体底面の溝にマイナスドライバーを差し込んでカバーを取りはずします。

※作業を行う際には、目、手、指などをケガされないようご注意ください。




- 2 モーターユニットのカバーにあるツメをはさみ、カバーを開けます。

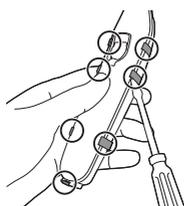

- 3 充電電池の端のあたりで回路基板の下にマイナスドライバーの先を入れてドライバーをひねり、充電電池と回路基板の接続部を壊し、充電電池を完全に取り外してください。

※充電電池を取り外した後に通電しないでください。

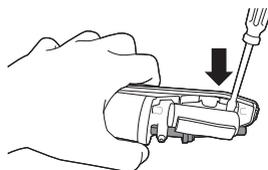

## 困ったとき

ご使用中お困りになったとき、  
まずは下記をご確認ください。

### 製品が作動しない

- ▶電源スイッチはきちんと押されていますか？
- ▶充電はされていますか？ 充電中は充電ランプが点滅していますか？  
充電ランプが白色に点灯するまで充電を行ってください。
- ▶充電中ではありませんか？  
これは安全措置です。充電中は製品が作動しないように設計されています。

### 充電できない

- ▶本体が充電スタンドにきちんとセットされていますか？
- ▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか？
- ▶充電スタンドの電源コネクタ受部に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか？
- ▶停電してはいませんか？ コンセントは通電していますか？

### 製品が自分の肌に使用できるかわからない

- ▶P3～5「必ずお守りください」項をお読みになり、製品がおお客様の肌に合うかどうか確認してください。

### うまく吸着できない／効果を感じにくい

- ▶フィルターがつまっていませんか？  
トリートメントチップを掃除してください。P11「お手入れ方法」の項をお読みください。
- ▶本体のみで吸着できていますか？  
トリートメントチップを取り外した状態で吸着できているか確認してください。  
吸着しない場合は製品が故障している可能性があります。フィリップスサポートセンター（0120-944-859）にご連絡ください。
- ▶トリートメントチップがぴったりと皮膚に密着していますか？  
製品の持ち方を変えて試してみてください。額の上では、製品をゆっくりと動かすのがコツです。手は動かさず頭を動かしてトリートメントする方法もあります。

### トリートメントの後に、肌に反応が出る(乾燥、カサつき、赤み、腫れなど)

- ▶ 少しの赤みは正常な反応で、数時間で治まります。24時間以上続く場合はフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。症状が重い場合は皮膚科医の診察を受けてください。
- ▶ 製品を顔に強く当てすぎたか、同じ場所をトリートメントしすぎていませんか?  
顔に製品をもう少し軽く当てるか、同じ場所のトリートメントの回数を減らしてください。
- ▶ トリートメントの後に日焼け止めの入ったローション、日焼け止めクリームを使用してください。

### ファームング・チップを使い始めるタイミングがわからない

- ▶ **ブライトニング・チップの肌を吸引する感覚に慣れましたか?**  
ブライトニング・チップで肌に問題がなければ、試してみてください。  
新しいトリートメントチップに慣れるまで、若干時間がかかります。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、  
フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせ願います。

# 保証と アフターサービス

## 保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

### 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体、充電アダプタ(トリートメントチップ、充電スタンド、クリーニングブラシ、ポーチを除く)

### 【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

- 製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご連絡ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN  
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

### 【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ店名	TEL. ( )
--------	-------	---------	----------

ご使用の時、このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源プラグをコンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。

仕 様

品 名	家庭用美顔器 フィリップス ビザケア プレステージ
品 番	SC6250/03
充電アダプタ品番	SSW-2600 または SSW-2082
電 源 方 式	充電式(専用充電アダプタ使用)
本 体 質 量	約160g
定 格 電 圧	AC100-240V (50/60Hz)
充 電 時 間	約8時間
使 用 時 間	満充電後、約40分
使 用 充 電 池	リチウムイオン電池(Li-ion)
消 費 電 力	7.5W (AC100V充電時)

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はフィリップスサポートセンターにお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/>



## 無料修理規定

### 〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。
- 3.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
- ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
- ⑤ 保証書の提示がない場合。
- ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス ビザケア プレステージ 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにご連絡ください。お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	家庭用美顔器 フィリップス ビザケア プレステージ
品番	SC6250/03
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	本体、充電アダプタ(トリートメントチップ、充電スタンド、クリーニングブラシ、ポーチを除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号

- ★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン

日本販売代理店 小泉成器株式会社 〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター 0120-944-859

〒283-0013 千葉県東金市土農田17-9

support-da@philips.com

受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.100.6318.1(02/17)

©2017 Philips Electronics Japan, Ltd.

キ  
リ  
ト  
リ  
線

キ  
リ  
ト  
リ  
線