




Philips Sonicare AirFloss
Interdental – oppladbart

med ett munnstykke

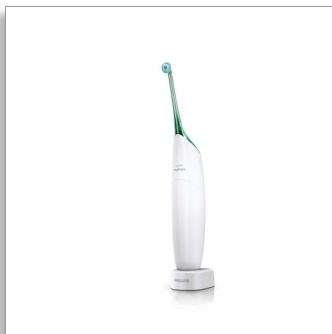

HX8211/02

Forebygg tannkjøttbetennelse med AirFloss!

Rent mellom tennene på 30 sekunder. 84 % anbefaler!*

Philips Sonicare AirFloss 1.5 er et innovativt supplement til tannbørsten for de som vanligvis ikke bruker tanntråd. AirFloss rengjør mellom tennene på bare 30 sekunder. Da forebygger du tannråte, tannkjøttbetennelse og dårlig ånde. Siden munnstykkene har forskjellig farge kan du dele en AirFloss i familien. "Bare en fin frisk følelse. Jeg er hekta," skriver magasinet COSMOPOLITAN. *84 % av 51 Smartson-testpiloter anbefaler Philips Sonicare AirFloss. Prøv i 60 dager!

Forbedrer munnhygien

- Fjerner mer plakk mellom tennene
- Bidrar til å forbedre tannkjøttelsen på bare to uker
- Bidrar til å forhindre hull mellom tennene

Rengjør på 30 sekunder

- Rengjør hele munnen på bare 30 sekunder
- Pek, trykk og rengjør!

Lett å bruke

- Teknologi med luft og små dråper
- Komfortabelt, ergonomisk håndtak
- Ledetupp sikrer riktig plassering


Hjelper deg med å skape gode vaner

- En enkel måte å forbedre rengjøring mellom tennene på

PHILIPS
sonicare


Høydepunkter

Teknologi med luft og små dråper

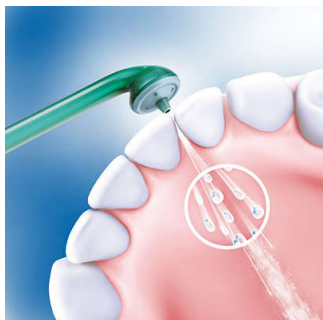

AirFloss bruker en unik teknologi med luft og små dråper for å sende en rask salve med trykkluft og vann eller munnskyllevann mellom tennene. Aktiveringsknappen med ett trykk er like enkel som et museklikk.

En enkel måte å komme i gang på

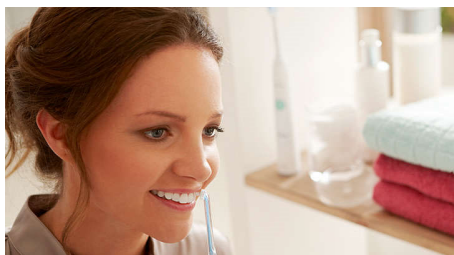

Rengjøring mellom tennene er svært viktig for generell tannhelse. Med AirFloss kan du rengjøre grundigere mellom tennene på en enkel måte, slik at du kan skape gode vaner. Etter tre måneder med bruk av AirFloss fortsatte 96 % av de som ikke brukte tanntråd regelmessig, med å bruke AirFloss fire eller flere dager per uke.


30-sekunders rengjøring



Med AirFloss tar det bare 30 sekunder å rengjøre hele munnen. Du trykker ganske

enkelt på knappen én gang for én sprut, og deretter flytter du den og gjentar det. Hvis du vil bruke den nye funksjonen for automatisk sprut, holder du knappen nede og beveger ledetuppen fra mellomrom til mellomrom. Den gir automatisk fra seg én sprut i sekundet.

Bedre tannkjøttthelse

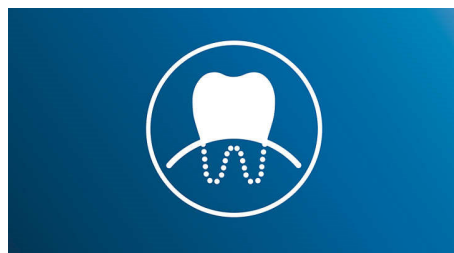

Det er klinisk bevist at Sonicare AirFloss forbedrer tannkjøttthelsen på bare to uker.

Beholder som er enkel å fylle



Fyll beholderen på håndtaket med enten munnskyl eller vann for å få en forfriskende rengjøring. Deretter peker du og trykker. Vannbeholderen rommer tilstrekkelig væske til å bruke den to ganger.

Ledetupp




Det slanke, vinklede munnstykket og ledetuppen gjør at det er enkelt å finne riktig plassering. Bare før den langs tannoverflaten i nærheten av tannkjøtttranden til tuppen setter seg i sporet mellom tennene.

Bidrar til å forhindre hull



Ved å forsiktig sprute vekk plakk som ikke ble fjernet under børstingen, bidrar Sonicare AirFloss til å forhindre at det oppstår hull mellom tennene.

Fjerner mer plakk mellom tennene

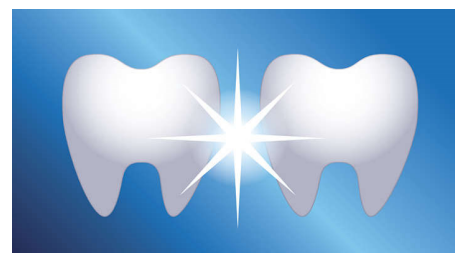

Fjerner mer plakk mellom tennene

Ergonomisk håndtak

AirFloss er utformet for å være enkel å manøvrere på steder der det er trangt, ved at det har et komfortabelt, ergonomisk håndtak og et sklisikkert grep.

Spesifikasjoner

Drift

- Spenning: Flerspenningslader

Tekniske spesifikasjoner

- Batteri: Oppladbar
- Driftstid: Skift ut munnstykket hver 6. måned
- Batteritype: Litium-ION
- Ladetid: 24 timer for å oppnå full lading

Formmessige spesifikasjoner

- Farge(r): Hvit med grønne detaljer

Service

- Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

- Batteriindikator: Blinking indikerer lavt batterinivå
- Håndtak: Slank, ergonomisk form

- Batterilevetid: Opptil tre uker når den er fulladet
- Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

Deler som medfølger

- AirFloss-håndtak: 1
- Lader: En flerspenningslader
- AirFloss-munnstykke: 1
- Munnstykkeholder: 1

Rengjøring

- Ytelse: Fjerner opptil 5 ganger så mye plakk*
- Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker
- Funksjon for automatisk sprut: Rengjør hele munnen på 30 sek
- Munnstykker: Best resultat fås ved å bytte etter 6 md



Utgivelsesdato
2023-02-22

Versjon: 5.0.1

EAN: 87 10103 62329 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
eiere.

www.philips.com

* enn bare å børste med vanlig tannbørste