

# PHILIPS

sonicare

## DiamondClean Smart

Rechargeable  
sonic toothbrush

フィリップス ソニックア  
ダイヤモンドクリーン スマ  
ート  
プロフェッショナル  
充電式電動歯ブラシ

HX9949/09



\*ブラシヘッドは別売りです。

**取扱説明書**

**保証書付**

保証書は、この取扱説明書の最  
終ページについております。

## はじめに

ソニックアール ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナルをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。製品をご使用いただく前に、Philips Sonicareアプリをダウンロードし、製品をアプリに接続していただくことをお勧めします。長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※Philips Sonicareアプリの使いかたについては、P2「アプリの使いかた」を参照してください。

## ブラシヘッド認識 機能について

ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナルでは、ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドをお使いいただくことでハンドルのモードと強さ設定が自動で設定され、いつでも最適な状態でブラッシングをお楽しみいただけます。

ブラシヘッドにはお勧めのモードと強さがあらかじめ設定されていますが、これらはお好みに合わせて変更することができます。

お勧めのブラッシングモードと強さ設定の変更方法については「ブラシヘッド認識機能」の項(P9)を参照してください。



Philips  
Sonicare

## アプリの 使いかた

ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナルでは、お持ちのスマートフォンと連携し、Philips Sonicareアプリをご利用いただくことができます。本アプリは、ブラッシングが不足している箇所をお知らせするなど、患者様一人ひとりに合った上手なオーラルケアの方法とコツをお知らせします。理想的なオーラルケアのため、Philips Sonicareアプリをぜひご活用ください。



プログレス画面

### アプリ 使用上のご注意

- ※最新の対応OSはウェブの製品ページよりご覧いただけます。
- ※タブレットではお使いになれません。
- ※一部の機種では正常に動作しない場合があります。
- ※App StoreもしくはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることをご確認ください。

### Philips Sonicareアプリをダウンロード

- 1 スマートフォンでApp StoreもしくはGoogle Playにアクセスし、「Sonicare」と検索して、Philips Sonicareアプリをダウンロードします。
- 2 アプリを起動します。
- 3 画面の指示に従い、ログイン画面までお進みください。

### MyPhilipsアカウントを作成

Philips Sonicareアプリをご使用いただくには、MyPhilipsアカウントが必要です。

- 1 ログイン画面の一番下のエリアをタップし、お住まいの地域を選択してください。
- 2 指示に従ってアカウントの作成を行ってください。

※ MyPhilipsアカウントをお持ちの方は、「MyPhilips」ボタンからログインしてください。

※ FacebookかGoogle+のアカウントをお持ちの方は、いずれかを選択してログインいただくことで、SNSアカウントの情報を元にMyPhilipsアカウントが自動的に作成されます。

### ご自身の情報を登録

表示される質問に沿って、ご自身のプロフィールとオーラルケアに関するご要望を登録してください。

### ハンドルをアプリに接続

- 1 スマートフォンのBluetooth®設定がONになっていることを確認してください。
- 2 プログレス画面右上の「歯を磨く」をタップし、ブラッシング画面にします。
- 3 ハンドルを充電器から外し、モード・強さボタンを押してハンドルを待機状態にし、アプリと接続します（ブラッシング画面では、ハンドルは自動的にアプリに接続されます）。2回目以降は、アプリを起動するとプログレス画面から始まります。右上の「歯を磨く」をタップしてハンドルを接続し、お使いください。
- 4 画面の指示に従って、歯を磨いてください。

※データ通信をスムーズに行うため、ブラッシング中はスマートフォンをハンドルの近くに置いてください。

# 目次

● はじめに	ブラシヘッド認識機能について ..... 1
	アプリの使いかた ..... 2
	目次 ..... 3
	必ずお守りください ..... 4~7
	各部の名称 ..... 8
	アクセサリーについて ..... 9
	保管のしかた ..... 10
● ご使用方法	充電のしかた ..... 11・12
	ブラシヘッドの使いかた ..... 13・14
	上手なみがきかた ..... 15
	ブラッシングモード設定 ..... 16
	ブラッシングモードについて ..... 17~19
	便利な機能 ..... 20・21
	お手入れのしかた ..... 22
● 廃棄について	製品を廃棄するとき ..... 23・24
● 困ったとき	故障かな?と思ったら ..... 25・26
● 保証	保証とアフターサービス ..... 27
証	仕様 ..... 28
	無償修理規定 ..... 30
	保証書 ..... 最終ページ

# 必ずお守り ください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

## 安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

○絵表示について

	<b>危険</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。
	<b>警告</b> 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
	<b>注意</b> 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

-  ・△記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意事項（左図の場合は高温注意）を示します。
-  ・○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。
-  ・●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

## 危険



禁止

- 下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。
  - \*ペースメーカー等の体内挿込型医療機器
  - \*人工心臓等の生命維持用医用電気機器
  - \*心電計や点滴器等の装置型の医用電気機器医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。
- 本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。

**警告**

-  ●製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はソニックアーコール(0120-418-608)にご相談ください。
-  ●お手入れの際は必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。
-  ●ハンドルを充電するときは、専用の充電器以外では行わないでください。また専用の充電器で他の製品を充電しないでください。
-  ●充電器底面に表示されている電源以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込めようとしないでください。
-  ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。
-  ●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。
-  ●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
-  ●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電、けがに至るおそれがあります。
-  ●製品が破損した場合(ブラシヘッド、ハンドルまたは充電器)は、直ちに使用を中止してください。本製品には、修理できない部品が含まれています。破損した場合は、ソニックアーコール(0120-418-608)にご相談ください。
-  ●充電器の電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●充電器の電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、充電器を熱したものの上に置いたり、屋外で使用しないでください。電源コードが破損し、火災・ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器を交換する場合は、必ず専用の充電器と交換してください。
-  ●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をバスタブ、洗面台、流し台などの水まわりに置いたり、水まわりの近くに保管しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をお手入れした後は、完全に乾く前に電源コンセントに接続しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。
-  ●本製品は、歯、歯ぐきおよび舌の洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。
-  ●自分で意思表示ができない人(幼児を含む)に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やけがの原因になります。

**⚠ 注意**


- ハンドルを充電する場合は、磁性金属の上で充電しないでください。充電効率が下がります。
- お子様ご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。
- ブラシヘッドは家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因になります。
- 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。熱くなり、やけどの原因になります。
- 歯や歯ぐきにブラシヘッドを強くあてたり、1カ所に長くあてすぎたりしないでください。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。
- 充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- 充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- 収納時に電源コードを充電器に巻きつけないでください。電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
- 器具用プラグにピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- ブラシヘッドのプラスチック部分を歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。
- 治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。
- 本製品は、食器洗浄機で洗浄・乾燥しないでください。

## 使用上のご注意

1. 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数の患者様に使用するためのものではありません。
2. 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合でも、ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。
3. 一般の口腔衛生用品を初めてご使用になる場合と同様、過去2カ月間に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。
4. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
5. 健康面で不安なことがある場合はご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。
6. 炭酸ナトリウム(ホワイトニング用歯磨き粉の一般的成分)を含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドを本体から外し、よく水洗いしてください。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。
7. 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアーク純正ブラシヘッド(別売り)をご使用ください。
8. ボタンを押すときは、指の腹でボタンの中心部を押してください。**爪で押すと故障**の原因となります。

本モデルでは、ブラシヘッドは別売りとなります。お買い求めの歯科医院で患者様のニーズ・口腔内の状況に合わせて推奨されたブラシヘッドをご購入・ご使用ください。

## 各部の名称




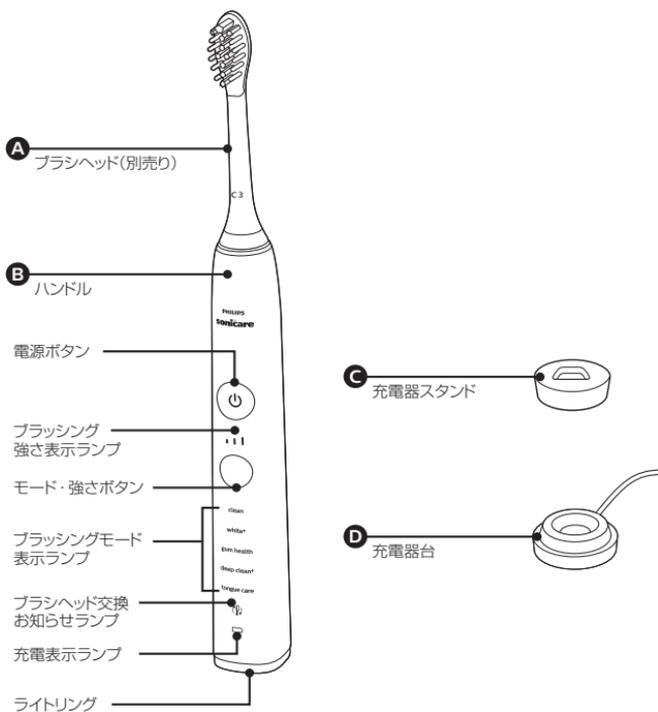


## アクセサリー について

本モデルでは、ブラシヘッドは別売りとなります。お買い求めの歯科医院で患者様のニーズ・口腔内の状況に合わせて推奨されたブラシヘッドをご購入・ご使用ください。

### ブラシヘッド認識機能

ご満足いただけるオーラルケアのために、目的に応じたブラシヘッドをご用意しています。それぞれのブラシヘッドには、お勤めのブラッシングモードと強さ設定が登録されており、ダイヤモンドクリーンスマート プロフェッショナルハンドルにセットすると、自動的に設定されます。ブラシヘッドをハンドルに取り付けたままブラッシングモードや強さを変更することで、お好みのブラッシングモード・強さ設定に登録を変更することができます。

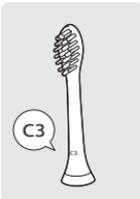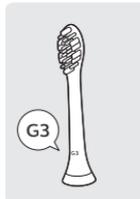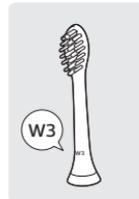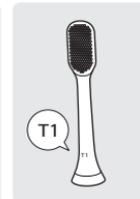			
プレミアムクリーン ブラシヘッド	プレミアムガムケア ブラシヘッド	プレミアムホワイト ブラシヘッド	舌磨き ブラシヘッド
クリーン (clean) / ディープクリーンプラス (deep clean <sup>+</sup> )	ガムヘルス (gum health)	ホワイトプラス (white <sup>+</sup> )	舌磨き (tongue care)
強	強	強	弱
■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■


※上記以外のラインナップのブラシヘッドをお使いになる場合、それぞれのブラシヘッドに選んだモードや強さが設定されます。

### ブラシヘッド認識機能 (最適なモードと強さを選択する機能)


ブラシヘッド認識機能とは、ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドをハンドル本体が認識し、登録された情報に基づいてブラッシングモードと強さが自動で選択される機能です。初めてお使いの際には、それぞれのブラシヘッドに登録されたお勤めのモードと強さがハンドルに自動的に設定されます。ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます。

## 保管のしかた (長期間使用しない場合)

1. 充電器の電源プラグをコンセントから抜き、お手入れを  
します(P22を参照してください)。

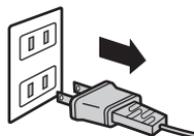

2. 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

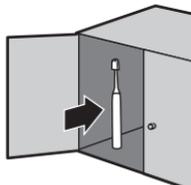

## 充電のしかた

この製品は通常24時間充電です。

満充電で約2週間使用できます。  
(1日2回、2分間使用した場合)

初めてお使いのときや半年以上使用していなかった場合は、充電を始めても充電表示ランプが点滅しないことがあります。このような場合でも、数分後に充電表示ランプが点滅し始めますので、そのまま充電してください。

※本製品は、ご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。



※24時間経過しなくても充電が完了することがあります。

※ご使用後は、ハンドルを常に充電器スタンドの上に立てて充電してください。

※充電器は、水で濡れたところや水がかかるところに置かないでください。

### 充電器スタンドで充電する場合

1. 充電器台に充電器スタンドをセットします。
2. 充電表示ランプが見えるようにハンドルを立て、充電器台の電源プラグをコンセントに差し込みます。

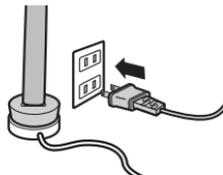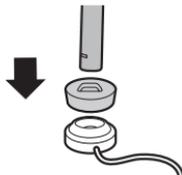

※充電中は、充電表示ランプが点滅します。

※充電中は、電源ボタンを押しても動作しません。

※ハンドルを充電器スタンドに置くだけで充電できます。

※動作中にハンドルを充電器スタンドに置くと、動作を停止します。



#### 注意

充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

## [ 充電表示について ]

▶ 充電催促表示	▶ 充電中	▶ 充電完了
		
<p>充電残量が少なくなると、充電表示ランプがオレンジ色に点滅し、ブラッシングの最後にピープ音が3回鳴ります。電池残量がなくなると、電源ボタンを押したときにピープ音が5×2回鳴ります。</p>	<p>充電中はランプが点滅、充電が完了すると点灯し、約30秒経過するとランプが消えます。満充電後は、目安として2分間のブラッシングモードを1日2回使用した場合約2週間使うことができます。</p>	



### 注意

- 充電器底面に表示されている電源以外は、使用しないでください。
- 専用の充電器のみを使用してください。
- 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。

※他の製品やソニックアークの他モデルの充電は、行わないでください。

※充電中は本体および充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

※使用期間の経過による充電電池の劣化に伴い充電後の使用回数は減少する場合があります。

## ブラシヘッドの 使いかた

※ブラシヘッドは別売りです。

### \*ブラッシングのコツ

性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯と歯ぐきに対して45度の角度で軽くあててブラッシングしていただくのがコツです。



### 注意

ブラッシングの際は、本製品の動きに任せてください。力を入れて押しあてたりこすったりすると、正しく歯を磨くことができなったり、故障の原因になることがあります。

### ブラシヘッドの取り付け／取り外し

#### [取り付けかた]



ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシヘッドの向きをそろえ、ブラシヘッドが止まるまで金属シャフトにヘッドをしっかり差し込んで取り付けます。



※ブラシヘッドとハンドルの間には、わずかなすき間があります。

#### [取り外しかた]



ハンドルをしっかりと握って固定し、ブラシヘッドを真上に引き抜いて取り外します。


### 基本的な使いかた

1. ブラッシングモードに適したブラシヘッドをハンドルに取り付けます。

各ブラッシングモードにお勧めのブラシヘッドについては、「ブラッシングモードについて」(P17)を参照してください。



2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。  
お好みにより、歯磨き粉を付けます。

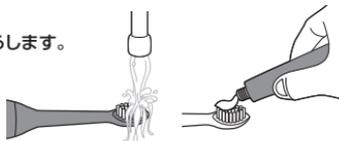


- ソニックアークを初めてお使いいただくと、少しすぐたく感じることや振動が強く感じられることがあります。お使いいただくにつれて慣れていきます。
- ソニックアークの動きに任せてください。力を入れてこすったりすると、逆効果です。
- 1日2回のブラッシングをお勧めします。

**3. ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に角度(45度)をつけて、隙間が空かないようにあてます。電源ボタンを押して電源をONにします。**

※ブラシヘッドを歯にあてる力が強すぎると、振動の変化(および振動音のわずかな変化)やライトリングの点灯でお知らせします。「過圧防止センサー機能」(P21)を参照してください。

※ブラシの中央部が常に歯にあたるようにしてブラッシングしてください。

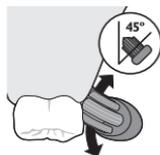

**4. 歯にブラシヘッドを軽くあてて、同じ箇所です約2秒間ずつブラッシングしてください。**

※効果的なブラッシングをするために、この要領で口腔内全体をブラッシングしてください。

※ブラシ毛が広がる場合があります。ブラシヘッドで歯を強く磨かないでください。




**5. 歯の裏側をブラッシングするときは、ハンドルを立てるようにしてブラシをたてにあて、垂直方向に何度かブラッシングします。**



**6. ブラッシング後は、水で口をゆすぎます。**

## 上手なみがきかた

効果的に歯を磨くために、以下のポイントにご注意ください。

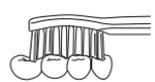効果的なブラッシング方法			
<b>歯と歯ぐきの境目</b>  <p>45°</p> <p>ブラシを斜め(45度)にあててください。</p>	<b>奥歯の奥</b>  <p>ブラシを少し立てるようにあててください。</p>	<b>かみ合わせ</b>  <p>かみ合わせ面に対して垂直にあててください。</p>	<b>前歯の裏側</b>  <p>ブラシをたてにあててください。</p>
<b>歯の表側</b>  <p>45°</p> <p>ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。</p>		<b>奥歯の裏側</b>  <p>45°</p> <p>ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。</p>	

### ポイント

- ・歯磨き粉をお使いになる場合は、歯磨き粉が周囲に飛び散ることを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源をONにしてください。
- ・本製品の性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽くあててブラッシングしてください。
- ・ブラシペーサー機能により口腔内を均等にこまかくブラッシングできます。「ブラシペーサー機能」(P20)を参照してください。
- ・本製品を初めてお使いになる場合、人によっては、少しくすぐたく感じることや振動が強く感じられることがあります。お使いいただくにつれて慣れていきます。

### このような場合

#### ●歯列矯正装置をつけている方

- 歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を斜め(45度)にあてるようにして磨きます。
- 歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。

#### ●治療後の歯科補綴物

- 詰め物、クラウン、インプラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、何か異常を感じた場合は、歯科医師にご相談ください。


#### ■ブラシヘッド交換のタイミング

最良のブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。


## ブラッシング モード設定

### ブラッシングモード設定の切り替え

本製品にはブラッシングモードの選択機能があります。お好みに合わせてブラッシングモードを選択してください。

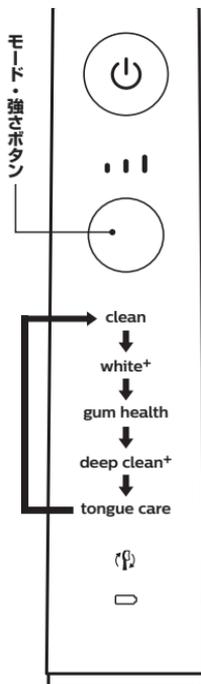

- 待機状態(ブラッシングモード表示ランプが点灯している状態)でモード・強さボタンを押すごとに、1つずつブラッシングモードが切り替わります。選択されたブラッシングモードが点灯します。
- ONの状態(ブラッシング中の状態)でモード・強さボタンを押すと、モード設定が切り替わらずに、ブラッシングの強さが変わります。ブラッシングの強さ設定についてはP19「強さ設定」の項を参照してください。

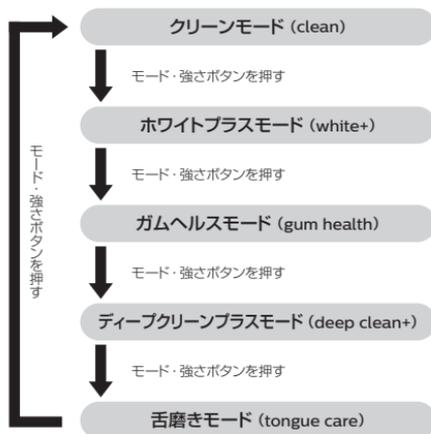

※ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更するとハンドルがそのモードや強さを記憶し、次に同じブラシヘッドを取り付けた際、そのモードに設定します。

## ブラッシングモード について

本モデルでは、ブラシヘッドは別売りとなります。お買い求めの歯科医院で患者様のニーズ・口腔内の状況に合わせて推奨されたブラシヘッドをご購入・ご使用ください。

口腔内を均等にくまなくブラッシングするために、歯磨き時間の区切りをピープ音とブラシの振動を一時停止することでお知らせします。この機能をブラシペーサー機能といいます。ブラッシングモードにより、ブラッシング中にブラシペーサー機能がお知らせする間隔が異なります。


※ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドを取り付けると、ハンドルがブラシヘッドのタイプを認識し、ブラシヘッドごとに適したブラッシングモードを設定します。ブラシヘッド取り付け後にモード・強さボタンを押してブラッシングモードや強さを変更すると、ブラシヘッドにそのモードや強さが記録され、次に同じブラシヘッドを取り付けた際、そのモードや強さが自動的に選択されます。初期設定に戻したい場合は、各ブラッシングモードのお勧めのブラシヘッドを参照して設定しなおしてください。

### クリーンモード (clean)

歯垢をしっかり落とす、通常のブラッシングモードです。

ブラッシング時間	2分
お勧めの強さ設定	強
お勧めのブラシヘッド	プレミアムクリーンブラシヘッド

1. 上あご右側(①)の歯の表裏を20秒間ブラッシングします。
2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。

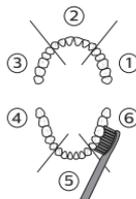


※20秒間隔でピープ音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

### ホワイトプラスモード (white+)

歯の表面のステイン(着色汚れ)を落とす動作(2分間)の後に、歯を磨きあげ光沢を与えます(40秒間)。

ブラッシング時間	2分40秒
お勧めの強さ設定	強
お勧めのブラシヘッド	プレミアムホワイトブラシヘッド


1. 上あご右側(①)の歯の表裏を20秒間ブラッシングします。
2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。

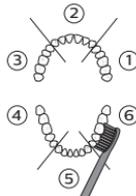

※20秒間隔でピープ音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

3. 口腔内すべて(①～⑥)のブラッシングが終わると、磨きあげのための振動に切り替わります。
4. 磨きあげのための振動に切り替わったら、上あご表側(②)を20秒間ブラッシングします。
5. 下あご表側(⑤)を20秒間ブラッシングします。

※20秒間隔でピー音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。  
 ※磨きあげのための振動に切り替わると、使用感や振動音が変わります。

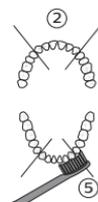


### ガムヘルスマード (gum health)

歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き(2分間)の後に、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます(1分20秒間)。


ブラッシング時間	3分20秒
お勧めの強さ設定	強
お勧めのブラシヘッド	プレミアムガムケアブラシヘッド

1. 上あご右側(①)の歯の表裏を20秒間ブラッシングします。
2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。
3. 口腔内すべて(①～⑥)のブラッシングが終わると、歯ぐきケアのための振動に切り替わります。
4. 歯ぐきケアのための振動に切り替わったら、上あご右側奥歯(①)の表裏を20秒間ブラッシングします。
5. 上あご左側奥歯(③)と、下あご右側奥歯(④)と、下あご左側奥歯(⑥)の各表裏を20秒間ブラッシングします。

※20秒間隔でピー音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。  
 ※歯ぐきケアのための振動に切り替わると、使用感や振動音が変わります。

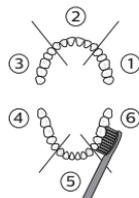

※20秒間隔でピー音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

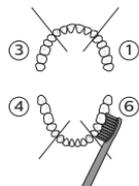

## ディープクリーンプラス モード (deep clean+)


歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とします。

※ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。

### 【Philips Sonicareアプリを使用しない場合】

ブラッシング時間	3分 (ブラシベーター機能が30秒ごとにお知らせ)
お好みの強さ設定	強
お好みのブラシヘッド	プレミアムクリーンブラシヘッド、 プレミアムガムケアブラシヘッド、 プレミアムホワイトブラシヘッド

1. 上あご右側(①)の歯の表裏を30秒間ブラッシングします。
2. 上あご前側(②)へ移動し、順に③から⑥までの口腔内を均等にブラッシングします。

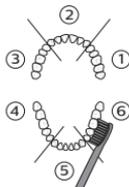

※30秒間隔でピープ音が鳴り、移動のタイミングをお知らせします。

### 【Philips Sonicareアプリを使用する場合】

ブラッシング時間	2分 (ブラシベーター機能が20秒ごとにお知らせ)
お好みの強さ設定	強
お好みのブラシヘッド	プレミアムクリーンブラシヘッド、 プレミアムガムケアブラシヘッド、 プレミアムホワイトブラシヘッド


※Philips Sonicareアプリのガイドに従ってブラッシングしてください。Philips Sonicareアプリについては、「アプリの使いかた」(P2)を参照してください。

## 舌磨きモード (tongue care)

舌のお手入れををするときに使用します。

ブラッシング時間	1回 20秒
お好みの強さ設定	弱
お好みのブラシヘッド	舌磨きブラシヘッド

1. 舌磨きブラシヘッドの凸凹部分を水で濡らし、舌にあてて前後に動かします。
2. 口をすすぎ、さらに2回同様にお手入れします。

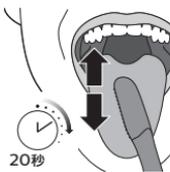


※舌の奥は不快感を感じない範囲でお手入れしてください。

※マウスウォッシュをご使用になる場合、ミリスチン酸イソプロピル、高濃度の精油を含むマウスウォッシュは劣化の原因となりますので、ご使用をお控えください。

## 強さ設定

ブラッシングの振動の強さをお好みの強さに調節できます。

振動の強さは、3段階(弱、中、強)に調節できます。

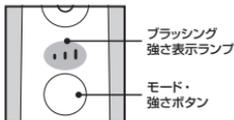

※ハンドルにブラシヘッド認識機能対応ブラシヘッドを取り付けると、ハンドルがブラシヘッドのタイプを認識し、ブラシヘッドごとに適したブラッシングの強さを設定します。

※ブラッシング強さ表示ランプで、設定された強さを確認できます。

※強さ設定を変更する場合は、ブラッシング中にモード・強さボタンを押してください。ハンドルがOFFまたは待機状態のときは強さ設定を変更できません。

※効果的にブラッシングするために、ブラッシングモードごと推奨する強さ設定でのご使用をお勧めします。

## 便利な機能

### イージースタート機能（振動に慣れていたがための機能）

イージースタート機能とは、通常より弱い振動からお使いいただき、ご使用回数に合わせ段階的に振動を強めていく機能です。本製品を使用して、ブラッシングの振動が強いと感じた場合は、イージースタート機能をご利用ください。本製品を初めてお使いいただいてから15回目のブラッシングで通常の強さの振動になります。

※工場出荷時の設定では、イージースタート機能はOFFになっています。

※イージースタート機能は、舌磨きモードではご利用できません。

※14回目のブラッシングまでは、必ず最低1分間の歯みがきを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

※本製品本来の歯垢除去効果が損なわれますので、慣れるための最初の準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはお勧めしません。

**【イージースタートのONおよびOFF設定】** ※イージースタート機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器スタンドに置いた状態で行ってください。  
**充電器台に充電器スタンドをセットします。**

**充電器スタンドにハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。**

#### ●イージースタート機能をONまたはOFFにする

モード・強さボタンを押しながら電源ボタンを1回押して指を離します。

ピープ音が2回鳴るとON、1回鳴るとOFFの設定になります。

この操作を行うたびにONとOFFが切り替わります。

### スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）

スマートタイマー機能は、設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。

設定された時間のブラッシングサイクルの最中でブラッシングを停止したい場合は電源ボタンを押してください。設定された時間の動作中に電源をOFFにしても30秒以内に電源ボタンを押すと残ったブラッシングサイクルを実行します。下記の場合はスマートタイマーがリセットされます。

・ブラッシングを30秒以上中断した場合

・ハンドルを充電器にセットした場合

ブラッシング時間の設定詳細については「ブラッシングモードについて」(P17)を参照してください。

※米国の歯科専門家は1日2回各2分間のブラッシング時間を推奨しています。

### ブラシペーサー機能（時間の区切りをピープ音でお知らせする機能）


ブラシペーサー機能とは、ブラッシングの区切りをピープ音（「ピー」という音）とブラシの振動の一時的停止でお知らせする機能です。口腔内を均等にこまなくブラッシングすることができます。一定の間隔で短いピープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。口腔内を一定の間隔でブラッシングすることができます。

## 過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーにより、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎると、ブラッシングの振動が変わると同時にライトリングが紫色に点滅します。

過圧防止センサー機能のお知らせがあった場合は、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。ライトリングが消灯し、ブラッシングの強さが通常状態に戻ります。

※工場出荷時の設定では、過圧防止センサー機能はONになっています。

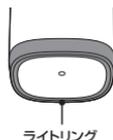

ライトリング

**【過圧防止センサー機能のONおよびOFF設定】** ※過圧防止センサー機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器スタンドに置いた状態で行ってください。

充電器台に充電器スタンドをセットします。

充電器スタンドにハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。

### ●過圧防止センサー機能をONまたはOFFにする


モード・強さボタンを押しながら電源ボタンを2回押して指を離します。  
ピープ音が2回鳴るとON、1回鳴るとOFFの設定になります。  
この操作を行うたびにONとOFFが切り替わります。

## ブラシヘッド交換お知らせ機能（ブラシヘッドの交換時期をお知らせする機能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能とは、ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したときは、ブラシヘッドを交換してください。お口の健康と最適なブラッシング効果を保つため、ブラシヘッドの交換時期をお守りください。

※工場出荷時の設定では、ブラシヘッド交換お知らせ機能はONになっています。

※ブラシヘッド認識機能がついたブラシヘッドのみでお使いいただける機能です。

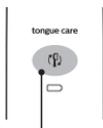

ブラシヘッド交換お知らせランプ

**【ブラシヘッド交換お知らせ機能のONおよびOFF設定】** ※ブラシヘッド交換お知らせ機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器スタンドに置いた状態で行ってください。

充電器台に充電器スタンドをセットします。

充電器スタンドにハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。

### ●ブラシヘッド交換お知らせ機能をONまたはOFFにする

モード・強さボタンを押しながら電源ボタンを3回押して指を離します。  
ピープ音が1回鳴るとON、2回鳴るとOFFの設定になります。  
この操作を行うたびにONとOFFが切り替わります。



**注意**

本製品はすべて食器洗浄器や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。

## お手入れのしかた

※ブラシヘッドは別売りです。

### ハンドル

1. ブラシヘッドを外して、金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してください。



※歯磨き粉などをきれいに洗い流してください。

※金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さないようにしてください。破損する可能性があります。

2. ハンドル表面を布で全体的にむらなく拭いてください。



### ブラシヘッド

1. ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い、自然乾燥させてください。



2. ハンドルからブラシヘッドを外して、接合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗浄してください。



●最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3か月ごとにブラシヘッドを交換してください。

●ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯した場合や破損の兆候が見えた場合は、速やかにブラシヘッドをお取り換えください。

●最良の効果を得るためにフィリップスソニッカー純正ブラシヘッドをご使用ください。

●本ハンドルはブラシヘッド認識機能対応以外のブラシヘッドもご使用いただけますが、ブラシヘッド認識機能、ブラシヘッド交換お知らせ機能はご利用になれませんのでご注意ください。

### 充電器台・USB充電トラベルケース

1. お手入れの前に、必ず充電器台の電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. 充電器台の表面を湿らせた布で拭き、柔らかいタオルで水分を拭き取ってください。



**注意**

●ハンドル、充電器台は、絶対に液体の中に入れてください。



**注意**

お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用すると変色、変形の原因になります。絶対に使用しないでください。充電器をお手入れする際は、電源コード・プラグも調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、ソニッカーコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

## 製品を廃棄するとき

### 製品のリサイクルについて

環境保護のため、本製品を廃棄するとき是一般家庭ごとと一緒に廃棄せず、リサイクル協力店などにお持ちください。

### リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従いリサイクルにご協力ください。



注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドルを分解しないでください。
- 一度分解したハンドルは安全上の理由から、絶対に再使用しないでください。
- 完全に放電してから、充電電池を取り外してください。
- 作業を行う際は、目、手、指などけがのないよう注意してください。
- 作業台に備が付くおそれがあります。必要に応じ表面の保護などを行ってください。

### 充電電池の取り外しかた

- ・充電電池を取り外すときは、タオルまたは布、ハンマー、マイナスドライバーをご用意してください。
- ・必ず以下の手順に従って安全に作業を行ってください。


1. ハンドルを充電器から取り出し、電源ボタンをONにして完全に動作しなくなるまで電池を放電します。

※何度もこの手順を繰り返して、完全に動作しなくなったことをご確認ください。

3. 片手でハンドルの上部を持ち、ハンドルの底から約1.5cmの位置をハンマーで叩きます。ハンドルを回転させながら、四方向から強く叩いて底のキャップを外します。


※キャップ、ハンドル内側の留め具が外れるまで、繰り返し叩いてください。

2. ブラシヘッドは外して廃棄し、ハンドル全体をタオルか布で包みます。

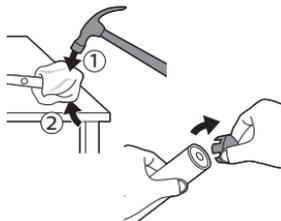


4. ハンドルの上下を逆さまにして持ち、表面が顔丈で安定した場所でシャフトを押し下げます。

※ハンドル内部の部品を取り出せない場合は、「3」の動作を繰り返して、部品を取り出してください。

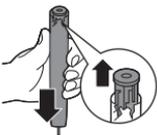


5. ゴム電池カバーを外します。

6. 充電電池と内部部品の底の黒い枠との間にマイナスドライバーの先を入れ、こじ開けて充電電池を離し、黒い枠を壊します。

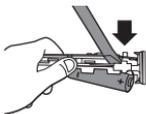


7. 充電電池の底と黒い枠の間にマイナスドライバーの先を差し込み、充電電池と緑色の回路基板の接続部にある金属タブを壊します。これで黒い枠から充電電池の底が外れます。

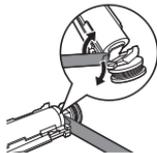

8. 充電電池をハンドル内部部品から引き出し、もう一方の充電電池タブを壊します。

※充電電池タブの先端は鋭く尖っています。指などをケガさないよう注意してください。

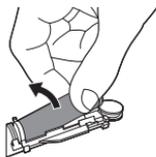

9. ショートしないように充電電池の端子をテープで覆い、充電電池を廃棄します。



※充電電池の残量がある場合はショートを起こす可能性があります。

※取り出した充電電池はリサイクル協力店などに持ち込み、残りの製品部分は各自自治体の処理方法に従い適切に廃棄してください。

※取り出した充電電池は⊕、⊖端子をショートさせないように注意してください。

※充電電池の交換はできません。

## 故障かな?と 思ったら

故障かな?と思ったら  
お調べください。

### 作動しない。

- 充電残量をご確認ください。詳しくは「充電表示について」(P12)を参照してください。
- コンセントに充電器の電源プラグがきちんと差し込まれていることを確認してください。
- ブラシヘッドが金属シャフトにしっかりと差し込まれていることを確認してください。ブラシヘッドが古く接続部が摩耗している場合には、新しいブラシヘッドに交換してください。

### 動作がおかしい(例:動きにムラがある、ブラッシング中にブラッシング力が弱くなった)。

- 充電残量が少なくなっている可能性があります。24時間充電してください。

### 充電しても数分しか使えない。

- 充電時間が短い可能性があります。24時間充電してください。

### ブラッシングの力が弱く感じる。

- ブラシヘッドを押しあてすぎると、ブラシの振幅が小さくなります。ブラシヘッドは歯に軽くあてるようにしてください。
- イージースタート機能が働いている可能性があります。詳しくは「イージースタート機能」(P20)を参照してください。
- 充電が不十分な場合もあります。再度24時間充電してください。
- ブラシヘッドが消耗していないかご確認ください(使用頻度、使用方法により異なります)。

### ブラッシング中、一瞬毛先の動きが止まる。

- ブラシペーサー機能により、口腔内を均等にくまなく磨けるよう一定の間隔でビーブ音が鳴り、ブラシヘッドの振動が一瞬止まります。詳しくは「ブラシペーサー機能」(P20)、「ブラッシングモードについて」(P17)を参照してください。

使い始めてから20秒～3分程度でブラシヘッドの動作が止まる。.....

- スマートタイマー機能により、電源を入れてから1～3分経過すると自動的に動作が止まります。詳しくは「スマートタイマー機能」(P20)を参照してください。
- ブラッシングモードにより、ブラッシング時間が異なります。詳しくは「ブラッシングモードについて」(P17)を参照してください。

ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がる。.....

- ブラシを斜め(45度)にあててください。詳しくは「上手なみがきかた」(P15)を参照してください。

変なにおいがする。.....

- ハンドル、ブラシヘッド、充電器台、充電器スタンドをお手入れしてください。「お手入れのしかた」(P22)を参照してください。

### Bluetoothが繋がらない。

- スマートフォンのBluetoothの設定がオンになっているか確認してください。設定についてはお使いのスマートフォンの取扱説明書を参照してください。
- ハンドルのランプが光り、待機状態になっているかを確認してください。待機状態になっていない場合、モード・強さボタンを1回押してハンドルを待機状態にしてください。
- 複数のBluetooth機器をお使いになっている場所、電子レンジを使用中の周辺、その他電磁波が発生している場所では、本製品は正常に動作しない場合があります。周辺の機器をお切りになるなどして、改めて接続をお試しください。
- スマートフォンに既に複数の製品がBluetoothで接続されている場合には、つながりにくくなる場合があります。他の機器の接続を解除し、改めて接続をお試しください。

※本アプリはタブレットではお使いいただけません。

以上をお試しいたいても接続できない場合、その他アプリについてのお問い合わせは、アプリの「サポート」を参照いただくか、下記までお問い合わせください。

**0120-418-608** (受付時間 9:00～18:00、土・日・祝日及び年末年始を除く)

\* 以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、ソニックアーコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

## 保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて  
(必ずお読みください)

### 〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証書は、本製品を購入された方のみ適用されます。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売歯科医院名」等の記入をお確かめのうえ、販売歯科医院から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
------	-------------

### 【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ソニックアーコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

### 【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検してください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、ハンドルと充電器をセットでソニックアーコール(0120-418-608)へご依頼ください。

### 【保証期間中は】

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
- 保証書の規定に従って修理させていただきます。

### 【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有償で修理させていただきます。

### 【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。

### 【患者様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けました患者様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日		便 利 メ モ	TEL. ( )
			お買い上げ 歯科医院名	

ご使用の時のような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感ずる。
- ごげくさい臭いが出る。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

長年ご使用の音波歯ブラシの点検を!



このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源プラグをコンセントからはすして、必ずソニックアーコールにご相談ください。

愛情点検

## 仕 様

品 名	充電式電動歯ブラシ
形 名	フィリップス ソニックアー タイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナル
品 番	HX9949/09
ハンドル 品番	HX993W
充電器 品番	CBA1001
質量(ハンドル)	約137g
定 格 電 圧	AC100V~240V、50/60Hz
ブラシ振動数	約31,000ストローク/分
充 電 時 間	約24時間
使 用 時 間	満充電後、通常使用(目安として)(2分間のブラッシングを1日2回)で約2週間
使用充電電池	リチウムイオン電池(Li-ion)
消費電力	充電器台:1.3W

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

### ● ブラシヘッド ●

- 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。
- 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアー純正ブラシヘッドをご使用ください。

- ソニックアーの修理受付はソニックアーコールが承ります。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

ソニックアーコール  
受付時間 9:00~18:00  
(土・日・祝日及び年末年始を除く)

**0120-418-608**

製造元

**Philips Oral Healthcare, LLC.**

22100 Bothell Everett Hwy  
Bothell, WA 98021 U.S.A.

**株式会社 フィリップス・ジャパン**

〒108-8507  
東京都港区港南2-13-37 フィリップスビル



## 無償修理規定

### 〈無償修理規定〉

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無償修理します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、ソニックアークール(0120-418-608)にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
  - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑤本書の提示がない場合。
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、患者様名、販売歯科医院名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって患者様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ソニックアークール(0120-418-608)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※患者様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス ソニックアー ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナル 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無償修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、ソニックアーコールに修理をご依頼ください。

患者様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品名	充電式電動歯ブラシ
形名	フィリップス ソニックアー ダイヤモンドクリーン スマート プロフェッショナル
品番	HX9949/09
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル、充電器台(充電器用スタンドは除く)
お買い上げ日	年 月 日
患者様	ご住所〒
	ご芳名
	電話番号
★販売歯科医院	歯科医院名・住所・電話番号

★ ご販売歯科医院様へ

この保証書は患者様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印して患者様にお渡しくください。

お問い合わせ 修理のご依頼は

ソニックアーコール  
受付時間 9:00~18:00  
(土・日・祝日及び年末年始を除く)

**0120-418-608**

株式会社 フィリップス・ジャパン

この印刷物は再生紙を使用しております。



4235.021.7496.1 (01/19)

© 2019 Koninklijke Philips N.V.(KPNV) All rights reserved.  
記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。  
Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。

キリトリ線

キリトリ線