



FSC

© 2022 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
3000.099.1816.1
(2022-09)

סמל זה מציין שהציוד עומד בדרישות הבטיחות המפורטות עבור צייד II Class II.



סמל זה מציין שהציוד מתאים לזרם ישיר בלבד.



סמל זה מציין שאין להשתמש במקשר סיב העיניים וליד הגבות.



סמל זה אומר: "אל תשתמשי במקשר זה באמבטיה, במקלחת או במאגר מלא במים".



סמל זה אומר שהשנאי מתוכנן להיות עמיד בפני קוצר חשמלי.



סמל זה אומר שהשנאי נחשב לייחدة (SMPS) . Switch Mode Power Supply



סמל זה אומר שהמקשר מיועד לשימוש פנימי.



סמל זה מציין את טופורטת הסביבה המקסימלית שבה ניתן להפעיל את השנאי בנסיבות בתנאי שימוש רגילים.



סמל מיזור לזיהוי החומר ממנו עשוי פריט, כדי להקל על מיזור או עיבוד אחר חדש. הסמל עשוי לכלול מספר / או קיצור.



סמל זה מזהה את המ tangent או עדמת המתג שבאמצעות מושך חלק מהציוד על מנת להכניסו למצב המתנה, ולחזות את הבקרה למעבר או כדי לציין מצב של צricht חשמל נמוכה.



סמל זה מציין את ההגנה מפני חידרת עצמים זרים מוצקים $\leq 12.5 \text{ mm}$ ונגד השפעות מזיקות עקב חידרת מים מטיפות בהטיה ב-15 מעלות.



סמל זה מציין את ההגנה מפני חידרת עצמים זרים מוצקים $\leq 2.5 \text{ mm}$ וכי אין הגנה להשפעות מזיקות עקב חידרת מים.



סמל זה אומר שחפץ יכול להיות ממוחזר - לא שהחפץ עבר מיזור או יתקבל בכל מערכות איסוף המיזור.



סמל זה מציין EEE, פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוני. אין להשליך פסולת של מוצרי חשמל עם הפסולת הבויתית. נא למיזור היכן שקיימים מתקנים. בדקי עם הרשות המקומית או הקמעונאי שלא לקבלת עצות מיזור (ראי 'מיזור').



הסמל של הנקודה הירוקה ('Der Grüne Punkt' בגרמנית). הנקודה הירוקה היא סמל הרישוי של רשות אירופית של מערכות במימון התעשייה למיזור חומרי הארצה של מוצרי צריכה.



סמל מצוין על מוצרים כדי לציין שם תואמים להנחיות האיחוד האירופי הרלוונטיות בנוגע לבריאות ובטיחות או להנגנת הסביבה.



תנאי הפעלה	תואמת למפרטים שלה כאשר הוא מופעל בשימוש רגיל בתנאי הפעלה הספציפיים הבאים:
5 עד 90% RH עד 35 מעלות צלזיוס עד 700 hPa עד 1060 hPa	5 עד 90% RH עד 35 מעלות צלזיוס עד 700 hPa עד 1060 hPa
אורכי גל הנפלטים	עד 1400 ננומטר עד 565
משך ההבקז	1 - 2.5 ms, עברו כל ההגדרות
מרווח בין הבזקים	בין 1 - 3.5 שניות תלויה בשימוש בסוללה/רשת החשמל
חשיפה אופטית	אביזר לגוף: 2.5 J/cm ² - 5.6 J/cm ² אביזר לבית השח: אביזר לביקוני: 6.5 J/cm ² - 2.5 J/cm ² אביזר לפנים: 6.5 J/cm ² - 2.5 J/cm ² אביזר לזרם: 5.9 J/cm ² - 2.4 J/cm ²
כנית מתאם	A 1.5 הרץ ~ 50/60Hz וולט 100-240
פלט מתאים	A 65.0 W 3.33 W וולט 19.5
יעילות פעילה ממוצעתה	≤ 88.0%
יעילות בעומס נמוך (10%)	≤ 79.0%
כrichtת חשמל ללא עומס	> 0.21 ב

תאימות אלקטרומגנטית - מידע תאימות

מכשיר זה עומד בכל התקנים והתקנות הרלוונטיים לגבי חשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

הסבר לנבי הסמלים

הסימנים והסמלים שמצוינים在此 להבטים שימוש במוצר באופן בטוטנו ונכוון ומטרתם להגן עליך ועל אחרים מפני פגעה. בהמשך אפשר למצוא את המשמעות של הסימנים והסמלים לאזהרה המופיעים בתווית ובמדריך למשתמש.

סמל זה מזהה את יצרן המוצר: Philips Consumer Lifestyle BV, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, הולנד.



סמל זה אומר שעלייך לקרוא בעיון את המדריך למשתמש לפני השימוש במכשיר. שמרי את המדריך למשתמש לעיון עתידי.



סמל זה אומר שהמשתמש צריכה לצריכה לעיין בהוראות השימוש למידע בטיחותי חשוב כגון אזהרות שלא ניתן למסיבות שונות, להציג על המכשיר עצמו.



סמל זה פירשו שלל המשתמשת לעיון בהוראות השימוש למידע בטיחותי חשוב כגון התוויות נגד ואזהרות שלא ניתן, מסיבות שונות, להציג על המכשיר עצמו.



סמל זה מזהה את המספר הסידורי של היצרן.



סמל זה מזהה את המספר הקטלוגי של היצרן.



בעיה	סיבה אפשרית	פתרונות	לא נדרשת כל פעולה: אין פילטר באביזרים לנוף ולבית החש. רק באביזרים לפנים ולביקיני יש פילטר מיוחד.
תגובה העור לאחר הטיפול נמשכת זמן רב מהרגיל.	השתמשת בהנדרת עצמת או רחבי בעצמה נמוכה יותר בפעם הבאה.	גבוהה מדי עבור.	זה תקין.
הברקן מארוד בהיר בעניין משקפי מגן?	האור המפוזר שמאפיק המכשיר אינוழק לעינים שלך. להרכיב משקפי מגן במלול השימוש. השתמשי במכשיר בחדר מואר היטב כדי שהאור יהיה פחות בוולעינים. הקפידי ליצור מגע טוב עם העור כדי למנוע פיזור אוור.	לא Philips Lumea לא פוגעת בעינים שלך.	הברקן מארוד בהיר בעניין המשקפי מגן?
תוצאות הטיפול אינן משביעות רצון.	השתמשת בהנדרת עצמת או רחבי הנדרה גבוהה יותר בפעם הבאה.	נמוכה מדי עבור.	יש לשחרר את הבהיר קרוב אחד לשני וצריכה להיות שטיפלת קודם לך.
הגוף שלך.	המכשיר אינו יעל על צבע שיער אם לך שיער בלונדי בהיר, אפור, אדום או לבן, הטיפול אינו יעיל.	לא הבזקמת איזור סמוך לאזורי חיפוי מסויימת בין הבהירים.	אם יש לך שיער בלונדי בהיר, אפור, אדום או לבן, הבהיר קודם לך.
בתדירות המומלצת.	כדי להסיר את כל השערות בהצלחה, אנו ממליצים לך לעקוב אחר לוח הזמן המומלץ. ניתן להפחית את הזמן בין טיפול לטיפול, אך און לטפל בתדירות גבוהה יותר מפעם שבועיים.	איןך משתמש במכשיר בתדירות המומלצת.	המשיכי להשתמש במכשיר לפחות 6 חודשים לפחות, מכיוון שצמיחה שיער מחודשת עידיין יכולה לרדת מהלך תקופה זו.
- IPL.	את מוגבה לאט יותר לטיפול - IPL.	-	-

אחריות ותמיכה

לקבלת מידע או תמיכה, מומלץ לבקר באתר [c_w/support-home.html](https://www.philips.co.il/c_w/support-home.html)

מיחזור



סמל זה מציין שאין להשליך מוצר זה עם הפסולת הבויתית הרגילה (19/2012/EU). יש לצית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים ואלקטרוניים. השלכה נאותה עוזרת למנוע השפעות שליליות על הסביבה ועל הבריאות.

מפורט טכנים

eaumea נשארת פעילה בשימוש רגיל במסגרת המפרט שלא לאחר הובלה או אחסון בטוחה הסבבתי הבא:

25 עד 70 מעלות צלזים עד 90 % RH, לא-עיבוי, 700 עד hPa 1060

תנאי הובלה ואחסון

בעיה	סיבה אפשרית	פתרונות
כאשר אני מנוחה את המCSIר על העור, הוא לא משחרר הבזקן. נורית ימוקן מהבהת בכתום.	גונן העור שלך באזורי המיעוד לטיפול כהה מדי.	טפלி באזורי גוף אחרים עם גונו עור בהירים יותר עם Lumea.
הנורית ימוקן להבזקן' מהבנתה בכתום וכל 5 נורות העוצמה מהבנתה גם כן.	יש לאפס את המCSIר.	כדי לאפס את המCSIר, הוציאו את התקע מהשלקע, המתני 30 דקות כדי לאפשר למCSIר להתקער. המCSIר אמרו לפועל שוב כרגל. במקרה זהה לא אעבוד שוב, צרי קשר עם מרכז שירות הליקוחות במדינה שלי.
נורית ימוקן להבזקן' אינה דלקת לבן.	המCSIר אינו במגע מלא עם העור שלך.	הנחי את המCSIר בזווית של 90 מעלות על העור כך שמערכת הבטיחות המשולבת תהייה במגע עם העור שלך.
המCSIר מפיק ריח מוזר.	חולון יציאת האור או חישון SmartSkin מוליכלים.	נק' את חלון יציאת אור וחישון SmartSkin בקפידה.
המCSIר לא מוחבב, המאויר לא מופעל וכל 5 נורות העוצמה מהבנתה.	לא הסרת את השערות באזורי שיש לטפל בו כראוי. שערות אלו עלולות להישרף ועלולות לגרום לריח.	טפלி בעור לפני השימוש ב- Lumea.
העור מרים רגש יותר מהרגיל במהלך הטיפול. אני חווה אי נוחות כאשר משמשת במכשייר.	הגדת עצמתה האור שבה את האזיר אינו מחובר כראוי.	נק' את המגעים האלקטרוניים באזיר.
העור מרים רגש יותר מהרגיל במהלך הטיפול. אני חווה אי נוחות כאשר משמשת במכשייר.	הגדת עצמתה האור שבה את האזיר אינו מחובר כראוי.	בדקי אם ברחת בהגדת עצמת אור נוכה. במידת הצורך, בחרי הגדרה נמוכה יותר.
מס肯 ה-VS של חולון יציאת האור שבור.	משתמשת גבואה מדי.	טפלி בעור לפני השימוש ב- Lumea.
טיפולת באזיר שהמCSIר לא מיועד לו.	ללא הסרת את השערות באזורי שיש לטפל בהם.	אם מס肯 UV שבור, אל תשתמשי במCSIר יותר. צרי קשר עם מרכז שירות הליקוחות במדינה שלך, סוכן פילופס או מרכז שירות של פילופס.
לעולם אל תשתמשי במCSIר באזירים הבאים: על שומנות, נמשים, ורידים גדולים, אזירים בעלי פיגמנטציה כהה, צלקות, חריגות בעור מוביל להתייעץ עם הרופא שלך. לעולם אל תשתמשי במCSIר על יבלוט, קעקועים או איזומה, כוויות, דלקות בזקיקן שיעיר, חתכים פתוחים, שפשופים, הרפס סימפלקס (כוויות קור), פצעים או נגעים והמתומות (חבותות) באזירים לטיפול.	טיפולת באזיר שהמCSIר לא מיועד לו.	לעולם אל תשתמשי במCSIר באזירים הבאים: עלי, שומנות, נמשים, ורידים גדולים, אזירים בעלי פיגמנטציה כהה, צלקות, חריגות בעור מוביל להתייעץ עם הרופא שלך. לעולם אל תשתמשי במCSIר על יבלוט, קעקועים או איזומה, כוויות, דלקות בזקיקן שיעיר, חתכים פתוחים, שפשופים, הרפס סימפלקס (כוויות קור), פצעים או נגעים והמתומות (חבותות) באזירים לטיפול.
הנורית, פ' הטבעת והלקם הפנימי של המחריות והאזורים. אסור לגברים לשמש בו על הפנים והאזורים כולל כל אזורי גידול הדקן ואזור איברי המין כולו. זה יכול לגרום לכויה ולשוני בצלע העור, מה שמקשה על זיהוי מחלות הקשורות לעור.	טיפולת המCSIר באזיר.	הנורית, פ' הטבעת והלקם הפנימי של המחריות והאזורים. אסור לגברים לשמש בו על הפנים והאזורים כולל כל אזורי גידול הדקן ואזור איברי המין כולו. זה יכול לגרום לכויה ולשוני בצלע העור, מה שמקשה על זיהוי מחלות הקשורות לעור.

טיפולות לוויני נדירות

כינוי, אדמניות ותר (למשל סביב זיקי שיער) ונՓוחות: תגבות אלו מתרחשות לעיתים רחוקות. הם תוצאה של שימוש בעוצמת אוֹר גבואה מדי לגונ העור שלך. אם תגבות אלו אין געלמות תוך 3 ימים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. המתיינו עם הטיפול הבא עד שהעור ירפא לחולמי והקפידי לשעתם בעוצמת אוֹר גבואה יותר. שניינו צבע העור: זה קורה לעתים רחוקות מאוד. שניינו צבע העור מותבṭא ככתם כהה יותר (היפרוגנומנטציה) או כתם בהיר יותר (היפרוגנומנטציה) מהאזור שמסביב. זהו תוצאה של שימוש בעוצמת אוֹר גבואה מדי לגונ העור שלך. אם שניינו הצבע לא געלם תוך שבועיים, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. אל טיפול באזורי דהוים עד שניינו הצבע נעלם והעור שלך חזר לנון העור המקורי שלו.

זהו גם עולמה ביובש בעור: תגבה זו מתרחשת לעתים רחוקות מאוד. במקרה שהתגובה ההוא עד שהעור ירפא לא נעלמת תוך חודש או יותר נסחיה יתור. שלחופיות (נואה כזו בועות קטנות על פני העור): זה קורה לעתים רחוקות מאוד. במקרה שהתגובה ההוא לא נעלמת תוך חודש או יותר נסחיה נדבק, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא. המתיינו עם הטיפול הבא עד שהעור ירפא לחולמי והקפידי להשתמש בעוצמת אוֹר גבואה יותר.

הצטלקות: לעתים קרובות ההשפעה המשנית של כויה, שכולה להימשך יוטר מחודש עד להחלה. פוליקוליטיס (נՓוחות סביב זיקי שיער בשילוב עם היוזרות פצעונים): תגבה זו מתרחשת לעתים רחוקות מאוד והיא תוצאה של חידרת חידקים לעור הפגוע. במקרה של תגבה זו, אנו ממליצים לך להתייעץ עם רופא שכן פוליקוליטיס עשויה להזדקק למשחה אנטיביוטי.

קאב: זה יכול להתרחש במהלך או לאחר הטיפול אם את משתמשת במכשיר על עור שאינו נטול שיער, אם את משתמשת במכשיר בעוצמת אוֹר גבואה מדי לגונ העור שלך, אם את מבזיקה באותו אזור יותר מפעם אחת ואם את משתמשת במכשיר על פצעים פתוחים, דלקות, זיהומים, קעוקעים, כוויות וכו'.

פתרונות בעיות

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון	השתמש במכשיר בסביבה מעט קרירה יותר / או תני לו להתקרר לפני המשך השימוש.	זה נורמלי שהמכשיר והמתאם מתחמם במהלך השימוש. במהלך השימוש.
בדקי אם האביזר מוחבר היטב. האביזר ב��rmת הצורן. במקרה שהאביזר מוחבר היטב ואפשר להפוך הבזקין עם המכשיר, פני למרכז הצרניים במדינה שלך, לשיווק של פלייפס או למרכז שירותות פלייפס.	זה נורמלי שהמכשיר והמתאם מתחמם במהלך השימוש. במהלך השימוש.	בדקי אם האביזר מוחבר היטב. האביזר בﬁrmת הצורן. במקרה שהאביזר מוחבר היטב ואפשר להפוך הבזקין עם המכשיר, פני למרכז הצרניים במדינה שלך, לשיווק של פלייפס או למרכז שירותות פלייפס.	בדקי אם האביזר מוחבר היטב. האביזר בﬁrmת הצורן. במקרה שהאביזר מוחבר היטב ואפשר להפוך הבזקין עם המכשיר, פני למרכז הצרניים במדינה שלך, לשיווק של פלייפס או למרכז שירותות פלייפס.	בדקי אם האביזר מוחבר היטב. האביזר בﬁrmת הצורן. במקרה שהאביזר מוחבר היטב ואפשר להפוך הבזקין עם המכשיר, פני למרכז הצרניים במדינה שלך, לשיווק של פלייפס או למרכז שירותות פלייפס.
ודאי שזרימת האוור הקירור של המא Orr אוֹר אינה חסומה.	זרימת האוור הקירור של המא Orr אוֹר אינה חסומה.	ודאי שזרימת האוור הקירור של המא Orr אוֹר אינה חסומה.	ודאי שזרימת האוור הקירור של המא Orr אוֹר אינה חסומה.	ודאי שזרימת האוור הקירור של המא Orr אוֹר אינה חסומה.

שימוש ב-Lumea Prestige לפני ואחרי השיזוף

שיזוף עם אוור שמש טבעי או מלאכותי



- חשיפה מכונת של העור לאור טבעי או מלאכותי במטרה לפתח שיזוף משפיעת על הרגניות והצבע של העור. לכן חשובים הדברים הבאים:
- לאחר כל טיפול יש להמתין לפחות 48 שעות לפני השיזוף. גם לאחר 48 שעות יש לוודא שהעור המטופל לא מראה עוד אדמנויות מהטיפול.
 - אם את חושפת את העור לשמש (לא שיזוף מכוון) ב-48 השעות שלאחר הטיפול, השתמשי בקרם הגנה SPF 50 על האזורי המטופלים. לאחר תקופה זו, ניתן להשתמש בקרם הגנה SPF 30 במשך שבועיים.
 - לאחר השיזוף, המתינו לפחות שבועיים לשימוש ב-Lumea ובצעו בדיקת עור. זה כדי לקבוע את הנדרת עצמת האור המתואמת.
 - אין להשתמש ב-Lumea על אזורי גוף שנכטבו בשמש.
- הערה:** חשיפה מזדמנת ועקביה לשימוש אינה נחשבת לשיזוף.

שיזוף עם קרמים

אם השתמשת בקרם שיזוף מלאכותי, המתינו עד שהשיזוף המלאכותי יעלם לחלוtin לפני השימוש במקסיקר.

נסיעה עם המכשיר

כאשר את נסעת עם המכשיר, בדק' עם חברות התעופה כדי לוודא שניתן לשאת את המכשיר במטוסן היד ו/או להשתמש בו במטוס.

לאחר השימוש

טיפול עוקב

לאחר השימוש נתן למורה על האזורי המטופלים קרמים, משחות, דאודורנט, קרם לחות או קוסמטיקה.




ازהרה: אם את חוזה גירוי בעור או אדמנויות בעור לאחר הטיפול, המתינו עד שיעלם מפני שתמרחி מוצרו לשעה על העור שלך. אם את חוזה גירוי בעור לאחר מריחת מוצר על העור, שטפי אותו במים. אם את עדין מקבלת תגובה עור, הפסיקו להשתמש במכשיר והתיעיצו עם הרופא שלך.

תגובהות עור נפוצות

העור שלך עשוי להראות אדמנויות קלה ו/או עשו לדקו, לעקוץ או להרגישם. תגובה זו נעלמת במהלך.

עור יבש וגרד עלולים להופיע עקב או שילוב של גילוח וטיפול קל. את יכולה לcker את האזור עם שקית קרח או מטלית פנים רטובה. אם היובש נמשך, ניתן למורה קרם לחות ללא ריח על האזורי המטופל.


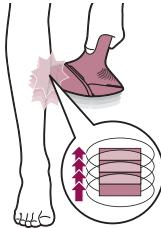


מצב Slide & Flash מציע שימוש נוח באזוריים גדולים יותר כמו רגליים. השאירו את הרצן הבהיר לחוץ בזמן שתמוך מחלקה את המכשיר על העור שלך כדי לשחרר מספר הרצקים ברכף.

זמן טיפול לכל אזור

BRI946, BRI947,
BRI948, BRI949
(**③**,**②**,**③**,**④**)


BRI944, BRI945
(**①**,**②**)

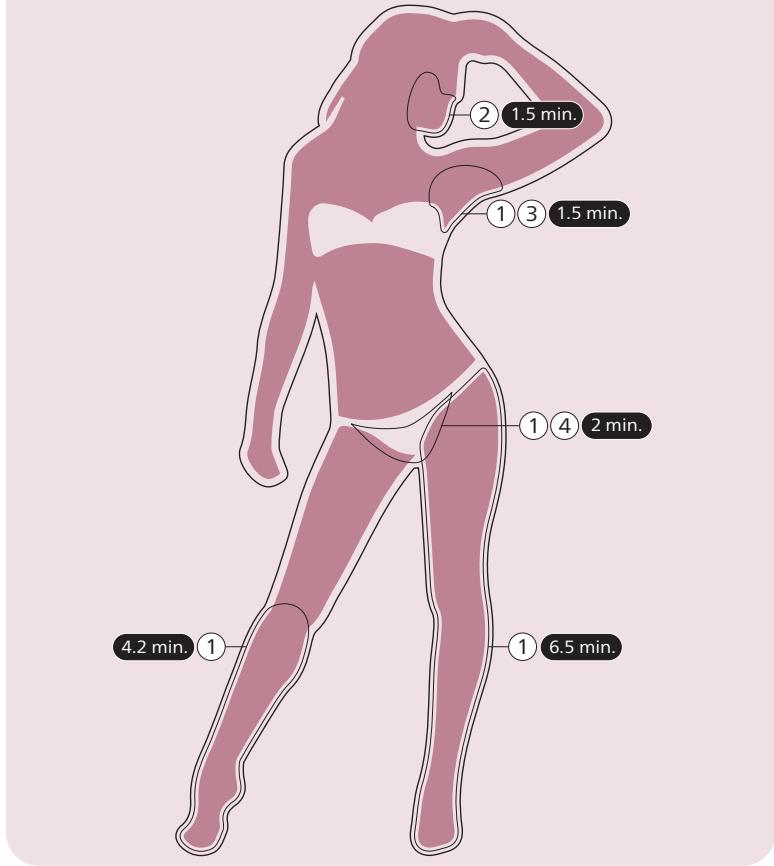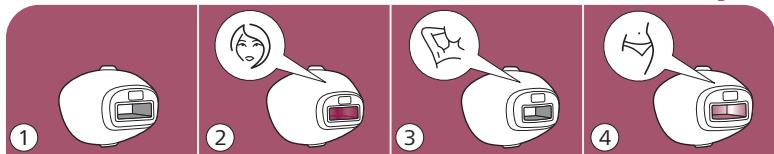

בחירה עצמת האור

Lumea מספקת 5 עצמות אוור שונות, תמיד תוכל לשות להגדרת עצמת אוור שתהיה נוחה לך.

- 1 לחץ על לחץ הפעלה/כבי כדי להפעיל את המכשיר. המכשיר מתחילה לפעול בהגדרת עצמת האור .

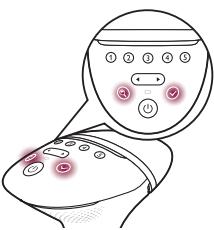

הערה: כדי להתאים את עצמת האור באופן ידני מבליל לשימוש בחץ SmartSkin, השתמשי בחץ החלפת מכב עד שתתגיעו להגדרת הנדרשת. רמת עצמת האור המתאימה מAIRה לבן.

- 2 לחץ על לחץ הפעלה ⁊ והנחי את המכשיר על העור שלך. לאחר שהמכשיר סרק את העור שלך, מחוינו עצמת האור יבabbo בלבן כדי לציין איזו עצמת האור נוחות בהתקבש על גוון העור שלך.

4 לחץ על לחץ אישור ⁊ כדי לאשר שברצונך לשימוש בהגדרת המצוינת. Lumea משתמש אוטומטיות בעוצמה הנboveה ביותר המצוינת, אשר מוצגת באמצעות מחוון עצמה מהbab.


5 Lumea מותנת לך את החופש לבחור את עצמת האור שנראית לך כי נוחה. רניישות העור יכולה להיות שונה מאדם לאדם. לכן, בדיקת העור היא המדריך החשוב ביותר לבחירה בהגדרת עצמת האור.

6 השימוש ב-Lumea לעולם לא אמרו להיות כואב ב擢רה לא נוחה. אם את חוות אי נוחות, הפחותי את הגדרת עצמת האור. את יכולה לעשות זאת על ידי שימוש בחצני ייוטר, כדי למנוע מכך לפתח תוצאות עז. הנורית 'ימוקן להבזק' תהברב בכתום כדי לצין גם גוון העור כהה מדי.

7 לאחר מעבר לאזור גוף אחר או אחרי שיזוף לאחרונה, בצעי בדיקת עור כדי לקבוע הגדרת עצמת אוור נוחה. כדי להפעיל מחדש את תוכנת חיויי ההגדרת, לחץ על לחץ ⁊ SmartSkin.

הערה: בצעי בדיקת עור לפני שתתחליל לטפל באזורי גוף אחר או לאחר שינוי בגוון העור. קבעי את הדרת עצמת האור עבור כל אזור גוף בוגד.

שני מצבי טיפול: Slide & Flash-I Stamp & Flash

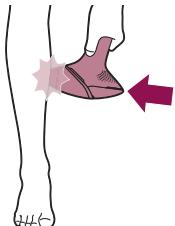

- Lumea Philips שלך יש שני מצבים טיפול לשימוש נוח יותר באזורי גוף שונים:
- מצב Flash-I אודיאלי לטיפול באזורי קטנים או מעוקלים כמו ברכיים ובתי השחי. פשוט לחץ ווחררי את לחץ הבקק כדי לשחרר הבזק בודד.




אביזר לפנים

האביזר לפנים הינו בעל עיצוב שטוח ומדויק עם פילטר משולב במיוחד לטיפול בטוח ומדויק בעור הרגיש מעל השפה העליונה, הסנטר והפאות. המכשיר מיועד רק להסרת שיער גוף לא רצוי מאזורים מתחת לעצמות החלדים. כאשר את משתמש במכשיר באזורי בעלי קווים מותאר חדים כמו קו הלסת והסנטר, יתכן שריה קשה ליצור מגע מלא עם העור לשחרר העצה: הניתן את הלשון שלר בין השפה העליונה והשיניים או נפחית את החלדים כדי להקל על הטיפול.



אביזר לבית השחי (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)

לאביזר לבית השחי יש עיצוב מעוקל במיוחד לטיפול בשערות בית השחי שאולי קשה להגעה אליו.

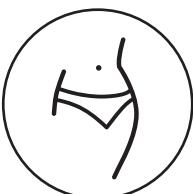

אביזר לביקיני (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)

האביזר לביקיני הוא בעל עיצוב מיוחד מיוחד לטיפול עלי באזורי הביקיני. יש לו עיצוב מעוקל החוצה ובעל עצמות או נבואה יותר בהשווה לאביזר גוף. שיער באזור זה נוטה להיות עבה וחזק יותר מאשר רגליים.


חיישן SmartSkin

Lumea מציעה טכנולוגיית SenseIQ לטיפול אישי להסרת שיער. חיישן SmartSkin המשולב מודד את גוון העור בתחלית ובמהלך טיפול כל טיפול. זה מספק שתי תכונות:

- 1 חיישן SmartSkin מונע מפרק לטפל באזורים בעור כחום מוד: אם הוא מזהה גוון עור כהה מדי לטיפול ב- Lumea, נורית ימוכן להציג מתחילה להבהיר בכתום. לא יופק הבדיקה כאשר תלהצטי על לחץ ההזק. המכשיר מושבת אוטומטית. זה מונע מפרק לפתח תנובות עvre.

- 2 חיישן SmartSkin יעזר לך לבחור את עצמת האור הנוכחית לעור שלך. לשם כך תוכל לחשוף מושב בחץ. © SmartSkin

- נקו את כל המשטחים של האביזר, כולל מוחזיר המתחכת והחלון של האביזר (חלקים B, C, D).
6
7
תני לכל החלקים להתייבש היטב.
8
אחסני במקום נטול אבק בטמפרטורת החדר.

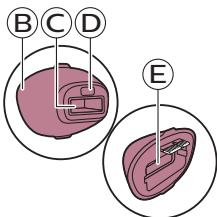

למיידנוסף על Lumea Prestige של

אביזרים

لتוצאות מיטביות, חשוב להשתמש באביזר הנכון המיועד לאזור הגוף הספציפי שבו ברצונך לטפל. Lumea מציע טיפול גוף מלא עם מספר אביזרים המיועדים לשימוש באזורי גוף ספציפיים.


טכנולוגיית SenseIQ מתאימה את תוכנית הטיפול כאשר מוחברים אביזר.

הערה: יתכן שההממשק לא יעבד יותר ויצוג שנייה כאשר יש לצלור על מוחבר האביזר. נקי את כבלי המגע כאשר זה קורה.

כדי למקם את האביזר, פשוט הצמיד אותו לחלון יציאת האו.




כדי להסיר את האביזר, משכי והפרידי אותו מחלון יציאת האו.

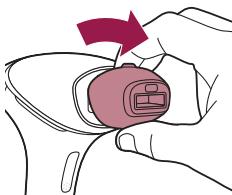

אביזר לגוף

לאביזר גוף יש את חלון הטיפול הגדול ביותר ועיצוב מעוקל לכיסוי ולטיפול יעל באזורי מתחת הגוף, במיוחד, במיוחד אזורי גודלים כמו רגליים, ידיים ובطن.

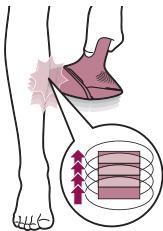

עברי למקומות סמוך ולחצי שוב על לחץן הבהיר. פניו השטוח של האביזר שנמצא במנג עם העור שלך גדול מעט יותר מחלון יציאת האור. פניו השטוח של האביזר צרים לחופף את המקום הקודם כדי לוודא שאת מבזקיה על פניו כל אזור העור. אין להבזק באוטו נקודה יותר מ-3 פעמים.

7 המשיכי עד שתתפסי בכל האזור, יש שני מצבים טיפול.



8 כבוי את המכשיר בסיום הטיפול.

9 הסורי שער לפניו כל טיפול הבא, כל עוד השער עדין נראה לעין.
הערה: אין לנסת את המכשיר באזוריים קשים או רגושים (אזור הקרטול והגרמי).


D. ניקוי ואחסנה לאחר הטיפול

1 נתקי את המכשיר משקע החשמל.


2 תני למכשיר להתקרר.

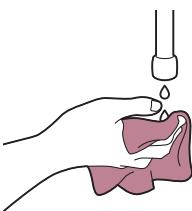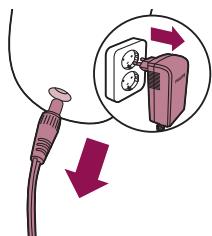

3 הרטיבי את המטלית הרכה שטופקה בכמה טיפולות מים.

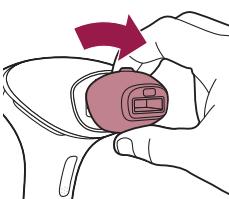


4 הסורי את האביזר מהמכשיר.

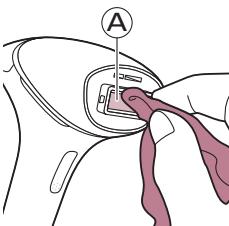


5 נקי את חלון יציאת האור של המכשיר (A).


1 חיבור את מתאם החשמל למכשיר וחבוי לשקע חשמל.

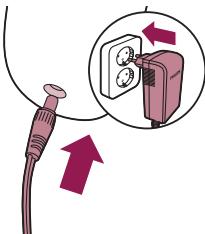


2 לחץ על לחצן הפעלה/כיבוי Ⓛ כדי להפעיל את המכשיר.

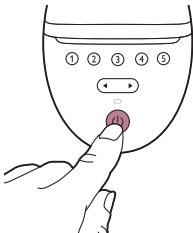

3 בחרי את ההגדרה שבחרת לאחר בדיקת העור (סעיף ב', שלב 9).

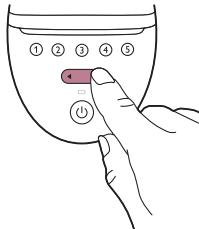


4 לחץ את המכשיר בחזקה על העור שלך והחזיקו אותו במקום. הנורית ימוכן להבזק אמוריה להידלק בלבן.

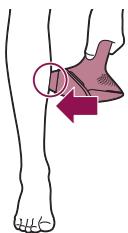


5 לחץ על לחצן הבהיר כדי לשחרר הבזק על העור שלך. הבהיר מטפל בעור באותה נקודה.


המכשיר משמש צילינפוך רך. הבהיר נותן לך תחושה חמימה.

לאחר כל הבזק, לוקח עד 3.5 שניות עד שהמכשיר מוכן להבזק שוב. את יכולה לשחרר הבזק כאשר נורית ימוכן להבזק' דלקת לבן.

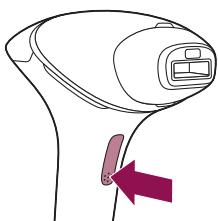

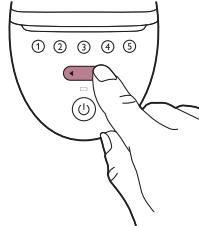

- תראי הבזק של אור •
- הערה: את יכולה לעבור בין הגדרות עצמת האור על ידי לחיצה על לחצן החלפת מצב.
- עברו לאזור הבא. טפל בנקודה אחת עם הגדרה ②

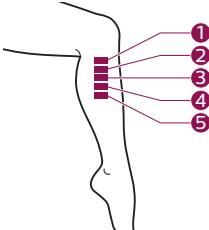

- עברו לאזור הבא. טפל בנקודה אחת עם הגדרה ③
- עברו לאזור הבא. טפל בנקודה אחת עם הגדרה ④
- עברו לאזור הבא. טפל בנקודה אחת עם הגדרה ⑤

8 המתינו 24 שעות.



9 בדק את העור שלך. הגדרה הנבואה ביום ר... ...

- עדין הרגש בnoch I


- לא הראה תנובה עורית (למשל אדומותיות, גירוי, פריחה)

- ... היא הגדרה להתחילה אותה את הטיפול.


ג. טיפול

חשוב: סימן קודם את שלב א' (הסורי שיער ונקי את העור שלך) וב' (בדקי את העור 24 שעות לפני הטיפול).

לחצן הפעלה/כיבוי ③ כדי להפעיל את המכשיר.

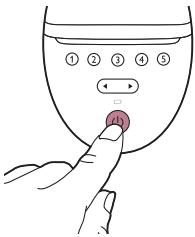

בחורי אзор לבדיקת העור שלך.

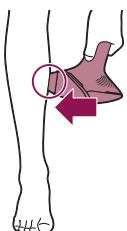


לחצוי את המכשיר בחזקה על העור שלך והחזיק אותו במקומו.

מערכת הבטיחות המשולבת מונעת הבוהב לא מכוון ללא מנע מלא בעור.



ודאי שנורית 'מוקן להבזק' נדלקת בלבן כדי להבטיח שיש מגע מלא עם העור שלך.

אם הנורית 'מוקן להבזק' כתומה, העור שלך כהה מכדי לטפל בו. נסוי את Lumea על אזור גוף בהיר יותר.

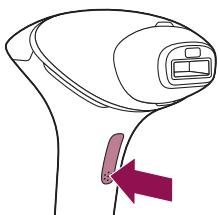


נסוי כל הגדרה על העור שלך אם זה נכון:
כאשר הנורית 'מוקן להבזק' לבנה, לחצן ההבזק בידית פעם אחת, כדי לטפל
בנקודה אחת עם הגדרה ①

המכשיר משמש ציליל ניפוץ רך. ההבזק נותן לך תחושה חמימה.


כיצד לשימוש ב-Lumea Prestige שלר

א. הסיר שיער ונקי את העור שלר

הסוי שיער לפניו כל טיפול כל עוד השיער עדין נראה לעין. את יכולת לגחל, לעשות אפיולציה או שעווה. ודאי שתתחלה לטפל לפני שיער חדש נראה על העור שלן. אם תבחרו לעשות שעווה, המתיינו 24 שעות לפני השימוש ב-Lumea.

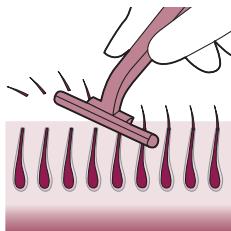


נק ויבשי את העור שלר. ודאי שהוא נקי מכל קרם או גל.

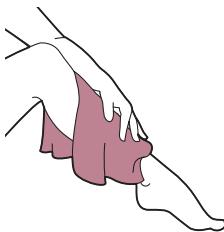


ב. בדק את העור 24 שעות לפני הטיפול

בדק את העור שלר כדי למצוא את הגדרת האור הנכונה:

- לכלאזור גוף חדש.
- לאחר שיזוף לאחרונה.

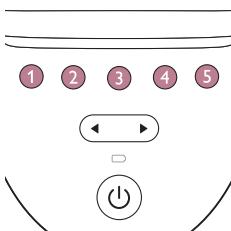

בחורי את האביזר הנכון כדי לבדוק את העור שלן.

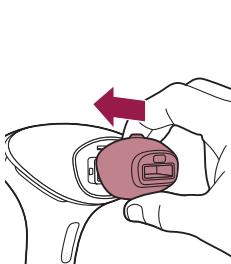



לוח זמני טיפול ראשון
עבור 4 טיפולים הראשונים, השתמשי ב-Lumea Sum up עם שבועיים כדי להבטיח שכל השערות יטולו.

- טפל בצעמך תור 3 ימים לפני או אחריו מועד הטיפול המתוכן.
- אם לא טיפול בצעמך תור 3 ימים לפני או אחריו מועד הטיפול המתוכן, התחל!
מחדש את השלב הראשון. תכני 4 טיפולים, טיפול אחד כל שבועיים.

הערה: אם לא תחל מחדש את השלב הראשון, יתכן שלא תראי הפחחת שיער עיליה.

הערה: החלת אחד טיפוליו-Lumea, את יכולה להשתמש בשיטת הסרת שיער הרצiosa.
תעזר להגעה להפחחת השיער הרצiosa.

אם את רוצה להסיר שערות בין טיפולים, Lumea, את יכולה להשתמש בשיטת הסרת השיער הרגילה שלך (לא כולל קרמיים להסרת שיער).

שלב השיפורים

לאחר השלב הראשון (4 טיפולים), אנו ממליצים על טaci-אף כל 4 שבועות.



לוח זמינים לשלב השיפורים

פנק! את עצמך כל 4 שבועות. חזרי על זה 8 פעמים כדי להשיג הפחחת שיער עיליה. זאת על מנת לשמר על תוצאות וליהנות מעור חלק למשך חודשים.

- אנו ממליצים לך לטפל בצעמך בתור 4 ימים לפני או אחריו מועד הטיפול המתוכן.
- התוצאות עשויה להשתנות בהתאם לצמיחה השיער האישית שלך וגם באזורי גוף שונים.

אם סימת את שלב השיפורים ואת רואה צורך להמשיך בטיפול (השער מתחליל לחזור), אנו ממליצים לך להתחיל מחדש את השלב הראשון.

הערה: שימוש במקצר לעתים קרובות יותר אינו משפר את היעילות.
טייפ: סמעי את לוח הזמינים של הטיפולים בלוח השנה שלך כדי להזכיר לעצמך את הטיפולים המתוכנים.

למה לצפות

לאחר השלב הראשון




לאחר הטיפול הראשון, יכול לך תחת שבוע עד שבועיים עד שהשערות נשרות. בשבועות הראשונים של טיפולים הראשונים, עדין תראי כמה שערות צומחות. סביר לך הניח שמדובר בשערות שלא היו בשלב הצמיחה שלהן במהלך הטיפולים הראשונים.

- לאחר 2-3 טיפולים, את אמורה לראות ירידת ניכרתה בzmichat השיער. עם זאת, כדי לטפל ביעילות בכל השערות, חשוב להמשיך לטפל לפחות לפיו לח הטיפולים המומלץ.
- לאחר 4 טיפולים, את אמורה לארות הפחחת המשמעותית בzmichat השיער באזורי שבחם טיפול עם Lumea. הפחחת בציפוי השיער אמורה גם היא להיות נולואה.

במהלך שלב השיפורים

המשיכי לטפל עם טaci-אפים תקופה (כל 4 שבועות) כדי לשמור על התוצאות.

איך עובד IPL

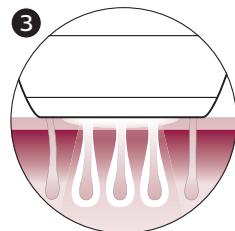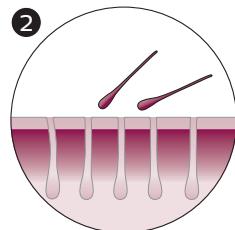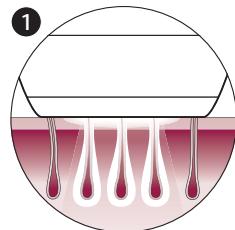

בטכנולוגיית Intense Pulsed Light, הבזקי אור עדים מוחלים על העור ונספגים בשורש השערה. ככל שהאור בהיר יותר והשער כהה יותר, הבזקי האור נספגים טוב יותר.

הבזקי האור מעוררים את זיקק השערה לעבור לשלב מנוחה. כתוצאה לכך, השיער נושא באופן טבעי וממנעה צמיחת שיער מחדש.

מחזור צמיחה השיער מורכב משלבים שונים. טכנולוגיית IPL יعلاה רק כאשר השיער נמצא בשלב הצמיחה שלו. לא כל השערות נמצאות בשלב הצמיחה בו זמן. זו הסיבה שאנו ממליצים לך לעקוב אחר שלב הטיפול הראשון (4 טיפולים, כל טיפול בהפרש של שבועיים) ולאחר מכן מכון את השלב הבא-העלאת שלב הטיפול (מגע-עליות כל 4 שבועות כדי לוודא שלא כל השערות מטופלות ביעילות בשלב הנדרשה).

טיפ: כדי להבטיח הסרת שיער לאורך זמן, מומלץ לבצע טיפול-אפים כל 4 שבועות.

צבעי שיער גוף מתאימים

הטיפול-b-Lumea איננו יעיל אם יש לך שערות בלונדיין בהיר, אפור, אדום או לבן, שכן שערות עם צבעים אלו אינן סופגות מספיק אור.

הערה: כדי לבדוק אם צבע שיער הגוף שלך מאפשר שימוש במקשייר, עיני בטבלת צבעי השיער בדף המקיים.

תכנית טיפולים מומלצת

שלב ראשון

כדי להשיג הפחיתה שיער יעילה, עקיבי אחר לווח זמני הטיפול הראשון.

אל תסתכל על ההבקע בזמן השימוש במקשיר. השתמשי במקשיר בחדר מואר היטב כדי שהאור יהיה פוחת וווקן לעינך. למרות שהדבר אינו הכרחי לבתיות, את עשויה להרכיב משקפיים או משקפי מגן לנוחיותך אם האור לא נוח או בהיר מדי בשיבול. אין לטפל באוטו איזור עור יותר מפעם אחת במהלך הפעישה. זה עלול להניבר את הסיכון לתגובהות עור.

נסיבות היגייניות, יש להשתמש במקשיר רק על ידי אדם אחד. אין להשתמש בקרמיים להסרת שיער באוזן (שיטופול) במקשיר, שכן כימיקלים עלולים לגרום לתגובהות עור. אין להשתמש בעיפרון או בעט כדי לסמן את האזוריים שיש לטפל בהם. זה עלול לגרום לכוויות על העור שלך.

ניתן לאחסן את המקשיר בטמפרטורה שבין 25- 70 מעלות צלזיוס. השתמשי במקשיר בטמפרטורה שבין 5- 35 מעלות צלזיוס. המקשיר לא יפעל כראוי מוחץ לטוחה טמפרטורה זהה. זה עלול לגרום לכיווית על העור שלך.

הסרת שיער על ידי מקרנות או בפולסים עזים יכולה לגרום לצמיחת שיער מוגברת אצל אנשים מסוימים. בהתקבש על הנთונים הזמינים כימם, קבוצות הסיכון הגבוהות ביותר לתגובה זו הן נשים ממצאים תיכוני, מזרח תיכוני ודרים אסיה שטופול על הפנים והצוואר.

אם את חזה גירוי בעור או אדומות בעור לאחר הטיפול, המתנייע עד שיעולם לפני שתתרחçi מוצר כלשהו על העור שלך. אם את חזה גירוי בעור לאחר מורת מוצר על העור, שטפּו אותו במים. אם את עדין מקבלת תגובה עור, הפסיקו להשתמש במקשיר והתייעצּו עם הרופא שלך.

אם נילוח, אפלוציה או שעווה גורמים לגירוי בעור, אנו ממליצים לך לא להשתמש במקשיר עד שההירוי בעור ייעלם.

מקשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגחרות, או חסר ניסון וידע, אלא אם כן הם קיבלו פיקוח או הדרכה לגבי השימוש במקשיר על ידי האחראי לבתיותם.

יש לפकח על ילדים כדי להבטיח שהם לא ישחקו עם המקשיר. נדרש פיקוח על מנת למנוע סיכונים פוטנציאליים כגון חסיפה לפטול האור, התחשמלות, חנק מהקבלים חנק כתzáה מבילעה של אבריםם.

שיזוף עם אור שימוש טבעי או מלאכותי עשוי להשפיע על הרגניות והצבע של העור שלך. בצעי בדיקת עור כדי לקבוע את הגדרת עצמת האור המתואימה.

לאחר כל טיפול, המתנייע לפחות 48 שעות לפני השיזוף כדי לוודא של תגובהה עורית חלהפה.

אם הבדיקה בשינוי בגוון העור מאריך הטיפול האחרון, אנו ממליצים לך לבצע בדיקת עור ולמהמתן 24 שעות לפני הטיפול הבא.

בדקי תמיד את המקשיר לפני השימוש בו. ודאי שחלון חישון SmartSkin נקי בעת השימוש במקשיר, כדי להימנע מעולה לא תקינה.

המתאים, חלון יציאת האור והפילטר של האביזרים יכולים להתחכם מאד ($<410^{\circ}\text{ F}$ C) במהלך השימוש. תני תמיד למתחם, לחalon יציאת האור וכן למסנן ולהקלים הפנימיים של האביזרים להתקרר לפני שימושם מוגעת בהם.

למקשיר זה יש יחידת אספקת חשמל הניננת להסירה. השתמשי רק בהתאם המצויר להתקן זה. אין להשתמש בכבל מאריך. ניתן למצוא את מספר האסמכתה (HF-AD2069x20020H) על המקשיר שלך. ה- 'א' במספר זה מתייחס לסוג התקע עבור המדינה שלך.

פעלי לפי לוח הזמן המומלץ לטיפול. הגדלת התדרות, במיוחד בשלב הראשוני, עלולה להגביר את הסיכון לתגובהות עור.

על האזוריים הבאים: על שומות, נמשים, ורידים גדולים, אזוריים בעלי פיגמנטציה כהה, צלקות, חירגות בעור מבלי להתייעץ עם הרופא שלך. זה יכול לגרום לכויה ולשינוי בצבע העור, מה שמקשה על זיהוי מחלות הקשורות לעור.

על האזוריים הבאים: יבלוט, קעוקעים או איפור קבוע.



מיקום/אזורים

עלולם אל תשתמשי במכשיר באזורי הבאים:

- מסיבי לעיניים ועל גביו או ליד הגבות.

על השפטים, הפטמות, הארולות, השפטיים הקטנות, הנרתיק, פי הפה וחלק הפנימי של הנחיריים והאזורנים.

אם עברת ניתוח באזוריים שיטופול בשלוות השבועות האחוריים.

אסור לගברים לשתמש במכשיר על הפנים והצואר כולל כל האזוריים שבhem גודל דלקן, וגם לא על איזור איבר היפון.

באזוריים בהם את משתמשת באדוורנטים עמידים. זה יכול לנגרות לתגובהות עור.

מעל או לelow כל דבר מלכוכטי כמו שתלי סיליקון, יציאות הזרקה תחת עוריות (מתיקן אנטולוי) או פירסינג.

הערה: רישימה זו הינה חלקית. אם אין לך בטוחה אם את יכולה לשתמש במכשיר, אנו ממליצים לך להתייעץ עם הרופא שלך.

הוראות בטיחות חשובות

ażhorot



אנא קראו ופיעלו לפני הוראות אלה כדי לסייע את השימוש במכשיר ולמנוע/למזרע את הסיכון לפצעה, תגובה עור ותופעות לווא.

לפני השימוש ב-Lumea, עליך לנקיות את העור ולודא שהוא נקי משיער, יבש לחולותין וללא כל קרם או גל.

שמרי את המכשיר ואת המתחם יבשים.

מכשיר זה אינו ניתן לריחיצה. לעולם אל תטבלי את המכשיר במים ואל תשטוף אותו מתחת ברז.

מים וחלמלם שלוב מסוכן. אל תשתמשי במכשיר זה בסביבה רطובה (למשל ליד אמבטיה מלאה, מקלחת רצחה או בריכת שחיה מלאה). רטיבות עלולה לגרום נזק למכשיר ולהוביל לסכנה בטיחותית אופשית.

בדקי תמיד את המכשיר לפני השימוש בו. אל תשתמשי במכשיר או בהתאם אם הוא פגום. תמיד יש להחלף חלק פגום ברכיב חלופי מקורי.

אם ההתקן או המתאם שבורים או פגומים, אל תגע באף חלק פנימי כדי למנוע התחשמלות.

אין לשתמש במכשיר אם מסנן ה-UV של חלון ציאת האור / או האביזר שבור, מכיוון שלא ניתן להבטיח פיעולה בטוחה בנסיבות אלה.

אל תנסי לפתח או לתקן את המכשיר שלך. פיתוח Philips Lumea עלולה לחשוף אותך לרכיבים חשמליים מסוכנים ולאנרגיות אוור פועמת, שככל שהם עלול לגרום לפצעה גורנית ו/או עניינית.

החויזי תמיד את המכשיר למרכז שירות מורשת על ידי פיליפס לבדוק אותה או תיקון.

תיקון על ידי אנשי מוסמכים על גורם למצוות מסוכן באופן קיצוני למשתמש.

אין לבצע שינויים במצב זה. אין לשנות, לעקוף או לחזור חלקו של המכשיר (למשל מתאם או כבל), מכיוון שהדבר גורם למצב מסוכן.

- אם את בהריון או מניקה שכן הרתךן לא נבדק על נשים בהריון או מניקות.
- אם יש לך שתלים פעילים כגון קוצב לב, נירוסטימולטור, משאבת אינסולין וכו'.

תרומות/היסטוריה

- לעומתם אל תשתמשי במקשיך אם את נטלה אחת מהתרומות המפורטות להלן:
- אם העור שלך מטופל כתעת או טיפול לאחרונה בשבוע האחרון בחומץ או אלפא הידרוקס (AHAs), חומצות בטא הידרוקס (BHAs), איזוטריניאן מוקמיות וחומצה אלואית.
- אם נטלה צורה כלשהי של איזוטריניאן Accutane או Roaccutane בששת החודשים האחרונים. טיפול זה יכול להפוך את העור לרגיש יותר לקלרים, פצעים וגריעים.
- אם את נטלה חומרים או תרופות פוטו-סנסיטיביזציה, בדקן את עולון התרופה שלך ולעומם אל תשתמשי במקשיך אם צוין שהוא עלול לגרום לתגובה פוטו-אלרגנית, לתגובה פוטו-טוקסיקית או אם עליך להימנע המשמש בעת נתילת התרופה.
- אם את נטלה תרופות נוגדות קריישה, כולל שימוש רב באספירין, באופן שאינו מאפשר תקופת שתיפה של שבוע לפחות לפני טיפול.

- לעומתם אל תשתמשי במקשיך:
- אם קיבלת טיפול בקרינה או בכימותרפייה ב-3 החודשים האחרונים.
- אם את נטלה משככי כאבים המפחיתים את ריגשות העור לחום.
- אם את נטלה תרופות מדכאות חיסון.

פטולוגיות/הפרעות

- לעומתם אל תשתמשי במקשיך:
- אם יש לך סוכרת או מחלות סיסטמיות או מטבוליות אחרות.
- אם יש לך מחלת לב גדולה.
- אם יש לך מחלת הקשורה לריגשות לאו, כגון התפרצויות או פולימורפיות (PMLE), או רטיריה סולארית, פורפיריה וכו'.
- אם יש לך היסטוריה של הפרעת קולגון, כולל היסטוריה של היוצרות קלקת קלואידית או היסטוריה של רפואי פצעים לקני.
- אם יש לך אפלסיה עם ריגשות לאו.
- אם העור שלך רגיש לאו ופתח בклות פריחה או תגובה אלרגנית.
- אם יש לך מחלת עור כמו סרטן עורueil, אם יש לך היסטוריה של סרטן עור או כל סרטן מוקומי אחר באזורי שיטופול.
- אם יש לך היסטוריה של הפרעה בכלי הדם, כגון נזיפות של דלקות או אקטזיה של כל דין באזורי שיש לטפל בהם.
- אם יש לך הפרעת דימום כלשהי.
- אם יש לך היסטוריה של מחלת מדכת חיסונית (כולל זיהום HIV או איידס).

מצבי עור

- לעומתם אל תשתמשי במקשיך:
- אם יש לך זיהומים, אקזמה, כוויות, דלקת בזקיק שיער, חתכים פתוחים, שפוחים,
- הרפס סימפלקס (כוויות קור), פצעים או נגעים והמתומות (חבורות) באזורי טיפול.
- על עור מגורה (אדרומי או עם חתכים), עם כוויות שימוש, עם שיזוף מהימים האחרונים או שיזוף-מלאכתי.

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לעולם היופי של Philips Lumea Prestige! עור חלק כמוší בתוכה כמה שbowutot בלבד.

Lumea Prestige משתמשת בתכנולוגיית IPL (Intense Pulsed Light), הידועה כאחת השיטות היעילות ביותר למינית צמיחה שיער מוחודשת. בשיטוף פעולה הדוק עם מדענים ורופאים עור מומחים, התאמנו את הטכנולוגיה מבוססת האור הזה, ששימשה במקור במכוני יופי מתקדמים, לשימוש קל ויעיל בנוחותם בביתכם. Lumea Prestige עדין ומציע טיפול נון-ויל בעוצמת קלה שתמצא נוחה. שערות לא רצויות הן סוף נחלה העבר.

Lumea Prestige תוכננה ופותחה עבור נשים, אך עשויה להתאים לשימוש על ידי גברים.

כדי להפיק תוצאה מלאה מהטכנייה שמצויה פיליפס, רשותם את המוצר שלך בכתובות www.philips.com/Lumea. למידוע נוסף, אנא עבור אל www.philips.com/support כדי למצוא את עצות המכומחים שלנו, סרטוני הדרכה ושאלות נפוצות ולהפיק את המרב מה-Lumea שלך.

הערה: שמור הוראות אלה עם המוצר שלך בכל עת.

סקירה כללית של מכשיר

1 חלון יציאה לאור עם מסנן UV משולב

2 אביזרים

a אביזר לנגף

b אביזר לביון השחי (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)

c אביזר לביון (BRI946, BRI947, BRI948, BRI949)

d אביזר לפנים

3 SmartSkin

4 מערכת בטיחות משולבת

5 רפלקטור בתוך האביזר

6 מנוגדים אלקטטרוניים

7 פתח למנוגדים אלקטטרוניים

8 לחץ הבזק

9 לחץ הפעלה/כיבוי

10 לחץ אישור

11 החפתת לחיצים

12 אורות עצמה

13 SmartSkin

14 נורית 'מוקן להבזק'

15 פתיחי אוורור

16 שקע מכשיר

17 מתאם

18 תקען קיטן

19 נוריתק (לא מוצג)

20 מטילת נקיון (לא מוצג)

התוויות נגד


תנאים

עלולים תל תשתתמיים במכשיר:

- אם יש לך סוג עור VI (לעתים רוחקót עד אף פעם לא נכווה בשימוש, בעל שיזוף כהה מאוד). במקרה זה יש לך סיכון גבוה לפתח תגובה עור, כגון היפרpigמנטציה והיפרוגננטציה, אדרמומיות חזקה או כוויות.


6 עברית

טבלת צבעי עור

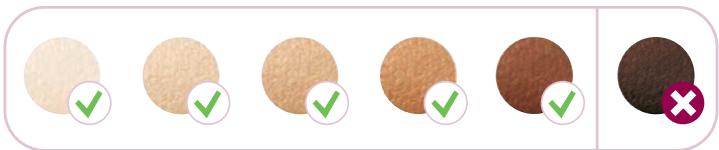


טבלת צבעי שיער



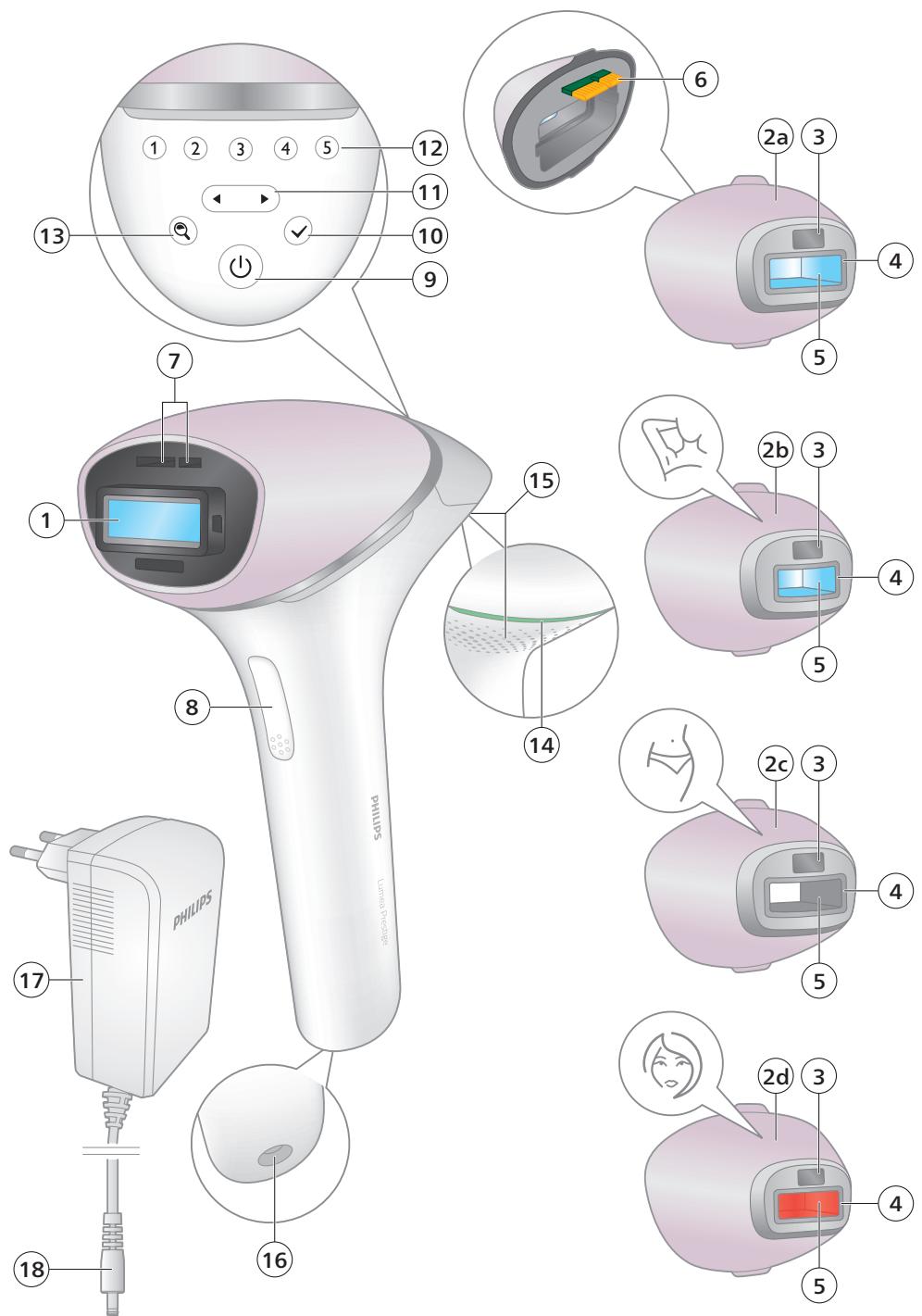

BRI946, BRI947, BRI948, BRI949: 2a, 2b, 2c, 2d
BRI944, BRI945: 2a, 2d

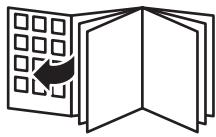

PHILIPS

Lumea

BRI944, BRI945,
BRI946, BRI947,
BRI948, BRI949

