

PHILIPS



IPL Haarentfernungsgerät
mit SenselQ

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin Sensor

3 intelligente Aufsätze: Körper,
Gesicht, Präzision

Exklusive, KI-gesteuerte App-
Funktionen

Mit Kabel und kabellos
verwendbar



BRI953/02

Unsere beste IPL-Lösung mit exklusiven SkinAI Funktionen

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut*

Wir präsentieren – unsere beste IPL-Lösung für langanhaltend glatte Haut. Unsere schnellste kabellose Lumea IPL-Lösung mit SenselQ Technologie bietet über die Lumea IPL-App nun exklusive SkinAI Funktionen, mit denen Sie Ihre Haut analysieren und Fortschritte verfolgen können.

Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse mit Behandlungen nur alle zwei Wochen
- Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv

Komplettlösung für Gesicht und Körper

- Komplettlösung für Gesicht und Körper mit 3 intelligenten Aufsätzen
- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen

Individuelle IPL-Haarentfernung

- Sanft und komfortabel mit SenselQ
- Intelligente Körperhaaranalyse mit SkinAI

Lumea IPL 9900 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenselQ

Besonderheiten

Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Beginnen Sie mit 4 Behandlungsphasen nur alle zwei Wochen während der Anfangsphase – das sind nur halb so viele Behandlungen im Vergleich zu anderen Marken. Fahren Sie dann mit monatlichen Auffrischungsphasen fort, um das Ergebnis beizubehalten.

SenselQ Technologie



Lumea Serie 9900 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

Mit und ohne Kabel verwendbar für eine komfortable Anwendung



Philips Lumea wurde für eine einfache und bequeme Anwendung entwickelt. Verwenden Sie das Gerät kabelgebunden für eine schnelle

Behandlung großer Körperpartien wie Ihrer Beine oder behandeln Sie im kabellosen Akkumodus präzise schwer erreichbare Körperpartien.

3 intelligente Aufsätze



Speziell entwickelte Aufsätze passen sich perfekt jeder Körperform an und stellen automatisch die effektivsten Programme für jede Körperpartie ein. Gesicht: Flacher Aufsatz mit kleinem Behandlungsfenster mit UV-Filter. Körper: Nach innen gewölbt mit großem Behandlungsfenster. Präzision: Nach außen gewölbt für schwer zugängliche Bereiche.


Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

BRI953/02

Exklusive SkinAI Funktionen

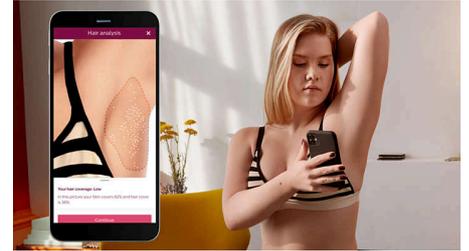

Unsere kostenlose Coaching-App bietet nun Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit exklusiver SkinAI Technologie, damit Sie Ihre Haut analysieren und die Haarreduktion verfolgen können.

Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hutton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

Lumea IPL 9900 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenselQ

BRI953/02

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungs-Aufsatz: Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

Gesichtsbehandlungs-Aufsatz: Form: flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht: Oberlippe, Kinn und Kieferpartie

Präzisionsbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², Individuelle Behandlung für die Bikinizone und Achselhöhlen

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

Hauttonsensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellungsanzeige auf Abruf

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung
„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleinerer Bereiche

Mit Kabel/kabellos: Mit Kabel und kabellos verwendbar

Technische Daten

Stromspannung: 100-240 V

Batterietyp: wiederaufladbarer Akku

Hochleistungs-Lampe: Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren**

Consumer Trade Item

Height: 25.2 cm

Width: 26.3 cm

Length: 11.3 cm

Net weight: 1.212 kg

Gross weight: 1.731 kg

GTIN: 8720689039598

Country of origin: SI

Außenkarton

Height: 26.8 cm

Width: 23.9 cm

Length: 27 cm

Net weight: 2.424 kg

Gross weight: 3.704 kg

GTIN: 18720689039595

Palette

Height: 118 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 135.744 kg

Gross weight: 223.988 kg

GTIN: 68720689039590

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

Pallet Layer

Height: 26.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung

Lagerung: Hochwertige Tasche

Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Anwendungszeit

Unterschenkel: 8,5 Min.

Unterarme: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

