

PHILIPS

sonicare

ProtectClean

Rechargeable
sonic toothbrush

フィリップス ソニックアーク
プロテクトクリーン
充電式電動歯ブラシ

HX6489/01

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の
最終ページについております。



※ブラシヘッドは別売りです。

はじめに

ソニックアーク プロテクトクリーンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間で愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

ブラシヘッド認識 機能について

プロテクトクリーンでは、ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドをお使いいただくことでハンドルのモードと強さ設定が自動で設定され、いつでも最適な状態でブラッシングをお楽しみいただけます。

ブラシヘッドにはお勧めのモードと強さがあらかじめ設定されていますが、これらはお好みに合わせて変更することができます。

お勧めのブラッシングモードと強さ設定の変更方法については「ブラッシングモードについて」の項(P15)を参照してください。

目次

| | |
|----------|-------------------------|
| ● はじめに | ブラシヘッド認識機能について 1 |
| | 目次 2 |
| | 必ずお守りください 3~6 |
| | 商品のご確認 7 |
| | 各部の名称 8 |
| ● ご使用方法 | 充電のしかた 9・10 |
| | ブラシヘッドの使いかた 11・12 |
| | 上手なみがきかた 13 |
| | ブラッシングモード設定 14 |
| | ブラッシングモードについて 15 |
| | 便利な機能 16~18 |
| | お手入れのしかた 19 |
| | 保管のしかた 20 |
| ● 廃棄について | 製品を廃棄するとき 21・22 |
| ● 困ったとき | 故障かな?と思ったら 23・24 |
| ● 保証 | 保証とアフターサービス 25 |
| 証 | 仕様 26 |
| | 無料修理規定 28 |
| | 保証書 最終ページ |




必ずお守り ください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。




安全上のご注意



- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

○絵表示について



















| | |
|---|---|
|  | 危険 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。 |
|  | 警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。 |
|  | 注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。 |

○絵表示の例













-  ・△記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意事項（左図の場合は高温注意）を示します。
-  ・○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。
-  ・●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

|  危険 | |
|--|--|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none">●下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。<ul style="list-style-type: none">*ペースメーカー等の体内植込型医療機器*人工心肺等の生命維持用医用電気機器*心電計や点滴器等の装着型の医用電気機器医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作をまねくおそれがあります。●本機は充電式電池を内蔵しています。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。 |

警告

-  ●製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はソニックアークール(0120-418-608)にご相談ください。
-  ●お手入れの際は必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。
-  ●ハンドルを充電するときは、専用の充電器以外では行わないでください。また専用の充電器で他の製品を充電しないでください。
-  ●充電器底面に表示されている電源以外は使用しないでください。火災・感電の原因となります。スムーズにコンセントに電源プラグが装着できない場合、無理に押し込みおとししないでください。
-  ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。
-  ●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。火災や感電の原因になります。
-  ●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。
-  ●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
-  ●製品が破損した場合(ブラシヘッド、ハンドルまたは充電器)は、直ちに使用を中止してください。本製品には、修理できない部品が含まれています。破損した場合は、ソニックアークール(0120-418-608)にご相談ください。
-  ●充電器の電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●充電器の電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、充電器を熱したものに置いたり、屋外で使用しないでください。電源コードが破損し、火災・ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器を交換する場合は、必ず専用の充電器と交換してください。
-  ●充電器を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をバスタブ、洗面台、流し台などの水まわりに置いたり、水まわりの近くに保管しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器をお手入れした後は、完全に乾く前に電源コンセントに接続しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。
-  ●本製品は歯、歯ぐきの洗浄のために設計されています。本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。
-  ●補助を必要とする人(子どもを含む)に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やけがの原因になります。

⚠ 注意

-  ● ハンドルを充電する場合は、磁性金属の上で充電しないでください。充電効率が下がります。
-  ● お子様ご使用の際には、保護者の監督のもとに行ってください。
-  ● ブラシヘッドは家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因になります。
-  ● 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。熱くなり、やけどの原因になります。
-  ● 歯や歯ぐきにブラシヘッドを強くあてたり、1か所に長くあてすぎたりしないでください。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。
-  ● 充電器の電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
-  ● 充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
-  ● 収納時に電源コードを充電器に巻きつけないでください。電源コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
-  ● 器具用プラグにピンやこみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ● ブラシヘッドのプラスチック部分を歯にあてないでください。歯や歯ぐきを傷つける原因になります。
-  ● 治療中の歯や不安定な入れ歯など口内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。
-  ● 本製品は、食器洗浄機で洗浄・乾燥しないでください。




使用上のご注意

1. 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数の患者に使用するものではありません。
2. 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあります。このようなことを防ぐため、また、最適な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合でも、ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。
3. 過去2カ月間を目安に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。
4. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
5. 健康面で不安なことがある場合はご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。
6. 炭酸ナトリウム(ホワイトニング用歯磨き粉の一般成分)を含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドを本体から外し、よく水洗いしてください。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。
7. 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアーク純正ブラシヘッドをご使用ください。
8. ボタンを押すときは、指の腹でボタンの中心部を押してください。**爪で押すと故障**の原因となります。

商品のご確認

ご購入いただいた商品の品番を
ご確認ください

※品番はパッケージ天面に記載されています。

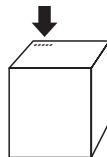


| | 各部番号 (P8) | HX6489/01 |
|------|--------------|---------------|
| ハンドル | B | 1本 (ホホワイト) |
| 充電器 | C | 1台 |

*初めてお使いになる前に、製品および付属品に傷や破損がないか必ずご確認ください。万が一、傷や破損があった場合はそのまま使用せず、ソニックアーコールにお問い合わせください。

本モデルでは、ブラシヘッドは別売りとなります。お買い求めの歯科医院で患者様のニーズ・口腔内の状況に合わせて推奨されたブラシヘッドをご購入・ご使用ください。

各部の名称

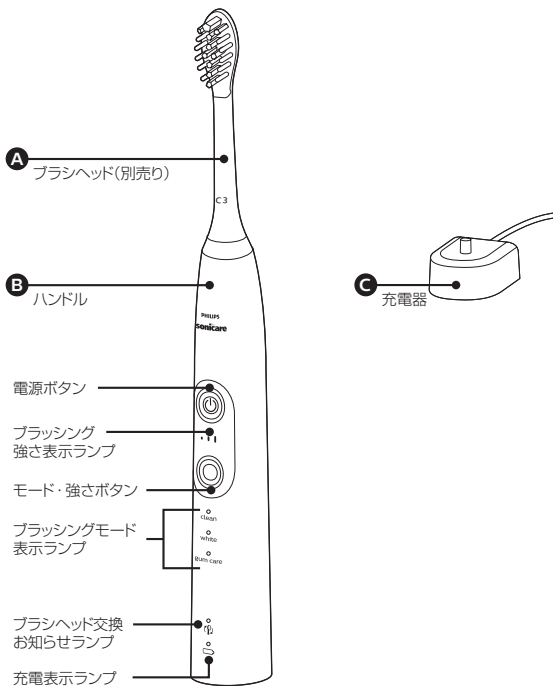

充電のしかた

この製品は通常48時間充電です。

満充電で約2週間使用できます。
(1日2回、2分間使用した場合)

初めてお使いのときや半年以上使用していなかった場合は、充電を始めても充電表示ランプが点滅しないことがあります。このような場合でも、数分後に充電表示ランプが点滅し始めますので、そのまま充電してください。

※本製品は、ご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。



※48時間経過しなくても充電が完了することがあります。

※ご使用後は、ハンドルを充電器にセットして充電してください。

※充電器は、水で濡れたところや水がかかるところに置かないでください。

充電器で充電する場合

1. 充電器の電源コードをコンセントに差し込みます。
2. 充電表示ランプが見えるように、ハンドルの底面が充電器に完全に接するようにハンドルを立てます。

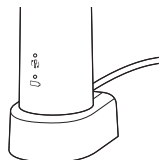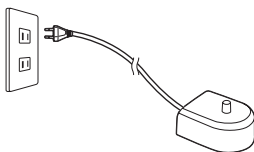

※充電中は、充電表示ランプが点滅します。




※充電中は、電源ボタンを押しても動作しません。



注意

充電時以外は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

【充電表示について】

| ▶ 充電催促表示 | ▶ 充電中 | ▶ 充電完了 |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <p>充電残量が少なくなると、充電表示ランプがオレンジ色に点滅し、ブラッシングの最後にピーブ音が3回鳴ります。電池残量がなくなると、電源ボタンを押したときにピーブ音が5×2回鳴ります。</p> | <p>充電中はランプが点滅、充電が完了すると点灯し、約30秒経過するとランプが消えます。満充電後は、目安として2分間のブラッシングモードを1日2回使用した場合約2週間使うことができます。</p> | |



注意

- 充電器底面に表示されている電源以外は、使用しないでください。
- 専用の充電器のみを使用してください。
- 充電器の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。

※充電中は本体および充電器が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

※使用期間の経過による充電電池の劣化に伴い充電後の使用回数は減少する場合があります。

ブラシヘッドの 使いかた

※ブラシヘッドは別売りです。

*ブラッシングのコツ

性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯と歯ぐきに対して45度の角度で軽くあててブラッシングしていただくのがコツです。



注意

ブラッシングの際は、本製品の動きに任せてください。力を入れて押しあてたりこすったりすると、正しく歯を磨くことができなかつたり、故障の原因になることがあります。

ブラシヘッドの取り付け／取り外し

【取り付けかた】



ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシヘッドの向きをそろえ、ブラシヘッドが止まるまで金属シャフトにヘッドをしっかり差し込んで取り付けます。



※ブラシヘッドとハンドルの間には、わずかなすき間があります。


【取り外しかた】



ハンドルをしっかり握って固定し、ブラシヘッドを真上に引き抜いて取り外します。

基本的な使いかた

1. ブラシヘッドをハンドルに取り付けます。

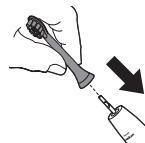


2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。
お好みにより、歯磨き粉を付けます。



- ソニックアークを初めてお使いいただくと、少しすぐつたく感じることや振動が強く感じられることがありますがお使いいただくにつれて慣れていきます。
- ソニックアークの動きに任せてください。力を入れてこすったりすると、逆効果です。
- 1日2回のブラッシングをお勧めします。

3. ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に角度(45度)をつけて、隙間が空かないようにあてます。電源ボタンを押します。

※ブラシヘッドを歯にあてる力が強すぎると、振動の変化(および振動音のわずかな変化)でお知らせします。「過圧防止センサー機能」(P17)を参照してください。
※ブラシの中央部が常に歯にあたるようにしてブラッシングしてください。

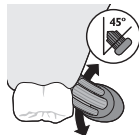

4. 歯にブラシヘッドを軽くあてて、同じ箇所約2秒間ずつブラッシングしてください。

※効果的なブラッシングをするために、この要領で口腔内全体をブラッシングしてください。
※ブラシ毛が広がる場合があります。ブラシヘッドで歯を強く磨かないでください。



5. 歯の裏側をブラッシングするときは、ハンドルを立てるようにしてブラシをたてにあて、垂直方向に何度かブラッシングします。



6. ブラッシング後は、水で口をゆすぎます。







ブラシヘッド認識機能 (最適なモードと強さを選択する機能)

ブラシヘッド認識機能とは、ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドをハンドル本体が認識し、登録された情報に基づいてブラッシングモードと強さが自動で選択される機能です。初めてお使いの際には、ブラシヘッドに登録されたお勧めのモードと強さがハンドルに自動的に設定されています。

ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます。

上手なみがきかた

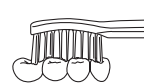効果的に歯を磨くために、以下のポイントにご注意ください。
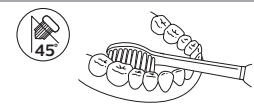
| 効果的なブラッシング方法 | | | |
|---|--|--|--|
| 歯と歯ぐきの境目  <p>ブラシを斜め(45度)にあててください。</p> | 奥歯の奥  <p>ブラシを少し立てるようにあててください。</p> | かみ合わせ  <p>かみ合わせ面に対して垂直にあててください。</p> | 前歯の裏側  <p>ブラシをたてにあててください。</p> |
| 歯の表側  <p>ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。</p> | 奥歯の裏側  <p>ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。</p> | | |

ヒント

- ・歯磨き粉をお使いになる場合は、歯磨き粉が周囲に飛び散ることを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源をONにしてください。
- ・本製品の性能を最大限引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽くあててブラッシングしてください。カドペーサー機能により口腔内を均等にくまなくブラッシングできます。「カドペーサー機能」(P18)を参照してください。
- ・本製品を初めてお使いになる場合、人によっては、少しくすぐったく感じることや振動が強く感じられることがありますがお使いいただくにつれて慣れていきます。

このような場合

- **歯列矯正装置をつけている方**
歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を斜め(45度)にあてるようにして磨きます。歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。
- **治療後の歯科補綴物**
詰め物、クラウン、インプラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、何か異常を感じた場合は、歯科医師にご相談ください。


■ ブラシヘッド交換のタイミング

最良のブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。


ブラッシング モード設定

ブラッシングモード設定の切り替え

本製品にはブラッシングモードの選択機能があります。お好みに合わせてブラッシングモードを選択してください。

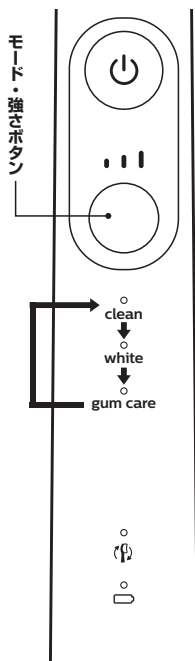

- 待機状態(ブラッシングモード表示ランプが点灯している状態)でモード・強さボタンを押すごとに、1つずつブラッシングモードが切り替わります。選択されたブラッシングモードが点灯します。
- ONの状態(ブラッシング中の状態)でモード・強さボタンを押すと、ブラッシングの強さが変わります。ブラッシングの強さ設定についてはP15「強さ設定」の項を参照してください。

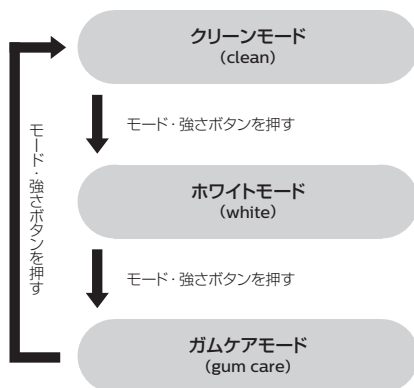

※ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更するとハンドルがそのモードや強さを記憶し、次に同じブラシヘッドを取り付けた際、そのモードに設定します。

ブラッシングモード について

本モデルでは、ブラシヘッドは別売りとなります。お買い求めの歯科医院で患者様のニーズ・口腔内の状況に合わせて推奨されたブラシヘッドをご購入・ご使用ください。

口腔内を均等にくまなくブラッシングするために、歯磨き時間の区切りをピープ音とブラシの振動を一時停止することでお知らせします。この機能をカドベーター機能といいます。ブラッシングモードにより、ブラッシング中にカドベーター機能がお知らせする間隔が異なります。

※ブラシヘッド認識機能対応のブラシヘッドを取り付けると、ハンドルがブラシヘッドのタイプを認識し、適したブラッシングモードを設定します。ブラシヘッド取り付け後にモード・強さボタンを押してブラッシングモードや強さを変更すると、ブラシヘッドにそのモードや強さが記録され、次に同じブラシヘッドを取り付けた際、そのモードや強さが自動的に選択されます。初期設定に戻りたい場合は、「P12「ブラシヘッド認識機能」の項を参照して設定しなおしてください。

クリーンモード (clean)

歯垢をしっかり落とす、通常のブラッシングモードです。

| | |
|----------|----|
| ブラッシング時間 | 2分 |
|----------|----|

ホワイトモード (white)

歯の表面のステイン(着色汚れ)を落とす動作(2分間の後に、歯を磨きあげ光沢を与えます(30秒間))。

| | |
|----------|-------|
| ブラッシング時間 | 2分30秒 |
|----------|-------|


ガムケアモード (gum care)

歯垢をしっかり落とす通常歯磨き(2分間)の後に、歯と歯ぐきの境目にやさしい刺激を与えます(1分)。

| | |
|----------|----|
| ブラッシング時間 | 3分 |
|----------|----|

強さ設定

ブラッシングの振動の強さをお好みの強さに調節できます。振動の強さは、3段階(弱、中、強)に調節できます。

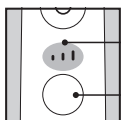

ブラッシング
強さ表示ランプ

モード・
強さボタン

※ハンドルにブラシヘッド認識機能対応ブラシヘッドを取り付けると、ハンドルがブラシヘッドのタイプを認識し、適したブラッシングの強さを設定します。

※ブラッシング強さ表示ランプで、設定された強さを確認できます。

※強さ設定を変更する場合は、ブラッシング中にモード・強さボタンを押してください。ハンドルがOFFまたは待機状態のときは強さ設定を変更できません。

※効果的にブラッシングするために、ブラッシングモードごとに推奨する強さ設定でのご使用をお勧めします。

便利な機能

イージースタート機能（振動に慣れていただくための機能）

イージースタート機能とは、通常より弱い振動からお使いいただき、ご使用回数に合わせ段階的に振動を強めていく機能です。本製品を使用して、ブラッシングの振動が強いと感じた場合は、イージースタート機能をご利用ください。本製品を初めてお使いいただいてから15回目のブラッシングで通常の強さの振動になります。

※工場出荷時の設定では、イージースタート機能はOFFになっています。

※14回目のブラッシングまでは、必ず最低1分間の歯みがきを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

※本製品本来の歯垢除去効果が損なわれますので、慣れるための最初の準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはお勧めしません。

【イージースタートのONおよびOFF設定】 ※イージースタート機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器に置いた状態で行ってください。

充電器にハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。

●イージースタート機能をONまたはOFFにする

ピープ音が1回鳴るまで電源ボタンを押し続け約2秒後に指を離します。

ピープ音がON/OFFの切り替えをお知らせします。

ブラシヘッド交換お知らせランプと充電ランプが緑色に3回点滅したらON、

オレンジ色に3回点滅したらOFFの設定になります。

スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）

スマートタイマー機能は、設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。

設定された時間のブラッシングサイクルの最中でブラッシングを停止したい場合は電源ボタンを2秒間押しください。設定された時間の動作中に電源をOFFにしても30秒以内に電源ボタンを押すと残ったブラッシングサイクルを実行します。下記の場合はスマートタイマーがリセットされます。

- ・ブラッシングを30秒以上中断した場合
- ・ハンドルを充電器にセットした場合


ブラッシング時間の設定詳細についてはP15を参照してください。

※米国の歯科専門家は1日2回各2分間以上のブラッシング時間を推奨しています。

ブラシヘッド交換お知らせ機能（ブラシヘッドの交換時期をお知らせする機能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能とは、ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが点灯します。ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したときは、ブラシヘッドを交換してください。お口の健康と最適なブラッシング効果を保つため、ブラシヘッドの交換時期をお守りください。

※工場出荷時の設定では、ブラシヘッド交換お知らせ機能はONになっています。
※ブラシヘッド認識機能がついたブラシヘッドのみでお使いいただける機能です。

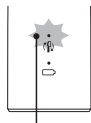

ブラシヘッド交換お知らせランプ

【ブラシヘッド交換お知らせ機能のONおよびOFF設定】

充電器にハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。

※ブラシヘッド交換お知らせ機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器に置いた状態で行ってください。

●ブラシヘッド交換お知らせ機能をONまたはOFFにする

ビープ音が連続して2回鳴るまで電源ボタンを押し続け約4～5秒後に指を離します。
ビープ音でON / OFFの切り替えをお知らせします。
ブラシヘッド交換お知らせランプと充電ランプが緑色に3回点滅したらON、オレンジ色に3回点滅したらOFFの設定になります。

過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーにより、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎると、ブラッシングの振動が変わります。

過圧防止センサー機能のお知らせがあった場合は、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

※工場出荷時の設定では、過圧防止センサー機能はONになっています。

【過圧防止センサー機能のONおよびOFF設定】

充電器にハンドルを置き、電源プラグをコンセントに差し込みます。

※過圧防止センサー機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器に置いた状態で行ってください。

●過圧防止センサー機能をONまたはOFFにする

ビープ音が連続して3回鳴るまで電源ボタンを押し続け約6～7秒後に指を離します。
ビープ音でON / OFFの切り替えをお知らせします。
ブラシヘッド交換お知らせランプと充電ランプが緑色に3回点滅したらON、オレンジ色に3回点滅したらOFFの設定になります。



カドベーター機能 (時間の区切りをピープ音でお知らせする機能)

カドベーター機能とは、ブラッシングの区切りをピープ音(「ピー」という音)とブラシの振動の一時停止でお知らせする機能です。口腔内を均等にくまなくブラッシングすることができます。一定の間隔で短いピープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。口腔内を一定の間隔でブラッシングすることができます。

【磨き方参考例】

- ①上あご右側表裏
- ②上あご左側表裏
- ③下あご右側表裏
- ④下あご左側表裏

- ①上あご表側(頬側)
- ②上あご裏側(舌側)
- ③下あご表側(頬側)
- ④下あご裏側(舌側)

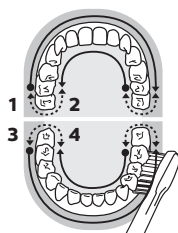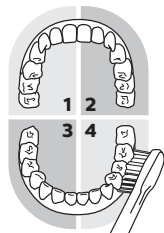

お手入れのしかた

※ブラシヘッドは別売りです。



注意

本製品はすべて食器洗浄器や乾燥機、電子レンジで洗浄・乾燥しないでください。

ハンドル

1. ブラシヘッドを外して、金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してください。



※歯磨き粉などをきれいに洗い流してください。

※金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さないようにしてください。破損する可能性があります。

2. ハンドル表面を布で全体的にむらなく拭いてください。



ブラシヘッド

1. ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い、自然乾燥させてください。



2. ハンドルからブラシヘッドを外して、接合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗浄してください。



- 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとにブラシヘッドを交換してください。
- ブラシヘッド交換お知らせランプが点灯した場合や破損の兆候が見えた場合は、速やかにブラシヘッドをお取り換えください。
- 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアーク純正ブラシヘッドをご使用ください。
- 本ハンドルはブラシヘッド認識機能対応以外のブラシヘッドもご使用いただけますが、ブラシヘッド認識機能、ブラシヘッド交換お知らせ機能はご利用になれませんのでご注意ください。

充電器

1. お手入れの前に、必ず充電器の電源プラグをコンセントから抜いてください。

2. 充電器の表面を湿らせた布で拭き、柔らかいタオルで水分を拭き取ってください。



注意

- ハンドル、充電器は、絶対に液体の中に入れてください。




注意


お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用すると変色、変形の原因になります。絶対に使用しないでください。充電器をお手入れする際は、電源コード・プラグも調べてください。もし電源コード・プラグの異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、ソニックアークコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

保管のしかた (長期間使用しない場合)

1. 充電器の電源プラグをコンセントから抜き、お手入れをします
(P19を参照してください)。

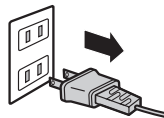

2. 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

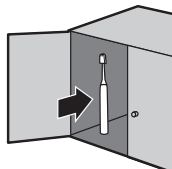

製品を廃棄するとき

※充電電池の修理交換は
できません。

製品を廃棄する際は、リチウムイオン充電電池を取り出し、充電電池を取り外した後の製品については、各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

リチウムイオン充電電池のリサイクルについて

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄の際は、リチウムイオン充電電池を取り出してください。取り出したリチウムイオン充電電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄するか、リサイクル協力店にお持ちください。





⚠ 注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 安全上の理由から、一度分解した本体は絶対に再使用しないでください。
- 充電電池は完全に放電してから、取り外してください。また、ショートが発生を防ぐために、作業時にはコインやヘアピン、指輪等の金属製の物体を充電電池に近づけないようにしてください。
- 作業を行う際は、目、手、指などけがのないよう注意してください。また、必ず手・本体が乾いた状態で作業を行ってください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。
- 電池が液漏れした場合は、液が目や皮膚に触れない様に注意してください。万一目に入った時は、こすらずに水道水で十分洗浄し医師の治療を受けてください。皮膚や衣服についた場合は水道水で十分洗い流してください。
- 取り外した充電電池は、ショートしないように両端子をテープで覆ってください。

充電電池の取り外しかた


- ・充電電池を取り外すときは、タオルまたは布、ハンマー、マイナスドライバーを用意してください。
- ・必ず以下の手順に従って安全に作業を行ってください。

1. ハンドルを充電器台から取り外し、電源ボタンをオンにして完全に動作しなくなるまで充電電池を放電します。
※何度もこの手順を繰り返して、完全に動作しなくなったことをご確認ください。
2. ブラシヘッドは外して廃棄し、ハンドル全体をタオルか布で包みます。
3. 片手でハンドルの上部を持ち、ハンドルの底から約1.5cmの位置をハンマーで叩きます。ハンドルを回転させながら、四方向から強く叩いて底のキャップを外します。
※キャップ、ハンドル内側の留め具が外れるまで、繰り返し叩いてください。
※作業台に傷が付くおそれがあります。必要に応じて表面の保護などを行ってください。

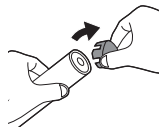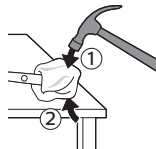


4. ハンドルの上下を逆さまにして持ち、表面が頑丈で安定した場所でシャフトを押し下げます。

※ハンドル内部の部品を取り出せない場合は、「3」の動作を繰り返し、部品を取り出してください。

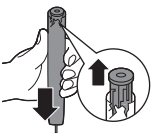


7. 充電電池をハンドル内部部品から引き出し、もう一方の充電電池タブを壊します。


※充電電池タブの先端は鋭く尖っています。指などをケガしないよう注意してください。

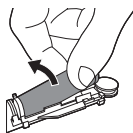


5. 充電電池と内部部品の底の黒い枠との間にマイナスドライバーの先を入れ、こじ開けて充電電池を離し、黒い枠を壊します。

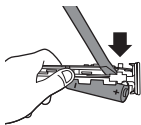

8. ショートしないように充電電池の端子をテープで覆い、充電電池を廃棄します。

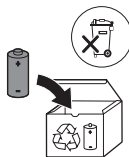

6. 充電電池の底と黒い枠の間にマイナスドライバーの先を差し込み、充電電池と緑色の回路基板の接続部にある金属タブを壊します。これで黒い枠から充電電池の底が外れます。

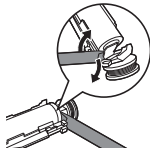

故障かな?と 思ったら

故障かな?と思ったらお調べください。

作動しない。

- 充電残量をご確認ください。詳しくは「充電表示について」(P10)を参照してください。
- コンセントに充電器の電源プラグがきちんと差し込まれていることを確認してください。
- ブラシヘッドが金属シャフトにしっかりと差し込まれていることを確認してください。ブラシヘッドが古く接続部が摩耗している場合には、新しいブラシヘッドに交換してください。

動作がおかしい(例: 動きにムラがある、ブラッシング中にブラッシング力が弱くなった)。

- 充電残量が少なくなっている可能性があります。48時間充電してください。

充電しても数分しか使えない。

- 充電時間が短い可能性があります。48時間充電してください。

ブラッシングの力が弱く感じる。

- ブラシヘッドを押しあてすぎると、ブラシの振幅が小さくなります。ブラシヘッドは歯に軽くあてるようにしてください。
- イージースタート機能が働いている可能性があります。詳しくは「イージースタート機能」(P16)を参照してください。
- 充電が不十分な場合もあります。再度48時間充電してください。
- ブラシヘッドが消耗していないかご確認ください(使用頻度、使用方法により異なります)。

ブラッシング中、一瞬毛先の動きが止まる。

- カドベーター機能により、口腔内を均等にこまかく磨けるよう一定の間隔でビーブ音が鳴り、ブラシヘッドの振動が一瞬止まります。詳しくは「カドベーター機能」(P18)、「ブラッシングモードについて」(P15)を参照してください。

使い始めてから30秒~3分程度でブラシヘッドの動作が止まる。.....

- ブラッシングモードにより、ブラッシング時間が異なります。詳しくは「ブラッシングモードについて」(P15)を参照してください。

ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がる。.....

- ブラシを斜め(45度)にあててください。詳しくは「上手なみがきかた」(P13)を参照してください。

変なにおいがする。.....

- ハンドル、ブラシヘッド、充電器をお手入れしてください。「お手入れのしかた」(P19)を参照してください。

* 以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、ソニックアークコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて
(必ずお読みください)

【保証書・最終ページに付属】

- 保証は、本製品を購入された方のみ適用されます。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売歯科医院名」等の記入をお確かめのうえ、販売歯科医院から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

| | |
|------|-------------|
| 保証期間 | お買い上げ日から2年間 |
|------|-------------|

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ソニックアークコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検してください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、ハンドルと充電器をセットでソニックアークコール(0120-418-608)へご依頼ください。

【保証期間中は】

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。
- 保証書の規定に従って修理させていただきます。
ただし、保有期間内であっても在庫がなくなった場合など、修理対応できない場合があります。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有償で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります)
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。

【患者様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けました患者様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

| | | | | |
|--------|-------|--|------------------------|----------|
| お買い上げ日 | 年 月 日 | | 便利メモ お買い上げ 歯科医院名 | TEL. () |
| | | | | |

ご使用の時このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感ずる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源プラグをコンセントからはずして、必ずソニックアーコールにご相談ください。

長年ご使用の音波歯ブラシの点検を



愛情点検

仕 様

| | |
|-----------|--|
| 品 名 | 充電式電動歯ブラシ |
| 形 名 | フィリップス ソニックアー プロテクトクリーン |
| 品 番 | HX6489/01 |
| ハンドル品番 | HX685T |
| 充電器品番 | HX6100 |
| 質量 (ハンドル) | 約125g |
| 定 格 電 圧 | AC100V~240V、50/60Hz |
| ブラシ振動数 | 約31,000ストローク/分 |
| 充 電 時 間 | 約48時間 |
| 使 用 時 間 | 満充電後、通常使用(目安として)(2分間のブラッシングを1日2回)で約2週間 |
| 使 用 充 電 池 | リチウムイオン電池(Li-ion) |
| 消 費 電 力 | 充電器：0.4~1.4W |

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

● ブラシヘッド ●

- 最良のブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが点灯したとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。
- 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- 最良の効果を得るためにフィリップスソニックアー純正ブラシヘッドをご使用ください。

- ソニックアーの修理受付はソニックアーコールが承ります。
- 修理サービス等についてわかりにくいことは、下記にお問い合わせください。

ソニックアーコール
受付時間 9：00~18：00
(年末年始を除く)

0120-418-608



製造元

Philips Oral Healthcare, LLC.

22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021 U.S.A.

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒106-0041
東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

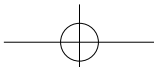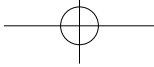

無料修理規定

〈無償修理規定〉

- 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無償修理します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、ソニックアークコール(0120-418-608)にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ②お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、患者様名、販売歯科医院名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって患者様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ソニックアークコール(0120-418-608)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※患者様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

修理メモ

修理メモ

フィリップス ソニックアー プロテクトクリーン 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、ソニックアーコールに修理をご依頼ください。

患者様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

| | |
|---------|-------------------------|
| 品名 | 充電式電動歯ブラシ |
| 形名 | フィリップス ソニックアー プロテクトクリーン |
| 品番 | HX6489/01 |
| 保証期間 | お買い上げ日より2年 |
| 対象部分 | ハンドル、充電器 |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |
| 患者様 | ご住所 〒 |
| | ご芳名 |
| | 電話番号 |
| ★販売歯科医院 | 歯科医院名・住所・電話番号 |

★ ご販売歯科医院様へ

この保証書は患者様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印して患者様にお渡しください。

お問い合わせ 修理のご依頼は

ソニックアーコール
受付時間 9:00~18:00
(年末年始を除く)

0120-418-608

株式会社 フィリップス・ジャパン

この印刷物は再生紙を使用しております。



4235.021.7492.2 (03/24)

©2024 Koninklijke Philips N.V.

記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V.またはその他の会社の商標または登録商標です。