

PHILIPS

sonicare

3000 Series
4000 Series



※写真はイメージです。

フィリップス ソニックケア 3100/4100 シリーズ
充電式電動歯ブラシ

品番 **HX3671/23, HX3672/23**
HX3671/33, HX3675/24
HX3671/35, HX3673/33
HX3681/27

取扱説明書

はじめに

ソニックケア 3100/4100 シリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

Welcome to Philips Sonicare family! Further support is available to you at:



<https://www.usa.philips.com/c-e/pe/oral-healthcare.html>

Search your product from search box.

sonicare 3100 series



sonicare 4100 series



目 次

● は じ め に	はじめに 1
	目次 2
	必ずお守りください 3~6
	商品のご確認 7
	各部の名称 8
● ご 使 用 方 法	充電のしかた 9
	ブラシヘッドの使いかた 10
	基本的な使いかた 11・12
	上手な磨きかた 13
	便利な機能 14~16
	お手入れのしかた 17・18
	保管のしかた 18
● 廃棄について	製品を廃棄するとき 19・20
● 困 っ た と き	故障かな?と思ったら 21・22
● 保 証	保証とアフターサービス 23
	仕様 24
	無料修理規定 26
	保証書 最終ページ

必ずお守り ください

ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- 誤った取扱いをしたときに想定される内容を「危険」、「警告」、「注意」に区分けしています。

○絵表示について



危険 人が死亡または重傷を負う可能性が大きい内容。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例



・△記号は、「危険、警告、注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意事項(左図の場合は高温注意)を示します。



・○記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



●記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)を示します。

⚠ 危険



●本機は充電式電池を内蔵しています。本製品の充電、使用、保管は、0℃から40℃までの環境で行ってください。火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱・発火・破裂の原因になります。また、電池の寿命にも影響を及ぼします。

警告

-  ●製品を廃棄するとき以外は、絶対に分解や改造、修理をしないでください。火災、感電、けがの原因になります。修理はフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
-  ●本製品は、歯、歯ぐきおよび舌の洗浄のために設計されています。(舌の洗浄は、フィリップス製舌磨きブラシヘッドをご使用ください。)本取扱説明書に記載されている以外の目的では使用しないでください。本製品を適切に使用できない場合は、すみやかにご使用を中止してください。また、痛みや不快感が生じた場合はすみやかに医師にご相談ください。
-  ●使用して気分が悪くなった場合は使用を中止してください。事故や体調不良の原因になります。
-  ●異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。
-  ●製品が破損した場合(ブラシヘッド、ハンドルまたは充電器台)は、直ちに使用を中止してください。本製品には、修理できない部品が含まれています。破損した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
-  ●充電器台のケーブルを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。また、充電器台を熱したものに置いたり、屋外で使用しないでください。ケーブルが破損し、火災・ショート・感電の原因になります。
-  ●充電器台のケーブルが傷んだときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●充電器台のUSB コネクタがスムーズにUSB 電源に差し込めない場合、無理に押し込もうとしないでください。
-  ●充電器台を交換する場合は、必ず専用の充電器台と交換してください。
-  ●ハンドルを充電するときは専用の充電器台以外は使用しないでください。充電器台を充電のため接続する場合は、DC5V 出力のUSB Type A ポートに接続してください。また付属の専用充電器台で他の製品を充電しないでください。異常発熱による発火の原因になります。
-  ●充電器台を水につけたり、水をかけたりしないでください。また電源に接続する前にUSB コネクタが完全に乾いていることを確認してください。ショート・感電の原因になります。
-  ●濡れた手でUSB コネクタを抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。
-  ●充電器台をバスタブ、洗面台、流し台などの水まわりに置いたり、水回りの近くで使用したり保管しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●お手入れの際は必ず充電器台のUSB コネクタを電源から抜いてください。感電やけがをすることがあります。
-  ●充電器台をお手入れした後は、完全に乾く前に電源に接続しないでください。ショート・感電の原因になります。
-  ●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。またお子様が本製品で遊ばないように監視してください。お子様ご使用の際には保護者の監視のもとに行ってください。
-  ●補助を必要とする人(子どもを含む)に使用させないでください。またお体の不自由な人だけでは使用しないでください。口腔の感覚が弱い方なども使用しないでください。事故やけがの原因になります。

 注 意

-  ●健康面で不安のある方や、ペースメーカー等の体内埋込型医療機器、家庭用医用電気機器を使用している場合は、使用前に医師又は機器メーカーに確認してください。
-  ●ブラシヘッドは家族や他人と共用しないでください。感染や炎症の原因になります。
-  ●充電器台の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。熱くなり、やけどの原因になります。
-  ●歯や歯ぐきにブラシヘッドを強くあてたり、1カ所に長くあてすぎたりしないでください。またプラスチック部分を歯に充てないでください。歯や歯ぐきを傷つけることがあります。歯周病がひどい人などは歯科医師にご相談ください。
-  ●ご使用の前に、ブラシヘッドに異常がないことを確認してください。
-  ●充電時以外は、充電器台のUSBコネクタを電源から抜いてください。けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
-  ●収納時にケーブルを充電器台に巻きつけないでください。ケーブルに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
-  ●USBコネクタ部分にピンやごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
-  ●治療中の歯や不安定な入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしないでください。けがの原因になります。
-  ●本製品は、食器洗浄器で洗浄・乾燥しないでください。

使用上のご注意


1. 本製品はパーソナルケア用であり、歯科医院や医療機関において複数の患者に使用するものではありません。
2. 毛がひろがったり毛先がつぶれたブラシヘッドは使わないようにしてください。破損した毛がブラッシング中に取れてしまうことがあります。このようなことを防ぐため、また、適切な歯垢の除去と機能を維持するために、ブラシが目に見えて傷んでいない場合でも、ブラシヘッド交換お知らせランプが光でお知らせしたとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとにブラシヘッドを交換してください。
3. 過去2カ月間を目安に口腔内の治療や歯ぐきの手術を受けられた場合は、本製品をご使用になる前に、あらかじめ歯科医師にご相談ください。
4. 本製品をご使用の結果、万一激しい出血があった場合や、本製品を使い始めて1週間経過後も出血が認められる場合には、ご使用を中止し、歯科医師にご相談ください。
5. 健康面で不安なことがある場合はご使用の前にかかりつけの医師にご相談ください。
6. 炭酸ナトリウム(ホワイトニング用歯磨き粉の一般的成分)を含む歯磨き粉をお使いの場合は使用ごとにブラシヘッドを本体から外し、よく水洗いしてください。プラスチック部のひび割れが生じる危険性があります。
7. ブラシヘッドが変形する可能性があるため、精油やココナッツオイルを含む歯磨き粉などの製品との併用はお控えください。
8. 適切な効果を得るためにフィリップスソニックアーク純正ブラシヘッドをご使用ください。
9. 本製品の充電、使用、保管は、0℃から40℃までの環境で行ってください。また本製品を火気に近づけたり、直射日光に当たる場所や高温になる場所に放置しないでください。
10. ボタンを押すときは、指の腹でボタンの中心部を押して下さい。爪で押すと故障の原因となります。
11. 本製品は防水加工をしておりますが、水や液体の中には浸さないでください。
12. ハンドルを充電する場合は、磁性金属の上で充電しないでください。充電効率が下がります。
13. お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用しないでください。変色、変形の原因になります。

商品のご確認

下の表を参考に、製品および付属品が揃っていることをご確認ください。

ご購入いただいた商品の品番を
ご確認ください


※品番はパッケージに記載されています。

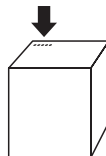

	HX3671/23	HX3672/23	HX3671/33	HX3675/24		HX3671/35	HX3673/33	HX3681/27
ハンドル	HX367W1 ホワイト	HX367W1 ホワイト	HX367W1 ホワイト	HX367W1 ホワイト	HX367BK ブラック	HX367NM ミント	HX367W1 ホワイト	HX369AB ブルー
クリーンプラス ブラシヘッド	1本	1本	—	2本		—	—	1本
ホワイトプラス ブラシヘッド	—	1本	1本	—	—	1本	1本	—
充電器台	1台 (ホワイト)	1台 (ホワイト)	1台 (ホワイト)	2台 (ホワイト、ブラック)		1台 (ホワイト)	1台 (ホワイト)	1台 (ホワイト)
トラベル ケース	—	—	—	—		—	1個	—

＊初めてお使いになる前に、製品および付属品に傷や破損がないか必ずご確認ください。万が一、傷や破損があった場合はそのまま使用せず、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

各部の名称

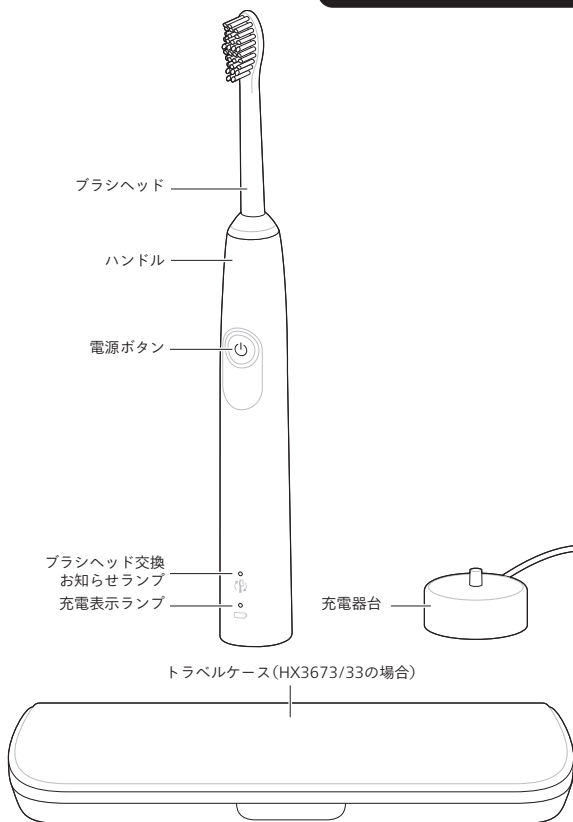

※電源アダプタは付属していません。充電の際は、USB 電源 (USB Type A DC5V) をご準備ください。

※ブラシヘッドキャップは同梱されています。

※イラストはイメージです。

充電のしかた

初めてお使いのときや半年以上使用していなかった場合は、充電を始めても充電表示ランプが点滅しないことがあります。このような場合でも、数分後に充電表示ランプが点滅し始めますので、そのまま充電してください。

※本製品は、ご使用の都度充電をしても充電電池の寿命には影響ありません。

※ご使用後は、ハンドルを充電器台にセットして充電してください。

※24時間経過しなくても充電が完了することがあります。



注意

- 専用の充電器台以外では充電しないでください。
- 充電器台の上にコインやクリップなど、金属製の物を置かないでください。
- 充電器台は、水で濡れたところや水がかかる場所に置かないでください。また電源に接続する前にUSBコネクタが完全に乾いていることを確認してください

1. USB電源(USB Type A DC5V)を準備いただき、充電器台のUSBコネクタを、USBポートに接続してください。
2. ハンドルの底面が充電器台の突起にはまるようにハンドルを立てます。ピープ音が2回鳴り、充電が開始されます。

※充電中は、充電表示ランプが点滅します。

※充電中は、電源ボタンを押しても動作しません。

[充電表示について]

充電中

充電状況	充電表示ランプ
充電完了	緑色が点灯後、消灯
充電中	緑色が点滅

ブラッシング終了時

充電状況	充電表示ランプ	ピープ音
高	緑色が点灯	なし
中	緑色が点滅	なし
低	オレンジ色が点滅	3回
充電切れ間近、 充電切れ	オレンジ色が点滅	5回×2セット

※充電中はハンドルおよび充電器台が多少あたたかくなりますが異常ではありません。

※使用期間の経過による充電電池の劣化に伴い充電後の使用回数が減少する場合があります。

※充電完了後、充電器台上に製品を設置していた場合、一定時間毎に充電表示ランプが点滅 / 点灯することがあります。
(満充電後、一定時間毎に待機電力を補うために再充電が始まります。)

*ブラッシングのコツ

性能を引き出すために、ブラシヘッドを歯と歯ぐきに対して45度の角度で軽くあててブラッシングしていただくのがコツです。

ブラシヘッドの 使いかた



注意


- ブラッシングの際は、本製品の動きに任せてください。力を入れて押しあてたりこすったりすると、正しく歯を磨くことができなかつたり、故障の原因になることがあります。
- ご使用の前に、ブラシヘッドに異常がないことを確認してください。

ブラシヘッドの取り付け／取り外し

[取り付けかた]

ブラシヘッドの毛先がハンドルの正面を向くように、ブラシヘッドの向きをそろえ、ブラシヘッドが止まるまで金属シャフトにヘッドをしっかり差し込んで取り付けます。

※ブラシヘッドとハンドルの間には、わずかなすき間があります。

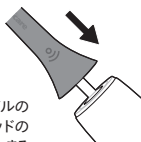


[取り外しかた]

ハンドルをしっかりと握って固定し、ブラシヘッドを真上に引き抜いて取り外します。




基本的な使いかた

1. ブラシヘッドをハンドルに取り付けます。

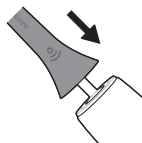

2. ブラシヘッドを数秒間、水でゆすいで濡らします。お好みにより、歯磨き粉を付けます。

※ブラシヘッドのキャップはご使用前に外してください。

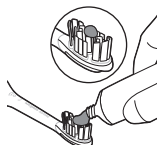

- ソニックアークを初めてお使いいただくと、少しくすぐったく感じることや振動が強く感じられることがあります。お使いいただくにつれて慣れていきます。
- ソニックアークの動きに任せ、かるく当てるだけで大丈夫です。力を入れて動かしすぎると音波水流の効果が感じられなくなってしまうことがあります。
- 1日2回のブラッシングをお勧めします。

3. ブラシヘッドを歯と歯ぐきのさかい目に角度(45度)をつけて、隙間が空かないようにあてます。電源ボタンを押します。

※ブラシヘッドを歯にあてる力が強すぎると、振動の変化(および振動音のわずかな変化)やブラシヘッド交換お知らせランプの点滅でお知らせします。「過圧防止センサー機能」(P.15)を参照してください。


※ブラシの中央部が常に歯にあたるようにしてブラッシングしてください。




4. 歯にブラシヘッドを軽くあてて、同じ箇所です約2秒間ずつブラッシングしてください。

※効果的なブラッシングをするために、この要領で口腔内全体をブラッシングしてください。

※ブラシ毛が広がる場合があります。ブラシヘッドで歯を強く磨かないでください。

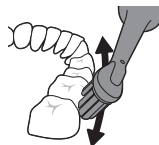

5. 歯の裏側をブラッシングするときは、ハンドルを立てるようにしてブラシをたてにあて、垂直方向に何度かブラッシングします。

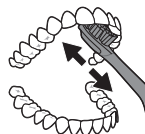

6. ブラッシング後は、水で口をゆすぎます。

上手な磨きかた

効果的に歯を磨くために、以下のポイントにご注意ください。

効果的なブラッシング方法

歯と歯ぐきの境目	奥歯の奥	かみ合わせ	前歯の裏側
 ブラシを斜め(45度)にあててください。	 ブラシを少し立てるようにあててください。	 かみ合わせ面に対して垂直にあててください。	 ブラシをたてにあててください。
歯の表側	奥歯の裏側		
 ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。	 ブラシを歯の表面に斜め(45度)にあててください。		

ヒント

- ・歯磨き粉をお使いになる場合は、歯磨き粉が周囲に飛び散ることを防ぐためブラシヘッドを口腔内に入れてから電源を入れてください。
- ・本製品の性能を引き出すために、ブラシヘッドを歯に軽くあててブラッシングしてください。
- ・カドベーター機能により口腔内を均等にくまなくブラッシングできます。「カドベーター機能」(P.16)を参照してください。
- ・本製品を初めてお使いになる場合、人によっては、少しくすぐったく感じることや振動が強く感じられることがありますが、お使いいただくにつれて慣れていきます。

このような場合

●歯列矯正装置をつけている方

歯と歯列矯正装置の間に、ブラシの毛先を斜め(45度)にあてるようにして磨きます。
歯と矯正装置の間にブラシの毛先を無理に押し込まないでください。

●治療後の歯科補綴物

詰め物、クラウン、インプラント等の歯科補綴物にもご使用いただけますが、何か異常を感じた場合は、歯科医師にご相談ください。

■ ブラシヘッド交換のタイミング

適切なブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが光でお知らせしたとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとに交換してください。

便利な機能

イージースタート機能 (振動に慣れていただくための機能)

イージースタート機能とは、通常より弱い振動からお使いいただき、ご使用回数に合わせ段階的に振動を強めていく機能です。本製品を使用して、ブラッシングの振動が強いと感じた場合は、イージースタート機能をご利用ください。本製品を初めてお使いいただいてから15回目のブラッシングで通常の強さの振動になります。

※工場出荷時の設定では、イージースタート機能はONになっています。

※14回目のブラッシングまでは、必ず最低1分間の歯磨きを行ってください。イージースタート機能が正常に動作しない場合があります。

※本製品本来の歯垢除去効果が損なわれますので、準備期間を過ぎた後にイージースタート機能を使い続けることはお勧めしません。

【イージースタート機能のONおよびOFF設定】

※イージースタート機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器台に置き、充電器台に電源が供給されている状態で行ってください。

●イージースタート機能をONまたはOFFにする


ビープ音が1回鳴るまで電源ボタンを約3秒間押し続け、指を離します。ビープ音でON/OFFの切り替えをお知らせします。

※ビープ音が低・中・高の順に連続して鳴った場合は、イージースタート機能がONになったことを示しています。

※ビープ音が高・中・低の順に連続して鳴った場合は、イージースタート機能がOFFになったことを示しています。

強さ設定 ブラッシングの振動の強さを2段階(弱、強)に調節できます。


※HX3681/27のみ

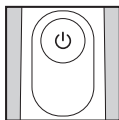

電源ボタンを押した後すぐにもう一度電源ボタンを押すと、ブラッシングの強さが変わります。

ブラシヘッド交換お知らせ機能（ブラシヘッドの交換時期をお知らせする機能）

ブラシヘッド交換お知らせ機能とは、ブラシヘッドの交換時期が近づいたことをお知らせする機能です。ブラシヘッドを歯にあてる力や使用時間を記録し、ブラシヘッドが磨耗して交換が必要な時期になるとブラシヘッド交換お知らせランプが光でお知らせしますので、ブラシヘッドを交換してください。お口の健康と適切なブラッシング効果を保つため、ブラシヘッドの交換時期をお守りください。

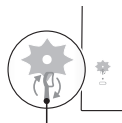

ブラシヘッド交換お知らせランプ

※ブラシヘッド交換お知らせ機能のONまたはOFF設定を行う場合は、ハンドルにブラシヘッド認識機能が付いたブラシヘッドをつけ、ハンドルを充電器台に置き、充電器台に電源が供給されている状態で行ってください。

【ブラシヘッド交換お知らせ機能のONおよびOFF設定】

●ブラシヘッド交換お知らせ機能をONまたはOFFにする

ビープ音が2回鳴るまで電源ボタンを約5秒間押し続け、指を離します。ビープ音でON/OFFの切り替えをお知らせします。

※ビープ音が低・中・高の順に連続して鳴った場合は、ブラシヘッド交換お知らせ機能がONになったことを示しています。

※ビープ音が高・中・低の順に連続して鳴った場合は、ブラシヘッド交換お知らせ機能がOFFになったことを示しています。

過圧防止センサー機能（ブラッシングが強すぎるときにお知らせする機能）

過圧防止センサー機能とは、歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるときにお知らせする機能です。ハンドルに内蔵された過圧防止センサーにより、ブラシヘッドを歯に強く当てすぎると、ブラッシングの振動が変わると同時にブラシヘッド交換お知らせランプがオレンジ色に点滅します。

過圧防止センサー機能のお知らせがあった場合は、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆわめてブラッシングしてください。ブラシヘッド交換お知らせランプが消灯し、ブラッシングの強さが通常状態に戻ります。

【過圧防止センサー機能のONおよびOFF設定】

※過圧防止センサー機能のONまたはOFF設定を行う場合は、必ずハンドルを充電器台に置き、充電器台に電源が供給されている状態で行ってください。

●過圧防止センサー機能をONまたはOFFにする

ビープ音が3回鳴るまで電源ボタンを約7秒間押し続け、指を離します。ビープ音でON/OFFの切り替えをお知らせします。

※ビープ音が低・中・高の順に連続して鳴った場合は、過圧防止センサー機能がONになったことを示しています。

※ビープ音が高・中・低の順に連続して鳴った場合は、過圧防止センサー機能がOFFになったことを示しています。


※短いビープ音が3回連続して鳴った後も電源ON/OFFボタンを押し続けると、ON/OFF設定シーケンスが繰り返されます。

カドペーサー機能（時間の区切りをビープ音でお知らせする機能）


カドペーサー機能とは、ブラッシングの区切りをビープ音（「ピー」という音）とブラシの振動の一時停止でお知らせする機能です。口腔内を均等にこまなくブラッシングすることができます。一定の間隔で短いビープ音が鳴り、ブラシの振動が一瞬止まります。口腔内を一定の間隔でブラッシングすることができます。

【磨き方参考例】

- ① 上あご右側表裏 ② 上あご左側表裏
③ 下あご右側表裏 ④ 下あご左側表裏

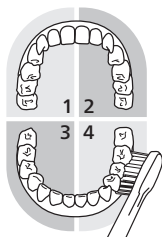

- ① 上あご表側（頬側） ② 上あご裏側（舌側）
③ 下あご表側（頬側） ④ 下あご裏側（舌側）

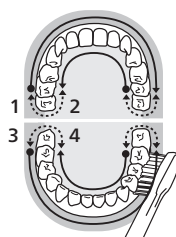

スマートタイマー機能（ブラッシング自動停止機能）

スマートタイマー機能は、2分間のブラッシング時間を経過すると自動的に停止する機能です。2分間のブラッシングサイクルの最中でブラッシングを停止したい場合は、電源ボタンを押してください。2分間の動作中に電源ボタンをOFFにしても、30秒以内に再び電源をONにすると、残ったブラッシングサイクルを実行します。下記の場合は、スマートタイマーがリセットされます。

- ・ブラッシングを30秒以上中断した場合
- ・ハンドルを電源に接続されている状態の充電器台にセットした場合

お手入れのしかた



注意

- 本製品は食洗器で洗浄したり、電子レンジで乾燥させたりしないでください。
- ハンドルや充電器は、絶対に液体の中に浸さないでください。
- お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用すると変色、変形の原因になります。絶対に使用しないでください。

本製品は、常に洗浄・掃除して、菌みがき粉などが残らないようにしてください。衛生面の問題や破損につながるおそれがあります。

ハンドル

1. ブラシヘッドを外して金属シャフト部をぬるま湯で洗浄してください。

- ※歯磨き粉などをきれいに洗い流してください。
- ※金属シャフト上のゴム製シールを先の尖ったもので突き刺さないようにしてください。破損する可能性があります。




2. ハンドル表面を湿らせた布で全体的にむらなく拭いてください。

- ※ハンドルを洗面台などに打ちつけて水を切らないでください。

ブラシヘッド

1. ご使用のたびにブラシヘッドと毛先を水で洗い、自然乾燥させてください。

2. ハンドルからブラシヘッドをまっすぐ引き抜いて外し、接合部を少なくとも1週間に1回ぬるま湯で洗い流してください。

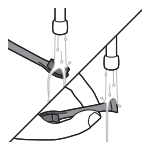

- 適切なブラッシング効果を得るため、ブラシヘッド交換お知らせランプが光でお知らせしたとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3カ月ごとにブラシヘッドを交換してください。
- ブラシヘッドに破損の兆候が見えた場合は、速やかにブラシヘッドをお取り換えください。
- 適切な効果を得るためにフリップスソニックアーク純正ブラシヘッドをご使用ください。
- 本ハンドルはブラシヘッド認識機能対応以外のブラシヘッドもご使用いただけますが、ブラシヘッド交換お知らせ機能はご利用になれませんのでご注意ください。

充電器台

1. お手入れの前に、必ず充電器台のUSBコネクタをUSB電源から抜いてください。
2. 充電器台の表面を湿らせた布で拭き、柔らかいタオルで水分を拭き取ってください。



注意


- ハンドル、充電器台は、絶対に液体の中に浸さないでください。
- お手入れの際に、アルコール、酢、漂白剤などを使用すると変色、変形の原因になります。絶対に使用しないでください。充電器台をお手入れする際は、ケーブル・USBコネクタも調べてください。もしケーブル・USBコネクタに異常がありましたら、事故防止のため使用を中止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

トラベルケース (HX3673/33の場合)

トラベルケースの内部をぬるま湯で洗浄後に湿らせた布で拭き、柔らかいタオルで水分を拭き取ってください。

保管のしかた (長期間使用しない場合)

1. 充電器台のUSBコネクタをUSB電源から抜いて、お手入れをします(「お手入れのしかた」(P.17・18)を参照してください)。
2. 直射日光を避け、冷暗所で保管してください。

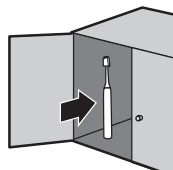

製品を廃棄するとき

※充電電池の修理交換はできません。

製品を廃棄する際は、リチウムイオン充電電池を取り出し、充電電池を取り外した後の製品については、各自自治体の廃棄方法に従い廃棄してください。

リチウムイオン充電電池のリサイクルについて

本製品はリチウムイオン充電電池を使用しています。リチウムイオン充電電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済みの製品の廃棄の際は、リチウムイオン充電電池を取り出してください。取り出したリチウムイオン充電電池は各自自治体の廃棄方法に従い廃棄するか、リサイクル協力店にお持ちください。



⚠ 注意

- 製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- 安全上の理由から、一度分解した本体は絶対に再使用しないでください。
- 充電電池は完全に放電してから、取り外してください。また、ショートのを防ぐために、作業時にはコインやヘアピン、指輪等の金属製の物体を充電電池に近づけないようにしてください。
- 作業を行う際は、目、手、指などがけのないよう注意してください。また、必ず手・本体が乾いた状態で作業を行ってください。
- 本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。
- 電池が漏液した場合は、液が目や皮膚に触れない様に注意してください。万一目に入った時は、とらずに水道水で十分洗浄し医師の治療を受けてください。皮膚や衣服についた場合は水道水で十分洗い流してください。
- 取り外した充電電池は、ショートしないように両端子をテープで覆ってください。

充電電池の取り外しかた

- ・充電電池を取り外すときは、タオルまたは布、ハンマー、マイナスドライバーをご用意してください。
- ・必ず以下の手順に従って安全に作業を行ってください。

1. ハンドルを充電器台から取り外し、電源ボタンをONにして完全に動作しなくなるまで電池を放電します。

※何度もこの手順を繰り返して、完全に動作しなくなったことをご確認ください。



2. ブラシヘッドは外して廃棄し、ハンドル全体をタオルか布で包みます。



3. 片手でハンドルの上部を持ち、ハンドルの底から1.5cmの位置をハンマーで叩きます。ハンドルを回転させながら、四方向から強く叩いて底のキャップを外します。


※キャップ、ハンドル内側の留め具が外れるまで、繰り返し叩いてください。

※作業台に傷が付くおそれがあります。必要に応じ表面の保護などを行ってください。

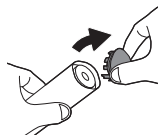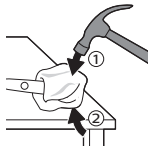


4. ハンドルの上下を逆さまにして持ち、表面が頑丈で安定した場所でシャフトを押し下げます。

※ハンドル内部の部品を取り出せない場合は、「3」の動作を繰り返し、部品を取り出してください。

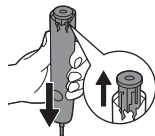


5. 充電電池と内部部品の底の白い枠との間にマイナスドライバーの先を入れ、こじ開けて充電電池を離し、白い枠を壊します。

6. 充電電池の底と白い枠の間にマイナスドライバーの先を差し込み、充電電池と緑色の回路基板の接続部にある金属タブを壊します。これで白い枠から充電電池の底が外れます。

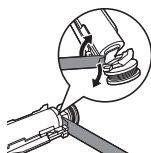

7. 充電電池をハンドル内部部品から引き出し、もう一方の充電電池タブを壊します。

※充電電池タブの先端は鋭く尖っています。指などをケガしないよう注意してください。

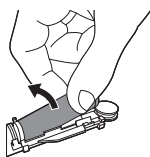

8. ショートしないように充電電池の端子をテープで覆い、充電電池を廃棄します。



故障かな?と 思ったら

故障かな?と思ったら
お調べください。

作動しない。

- 充電残量をご確認ください。詳しくは「充電表示について」(P.9)を参照してください。
充電がされない場合は、USB電源に異常がないこと、コンセントにUSB電源がきちんと差し込まれていること、充電器台のUSBコネクタがUSB電源にきちんと接続されていることを確認して、充電を行ってください。
- ブラシヘッドが金属シャフトにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
ブラシヘッドが古く接続部が摩耗している場合には、新しいブラシヘッドに交換してください。

動作がおかしい(例：動きにムラがある、ブラッシング中にブラッシング力が弱くなった)。

- 充電残量が少なくなっている可能性があります。24時間充電してください。

充電しても数分しか使えない。

- 充電時間が短い可能性があります。24時間充電してください。

ブラッシングの力が弱く感じる。

- ブラシヘッドを押しあてすぎると、ブラシの振幅が小さくなります。
ブラシヘッドは歯に軽くあてるようにしてください。
- 充電が不十分な場合もあります。再度24時間充電してください。
- ブラシヘッドが消耗していないかご確認ください(使用頻度、使用方法により異なります)。
- イーリースタート機能が働いている可能性があります。詳しくは「イーリースタート機能」(P.14)を参照してください。

ブラッシング中、一瞬毛先の動きが止まる。

- カドペーサー機能により、口腔内を均等にくまなく磨けるよう一定の間隔でピープ音が鳴り、ブラシヘッドの振動が一瞬止まります。詳しくは「カドペーサー機能」(P.16)を参照してください。

使い始めてから20秒～3分程度でブラシヘッドの動作が止まる。

- スマートタイマー機能により、電源ボタンを入れてから2分経過すると自動的に動作が止まります。詳しくは「スマートタイマー機能」(P.16)を参照してください。

ブラシヘッドが歯にあたる時にガタガタ音がする。

- ブラシを斜め(45度)にあててください。詳しくは「上手な磨きかた」(P.13)を参照してください。

変なにおいがする。

- ハンドル、ブラシヘッド、充電器台をお手入れしてください。「お手入れのしかた」(P.17・18)を参照してください。

* 以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

保証と アフターサービス

保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

- 保証は、本製品を購入された方のみ適用されます。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みになったあと大切に保管してください。

保証 期間	お買い上げ日から2年間
対象 部分	ハンドリ、充電器台 (ブラシヘッド、トラベルケースは 除く)

【補修用性能部品の保有期間】

- 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

- 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検してください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

【保証期間中は】

- 製品と保証書をご用意いただき、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
保証の規定に従って無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

- 修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- 本製品の保証は海外においても有効です(同シリーズ製品の取り扱いがある国に限りです)。
- 日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。
- 海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Oral Healthcare, LLC.
22100 Bothell Everett Hwy Bothell, WA 98021 U.S.A.
Phone: +1 (800) 682-7664

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

- お受けましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ
<http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「フィリップスのプライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

お買い上げ日	年 月 日			便 利 メ モ	TEL. ()
				お買い上げ 店 名	

ご使用の時このような症状はありませんか？

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源に接続したUSBケーブルを動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。



このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源をOFFにし、電源をコンセントからはずして、必ずフィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

愛情点検

仕 様

品 名		充電式電動歯ブラシ							
形 名		フィリップスソニッケアー3100シリーズ (HX3671/23, HX3672/23, HX3671/33, HX3675/24, HX3671/35, HX3673/33) フィリップスソニッケアー4100シリーズ(HX3681/27)							
品 番		HX3671/23	HX3672/23	HX3671/33	HX3675/24		HX3671/35	HX3673/33	HX3681/27
ハ ン ド ル 品 番		HX367W1 ホワイト	HX367W1 ホワイト	HX367W1 ホワイト	HX367W1 ホワイト	HX367BK ブラック	HX367NM ミント	HX367W1 ホワイト	HX369AB ブルー
充電器台	品 番	HX6110 ホワイト	HX6110 ホワイト	HX6110 ホワイト	HX6110 ホワイト	HX6110 ブラック	HX6110 ホワイト	HX6110 ホワイト	HX6110 ホワイト
	入力電圧	DC5V(USB Type A)							
	消費電力	1.5W							
本 体 寸 法 (高さ×幅×奥行き)		約238×25×26mm (クリーンプラスブラシヘッド装着時)							
質 量 (ハンドル+ブラシヘッド)		約97g (クリーンプラスブラシヘッド装着時)							
ブラ シ 振 動 数		約31,000ストローク/分							
充 電 時 間		約24時間							
使 用 時 間		満充電後、通常使用(目安として2分間のブラッシングを1日2回)で約2週間							
使 用 充 電 池		リチウムイオン充電電池(Li-ion)							

※改良のため、予告なく仕様を変更することがあります。

● ブラシヘッド ●

- 適切なブラッシング効果を得るため、ブラシはブラシヘッド交換お知らせランプが光でお知らせしたとき、青色のブラシ毛が白くなったとき、もしくは約3か月ごとにブラシヘッドを交換してください。
- 破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- 適切な効果を得るためにフィリップスソニッケアー純正ブラシヘッドをご使用ください。



製造元

Philips Oral Healthcare, LLC.

22100 Bothell Everett Hwy
Bothell, WA 98021 U.S.A.

株式会社 フィリップス・ジャパン

〒106-0041
東京都港区麻布台1-3-1
麻布台ヒルズ森JPタワー15階

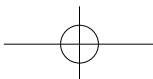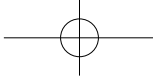

無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
3. ご贈答品の修理に関するご相談は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 本書の提示がない場合。
 - ⑥ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「フィリップスのプライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

＜フィリップス ソニックアー 3100/4100 シリーズ 保証書＞

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップス・ジャパンのホームページ <http://www.philips.co.jp/> に掲載されている「フィリップスのプライバシーに関する通知」に基づき適切に管理いたします。

品名	充電式電動歯ブラシ
品番	フィリップス ソニックアー 3100/4100 シリーズ (HX3671/23, HX3672/23, HX3671/33, HX3675/24, HX3671/35, HX3673/33, HX3681/27)
保証期間	お買い上げ日より2年
対象部分	ハンドル、充電器台(ブラシヘッド、トラベルケースは除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販売店	販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので大切に保管してください。

★ ご販売店様へこの保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。
贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ 製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

フィリップスサポートセンター

0120(944)859

受付時間:9:00~18:00(年末年始除く)

Webからの
お問い合わせ



MyPhilips 登録のご案内



フィリップスでは、製品をより快適にご使用いただくために
製品登録をおすすめしております。

① MyPhilips では製品の保証書や購入証明書の写真も保管でき、
万が一購入証明書を紛失された場合にも安心です。

URL <http://www.philips.co.jp/myphilips-about>

この印刷物は再生紙を使用しております。

3000.065.9676.3(03/24)

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. またはその他の会社の商標または登録商標です。