


PHILIPS

Lumea

IPL Hair Removal
7000 / 8000 /
9000

BRI930, BRI931, BRI932,
BRI933, BRI937, BRI938,
BRI983, BRI984

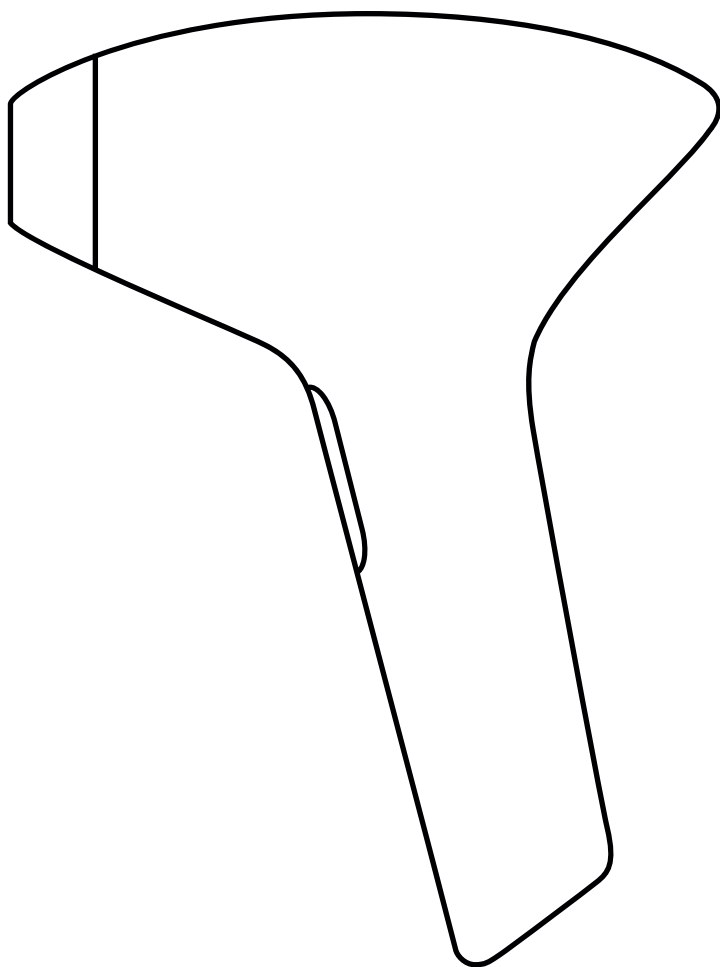


Skin tones - Suitable

Cilt tonları - Uygun

Unsuitable

Uygun değil

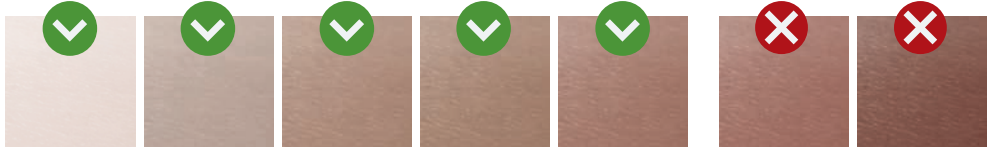

Fair

Çok açık

Light

Açık

Beige

Bej

Light

brown
Açık
kahve-
rengi

Medium

brown
Orta
kahve-
rengi

Dark

brown
Koyu
kahve-
rengi

Dark

Koyu

Body hair colors - Suitable

Vücut tüyü renkleri - Uygun

Unsuitable

Uygun değil



Dark
blond

Koyu sarı

Brown

Kahve-
rengi

Dark
brown

Koyu
kahve-
rengi

Black

Siyah

Light
blond

Açık
sarı

Red

Kızıl

White/
Grey

Beyaz/
Gri

English	5
Türkçe	37

Chapters

Welcome to Lumea	6
Intended use	6
Important safety instructions	7
Contraindications	7
Warnings	8
Cautions	10
Risks and benefits of using Lumea	11
Potential side effects of IPL treatment	12
What is IPL?	15
Lumea overview	16
<i>SenseIQ</i> 2.0 technology	17
Attachments	18
Treatment modes	19
Your treatment guide	20
Prepare for treatment	21
Test your skin	22
Perform a treatment	24
Clean and store	26
After treatment	27
Plan your next treatments	28
Troubleshooting	29
Additional information	31

Welcome to Lumea

Achieve gentle, fast and effective hair reduction with Lumea.
You can conveniently use Lumea in the comfort of your home.
Are you ready to get started?



Scan with your phone camera, QR app, or visit www.philips.com/myIPL

Note: In this user manual, Lumea refers to the Philips Lumea IPL 7000 Series, 8000 Series and 9000 Series.

Intended use

Philips Lumea is a home use device intended for the removal of unwanted hair for a single user. Lumea can be used by lay persons in the age range of 18-65 years with fair up to medium brown skin tones, and naturally dark blond, brown, dark brown and black hair. Lumea can be used on the body and on the female face* (below the cheekbone). Lumea is a handheld device intended for home use.

* Only if your Lumea includes the face attachment (BRI932, BRI933, BRI937, BRI938, BRI983, BRI984).

Is Lumea suitable for you?

Philips Lumea is not suitable for everyone. Check the skin tone and hair color tables at the start of this user manual and read the important safety instructions carefully to see if Lumea is suitable for you.

Unsuitable body hair colors: Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as hairs with these colors do not absorb enough light.

Unsuitable skin tones: You cannot use Lumea if you have dark brown to dark skin tones as these skin tones absorb light more easily which could result in pain, skin redness or burns.

Important safety instructions

 **ALWAYS** read and follow the instructions carefully to fully benefit from the use of your Lumea and to minimize the risk of injury, skin reactions and side effects. Make sure to save these instructions for future reference.

Contraindications

- **DO NOT** use Lumea if you have had chemotherapy or radiation therapy in the last 3 months.
- **DO NOT** use Lumea if your sensitivity to pain is reduced after using medication (e.g. painkiller, numbing cream) or due to a medical condition.
- **DO NOT** use Lumea if you have a dark brown or darker skin tone.
- **DO NOT** use Lumea if you are pregnant, lactating or breastfeeding.
- **DO NOT** use Lumea if you are under the age of 18 years or above 65 years.

Light sensitivity:

- **DO NOT** use Lumea if your skin is extra sensitive to light, for example if you:
 - have a sun allergy;
 - are taking certain medication or herbal remedies. Check the instruction leaflet inside your medication package to see if what you are taking can cause increased sensitivity to sunlight.

Medical conditions:

- **DO NOT** use Lumea – or consult your doctor first – if you have:
 - epilepsy with flashlight sensitivity;
 - an active skin cancer or a history of skin cancer;
 - a skin pigmentation disorder such as vitiligo;
 - a history of poor wound healing;
 - an immunocompromised state caused by a disease such as AIDS or by immunosuppressive drugs;
 - a history of collagen disorders, including a history of keloid scar formation.

Warnings

Thermal safety - To avoid pain, skin redness or burns

- **DO NOT** use Lumea on lips, nostrils, ears, scalp, nipples, labia minora, perineum, around the anus, penis, or scrotum. These areas are highly sensitive and have thinner and darker skin.
- **DO NOT** touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.
- **DO NOT** use Lumea on an active skin condition, as this may worsen the condition or cause additional pain, skin redness or burns. Skin conditions may include:
 - Active bruises, rashes, sores, open wounds, scars or sunburns. Wait until the injury is completely healed before resuming treatment.
 - Active skin irritations, inflammations or infections. Wait until the skin is completely recovered before resuming treatment.
 - Damaged skin after using depilatory (hair removal) creams. Wait at least 2 days before resuming treatment.
 - Damaged skin after using skin peeling, (micro)dermabrasion or skin rejuvenation methods. Wait at least 1 week before resuming treatment.

Eye safety - To avoid eye damage

- **DO NOT** use Lumea close to or on the eye, eyelid or eyebrow. Use Lumea only below the cheekbones.

Electrical safety - To avoid electrical shock

- **DO NOT** use Lumea in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- **DO NOT** let water run into Lumea.
- **DO NOT** expose Lumea to large temperature changes, especially in a high humidity environment, without giving Lumea time to acclimatize for 30 minutes to the ambient temperature of the room in which it will be used (see 'Technical specifications').
- **DO NOT** try to open, repair, override or modify Lumea or the power adapter.
- **DO NOT** touch any inner part of a damaged Lumea or the power adapter.
- **DO NOT** use any other attachments or power adapter than supplied with Lumea.
- **ALWAYS** check if the voltage indicated on the power adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the equipment.

General safety - To avoid serious injury

- **ALWAYS** check Lumea before you use it. Do not use Lumea or the power adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- **ALWAYS** unplug Lumea, including the power adapter, after use and in case of a power failure to prevent damage to the equipment.
- **DO NOT** use Lumea directly over or close to any active implants such as a:
 - pacemaker;
 - neurostimulator;
 - insulin pump.Check the active implants' manual for the safe distance to other electronic devices.
- **DO NOT** wear the power adapter cord around your neck to avoid strangulation.
- **DO NOT** use Lumea if you have reduced physical, sensory or mental capabilities as this could result in incorrect usage.
- **DO NOT** use Lumea, including the power adapter cable, within 30 cm of WiFi and/or Bluetooth devices (portable RF communication equipment) or smartphones as it may cause Lumea to malfunction.
- **DO NOT** use Lumea next to or stacked with other equipment. This could result in improper operation.
- **DO NOT** leave Lumea unattended when it is turned on to avoid the risk of fire.
- **KEEP** Lumea out of the reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment.
- **ALWAYS** check that the power adapter is connected to a properly installed and working wall socket to avoid the risk of fire.

Cautions

Thermal safety - To avoid pain, skin redness or burns

- **DO NOT** start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sun or tanning bed) or within 2 weeks after artificial tanning (creams, sprays or pills). Do a skin test before starting/resuming your treatment, see section 'Test your skin'.
- **DO NOT** use Lumea with the body or precision attachment on the upper lip or other areas of the face. Only use the face attachment as it has an extra integrated filter for treatment on face below the cheekbones.
- **DO NOT** continue the treatment if you experience pain or a skin reaction that lasts longer than 24 hours. Reduce the light intensity setting or stop using Lumea.
- **DO NOT** expose your skin to sunlight unprotected when using Lumea. During the entire IPL treatment period, and especially in the first 48 hours after treatment, protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas.
- **DO NOT** flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase performance.
- **DO NOT** use Lumea on skin that is darker than the surrounding treatment area. These highly pigmented skin areas can lead to excessive heating of the skin. Darker areas may include:
 - dark spots such as moles, warts, large freckles, birthmarks, age spots or dark veins;
 - marks added to the skin, such as tattoos or (permanent) makeup.
- **DO NOT** use Lumea on male neck and face. The hairs in these areas have different characteristics.
- **DO NOT** mark your skin/treatment area with any type of pencil or pen.
- **DO NOT** use Lumea if there is any lotion, gel or visible hair on your skin or on the device. Only treat skin that is clean, dry and hair-free. Make sure Lumea is clean and dry as well.
- **DO NOT** use Lumea if the light exit window or window frame is damaged. Check Lumea for damage before use.
- **DO NOT** subject Lumea to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.
- **DO NOT** treat more often than once every 2 weeks.

Eye safety - To avoid eye discomfort

- **ALWAYS** use Lumea in a well-lit room. Your eyes are more sensitive to stray light in darker conditions.

General safety - To avoid injury

- **DO NOT** use Lumea over vascular skin disorders (e.g. varicose veins).
- **ENSURE** that the power adapter can be easily disconnected from the electrical outlet in case of a malfunction. The power adapter is considered a disconnection device.
- **DO NOT** share Lumea with other persons for hygienic reasons. Lumea is intended for single person use only.

Notice

Any serious incident that has occurred in relation to this device should be reported to Philips via www.philips.com/support and to the competent authority (https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en) of the Member State in which the user is established.

Risks and benefits of using Lumea

The safety and effectiveness of Lumea was tested in a clinical study involving 94 women (aged 18-64 years). None of the subjects left the study early due to problems associated with the use of Lumea.

Out of the 94 subjects, 31 experienced one or more mild and transient side effects: pain (26), itchiness (8), redness (5), folliculitis (2), burning sensation (1), superficial crusting (1) and swelling (1).

Results after 4 bi-weekly treatments:

- 75 women received treatments on their upper lip and achieved up to 61.1 % hair reduction.
- 76 women received treatments on their armpit area and achieved up to 60.6 % hair reduction.
- 77 women received treatments on their bikini area and achieved up to 61.9 % hair reduction.
- 76 women received treatments on their legs and achieved up to 93.1 % hair reduction.

35 women completed 8 additional touch-up treatments (once every 4 weeks) and achieved up to 67.0 % hair reduction over all treated areas.

Potential side effects of IPL treatment

The table below lists known side effects that may occur following treatment with IPL devices.

Common side effects	What is observed?	How long does it last and how can it be helped?
Pain/ uncomfortable sensation	Local pain or discomfort on the treated area during or after treatment	If your treatment feels painful/ uncomfortable, reduce the light intensity setting or stop using Lumea. Pain or discomfort after treatment can last up to 1 week.
Itching sensation	Perceived itching in the treated area	These reactions typically resolve within hours but can last up to 1 week. You can cool the area with a cold pack.
Warm/burning sensation	Local warm or burning feeling on the treated area	
Skin redness (erythema)	Redness without a clear edge in the treated area	This reaction typically resolves within hours but can last up to 1 day. You can cool the area with a cold pack. Skin redness lasting longer than 1 day is an uncommon side effect of IPL and a sign of a skin burn. Wait with the next treatment until the skin has healed completely. Make sure you use a lower light intensity for next treatments.

Uncommon side effects	What is observed?	How long does it last and how can it be helped?
Swelling (edema)	Swelling around hair follicles appears as bumps in the treated area, sometimes accompanied by redness.	This reaction typically resolves within hours but can last up to 1 week. You can cool the area with a cold pack.
Skin dryness	Skin appears rough and flaky in the treatment area.	This reaction typically lasts between 1 day and 1 month. You can apply a non-scented moisturizer to the treated area.
Burns and blisters	Extensive skin redness, swelling and possibly blisters, accompanied by pain	These reactions can last between 1 day and 1 month and may require medical treatment or medication. We advise you to consult a doctor. Wait with the next treatment until the skin has healed completely.
Superficial crust	A sharply defined brownish and crusty area that can occur on darker skin tones	Make sure you use a lower light intensity for next treatments.
Folliculitis	Swelling and redness around hair follicles, accompanied by itching and/or pustule formation	Folliculitis may require medical treatment or medication. We advise you to consult a doctor. Folliculitis may last several days up to several weeks. Wait with the next treatment until the skin has healed completely. Make sure you use a clean razorblade when shaving before treatment.
Pigmentary changes/skin discoloration	Skin of the treated area appears darker or lighter than the surrounding skin.	This reaction typically lasts several weeks and, in rare cases, up to a year. Do not treat areas with pigmentary changes/skin discolorations until your skin has regained its normal skin tone. Make sure you use a lower light intensity for next treatments.
Skin infection	Appears as inflamed skin. This is a secondary effect which may occur after a skin burn or other injuries.	Skin infection requires medical treatment or medication. We advise you to consult your doctor. Do not treat over skin infections.

Uncommon side effects	What is observed?	How long does it last and how can it be helped?
Scarring	A scar may occur as a secondary effect after a burn or skin infection.	It is important to consult your doctor if you have a burn or folliculitis to prevent formation of a scar. Do not treat over scar tissue.
Herpes outbreak	Small blisters or open sores, typically near the lip or genitals, experienced by users infected with Herpes Simplex virus	An outbreak typically lasts for several days to weeks and can be shortened by taking anti-viral medications prescribed by your doctor.
Headache and afterimages	Sensitive persons may experience headache or afterimages when the light flash reaches the eye.	These reactions typically last between minutes to several hours. To prevent them, make sure you use Lumea in a well-lit room and press the device firmly onto your skin before flashing.

Hair removal by Intense Pulsed Light can cause increased hair growth in some individuals. Body areas at risk include women's jawline, neck and areas above the cheekbone and men's upper back and shoulders. Based upon current data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage.

What is IPL?



Scan the QR code to watch a short video.




1. IPL stands for Intense Pulsed Light.

Gentle pulses of light are absorbed by the roots of your hair.



2. These pulses of light cause the hair follicles to go into a resting phase.

The hair sheds naturally, and growth is reduced for a certain number of months.

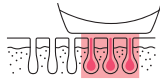


3. Hair does not grow continuously: it grows in cycles.

Not all the hairs in one area are growing at the same time. Since IPL is only effective on hair that is actively growing, it is important to repeat treatments as indicated.

Lumea overview



Scan the QR code to watch a short video.

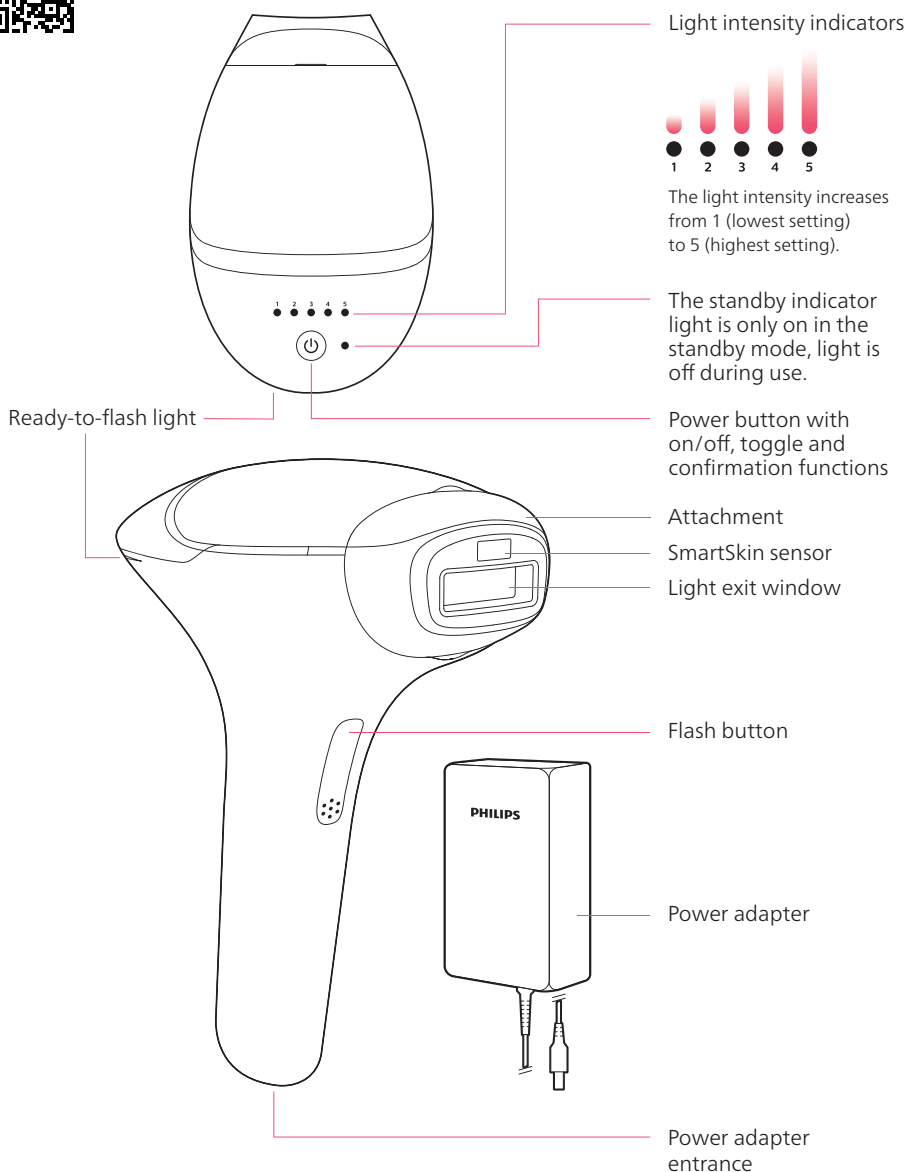

Not shown:

- Cleaning cloth
- Beauty bag or premium beauty pouch, or luxury beauty box

SmartSkin sensor

SmartSkin sensor determines your skin tone and will help you select a comfortable setting by lighting up one of the light intensity indicators on top of your device.

It also automatically prevents you from treating areas of your skin that are too dark for safe use.



Ready-to-flash light

The white ready-to-flash light will let you know when you have good skin contact and your Lumea is ready to flash.

If the ready-to-flash light blinks orange, your skin in this body area is too dark to treat. Treat a lighter colored body area.



SenseIQ 2.0 technology



SenseIQ 2.0
technology

SenseIQ 2.0 technology for a personalized hair removal treatment, our signature combination of:

- Improved smart sensors that measure your skin tone and support you in selecting a setting for a comfortable treatment.
- Unique attachments designed for each curve of your body.
- Philips Lumea IPL app to support your treatment routine.

Attachments



Scan the QR code to watch a short video.

Your Lumea comes with different attachments you can use on different body areas. Select the attachment that is intended for the area you want to treat.


	Attachment type	BR1930	BR1931	BR1932	BR1933	BR1937	BR1938	BR1983	BR1984
	Body attachment - largest window size; - a curved-in design to effectively cover and treat areas below the neckline.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Face attachment - smallest window size for precise treatment below the cheekbones; - small, flat design; - extra integrated filter for treatment on the face below the cheekbones. ⚠ DO NOT use Lumea on male neck and face. The hairs in these areas have different characteristics. Tip: Place your tongue between your upper lip and your teeth or puff out your cheeks to make the treatment easier.								
	Precision attachment - medium window size; - curved-out design for precise and effective use on bikini and armpit areas.				✓	✓			
	Precision attachment for bikini - medium window size; - curved-out design for precise and effective use on the bikini area.							✓	✓
	Precision attachment for armpits - medium window size; - curved-out design for precise and effective use on the armpit area.							✓	✓

Treatment modes




Scan the QR code to watch a short video.

Your Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas.

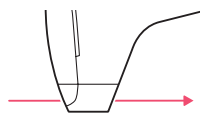

Slide & flash

For larger areas (legs), keep the flash button continuously pressed as you slide Lumea over your skin. Lumea keeps releasing flashes until you release the button or if you lose good skin contact.

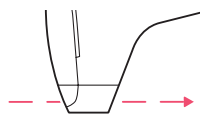

Stamp & flash

For small body areas (bikini, armpit), place Lumea on your skin and press the flash button. Lift Lumea from your skin and place it beside the spot previously treated. Press the flash button again to release another flash.

Your treatment guide

Please read the important safety instructions in the user manual to check if a Lumea treatment is suitable for you, so you can fully benefit from your device.

Before your treatment



1. Prepare for treatment
Remove hair, ensure that your skin is clean and dry



2. Test your skin
Find your comfortable setting



3. Wait 24h for skin reactions

Treatment



4. Perform a treatment



5. Clean and store



6. Plan your next treatments




Scan the QR code and watch our how-to videos for step-by-step guidance on performing a Lumea treatment, along with general videos about your Lumea device.

Prepare for treatment



Scan the QR code to watch a short video.

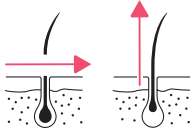


1. Remove hair

Wax, shave or epilate before using Lumea.


Do a treatment before new hair is visible on your skin.

If you choose to wax, wait 24 hours before you use Lumea.

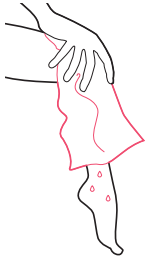

2. Clean and dry skin

No water, oil, cream or body milk should be left on your skin.

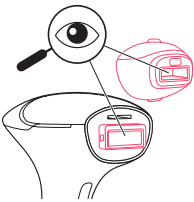

3. Choose the right attachment and check your Lumea for damage and dirt



ALWAYS check Lumea before you use it. Do not use Lumea or the power adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.



DO NOT use Lumea if there is any lotion or gel on your skin or on Lumea. Only treat skin that is clean and dry. Make sure Lumea is clean and dry as well.

Test your skin




Scan the QR code to watch a short video.


⚠ DO NOT start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sun or tanning bed) or within 2 weeks after artificial tanning (creams, sprays or pills).

Before your first treatment on each body area or after exposing your skin to sunlight unprotected, test your skin's reaction and find your suitable setting for treatment.

1. Follow the steps in section 'Prepare for treatment'

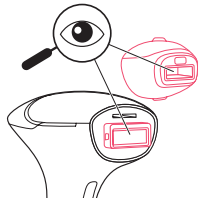


2. Check your Lumea for damage and dirt

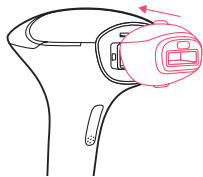

3. Attach the right attachment

Click on the attachment for the area you want to treat.

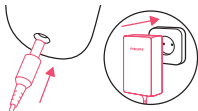


4. Plug in

Plug in Lumea to the wall socket.



5. Press the power button

The 5 light intensity indicators above the power button will light up continuously from left to right and back, until you place Lumea on your skin.

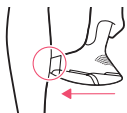

6. Place Lumea on your skin

It must sit flush against your skin.



7. Get your light intensity setting

One of light intensity indicators will turn white to indicate the proposed setting for you. The setting is selected automatically after 5 seconds.

Note: If the ready-to-flash light blinks orange your skin may be too dark to treat, please consult chapter 'Troubleshooting'.



8. Find your comfortable setting


Place Lumea back on your skin.

The ready-to-flash light will light up white.



Press the flash button 1 time. If the flash is comfortable, you can increase the setting. If you experience pain, lower the setting. Toggle through the settings by pressing the power button.

Change the setting, move Lumea to the next spot and flash again. Repeat until you find the highest comfortable setting.

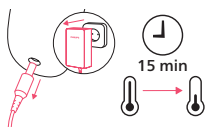


9. Turn off, unplug



DO NOT touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.

Hold the power button for 2 seconds. Unplug your Lumea and the power adapter from the wall socket. Let your Lumea cool down.

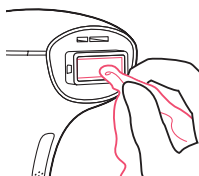

10. Clean all parts of your Lumea after use

It is important to clean all parts of your Lumea. Residue like hair, sweat, or dirt can build up from the flashing process and may cause skin reactions if left uncleaned. Follow the steps in section 'Clean and store'.



11. Wait 24 hours and check your skin for any reactions

If there are no skin reactions after 24 hours, start the treatment with the highest comfortable setting.

If the highest comfortable setting resulted in a skin reaction, choose a lower setting that did not result in any skin reactions.

If you did not test a lower setting, repeat the skin test.

Perform a treatment




Scan the QR code to watch a short video.

Test your skin's reaction before treating a new body area or after exposing your skin to sunlight unprotected.


1. Follow the steps in section 'Prepare for treatment'

2. Check your Lumea for damage and dirt

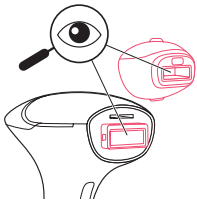

3. Attach the right attachment

Click on the attachment for the area you want to treat.

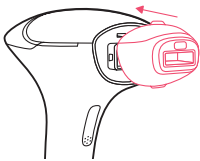

4. Be comfortable

Make yourself comfortable before you start the treatment.



5. Plug in. Press the power button

The 5 light intensity indicators above the power button will light up continuously from left to right and back, until you place Lumea on your skin.



6. Select setting


Press the power button to toggle through the settings and select your highest comfortable setting that did not result in any skin reactions.



7. Begin treatment

Place Lumea on your skin.

The ready-to-flash light will light up white.

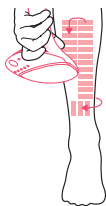


8. Flash. Then move

⚠ DO NOT continue the treatment if you experience pain. Reduce the light intensity setting or stop using Lumea.

DO NOT flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase performance.


Press the flash button. Move to an adjacent spot and flash again.

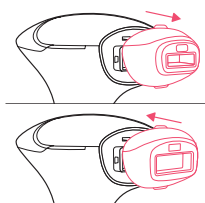

9. Treat another body area

⚠ DO NOT start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sun or tanning bed) or within 2 weeks after artificial tanning (creams, sprays or pills). Do a skin test before starting/resuming your treatment, see section 'Test your skin'.


If you want to treat another body area, make sure you select the right attachment and start again with step 1. If you are treating a body area for the first time or after exposure to sunlight unprotected, make sure you perform a skin test. Wait 24 hours and check your skin for any reactions.

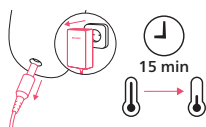

10. Finished. Turn off and unplug

⚠ DO NOT touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.

Hold the power button for 2 seconds. Unplug your Lumea and the power adapter from the wall socket. Let your Lumea cool down.

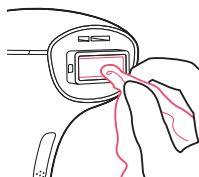

11. Clean all parts of your Lumea after use

It is important to clean all parts of your Lumea. Residue like hair, sweat, or dirt can build up from the flashing process and may cause skin reactions if left uncleaned. Follow the steps in section 'Clean and store'.




12. Schedule your next treatment

Follow the steps in section 'Plan your next treatments'.

Clean and store




Scan the QR code to watch a short video.

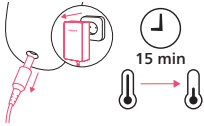

1. Turn off, unplug and cool your Lumea

⚠ DO NOT touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.

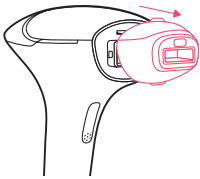

2. Click off the attachment

Gently pull it off.




3. Lightly moisten your Lumea cleaning cloth

⚠ DO NOT use Lumea in wet surroundings.


DO NOT let water run into Lumea.

Dampen the soft Lumea cleaning cloth with a few drops of water.

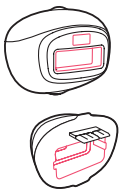


4. Clean the attachments

Clean each part of the attachment you used, including the metal reflectors.

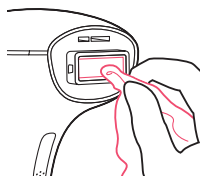


5. Clean the light exit window

Make sure there is no dirt, residue or moisture left on the surface of the light exit window.

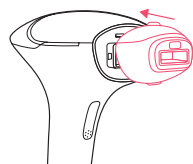

6. Click on an attachment

Make sure the light exit window of your Lumea is protected from damage by clicking on one of the attachments.

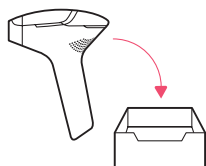

7. Store

Store all parts in the original packaging or in the provided bag, pouch or box in a dust-free and dry place.

After treatment

After use, if you want to apply lotions, creams, deodorants, moisturizers or cosmetics to the treated areas, always check the instruction leaflet of the product you want to apply to make sure it is suitable for the condition of your skin at that moment.

Plan your next treatments



Scan the QR code to watch a short video.

Follow the indicated treatment schedule.



24 hours

Test phase

Before your first treatment on each body area or after exposing your skin to sunlight unprotected, do a skin test by following the steps in section 'Test your skin'. Wait 24 hours after the skin test before you start your treatment phase.



Treatment phase: 4 bi-weekly treatments

During the treatment phase which lasts 4 treatments, perform a treatment every 2 weeks.

Perform a treatment within 3 days before or after the planned treatment date during the treatment phase.



Touch-up phase: once every 4 weeks

After the treatment phase, use your Lumea once every 4 weeks to maintain results.

Perform a treatment within 4 days before or after the planned treatment date during the touch-up phase.

Note: If you miss a treatment, consult chapter 'Troubleshooting' for guidance. If you deviate from the treatment schedule, you may not achieve the intended results.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with your Lumea or if you deviate from your treatment schedule. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country as indicated in the included international warranty leaflet.

Common problems while using your Lumea:

Problem

My Lumea is not flashing / the ready-to-flash light turns orange and starts to blink.

My Lumea produces a strange smell while flashing.

The light intensity indicators on top of my Lumea are blinking and the ready-to-flash light is orange and blinking.

Solution

1. Your skin may be too dark. Check the skin tone/hair color tables inside the cover of this booklet.
 2. Make sure your attachment is (properly) connected to the front of your Lumea.
 3. Make sure you have full skin contact for at least 5 seconds. In some areas (sensitive and bony area) it might be difficult to make good skin contact. No light should be able to enter between Lumea and your skin. Try repositioning your Lumea.
 4. Make sure you press the flash button on the inside handle to treat an area of your skin.
-

1. Make sure you have removed all hairs in the area you want to treat, before using your Lumea. Burned hairs can cause smells.
 2. Make sure your skin is clean and dry before starting a treatment.
 3. Make sure your Lumea and its attachments are clean and dry before starting a treatment. Residue like hair, sweat, or dirt can build up from the flashing process and may cause skin reactions if left uncleaned.
-

1. Lumea is in error mode. Press the power button for more than 2 seconds, Lumea should go back to standby. Or unplug Lumea from the mains, it should turn off.
2. Wait 5 minutes. Lumea will automatically go back to standby after 5 minutes without help.

What to do if you deviate from your treatment schedule:

Phase	Problem	Solution
Treatment phase	Missed treatment. <i>I did my treatment more than 3 days after the originally planned date.</i>	Try to stay closer to your planned treatment date. You can continue with the original planned schedule. You may add one additional bi-weekly treatment to your treatment phase. If you deviate from the treatment schedule, you may not achieve the intended results.
	Last bi-weekly treatment. <i>I finished my treatment phase, but I feel I did not reach the claimed results.</i>	You may choose to add an additional bi-weekly treatment to your treatment phase, but claimed results are based on the indicated treatment schedule and individual results vary.
Touch-up phase	Out of treatment window. <i>I did not treat within 4 days of my scheduled treatment date.</i>	Please follow the correct schedule. If you deviate from the treatment schedule, you may not achieve the intended results. You can continue with the original planned schedule or you may choose to restart the treatment phase, but claimed results are based on the indicated treatment schedule and individual results vary.

Additional information

Recycling



- This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU).
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

The EU REACH Regulation 1907/2006 requires Philips to provide chemical content information for Substances of Very High Concern (SVHC), if they are present in the relevant article above a concentration of 0.1 % weight by weight. Information on substances, contained in the Philips products, can be found on the Philips REACH website: www.philips.com/REACH.

Electromagnetic compatibility

This product has been tested and found to comply with IEC 60601-1-2 for electromagnetic compatibility (EMC) as Class B according to CISPR 11. Tests levels are listed in the accompanying tables. Only the power adapter that is supplied with Lumea should be used with your device.

Guidance and manufacturer's declaration on electromagnetic emissions and immunity

Lumea is intended for use in the electromagnetic environment listed here. The user of the device should assure that it is used in such an environment to prevent improper operation.

Emissions	Compliance	Electromagnetic environment – guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	Lumea does not use RF energy for its intended function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	Lumea is suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Immunity test	Immunity test level	Electromagnetic environment – guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV air	Floors can be a source of static electricity. When the air is very dry (<20 % RH) the user is advised to use Lumea in a room with concrete or wooden floor (instead of using it in a room with a synthetic floor).
Radiated RF EM fields IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	±8 kV contact ±15 kV air
Proximity fields from RF wireless Communications Equipment IEC 61000-4-3	385 (27), 450 (28), 710 (9), 745 (9), 780 (9), 810 (28), 870 (28), 930 (28), 1720 (28), 1845 (28), 1970 (28), 2450 (28), 5240 (9), 5500 (9), 5785 (9) MHz (V/m)	Lumea is immune against any RF wireless communication device such as smart phone, Wi-Fi or Bluetooth device at a distance of 30 cm or more. Avoid a closer distance as this may result in improper operation.
RATED power frequency magnetic fields IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz or 60 Hz	
Proximity magnetic fields IEC 61000-4-39	30 kHz, CW, 8 A/m 134.2 kHz, Pulse modulation 2.1 kHz, 65 A/m 13.56 MHz, Pulse modulation 50 kHz, 7.5 A/m	
Electrical fast transient/burst IEC 61000-4-4	±2 kV 100 kHz repetition frequency	Mains power quality expected of a typical commercial or residential environment.
Surges IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV Line-to-line	Mains power quality expected of a typical commercial or residential environment.
Conducted disturbances induced by RF fields IEC 61000-4-6	3 V _{rms} , before modulation is applied 0.15 MHz – 80 MHz 6 V _{rms} , before modulation is applied in ISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	Mains power quality expected of a typical commercial or residential environment. At power interruptions Lumea will switch off.

Note: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level.

If in the unlikely event Lumea is locked inoperative in a function by disturbances from other devices beyond the levels stated in the table above, Lumea will shut-off completely and must be restarted by the power button. In that case make sure the distance to the other device causing this disturbance is enlarged.

This device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Technical specifications

Electrical specification	The combination of the power adapter and Lumea is considered: Class II ME EQUIPMENT
Attachment	Type BF applied part The applied part (attachment) can become hot during use <60 °C. If this occurs, let the device cool down and limit the contact duration to less than 1 minute.
Mode of operation	Continuous operation
Intended operator	The user is the intended operator
IP rating power adapter	IP22
Light output	
Risk group classification	Exempt
Wavelength range of emitted optical radiation	Body and precision attachment: 520 nm – 1200 nm Face attachment: 590 nm – 1200 nm
Spot size	Body attachment: 4.1 cm ² (32.7 mm x 12.6 mm) Precision attachment: 3 cm ² (30.0 mm x 10.0 mm) Face attachment: 2 cm ² (25.0 mm x 8.0 mm)
Optical exposure	Setting 1: 2.5 +/- 0.80 J/cm ² Setting 2: 3.1 +/- 0.85 J/cm ² Setting 3: 3.8 +/- 0.91 J/cm ² Setting 4: 4.4 +/- 0.96 J/cm ² Setting 5: 5.0 +/- 1.00 J/cm ²
Maximum optical energy	Body attachment: 23.0 J Precision attachment: 16.8 J Face attachment: 11.2 J
Optical homogeneity	Max. +/- 30 % deviation from average optical exposure in treatment area
Pulse sequence	Single pulse, for all settings
Pulse interval	1.0 – 2.4 s, for all settings
Pulse width	1.25 +/- 0.4 ms (FWHM)
Transport and storage conditions	Lumea remains operational in NORMAL USE within its specification after transport or storage in the following environmental range: - a temperature range of -25 °C to 70 °C; and - a relative humidity up to 95 % RH, noncondensing; and - an atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa. If the device has been stored in a hot or cold environment, place it in an environment with a temperature of 20 °C for 30 minutes to let it reach a temperature within the usage conditions (5 °C to 40 °C) before you use it.
Operating conditions	Lumea complies with its specifications when operated in NORMAL USE under the following environmental operating conditions: - a temperature range of 5 °C to 40 °C; - a relative humidity range of 15 % to 90 % RH, noncondensing; and - an atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa.

Power adapter	
Power adapter input	100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
Power adapter output	19.5 V  3.33 A 65.0 W
Average active efficiency	≥88.0 %
Efficiency at low load (10 %)	≥79.0 %
No-load power consumption	<0.21 W
Device weight	Power adapter ~ 480 g Handpiece ~ 430 g
Device size	Power adapter ~ 10.8 x 6.5 x 6.8 cm Handpiece ~ 20.0 x 14.5 x 9.5 cm
Service life	5 years, based on Lumea treatment schedule with 14 full body treatments per year. For the lifetime of 5 years the effective light output is verified.
Materials	
Housing	PC (Polycarbonate), ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene), PA (Polyamide)
Cable	TPE (Thermoplastic elastomer)

Explanation of symbols

The safety signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the safety signs and symbols on the label and in the user manual.



IEC 60417-5333 Type BF applied part
This symbol identifies the type BF applied part complying with IEC 60601-1.



ISO 7000-2620 Humidity limitation
This symbol indicates the acceptable upper and lower limits of relative humidity for transport and storage.



ISO 7000-2621 Atmospheric pressure limitation
This symbol indicates the acceptable upper and lower limits of atmospheric pressure for transport and storage.



ISO 7000-0632 Temperature limit
This symbol indicates the maximum and minimum temperature limits at which the item shall be stored, transported or used.



ISO 7000-0626 Keep dry
This symbol indicates that the device shall be kept dry.

IP22

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 12.5 mm and against harmful effects due to the ingress of dripping water when tilted at 15 degrees.



IEC 60417-5172 Class II equipment
This symbol indicates 'Class II Equipment'. The power adapter is double-insulated.



ISO 7000-3082 Manufacturer
This symbol indicates the manufacturer of the product.



IEC 60417-6049 Country of manufacture
This symbol indicates the country of manufacture and the manufacturing date. 'CC' is the two-letter country code.



ISO 7000-2492 Batch number
This symbol indicates the manufacturer's batch number.



ISO 7000-2498 Serial number
This symbol indicates the manufacturer's serial number.



ISO 7000-2493 Catalogue number
This symbol indicates the manufacturer's catalogue number.



IEC 60417-5032 Alternating current
This symbol indicates alternating current.



IEC 60417-5031 Direct current
This symbol indicates direct current.



ISO 7000-1641 Refer to consult instructions for use
This symbol indicates that operating instructions should be considered when operating the device.



ISO 7010-W017 Warning; Hot surface
This symbol warns about a hot surface. The background color is yellow, the color of the symbol is black.



IEC 61558-1 Rated maximum ambient temperature
This symbol indicates the maximum ambient temperature at which the transformer may be operated continuously under normal conditions of use.



IEC 60417-5957 For indoor use only
This symbol means that the device is designed for indoor use.



IEC 60417-5947 Safety isolating transformer, short-circuit proof
This symbol means that the transformer is designed to be short-circuit proof.



IEC 60417-6190 Power supply unit, switch mode
This symbol means that the transformer is considered a Switch Mode Power Supply (SMPS) unit.



IEC 60417-6343 Maximum altitude
This symbol indicates that the appliance is intended to be usable up to the maximum altitude 3000 m.



ISO 7000-3706 Single patient multiple use
This symbol indicates that the device may be used multiple times on a single user.



SenseIQ 2.0 technology
This symbol indicates that the device is equipped with SenseIQ 2.0 technology.



ISO/IEC 16022 Information technology – Automatic identification and data capture technologies – Data Matrix barcode symbology specification. The data matrix (QR-code) is used to capture information in a machine-readable form.

**ISO 15223-1 Unique Device Identifier**

Indicates the Unique Device Identifier that is used to identify a specific product.

**ISO 7010-W001 General warning sign**

This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as contraindications and warnings. On the device, the background color is yellow, the color of the symbol is black.

**ISO 7000-0434A Caution**

This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information on cautions.



A recycling symbol to identify the material of which an item is made, to facilitate recycling or other reprocessing. The symbol includes a number to identify the material code.

**IEC 60417-5009 Stand-by**

This symbol identifies the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition. The symbol also identifies the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.



This symbol indicates Forest Stewardship Council. The FSC trademarks enable consumers to choose products that support forest conservation, offer social benefits, and enable the market to provide an incentive for better forest management.

**IEC 60417-6352 Do not use power supply with damaged plug**

This symbol indicates that the power adapter should not be used if the plug pins are damaged.



0344

Symbol for 'the device complies with European Medical Device Regulation 2017/745, Restriction of Hazardous Substances (RoHS) 2011/65/EU, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2012/19/EU requirements'. 0344 refers to the Notified Body number for the European Medical Device Regulation.

**ISO 15223-1 Medical device**

This symbol indicates that this is a medical device.



This symbol indicates WEEE, waste electrical and electronic equipment. Electrical waste products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or retailer for recycling advice (see 'Recycling').



If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Bölümler

Lumea'ya hoş geldiniz!	38
Kullanım amacı	38
Önemli güvenlik talimatları	39
Kullanılmaması gereken durumlar	39
Uyarılar	40
Önlemler	42
Lumea'yı kullanmanın riskleri ve avantajları	43
IPL işleminin olası yan etkileri	44
IPL nedir?	47
Lumea'ya genel bakış	48
SenseIQ 2.0 teknolojisi	49
Aparatlar	50
Uygulama modları	51
Uygulama kılavuzunuz	52
Uygulamaya hazırlık	53
Cildinizi test etme	54
Uygulama gerçekleştirme	56
Temizleme ve saklama	58
Seans sonrası	59
Sonraki uygulamalarınızı planlama	60
Sorun giderme	61
Ek bilgiler	63

Lumea'ya hoş geldiniz!

Lumea ile tüyleri nazik, hızlı ve etkili bir biçimde azaltın. Lumea'yı evinizin konforunda rahatça kullanabilirsiniz. Başlamaya hazır mısınız?



Telefon kamerasınız veya QR uygulamanızla tarayabilir ya da www.philips.com/myIPL adresini ziyaret edebilirsiniz

Not: Bu kullanıcı kılavuzunda Lumea ifadesi, Philips Lumea IPL 7000 Serisi, 8000 Serisi ya da 9000 Serisi cihazı ifade eder.

Kullanım amacı

Philips Lumea, kullanıcıların istenmeyen tüylerini azaltmak amacıyla üretilmiş, evde kullanıma yönelik bir cihazdır. Lumea, 18 ile 65 yaş arasında, doğal saç rengi koyu sarı, kahverengi, koyu kahverengi ve siyah olan, çok açık ile orta kahverengi cilt tonuna sahip, uzman olmayan kişilerce kullanılabilir. Lumea vücutta ve kadın yüzünde* (elmacık kemiği altında) kullanılabilir. Lumea ev kullanımına yönelik bir cihazdır.

* Yalnızca Lumea cihazınızın yüz aparatını içermesi durumunda (BRI932, BRI933, BRI937, BRI938, BRI983, BRI984).

Lumea sizin için uygun mu?

Philips Lumea herkes için uygun değildir. Lumea'nın sizin için uygun olup olmadığını görmek için bu kullanım kılavuzunun başındaki cilt tonu ve saç rengi tablolarını kontrol edin ve önemli güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun.

Uygun olmayan vücut tüyü renkleri: Tüyleriniz açık sarı, gri, kırmızı veya beyazsa bu renklerdeki tüyler ışığı yeteri kadar absorbe etmediği için uygulama etkili olmaz.

Uygun olmayan cilt tonları: Koyu cilt tonları, ışığı daha kolay absorbe ederek acı, cilt kızarıklığı veya yanıklara yol açabildiği için bu cilt tonlarına sahipseniz Lumea'yı kullanamazsınız.

Önemli güvenlik talimatları

⚠ **DAİMA** talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın; böylece Lumea'nızdan en iyi şekilde yararlanabilir ve yaralanma riskini, cilt reaksiyonlarını ve yan etkileri en aza indirebilirsiniz. Bu talimatları gelecekte başvurmak üzere sakladığınızdan emin olun.

⚠ Kullanılmaması gereken durumlar

- Son 3 ayda kemoterapi veya radyoterapi gördüyseniz Lumea'yı **KULLANMAYIN**.
- İlaç kullanımı (ör. ağrı kesici, uyuşturucu krem) veya tıbbi durum nedeniyle ağrıya duyarlılığınız azaldıysa Lumea'yı **KULLANMAYIN**.
- Koyu kahverengi veya daha koyu bir cilt tonuna sahipseniz Lumea'yı **KULLANMAYIN**.
- Hamileyseniz, emzirme dönemindeyseniz veya emziriyorsanız Lumea'yı **KULLANMAYIN**.
- 18 yaşından küçükseniz veya 65 yaşından büyükseniz Lumea'yı **KULLANMAYIN**.

İşığa duyarlılık:

- Cildiniz ışığa aşırı duyarlıysa, örneğin şu durumlarda Lumea'yı **KULLANMAYIN**:
 - güneş alerjiniz varsa;
 - belirli ilaçlar veya bitkisel ürünler kullanıyorsanız. İlaç paketinin içindeki prospektüsü kontrol ederek aldığınız ilacın ışığa aşırı duyarlılığa yol açıp açamayacağını öğrenin.

Tıbbi durumlar:

- Aşağıdaki sorunları yaşıyorsanız Lumea'yı **KULLANMAYIN** veya öncesinde doktorunuza danışın:
 - yanıp sönen ışıklara duyarlı epilepsi;
 - aktif cilt kanseri veya cilt kanseri geçmişi;
 - vitiligo gibi bir cilt pigmentasyon bozukluğu;
 - yaraların geç iyileşmesine dair öykü;
 - AIDS gibi bir hastalık veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların yol açtığı bağışıklık yetmezliği;
 - keloid yarası formasyonu dâhil, kolajen bozukluğu.

⚠ Uyarılar

Termal güvenlik - acı, cilt kızarıklığı ve yanıkları önlemek için

- Lumea'yı dudak, burun deliği, kulak, saç derisi, meme ucu, vajinal iç dudak, bacak arası üzerinde ve anüs, penis veya testis torbası çevresinde **KULLANMAYIN**. Bu bölgeler son derece duyarlı olmanın yanı sıra daha ince ve daha koyu deriye sahiptir.
- Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra ışık çıkış penceresi çok ısınmış olacağı için bu kısma **DOKUNMAYIN**. Kullanımdan sonra, Lumea'nın ve güç adaptörünün fişini çekin ve bunları temizlemeden ve saklamadan önce 15 dakika soğumaya bırakın.
- Lumea, aktif cilt sorunu bulunan alanlarda sorunu daha kötü hâle getirebileceği veya daha fazla acı, kızarıklık veya yanığa yol açabileceği için Lumea'yı bu alanlarda **KULLANMAYIN**. Cilt sorunları arasında şunlar bulunur:
 - Geçmemiş morluk, döküntü, ağrılı yara, açık yara, yara veya güneş yanığı. İşleme devam etmeden önce yaranın tamamen iyileşmesini bekleyin.
 - Geçmemiş cilt tahrişi, enflamasyonu veya iltihapları. İşleme devam etmeden önce cildin tamamen iyileşmesini bekleyin.
 - Tüy dökücü krem kullandıktan sonra hasar gören deri. İşleme devam etmeden önce en az 2 gün bekleyin.
 - Ciltte peeling uygulaması, (mikro)dermabrazyon veya cilt gençleştirme yöntemleri sonrasında hasar görmüş ciltler. İşleme devam etmeden önce en az 1 hafta bekleyin.

Göz güvenliği - Gözün hasar görmesini önlemek için

- Lumea'yı göz, göz kapağı, kaşın yakınında veya üzerinde **KULLANMAYIN**. Lumea'yı yalnızca elmacık kemiğinin altındaki bölgelerde kullanın.

Elektrik güvenliği - Elektrik çarpmasını önlemek için

- Lumea'yı ıslak ortamlarda **KULLANMAYIN** (ör. banyoda veya bir duşun ya da yüzme havuzunun yakınında).
- Lumea'nın içine su girmesine **İZİN VERMEYİN**.
- Lumea'yı özellikle yüksek nemli ortamlarda, kullanılacağı odanın ortam sıcaklığına uyum sağlaması için 30 dakika zaman tanımadan sıcaklıkta büyük değişimlere **MARUZ BIRAKMAYIN** (bkz. "Teknik özellikler").
- Lumea'yı veya güç adaptörünü açmaya, tamir etmeye, devre dışı bırakmaya veya değiştirmeye **ÇALIŞMAYIN**.
- Hasarlı Lumea'nın veya güç adaptörünün hiçbir iç parçasına **DOKUNMAYIN**.
- Lumea ile birlikte verilenler dışında başka aparat veya güç adaptörü **KULLANMAYIN**.
- **DAİMA** cihazı bağlamadan önce güç adaptöründe belirtilen gerilimin ülkenizdeki yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğunu kontrol edin.

Genel güvenlik - Ciddi yaralanmaları önlemek için

- **DAİMA** kullanmadan önce Lumea'yı kontrol edin. Lumea veya güç adaptörü zarar görmüşse kullanmayın. Hasar görmüş bir parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.
- **DAİMA** kullanımdan sonra ve güç kesintisi durumunda ekipmanın zarar görmesini engellemek için Lumea'nın ve güç adaptörünün fişini prizden çekin.
- Lumea'yı şunlar gibi herhangi bir aktif implantın doğrudan üzerinde veya yakınında

KULLANMAYIN:

- kalp pili;
- nörostimülatör;
- insülin pompası.

Aktif implantların kullanma kılavuzuna bakarak diğer elektronik cihazlarla arasında bulunması gereken güvenli mesafeyi öğrenin.

- Boğulma riskini önlemek için güç adaptörü kablosunu boynunuza **GEÇİRMİYİN**.
- Fiziksel, duyuşal veya zihinsel kabiliyetlerinizde azalma varsa bu durum hatalı kullanıma yol açabileceğinden Lumea'yı **KULLANMAYIN**.
- Lumea'nın hatalı çalışmasına yol açabileceğinden Lumea'yı ve güç adaptörü kablosunu WiFi ve/veya Bluetooth özellikli cihazlara (taşınabilir RF iletişim ekipmanları) veya akıllı telefonlara 30 cm'den daha yakın mesafede **KULLANMAYIN**.
- Lumea'yı diğer ekipmanların yanında veya diğer ekipmanlarla üst üste dizilmiş şekilde **KULLANMAYIN**. Bu tür kullanım doğru olmayan biçimde çalışmasına yol açabilir.
- Yangın riskini ortadan kaldırmak için açıkken asla Lumea'yı **BIRAKIP GİTMİYİN**.
- Lumea'yı çocukların ulaşamayacağı yerlerde **SAKLAYIN**. Çocukların izlenmesi ve aletle oynamadığından emin olunması gerekir.
- **DAİMA** yangın riskini ortadan kaldırmak için güç adaptörünün doğru monte edilmiş ve çalışır bir duvar prizine bağlı olduğunu kontrol edin.

⚠️ Önlemler

Termal güvenlik - acı, cilt kızarıklığı ve yanıkları önlemek için

- Cildinizi korumasız olarak güneş ışığına maruz bıraktıktan (doğal güneş veya solaryum) sonraki 4 hafta içinde ya da yapay bronzlaşmadan (krem, sprey veya hap) sonraki 2 hafta içinde Lumea'yı kullanmaya **BAŞLAMAYIN VEYA DEVAM ETMEYİN**. Uygulamanıza başlamadan/devam etmeden önce cilt testi yapın (bk. "Cildinizi test etme" bölümü).
- Lumea'yı vücut veya hassas bölge aparatıyla üst dudak veya yüzün diğer bölümlerinde **KULLANMAYIN**. Yüz aparatı, elmacık kemiğinin altındaki bölgelerde uygulama için ek bir entegre filtreye sahip olduğundan bu bölgede yalnızca bu aparatı kullanın.
- Acı hissederseniz veya 24 saatten uzun süren cilt reaksiyonu olursa uygulama yapmaya **DEVAM ETMEYİN**. Işık yoğunluğu ayarını düşürün veya Lumea'yı kullanmayı bırakın.
- Lumea'yı kullanırken cildinizi korunmamış bir şekilde güneşe **MARUZ BIRAKMAYIN**. Tüm IPL uygulaması boyunca ve özellikle uygulamadan sonraki ilk
- 48 saat içinde cildinizi giysilerle güneş ışığından koruyun veya açıkta kalan uygulama bölgelerine en az SPF 50 güneşten koruyucu ürünler uygulayın.
- Bir işlem sırasında aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı **UYGULAMAYIN**. Cilt alanının tamamına ışık atılabilmesi için aparat yüzeyinin önceki alanla çakışması gerekir ancak aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı yapmak performansı artırmaz.
- Lumea'yı cildin çevresindeki uygulama alanından daha koyu tonda olan hiçbir bölgesinde **KULLANMAYIN**. Ciltte pigment alanı yüksek olan bu bölgelerde aşırı ısınma yaşanabilir.
- Koyu alanlar arasında şunlar bulunur:
 - ben, siğil, büyük çil, doğum lekesi, yaşlılık lekeleri veya koyu damarlar gibi koyu renkli alanlar;
 - dövme veya (kalıcı) makyaj gibi cilde eklenen izler.
- Lumea'yı erkeklerin boyun ve yüz bölgelerinde **KULLANMAYIN**. Bu bölgelerdeki tüylerin özellikleri farklıdır.
- Cildinizi/uygulama alanınızı hiçbir türde kurşun veya tükenmez kalemle **İŞARETLEMİYİN**.
- Cildiniz veya cihaz üzerinde herhangi bir losyon, jel veya görünür tüy varsa Lumea'yı **KULLANMAYIN**. Yalnızca temiz, kuru ve tüyden arındırılmış cilde uygulayın. Lumea'nın da temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Işık çıkış penceresi veya pencere çerçevesi hasar görmüşse Lumea'yı **KULLANMAYIN**. Kullanımdan önce Lumea'da hasar olup olmadığını kontrol edin.
- Lambanın hasar görme riskini önlemek için Lumea'yı sert darbelere **MARUZ BIRAKMAYIN**.
- Her 2 haftada bir kereden daha sık uygulama **YAPMAYIN**.

Göz güvenliği - gözde rahatsızlığı önlemek için

- **DAİMA** Lumea'yı iyi aydınlatılmış bir odada kullanın. Gözleriniz karanlık ortamlarda istenmeyen ışığa daha duyarlıdır.

Genel güvenlik - Yaralanmayı önlemek için

- Lumea'yı derideki damar hastalıkları üzerinde (ör. varis) **KULLANMAYIN**.
- Arıza durumunda güç adaptörünün elektrik prizinden kolayca çıkarılabileceğinden **EMİN OLUN**. Güç adaptörü, bağlantı kesme cihazı kabul edilir.
- Hijyenik nedenlerden dolayı Lumea'yı başka kişilerle **ORTAK KULLANMAYIN**. Lumea yalnızca tek bir kişi tarafından kullanıma yöneliktir.

Uyarı

Bu ürünün kullanımıyla ilgili olarak karşılaşılan olumsuz ciddi durumlar, www.philips.com/support sayfasından Philips'e ve kullanıcının bulunduğu Üye Devletin yetkili resmî makamlarına (https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/contacts_en) bildirilmelidir.

Lumea'yı kullanmanın riskleri ve avantajları

Lumea'nın güvenliliği ve etkililiği, 94 kadının (18-64 yaşlarında) yer aldığı bir klinik çalışmada test edilmiştir. Gönüllülerin hiçbiri, Lumea'nın kullanımıyla ilişkili sorunlar nedeniyle çalışmadan erken ayrılmamıştır.

94 gönüllüden 31'i bir veya daha fazla hafif ve geçici yan etki yaşamıştır: acı (26), kaşıntı (8), kızarıklık (5), kıl kökü iltihabı (2), yanma hissi (1), yüzeysel kabuklanma (1) ve şişme (1).

4 defa iki haftada bir uygulamadan sonraki sonuçlar:

- 75 kadında üst dudağa uygulama yapılmış ve tüylerde %61,1 'e varan oranlarda azalma elde edilmiştir.
- 76 kadında koltuk altı bölgesine uygulama yapılmış ve tüylerde %60,6 'ya varan oranlarda azalma elde edilmiştir.
- 77 kadında bikini bölgesine uygulama yapılmış ve tüylerde %61,9 'a varan oranlarda azalma elde edilmiştir.
- 76 kadında bacaklara uygulama yapılmış ve tüylerde %93,1 'e varan oranlarda azalma elde edilmiştir.

35 kadında 8 ek rötuş işlemi (4 haftada bir) tamamlanmış ve işlem uygulanan tüm alanlarda tüylerde %67,0 'ye varan oranlarda azalma elde edilmiştir.

IPL işleminin olası yan etkileri

IPL cihazlarıyla işlem yapıldıktan sonra meydana gelebileceği bilinen yan etkiler aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Sık görülen yan etkiler	Gözlemlenen yan etki	Yan etkinin süresi ve giderme yöntemleri
Acı/rahatsızlık hissi	İşlem sırasında veya sonrasında işlem yapılan alanda bölgesel acı veya rahatsızlık	İşleminiz sırasında acı/rahatsızlık hissederseniz ışık yoğunluğu ayarını azaltın veya Lumea'yı kullanmayı bırakın. İşlemden sonraki acı veya rahatsızlık 1 haftaya kadar sürebilir.
Kaşınma hissi	Uygulama yapılan alanda hissedilen kaşıntı	Bu reaksiyonlar genellikle birkaç saat içinde ortadan kalkar ancak 1 haftaya kadar sürebilir. Bölgeyi soğuk presle soğutabilirsiniz.
Sıcaklık/yanma hissi	Uygulama yapılan alanda bölgesel sıcaklık veya yanma hissi	
Cilt kızarıklığı (eritem)	Uygulama yapılan alanda kenarları net olmayan kızarıklık	Bu reaksiyon genellikle birkaç saat içinde ortadan kalkar ancak 1 güne kadar sürebilir. Bölgeyi soğuk presle soğutabilirsiniz. 1 günden uzun süren cilt kızarıklığı, IPL'nin nadir görülen bir yan etkisidir ve cilt yanmasının belirtisidir. Bir sonraki işlemde önce cildin tamamen iyileşmesini bekleyin. Sonraki işlemlerde daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin olun.

Nadir görülen yan etkiler	Gözlemlenen yan etki	Yan etkinin süresi ve giderme yöntemleri
Şişme (ödem)	Uygulama yapılan bölgede kıl folikülleri çevresinde şişlikler yumru şeklinde ortaya çıkar, bazen kızarıklıkla birlikte görülür.	Bu reaksiyon genellikle birkaç saat içinde ortadan kalkar ancak 1 haftaya kadar sürebilir. Bölgeyi soğuk presle soğutabilirsiniz.
Cilt kuruluğu	Uygulama yapılan cilt sert ve pullu bir görünüme sahiptir.	Bu reaksiyon genellikle 1 gün ile 1 ay arasında sürer. Uygulama yapılan alana kokusuz nemlendirici uygulayabilirsiniz.
Yanık ve su toplaması	Ciltte acıyla birlikte yoğun kızarıklık, şişme ve olası su toplama	Bu reaksiyonlar 1 gün ile 1 ay arasında sürebilir ve tıbbi tedavi veya ilaç tedavisi gerektirebilir. Bir doktora danışmanız önerilir.
Yüzeysel kabuk	Koyu ciltlerde meydana gelebilen, keskin sınırlı, kahverengimsi ve kabuklu bölge oluşumu	Bir sonraki işlemde önce cildin tamamen iyileşmesini bekleyin. Sonraki işlemlerde daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin olun.
Kıl kökü iltihabı	Kaşıntı ve/veya püstül oluşumuyla birlikte kıl foliküllerinin çevresinde şişme ve kızarıklık	Kıl kökü iltihabı, tıbbi tedavi veya ilaç tedavisi gerektirebilir. Bir doktora danışmanız önerilir. Kıl kökü iltihabı, birkaç gün ila birkaç hafta sürebilir. Bir sonraki işlemde önce cildin tamamen iyileşmesini bekleyin. Uygulamadan önce tıraş olurken temiz bir tıraş bıçağı kullandığınızdan emin olun.
Pigment değişimleri/ cilt renginde değişim	Uygulama yapılan bölgede cilt, çevresindeki ciltten daha koyu veya daha açık görünür.	Bu reaksiyon genellikle birkaç hafta ve nadir durumlarda bir yıla kadar sürer. Pigment değişimi/cilt renginde bozulma olan alanlarda cildiniz normal renk tonuna dönene kadar uygulama yapmayın. Sonraki işlemlerde daha düşük bir ışık yoğunluğu kullandığınızdan emin olun.

Nadir görülen yan etkiler	Gözlemlenen yan etki	Yan etkinin süresi ve giderme yöntemleri
Cilt enfeksiyonu	Cilt iltihaplı görünür. Bu, bir cilt yanığından veya başka yaralanmalardan sonra meydana gelebilen ikincil bir etkidir.	Cilt enfeksiyonu, tıbbi tedavi veya ilaç tedavisi gerektirir. Bir doktora danışmanız önerilir. Cilt enfeksiyonu üzerinde uygulama yapmayın.
Yara oluşumu	Bir yanığın veya cilt enfeksiyonunun ikincil etkisi olarak bir yara oluşabilir.	Bir yanık veya kıl kökü iltihabı yaşıyorsanız yara oluşumunu önlemek için doktorunuza danışmanız önemlidir. Yara dokusu üzerinde uygulama yapmayın.
Herpes atağı	Herpes Simplex virüsünün bulaştığı kullanıcıların genellikle dudak çevresinde veya genital bölgede yaşadığı küçük kabarcıklar veya açık yaralar	Ataklar genellikle birkaç gün ila birkaç hafta sürer. Doktorunuzun vereceği antiviral ilaçları alarak bu süreyi kısaltabilirsiniz.
Baş ağrısı ve ardıl görüntüler	Hassas kişiler, ışık atımı gözlerine ulaştığında baş ağrısı veya ardıl görüntüler yaşayabilir.	Bu reaksiyonlar genellikle birkaç dakika ila birkaç saat sürer. Bunları önlemek için, Lumea'yı iyi aydınlatılmış bir odada kullandığınızdan emin olun ve cihazı ışık atımından önce cildinize sıkıca bastırın.

Yoğun Işık Atımıyla tüy alma işlemi bazı kişilerde tüy uzamasında artışa yol açabilir. Bu risk kapsamındaki vücut bölgeleri arasında kadınlarda elmacık kemiğinin üzerindeki bölgeler, çene hattı ve boyun; erkeklerde üst sırt ve omuzlar yer alır. Mevcut veriler, bu tepkinin görüldüğü en yüksek risk gruplarının Akdeniz, Orta Doğu ve Güney Asya kökenli kadınlar olduğunu göstermektedir.

IPL nedir?



Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.



- 1. IPL, Yoğun Atımlı Işık (Intense Pulsed Light) anlamına gelir**
Tüy kökleri bu hafif ışık darbelerini emer.



- 2. Bu ışık atımları tüy foliküllerinin dinlenme aşamasına geçmesini sağlar**
Tüyler doğal yolla dökülür ve uzama belirli bir sayıda ay boyunca azalır.




- 3. Tüyler sürekli olarak büyümmez: büyüme sırasında belirli aşamaları takip eder**

Bir bölgedeki tüm tüyler aynı zamanda büyümmez. IPL yalnızca aktif olarak büyüme aşamasındaki tüyler üzerinde etkili olduğundan uygulamaları belirtildiği şekilde tekrarlamak önemlidir.

Lumea'ya genel bakış



Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.

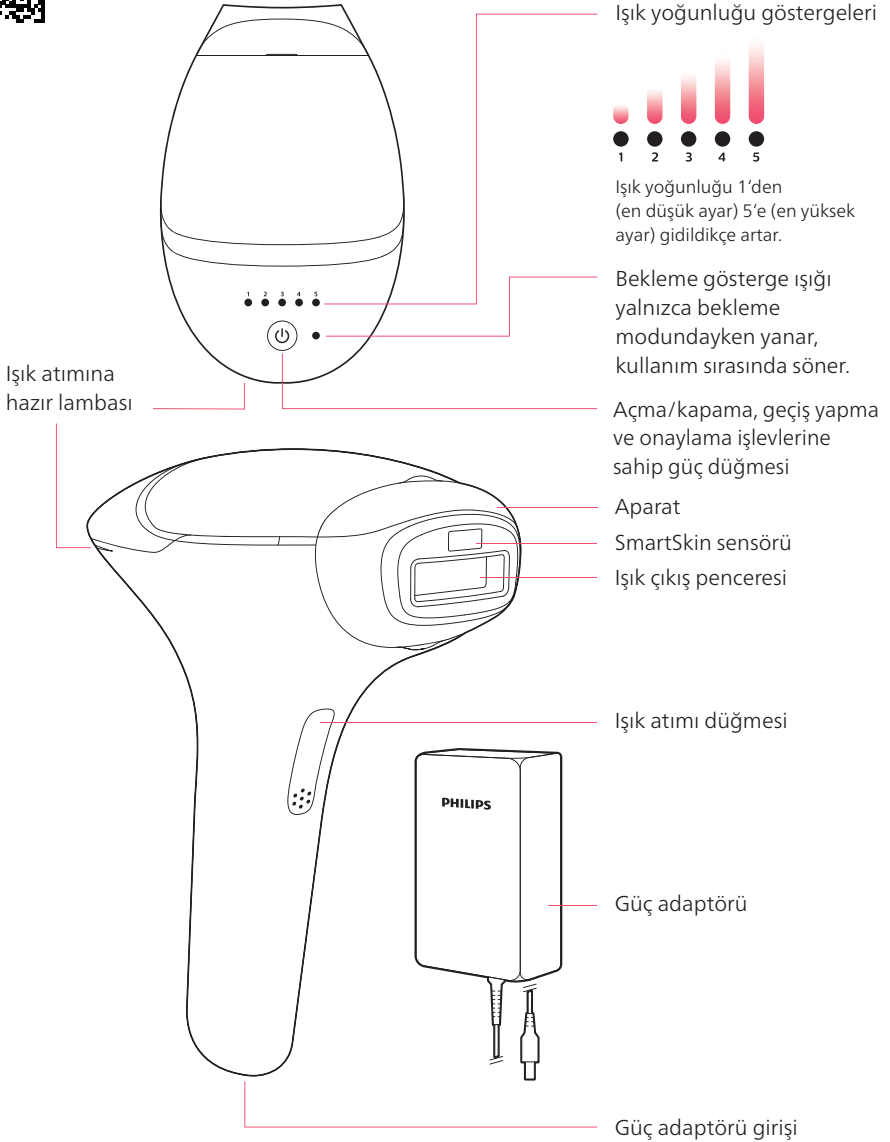

Gösterilmeyen parçalar:

- Temizleme bezi
- Güzellik çantası veya premium güzellik kılıfı veya lüks güzellik kutusu

SmartSkin sensörü

SmartSkin sensörü, cilt tonunuzu belirler ve cihazın üstünde yer alan ışık yoğunluğu göstergelerinden birini yakarak rahat hissedeceğiniz bir ayarı seçmenize yardımcı olur. Ayrıca cildinizin güvenli kullanım için fazla koyu olan alanlarına uygulama yapmanızı otomatik olarak engeller.



Işık atımına hazır lambası

Işık atımına hazır lambası, iyi bir cilt teması sağladığınızı ve Lumea'nın ışık atımına hazır olduğunu bildirir.

Işık atımına hazır lambası turuncu renkte yanıp sönerse vücudunuzun bu alanındaki derinin rengi uygulama için fazla koyudur. Vücudunuzun daha açık renkli bir bölgesine uygulama yapın.



SenseIQ 2.0 teknolojisi



SenseIQ 2.0
technology

Aşağıdaki imza kombinasyonumuzdan oluşan, kişisel tüy alma uygulaması için SenseIQ 2.0 teknolojisi:

- Cilt tonunuzu ölçümleyerek cilt tonunuza uygun bir uygulama ayarı seçmenizi sağlayan akıllı sensörler.
- Vücudunuzun her bir kıvrımına göre tasarlanmış benzersiz aparatlar.
- Uygulama rutininizi destekleyen Philips Lumea IPL uygulaması.

Aparatlar



Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.

Lumea'nız, farklı vücut bölgelerinde kullanabileceğiniz farklı aparatlarla birlikte gelir. Uygulama yapmak istediğiniz alana yönelik aparatı seçin.


	Aparat türü	BR1930	BR1931	BR1932	BR1933	BR1937	BR1938	BR1983	BR1984
	Vücut aparatı - en geniş ışık penceresi; - boyun çizgisi altında kalan alanları etkili bir şekilde kapatıp uygulama yapmak için içeri kıvrımlı tasarım.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Yüz aparatı - elmacık kemiği altındaki alanda hassas uygulama için en küçük pencere; - küçük, düz tasarım; - yüzde elmacık kemiğinin altındaki bölgelerde uygulama için ek entegre filtre. ⚠ Lumea'yı erkeklerin boyun ve yüz bölgelerinde KULLANMAYIN. Bu bölgelerdeki tüylerin özellikleri farklıdır. İpucu: Dilinizi üst dudığınızla dişlerinizin arasına yerleştirerek ya da yanaklarınızı şişirerek uygulamayı kolaylaştırabilirsiniz.				✓	✓	✓	✓	✓
	Hassas bölge aparatı - orta büyüklükte pencere; - bikini ve koltuk altı bölgelerinde hassas ve etkili kullanım için dışa kıvrımlı tasarım.					✓	✓		
	Bikini bölgesi için hassas bölge aparatı - orta büyüklükte pencere; - bikini bölgesinde hassas ve etkili kullanım için dışa kıvrımlı tasarım.							✓	✓
	Koltuk altı bölgesi için hassas bölge aparatı - orta büyüklükte pencere; - koltuk altı bölgesinde hassas ve etkili kullanım için dışa kıvrımlı tasarım.							✓	✓

Uygulama modları




Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.

Lumea cihazınız farklı vücut bölgelerinde daha rahat kullanım için iki uygulama moduna sahiptir.

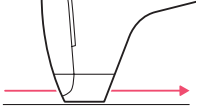

Kaydırarak ışık atımı

Geniş alanlarda (bacaklar) Lumea'yı cildiniz üzerinde kaydırırken ışık atım düğmesini sürekli olarak basılı tutun. Lumea siz düğmeyi bırakana veya iyi cilt temasını kaybedene kadar ışık atımı yapmaya devam eder.

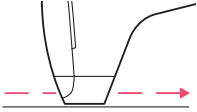

Bastır ve ışık gönder

Vücudun küçük alanlarında (bikini, koltuk altı) Lumea'yı cildinize yerleştirip ışık atımı düğmesine basın. Lumea'yı cildinizden kaldırıp önceden uygulama yapılmış alanın yanına yerleştirin. Bir kez daha ışık atımı yapmak için ışık atımı düğmesine tekrar basın.

Uygulama kılavuzunuz

Lumea uygulamasının sizin için uygun olup olmadığını görmek için lütfen bu kullanım kılavuzundaki önemli güvenlik talimatlarını okuyun, böylece cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Uygulamanızdan önce



1. Uygulamaya hazırlık
Tüylerinizi alın, cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun



2. Cildinizi test etme
Rahat hissettiğiniz ayarı bulun



3. Cilt reaksiyonları için 24 saat bekleyin

Uygulama



4. Uygulama gerçekleştirme



5. Temizleme ve saklama



6. Sonraki uygulamalarınızı planlama




QR kodunu tarayın ve Lumea cihazınız hakkında genel videoların yanı sıra, Lumea uygulamasının gerçekleştirilmesine ilişkin adım adım kılavuz için eğitim videolarımızı izleyin.

Uygulamaya hazırlık



Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.

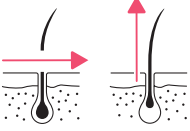


1. Tüylerinizi alın

Lumea kullanmadan önce ağda, tıraş veya epilasyon yoluyla tüylerinizi alın. Uygulamayı, cildinizde yeni tüyler görünür hale gelmeden önce yapın. Ağda yapmayı tercih ederseniz Lumea'yı kullanmadan önce 24 saat bekleyin.



2. Cildi temizleyip kurulayın

Cildinizde hiç su, yağ, krem veya vücut sütü kalmamalıdır.

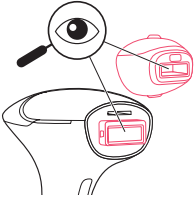

3. Doğru aparatı seçin ve Lumea'nızda hasar ve kir olup olmadığını kontrol edin



DAİMA kullanmadan önce Lumea'yı kontrol edin. Lumea veya güç adaptörü zarar görmüşse kullanmayın. Hasar görmüş bir parçayı mutlaka orijinaliyle değiştirin.



Cildiniz veya Lumea üzerinde herhangi bir losyon veya jel varsa Lumea'yı **KULLANMAYIN**. Yalnızca temiz ve kuru cilde uygulayın. Lumea'nın da temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Cildinizi test etme




Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.


⚠ Cildinizi korumasız olarak güneş ışığına maruz bıraktıktan (doğal güneş veya solaryum) sonraki 4 hafta içinde ya da yapay bronzlaşmadan (krem, sprej veya hap) sonraki 2 hafta içinde Lumea'yı kullanmaya **BAŞLAMAYIN VEYA DEVAM ETMEYİN**.

Vücudunuzun her alanında ilk kez uygulama yapmadan önce veya cildinizi korumasız olarak güneş ışığına maruz bıraktıktan sonra cildinizin verdiği reaksiyonu test edin ve uygulama için size uygun ayarı bulun.

1. "Uygulamaya hazırlık" bölümündeki adımları izleyin

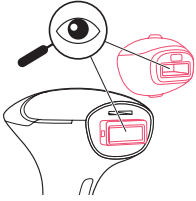


2. Lumea'nızda hasar ve kir olup olmadığını kontrol edin

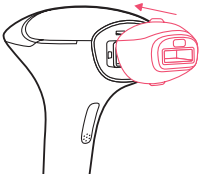

3. Doğru aparatı takın

Uygulama yapmak istediğiniz alana özel aparatı takın.

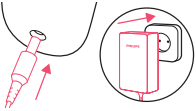


4. Cihazı prize takın

Lumea'yı prize takın.



5. Güç düğmesine basın

Güç düğmesinin üzerindeki 5 ışık yoğunluğu göstergesi, Lumea'yı cildinize yerleştirmeye kadar soldan sağa ve sağdan sola doğru sürekli olarak yanar.

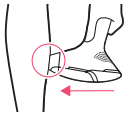

6. Lumea'yı cildinizin üzerine yerleştirin

Cilde dengeli bir şekilde oturmalıdır.



7. Işık yoğunluğu ayarınızı yapın

Işık yoğunluğu göstergelerinden biri beyaz renkte yanarak size önerilen ayarı gösterir. 5 saniye sonra bu ayar otomatik olarak seçilir.

Not: Işık atımına hazır lambası turuncu renkte yanıp sönerse cildiniz uygulama için fazla koyu olabilir. Lütfen "Sorun Giderme" bölümüne göz atın.




8. Rahat hissettiğiniz ayarı bulun

Lumea'yı tekrar cildinizin üzerine yerleştirin. Işık atımına hazır lambası beyaz renkte yanar.



Işık atımı düğmesine 1 kez basın. Işık atımı rahatsızlık vermediyse ayarı yükseltebilirsiniz. Acı hissederseniz ayarı düşürün. Güç düğmesine basarak ayarlar arasında geçiş yapın. Ayarı değiştirin, Lumea'yı bir sonraki alana kaydırın ve tekrar ışık atımı yapın. En rahat hissettiğiniz ayarı bulana kadar tekrarlayın.

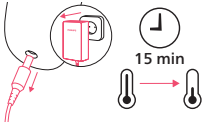


9. Kapatın, fişten çıkarın



Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra ışık çıkış penceresi çok ısınmış olacağı için bu kısma **DOKUNMAYIN**. Kullanımdan sonra, Lumea'nın ve güç adaptörünün fişini çekin ve bunları temizlemeden ve saklamadan önce 15 dakika soğumaya bırakın.

Güç düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. Lumea'nızı ve güç adaptörünü prizden çıkarın. Lumea'nızın soğumasını bekleyin.

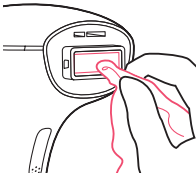

10. Kullanımdan sonra Lumea'nızın tüm parçalarını temizleyin

Lumea'nızın tüm parçalarını temizlemeniz önemlidir. Işık atımı işlemi sonucunda tüy, ter veya kir gibi kalıntılar birikebilir ve temizlenmedikleri takdirde cilt reaksiyonlarına neden olabilir. "Temizleme ve saklama" bölümündeki adımları izleyin.



11. 24 saat bekleyip cildinizde reaksiyon olup olmadığını kontrol edin

24 saatten sonra ciltte reaksiyon görülmezse en rahat hissettiğiniz ayarla uygulamaya başlayın. En rahat hissettiğiniz ayar ciltte reaksiyona yol açarsa ciltte reaksiyona sebep olmayan daha düşük bir ayarı seçin. Daha düşük bir ayarı test etmediyseniz cilt testini tekrarlayın.

Uygulama gerekleřtirme




Bir kısa video izlemek iin QR kodunu taratın.

Vücutta yeni bir alana uygulama yapmadan nce veya cildinizi korumasız olarak gneř iřığına maruz bıraktıktan sonra cildinizin verdiėi reaksiyonu test edin.


1. “Uygulamaya hazırlık” blmndeki adımları izleyin

2. Lumea’nızda hasar ve kir olup olmadığını kontrol edin

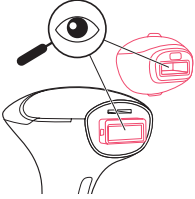

3. Doėru aparatı takın

Uygulama yapmak istediėiniz alana zel aparatı takın.

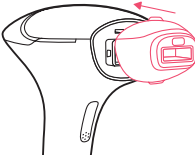

4. Rahatlayın

Uygulamaya bařlamadan nce rahatlayın.



5. Cihazı prize takın. G dėmesine basın

G dėmesinin zerindeki 5 ıřık yoėunluėu gstergesi, Lumea’yı cildinize yerleřtirinceye kadar soldan saėa ve saėdan sola doėru srekli olarak yanar.



6. Ayar sein

Ayarlar arasında geiř yapmak ve herhangi bir cilt reaksiyonuna yol amayan, en rahat hissettiėiniz ayarı semek iin g dėmesine basın.



7. Uygulamaya bařlayın

Lumea’yı cildinizin zerine yerleřtirin. ıřık atımına hazır lambası beyaz renkte yanar.




8. Işık atımı yapın. Sonra cildin diğer bölümlerine geçin

⚠️ Acı hissederseniz uygulamaya **DEVAM ETMEYİN**. Işık yoğunluğu ayarını düşürün veya Lumea'yı kullanmayı bırakın.

Bir işlem sırasında aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı **UYGULAMAYIN**. Cilt alanının tamamına ışık atılabilmesi için aparat yüzeyinin önceki alanla çakışması gerekir ancak aynı bölgeye birden fazla kez ışık atımı yapmak performansı artırmaz.


Işık atımı düşmesine basın. Uyguladığınız alanın bittiğinde alana geçtikten sonra tekrar ışık atımı yapın.

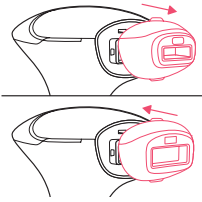

9. Vücutun başka bir bölgesine uygulama yapın

⚠️ Cildinizi korumasız olarak güneş ışığına maruz bıraktıktan (doğal güneş veya solaryum) sonraki 4 hafta içinde ya da yapay bronzlaşmadan (krem, sprey veya hap) sonraki 2 hafta içinde Lumea'yı kullanmaya **BAŞLAMAYIN VEYA DEVAM ETMEYİN**. Uygulamanıza başlamadan/devam etmeden önce cilt testi yapın (bk. "Cildinizi test etme" bölümü).


Vücutunuzun başka bir bölgesine uygulama yapmak istiyorsanız doğru aparatı seçtiğinizden emin olun ve tekrar 1. adımdan başlayın. Vücutunuzun bir bölgesinde ilk kez uygulama yapıyorsanız veya cildiniz korumasız olarak güneş ışığına maruz kaldıktan sonra cilt testi yaptığınızdan emin olun. 24 saat bekleyip cildinizde reaksiyon olup olmadığını kontrol edin.

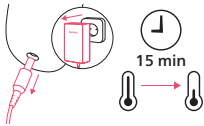

10. Tamamlayın. Kapatıp fişten çıkarın

⚠️ Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra ışık çıkış penceresi çok ısınmış olacağı için bu kısma **DOKUNMAYIN**. Kullanımdan sonra, Lumea'nın ve güç adaptörünün fişini çekin ve bunları temizlemeden ve saklamadan önce 15 dakika soğumaya bırakın.

Güç düğmesini 2 saniye boyunca basılı tutun. Lumea'nızı ve güç adaptörünü prizden çıkarın. Lumea'nızın soğumasını bekleyin.

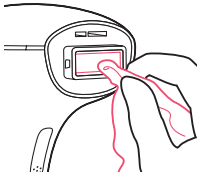

11. Kullanımdan sonra Lumea'nızın tüm parçalarını temizleyin

Lumea'nızın tüm parçalarını temizlemeniz önemlidir. Işık atımı işlemi sonucunda tüy, ter veya kir gibi kalıntılar birikebilir ve temizlenmedikleri takdirde cilt reaksiyonlarına neden olabilir. "Temizleme ve saklama" bölümündeki adımları izleyin.

12. Sonraki uygulamanızı planlayın


"Sonraki uygulamalarınızı planlama" bölümündeki adımları izleyin.



Temizleme ve saklama




Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.

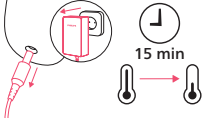

1. Lumea'nızı kapatın, fişten çıkarın ve soğutun

! Kullanım sırasında veya kullanımdan hemen sonra ışık çıkış penceresi çok ısınmış olacağı için bu kısma **DOKUNMAYIN**. Kullanımdan sonra, Lumea'nın ve güç adaptörünün fişini çekin ve bunları temizlemeden ve saklamadan önce 15 dakika soğumaya bırakın.

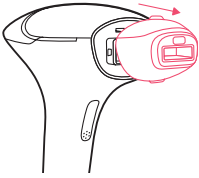

2. Aparatı sökün

Yavaşça çekerek çıkarın.




3. Lumea temizleme bezinizi hafifçe nemlendirin

! Lumea'yı ıslak ortamlarda **KULLANMAYIN**.


Lumea'nın içine su girmesine **İZİN VERMEYİN**.

Yumuşak Lumea temizleme bezini yalnızca birkaç damla suyla nemlendirin.

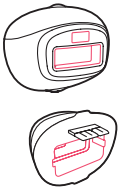


4. Aparatları temizleyin

Metal reflektörler dahil, kullanmış olduğunuz aparatın her parçasını temizleyin.

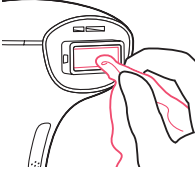


5. Işıık çıkış penceresini temizleyin

Işıık çıkış penceresinin yüzeyinde kir, kalıntı veya nem kalmadığından emin olun.

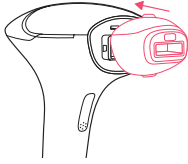

6. Bir aparat takın

Aparatlardan birini takarak Lumea'nızın ışık çıkış penceresinin hasara karşı korunduğından emin olun.

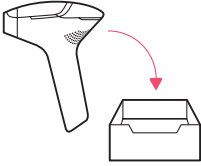

7. Saklama

Tüm parçaları orijinal ambalajında veya ürünle birlikte verilen çanta, kılıf veya kutunun içinde, tozsuz ve kuru bir alanda saklayın.

Seans sonrası

Kullanım sonrasında uygulama yapılan bölgelere losyon, krem, deodorant, nemlendirici veya kozmetik uygulamak istiyorsanız daima uygulamak istediğiniz ürünün talimat broşürüne göz atarak ürünün cildinizin o andaki durumunda kullanıma uygun olduğundan emin olun.

Sonraki uygulamalarınızı planlama



Bir kısa video izlemek için QR kodunu taratın.

Belirtilen uygulama programını izleyin.



24 saat

Test aşaması

Vücudunun her alanında ilk kez uygulama yapmadan önce veya cildinizi korumasız olarak güneş ışığına maruz bıraktıktan sonra "Cildinizi test etme" bölümünde yer alan adımları izleyerek cilt testi yapın. Cilt testinden sonra uygulama aşamanıza başlamadan önce 24 saat bekleyin.



Uygulama aşaması: 4 defa iki haftada bir uygulama

4 uygulama süren uygulama aşaması sırasında 2 haftada bir uygulama yapın.

Uygulama aşaması süresince planlanan uygulama tarihinden en erken 3 gün önce veya en geç 3 gün sonra uygulama yapın.



Rötuş aşaması: her 4 haftada bir

Elde etmiş olduğunuz sonuçların devamlılığını sağlamak için Lumea'nızı her 4 haftada bir kez kullanın.

Rötuş aşaması süresince planlanan uygulama tarihinden en erken 4 gün önce veya en geç 4 gün sonra uygulama yapın.

Not: Bir uygulamayı atlarsanız rehberlik için "Sorun Giderme" bölümüne bakın. Uygulama programından sapmanız hâlinde istenen sonuçları elde edemeyebilirsiniz.

Sorun giderme

Bu bölümde, Lumea'nızla ilgili olarak veya uygulama programınızdan sapmanız hâlinde karşılaşılabileceğiniz en yaygın sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak çözemiyorsanız, sık sorulan sorular listesi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığınızda belirtilen ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişim kurun.

Lumea'nızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz yaygın sorunlar:

Sorun

Lumea ürünüm ışık atımı yapmıyor/ışık atımına hazır ışığı turuncuya dönüyor ve yanıp sönmeye başlıyor.

Işık atımı sırasında Lumea cihazımdan tuhaf bir koku geliyor.

Lumea cihazımın üzerindeki ışık yoğunluğu göstergeleri yanıp sönmüyor ve ışık atımına hazır lambası turuncu renkte yanıp sönmüyor.

Çözüm

1. Cilt renginiz çok koyu olabilir. Bu kitapçığın kapağının iç yüzünde yer alan cilt tonu/tüy rengi tablolarına göz atın.
2. Aparatınızın Lumea'nın ön kısmına (doğru biçimde) bağlandığından emin olun.
3. Cilde en az 5 saniye boyunca tamamen temas ettiğinden emin olun. Bazı bölgelerde (hassas ve kemikli alanlar) ciltle iyi bir temas sağlamak zor olabilir. Lumea ile cildiniz arasına hiç ışık girmemelidir. Lumea'nızın konumunu değiştirmeyi deneyin.
4. Cildinizde bir alana uygulama yapmak için sapın içinde yer alan ışık atım düğmesine bastığınızdan emin olun.

1. Lumea'nızı kullanmadan önce, uygulama yapmak istediğiniz alandaki tüm tüyleri aldığınızdan emin olun. Yanan tüyler kokuya yol açabilir.
2. Uygulamaya başlamadan önce cildinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
3. Uygulama öncesinde Lumea ve aparatlarının temiz ve kuru olduğundan emin olun. Işık atımı işlemi sonucunda tüy, ter veya kir gibi kalıntılar birikebilir ve temizlenmedikleri takdirde cilt reaksiyonlarına neden olabilir.

1. Lumea hata modundadır. Güç düğmesini 2 saniyeden uzun süre basılı tutun, Lumea bekleme moduna dönecektir. Veya Lumea'yı prizden çıkarın, cihaz kapanacaktır.
2. 5 dakika bekleyin. 5 dakika sonrasında Lumea'nın herhangi bir işlem yapılması gerekmeden bekleme moduna geçmesi gerekir.

Uygulama programınızdan saptığınızda yapmanız gerekenler:

Aşama

Uygulama
aşaması

Sorun

Uygulamanın
atlanması.

*Uygulamamı
başlangıçta
planladığım
uygulama tarihinden
3 günden uzun bir
süre sonra yaptım.*

İki haftada bir
gerçekleştirilen son
uygulama.

*Uygulama aşamamı
tamamladım, ancak
iddia edilen sonuçlara
ulaşamadığımı
düşünüyorum.*

Rötuş
aşaması

Uygulama aralığının
dışında.

*Planladığım
uygulama tarihinden
sonraki 4 gün içinde
uygulama yapmadım.*

Çözüm

Planladığınız uygulama tarihinden daha az saptmaya çalışın. Başlangıçta planladığınız programa devam edebilirsiniz. Uygulama aşamanıza iki hafta arayla gerçekleştirecek bir uygulama ekleyebilirsiniz. Uygulama programından sapmanız hâlinde istenen sonuçları elde edemeyebilirsiniz.

Uygulama aşamanıza iki hafta arayla gerçekleştirecek bir uygulama ekleyebilirsiniz, ancak iddia edilen sonuçlar belirtilen uygulama programına bağlıdır ve bireysel sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Lütfen doğru programı izleyin. Uygulama programından sapmanız hâlinde istenen sonuçları elde edemeyebilirsiniz. Başlangıçta planladığınız programa devam edebilirsiniz veya uygulama aşamanıza yeniden başlamayı tercih edebilirsiniz, ancak iddia edilen sonuçlar belirtilen uygulama programına bağlıdır ve bireysel sonuçlar değişiklik gösterebilir.

Ek bilgiler

Geri dönüşüm



- Bu simge, bu ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun. İmha işleminin doğru şekilde yapılması çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkileyecek sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

1907/2006 sayılı AB REACH Tüzüğü, Philips'in ilgili üründe ağırlıkça % 0,1'in üzerinde bir konsantrasyonda mevcut olan Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddelerin (SVHC) kimyasal içerik bilgilerini sağlamasını gerektirmektedir. Philips ürünlerinde bulunan maddelerle ilgili bilgileri Philips REACH web sitesinde bulabilirsiniz: www.philips.com/REACH.

AEEE Yönetmeliğine Uygunudur

Elektromanyetik uyumluluk

Bu ürün test edilmiş ve CISPR 11 uyarınca Sınıf B olarak IEC 60601-1-2 elektromanyetik uyumluluk standartlarına uygun olduğu tespit edilmiştir. Test seviyeleri, belirtilen tablolarda sıralanmıştır. Cihazınızı yalnızca Lumea ile birlikte verilen güç adaptörleriyle kullanmanız gerekir.

Elektromanyetik emisyonlar ve bağışıklığa ilişkin yönlendirme ve üretici beyanı

Lumea, burada sıralanan elektromanyetik ortamlarda kullanıma yöneliktir. Cihazın kullanıcısı, hatalı kullanımı önlemek amacıyla cihazın bu gibi bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

Emisyonlar	Uyumluluk	Electromagnetic environment – guidance
RF emisyonları CISPR 11	Grup 1	Lumea, amaçlanan işlevi doğrultusunda RF enerjisi kullanmaz. Bu nedenle, RF emisyonları çok düşük seviyede olup yakındaki elektronik ekipmanlarda herhangi bir parazite neden olmaz.
RF emisyonları CISPR 11	Sınıf B	Lumea, ev ortamlarında bulunan yerlerin yanı sıra ev amaçlı kullanılan binalara tedarik yapan düşük gerilimli güç besleme şebekelerine doğrudan bağlı olan tesislerde kullanıma uygundur.
Harmonik emisyonlar IEC 61000-3-2	Sınıf A	
Voltaj dalgalanmaları/titreşim emisyonları IEC 61000-3-3	Uyumlu	

Bağıışıklık testi	Bağıışıklık testi seviyesi	Elektromanyetik ortam – kılavuz
Elektrostatik deşarj (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV temas ±15 kV hava	Zeminler, statik elektrik kaynağı olabilir. Hava çok kuru olduğunda (<%20 BN) kullanıcının Lumea ürününü beton veya ahşap zeminli bir odada (sentetik zeminli bir oda yerine) kullanması önerilir.
Yayılan RF EM alanları IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 1 kHz'de %80 AM	±8 kV temas ±15 kV hava
RF kablosuz İletişim Ekipmanlarıyla yakınlık alanları IEC 61000-4-3	385 (27), 450 (28), 710 (9), 745 (9), 780 (9), 810 (28), 870 (28), 930 (28), 1720 (28), 1845 (28), 1970 (28), 2450 (28), 5240 (9), 5500 (9), 5785 (9) MHz (V/m)	Lumea; 30 cm veya daha uzakta bulunan akıllı telefon, Wi-Fi veya Bluetooth cihazlar gibi tüm RF kablosuz iletişim cihazlarına karşı bağıışıklıdır. Hatalı çalışmaya yol açabileceğinden daha yakın mesafeden kaçının.
ANMA güç frekansı manyetik alanlar IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz veya 60 Hz	
Yakınlık manyetik alanları IEC 61000-4-39	30 kHz, CW, 8 A/m 134,2 kHz, Puls modülasyonu 2,1 kHz, 65 A/m 13,56 MHz, Puls modülasyonu 50 kHz, 7,5 A/m	
Elektriksel hızlı geçici rejim/patlama IEC 61000-4-4	±2 kV 100 kHz tekrarlama frekansı	Tipik ticari veya konut ortamından beklenen ana şebeke güç kalitesi.
Dalgalanma IEC 61000-4-5	±0,5 kV, ±1 kV Hattan hatta	Tipik ticari veya konut ortamından beklenen ana şebeke güç kalitesi.
RF alanlar tarafından endüklenen iletim yoluyla yayılan bozulmalar IEC 61000-4-6	3 V r.m.s., modülasyon uygulanmadan önce 0,15 MHz – 80 MHz 6 V r.m.s., 1 kHz'de 0,15 MHz ile 80 MHz %80 AM arasındaki ISM ve amatör radyo bantlarında modülasyon uygulanmadan önce	
Elektrik tedarik giriş hatlarında Voltaj düşüşleri, kısa parazitler ve voltaj değişimleri IEC 61000-4-11	%0 UT; 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° ve 315°'de 0,5 döngü 0% UT; 1 döngü ve %70 UT; 0°'de 25/30 döngü Tek faz %0 UT; 250/300 döngü	Tipik ticari veya konut ortamından beklenen ana şebeke güç kalitesi. Lumea, güç kesintisi durumunda kapanacaktır.

Not: UT, test seviyesinin uygulanmasından önceki AC şebeke voltajıdır. Düşük bir olasılık sonucu, başka cihaz kaynaklı ve yukarıdaki tabloda belirtilenin üzerindeki seviyede bozucu etkiler nedeniyle Lumea'nın bir özellikli etkinken işlevsiz hâle gelmesi durumunda Lumea tamamen kapanacaktır ve güç düğmesine basılarak yeniden çalıştırılması gerekecektir. Yeniden çalıştırılmadan önce, söz konusu bozulmaya yol açan diğer cihaz ile arasındaki mesafenin artırıldığından emin olun.

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Teknik özellikler

Elektrik özellikleri	Güç adaptörü ve Lumea birlikte şu şekilde değerlendirilir: Sınıf II ME EKİPMAN
Aparat	BF tipi uygulanan kısım Kullanım esnasında uygulanan kısım (aparat) ısıyarak <60 °C'ye ulaşabilir. Bu gerçekleşirse cihazın soğuması için bekleyin ve temas süresini 1 dakikadan kısa olacak şekilde sınırlayın.
Çalışma şekli	Sürekli çalışma
Amaçlanan kullanıcı	Amaçlanan operatör kullanıcısıdır
Güç adaptörü IP derecesi	IP22
Işık çıkışı	
Risk grubu sınıfı	Muaf
Yayılan optik radyasyonun dalga boyu aralığı	Vücut ve hassas bölge aparatı: 520 nm – 1200 nm Yüz aparatı: 590 nm – 1200 nm
Nokta boyutu	Vücut aparatı: 4,1 cm ² (32,7 mm x 12,6 mm) Hassas bölge aparatı: 3 cm ² (30,0 mm x 10,0 mm) Yüz aparatı: 2 cm ² (25,0 mm x 8,0 mm)
Optik maruz kalma	Ayar 1: 2,5 +/- 0,80 J/cm ² Ayar 2: 3,1 +/- 0,85 J/cm ² Ayar 3: 3,8 +/- 0,91 J/cm ² Ayar 4: 4,4 +/- 0,96 J/cm ² Ayar 5: 5,0 +/- 1,00 J/cm ²
Maksimum optik enerji	Vücut aparatı: 23,0 J Hassas bölge aparatı: 16,8 J Yüz aparatı: 11,2 J
Optik homojenlik	Uygulama bölgesinde ışığa maruz kalmada en fazla +/-%30 sapma.
Puls sırası	Tek puls, tüm ayarlarda
Puls aralığı	1,0 - 2,4 sn, tüm ayarlarda
Darbe genişliği	1,25 +/- 0,4 ms (MYTG)
Taşıma ve saklama koşulları	Lumea, aşağıdaki çevresel alarıktta taşındıktan veya saklandıktan sonra teknik özellikleri dahilinde NORMAL KULLANIM halinde çalışmaya devam eder: -25 °C ile 70 °C sıcaklık aralığı ve % 95'e kadar bağıl nem (yoğuşmasız) ve 700 hPa ila 1060 hPa atmosfer basıncı aralığı. Cihaz sıcak veya soğuk bir ortamda saklanmışsa kullanmadan önce kullanım koşulları dâhilindeki (5 °C - 40 °C) bir sıcaklığa erişmesi için 30 dakika boyunca 20 °C sıcaklığa sahip bir ortamda tutun.
Çalışma koşulları	Lumea, aşağıdaki çevresel çalışma koşulları altında NORMAL KULLANIM halinde çalıştırıldığında teknik özelliklerine uygundur: 5 °C ila 40 °C sıcaklık aralığı; % 15 ile % 90 bağıl nem (yoğuşmasız) aralığı ve 700 hPa ila 1060 hPa atmosfer basıncı aralığı.

Güç adaptörü	
Güç adaptörü girişi	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Güç adaptörü çıkışı	19,5 V  3,33 A 65,0 W
Ortalama aktif verimlilik	≥%88,0
Düşük yükte verimlilik (%10)	≥%79,0
Yüksüz güç tüketimi	<0,21 W
Cihaz ağırlığı	Güç adaptörü ~ 480 g Elde tutulan parça ~ 430 g
Cihaz ölçüleri	Güç adaptörü ~ 10,8 x 6,5 x 6,8 cm Elde tutulan parça ~ 20,0 x 14,5 x 9,5 cm
Kullanım ömrü	Yılda 14 tam vücut uygulaması içeren Lumea uygulama programına göre 5 yıl. 5 yıllık ömür boyunca etkili ışık çıkışı doğrulandı.
Malzemeler	
Gövde	PC (Polikarbonat), ABS (Akrilonitril bütadien stiren), PA (Poliamit)
Kablo	TPE (Termoplastik elastomer)

Simge açıklamaları

Güvenlik işaretleri ve simgeleri, bu ürünü güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlamak ve sizi ve başkalarını yaralanmalara karşı korumak için çok önemlidir. Etiketdeki ve kullanım kılavuzundaki güvenli işaretleri ile simgelerin anlamını aşağıda bulabilirsiniz.



IEC 60417-5333 BF tipi uygulanan kısım
Bu simge, IEC 60601-1'e uygun tipte BF uygulanan kısmı tanımlar.



ISO 7000-2620 Nem sınırlaması
Bu simge, cihazın güvenle maruz kalabileceği taşıma ve depolama için kabul edilebilir üst ve alt bağıl nem sınırlarını belirtir.



ISO 7000-2621 Atmosferik basınç sınırlaması
Bu simge, cihazın güvenle maruz kalabileceği taşıma ve depolama için kabul edilebilir üst ve alt atmosfer basıncı sınırlarını belirtir.



ISO 7000-0632 Sıcaklık sınırı
Bu simge, cihazın saklanabileceği, taşınabileceği veya kullanılabilirliği maksimum ve minimum sıcaklık sınırlarını belirtir.



ISO 7000-0626 Kuru tutun
Bu simge, cihazın kuru tutulması gerektiğini belirtir.

IP22

Bu simge, $\geq 12,5$ mm katı yabancı cisimlerin girmesine ve 15 derece eğik konumdayken damlayan su girişi nedeniyle oluşan zararlı etkilere karşı korumayı belirtir.



IEC 60417-5172 Sınıf II ekipman
Bu simge, "Sınıf II Ekipman"ı belirtir. Güç adaptörü çift yalıtımlıdır.



ISO 7000-3082 Üretici
Bu simge ürünün üreticisini belirtir.



IEC 60417-6049 Üretildiği ülke
Bu simge ürünün üretildiği ülkeyi ve üretim tarihini belirtir. "CC" iki harfli ülke kodudur.



ISO 7000-2492 Parti numarası
Bu simge, üreticinin parti numarasını gösterir.



ISO 7000-2498 Seri numarası
Bu simge, üreticinin seri numarasını gösterir.



ISO 7000-2493 Katalog numarası
Bu simge, üreticinin katalog numarasını gösterir.



IEC 60417-5032 Alternatif akım
Bu simge alternatif akımı belirtir.



IEC 60417-5031 Doğru akım
Bu simge doğru akımı belirtir.



ISO 7000-1641 Kullanım talimatlarına başvuru
Bu simge, cihaz çalıştırılırken çalışma talimatlarının göz önünde bulundurulması gerektiğini gösterir.



ISO 7010-W017 Uyarı; Sıcak yüzey
Bu simge, sıcak bir yüzey hakkında uyarır. Arka plan rengi sarı, simgenin rengi siyahtır.



IEC 61558-1 Nominal maksimum ortam sıcaklığı
Bu simge, transformatörün normal kullanım koşullarında sürekli olarak çalıştırılabileceği maksimum ortam sıcaklığını belirtir.



IEC 60417-5957 Yalınza kapalı mekanda kullanıma yönelik
Bu simge, cihazın kapalı mekanda kullanım için tasarlandığı anlamına gelir.



IEC 60417-5947 Güvenlik ayırma transformatörü, kısa devreye dayanıklı
Bu simge, transformatörün kısa devreye dayanıklı olacak şekilde tasarlandığı anlamına gelir.



IEC 60417-6190 Güç besleme ünitesi, anahtar modu
Bu simge, transformatörün bir Anahtar Durumdaki Güç Beslemesi (SMPS) ünitesi olarak kabul edildiği anlamına gelir.



IEC 60417-6343 Maksimum rakım
Bu simge, cihazın 3.000 metreye kadar rakımda kullanılabilir olduğunu belirtir.



ISO 7000-3706 Tek hasta, çoklu kullanım
Bu simge cihazın bir kullanıcı tarafından birden fazla kez kullanılabilirliğini gösterir.



SenseIQ 2.0 teknoloji
Bu simge, cihazın SenseIQ 2.0 teknolojisine sahip olduğunu gösterir.



ISO/IEC 16022 Bilgi teknolojisi - Otomatik tanımlama ve veri yakalama teknolojileri - Veri Matrisi barkod sembolü
Veri matrisi (QR kodu), bilgileri makine tarafından okunabilir bir biçimde yakalamak için kullanılır.

**ISO 15223-1 Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısı**

Belirli bir ürünü tanımlamak için kullanılan Benzersiz Cihaz Tanımlayıcısını belirtir.

**ISO 7010-W001 Genel uyarı işareti**

Bu simge, kullanıcının, ürünün kullanılmaması gereken durumlar ve uyarılarla ilgili önemli güvenlik bilgileri için kullanım talimatlarına başvurması gerektiği anlamına gelir. Cihazda arka plan rengi sarı, simgenin rengi siyahtır.

**ISO 7000-0434A Uyarı**

Bu simge, kullanıcının önlemlerle ilgili önemli güvenlik bilgileri için kullanım talimatlarına başvurması gerektiği anlamına gelir.



Bir geri dönüşüm simgesi, geri dönüşüm veya diğer yeniden işleme süreçlerini yürütmek için bir ürünün yapıldığı malzemeyi belirtir. Bu simge, malzeme kodunu tanımlamak için bir sayı içerir.

**IEC 60417-5009 Bekleme**

Bu simge, ekipmanı bekleme durumuna getirmek amacıyla ekipmanın parçasının açık konuma getirileceği anahtar veya anahtar konumunu belirtir. Simge ayrıca geçilecek kontrolü belirtir veya düşük güç tüketimi durumunu gösterir.



Bu simge, Forest Stewardship Council'i belirtir. FSC ticari markalan, tüketicilerin ormanların korunmasını destekleyen, toplumsal fayda sağlayan ürünleri seçmesini ve pazarın daha iyi bir orman yönetimini teşvik etmesini sağlıyor.

**IEC 60417-6352 Fişi hasarlı olan güç kaynağını kullanmayın**

Bu simge, fiş uçlarının hasar görmesi hâlinde güç adaptörünün kullanılmaması gerektiğini belirtir.



0344

"Bu cihaz, 2017/745 sayılı Avrupa Tıbbi Cihaz Tüzüğü, 2011/65/AB sayılı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi (RoHS), 2012/19/AB sayılı Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları Direktifi (WEEE) gerekliliklerine uygundur" simgesi. 0344, Avrupa Tıbbi Cihaz Tüzüğü için Onaylanmış Kuruluşu ifade eder.

**ISO 15223-1 Tıbbi cihaz**

Bu simge, bu cihazın tıbbi bir cihaz olduğunu gösterir.



Bu simge, WEEE'yi (atık elektrikli ve elektronik ekipman) gösterir. Elektrikli atık ürünleri evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır. Lütfen tesislerin mevcut olduğu durumlarda geri döndürün. Geri dönüşüm tavsiyesi için bölgenizdeki yetkili veya bayi ile görüşün (bk. "Geri Dönüşüm").



Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, www.philips.com/support adresini ziyaret edin veya uluslararası garanti kitapçığını okuyun.



© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.090.3395.1
(2024-04-19)



Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands

www.philips.com