

PHILIPS sonicare



Pielęgnacja przestrzeni
mędzyzębowych
przy użyciu Irygatora
Philips Sonicare
Power Flosser





Wskazówki jak używać Irygatora Philips Sonicare Power Flosser.



1. Podłącz końcówkę, a następnie **napełnij zbiornik wodą** i sprawdź przepływ wody.

2. Wybierz program (Clean lub Deep Clean).

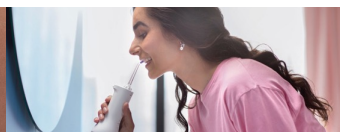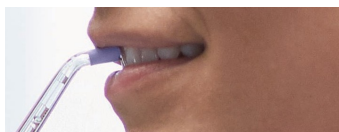


3. Przed włączeniem ustaw końcówkę pod kątem ok **90 stopni** nad linią dziąseł. Zaczynj irygację od powierzchni zewnętrznych zębów.

4. Zaczynj od tylnej części jamy ustnej. Podczas irygacji pochyl się nad zlewem, aby nadmiar wody mógł wypłynąć.



5. W programie DeepClean zaawansowana technologia **PulseWave** wykorzystuje krótkie pulsacje, aby prowadzić Cię od zęba do zęba.

6. Nosisz aparat ortodontyczny? **Wykonaj dodatkowo okrężne ruchy** wokół każdego zamka.

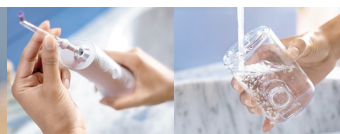

7. Wyczyść powierzchnie wewnętrzne zębów, dostosowując ustawienie za pomocą obrotowej końcówki.

8. Wyjmij i wypłucz końcówkę, a następnie osusz. Wylej pozostałą wodę i przepłucz zbiornik.



9. Naładuj, gdy zaświeci się ikona niskiego poziomu naładowania baterii.

9. Wymieniaj końcówkę co 6 miesięcy.

Irygatory z serii
Philips Sonicare Power Flosser 3000

