

PHILIPS

sonicare

Sonický dětský
kartáček



Philips Sonicare for Kids s technologií Bluetooth®

#1

Odborníky
nejdoporučovanější
značka elektrických
zubních kartáčků v ČR.
Výzkum mezi 200 zubaři
a dentálními hygienistkami.
WWW.PHILIPS.CZ



Správná technika čištění



1 Polohování kartáčku

Kartáček polohujte tak, aby vlákna směřovala pod dásně v úhlu 45°. Na kartáček příliš netlačte.



2 Z jednoho zubu na druhý

U dočasných zubů pomalu posunujte kartáček z jednoho zubu na druhý. U nově prořezaných stálých zubů je vhodné přidat i stírávý pohyb po celé ploše korunky směrem od dásně k zubu.



3 Vnitřní plochy

Stejným pohybem nezapomeňte čistit i vnitřní plošky zubů. U předních zubů zevnitř orientujte kartáček svisle.




4 Kousací plochy

I kousací plochy čistíte pomalým posouváním kartáčku.



5 Zadní zuby

Ujistěte se, že čistíte poslední stoličky.

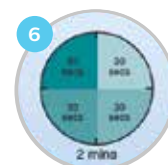

6 Délka čištění

Nechte kartáček čistit každou plošku zubu alespoň 2 vteřiny.


**I s elektrickým kartáčkem je nutné dětem
s čištěním vždy pomáhat.**

Vývoj zoubků dítěte¹

0-6 let – Prořezávání dočasných zubů v čase

První dočasné zuby se prořezávají v 6-8 měsících věku dítěte. Ve 2,5 letech již mají děti kompletní dočasný chrup.


- 6 až 10 měsíců – spodní řezáky
- 8 až 12 měsíců – boční spodní a všechny horní řezáky
- 12 až 16 měsíců – první dočasná stolička
- 16 až 20 měsíců – špičky
- 20 až 30 měsíců – druhá dočasná stolička

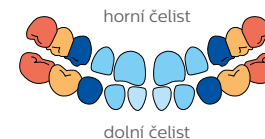

6-12 let – Prořezávání stálých zubů v čase

V šesti letech se prořezávají tzv. šestky, první stálé stoličky. Přibližně ve 12 letech má dítě kompletní stálý chrup.

- 6 let – 4 velké stoličky (před vypadnutím dočasných zubů), 2 spodní řezáky
- 7 let – 2 horní řezáky, 2 spodní řezáky
- 8 let – 2 horní řezáky
- 10 let – 2 spodní špičky, 4 malé stoličky
- 11 let – 2 horní špičky, 4 malé stoličky
- 12 let – 4 velké stoličky

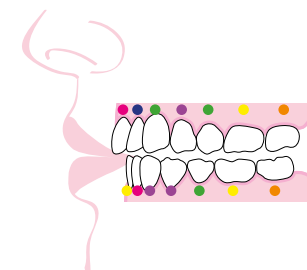

Bc. Kateřina Hořejší
Dentální hygienistka

„Výuka správné techniky čištění chrupu u dětí je nesmírně důležitá nejen pro odstranění zubního plaku, ale především pro ukotvení správných návyků, které musíme pěstovat již od nejútlejšího věku. Abychom uspokojili obě tyto potřeby, doporučuji dětem kartáček Philips Sonicare, který zastane efektivní odstranění zubního plaku a zároveň je pro děti sofistikovanou motivační pomůckou.“

¹ BROUKAL Z., MERGLOVÁ V., KOBEROVÁ IVANČÁKOVÁ R., DUŠKOVÁ J. a KAIFEROVÁ J. Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže. Praha, 2016.

Tipy a rady rodičům

- Pamatujte, zubní kaz je infekční onemocnění.
- Z každodenního čištění si udělejte rituál. Čistěte si zuby společně, minimálně do 10 let věku. Pomáhejte pravidelně dítěti s čištěním.
- O mezizubní prostory pečujte denně už od časného věku dítěte.
- Pokud si nejste jisti, zda jsou zoubky čisté bez bakterií, pořídte si v lékárně plakové tabletky, které ponechaný plak obarví.
- Naučte děti pít čistou vodu. Po večerním čištění již nic jiného nepodávejte.
- Navštěvujte se svými dětmi zubního lékaře každých 6 měsíců a nezapomeňte ani na dentální hygienistku.
- Nezapomínejte dětem vyměňovat hlavici kartáčku každé 3 měsíce za novou. S délkou používání se efektivita čištění snižuje.



ZÁRUKA
90
dní vrácení
peněz

Více informací naleznete na
www.philips.cz/detskykartacek
[instagram.com/philipssonicarecz/](https://www.instagram.com/philipssonicarecz/)



© 2021 Philips Oral Healthcare, Inc. Veškerá práva vyhrazena. PHILIPS a emblém Philips jsou ochranné známky společnosti KPENV. Sonicare a logo Sonicare jsou ochranné známky společnosti Philips Oral Healthcare anebo KPENV.



Interaktivní aplikace

Technologie Bluetooth® propojuje kartáček se zábavnou aplikací. Postavička roztomilého Sparklyho motivuje děti k lepšímu a delšímu čištění.



Rodiče mohou sledovat frekvenci a dobu čištění a odměnit tak děti za jejich výsledky.



Stahujte zdarma



Efektivní a šetrné čištění

Rozvoj správných a účinných návyků čištění zubů u dětí vytváří základ pro zdraví jejich dutiny ústní na celý život.



Sonická technologie

šetrně odstraňuje plak díky vysoko-frekvenčnímu stíravému pohybu.



Pogumované hlavice

a měkká vlákna chrání rostoucí dětský chrup.



Hlavice For Kids Mini

– od 3 let
– dostupná i ve velikosti Standard od 7 let



Dva nastavitelné režimy

– od 3 let: extra jemný režim
– od 7 let: jemný režim



Časovač KidTimer

v režimu od 3 let pozvolně navyšuje dobu čištění z 1 na 2 minuty. V režimu od 7 let je nastaven na 2 minuty.



KidPacer znělka

učí děti rozvrhnout čištění na 4 úseky chrupu.




Ergonomická rukojeť

vede ke správnému úchopu a zjednodušuje manipulaci s kartáčkem dětem i rodičům.



8 vyměnitelných samolepek, díky kterým si děti mohou vytvořit vlastní design kartáčku.

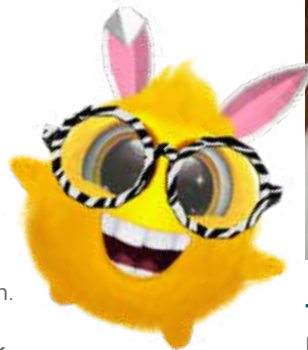

Zodpovědnost rodičů

S dětským sonickým kartáčkem by měli umět pracovat i samotní rodiče. S nácvikem správné techniky čištění nejlépe poradí dentální hygienistka či zubní lékař.



Dostupné
v růžové
a tyrkysové
barvě



Tip: Pokud nemůžete udržet pozornost dítěte, zkuste si čistit zuby navzájem – vy dítěti, dítě vám.

Kartáčky v ringu: Boj o čisté zoubky

Jedinečné sportovní klání!

V jednom rohu manuální kartáček, v druhém **Philips Sonicare For Kids!** Dva mistři gramové váhy! Který z nich dětem odstraní více zubního plaku a s kterým si vydrží čistit zuby déle? To zjistíme už za chvíli. A pamatujte – **vítězem mohou být jen zdravé zuby!**



Jak dlouho si s ním děti vydrží čistit zuby?



Manuální zubní kartáček

Po dvoutýdenním domácím používání průměrně 83 sekund.



Philips Sonicare For Kids

Po dvoutýdenním domácím používání v průměru 122 sekund.

0:1

KLASICKÝ
MANUÁLNÍ
KARTÁČEK

PHILIPS
SONICARE
FOR KIDS

Za jak dlouho zvládne kvalitně vyčistit dětský chrup?



Manuální zubní kartáček

V závislosti na typu a měkkosti kartáčku může být pro skutečně perfektní vyčištění zubů a dásní nutná doba až kolem 10 minut.



Philips Sonicare For Kids

Díky až 500 stěrům za vteřinu je vyčištění zubů a dásní vysoce efektivní už po prvním kole dvouminutového čištění.

0:2

KLASICKÝ
MANUÁLNÍ
KARTÁČEK

PHILIPS
SONICARE
FOR KIDS

Vítěz Philips Sonicare For Kids

