

PHILIPS

sonicare

Péče o dutinu ústní



Příručka pro zubní lékaře a dentální hygienistky

Individuální indikace pomůcek

5. aktualizované vydání
2021

#1

Odborníky
nejdoporučovanější
značka zubních elektrických
kartáčků v ČR a SR.
Výzkum probíhal mezi
200 zubaři a dentálními
hygienistkami v ČR a 100 v SR.

WWW.PHILIPS.CZ
WWW.PHILIPS.SK

Obsah

Více než 30 let čištění se Sonicare 3

Technologie Philips Sonicare

Sonická technologie Philips Sonicare 4

Jak správně čistit zuby sonickým kartáčkem 6

Ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser 8

Philips Sonicare DiamondClean Smart a Nové generace 10

3-Step Sonicare 12

Indikace podle typu pacientů

Pacient bez specifických potřeb 14

Parodontologický pacient 16

Dětský pacient 20

Pacient s fixním ortodontickým aparátem 26

Pacient s protetickou prací 30

Nekariogenní defekty 34

Péče o jazyk 38

Pigmentace a kombinované bělení Philips ZOOM! 40

Podpora

Odpovědi na časté otázky pacientů 44

Přehled kartáčkových hlavic 46

Přehled sonických kartáčků 49

Kontakty 50

Další rady 52

*Poznámka: Tento materiál neukazuje produkty s příslušenstvím a hlavicemi z originálních produktových balení, ale podle konkrétních doporučení odborníků.



Vždy je cesta,
jak čistit lépe

V roce 2022 Philips Sonicare oslaví 30 let existence sonické technologie Sonicare, která vznikla v roce 1992. PHILIPS díky více než 130leté zkušenosti v oblasti vědeckého vývoje ve zdravotnictví přináší moderní pomůcky, které pomáhají vám a vašim pacientům přizpůsobit péči o dutinu ústní nárokům moderní doby a životního stylu.




30 let čištění se Sonicare

Mechanické rozrušení zubního plaku sonickým kartáčkem

Vysokofrekvenční stírání
ve vertikálním směru

62 000 pohybů za minutu*

*dříve komunikováno 31 000 stěrů za minutu.

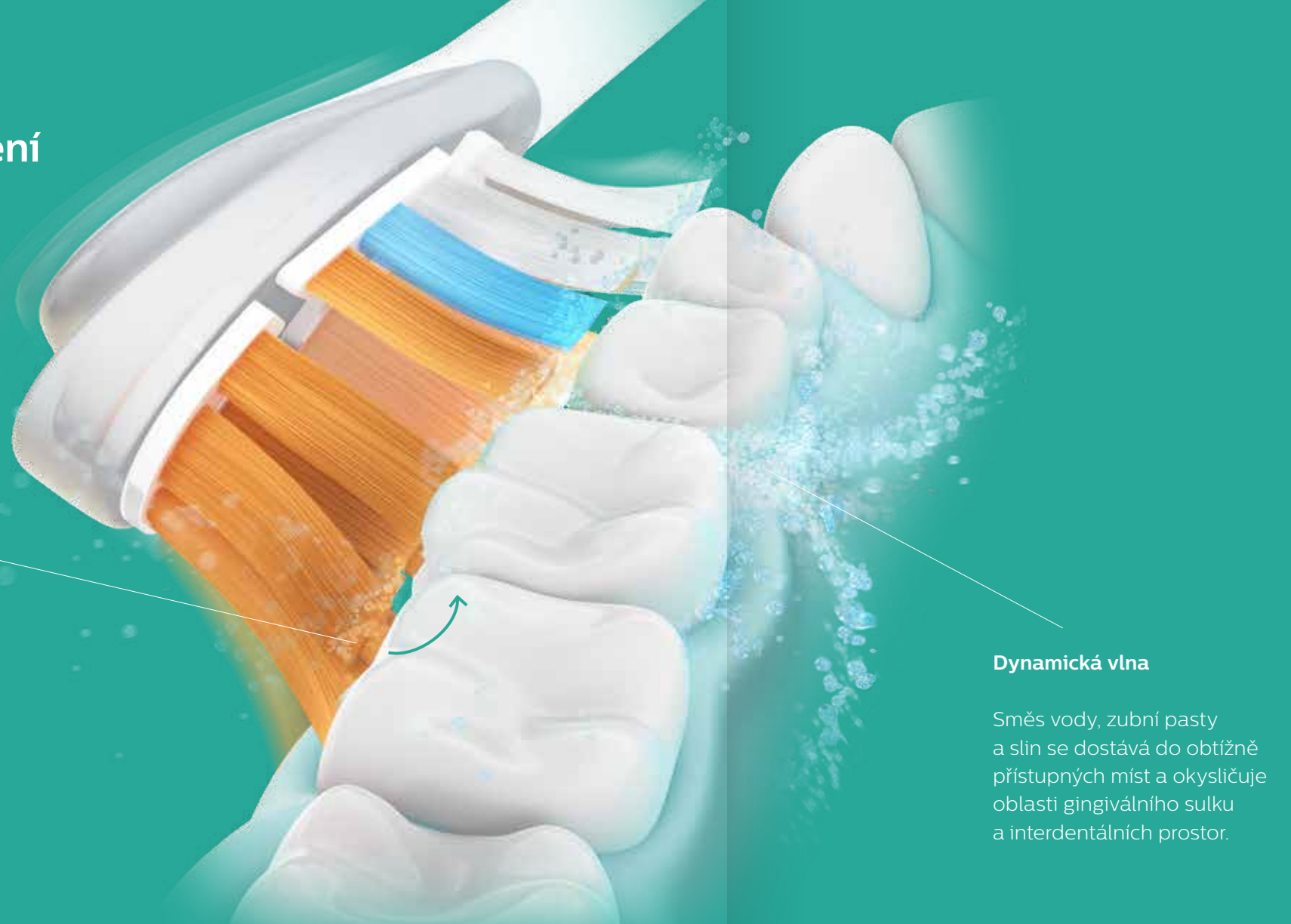

Dynamická vlna

Směs vody, zubní pasty
a slin se dostává do obtížně
přístupných míst a okysličuje
oblasti gingiválního sulku
a interdentálních prostor.



Měkkost vláken

Příliš měkká vlákna by se při vysoké rychlosti stírání
prolamovala. Pevná, přesto měkká vlákna vykonávají
pohyb koordinovaně, tudíž čistí pouze koncečky vláken.
Navíc na kartáček netlačíme a nevyvíjíme další pohyb,
např. kroužky.



Pevná měkká vlákna Philips Sonicare

Ukázka: Koordinovaný pohyb čistí pouze jemně
konečky vláken.

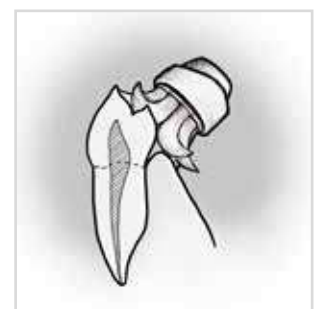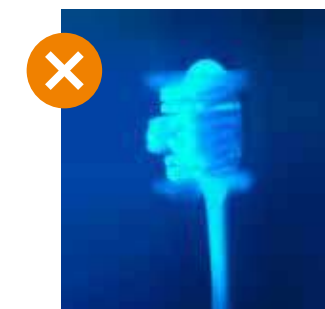

Ultra měkká nebo tenká vlákna

Ukázka: Prolamování příliš měkkých vláken.

Zástřih a měkkost vláken kartáčků Philips Sonicare

Hlavice Philips Sonicare se výrazně liší od specifikací manuálního kartáčku,
na které jsme zvyklí. Vlastnosti jsou optimalizovány pro každodenní použití
k efektivnímu a šetrnému odstraňování zubního plaku.

Zástřih vláken

Rovný zástřih vláken by nás nutil k vyvíjení přílišného tlaku
na kartáček. Různě dlouhá vlákna při čištění díky vysoké
frekvenci „obejmou“ povrch zubu a dásní a dostanou se tak
lépe i k distálním a mesiálním ploškám zubů.



Různá délka vláken
u sonického kartáčku



Rovný zástřih
u manuálního kartáčku

TIP: Vyzkoušejte na hřbetu ruky krouživý pohyb
s vypnutým sonickým kartáčkem – pocit se bude jevit
nepříjemně až traumaticky. Poté sonický kartáček
zapněte a pouze lehce přiložte na hřbet ruky – nyní se
pocit změni v šetrnost a jemnost.



Jak správně čistit zuby sonickým kartáčkem

Pro nejlepší výsledky čistíme po dobu 2 minut podél linie dásní z vestibulární a orální strany zubů. Poté kartáček zapneme znovu a dočistíme okluzní plošky a můžeme dodatečně provést stíravý pohyb po celé plošce korunky ve frontálním úseku chrupu pro ještě lepší odstranění pigmentací.



optimální doba čištění se sonickým kartáčkem

Úchop sonického kartáčku se oproti držení manuálního kartáčku také liší. Sonický kartáček držíme stabilně všemi konečky prstů.



Silný, pevný úchop



Úchop jako pero

Aplikace zubní pasty

Na sonický kartáček Philips Sonicare aplikujte jen malé množství jemné zubní pasty s nízkou abrazivitou, která je citlivá k vašim zubům a dásním. Používejte nepěnové zubní pasty bez SLS.



Polohování kartáčku

Přikládejte kartáček k zubům tak, aby se hlavice dotýkala zubů i dásní zároveň. Vláčna směřujte pod dásně v úhlu 45°. Na kartáček příliš netlačte.



Z jednoho zuby na druhý

Nejprve kartáček pomalu posouvajte z jednoho zuby na druhý. V dalším kroku jemně stírejte směrem „od dásně k zubu“. Nechte kartáček čistit každou plošku zuby alespoň 2 vteřiny.



Vnitřní plochy

Stejným pohybem nezapomeňte čistit i vnitřní plošky zubů v horní i dolní čelisti.



U předních zubů zevnitř orientujte kartáček svisle

Na čištění vnitřních plošek zubů v dolní čelisti si dejte záležet. Neodstraněný zubní plak se zde velmi snadno mění v nebezpečný zubní kámen.



Kousací plochy

I kousací plochy čistěte pomalým posouváním kartáčku.



Zadní zuby

Ujistěte se, že čistíte i poslední stoličky a jejich zadní plošky.



! Vždy se jedná o **kontaktní čištění** a konečky vláken se musí dotýkat povrchu zubů a dásní. Čištění doplníme zvláště o samotnou mezizubní hygienu, kterou provádíme jako první.

Nová podoba mezizubní péče

Navrženo pro důkladné čištění, bez námahy

REŽIMY ČIŠTĚNÍ

Clean, Deep Clean+, Sensitive, Massage

Ústní sprcha
Philips Sonicare
Power Flosser



QUAD STREAM

Unikátní čtyřproudá tryska s pogumovaným zakončením. Tryska redistribuuje proud vody do čtyř proudů, čímž dochází ke zvětšení smykové třecí síly a tím pádem důkladnému odstranění plaku z mezizubních prostor a sulku

Aktivační tlačítko



INTENZITA 1-10

Regulace tlaku proudu vody



Protetika, implantáty

Rovnátko

Parodontitida

Nedůsledný pacient

Indikace a výhody

- Jednoduché použití
- Přináší pravidelnost čištění mezizubních prostor
- Jednoduché použití v okolí můstků či korunek
- Šetrný v okolí implantátů
- Čištění okolo zámečků (vč. zbytků jídla během dne)
- Rychle se měnící velikost mezizubních prostor během orto léčby
- Aplikace terapeutické ústní vody přímo do místa problému



Pohodlné, bezpečné čištění.



S Philips Sonicare Power Flosser vyčistíte mezizubní prostory jednoduše už za 1 minutu.



Až o 130 % účinnější ve zlepšení gingiválního zdraví v porovnání s mezizubním kartáčkem.¹




¹ Při použití trysky QUAD STREAM s intenzitou 8 po čištění manuálním zubním kartáčkem u pacientů se středně těžkou až těžkou gingivitidou vs. s použitím manuálního zubního kartáčku a mezizubního kartáčku.

Aplikace Philips Sonicare pomáhá upozorňovat na časté chyby při čištění

Šetrná péče o zuby, dásně a jazyk

Sledujte průběh čištění pomocí aplikace, která se přizpůsobí vašemu modelu zubního kartáčku

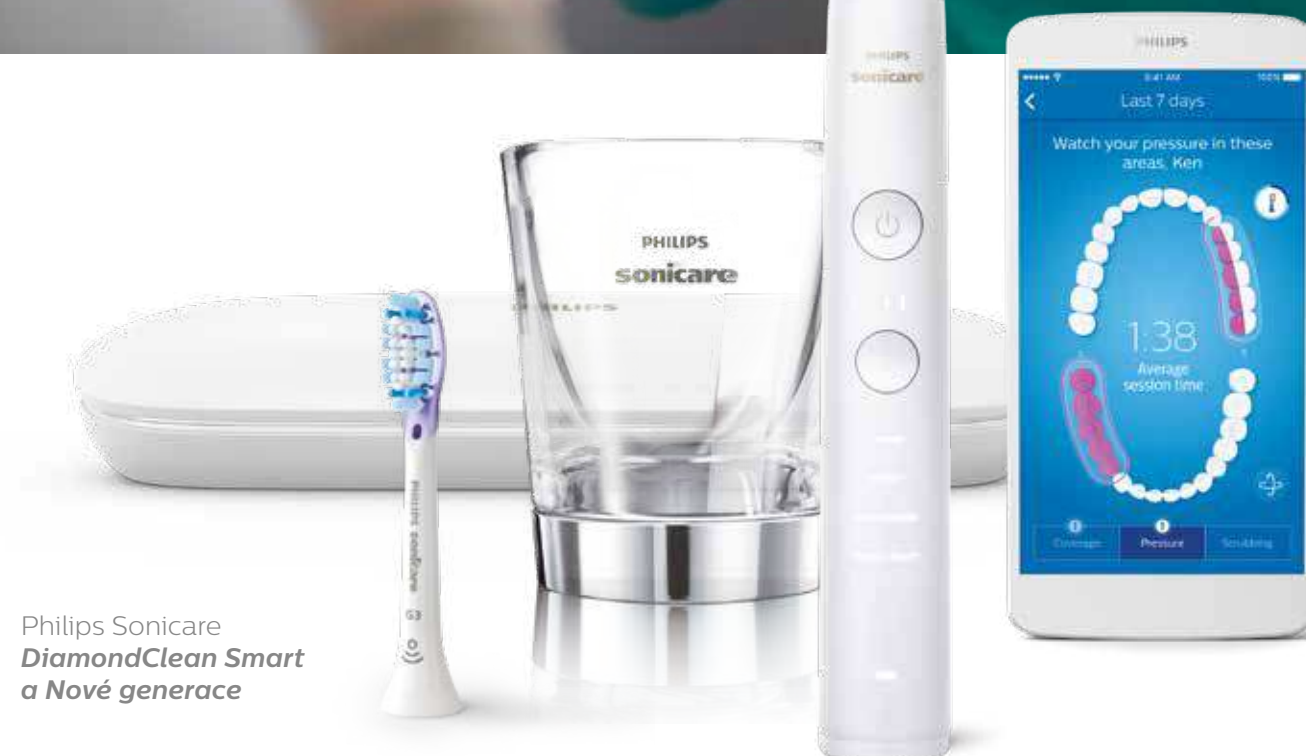

Philips Sonicare
DiamondClean Smart
a Nové generace

Protokol domácí péče s pomůckami Philips Sonicare

3-Step Sonicare




Interdental Care



Sonicare



TongueCare

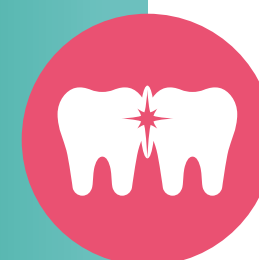

1. Mezizubní čištění

Mezizubní čištění je vhodné zařadit jako první – do uvolněného prostoru lépe pronikne okysličená dynamická vlna, vytvořená při čištění sonickým kartáčkem. Ta dočistí zbytky plaku a odplaví je.

Kromě klasických mezizubních pomůcek, jako je dentální nit a mezizubní kartáčky, může pacientům výrazně usnadnit mezizubní péči přístroj Power Flosser. Při pravidelném používání **odstraní 99,9 % zubního plaku a nečistot z mezizubních prostor, bočních plošek zubů a linie dásní.**

Power Flosser je také oblíbený na použití kolem implantátů, pod můstky nebo mezi fixním aparátem a lokální aplikaci terapeutické ústní vody do místa problému.



2. Čištění sonickým kartáčkem

Šetrnost a vysoká efektivita na odstranění zubního plaku. Kombinace **kontaktního čištění** a efektu **dynamické vlny**. Motivace a usnadnění péče o zuby a dásně. Jak poznat kvalitní sonický kartáček?

- 1) Stíravý pohyb
- 2) Široký výběr hlavice pro individuální potřeby pacient
- 3) Modely s tlakovým senzorem ochrání tvrdé i měkké tkáně před přílišným tlakem při čištění

Tip

Se sonickým kartáčkem používejte nepěnovou, jemnou zubní pastu bez abrazivních částic. Z bělicích past volte ty na bázi enzymů.



3. Čištění jazyka

Pro kompletní ústní péči a zlepšení dechu.

Jemné čištění pomocí kartáčkové hlavice TongueCare+ v kombinaci se sonickým pohybem rozruší povlak hluboko mezi papilami na jazyku. Na rozdíl od klasických škrabek **nedochází k odření** povrchu jazyka a je možné TongueCare+ používat denně.

Pacient bez specifických potřeb



Mýtus o doporučování elektrických kartáčků handicapovaným nebo nezručným je dnes již dávno překonán. V dnešní době sonický zubní kartáček můžeme doporučit všem pacientům.

- 1** Kartáčkové tělo nechte vybrat pacienta, např. podle designu, funkcí, tlakového senzoru nebo finančních možností pacienta.
- 2** Velikost kartáčkové hlavičky vyberte podle motivace pacienta k ústní hygieně – můžete zvolit mini, midi nebo standard. Kartáčková hlavička **Prestige** nebo **Optimal White Standard** je vhodná pro běžné čištění i pro začátečníky.
- 3** Nezapomněte s každým pacientem provést řádnou instruktáž v ústech a jeho techniku pravidelně kontrolovat.




Exkluzivně
v ordinacích

Philips Sonicare
ProtectiveClean
Complex Care

Parodontologický pacient

První objednávku na Sonicare zadala Americká parodontologická akademie v roce 1992.

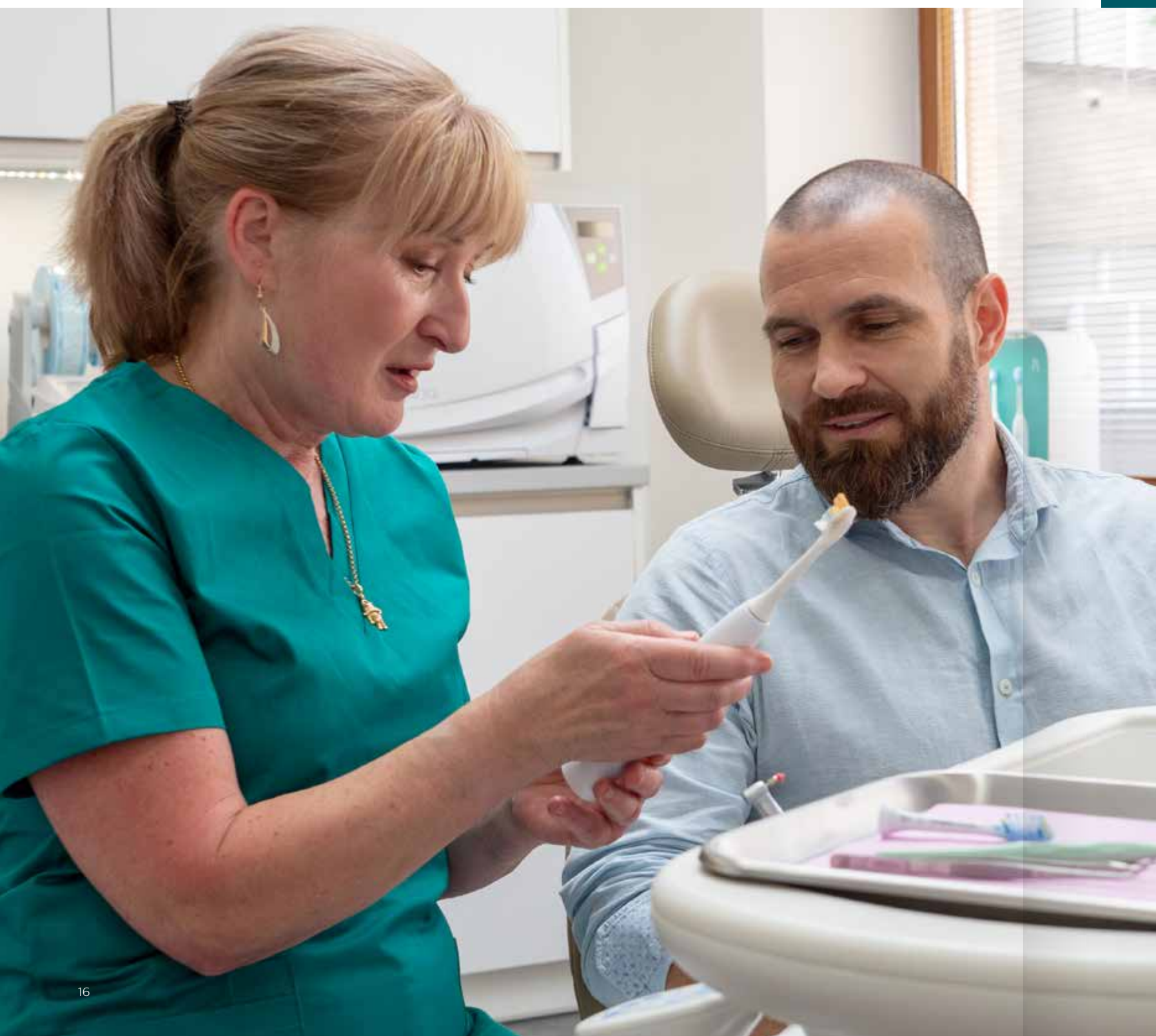

Exkluzivně
v ordinacích

Tlakový senzor
Nastavitelná intenzita



Philips Sonicare
ProtectiveClean
Complex Care



Philips Sonicare
DiamondClean Smart



Philips Sonicare
ProtectiveClean
Plaque Defense



Ústní sprcha
Power Flosser

Zánět dásní



U zanícených, oteklých a citlivých dásní se nejlépe adaptují jemná vlákna hlavičky **Premium Gum Care**. Při výrazné citlivosti a otoku dásní začínáme s hlavičkou **Sensitive**.



Po odeznění prvotní citlivosti u pacientů doporučujeme přejít na hlavičku **Prestige** nebo zvolit základní variantu hlavičky **Optimal Plaque Defense**.



Premium Gum Care



Sensitive



Prestige



Optimal Plaque Defense



Tryska Power Flosser

Odhalené kořeny



U pokročilého stavu parodontitidy s odhalenými kořeny vykoná nejlépe práci hlavička **Premium Plaque Defense** díky širokému rozsahu stěru vláken. Jako jemnější variantu zvolíme hlavičku **Prestige**, při větší citlivosti a otoku dásní začneme s hlavičkou **Sensitive**.



Premium Plaque Defense



Premium Gum Care



InterCare Standard



Prestige



Tryska Power Flosser

Nevhodnou volbou mohou být hlavičky **Optimal Plaque Defense** nebo **Optimal White Mini**. Pacient by se při čištění nadřel a nedosáhl by perfektních výsledků.



Do otevřených mezizubních prostor padnou nejdelší vlákna hlavičky **InterCare Standard**.

Parodontální kapsy



Benefit dynamické vlny přispívá k oxygenci gingiválního sulku, mezizubních prostor a parodontálních kapes, kde přebývají i anaeroby. Pravidelná masáž přispívá k prokrvení dásní.

Tipy



Doporučujeme každodenní 10minutovou sanitaci kartáčkových hlavic pomocí UV sanitizéru.



Parodontologickému pacientovi cíleně doporučujeme čistit delší dobu (4-6 minut).

Dětský pacient



*„Philips Sonicare for Kids
je pro děti sofistikovanou
motivační pomůckou.“*

Bc. Kateřina Hořejší, dentální hygienistka

Účinnost
Budování zdravých návyků
Zábava



Philips Sonicare
Sonicare for Kids



Zodpovědnost rodičů

S dětským sonickým kartáčkem je nutné naučit pracovat i samotné rodiče a vysvětlit jim, že jejich úloha s každodenním čištěním dětských zubů nekončí s pořízením moderní pomůcky. **Zapojte rodiče aktivně do nácviku čištění!**



Technika čištění

U dočasných zubů postačí pomalu přesouvat hlavičku kartáčku z jednoho zubu na druhý ideálně při dodržení úhlu 45° k dásni. Kousací plochy čistíte stejně snadno přiložením vláken k plošce a posouváním sem a tam. U smíšené dentice je vhodné přidat i stírávý pohyb po celé ploše korunky stálého zubu. Tento složitý terén je vhodné doplnit rodiči i o sólo techniku.



For Kids Mini
od 3 let

For Kids Standard
od 7 let

Optimal
Plaque Defense

Tip

Tlakový senzor
Pro starší děti od 12 let



Philips Sonicare
ProResults



Zdarma ke stažení



Motivace

Technologie Bluetooth propojuje elektrický kartáček se zábavnou aplikací. Postavička roztomilého Sparklyho motivuje děti k lepšímu a delšímu čištění.

Tip: v ordinaci



Pořídte si do ordinace zubaté kamarády a vyčistěte jim společně všechny zoubky. Zapojte rodiče i samotné děti. Spočítejte všechny zoubky na modelu a ukažte si, jak vypadá kaz nebo rostoucí zoubek.



Pořídte si do ordinace i podložku, na které můžete rodičům ukázat metody čištění vleže jako v domácím prostředí.



Následný nácvik čištění v pusince dítěte bude o to snazší!



Tip: doma



Motivujte i rodiče ke společnému čištění zoubků s jejich dětmi a proměňte jim nudnou rutinu v zábavu.



Rodiče mohou použít světélko nebo čelovku, aby do pusinky lépe viděli. Trénují tím i posvícení světlem „jako u zubaře“.



U neposedných dětí se lépe čistí se zafixovanou hlavou v klíně rodičů, někdy je zapotřebí fixovat i ruce.

Sonicare For Kids výrazně urychlí a především zkvalitní každodenní odstraňování plaku. Pro děti je velkou zábavou, pro rodiče dobrým pomocníkem.



Pacient s **fixním** ortodontickým aparátem

U pacienta s rovnátky nacvičujte společně techniku čištění vždy přímo v ústech.

Efektivita a bezpečnost sonické technologie kompenzuje zvýšenou náročnost hygieny při ortodontické terapii.

Jednoduchost
Motivace
Čištění kolem zámečků



Philips Sonicare
ProtectiveClean
Complex Care



Philips Sonicare
ProtectiveClean
Plaque Defense



Ústní sprcha
Power Flosser



Přenosná ústní sprcha
Power Flosser

Zvýšená potřeba hygieny a odlišná technika čištění

Správné přikládání kartáčku jak k dásním, tak okolo rovnátek je důležité i s moderní pomůckou.



Optimal White Mini

Optimal Plaque Defense

Tryska Power Flosser

S tryskou nikdy nemiřte proti dásni, ale směrujte ji od dásně.

Měnící se velikost mezizubních prostor

Přístroj **Power Flosser** je v tomto ohledu univerzální. Mezizubní prostory čistíte z vnější i vnitřní strany. Ústní sprcha si poradí i se zbytky jídla zaklíněnými mezi zámečky.



z orální strany



z vestibulární strany

Tip

Při čištění rovnátek dochází k zvýšenému opotřebení až roztřešení vláken kartáčku.



Častější výměna kartáčkové hlavice je zde nutností.

Kartáčkovou hlavici nepřikládejte kolmo k zámečkům.



Technika čištění u fixního ortodontického aparátu

1. Podél linie dásní – čistíme gingivální sulkus



2. Z horní strany zámečků



3. Z dolní strany zámečků



Pro maximální efektivitu je nutné přikládat konce vláken z horní i dolní strany zámečků zvlášť. **Ortodontický zámeček nesmí být zaklíněn uprostřed hlavice mezi vlákny.** Přední část zámečků doplníme o sólo techniku. Samotná doba čištění se tím prodlouží.

Pacient s protetickou prací



QuadStream, vysoce účinný čtyřproud vody, je šetrný nejen k dásním a zubům, ale také k protetickým pracím, implantátům a jejich okolí.

Snadná manipulace
Kombinace s ústní vodou
Lokální aplikace chlorhexidinu

Exkluzivně
v ordinacích



Ústní sprcha
Power Flosser



Přenosná ústní sprcha
Power Flosser



Philips Sonicare
ProtectiveClean
Complex Care



Philips Sonicare
DiamondClean
Nové generace




Vyšší náročnost čištění protetických prací

Domácí hygiena u protetických prací bývá komplikovaná a mnohdy zcela pacienty vynechávána. Časem pak dochází k postupnému znehodnocování celé práce i okolních tkání.



Šetrnost k protetickým pracím

Ústní sprcha s novou tryskou Quadstream je šetrná k umělým materiálům. Nejvíce ji oceníte kolem implantátů, které jsou náchylné k poškrábání, např. mezizubními kartáčky.

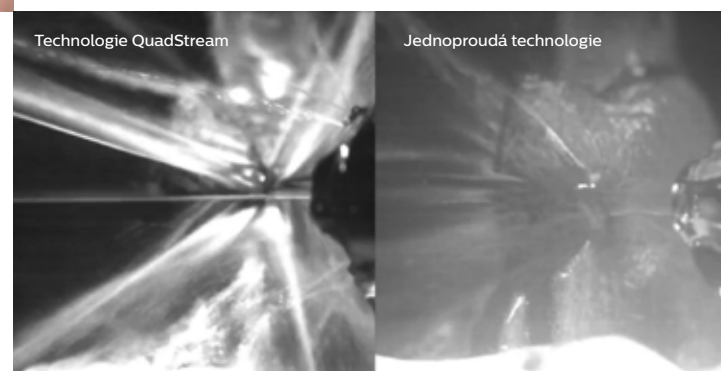

Philips Power Flosser s technologií QuadStream versus ústní sprcha s jednoproudou technologií

Jednoduchost používání


Manipulace s přístrojem je jednodušší než s běžnými superflossy a vede k pravidelnému používání.

Tip


Aplikace terapeutické ústní vody přímo do problematického místa.

Doporučená frekvence čištění s Power Flosser je 2x denně, a to z orální i vestibulární strany. Trysku Power Flosser polohujte aproximálně, nikdy nemiřte apikálním směrem!

Nekariogenní defekty

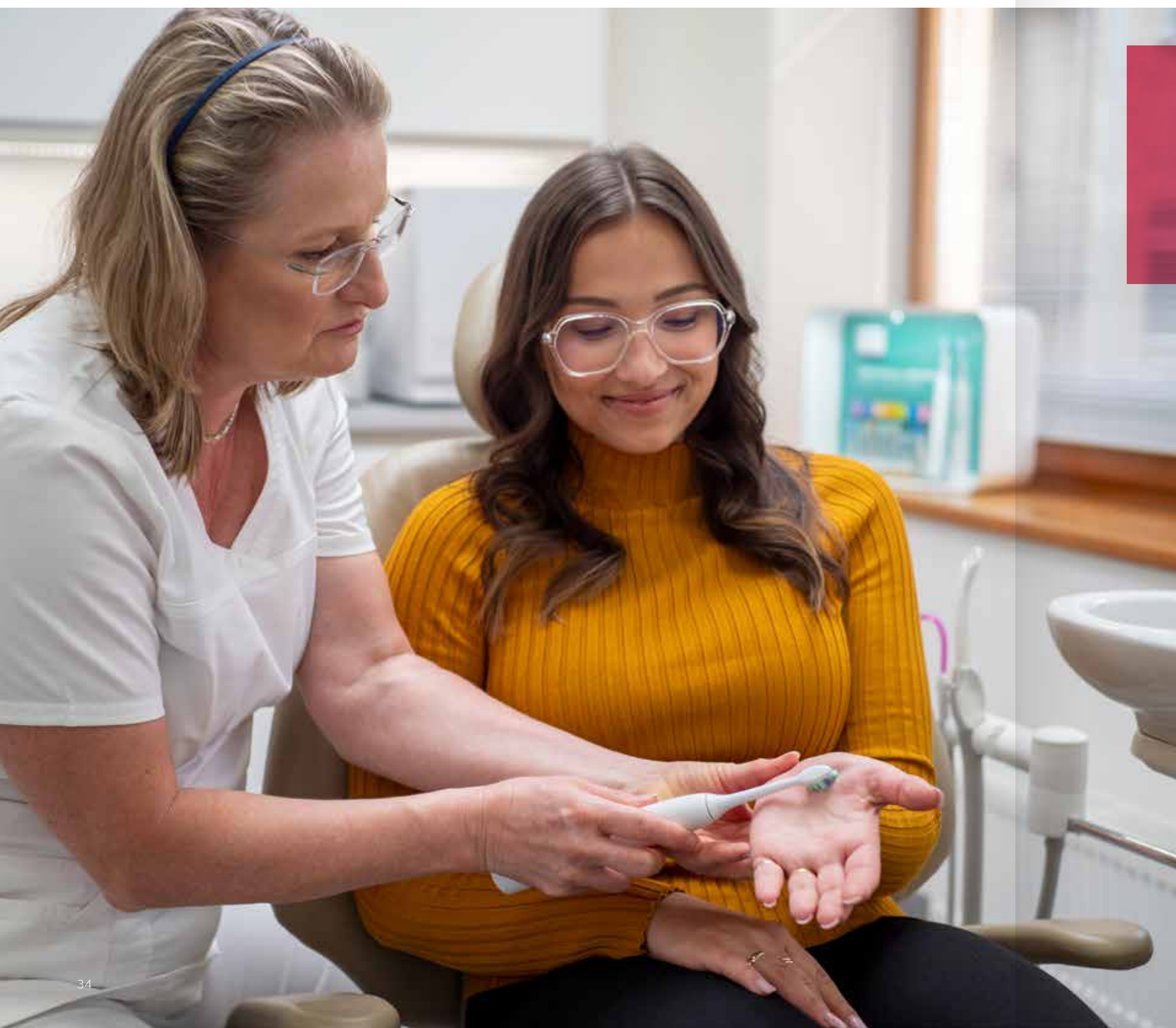

Na sonický kartáček se vyvíjí minimální tlak, aby se zubů a dásní dotýkaly konce vláken lehkostí motýlích křídel.

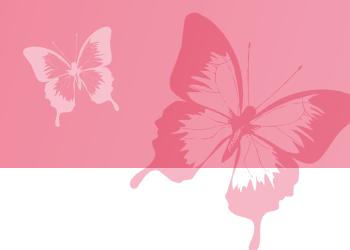

Jemnost vláken
Tlakový senzor
Nastavitelná intenzita

Exkluzivně
v ordinacích



Philips Sonicare
DiamondClean Smart



Philips Sonicare
DiamondClean
Nové generace



Philips Sonicare
ProtectiveClean
Complex Care



Eroze, abraze, atrice, klínovité defekty

Kartáčkové hlavice osázené sensitivními vlákny jsou ideální pro defekty skloviny i obnažený dentin.



Premium Gum Care

Sensitive

Optimal Plaque Defense

Prestige

Ani u nekariogenních defektů se nemusíme obávat indikace sonického kartáčku. Vždy volíme modely s nastavitelnou intenzitou.



Tlak na kartáček

Během manuálního čištění vyvíjíme na kartáček sílu kolem 250 g/cm². Rozdílný pocit při čištění sonickým kartáčkem přirozeně redukuje vyvíjenou sílu pouze na 100 g/cm². Všechny kartáčky pro dospělé pacienty disponují tlakovým senzorem, který velký tlak ohlídá. **Při spuštění tlakového senzoru se navíc automaticky sníží intenzita čištění. Tím šetříme tvrdé i měkké tkáně.**

Při nácviu techniky čištění v ústech se vyvarujte častým chybám:

- ✗ kolmé přikládání vláken k zubům a dásním
- ✗ přílišný tlak
- ✗ drhnutí a nadbytečné pohyby s kartáčkem



In vitro hodnocení dentinových abrazí způsobených používáním elektrického zubního kartáčku Philips Sonicare DiamondClean.

Moore M, Putt M, Jain V, de Jager M.
Nepublikováno, 2010


Cíl

Vyhodnotit abraze dentinu související s používáním standardní a zmenšené kartáčkové hlavice Philips Sonicare DiamondClean v porovnání s manuálním zubním kartáčkem za simulovaných klinických podmínek.

Závěr

V této in-vitro studii bylo zjištěno, že standardní a zmenšená kartáčková hlavice Sonicare DiamondClean způsobovaly o 50 % méně dentinových abrazí než manuální zubní kartáček.

Dentinové abraze

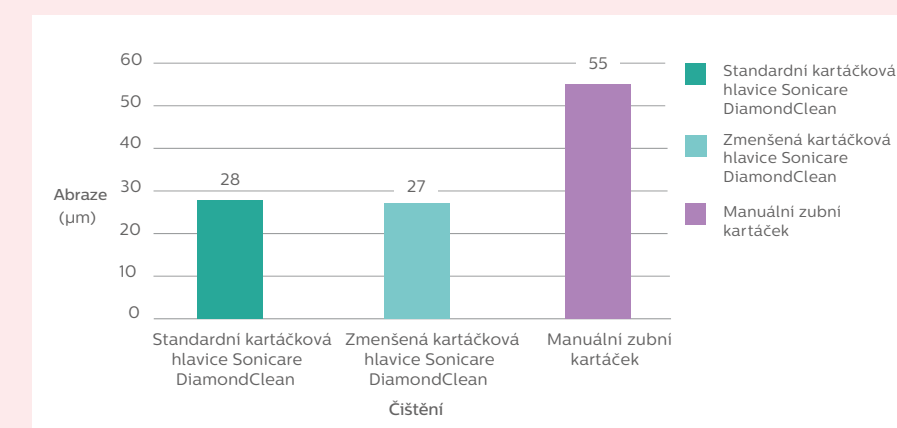

*kartáčková hlavice Optimal White (dříve pod názvem DiamondClean)




Péče o jazyk

240 nopků z elastomeru na hlavici **TongueCare+ rozruší plak a odumřelé buňky** mezi papilami jazyka pomocí sonické technologie.

Účinků hlavice dosáhnete při **každodenním používání**.



TongueCare+

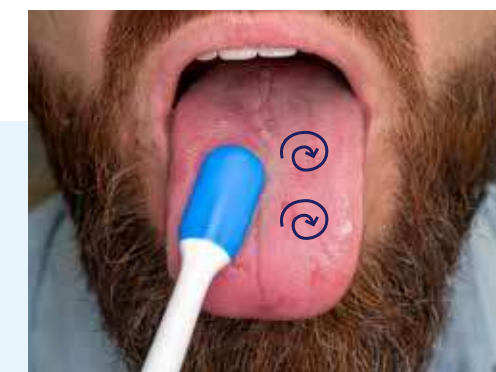

Technika čištění s TongueCare+

1. Vyměňte kartáčkovou hlavici na zuby za **TongueCare+**
2. Zapněte kartáček na vámi zvolený **program a intenzitu**
3. Zvolte si pro vás příjemný pohyb hlavici po jazyku:
 - Vytvářejte jemné **kroužky**
 - Pokládejte hlavici **z místa na místo**
 - Pomalu **posouvejte hlavici** po jazyku
4. Nechte **na každém místě** TongueCare+ chvíli pracovat
5. Čistěte po dobu **20-60 s**, podle potřeby **1-2x denně**

Tip

Začínáte jazyk čistit na nejnižší intenzitu, vždy od špičky jazyka pomalu postupujte až ke kořeni jazyka. Na hlavici s TongueCare+ můžete aplikovat dentální gel či jemnou ústní vodu.

Pozor: Vyvarujte se drhnutí a stírání povrchu jazyka jako s klasickou škrabkou na jazyk či kartáčkem. Čištění by bylo neefektivní.

Pigmentace a kombinované bělení Philips ZOOM!

Odstraňování pigmentací

„Zelený kopeček“ vláken na hlavici **Optimal White** odstraňuje lehké pigmentace a leští zuby. Navíc snadno zapadá do okluzních ploch i gingiválního sulku.

Nejdříve volíme velikost Standard, při zvládnuté technice čištění můžeme přejít na velikost Mini a dopřát si precizní vyčištění.

Pravidelné používání přispívá i k udržení světlých zubů po bělení či profesionálním odstranění pigmentací.



Optimal White Standard



Optimal White Mini

Tip

Používejte nízkoabrazivní bělicí pasty na bázi enzymů, které pigmenty pomáhají rozpouštět.

Kombinované bělení Philips ZOOM!

Šetrná domácí + ordinační fáze bělení
Vhodné pro citlivé zuby
Vhodné i pro náročná zbarvení*


*Kontaktujte nás pro individuální konzultaci.




Peroxid vodíku/Karbamid peroxid
 Amorfni kalcium fosfát
 Dusičnan draselný
 Fluoridy

Relief ACP


Samostatný dentální gel, rychlé řešení citlivosti

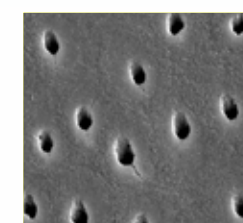

Před ošetřením

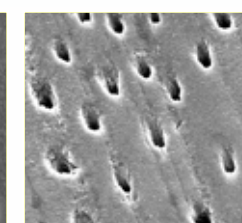

Po ošetření pouze fluoridy a dusičnanem draselným

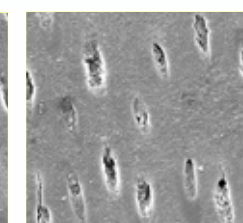

Po ošetření Relief ACP

Snadná aplikace doma i v ordinaci

- do individuálních nosičů
- pomocí zubního kartáčku
- potřením citlivého místa

Použití

- úleva od **citlivosti**
- citlivost při **bělení**
- před ošetřením DH





1 Seznamte pacienta s celou procedurou bělení.



2 Sada ordinační fáze bělení obsahuje jak samotné bělicí gely (6% H₂O₂) a pH akcelerator, tak i vše pro přípravu ochranné bariéry.



3 Nezapomeňte vybrat původní odstín zubů. Pokud pacient začíná bělit domácí fází, odeberte odstín i po této fázi.



4 Jednotlivé pokroky bělení si dokumentujte. Fotky můžete pořídit současně i na mobil pacienta pro jeho větší motivaci.



5 Vytvořte dokonalou bariéru a chraňte všechny měkké tkáně.



6 Během ordinační fáze bělení aplikujte bělicí gel na zuby celkem 4x. Před každou aplikací nezapomeňte nanést také pH akcelerator přiložený v balení.



7 Světlo LED lampy pouze urychlí a umocní bělicí proces a oproti UV lampám zuby nepřehřívá! Vysvětlete pacientům, že samotná lampa zuby nebělí. Během ordinační fáze ji rozsviďte 4x na 15 minut.



8 Ukažte pacientovi, jakým způsobem bude nanášet gel doma do individuálních nosičů. U kombinované techniky bělení musí vždy proběhnout i domácí fáze bělení.



9 Samostatná stříkačka gelu Relief ACP řeší citlivost při bělení zubů a může být aplikován před, v průběhu i po bělení. Může být kombinován i s ostatními druhy bělení.



Odpovědi

na časté otázky pacientů



S jakým kartáčkem začít čistit? (pacient bez specifických potřeb)

Zvolte kartáček s tlakovým senzorem z řady Protective Clean, který ohlížá příliš velký tlak při čištění. Model ProResults zase potěší starší děti pro výběr z barev i jemnější pohyb stírání.



Čištění kartáčkem mě lechtá.

Počáteční nezvyklý pocit lechtání či brnění je naprosto přirozený. Nenechte se odradit! Tento pocit ve většině případů po několika dnech ustává.



Slyšel jsem, že elektrické kartáčky by se neměly používat denně.

Nemějte obavu z použití Philips Sonicare 2x denně. Jedině tak vám kartáček poskytne nejlepší výsledky.



Jak se starat o samotný kartáček?

Po každém čištění celý kartáček omyjte pod tekoucí vodou, sejměte hlavici, opláchněte trn, na kterém hlavice drží a obě části zvlášť nechte vyschnout. Zabráňte usazování vodního kamene a zasychání zubní pasty na kartáčku, a tím prodloužíte jeho životnost.



Čím plnit přístroj PowerFlosser?

Plní se čistou vodou, můžete přidat 20 ml ústní vody bez esenciálních olejů. Po použití roztoku s ústní vodou propláchněte přístroj čistou vodou, zabráňte tím ucpávání.



Jaká pasta?

Pro maximální pohodlí a šetrnost používejte jemné pasty, které jsou citlivé k vašim zubům a dásním, nejlépe bez pěnidel.



Co může způsobit nesprávný úchop sonického kartáčku?

Křečovitě držení vede ke zvýšenému tlaku na kartáček a „úchop pera“ známý pro manuální kartáček způsobí nedostatečnou adaptaci vláken na povrch zubů a dásní, a tím horší odstranění zubního plaku.



Špinavé zrcadlo?

Nezapomeňte zapínat kartáček až v ústech, předejdete tak častějšímu leštění zrcadla.



Mezi hlavici a kartáčkem je malá mezera.

A tak je to správně! Jen tak se vlákna kartáčku rozpohybují, jak mají.




Nedostatečná péče o kartáček je častým důvodem jeho poruchy.



Přehled kartáčkových hlavíc

Philips Sonicare

Všechny typy hlavíc jsou kompatibilní se všemi modely kartáčků Philips Sonicare 3. generace.

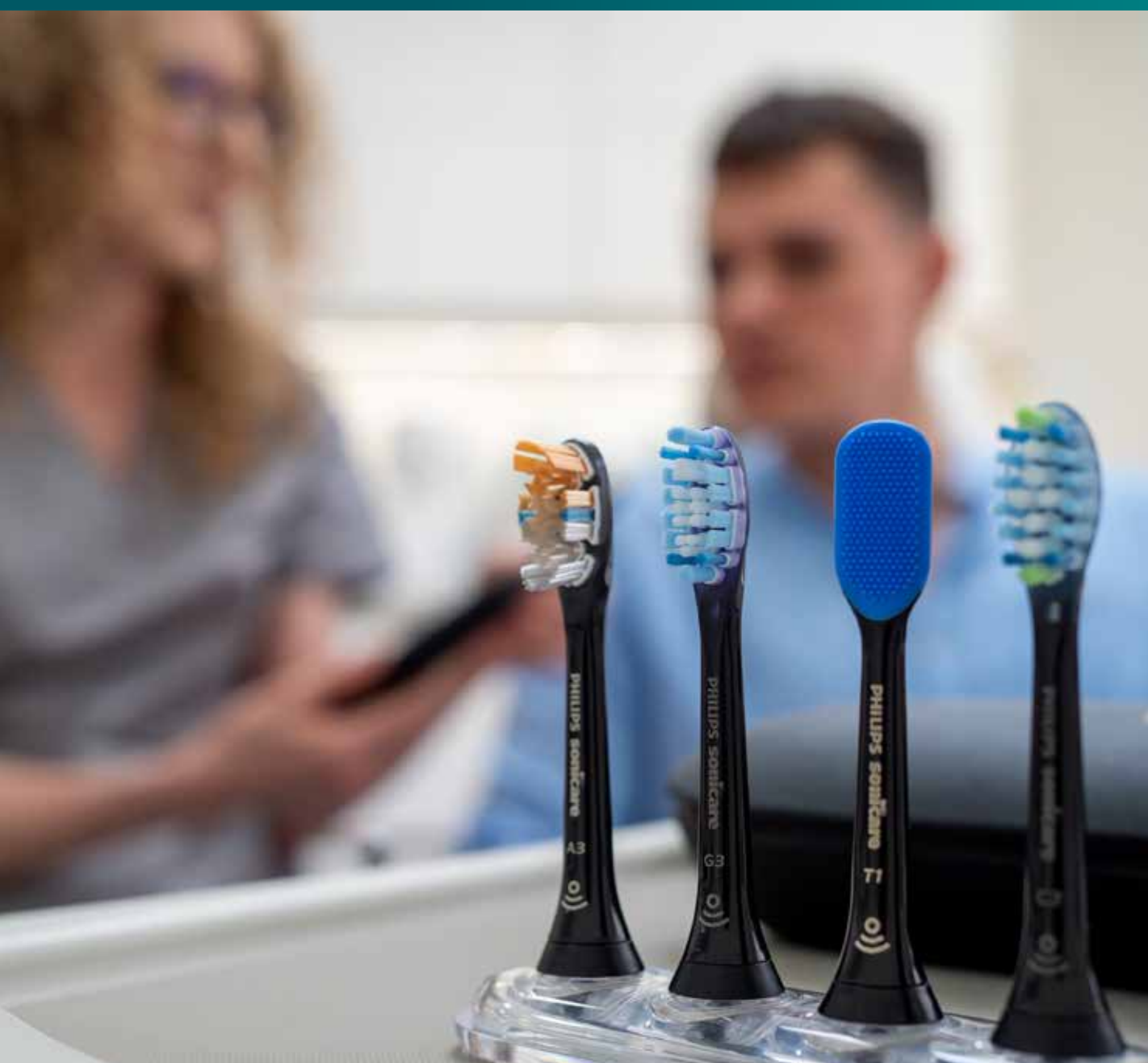

Jazyk



TongueCare+

- každodenní čištění povrchu jazyka hluboko mezi papilami

Děti



For Kids Mini

- For Kids Mini pro děti od 3 let
- dostupné i ve velikosti Standard pro děti od 7 let**

Pigmentace



Optimal White Standard

- odstranění pigmentací • leštění zubů
- v průběhu bělení zubů • běžné čištění

Rovnátko



Optimal White Mini

- odstranění pigmentací • leštění zubů
- v průběhu bělení zubů • pečlivé běžné čištění

Běžné čištění



Optimal Plaque Defense Midi

- běžné čištění plaku
- jemnější vlákna
- jako alternativu lze použít hlavici ProResults



Premium Plaque Defense

- parodontitida • odhalené kořeny • důkladné čištění
- pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění



InterCare Standard

- mezerovitý chrup • parodontitida
- otevřené mezizubní prostory

Vyžrálý plak
Parodontitida



Prestige

- nadměrné množství plaku • parodontitida • důkladné čištění
- pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění



Premium Gum Care

- citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů
- defekty skloviny • citlivé zubní krčky
- protetické práce a implantáty

Dásně
a citlivost



Sensitive

- citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů
- viklavost zubů • defekty skloviny • citlivé zubní krčky
- protetické práce a implantáty



Přehled sonických kartáčků Philips Sonicare

	DiamondClean Smart	DiamondClean Nové Generace	ProtectiveClean Complex Care	ProtectiveClean Plaque Defense	Pro Results	Sonicare For Kids	DiamondClean Nové generace Duopack
Nastavení úrovně intenzity	o/oo/ooo	o/oo/ooo	o/oo/ooo	o/oo		o/oo	o/oo/ooo
CLEAN (2 min.) Všestranné odstranění plaku, standardní režim	✓	✓	✓	✓	✓		✓
WHITE (2.5 min.) Odstranění povrchových pigmentací pro bělejší zuby s krátkým přeleštěním ke konci	✓	✓					✓
GUMCARE (3 min.) Po klasickém čistícím režimu následuje extra jemné promasírování dásní	✓	✓	✓				✓
DEEPCLEAN (3 min.) Hlubkové čištění pro maximální odstranění plaku, zajišťuje i masáž dásní a obnovu tkáně	✓	✓					✓
SENSITIVE (2 min.) Extra jemný režim pro citlivé zuby a dásně						✓	
O 60 % nižší výkon než u kartáčků pro dospělé						✓	
O 40 % nižší výkon než u kartáčků pro dospělé						✓	
Celkový počet pohybů / min.	62 000	62 000	62 000	62 000	31 000	62 000	62 000
Soft-Touch rukojeť						✓	
Výdrž baterie v týdnech (při použití 2x denně, 2 minuty)	2 týdny	2 týdny	2 týdny	2 týdny	2 týdny	2 týdny	2 týdny
Unikátní vlastnosti a příslušenství							
Barevná provedení	○●	●●●○	○	○●●●	●●●●	●●	●●
Unikátní sklenice s indukčním nabíjením	✓	✓					✓
Elegantní pouzdro s USB kabelem/síťovým adaptérem	✓	✓					
Tlakový senzor	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Senzor drhnutí	✓						
Senzor polohy	✓						
Kompatibilita s aplikací Philips Sonicare	✓	✓					✓
Podsvícený displej	✓	✓					✓
Cestovní nabíječka s trnem			✓	✓	✓		
Cestovní pouzdro			✓	✓	✓		
Kontrolka výměny hlavice	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Počet hlavic v balení s kartáčkem	2	1	3	1,2	1		2
Počet těl kartáčků v balení	1	1	1	1	1	1	2
Zabudovaný Bluetooth®	✓	✓				✓	✓

* Konkrétní modely kartáčků v rámci zde uvedených produktových řad se mohou lišit disponibilitou uvedeného příslušenství. Konkrétní informace k modelům jsou k dispozici u obchodních zástupců, nebo produktovém katalogu.

Kontaktujte nás:



Alena Gallová, DiS.
severní a západní Čechy
☎ +420 775 408 577
@ alena.gallova@philips.com



Mgr. Marta Brachová
Slovensko
☎ +421 918 571 209
@ marta.brachova@philips.com



Erika Poskonková
Morava a Slezsko
☎ +420 770 110 859
@ erika.poskonkova@philips.com



Darina Rojkovičová
Stredné a Východné Slovensko
☎ +421 905 888 117
@ darina.rojkovicova@philips.com



Mgr. Petr Hradecký
Praha a střední Čechy, jižní Čechy
a Vysočina
☎ +420 773 772 656
@ petr.hradecky@philips.com



Martina Sakošová
Stredné a Západné Slovensko
☎ +421 905 386 729
@ martina.sakosova@philips.com

Pro Vaši
ordinaci
zajistíme

**Kontaktní osoba pro odborníky,
školy a studenty. Odborná konzultace.**



Bc. Jana Křepelková
Dentální hygienistka
☎ +420 778 724 423
@ jana.krepelkova@philips.com

- školení ve vaší ordinaci
- vyzkoušení sonických kartáčků
- objednávky
- ceníky
- letáky
- objednávací karty
- plakáty
- kazuistiky
- omalovánky pro děti



Máme pro vás **další rady**

Navštivte naši webovou stránku www.philips.cz/dentalni-pece, kde si můžete stáhnout elektronické verze klinických studií a příruček nebo se podívat na edukační videa s dentálními hygienistkami.

Jak na čištění zubů s fixními rovnátky?

Jaké jsou výhody Philips Sonicare for Kids?

Jak čistit dětské zuby?

Jak funguje sonická technologie ve Philips Sonicare?

Rozdíly mezi sonickým a manuálním kartáčkem?

Jak na krásně bílé zuby?

Jak na výběr správné hlavičky?



Vždy je cesta, jak čistit lépe

Philips Sonicare slaví 25 let existence sonické technologie Sonicare, která vznikla v roce 1952. Díky více než 100 letům zkušeností v oblasti vědeckého vývoje přináší moderní pomůcky, které pomáhají vám a vašim pacientům zlepšit péči o dutinu ústní nárokům moderní doby a životního stylu.



Jak má pacient postupovat v případě reklamace nebo potíží s výrobkem?

Díky elektronické záruce již není nutné schovávat účtenky! Stačí si výrobek Philips zaregistrovat na www.philips.cz/myphilips a nahrát k němu doklad o koupi.

Pacient kontaktuje přímo nás, nejjednodušším a nejrychlejším způsobem přes Whatsapp nebo FB messenger

f Philips ČR
wa +420 771 133 012 (pouze textová komunikace)
228 880 896
 PO - PÁ 8:00 - 22:00
 SO - NE 10:00 - 22:00
 PO - PÁ 9:00 - 17:00

- ▶▶ Nahlási produktové identifikační číslo uvedené na těle výrobku
- ▶▶ Vadnou část výrobku pečlivě zabalí a připraví k vyzvednutí naší přepravní společností
- ▶▶ Pokud pacient nenahrál svou účtenku při registraci do služby MyPhilips, přiloží její kopii k zásilce

www.philips.cz/support





Více informací naleznete na
<http://www.philips.cz/sonicare>
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena