

PHILIPS

sonicare

Mezizubní péče

Zdravé zuby a dásně bez námahy

Čištění mezizubní nití nebo kartáčky bývá pracné, zdlouhavé a mnohdy nepříjemné. S Philips Sonicare Power Flosser vyčistíte mezizubní prostory snadno a efektivně. Nic vám tak už nebude bránit v pravidelné péči.



Nový

Power Flosser.

Důkladná a pohodlná
mezizubní péče.

Nová podoba mezizubní péče

Důkladná. Pohodlnější. Bezpečná.
S **Philips Sonicare Power Flosser**
vyčistíte mezizubní prostory jednoduše
už za 1 minutu.



Odstraňuje **99,9 % zubního plaku**
a nečistot z mezizubních prostor,
bočních plošek zubů a linie dásní.¹



Až o **130 % účinnější** ve zlepšení
ingiválního zdraví v porovnání s
mezizubním kartáčkem.²



Zjistěte více na
philips.cz/sonicare



¹ Studie in vivo, skutečné výsledky v ústech se mohou lišit

² Při použití trysky QUAD STREAM s intenzitou 8 po čištění manuálním zubním kartáčkem u pacientů se středně těžkou až těžkou gingivitidou vs. s použitím manuálního zubního kartáčku a mezizubního kartáčku.

©2021 Philips Oral Healthcare, Inc. Veškerá práva vyhrazena. PHILIPS a emblém Philips jsou ochranné známky společnosti KPENV. Sonicare a logo Sonicare jsou ochranné známky společnosti Philips Oral Healthcare anebo KPENV. Portfolio produktu.

www.philips.cz

Navrženo pro důkladné čištění, bez námahy

REŽIMY ČIŠTĚNÍ

Clean: každodenní čištění, proud se standardními pulzy, doporučená min. délka čištění 1 minuta, pacer – upozornění po uplynutí 30 sec čištění

Deep Clean+: důkladné čištění, proud s pulzní vlnou střídající silné a jemné pulzy, doporučená min. délka čištění 90 sekund

Sensitive: režim pro citlivé dásně, proud s pulzní vlnou a jemnými pulzy, doporučená délka čištění min. 1 minuta

Massage: Masážní režim, pro lepší prokrvení dásní, proud s velmi jemnými pulzy, doporučená délka čištění min. 1 minuta, pacer – upozornění po uplynutí 30 sec čištění



Manuální nastavení intenzity, v úrovni 1 – 10, umožňuje regulaci tlaku proudu dle specifických potřeb pacienta.



QUAD STREAM

Unikátní čtyřproudá tryska s pogumovaným zakončením. Tryska redistribuuje proud vody do čtyř proudů, čímž dochází ke zvětšení čisté plochy a důkladnému odstranění plaku z mezizubních prostor a sulku



Standard


Jednoproudá tryska, efektivně odstraňuje zbytky jídla



Comfort

Jednoproudá tryska s jemným gumovým zakončením pro citlivé dásně

Klinicky ověřené účinky na zmírnění krvácení dásní a redukci plaku

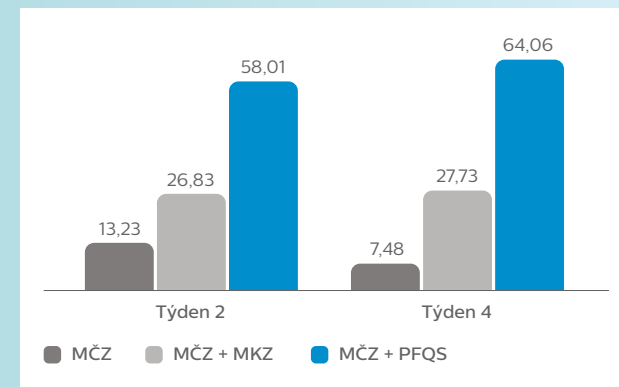

Používání Philips Sonicare Power Flosser jako doplňku k manuálnímu čištění zubů ukázalo největší míru snížení zánětu dásní, krvácení a zubního plaku, následovalo manuální čištění zubním kartáčkem plus mezizubním kartáčkem, a samotné čištění manuálním zubním kartáčkem, a to jak po 2, tak i po 4 týdnech. Srovnání mezi výrobky poskytlo statisticky významné rozdíly mezi Philips Sonicare Power Flosser, mezizubním kartáčkem a samotným manuálním zubním kartáčkem, a to u všech ukazatelů a v obou časových bodech. Všechny zkoumané výrobky byly bezpečné pro použití.

QUAD STREAM™

Unikátní tryska ústní sprchy Power Flosser, QuadStream, rozděluje proud vody z jednoho do čtyř.

Pulse Wave technology

Intenzita proudění vody se zvyšuje a snižuje. Tím vzniká pulzování, které v proudu vody vytvoří krátké pauzy. Tyto pauzy usnadňují pacientovi přechod mezi mezizubními prostory a zajišťují, že pacient věnuje péči celé ústní dutině v průběhu jednoho čistícího cyklu.

