

PHILIPS

sonicare

Sonická detská
kefka



Philips Sonicare
for Kids
s technológiou
Bluetooth®

#1

Odborními
najviac odporúčaná
značka elektrických
zubných kefiek v SR.
Výskum medzi 100 zubármi
a dentálnymi hygieničkami.
WWW.PHILIPS.SK

Správna technika čistenia



1 Polohovanie kefky

Kefku polohujte tak, aby vlákna smerovali pod ďasno v uhle 45°.



2 Z jedného zubu na druhý

Pri dočasných zuboch pomaly posúvajte kefku z jedného zubu na druhý. Pri novo prerezaných stálych zuboch je vhodné pridať aj stieravý pohyb po celej ploche korunky smerom od ďasna k zubu.



3 Vnútorne plochy

Nezabudnite čistiť vonkajšiu a vnútornú plochu zubov. Pri predných zuboch zvnútra orientujte kefku zvislo.




4 Hryzacie plochy

Aj hryzacie plochy čistite pomalým posúvaním kefky.



5 Zadné zuby

Presvedčte sa, že si čistíte aj posledné stoličky.

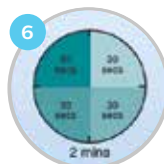

6 Dĺžka čistenia

Nechajte kefku čistiť každú plochu zubu aspoň 2 sekundy.

Aj s elektrickou kefkou je nutné deťom
s čistením vždy pomáhať.

Vývoj zubkov dieťaťa¹

0-6 rokov – Prerezávanie dočasných zubov v čase

Prvé dočasné zuby sa prerezávajú v 6 – 8 mesiacoch veku dieťaťa. V 2,5 rokoch už majú deti kompletný dočasný chrup.


• 6 až 10 mesiacov – spodné rezáky

• 8 až 12 mesiacov – bočné spodné
a všetky horné rezáky

• 12 až 16 mesiacov
– prvá dočasná stolička

• 16 až 20 mesiacov – očné zuby

• 20 až 30 mesiacov – druhá dočasná stolička

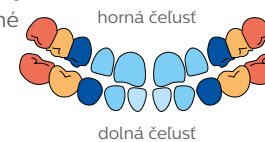

6-12 rokov – Prerezávanie trvalých zubov v čase

V šiestich rokoch sa prerezávajú tzv. šesťky, prvé trvalé stoličky. Približne v 12 rokoch má dieťa kompletný trvalý chrup.

• 6 rokov – 4 veľké stoličky (pred vypadnutím dočasných zubov), 2 spodné rezáky


• 7 rokov – 2 horné rezáky,
2 spodné rezáky

• 8 rokov – 2 horné rezáky

• 10 rokov – 2 spodné očné
zuby, 4 malé stoličky

• 11 rokov – 2 horné očné
zuby, 4 malé stoličky

• 12 rokov – 4 veľké stoličky

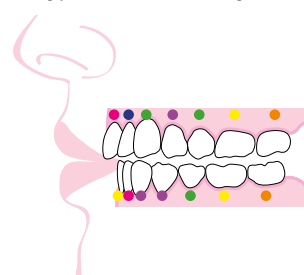

Bc. Kateřina Hořejší
Dentálna hygienička

„Výuka správnej techniky čistenia chrupu u detí je nesmierne dôležitá nielen pre odstránenie zubného povlaku, ale predovšetkým pre upevnenie správnych návykov, ktoré musíme pestovať už od najútlejšieho veku. Philips Sonicare dosiahne efektívne odstránenie zubného povlaku a zároveň je pre deti sofistikovanou motivačnou pomôckou.“

¹ BROUKAL Z., MERGLOVÁ V., KOBEROVÁ IVANČÁKOVÁ R., DUŠKOVÁ J.
a KAIFEROVÁ J. Doporučení a postupy v prevenci zubního kazu u dětí a mládeže.
Praha, 2016.

Tipy a rady rodičom

- Pamätajte, že zubný kaz je infekčné ochorenie.
- Z každodenného čistenia si urobte rituál. Čistite si zuby spoločne, minimálne do 10 rokov dieťaťa. Pomáhajte pravidelne dieťaťu s čistením.
- O medzizubné priestory sa starajte denne už od najútlejšieho veku dieťaťa.
- Pokiaľ ste si nie istý, či sú zúbky čisté a bez baktérií, kúpte si vo svojej lekárni povlakové tabletky, ktoré zvyškový povlak zafarbia.
- Naučte deti piť čistú vodu. Po večernom čistení už nič iné nepodávajte.
- Navštevujte so svojimi deťmi zubného lekára každých 6 mesiacov a nezabudnite na dentálnu hygieničku.
- Nezabúdajte deťom vymeniť hlavicu na kefke každé 3 mesiace za novú. S dĺžkou používania sa efektívnosť čistenia znižuje.



ZÁRUKA
90
dní vrátenia
peňazí

Viac informácií nájdete na
www.philips.sk/detskakefka
[instagram.com/philipssonicarecz/](https://www.instagram.com/philipssonicarecz/)



© 2021 Philips Oral Healthcare, Inc. Všetky práva sú vyhradené.
PHILIPS a emblém Philips sú ochranné známky spoločnosti KPEV.
Sonicare a logo Sonicare sú ochranné známky spoločnosti Philips Oral
Healthcare alebo KPEV.



Interaktívna aplikácia

Technológia Bluetooth® prepojuje kefkou so zábavnou aplikáciou. Postavička roztomilého Sparklyho motivuje deti k lepšiemu a dlhšiemu čisteniu.



Rodičia môžu sledovať frekvenciu a dobu čistenia a odmeniť deti za ich výsledky.



Sťahujte zadarmo



Efektívne a šetrné čistenie

Rozvoj správnych a účinných návykov čistenia zubov u detí vytvára základ pre zdravie ich ústnej dutiny na celý život.



Sonická technológia

šetrno odstraňuje povlak vďaka vysoko frekvenčnému stieraciemu pohybu.



Pogumovaná hlavica

a mäkké vlákna chránia rastúci detský chrup.



Hlavica For Kids Mini

– od 3 rokov
– dostupná aj vo veľkosti Standard od 7 rokov



Dva nastaviteľné režimy

od 3 rokov: extra jemný režim
od 7 rokov: jemný režim



Časovač KidTimer

v režime od 3 rokov pozvoľne zvyšuje dobu čistenia z 1 na 2 minúty. V režime od 7 rokov je nastavený na 2 minúty.



KidPacer znelka

učí deti rozvrhnúť čistenie na 4 úseky chrupu.



Ergonomická rukoväť

vedie k správnejmu úchopu a zjednodušuje manipuláciu s kefkou deťom i rodičom.



8 vymeniteľných samolepiek,

vďaka ktorým si deti môžu vytvoriť vlastný dizajn kefy.



Zodpovednosť rodičov

S detskou sonickou kefkou by mali pracovať aj samotní rodičia. S nácvikom správnej techniky čistenia najlepšie poradí dentálna hygienička či zubný lekár.



Dostupné
v ružovej
a tyrkysovej
farbe



Tip: Pokiaľ nemôžete udržať pozornosť dieťaťa, skúste si čistiť zuby navzájom – vy dieťaťu, dieťa vám.



Kefky v ringu: Boj o čisté zúbky

Jedinečné športové stretnutie! V jednom rohu manuálna kefka, v druhom **Philips Sonicare For Kids!** Dvaja majstri gramovej váhy! Ktorý z nich deťom odstráni viac zubného povlaku, a s ktorým si vydržia čistiť zuby dlhšie? To zistíte už o chvíľu. A pamätajte – **vítazom môžu byť len zdravé zuby!**



Ako dlho si s ňou deti vydržia čistiť zuby?



Manuálna zubná kefka

Po dvojtýždňovom domácom používaní priemerne 83 sekúnd.



Philips Sonicare For Kids

Po dvojtýždňovom domácom používaní v priemere 122 sekúnd.

0:1

MANUÁLNA
ZUBNÁ
KEFKA



PHILIPS
SONICARE
FOR KIDS

Za ako dlho zvládne kvalitne vyčistiť detský chrup?



Manuálna zubná kefka

V závislosti od typu a mäkkosti kefy môže byť pre skutočne perfektné vyčistenie zubov a dasien potrebná doba až okolo 10 minút.



Philips Sonicare For Kids

Vďaka 500 sterom za sekundu je vyčistenie zubov a dasien vysoko efektívne už po prvom kole dvojinútového čistenia.

0:2

MANUÁLNA
ZUBNÁ
KEFKA



PHILIPS
SONICARE
FOR KIDS



Vítazom je Philips Sonicare For Kids