

Čistěte chytřeji

Poradte se se svým zubním lékařem nebo dentální hygienistkou o vhodném kartáčku a hlavici přímo pro vás.



Jak správně čistit

Jednoduché ovládání, špičková péče.



Polohování kartáčku
Kartáček polohujte tak, aby vlákna směřovala šikmo pod dásně. Na kartáček příliš netlačte.



Z jednoho zubu na druhý
Pomalů posouvejte kartáček z jednoho zubu na druhý. Nechte kartáček čistit každou plošku zubu alespoň 2 vteřiny.



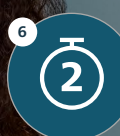
Vnitřní plochy
Stejným pohybem nezapomeňte čistit i vnitřní plošky zubů.



Kousací plochy
I kousací plochy čistěte pomalým posouváním kartáčku.



Zadní zuby
Ujistěte se, že čistíte poslední stoličky.



Délka čištění
Celý chrup čistěte minimálně 2 minuty tak, aby byly zuby perfektně hladké.

100% kompatibilita kartáčkových hlavice

Různé typy kartáčkových hlavice vyhovují rozdílným a individuálním potřebám pacientů. Požádejte svého zubního lékaře či dentální hygienistku o pomoc s výběrem vhodné hlavice.

Všechny kartáčkové hlavice jsou kompatibilní se všemi modely kartáčků Philips Sonicare od 3. generace.

For Kids Standard • pro děti od 7 let	For Kids Mini • pro děti od 3 let	W2 Optimal White • odstranění pigmentací • leštění • v průběhu bělení zubů • běžné čištění	i Intercare • mezerovitý chrup • parodontitida • otevřené mezizubní prostory	G3 Premium Gum Care • citlivost při zánětu dásní a parodontitidě • viklavost zubů • defekty skloviny • citlivé zubní krčky	A3 Premium All-in-One Naše nejefektivnější hlavice • nadměrné množství plaku • parodontitida • důkladné čištění • pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění	C3 Premium Plaque Defense • parodontitida • odhalené kořeny • důkladné čištění • pro pacienty, kteří neovládají správnou techniku čištění	S2 Sensitive • přechod z manuálního kartáčku na Sonicare • afty, opary • citlivé dásně a krčky • po chirurgických zákrocích
Děti		Pigmentace	Parodontitida	Vyzrálý plak	Začátečníci a citlivost		



Co musíte udělat, abyste získali 90 dní záruky vrácení peněz?

Zaregistrujte jakýkoli sonický kartáček nebo přístroj mezi-zubní hygieny Philips Sonicare na www.philips.cz/myphilips, a to nejpozději do 30 dnů od nákupu.

V případě, že chcete produkt vrátit, tak nejpozději do 90 dnů od nákupu odešlete žádost pro vrácení výrobku prostřednictvím webového formuláře na www.philips.cz/c-e/mbg.

Výrobek lze vrátit pouze nepoškozený, v původním obalu, se všemi doplňky a s kopií dokladu o nákupu.

Výrobek nelze vrátit přímo na prodejně, vždy je třeba za tímto účelem vyplnit webový formulář.

Do této akce jsou zařazeny sonické kartáčky a přístroje mezi-zubní hygieny. Detailní informace o podmínkách akce, o konkrétních modelech, které jsou do akce zařazeny, a o délce trvání akce naleznete na www.philips.cz v sekci Akce.

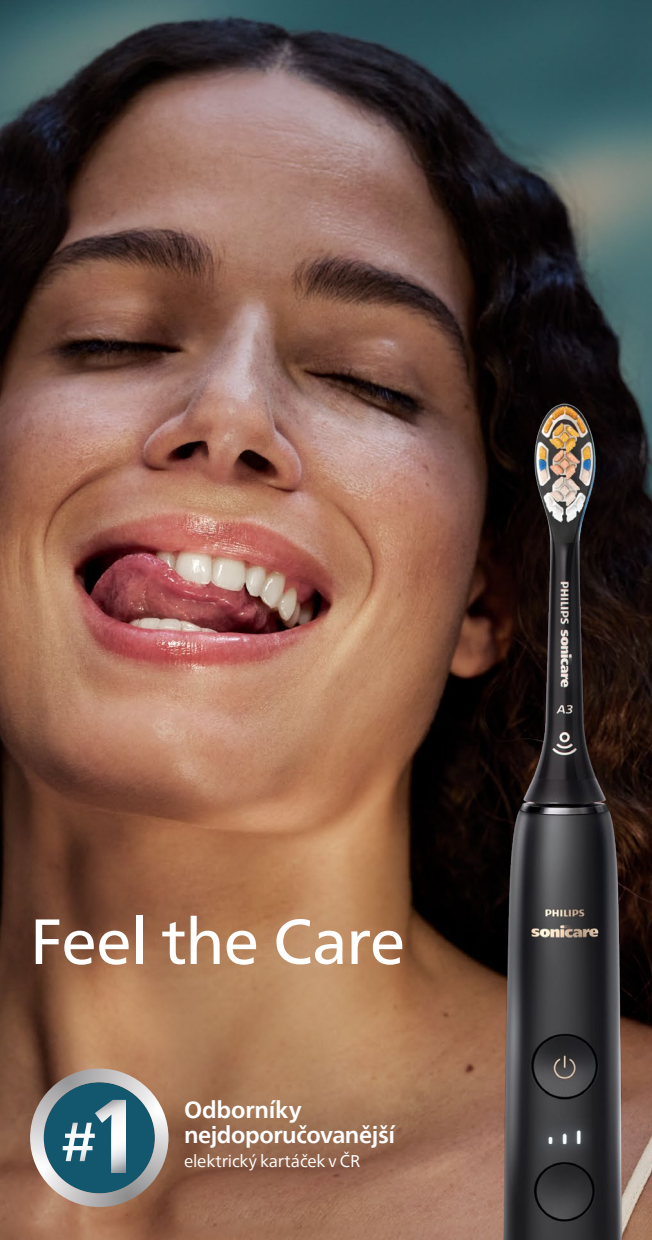
Zaregistrujte se a získajte exkluzivní nabídky

- Promoakce a kupóny
- Nové výrobky
- Tipy a triky

www.philips.cz/myphilips

© 2025 Philips Oral Healthcare, Inc. Veškerá práva vyhrazena. PHILIPS a emblém Philips jsou ochranné známky společnosti KPEV. Sonicare a logo Sonicare jsou ochranné známky společnosti Philips Oral Healthcare anebo KPEV. Portfolio produktů.

PHILIPS sonicare



Feel the Care

#1 Odborníky nejodporovanější elektrický kartáček v ČR

Ústní sprcha Power Flosser

Důkladná a pohodlnější péče o dásně, mezizubní prostory a rovnátka.

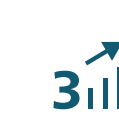
-  **Unikátní tryska QuadStream** rozděluje proud vody z jednoho do čtyř a zvětšuje ošetřovanou plochu.
-  **Pulse Wave:** pro pohodlné použití a řádné čištění všech mezizubních prostor.
-  **4 režimy:** Clean, Deep Clean+, Sensitive, Massage
-  **10 nastavení intenzity**

Je klinicky prokázáno, že Power Flosser je při odstraňování mezizubního plaku účinnější než mezizubní nit.



Philips Sonicare DiamondClean 9400

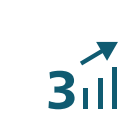
Pomáhá předcházet častým chybám při čištění.

-  **2 hlavice:** G3 Premium Gum Care, A3 Premium All-in-One
-  **4 režimy:** Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+
-  **3 nastavení intenzity:** nízká, střední, vysoká
-  Kontrolka výměny hlavice
-  Možnost propojení s aplikací pomocí Bluetooth (plná verze)
-  Sklenička s indukčním nabíjením a nabíjecí cestovní pouzdro
-  Pokud při čištění příliš tlačíte, **tlakový senzor** Vás na to upozorní a ochrání tak Vaše zuby a dásně. **Polohový a pohybový senzor** pro správnou techniku čištění.



Philips Sonicare DiamondClean 9000

Moderní design a oslnivé výsledky.

-  **1 hlavice:** A3 Premium All-in-One
-  **4 režimy:** Clean, White+, Gum Health, Deep Clean+
-  **3 nastavení intenzity:** nízká, střední, vysoká
-  Kontrolka výměny hlavice
-  Možnost propojení s aplikací pomocí Bluetooth (odlehčená verze)
-  Sklenička s indukčním nabíjením a nabíjecí cestovní pouzdro
-  Pokud při čištění příliš tlačíte, **tlakový senzor** Vás na to upozorní a ochrání tak Vaše zuby a dásně.



Philips Sonicare 7100, 6500

Magnetický adaptivní systém přizpůsobuje čistící výkon i v zadních úsecích.

-  **2 hlavice:** G3 Premium Gum Care, S2 Sensitive*
-  **4 režimy:** Clean, White, Sensitive, Gum Health*
-  **3 nastavení intenzity:** nízká, střední, vysoká
-  Kontrolka výměny hlavice
-  Možnost propojení s aplikací pomocí Bluetooth
-  Nabíjecí cestovní pouzdro
-  Optické snímání tlaku je nyní ještě přesnější. Pokud na kartáček příliš tlačíte, **senzor se rozblíká**, zavibruje a sníží intenzitu.



* Platí pro model Philips Sonicare 7100. Model Philips Sonicare 6500 obsahuje 1 hlavici S2 Sensitive a disponuje 3 režimy (Clean, White, Sensitive).

Philips Sonicare 6100

Extra jemná péče o zuby a dásně.

-  **1 hlavice:** S2 Sensitive
-  **2 režimy:** Clean, Sensitive
-  **3 nastavení intenzity:** nízká, střední, vysoká
-  Kontrolka výměny hlavice
-  Praktické cestovní pouzdro*
-  Optické snímání tlaku je nyní ještě přesnější. Pokud na kartáček příliš tlačíte, **senzor se rozblíká**, zavibruje a sníží intenzitu.



* Neplatí pro model HX7406/01.

Philips Sonicare 5300

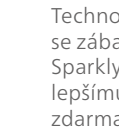
Pomáhá s odstraněním pigmentací.

-  **1 hlavice:** W2 Optimal White
-  **1 režim:** Clean
-  **2 nastavení intenzity:** nízká, vysoká
-  Kontrolka výměny hlavice
-  Pokud při čištění příliš tlačíte, **tlakový senzor** Vás na to upozorní a ochrání tak Vaše zuby a dásně.



Philips Sonicare for Kids

Podporuje správnou techniku čištění zubů u dětí.

-  Technologie Bluetooth® propojuje kartáček se zábavnou aplikací. Postavička roztomilého Sparklyho motivuje děti k samostatnému, lepšímu a delšímu čištění. Aplikace ke stažení zdarma na AppStore a Google play.
-  **2 hlavice:** For Kids Mini, For Kids Standard
-  **2 režimy:** od 3 let, od 7 let
-  **Časovač KidTimer** s melodií
-  8 vyměnitelných samolepek
-  Aplikace pro děti



NOVINKA