


PHILIPS

LUMEA


IPL HAIR REMOVAL 9900 PRO

BRC332, BRC344

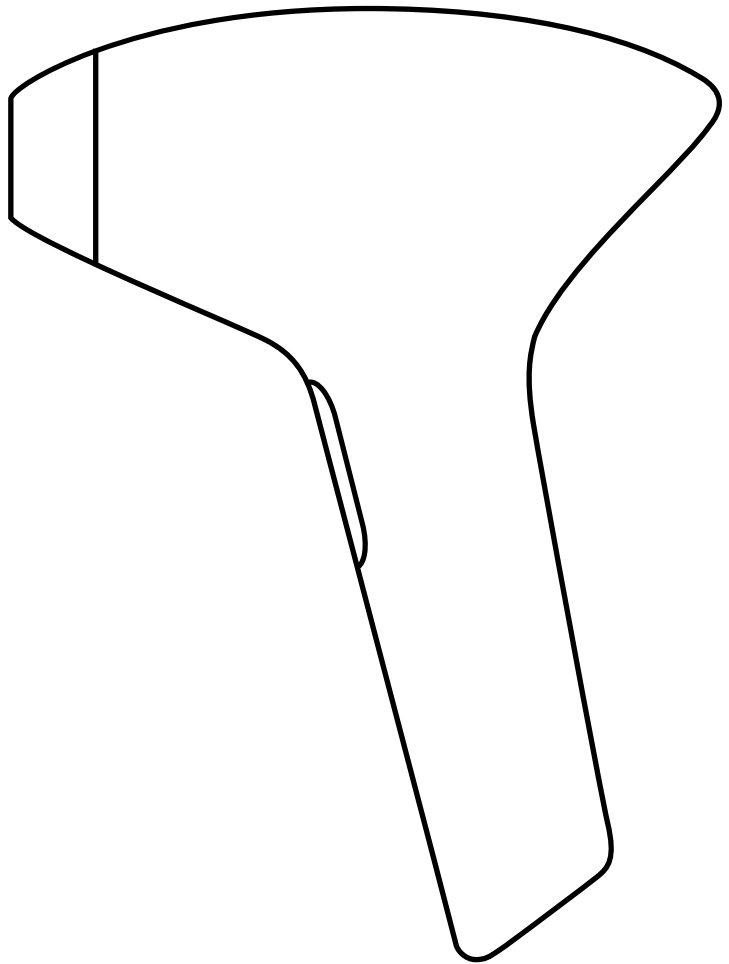

Skin tones - Suitable
Teints de peau - Compatibles

Unsuitable
Non compatibles

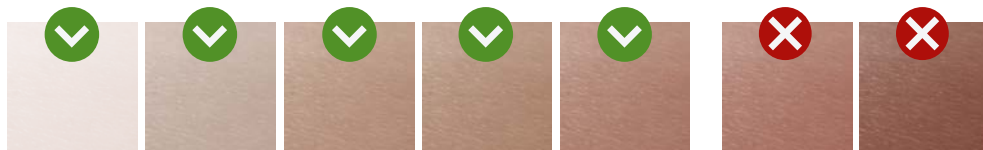

Fair
Pâle

Light
Clair

Beige

Light
brown
Brun
clair

Medium
brown
Brun
moyen

Dark
brown
Brun
foncé

Dark
Foncé

Body hair colors - Suitable
Couleurs de poils - Compatibles

Unsuitable
Non compatibles




Dark
blond
Blond
foncé

Brown
Brun

Dark
brown
Brun
foncé

Black
Noir

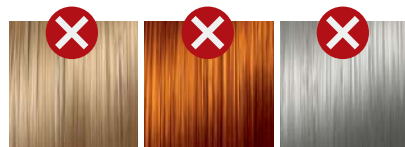

Light
blond
Blond
clair

Red
Roux

White/
Grey
Blanc/
Gris

English	5
Français	42

Chapters

Welcome to Lumea	6
Indications for use	6
Important information for safety	7
Contraindications	7
Warnings	8
Cautions	10
Risks and benefits of using Lumea	11
Potential side effects of IPL treatment	12
What is IPL?	15
Lumea overview	16
SenseIQ Pro technology	17
Philips Lumea IPL app	18
Pair your Lumea and smartphone	18
Explanation of the Bluetooth indicator light colors	19
Attachments	20
Treatment modes	21
Your treatment guide	22
Prepare for treatment	23
Test your skin	24
Perform a treatment	26
Clean and store	28
After treatment	29
Plan your next treatments	30
Troubleshooting	31
Additional information	34

Welcome to Lumea

Achieve gentle, fast and effective hair reduction with Lumea. You can conveniently use Lumea in the comfort of your home. Are you ready to get started?



Scan with your phone camera, QR app, or visit www.philips.com/myIPL

Note: In this user manual, Lumea refers to the Philips Lumea IPL 9900 Pro Series.

Indications for use

Philips Lumea IPL is indicated for the removal of unwanted hair for a single user. It is also indicated for the permanent reduction in hair regrowth, defined as the long-term, stable reduction in the number of hairs regrowing when measured at 6, 9 and 12 months after the completion of a treatment regime.

Is Lumea suitable for you?

Philips Lumea is not suitable for everyone. Check the skin tone and hair color tables at the start of this user manual and read the important safety instructions carefully to see if Lumea is suitable for you.

Philips Lumea can be used by persons in the age range of 18-65 years with fair up to medium brown skin tones, and naturally dark blond, brown, dark brown and black hair.

Unsuitable body hair colors: Treatment with Lumea is not effective if you have light blond, grey, red or white hairs as hairs with these colors do not absorb enough light.

Unsuitable skin tones: You cannot use Lumea if you have dark brown to dark skin tones as these skin tones absorb light more easily which could result in pain, skin redness or burns.

Philips Lumea, attached with a face attachment, can be used on the female face (below the cheekbone). Philips Lumea, attached with a body or precision attachment, can be used on the body (below the neckline). Philips Lumea is a handheld device intended for home use.

Important information for safety

 **ALWAYS** read and follow the instructions carefully to fully benefit from the use of your Lumea and to minimize the risk of injury, skin reactions and side effects. Make sure to save these instructions for future reference.

Contraindications

- **DO NOT** use Lumea if you have had chemotherapy or radiation therapy in the last 3 months.
- **DO NOT** use Lumea if your sensitivity to pain is reduced after using medication (e.g. painkiller, numbing cream) or due to a medical condition.
- **DO NOT** use Lumea if you have a dark brown or darker skin tone.
- **DO NOT** use Lumea if you are pregnant, lactating or breastfeeding.
- **DO NOT** use Lumea if you are under the age of 18 years or above 65 years.

Light sensitivity:

- **DO NOT** use Lumea if your skin is extra sensitive to light, for example if you:
 - have a sun allergy;
 - are taking certain medication or herbal remedies. Check the instruction leaflet inside your medication package to see if what you are taking can cause increased sensitivity to sunlight.

Medical conditions:

- **DO NOT** use Lumea – or consult your doctor first – if you have:
 - epilepsy with flashlight sensitivity;
 - an active skin cancer or a history of skin cancer;
 - a skin pigmentation disorder such as vitiligo;
 - a history of poor wound healing;
 - an immunocompromised state caused by a disease such as AIDS or by immunosuppressive drugs;
 - a history of collagen disorders, including a history of keloid scar formation.

Warnings

Thermal safety - To avoid pain, skin redness or burns

- **DO NOT** use Lumea on lips, nostrils, ears, scalp, nipples, labia minora, perineum, around the anus, penis, or scrotum. These areas are highly sensitive and have thinner and darker skin.
- **DO NOT** touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.
- **DO NOT** use Lumea on an active skin condition, as this may worsen the condition or cause additional pain, skin redness or burns. Skin conditions may include:
 - Active bruises, rashes, sores, open wounds, scars or sunburns. Wait until the injury is completely healed before resuming treatment.
 - Active skin irritations, inflammations or infections. Wait until the skin is completely recovered before resuming treatment.
 - Damaged skin after using depilatory (hair removal) creams. Wait at least 2 days before resuming treatment.
 - Damaged skin after using skin peeling, (micro)dermabrasion or skin rejuvenation methods. Wait at least 1 week before resuming treatment.

Eye safety - To avoid eye damage

- **DO NOT** use Lumea close to or on the eye, eyelid or eyebrow. Use Lumea only below the cheekbones.

Electrical safety - To avoid electrical shock

- **DO NOT** use Lumea in wet surroundings (e.g. in the bathroom or near a shower or swimming pool).
- **DO NOT** let water run into Lumea.
- **DO NOT** expose Lumea to large temperature changes, especially in a high humidity environment, without giving Lumea time to acclimatize for 30 minutes to the ambient temperature of the room in which it will be used (see 'Technical specifications').
- **DO NOT** attempt to repair or modify Lumea. Any repairs or alterations made by the user may void the warranty and compliance of Lumea. Changes or modifications made to Lumea not expressly approved by Philips may void the user's authority to operate this equipment.
- **DO NOT** touch any inner part of a damaged Lumea or the power adapter.
- **DO NOT** use any other attachments or power adapter than supplied with Lumea.
- **ALWAYS** check if the voltage indicated on the power adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the equipment.

General safety - To avoid serious injury

- **ALWAYS** check Lumea before you use it. Do not use Lumea or the power adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.
- **ALWAYS** unplug Lumea, including the power adapter, after use and in case of a power failure to prevent damage to the equipment.
- **DO NOT** use Lumea directly over or close to any active implants such as a:
 - pacemaker;
 - neurostimulator;
 - insulin pump.Check the active implants' manual for the safe distance to other electronic devices.
- **DO NOT** wear the power adapter cord around your neck to avoid strangulation.
- **DO NOT** use Lumea if you have reduced physical, sensory or mental capabilities as this could result in incorrect usage.
- **DO NOT** use Lumea, including the power adapter cable, within 12 inches (30 cm) of Wi-Fi and/or Bluetooth devices (portable RF communication equipment) or smartphones as it may cause Lumea to malfunction.
- **DO NOT** use Lumea next to or stacked with other equipment. This could result in improper operation.
- **DO NOT** leave Lumea unattended when it is turned on to avoid the risk of fire.
- **KEEP** Lumea out of the reach of children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the equipment.
- **ALWAYS** check that the power adapter is connected to a properly installed and working power outlet to avoid the risk of fire.

Cautions

Thermal safety - To avoid pain, skin redness or burns

- **DO NOT** start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sun or tanning bed) or within 2 weeks after artificial tanning (creams, sprays or pills). Do a skin test before starting/resuming your treatment, see section 'Test your skin'.
- **DO NOT** use Lumea with the body or precision attachment on the upper lip or other areas of the face. Only use the face attachment as it has an extra integrated filter for treatment on face below the cheekbones.
- **DO NOT** continue the treatment if you experience pain or a skin reaction that lasts longer than 24 hours. Reduce the light intensity setting or stop using Lumea.
- **DO NOT** expose your skin to sunlight unprotected when using Lumea. During the entire IPL treatment period, and especially in the first 48 hours after treatment, protect your skin from sunlight with clothing or apply sun-blocking products of not less than SPF50 on the non-covered treatment areas.
- **DO NOT** flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase performance.
- **DO NOT** use Lumea on skin that is darker than the surrounding treatment area. These highly pigmented skin areas can lead to excessive heating of the skin. Darker areas may include:
 - dark spots such as moles, warts, large freckles, birthmarks, age spots or dark veins;
 - marks added to the skin, such as tattoos or (permanent) makeup.
- **DO NOT** use Lumea on male neck and face. The hairs in these areas have different characteristics.
- **DO NOT** mark your skin/treatment area with any type of pencil or pen.
- **DO NOT** use Lumea if there is any lotion, gel or visible hair on your skin or on the device. Only treat skin that is clean, dry and hair-free. Make sure Lumea is clean and dry as well.
- **DO NOT** use Lumea if the light exit window or window frame is damaged. Check Lumea for damage before use.
- **DO NOT** subject Lumea to heavy shocks to avoid risk of damage to the lamp.
- **DO NOT** treat more often than once every 2 weeks.

Eye safety - To avoid eye discomfort

- **ALWAYS** use Lumea in a well-lit room. Your eyes are more sensitive to stray light in darker conditions.

General safety - To avoid injury

- **DO NOT** use Lumea over vascular skin disorders (e.g. varicose veins).
- **ENSURE** that the power adapter can be easily disconnected from the electrical outlet in case of a malfunction. The power adapter is considered a disconnection device.
- **DO NOT** share Lumea with other persons for hygienic reasons. Lumea is intended for single person use only.

Risks and benefits of using Lumea

The safety and effectiveness of Lumea was tested in a clinical study involving 94 women (aged 18-64 years). None of the subjects left the study early due to problems associated with the use of Lumea.

Out of the 94 subjects, 31 experienced one or more mild and transient side effects: pain (26), itchiness (8), redness (5), folliculitis (2), burning sensation (1), superficial crusting (1) and swelling (1).

Results after 4 bi-weekly treatments:

- 75 women received treatments on their upper lip and achieved up to 61.1 % hair reduction.
- 76 women received treatments on their armpit area and achieved up to 60.6 % hair reduction.
- 77 women received treatments on their bikini area and achieved up to 61.9 % hair reduction.
- 76 women received treatments on their legs and achieved up to 93.1 % hair reduction.

35 women completed 8 additional touch-up treatments (once every 4 weeks) and achieved up to 67.0 % hair reduction over all treated areas.

Potential side effects of IPL treatment

The table below lists known side effects that may occur following treatment with IPL devices.

Common side effects	What is observed?	How long does it last and how can it be helped?
Pain/uncomfortable sensation	Local pain or discomfort on the treated area during or after treatment	If your treatment feels painful/uncomfortable, reduce the light intensity setting or stop using Lumea. Pain or discomfort after treatment can last up to 1 week.
Itching sensation	Perceived itching in the treated area	These reactions typically resolve within hours but can last up to 1 week. You can cool the area with a cold pack.
Warm/burning sensation	Local warm or burning feeling on the treated area	
Skin redness (erythema)	Redness without a clear edge in the treated area	This reaction typically resolves within hours but can last up to 1 day. You can cool the area with a cold pack. Skin redness lasting longer than 1 day is an uncommon side effect of IPL and a sign of a skin burn. Wait with the next treatment until the skin has healed completely. Make sure you use a lower light intensity for next treatments.

Uncommon side effects	What is observed?	How long does it last and how can it be helped?
Swelling (edema)	Swelling around hair follicles appears as bumps in the treated area, sometimes accompanied by redness.	This reaction typically resolves within hours but can last up to 1 week. You can cool the area with a cold pack.
Skin dryness	Skin appears rough and flaky in the treatment area.	This reaction typically lasts between 1 day and 1 month. You can apply a non-scented moisturizer to the treated area.
Burns and blisters	Extensive skin redness, swelling and possibly blisters, accompanied by pain	These reactions can last between 1 day and 1 month and may require medical treatment or medication. We advise you to consult a doctor.
Superficial crust	A sharply defined brownish and crusty area that can occur on darker skin tones	Wait with the next treatment until the skin has healed completely. Make sure you use a lower light intensity for next treatments.
Folliculitis	Swelling and redness around hair follicles, accompanied by itching and/or pustule formation	Folliculitis may require medical treatment or medication. We advise you to consult a doctor. Folliculitis may last several days up to several weeks. Wait with the next treatment until the skin has healed completely. Make sure you use a clean razorblade when shaving before treatment.
Pigmentary changes/skin discoloration	Skin of the treated area appears darker or lighter than the surrounding skin.	This reaction typically lasts several weeks and, in rare cases, up to a year. Do not treat areas with pigmentary changes/skin discolorations until your skin has regained its normal skin tone. Make sure you use a lower light intensity for next treatments.


Uncommon side effects	What is observed?	How long does it last and how can it be helped?
Skin infection	Appears as inflamed skin. This is a secondary effect which may occur after a skin burn or other injuries.	Skin infection requires medical treatment or medication. We advise you to consult your doctor. Do not treat over skin infections.
Scarring	A scar may occur as a secondary effect after a burn or skin infection.	It is important to consult your doctor if you have a burn or folliculitis to prevent formation of a scar. Do not treat over scar tissue.
Herpes outbreak	Small blisters or open sores, typically near the lip or genitals, experienced by users infected with Herpes Simplex virus	An outbreak typically lasts for several days to weeks and can be shortened by taking anti-viral medications prescribed by your doctor.
Headache and afterimages	Sensitive persons may experience headache or afterimages when the light flash reaches the eye.	These reactions typically last between minutes to several hours. To prevent them, make sure you use Lumea in a well-lit room and press the device firmly onto your skin before flashing.

Hair removal by Intense Pulsed Light can cause increased hair growth in some individuals. Body areas at risk include women's jawline, neck and areas above the cheekbone and men's upper back and shoulders. Based upon current data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern, and South Asian heritage.

What is IPL?



Scan the QR code to watch a short video.

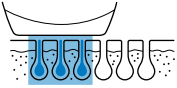


1. IPL stands for Intense Pulsed Light.

Gentle pulses of light are absorbed by the roots of your hair.



2. These pulses of light cause the hair follicles to go into a resting phase.

The hair sheds naturally, and growth is reduced for a certain number of months.

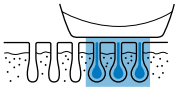


3. Hair does not grow continuously: it grows in cycles.

Not all the hairs in one area are growing at the same time. Since IPL is only effective on hair that is actively growing, it is important to repeat treatments as indicated.

Lumea overview



Scan the QR code to watch a short video.

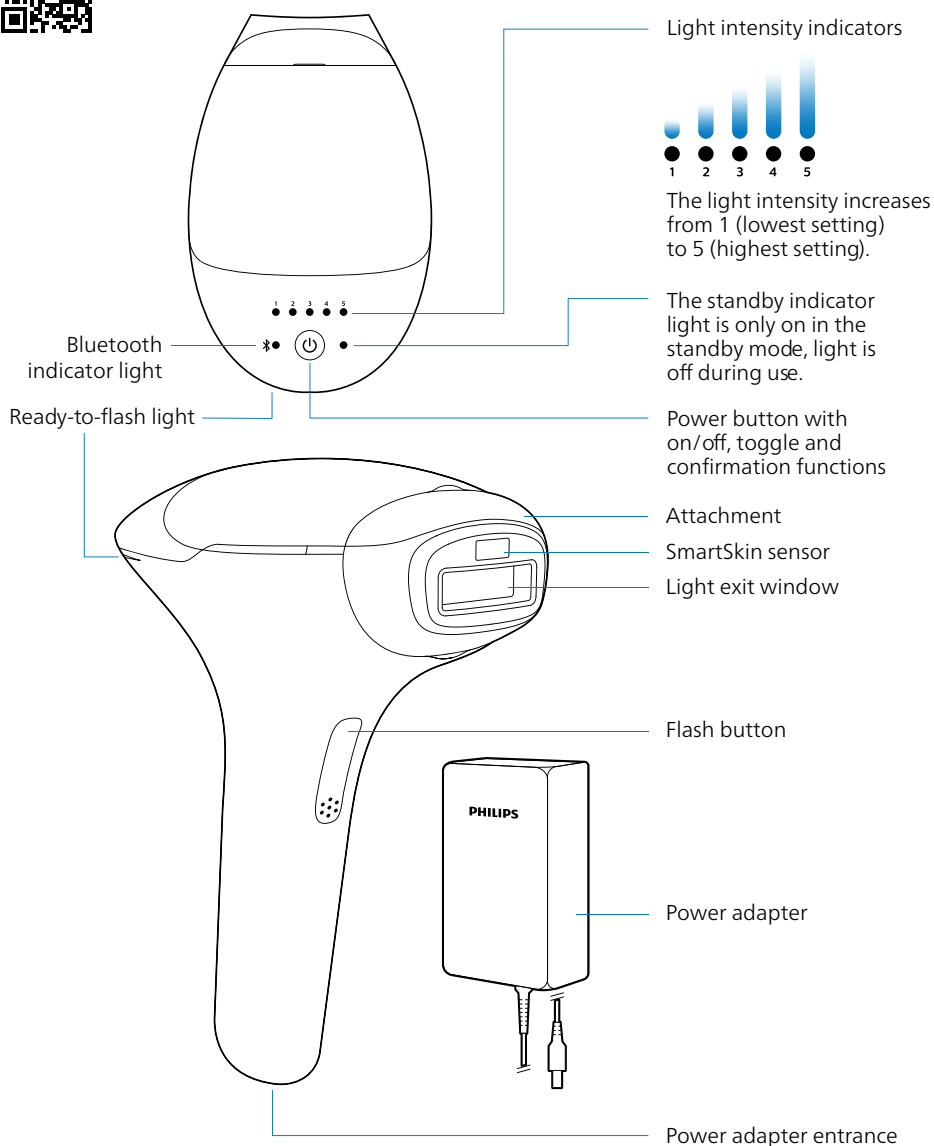


Not shown:

- Cleaning cloth
- Beauty bag or premium beauty pouch, or luxury beauty box

SmartSkin sensor

SmartSkin sensor determines your skin tone and will help you select a comfortable setting by lighting up one of the light intensity indicators on top of your device.

It also automatically helps you prevent treating areas of your skin that are too dark for safe use.

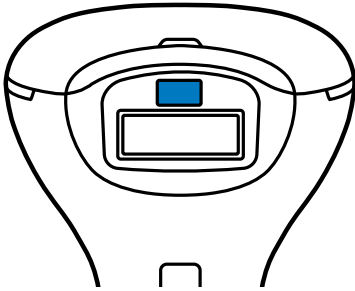

Ready-to-flash light

The white ready-to-flash light will let you know when you have good skin contact and your Lumea is ready to flash.

If the ready-to-flash light blinks orange, your skin in this body area is too dark to treat. Treat a lighter colored body area.



SenseIQ Pro technology



SenseIQ Pro
Your personal coach

SenseIQ Pro technology for a personalized hair removal treatment, our signature combination of:

- Improved smart sensors that measure your skin tone and support you in selecting a setting for a comfortable treatment.
- Unique attachments designed for each curve of your body.
- Connected Philips Lumea IPL app with real-time guidance giving confidence of efficient and precise skin coverage.

Philips Lumea IPL app



Benefits of connecting your Lumea to the app

It is recommended to connect your Lumea with Philips Lumea IPL app to receive:

- Easy onboarding and intuitive step-by-step coaching for a personalized treatment plan tailored to your needs.
- Real-time skin contact guidance for device to align with your curves, even in those hard-to-reach areas.
- Real-time motion guidance with audio and visual feedback enables you to treat with precision.
- Personalized post-treatment reports and reminders for empowering you to feel confident and on track from the first use.

More information is available at: www.philips.com/myLumea

Before you start the set-up procedure, make sure you have a good Wi-Fi or mobile internet connection.

Compatibility

The app is compatible with a wide range of iPhone and Android™ smartphones.

Pair your Lumea and smartphone



1. Download the app to your smartphone

Search the keywords 'Philips Lumea IPL' in the App Store or Google Play Store, or scan the QR code.


2. Launch the app

3. Select your device by scanning the barcode on your product pack


4. Create your account by following the on-screen instructions

5. Make sure that Bluetooth on your smartphone is switched on



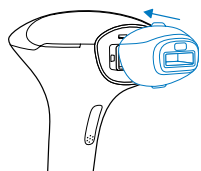

6. Attach any attachment to your Lumea device

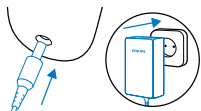


7. Plug in

Plug in Lumea to the power outlet.



8. Press the power button

Press the power button to turn on your Lumea.

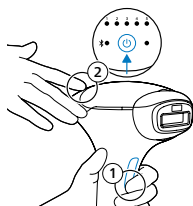

9. Pair your Lumea by following the instructions in the app

With your Lumea turned on, hold down the flash button (1), then press the power button (2) until the Bluetooth indicator light blinks blue slowly, and your Lumea is ready to pair with your phone. Continue by following the instructions in the app. The Bluetooth indicator turns white when your Lumea is successfully connected.



Note: Make sure that your phone's Bluetooth is switched on when using the app so that your IPL device can transfer and update your IPL data in the app. If you have questions about why your IPL data is collected, be sure to review the app's Privacy Statement.

Once paired, Lumea and the app connect automatically when the app is open.

Explanation of the Bluetooth indicator light colors

Color	Explanation
No color (the Bluetooth indicator light is off)	Lumea is on standby.
Blue, blinks slowly	Lumea is ready to pair with a smartphone.
White, continuous	Bluetooth is connected.
White, blinks slowly	Bluetooth is paired, and Lumea is connecting and searching for the app connection.
Purple	Update of the App is in progress. Please wait for the update to finish.
Yellow	Lumea is in error mode after the firmware update.

Attachments



Scan the QR code to watch a short video.

Your Lumea comes with different attachments you can use on different body areas. Select the attachment that is intended for the area you want to treat.


	Attachment type	BRC332	BRC344
	Body attachment - largest window size; - a curved-in design to effectively cover and treat areas below the neckline.	✓	✓
	Face attachment - smallest window size for precise treatment below the cheekbones; - small, flat design; - extra integrated filter for treatment on the face below the cheekbones. ! DO NOT use Lumea on male neck and face. The hairs in these areas have different characteristics. Tip: Place your tongue between your upper lip and your teeth or puff out your cheeks to make the treatment easier.	✓	✓
	Precision attachment - medium window size; - curved-out design for precise and effective use on the bikini and armpit areas.	✓	
	Precision attachment for bikini - medium window size; - curved-out design for precise and effective use on the bikini area.		✓
	Precision attachment for armpits - medium window size; - curved-out design for precise and effective use on the armpit area.		✓

Treatment modes




Scan the QR code to watch a short video.

Your Lumea has two treatment modes for more convenient use on different body areas.

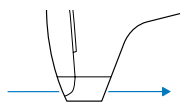

Slide & flash

For larger areas (legs), keep the flash button continuously pressed as you slide Lumea over your skin. Lumea keeps releasing flashes until you release the button or if you lose good skin contact.

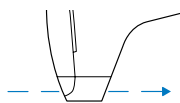

Stamp & flash

For small body areas (bikini, armpit), place Lumea on your skin and press the flash button. Lift Lumea from your skin and place it beside the spot previously treated. Press the flash button again to release another flash.

Your treatment guide

Please read the important safety instructions in the user manual to check if a Lumea treatment is suitable for you, so you can fully benefit from your device.

Before your treatment



1. Prepare for treatment

Remove hair, ensure that your skin is clean and dry




2. Test your skin

Find your comfortable setting




3. Wait 24h for skin reactions

Treatment

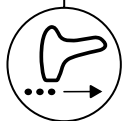

4. Perform a treatment

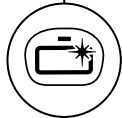

5. Clean and store



6. Plan your next treatments




Scan the QR code and watch our how-to videos for step-by-step guidance on performing a Lumea treatment, along with general videos about your Lumea device.

Prepare for treatment



Scan the QR code to watch a short video.

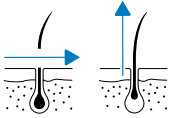

1. Remove hair

Wax, shave or epilate before using Lumea.


Do a treatment before new hair is visible on your skin.

If you choose to wax, wait 24 hours before you use Lumea.



2. Clean and dry skin

No water, oil, cream or body milk should be left on your skin.

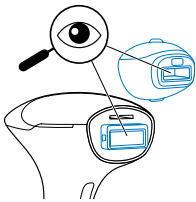

3. Choose the right attachment and check your Lumea for damage and dirt



ALWAYS check Lumea before you use it. Do not use Lumea or the power adapter if it is damaged. Always replace a damaged part with one of the original type.



DO NOT use Lumea if there is any lotion or gel on your skin or on Lumea. Only treat skin that is clean and dry. Make sure Lumea is clean and dry as well.

Test your skin




Scan the QR code to watch a short video.

! DO NOT start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sun or tanning bed) or within 2 weeks after artificial tanning (creams, sprays or pills).

Before your first treatment on each body area or after exposing your skin to sunlight unprotected, test your skin's reaction and find your suitable setting for treatment. It is recommended to use Lumea out of direct sunlight. The sunlight can influence the SmartSkin sensor.


1. Follow the steps in section 'Prepare for treatment'

2. Check your Lumea for damage and dirt

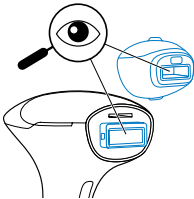


3. Attach the right attachment

Click on the attachment for the area you want to treat.

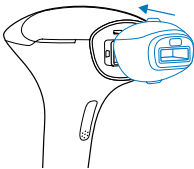

4. Plug in

Plug in Lumea to the power outlet.

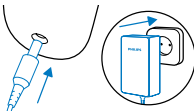


5. Press the power button

The 5 light intensity indicators above the power button will light up continuously from left to right and back, until you place Lumea on your skin.



6. Place Lumea on your skin

It must sit flush against your skin.

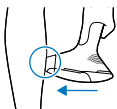



7. Get your light intensity setting

One of light intensity indicators will turn white to indicate the proposed setting for you. The setting is selected automatically after 5 seconds.

Note: If the ready-to-flash light blinks orange your skin may be too dark to treat, please consult chapter 'Troubleshooting'.



8. Find your comfortable setting


Place Lumea back on your skin.

The ready-to-flash light will light up white.



Press the flash button 1 time. If the flash is comfortable, you can increase the setting. If you experience pain, lower the setting. Toggle through the settings by pressing the power button.

Change the setting, move Lumea to the next spot and flash again. Repeat until you find the highest comfortable setting.

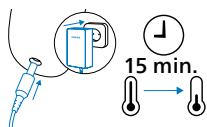


9. Turn off, unplug



DO NOT touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.

Hold the power button for 2 seconds. Unplug your Lumea and the power adapter from the power outlet. Let your Lumea cool down.

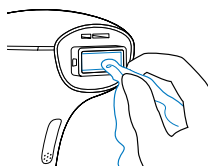

10. Clean all parts of your Lumea after use

It is important to clean all parts of your Lumea. Residue like hair, sweat, or dirt can build up from the flashing process and may cause skin reactions if left uncleaned. Follow the steps in section 'Clean and store'.



11. Wait 24 hours and check your skin for any reactions

If there are no skin reactions after 24 hours, start the treatment with the highest comfortable setting.

If the highest comfortable setting resulted in a skin reaction, choose a lower setting that did not result in any skin reactions.

If you did not test a lower setting, repeat the skin test.

Perform a treatment




Scan the QR code to watch a short video.

Test your skin's reaction before treating a new body area or after exposing your skin to sunlight unprotected.


1. Follow the steps in section 'Prepare for treatment'

2. Check your Lumea for damage and dirt

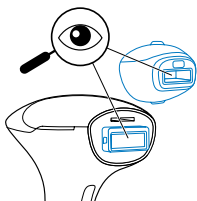

3. Attach the right attachment

Click on the attachment for the area you want to treat.

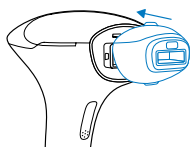

4. Be comfortable

Make yourself comfortable before you start the treatment.

It is recommended to use Lumea out of direct sunlight. The sunlight can influence the SmartSkin sensor.



5. Plug in. Press the power button

The 5 light intensity indicators above the power button will light up continuously from left to right and back, until you place Lumea on your skin.



6. Select setting


Press the power button to toggle through the settings and select your highest comfortable setting that did not result in any skin reactions.



7. Begin treatment

Place Lumea on your skin.

The ready-to-flash light will light up white.

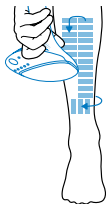


8. Flash. Then move

⚠ DO NOT continue the treatment if you experience pain. Reduce the light intensity setting or stop using Lumea.

DO NOT flash the same spot multiple times during a treatment. The surface of the attachment should overlap the previous spot to make sure you flash the complete skin area, but treating the same area multiple times does not increase performance.


Press the flash button. Move to an adjacent spot and flash again.

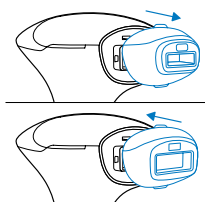

9. Treat another body area

⚠ DO NOT start or resume using Lumea within 4 weeks after exposing your skin to sunlight unprotected (natural sun or tanning bed) or within 2 weeks after artificial tanning (creams, sprays or pills). Do a skin test before starting/resuming your treatment, see section 'Test your skin'.


If you want to treat another body area, make sure you select the right attachment and start again with step 1. If you are treating a body area for the first time or after exposure to sunlight unprotected, make sure you perform a skin test. Wait 24 hours and check your skin for any reactions.

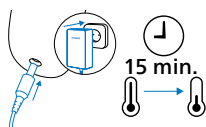

10. Finished. Turn off and unplug

⚠ DO NOT touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.

Hold the power button for 2 seconds. Unplug your Lumea and the power adapter from the power outlet. Let your Lumea cool down.

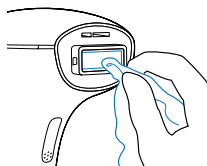

11. Clean all parts of your Lumea after use

It is important to clean all parts of your Lumea. Residue like hair, sweat, or dirt can build up from the flashing process and may cause skin reactions if left uncleaned. Follow the steps in section 'Clean and store'.




12. Schedule your next treatment

Follow the steps in section 'Plan your next treatments'.

Clean and store




Scan the QR code to watch a short video.

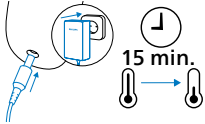

1. Turn off, unplug and cool your Lumea

⚠ DO NOT touch the light exit window during or directly after use, this part becomes very hot. After use, unplug Lumea and the power adapter and let them cool down for 15 minutes before cleaning and storing.

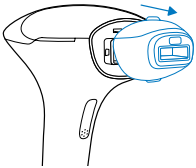

2. Click off the attachment


Gently pull it off.



3. Lightly moisten your Lumea cleaning cloth


⚠ DO NOT use Lumea in wet surroundings.
DO NOT let water run into Lumea.

Dampen the soft Lumea cleaning cloth with a few drops of water.

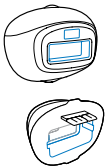


4. Clean the attachments

Clean each part of the attachment you used, including the metal reflectors.

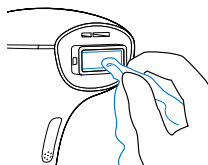


5. Clean the light exit window

Make sure there is no dirt, residue or moisture left on the surface of the light exit window.

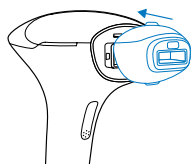

6. Click on an attachment

Make sure the light exit window of your Lumea is protected from damage by clicking on one of the attachments.

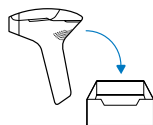

7. Store

Store all parts in the original packaging or in the provided bag, pouch or box in a dust-free and dry place.

After treatment

After use, if you want to apply lotions, creams, deodorants, moisturizers or cosmetics to the treated areas, always check the instruction leaflet of the product you want to apply to make sure it is suitable for the condition of your skin at that moment.

Plan your next treatments



Scan the QR code to watch a short video.

Follow the indicated treatment schedule.

Use the Philips Lumea IPL app to plan your next treatments and set reminders.



24 hours

Test phase

Before your first treatment on each body area or after exposing your skin to sunlight unprotected, do a skin test by following the steps in section 'Test your skin'. Wait 24 hours after the skin test before you start your treatment phase.



Treatment phase: 4 bi-weekly treatments

During the treatment phase which lasts 4 treatments, perform a treatment every 2 weeks.

Perform a treatment within 3 days before or after the planned treatment date during the treatment phase.



Touch-up phase: once every 4 weeks

After the treatment phase, use your Lumea once every 4 weeks to maintain results.

Perform a treatment within 4 days before or after the planned treatment date during the touch-up phase.

Note: If you miss a treatment, consult chapter 'Troubleshooting' for guidance. If you deviate from the treatment schedule, you may not achieve the intended results.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with your Lumea or if you deviate from your treatment schedule. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support, or call 1-888-744-5477 for assistance.

Common problems while using your Lumea:

Problem

My Lumea is not flashing / the ready-to-flash light turns orange and starts to blink.

My Lumea produces a strange smell while flashing.

The light intensity indicators on top of my Lumea are blinking and the ready-to-flash light is orange and blinking.

Solution

1. Your skin may be too dark. Check the skin tone/hair color tables inside the cover of this booklet.
2. Make sure your attachment is (properly) connected to the front of your Lumea.
3. Make sure you have full skin contact for at least 5 seconds. In some areas (sensitive and bony area) it might be difficult to make good skin contact. No light should be able to enter between Lumea and your skin. Try repositioning your Lumea.
4. Make sure you press the flash button on the inside handle to treat an area of your skin.

1. Make sure you have removed all hairs in the area you want to treat, before using your Lumea. Burned hairs can cause smells.
2. Make sure your skin is clean and dry before starting a treatment.
3. Make sure your Lumea and its attachments are clean and dry before starting a treatment. Residue like hair, sweat, or dirt can build up from the flashing process and may cause skin reactions if left uncleaned.

1. Lumea is in error mode. Press the power button for more than 2 seconds, Lumea should go back to standby. Or unplug Lumea from the mains, it should turn off.
2. Wait 5 minutes. Lumea will automatically go back to standby after 5 minutes without help.

Problem

I cannot set up my Lumea and the Philips Lumea IPL app.

Solution

1. The app may not be installed correctly. Please remove the app from your phone and re-download it from the app store. Check that your smartphone's operating system is updated to the latest available version.
2. Make sure that you have plugged Lumea into the power outlet and that the device is turned on.
3. Please note that only one phone with the Philips Lumea IPL app can be connected to your Lumea. Check if another smartphone may already be connected to your Lumea and if the Bluetooth indicator light blinks white slowly. Turn off your Lumea. To disconnect another phone, long-press the power button on your Lumea for more than 10 seconds. Wait until the light blinks 3 times blue before releasing the power button. Then, follow the instructions given in the app.

My Lumea is in error mode after the firmware update, and the Bluetooth indicator light blinks yellow.

Lumea is in error mode.

Please first try to turn the device off, unplug it. Wait a few moments, plug it in and turn it on again. If Lumea is still in error mode, perform a factory reset:

1. Make sure that Lumea is turned off.
2. Make sure that Lumea is plugged in and the power adapter is in the power outlet.
3. Press and hold the power button.
4. The Bluetooth indicator light will be continuously blue for 10 seconds, then it will slowly blink blue a few times. Continue holding the power button for an additional 20 seconds (thus, for a total of 30 seconds).
5. Release the power button.
6. The Bluetooth indicator light will start blinking purple.
7. Wait for the factory reset process to finish, which will take approximately 5 minutes. Do not unplug your Lumea.
8. Lumea will switch on when the factory reset is completed.

I want to perform a factory reset.

1. Make sure that Lumea is turned off.
2. Make sure that Lumea is plugged in and the power adapter is in the power outlet.
3. Press and hold the power button.
4. The Bluetooth indicator light will be continuously blue for 10 seconds, then it will slowly blink blue a few times. Continue holding the power button for an additional 20 seconds (thus, for a total of 30 seconds).
5. Release the power button.
6. The Bluetooth indicator light will start blinking purple.
7. Wait for the factory reset process to finish, which will take approximately 5 minutes. Do not unplug your Lumea.
8. Lumea will switch on when the factory reset is completed.

What to do if you deviate from your treatment schedule:

Phase	Problem	Solution
Treatment phase	Missed treatment. <i>I did my treatment more than 3 days after the originally planned date.</i>	Try to stay closer to your planned treatment date. You can continue with the original planned schedule. You may add one additional bi-weekly treatment to your treatment phase. If you deviate from the treatment schedule, you may not achieve the intended results.
	Last bi-weekly treatment. <i>I finished my treatment phase, but I feel I did not reach the claimed results.</i>	You may choose to add an additional bi-weekly treatment to your treatment phase, but claimed results are based on the indicated treatment schedule and individual results vary.
Touch-up phase	Out of treatment window. <i>I did not treat within 4 days of my scheduled treatment date.</i>	Please follow the correct schedule. If you deviate from the treatment schedule, you may not achieve the intended results. You can continue with the original planned schedule or you may choose to restart the treatment phase, but claimed results are based on the indicated treatment schedule and individual results vary.

Additional information

Full Two-Year Warranty

Philips warrants its products for a specific period of time after the first date of purchase. If the product is purchased in the USA, Philips North America LLC (USA) or, if the product is purchased in Canada, Philips Electronics Ltd., warrants this new product against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase (as evidenced by a valid proof of purchase), and agrees to replace any defective product without charge. Philips will refund the purchase price if it is unable to provide replacement.

Parts that are subject to normal wear and tear, accessories, replacement batteries and consumables such as toothbrush heads, are not covered by the terms of this warranty.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, the affixing of any attachment not provided with the product or loss of parts or subjecting the product to any but the specified voltage.*

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. For more information and in order to obtain warranty service, simply go to **www.philips.com/support**.

NOTE: This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state, province to province or country to country. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion and limitations may not apply to you. This warranty is transferable.

*Read enclosed instructions carefully.

THE WARRANTY DOES NOT COVER THE FOLLOWING:

- Indirect or consequential damages, such as loss of time, loss of data, or loss of income. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.
- Compensation for activities done by yourself, such as regular maintenance, installing firmware updates, or saving data.

THE WARRANTY DOES NOT APPLY:

- If the proof of purchase, model number, serial number, or production date code on the product has been made illegible.
- If the product was purchased as faulty stock.
- If the defect is the result of abuse or excessive use outside the intended purpose.
- If the defect is caused by environmental conditions, connecting peripherals, additional equipment, or accessories (including software) that are not in accordance with the user manual.
- If the unit has been damaged, including but not limited to damage by animals, lightning, abnormal voltage, fire, natural disaster, transportation, or water (unless the user manual expressly states that the product may be rinsed).
- For non-electrical parts, normal wear and tear, accessories, replacement batteries or replacement of consumable parts such as toothbrush heads.
- If the product does not function properly because it was not originally designed for use in the country where the product is used, which may occur if you import the product.
- If the product does not function properly due to problems with connection with service providers, such as for the internet.

90-Day Money-Back-Guarantee

If you are not fully satisfied with your product, send the product back and Philips will refund you the full purchase price. The product must be shipped prepaid by insured mail, insurance prepaid, have the original sales receipt, indicating purchase price and date of purchase. Philips cannot be responsible for lost mail. The product must be postmarked no later than 90 days after the date of purchase. Philips reserves the right to verify the purchase price of the product and limit refunds not to exceed suggested retail price.

To obtain the money-back guarantee service, please go to www.philipsmoneyback.com, and follow the simple 3-step process. Delivery of refund check will occur 6-8 weeks after receipt of the returned product.

Disposal

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com.

Electromagnetic compatibility

This product has been tested and found to comply with IEC 60601-1-2 for electromagnetic compatibility (EMC) as Class B according to CISPR 11. Tests levels are listed in the accompanying tables. Only the power adapter that is supplied with Lumea should be used with your device.

Guidance and manufacturer's declaration on electromagnetic emissions and immunity

Lumea is intended for use in the electromagnetic environment listed here. The user of the device should assure that it is used in such an environment to prevent improper operation.

Emissions	Compliance	Electromagnetic environment – guidance
RF emissions CISPR 11	Group 1	Lumea does not use RF energy for its intended function. Therefore, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	Lumea is suitable for use in locations in residential environments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage fluctuations / flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Immunity test	Immunity test level	Electromagnetic environment – guidance
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV contact ±15 kV air	Floors can be a source of static electricity. When the air is very dry (<20 % RH) the user is advised to use Lumea in a room with concrete or wooden floor (instead of using it in a room with a synthetic floor).
Radiated RF EM fields IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	Lumea is immune against any RF wireless communication device such as smart phone, Wi-Fi or Bluetooth device at a distance of 12 inches (30 cm) or more. Avoid a closer distance as this may result in improper operation.
Proximity fields from RF wireless Communications Equipment IEC 60601-1-2	385 (27), 450 (28), 710 (9), 745 (9), 780 (9), 810 (28), 870 (28), 930 (28), 1720 (28), 1845 (28), 1970 (28), 2450 (28), 5240 (9), 5500 (9), 5785 (9) MHz (V/m)	
RATED power frequency magnetic fields IEC 61000-4-8	30 A/m 50 Hz or 60 Hz	
Proximity magnetic fields IEC 61000-4-39	30 kHz, CW, 8 A/m 134.2 kHz, Pulse modulation 2.1 kHz, 65 A/m 13.56 MHz, Pulse modulation 50 kHz, 7.5 A/m	
Electrical fast transient/ burst IEC 61000-4-4	±2 kV 100 kHz repetition frequency	Mains power quality expected of a typical commercial or residential environment.
Surges IEC 61000-4-5	±0.5 kV, ±1 kV Line-to-line	
Conducted disturbances induced by RF fields IEC 61000-4-6	3 V r.m.s., before modulation is applied 0.15 MHz – 80 MHz 6 V r.m.s., before modulation is applied in ISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0 % UT; 0.5 cycle at 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	Mains power quality expected of a typical commercial or residential environment. At power interruptions Lumea will switch off.

Note: UT is the AC mains voltage prior to application of the test level.

If in the unlikely event Lumea is locked inoperative in a function by disturbances from other devices beyond the levels stated in the table above, Lumea will shut-off completely and must be restarted by the power button. In that case make sure the distance to the other device causing this disturbance is enlarged.

Electromagnetic fields (EMF)

This device complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier: BRC332, BRC344

Responsible Party – U.S. Contact Information

Philips Personal Health
a division of Philips North America LLC
P.O. Box 10313
Stamford, CT 06904
United States of America

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

No changes shall be made to the equipment without the manufacturer's permission as this may void the user's authority to operate the equipment.

Technical specifications

Electrical specification	The combination of the power adapter and Lumea is considered: Class II ME EQUIPMENT
Attachment	Type BF applied part The applied part (attachment) can become hot during use <140 °F (<60 °C). If this occurs, let the device cool down and limit the contact duration to less than 1 minute.
Mode of operation	Continuous operation
Intended operator	The user is the intended operator
IP rating power adapter	IP22
Light output	
Risk group classification	Exempt
Wavelength range of emitted optical radiation	Body and precision attachments: 520 nm – 1200 nm Face attachment: 590 nm – 1200 nm
Spot size	Body attachment: 4.1 cm ² (32.7 mm x 12.6 mm) Precision attachment: 3 cm ² (30.0 mm x 10.0 mm) Face attachment: 2 cm ² (25.0 mm x 8.0 mm)
Optical exposure	Setting 1: 2.5 ± 0.80 J/cm ² Setting 2: 3.1 ± 0.85 J/cm ² Setting 3: 3.8 ± 0.91 J/cm ² Setting 4: 4.4 ± 0.96 J/cm ² Setting 5: 5.0 ± 1.00 J/cm ²
Maximum optical energy	Body attachment: 23.0 J Precision attachment: 16.8 J Face attachment: 11.2 J
Optical homogeneity	Max. +/-30 % deviation from average optical exposure in treatment area
Pulse sequence	Single pulse, for all settings
Pulse interval	0.6–2.4 s, for all settings
Pulse width	1.25 +/-0.4 ms (FWHM)
Transport and storage conditions	Lumea remains operational in NORMAL USE within its specification after transport or storage in the following environmental range: - a temperature range of -13 °F to 158 °F (-25 °C to 70 °C); and - a relative humidity up to 95 % RH, noncondensing; and - an atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa. If the device has been stored in a hot or cold environment, place it in an environment with a temperature of 68 °F (20 °C) for 30 minutes to let it reach a temperature within the usage conditions (41 °F to 104 °F/5 °C to 40 °C) before you use it.
Operating conditions	Lumea complies with its specifications when operated in NORMAL USE under the following environmental operating conditions: - a temperature range of 41 °F to 104 °F (5 °C to 40 °C); - a relative humidity range of 15 % to 90 % RH, noncondensing; and - an atmospheric pressure range of 700 hPa to 1060 hPa.

Power adapter	
Power adapter input	100-240 V ~ 50/60 Hz 1.5 A
Power adapter output	19.5 V $\equiv$ 3.33 A 65.0 W
Average active efficiency	≥ 88.0 %
Efficiency at low load (10 %)	≥ 79.0 %
No-load power consumption	< 0.21 W
Device weight	Power adapter ~ 0.7 lb (~ 310 g) Handpiece ~ 0.9 lb (~ 430 g)
Device size	Power adapter ~ 4.3 x 2.6 x 2.7 inch (~ 10.8 x 6.5 x 6.8 cm) Handpiece ~ 78.7 x 5.7 x 3.7 inch (~ 20.0 x 14.5 x 9.5 cm)
Service life	5 years, based on Lumea treatment schedule with 14 full body treatments per year.
Materials	
Housing	PC (Polycarbonate), ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene), PA (Polyamide)
Cable	TPE (Thermoplastic elastomer)
Cybersecurity characterization level	SL-C 1
Bluetooth specifications	
Frequency	2.4 GHz
Transmit power	0 dBm
Operating distance	6.6 ft (2 m)

Warranty and support

Philips offers a 2-year warranty. Warranty exceptions apply.
This warranty does not affect your rights as a consumer under law.
For more information, visit www.philips.com/support or call us.

Explanation of symbols

The safety signs and symbols are essential to ensure that you use this product safely and correctly and to protect you and others from injury. Below you find the meaning of the safety signs and symbols on the label and in the user manual.



IEC 60417-5333 Type BF applied part

This symbol identifies the type BF applied part complying with IEC 60601-1.



ISO 7000-2620 Humidity limitation

This symbol indicates the acceptable upper and lower limits of relative humidity for transport and storage.



ISO 7000-2621 Atmospheric pressure limitation

This symbol indicates the acceptable upper and lower limits of atmospheric pressure for transport and storage.



ISO 7000-0632 Temperature limit

This symbol indicates the maximum and minimum temperature limits at which the item shall be stored, transported or used.



ISO 7000-0626 Keep dry

This symbol indicates that the device shall be kept dry.

IP22

This symbol indicates the protection against ingress of solid foreign objects ≥ 12.5 mm and against harmful effects due to the ingress of dripping water when tilted at 15 degrees.



IEC 60417-5172 Class II equipment

This symbol indicates 'Class II Equipment'.
The power adapter is double-insulated.



ISO 7000-3082 Manufacturer

This symbol indicates the manufacturer of the product.



IEC 60417-6049 Country of manufacture

This symbol indicates the country of manufacture and the manufacturing date. 'CC' is the two-letter country code.



ISO 7000-2492 Batch number

This symbol indicates the manufacturer's batch number.



ISO 7000-2493 Catalogue number

This symbol indicates the manufacturer's catalogue number.



IEC 60417-5032 Alternating current

This symbol indicates alternating current.



IEC 60417-5031 Direct current

This symbol indicates direct current.



ISO 7000-1641 Consult instructions for use

This symbol indicates that operating instructions should be considered when operating the device.



ISO 7010-W017 Warning; Hot surface

This symbol warns about a hot surface. The background color is yellow, the color of the symbol is black.



IEC 61558-1 Rated maximum ambient temperature

This symbol indicates the maximum ambient temperature at which the transformer may be operated continuously under normal conditions of use.



IEC 60417-5957 For indoor use only

This symbol means that the device is designed for indoor use.



IEC 60417-5947 Safety isolating transformer, short-circuit proof

This symbol means that the transformer is designed to be short-circuit proof.

**IEC 60417-6190 Power supply unit, switch mode**

This symbol means that the transformer is considered a Switch Mode Power Supply (SMPS) unit.

**IEC 60417-6343 Maximum altitude**

This symbol indicates that the appliance is intended to be usable up to the maximum altitude 3000 m (9842 ft.).

**ISO 7000-3706 Single patient multiple use**

This symbol indicates that the device may be used multiple times on a single user.

**SenseIQ Pro technology**

This symbol indicates that the device is equipped with SenseIQ Pro technology.



This symbol indicates that the device is equipped with the Philips Lumea IPL app for optimal results.



This symbol indicates that the device is equipped with Audio Real Time Guidance.



ISO/IEC 16022 Information technology – Automatic identification and data capture technologies – Data Matrix barcode symbology specification. The data matrix (QR-code) is used to capture information in a machine-readable form.

**ISO 15223-1 Unique Device Identifier**

Indicates the Unique Device Identifier that is used to identify a specific product.

**ISO 7010-W001 General warning sign**

This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information such as contraindications and warnings. On the device, the background color is yellow, the color of the symbol is black.

**ISO 7000-0434A Caution**

This symbol means that the user should consult the instructions for use for important safety information on cautions.



A recycling symbol to identify the material of which an item is made, to facilitate recycling or other reprocessing. The symbol includes a number to identify the material code.

**IEC 60417-5009 Stand-by**

This symbol identifies the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition. The symbol also identifies the control to shift to or to indicate the state of low power consumption.



This symbol indicates Forest Stewardship Council®. The FSC trademarks enable consumers to choose products that support forest conservation, offer social benefits, and enable the market to provide an incentive for better forest management.



ISO 15223-1 Medical device

This symbol indicates that this is a medical device.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Royal Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The FCC mark is voluntary mark, which indicates that the electromagnetic radiation from the device is below the limits specified by the Federal Communications Commission.



This symbol indicates that an App is available for use with this device. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.



This symbol indicates that an App is available for use with this device. App Store® is a service mark of Apple Inc.



MEDICAL — GENERAL MEDICAL EQUIPMENT PHILIPS
IPL HAIR REMOVAL AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) and the applicable Amendments and/or Particular and/or related Collateral Standards for which the product has been found to comply by UL.

MEDICAL — GENERAL MEDICAL EQUIPMENT PHILIPS IPL HAIR REMOVAL AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH CSA-C22.2 No. 60601-1:2014 and the applicable Amendments and/or Particular and/or related Collateral Standards for which the product has been found to comply by UL.

Chapitres

Bienvenue dans le monde de Lumea	44
Indications d'utilisation	44
Renseignements importants pour la sécurité	45
Contre-indications	45
Avertissements	46
Mises en garde	48
Risques et avantages de l'utilisation de Lumea	49
Effets secondaires potentiels de l'épilation par lumière pulsée	50
Qu'est-ce que la lumière intense pulsée?	53
Présentation de Lumea	54
Technologie SenseIQ Pro	55
Application Philips Lumea IPL	56
Jumelez votre Lumea et votre téléphone intelligent	56
Explication des couleurs des voyants lumineux Bluetooth	57
Accessoires	58
Modes de traitement	59
Votre guide de traitement	60
Préparation de la séance	61
Test cutané	62
Réalisation d'une séance	64
Nettoyage et rangement	66
Après la séance	67
Programmation des prochaines séances	68
Dépannage	69
Informations supplémentaires	73

Bienvenue dans le monde de Lumea

Obtenez une diminution douce, rapide et efficace de votre pilosité avec Lumea. Vous pouvez utiliser Lumea en toute tranquillité à la maison. Prêt à vous lancer?



Numérisez le code avec l'appareil photo de votre téléphone ou une application QR, ou visitez la page www.philips.com/myIPL

Remarque : Dans ce manuel d'utilisation, Lumea fait référence à l'appareil Philips Lumea IPL 9900 Pro Series.

Indications d'utilisation

Philips Lumea IPL est conçu pour éliminer les poils non désirés par un utilisateur unique. Il est également indiqué pour la réduction permanente de la repousse des poils, soit une réduction stable à long terme du nombre de poils repoussant lorsqu'ils sont mesurés à 6, 9 et 12 mois après la fin d'un régime de traitement.

Est-ce que Lumea vous convient?

Philips Lumea ne convient pas à tout le monde. Consultez les tableaux de teints de peau et de couleurs des poils au début de ce mode d'emploi et lisez attentivement les instructions de sécurité importantes pour savoir si Lumea est fait pour vous. Philips Lumea peut être utilisé par les personnes âgées de 18 à 65 ans, ayant un teint de clair à brun moyen et des cheveux naturellement blond foncé, bruns, brun foncé et noirs.

Couleurs de poils non compatibles : L'utilisation de Lumea est inefficace si vous avez des poils blond clair, gris, roux ou blancs, car ces teintes n'absorbent pas suffisamment la lumière.

Teints de peau non compatibles : Vous ne pouvez pas utiliser Lumea si vous avez un teint de peau brun foncé à foncé, car ces teints de peau absorbent plus facilement la lumière, ce qui peut entraîner des douleurs, des rougeurs ou des brûlures.

Philips Lumea, muni d'un accessoire Visage, peut être utilisé sur le visage des femmes (sous les pommettes). Philips Lumea, muni d'un accessoire Corps ou Précision, peut être utilisé sur le corps (sous le cou). Philips Lumea est un appareil portatif prévu pour un usage domestique.

Renseignements importants pour la sécurité

 **TOUJOURS** lire et suivre attentivement les instructions pour profiter pleinement de votre Lumea et minimiser les risques de blessures, de réactions cutanées et d'effets secondaires. Veillez à conserver ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Contre-indications

- **NE PAS** utiliser Lumea si vous avez suivi une chimiothérapie ou une radiothérapie au cours des trois derniers mois.
- **NE PAS** utiliser Lumea si votre sensibilité à la douleur est réduite après avoir pris un médicament (par exemple, un analgésique ou une crème anesthésiante) ou si vous avez un problème de santé.
- **NE PAS** utiliser Lumea si vous avez un teint de peau brun foncé ou plus foncé.
- **NE PAS** utiliser Lumea si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.
- **NE PAS** utiliser Lumea si vous avez moins de 18 ans ou plus de 65 ans.

Sensibilité à la lumière :

- **NE PAS** utiliser Lumea si votre peau est très sensible à la lumière, par exemple si vous :
 - avez une allergie au soleil;
 - prenez certains médicaments ou remèdes à base de plantes. Consultez la notice d'utilisation à l'intérieur de l'emballage de votre médicament pour savoir si celui-ci peut augmenter la sensibilité à la lumière du soleil.

Problèmes médicaux :

- **NE PAS** utiliser Lumea, ou consultez d'abord un médecin, si vous :
 - souffrez d'épilepsie avec sensibilité aux pulsions lumineuses;
 - avez un cancer de la peau actif ou des antécédents de cancer de la peau;
 - souffrez d'un désordre pigmentaire comme le vitiligo;
 - présentez des antécédents de cicatrisation difficile;
 - souffrez d'un déficit immunitaire à cause d'une maladie comme le SIDA ou de médicaments immunosuppresseurs;
 - présentez des antécédents de troubles du collagène, y compris des antécédents de formation de cicatrices chéloïdes.

Avertissements

Sécurité thermique - Pour éviter les douleurs, rougeurs ou brûlures de la peau

- **NE PAS** utiliser Lumea sur les lèvres, les narines, les oreilles, le cuir chevelu, les mamelons, les petites lèvres, le périnée, la zone de l'anus, du pénis ou du scrotum. Ces zones sont très sensibles et la peau y est plus fine et plus foncée.
- **NE PAS** toucher le verre filtrant pendant ou juste après l'utilisation, car il devient très chaud. Après utilisation, débranchez Lumea et l'adaptateur secteur et laissez-les refroidir pendant 15 minutes avant de les nettoyer et de les ranger.
- **NE PAS** utiliser Lumea sur une affection cutanée active, car cela pourrait l'aggraver ou causer des douleurs, rougeurs ou brûlures supplémentaires. Les affections cutanées peuvent inclure :
 - ecchymoses actives, éruptions cutanées, lésions, plaies ouvertes, cicatrices ou coups de soleil. Attendez que la blessure soit complètement guérie avant de reprendre les séances.
 - irritations, inflammations ou infections cutanées actives. Attendez que la peau soit complètement guérie avant de reprendre les séances.
 - peau endommagée après l'utilisation de crèmes dépilatoires (épilation). Attendez au moins 2 jours avant de reprendre les séances.
 - peau endommagée après une (micro)dermabrasion ou des méthodes de rajeunissement de la peau. Attendez au moins 1 semaine avant de reprendre les séances.

Sécurité des yeux - Pour éviter les lésions oculaires

- **NE PAS** utiliser Lumea sur l'œil, la paupière, le sourcil ou à proximité. Utilisez Lumea uniquement sous les pommettes.

Sécurité électrique - Pour éviter les risques d'électrocution

- **NE PAS** utiliser Lumea dans un environnement humide (par exemple, dans la salle de bains ou près d'une douche ou d'une piscine).
- **NE PAS** laisser de l'eau pénétrer dans Lumea.
- **NE PAS** exposer Lumea à d'importantes variations de température, en particulier dans un environnement très humide, sans laisser l'appareil s'acclimater pendant 30 minutes à la température ambiante de la pièce dans laquelle il sera utilisé (consultez les « Caractéristiques techniques »).
- **NE PAS** tenter de réparer ou de modifier Lumea. Toute réparation ou modification peut rendre nulles la garantie et la conformité de Lumea. Tout changement apporté au Lumea qui n'a pas été expressément approuvé par Philips peut entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.
- **NE PAS** toucher les pièces à l'intérieur d'un Lumea ou d'un adaptateur secteur endommagés.
- **NE PAS** utiliser d'autres accessoires ou adaptateurs secteur que ceux fournis avec Lumea.
- **TOUJOURS** vérifier si la tension indiquée sur l'adaptateur correspond à celle du secteur de l'endroit où vous vous trouvez avant de brancher l'appareil.

Sécurité générale - Pour éviter les blessures graves

- **TOUJOURS** vérifier Lumea avant son utilisation. N'utilisez pas Lumea ou l'adaptateur secteur s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce d'origine.
- **TOUJOURS** débrancher Lumea, y compris l'adaptateur secteur, après utilisation et en cas de panne de courant pour éviter d'endommager l'appareil.
- **NE PAS** utiliser Lumea directement au-dessus ou à proximité d'un implant actif, par exemple :
 - stimulateur cardiaque;
 - neurostimulateur;
 - pompe à insuline.Consultez le mode d'emploi de l'implant actif pour connaître la distance de sécurité à respecter avec d'autres appareils électroniques.
- **NE PAS** porter le cordon de l'adaptateur secteur autour du cou pour éviter tout étranglement.
- **NE PAS** utiliser Lumea si vos capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, car vous risqueriez de mal l'utiliser.
- **NE PAS** utiliser Lumea, ni le câble de l'adaptateur secteur, à moins de 30 cm d'appareils Wi-Fi ou Bluetooth (matériel de communication RF portable) ou de téléphones intelligents, car Lumea risquerait de mal fonctionner.
- **NE PAS** utiliser Lumea à proximité ni posé sur d'autres appareils. Cela pourrait altérer son fonctionnement.
- **NE PAS** laisser Lumea sans surveillance lorsqu'il est allumé pour éviter tout risque d'incendie.
- **TENIR** Lumea hors de la portée des enfants. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne s'amusent pas avec l'appareil.
- **TOUJOURS** vérifier que l'adaptateur secteur est branché sur une prise de courant correctement installée et fonctionnelle pour éviter tout risque d'incendie.

Mises en garde

Sécurité thermique - Pour éviter les douleurs, rougeurs ou brûlures de la peau

- **NE PAS** commencer ni reprendre les séances avec Lumea au cours des 4 semaines suivant l'exposition de votre peau au soleil sans protection (soleil naturel ou lit de bronzage) ou au cours des 2 semaines suivant un bronzage artificiel (crèmes, vaporisateurs ou pilules). Faites un test cutané avant de commencer ou de reprendre les séances (voir la section « Test cutané »).
- **NE PAS** utiliser Lumea avec l'accessoire Corps ou Précision sur la lèvre supérieure ou d'autres zones du visage. N'utilisez que l'accessoire Visage, car il dispose d'un filtre intégré supplémentaire pour le traitement du visage sous les pommettes.
- **NE PAS** poursuivre les séances si vous ressentez une douleur ou une réaction cutanée qui dure plus de 24 heures. Réduisez l'intensité lumineuse ou cessez d'utiliser Lumea.
- **NE PAS** exposer votre peau au soleil sans protection lorsque vous utilisez Lumea. Pendant toute la durée du traitement par lumière pulsée, et surtout au cours des 48 heures qui suivent la séance, protégez votre peau du soleil en vous couvrant ou en appliquant une protection solaire ayant un FPS de 50 ou plus sur les zones traitées non couvertes.
- **NE PAS** envoyer plusieurs pulsions lumineuses sur la même zone pendant une séance. La surface de l'accessoire doit chevaucher la zone précédente afin de bien traiter toute la surface de la peau, mais envoyer des pulsions lumineuses répétées sur une même zone ne donne pas de meilleurs résultats.
- **NE PAS** utiliser Lumea sur une peau plus foncée que la zone environnante. Ces zones cutanées hautement pigmentées peuvent entraîner un échauffement excessif de la peau.
Les zones plus foncées peuvent inclure :
 - les taches sombres comme les grains de beauté, les verrues, les grosses taches de rousseur, les taches de naissance, les taches de vieillesse ou les varices;
 - les marques sur la peau, comme les tatouages ou le maquillage (permanent).
- **NE PAS** utiliser Lumea sur le cou et le visage chez les hommes. Les poils de ces zones ont des caractéristiques différentes.
- **NE PAS** marquer votre peau ou la zone à traiter avec un crayon ou un stylo.
- **NE PAS** utiliser Lumea s'il y a de la lotion, du gel ou des poils visibles sur votre peau ou sur l'appareil. Ne traitez que les peaux propres, sèches et sans poils. Assurez-vous également que Lumea est propre et sec.
- **NE PAS** utiliser Lumea si le verre filtrant ou le cadre du verre est endommagé. Vérifiez que Lumea n'est pas endommagé avant de l'utiliser.
- **NE PAS soumettre** Lumea à des chocs violents afin de ne pas endommager la lampe.
- **NE PAS** effectuer plus d'une séance toutes les 2 semaines.

Sécurité des yeux - Pour éviter tout inconfort oculaire

- **TOUJOURS** utiliser Lumea dans une pièce bien éclairée. Vos yeux sont plus sensibles à une lumière parasite si la luminosité est faible.

Sécurité générale - Pour éviter toute blessure

- **NE PAS** utiliser Lumea en cas de troubles vasculaires (p. ex. varices).
- **VEILLER** à ce que l'adaptateur secteur puisse être facilement débranché de la prise électrique en cas de dysfonctionnement. L'adaptateur secteur est considéré comme un sectionneur.
- **NE PAS** partager Lumea avec d'autres personnes pour des raisons d'hygiène. Lumea est destiné à être utilisé par une seule personne.

Risques et avantages de l'utilisation de Lumea

La sécurité et l'efficacité de Lumea ont été testées dans le cadre d'une étude clinique menée auprès de 94 femmes (âgées de 18 à 64 ans). Aucun des sujets n'a quitté l'étude prématurément en raison de problèmes associés à l'utilisation de Lumea.

Sur les 94 sujets, 31 ont ressenti un ou plusieurs effets secondaires légers et transitoires : douleurs (26), démangeaisons (8), rougeurs (5), folliculite (2), sensations de brûlure (1), croûtes superficielles (1) et gonflements (1).

Résultats après 4 séances bimensuelles :

- 75 femmes ont traité leur lèvre supérieure et constaté une réduction de leur pilosité allant jusqu'à 61,1 %.
- 76 femmes ont traité leurs aisselles et constaté une réduction de leur pilosité allant jusqu'à 60,6 %.
- 77 femmes ont traité leur maillot et constaté une réduction de leur pilosité allant jusqu'à 61,9 %.
- 76 femmes ont traité leurs jambes et constaté une réduction de leur pilosité allant jusqu'à 93,1 %.

35 femmes ont effectué 8 séances de retouche supplémentaires (une fois toutes les 4 semaines) et ont enregistré une réduction de leur pilosité pouvant atteindre 67,0 %.

Effets secondaires potentiels de l'épilation par lumière pulsée

Le tableau ci-dessous répertorie les effets secondaires connus qui peuvent survenir après une épilation par lumière pulsée.

Effets secondaires fréquents	Effets observés	Durée et mesure conseillée
Douleur/sensation d'inconfort	Douleur ou gêne locale sur la zone traitée pendant ou après la séance	Si la séance est douloureuse/désagréable, réduisez l'intensité lumineuse ou cessez d'utiliser Lumea. La douleur ou l'inconfort peut durer jusqu'à 1 semaine.
Démangeaisons	Sensations de démangeaison dans la région traitée	Ces réactions disparaissent généralement en quelques heures, mais peuvent durer jusqu'à 1 semaine. Vous pouvez rafraîchir la zone avec une compresse froide.
Sensation de chaleur/brûlure	Sensation locale de chaleur ou de brûlure sur la zone traitée	
Rougeur cutanée (érythème)	Rougeur diffuse dans la zone traitée	Cette réaction disparaît généralement en quelques heures, mais peut durer jusqu'à 1 journée. Vous pouvez rafraîchir la zone avec une compresse froide. Une rougeur cutanée qui dure plus d'une journée est un effet secondaire peu fréquent de la lumière pulsée et un signe de brûlure cutanée. Attendez que la peau soit complètement guérie avant d'effectuer la séance suivante. Veillez à utiliser une intensité lumineuse inférieure pour les séances suivantes.

Effets secondaires peu fréquents	Effets observés	Durée et mesure conseillée
Gonflement (œdème)	Gonflement autour des follicules pileux dans la zone traitée, parfois accompagné de rougeurs.	Cette réaction disparaît généralement en quelques heures, mais peut durer jusqu'à 1 semaine. Vous pouvez rafraîchir la zone avec une compresse froide.
Sécheresse cutanée	Peau rugueuse et squameuse dans la zone traitée.	Cette réaction dure généralement entre 1 journée et 1 mois. Vous pouvez appliquer une crème hydratante non parfumée sur la zone traitée.
Brûlures et cloques	Rougeur cutanée étendue, gonflement et éventuellement cloques, accompagnés de douleurs	Ces réactions peuvent durer entre 1 journée et 1 mois et peuvent nécessiter un traitement médical ou des médicaments. Nous vous conseillons de consulter un médecin.
Croûtes superficielles	Zone brunâtre et croûteuse aux contours nets, qui peut apparaître sur les peaux plus foncées	Attendez que la peau soit complètement guérie avant d'effectuer la séance suivante. Veillez à utiliser une intensité lumineuse inférieure pour les séances suivantes.
Folliculite	Gonflement et rougeur autour des follicules pileux, accompagnés de démangeaisons et/ou de pustules	La folliculite peut nécessiter un traitement médical ou des médicaments. Nous vous conseillons de consulter un médecin. La folliculite peut durer de quelques jours à plusieurs semaines. Attendez que la peau soit complètement guérie avant d'effectuer la séance suivante. Veillez à utiliser une lame de rasoir propre pour vous raser avant la séance.


Effets secondaires peu fréquents	Effets observés	Durée et mesure conseillée
Modifications pigmentaires/décoloration de la peau	Peau traitée plus foncée ou plus claire que la peau environnante.	Cette réaction dure généralement plusieurs semaines et, dans de rares cas, jusqu'à un an. Ne traitez pas les zones dépigmentées/décolorées tant que votre peau n'a pas retrouvé son teint de peau normal. Veillez à utiliser une intensité lumineuse inférieure pour les séances suivantes.
Infection cutanée	Peau enflammée. Il s'agit d'un effet secondaire qui peut se produire après une brûlure cutanée ou d'autres blessures.	L'infection cutanée nécessite un traitement médical ou des médicaments. Nous vous conseillons de consulter votre médecin. Ne traitez pas les infections cutanées.
Cicatrisation	Une cicatrice peut apparaître comme effet secondaire après une brûlure ou une infection cutanée.	Il est important de consulter un médecin si vous avez une brûlure ou une folliculite pour prévenir la formation d'une cicatrice. Ne traitez pas le tissu cicatriciel.
Poussée d'herpès	Petites cloques ou plaies ouvertes, généralement près de la lèvre ou des organes génitaux, chez les personnes porteuses du virus herpès simplex	Une poussée dure généralement plusieurs jours ou semaines et peut être écourtée par la prise de médicaments antiviraux prescrits par votre médecin.
Maux de tête et images rémanentes	Maux de tête ou images rémanentes possibles chez les personnes sensibles lorsque le flash lumineux atteint l'œil.	Ces réactions durent généralement de quelques minutes à plusieurs heures. Pour les éviter, veillez à utiliser Lumea dans une pièce bien éclairée et à bien appuyer l'appareil sur votre peau avant de traiter.

L'épilation par lumière intense pulsée peut accélérer la repousse des poils chez certaines personnes. Les zones à risque sont la mâchoire, le cou et les zones situées au-dessus des pommettes chez les femmes, ainsi que le haut du dos et les épaules chez les hommes. D'après les données actuellement disponibles, les groupes les plus à risque à cet égard sont les femmes d'origine méditerranéenne, moyen-orientale et sud-asiatique.

Qu'est-ce que la lumière intense pulsée?



Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

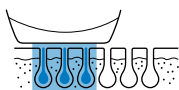


1. La lumière intense pulsée est également appelée IPL (Intense Pulsed Light).

De légères impulsions lumineuses sont absorbées par la racine des poils.



2. Ces impulsions lumineuses font entrer les follicules pileux dans une phase de repos.

Les poils tombent naturellement et leur repousse est réduite pendant un certain nombre de mois.

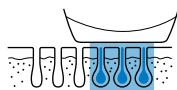


3. Les poils ne poussent pas en continu : ils poussent par cycles.

Tous les poils d'une même zone ne poussent pas en même temps. La lumière intense pulsée n'étant efficace que sur les poils en croissance active, il est donc important de répéter les séances comme indiqué.

Présentation de Lumea



Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

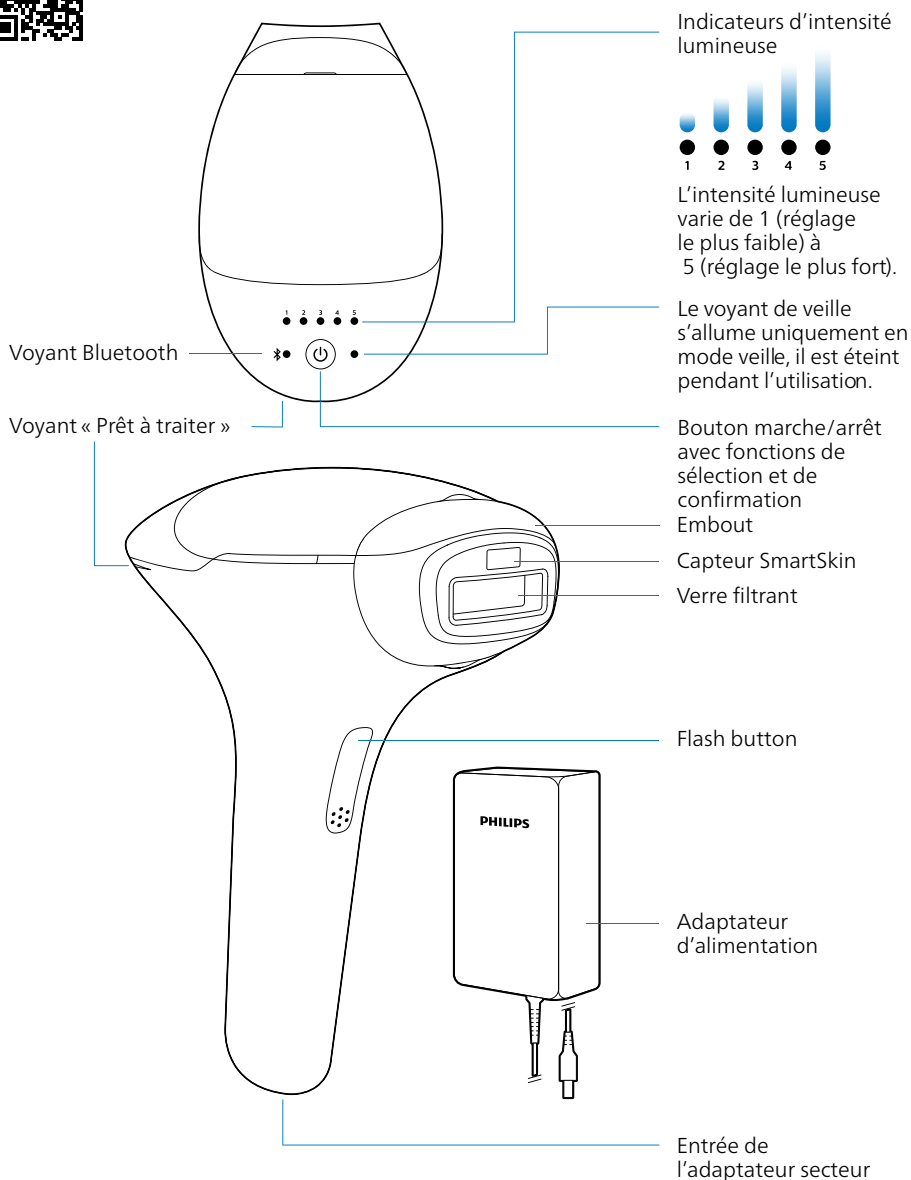


Non illustré :

- Chiffon de nettoyage
- Trousse ou pochette de beauté premium ou coffret de beauté de luxe

Capteur SmartSkin

Le capteur SmartSkin détermine le teint de votre peau et vous permet de sélectionner un réglage qui vous convient en allumant l'un des voyants d'intensité lumineuse sur le dessus de l'appareil.

Il vous aide également à éviter automatiquement de traiter les zones de votre peau qui sont trop foncées pour une utilisation sûre.

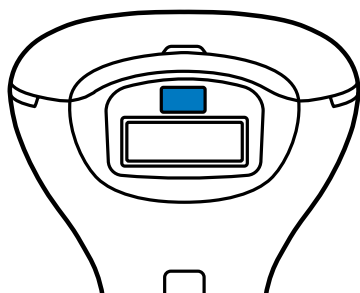

Voyant « Prêt à traiter »

Le voyant blanc « Prêt à traiter » vous indique que le contact avec la peau est bon et que votre Lumea est prêt à traiter.

Si le voyant « Prêt à traiter » clignote en orange, la peau de cette zone est trop foncée pour être traitée. Ciblez une zone du corps plus claire.



Technologie SenseIQ Pro




SenseIQ Pro
Your personal coach

La technologie SenseIQ Pro pour une épilation sur mesure est notre combinaison signature comprenant :

- des capteurs intelligents améliorés qui mesurent le teint de votre peau et vous aident à sélectionner le réglage adapté;
- des accessoires uniques conçus pour chaque courbe de votre corps;
- Application Philips Lumea IPL connectée avec guidage en temps réel pour une efficacité et une précision optimales.

Application Philips Lumea IPL

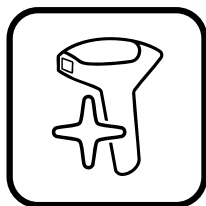

Avantages de connecter votre Lumea à l'application

Il est recommandé de connecter votre Lumea à l'application Philips Lumea IPL pour obtenir :

- Une intégration facile et accompagnement intuitif étape par étape pour un plan de traitement personnalisé adapté à vos besoins.
- Des instructions en temps réel pour le contact avec la peau afin que l'appareil s'adapte à vos courbes, même dans les zones difficiles d'accès.
- Le guidage en temps réel des mouvements avec commentaires audio et visuels vous permet de travailler avec précision.
- Des rapports personnalisés post-traitement et des rappels pour vous permettre de vous sentir confiant et sur la bonne voie dès la première utilisation.

Pour plus d'informations, consultez le site :
www.philips.com/myLumea

Avant de commencer la procédure de configuration, assurez-vous que vous disposez d'une bonne connexion Wi-Fi ou Internet mobile.

Compatibilité

L'application est compatible avec une vaste gamme de téléphones iPhone et Android™.

Jumelez votre Lumea et votre téléphone intelligent



1. Téléchargez l'application sur votre téléphone intelligent

Recherchez les mots-clés « Philips Lumea IPL » sur l'App Store ou le Google Play Store, ou balayez le code QR.


2. Lancez l'application

3. Sélectionnez votre appareil en balayant le code-barres figurant sur l'emballage de votre produit


4. Créez votre compte en suivant les instructions à l'écran

5. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone



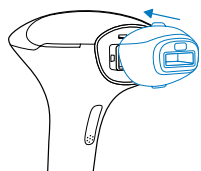

6. Fixez n'importe quel accessoire à votre appareil Lumea

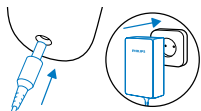


7. Branchez l'appareil

Branchez Lumea sur la prise secteur.



8. Appuyez sur le bouton marche/arrêt

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer votre Lumea.

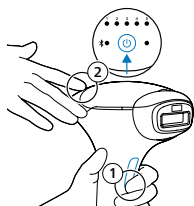

9. Jumelez votre Lumea en suivant les instructions de l'application

Une fois votre Lumea allumé, maintenez le bouton du flash (1) enfoncé, puis appuyez sur le bouton marche/arrêt (2) jusqu'à ce que le voyant Bluetooth clignote lentement en bleu. Votre Lumea est alors prêt à être jumelé avec votre téléphone. Continuez en suivant les instructions dans l'application. Le voyant Bluetooth devient blanc lorsque votre Lumea est correctement connecté.



Remarque : Assurez-vous que le Bluetooth de votre téléphone est activé lorsque vous utilisez l'application afin que votre appareil à lumière intense pulsée puisse transférer et mettre à jour vos données d'épilation à la lumière intense pulsée dans l'application. Si vous avez des questions sur les raisons pour lesquelles vos données d'épilation à la lumière intense pulsée sont recueillies, consultez la déclaration de confidentialité de l'application.

Une fois jumelés, Lumea et l'application se connectent automatiquement lorsque l'application est ouverte.

Explication des couleurs des voyants lumineux Bluetooth

Couleur	Explication
Aucune couleur (le voyant Bluetooth est éteint)	Lumea est en veille.
Bleu, clignote lentement	Lumea est prêt à être jumelé avec un téléphone intelligent.
Blanc, continu	Le Bluetooth est connecté.
Blanc, clignote lentement	Le Bluetooth est jumelé, et Lumea se connecte et cherche la connexion à l'application.
Violet	La mise à jour de l'application est en cours. Veuillez attendre la fin de la mise à jour.
Jaune	Lumea est en mode erreur après la mise à jour du micrologiciel.

Accessoires



Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

Votre Lumea est livré avec différents accessoires que vous pouvez utiliser sur différentes zones du corps. Sélectionnez l'accessoire adapté à la zone que vous voulez traiter.


	Type d'accessoire	BRC32	BRC344
	Accessoire Corps - plus grande taille de fenêtre; - design incurvé permettant de couvrir efficacement les zones situées en dessous du cou.	✓	✓
	Accessoire Visage - plus petite taille de fenêtre pour une épilation de précision sous les pommettes; - design petit et plat; - filtre intégré supplémentaire pour les zones du visage situées sous des pommettes. ⚠ NE PAS utiliser Lumea sur le cou et le visage chez les hommes. Les poils de ces zones ont des caractéristiques différentes. Suggestion : Placez votre langue entre votre lèvre supérieure et vos dents ou gonflez vos joues pour faciliter la séance.	✓	✓
	Accessoire Précision - taille de fenêtre moyenne; - design bombé pour une utilisation précise et efficace sur le maillot et les aisselles.	✓	
	Accessoire Précision pour le maillot - taille de fenêtre moyenne; - design bombé pour une utilisation précise et efficace sur le maillot.		✓
	Accessoire Précision pour les aisselles - taille de fenêtre moyenne; - design bombé pour une utilisation précise et efficace sur les aisselles.		✓

Modes de traitement




Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

Votre Lumea dispose de deux modes de traitement pour une utilisation plus pratique sur les différentes zones du corps.

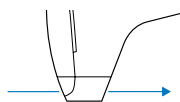

Glisser-traiter

Pour les grandes zones (jambes), maintenez le bouton du flash enfoncé pendant que vous faites glisser Lumea sur votre peau. Lumea continue à émettre des pulsions lumineuses jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton ou qu'il n'y ait plus de bon contact avec la peau.

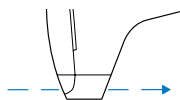

Positionner-traiter

Pour les petites zones du corps (maillot, aisselle), placez Lumea sur votre peau et appuyez sur le bouton du flash. Relevez Lumea de votre peau et placez-le à côté de la zone que vous venez de traiter. Appuyez de nouveau sur le bouton pour émettre un flash.

Votre guide de traitement

Pour profiter pleinement de votre appareil, veuillez lire les consignes de sécurité importantes du mode d'emploi pour vérifier si Lumea vous convient.

Avant votre séance




1. Préparation de la séance

Épilez-vous et assurez-vous que votre peau est propre et sèche



2. Test cutané

Déterminez le réglage qui vous convient

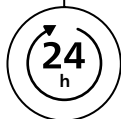


3. Attente de 24 h pour voir si vous avez des réactions cutanées



Séance

4. Réalisation d'une séance

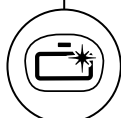

5. Nettoyage et rangement



6. Programmation des prochaines séances




Numérisez le code QR et regardez nos vidéos de démonstration pour obtenir des conseils étape par étape sur la façon d'effectuer une séance avec Lumea, ainsi que des vidéos d'ordre général sur votre appareil Lumea.

Préparation de la séance



Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

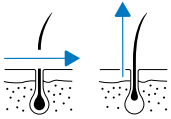

1. Épilez-vous


Épilez-vous à la cire, au rasoir ou à l'épilateur avant d'utiliser Lumea.

Effectuez une séance avant l'apparition de nouveaux poils. Si vous vous épilez à la cire, patientez 24 heures avant d'utiliser Lumea.



2. Nettoyez et séchez votre peau

Aucune trace d'eau, d'huile, de crème ou de lait corporel ne doit rester sur votre peau.

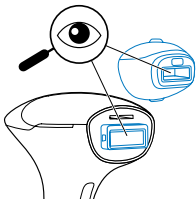

3. Choisissez le bon accessoire et vérifiez que votre Lumea n'est pas endommagé ni sale



TOUJOURS vérifier Lumea avant son utilisation. N'utilisez pas Lumea ou l'adaptateur secteur s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce d'origine.



NE PAS utiliser Lumea en cas de lotion ou de gel visible sur votre peau ou sur Lumea. Ne traitez que les peaux propres et sèches. Assurez-vous également que Lumea est propre et sec.

Test cutané



Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.


⚠ NE PAS commencer ni reprendre les séances avec Lumea au cours des 4 semaines suivant l'exposition de votre peau au soleil sans protection (soleil naturel ou lit de bronzage) ou au cours des 2 semaines suivant un bronzage artificiel (crèmes, vaporisateurs ou pilules).

Avant votre première séance sur chaque zone du corps ou après avoir exposé votre peau au soleil sans protection, effectuez un test cutané et trouvez le réglage approprié pour la séance.

Il est recommandé d'utiliser Lumea à l'abri de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut influencer le capteur SmartSkin.


1. Suivez les étapes de la section « Préparation de la séance »

2. Vérifiez que votre Lumea n'est pas endommagé ni sale

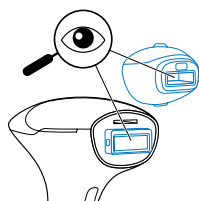


3. Fixez le bon accessoire

Enclenchez l'accessoire adapté à la zone que vous souhaitez traiter.

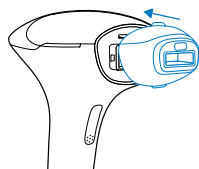

4. Branchez l'appareil

Branchez Lumea sur la prise secteur.

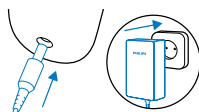


5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt

Les cinq voyants d'intensité lumineuse situés au-dessus du bouton marche/arrêt s'allument en continu de gauche à droite et inversement, jusqu'à ce que vous placiez Lumea sur votre peau.



6. Placez Lumea sur votre peau

Il doit coller à votre peau.

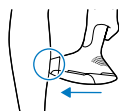



7. Réglez l'intensité lumineuse

L'un des indicateurs d'intensité lumineuse deviendra blanc pour indiquer le réglage proposé. Le réglage est sélectionné automatiquement au bout de 5 secondes.

Remarque : Si le voyant « Prêt à traiter » clignote en orange, votre peau est peut-être trop foncée pour être traitée (consultez le chapitre « Dépannage »).




8. Déterminez le réglage qui vous convient

Remplacez Lumea sur votre peau.

Le voyant « Prêt à traiter » s'allume en blanc.



Appuyez 1 fois sur le bouton du flash. Si le traitement est agréable, vous pouvez choisir un réglage supérieur. Si vous ressentez une douleur, diminuez le réglage. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer d'un réglage à l'autre. Changez de réglage, déplacez Lumea sur la zone suivante et traitez de nouveau. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous trouviez le réglage le plus agréable.

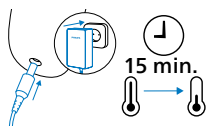


9. Éteignez et débranchez l'appareil



NE PAS toucher le verre filtrant pendant ou juste après l'utilisation, car il devient très chaud. Après utilisation, débranchez Lumea et l'adaptateur secteur et laissez-les refroidir pendant 15 minutes avant de les nettoyer et de les ranger.

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 2 secondes. Débranchez votre Lumea et l'adaptateur secteur de la prise secteur. Laissez votre Lumea refroidir.

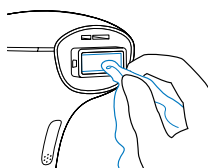

10. Nettoyez toutes les parties de votre Lumea après utilisation

Il est important de nettoyer toutes les parties de votre Lumea. Des résidus tels que des poils, de la sueur ou de la saleté peuvent s'accumuler lors du traitement et provoquer des réactions cutanées s'ils ne sont pas nettoyés. Suivez les étapes de la section « Nettoyage et rangement ».



11. Patientez 24 heures et vérifiez l'absence de réaction cutanée

En l'absence de réaction cutanée dans les 24 heures, commencez la séance avec le réglage le plus agréable. Si le réglage le plus agréable entraîne une réaction cutanée, choisissez un réglage inférieur qui n'a provoqué aucune réaction cutanée. Si vous n'avez pas essayé de réglage inférieur, répétez le test cutané.

Réalisation d'une séance




Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

Faites un test cutané avant de traiter une nouvelle zone du corps ou après avoir exposé votre peau au soleil sans protection.


1. Suivez les étapes de la section « Préparation de la séance »

2. Vérifiez que votre Lumea n'est pas endommagé ni sale

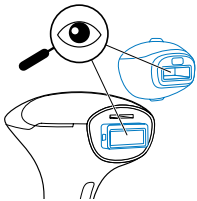

3. Fixez le bon accessoire

Enclenchez l'accessoire adapté à la zone que vous souhaitez traiter.

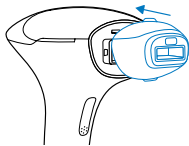

4. Installez-vous confortablement

Mettez-vous à l'aise avant de commencer la séance.

Il est recommandé d'utiliser Lumea à l'abri de la lumière directe du soleil. La lumière du soleil peut influencer le capteur SmartSkin.



5. Branchez. Appuyez sur le bouton marche/arrêt

Les cinq voyants d'intensité lumineuse situés au-dessus du bouton marche/arrêt s'allument en continu de gauche à droite et inversement, jusqu'à ce que vous placiez Lumea sur votre peau.



6. Sélectionnez le réglage


Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour faire défiler les réglages et sélectionnez celui qui est le plus agréable et qui n'a pas provoqué de réaction cutanée.



7. Commencez la séance

Placez Lumea sur votre peau.

Le voyant « Prêt à traiter » s'allume en blanc.

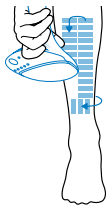


8. Actionnez le flash. Puis, changez de zone

⚠ NE PAS poursuivre le traitement si vous ressentez une douleur. Réduisez l'intensité lumineuse ou cessez d'utiliser Lumea.

NE PAS envoyer plusieurs pulsions lumineuses sur la même zone pendant une séance. La surface de l'accessoire doit chevaucher la zone précédente afin de bien traiter toute la surface de la peau, mais envoyer des pulsions lumineuses répétées sur une même zone ne donne pas de meilleurs résultats.

Appuyez sur le bouton du flash. Passez à une zone adjacente et actionnez de nouveau le flash.

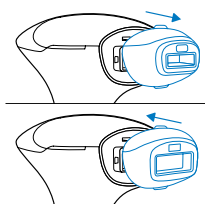


9. Traitez une autre zone du corps

⚠ NE PAS commencer ni reprendre les séances avec Lumea au cours des 4 semaines suivant l'exposition de votre peau au soleil sans protection (soleil naturel ou lit de bronzage) ou au cours des 2 semaines suivant un bronzage artificiel (crèmes, vaporisateurs ou pilules). Faites un test cutané avant de commencer ou de reprendre les séances (voir la section « Test cutané »).

Si vous souhaitez traiter une autre zone du corps, veillez à sélectionner le bon accessoire et recommencez à l'étape 1. Si vous traitez une zone du corps pour la première fois ou après une exposition au soleil sans protection, pensez à effectuer un test cutané.


Patiencez 24 heures et vérifiez l'absence de réaction cutanée.

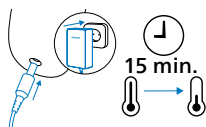

10. Vous avez terminé. Éteignez et débranchez l'appareil


⚠ NE PAS toucher le verre filtrant pendant ou juste après l'utilisation, car il devient très chaud. Après utilisation, débranchez Lumea et l'adaptateur secteur et laissez-les refroidir pendant 15 minutes avant de les nettoyer et de les ranger.

Appuyez sur le bouton marche/arrêt et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Débranchez votre Lumea et l'adaptateur secteur de la prise secteur. Laissez votre Lumea refroidir.

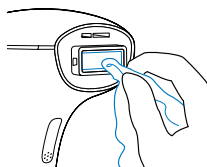

11. Nettoyez toutes les parties de votre Lumea après utilisation

Il est important de nettoyer toutes les parties de votre Lumea. Des résidus tels que des poils, de la sueur ou de la saleté peuvent s'accumuler lors du traitement et provoquer des réactions cutanées s'ils ne sont pas nettoyés. Suivez les étapes de la section « Nettoyage et rangement ».

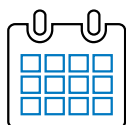


12. Programmez votre prochaine séance

Suivez les étapes de la section « Programmation des prochaines séances ».

Nettoyage et rangement




Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

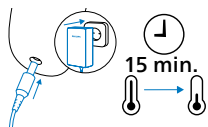

1. Éteignez Lumea, débranchez-le et laissez-le refroidir

⚠ NE PAS toucher le verre filtrant pendant ou juste après l'utilisation, car il devient très chaud. Après utilisation, débranchez Lumea et l'adaptateur secteur et laissez-les refroidir pendant 15 minutes avant de les nettoyer et de les ranger.

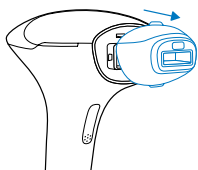

2. Détachez l'accessoire

Retirez-le délicatement.




3. Humidifiez légèrement votre chiffon de nettoyage Lumea

⚠ NE PAS utiliser Lumea dans un environnement humide.


NE PAS laisser de l'eau pénétrer dans Lumea.

Humidifiez le chiffon de nettoyage doux Lumea avec quelques gouttes d'eau.

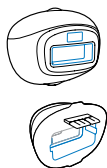


4. Nettoyez les accessoires

Nettoyez chaque partie de l'accessoire que vous avez utilisé, y compris les réflecteurs métalliques.

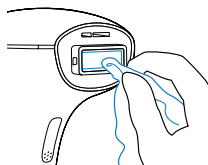


5. Nettoyez le verre filtrant

Assurez-vous qu'il n'y a pas de saleté, de résidus ou d'humidité sur la surface du verre filtrant.

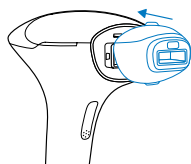

6. Fixez un accessoire

Veillez à protéger le verre filtrant de votre Lumea en enclenchant l'un des accessoires.

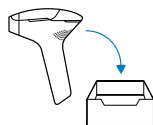

7. Rangez votre Lumea

Placez toutes les pièces dans l'emballage d'origine, la trousse, la pochette ou la boîte fournie pour les ranger dans un endroit sec et à l'abri de la poussière.

Après la séance

Après utilisation, si vous souhaitez appliquer des lotions, des crèmes, des déodorants, des soins hydratants ou des cosmétiques sur les zones traitées, consultez toujours la notice du produit que vous souhaitez appliquer pour vous assurer qu'il est adapté à l'état de votre peau à ce moment-là.

Programmation des prochaines séances



Numérisez le code QR pour regarder une courte vidéo.

Suivez le calendrier des séances indiqué.


Utilisez l'application Philips Lumea IPL pour planifier vos prochains traitements et définir des rappels.



24 heures

Phase de test


Avant votre première séance sur une zone du corps ou après avoir exposé votre peau au soleil sans protection, effectuez un test cutané en suivant les étapes de la section « Test cutané ». Attendez 24 heures après le test cutané avant d'entamer la phase de traitement.

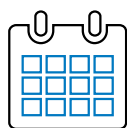

Phase de traitement : 4 séances bimensuelles

Pendant la phase de traitement qui comprend 4 séances, effectuez une séance toutes les 2 semaines.

Pendant la phase de traitement, effectuez la séance dans les 3 jours qui précèdent ou qui suivent la date prévue.

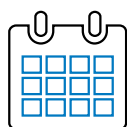

Phase de retouche : une fois toutes les 4 semaines

Après la phase de traitement, utilisez votre Lumea une fois toutes les 4 semaines pour conserver les résultats obtenus.

Pendant la phase de retouche, effectuez une séance dans les 4 jours qui précèdent ou qui suivent la date prévue.

Remarque : Si vous manquez une séance, consultez le chapitre « Dépannage » pour obtenir des conseils. Si vous ne suivez pas le calendrier de séances, vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés.

Dépannage

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous êtes susceptible de rencontrer avec votre Lumea ou les mesures à prendre si vous ne suivez pas le calendrier de séances. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des renseignements ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support ou composez le 1 888 744-5477 pour obtenir de l'aide.

Problèmes courants lors de l'utilisation de votre Lumea :

Problème

Mon Lumea n'émet pas de flash / le voyant « Prêt à traiter » s'allume en orange et commence à clignoter.

Mon Lumea dégage une odeur étrange lors du flash.

Les voyants d'intensité lumineuse de mon Lumea clignent et le voyant « Prêt à traiter » clignote en orange.

Solution

1. Votre peau est peut-être trop foncée. Consultez les tableaux de teints de peau et de couleurs des poils à l'intérieur de la couverture de ce livret.
2. Veillez toujours à fixer (correctement) votre accessoire sur votre Lumea.
3. Veillez à bien mettre l'appareil en contact avec la peau pendant au moins 5 secondes. Dans certaines zones (zones sensibles et osseuses), il peut être difficile d'établir un bon contact avec la peau. Aucune lumière ne doit passer entre Lumea et votre peau. Essayez de repositionner votre Lumea.
4. Veillez à appuyer sur le bouton du flash situé sur la poignée intérieure pour traiter une zone de votre peau.

1. Assurez-vous d'avoir éliminé tous les poils de la zone à traiter avant d'utiliser votre Lumea. Les poils brûlés peuvent dégager des odeurs.
2. Assurez-vous que votre peau est propre et sèche avant de commencer une séance.
3. Assurez-vous que votre Lumea et ses accessoires sont propres et secs avant de commencer une séance. Des résidus tels que des poils, de la sueur ou de la saleté peuvent s'accumuler lors du traitement et provoquer des réactions cutanées s'ils ne sont pas nettoyés.

1. Lumea est en mode erreur. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant plus de 2 secondes pour placer Lumea en mode veille. Ou débranchez Lumea pour l'éteindre.
2. Patientez 5 minutes. Lumea retourne automatiquement en mode veille au bout de 5 minutes sans intervention.

Problème

Je ne peux pas configurer mon Lumea ni l'application Philips Lumea IPL.

Solution

1. L'application n'est peut-être pas installée correctement. Veuillez supprimer l'application de votre téléphone et la télécharger à nouveau depuis l'App Store. Vérifiez que le système d'exploitation de votre téléphone intelligent est à jour.
2. Assurez-vous que Lumea est branché à la prise électrique et que l'appareil est allumé.
3. Veuillez noter qu'un seul téléphone doté de l'application Philips Lumea IPL peut être connecté à votre Lumea. Vérifiez si un autre téléphone intelligent est déjà connecté à votre Lumea et si le voyant Bluetooth clignote lentement en blanc. Éteins ton Lumea. Pour déconnecter un autre téléphone, appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt de votre Lumea pendant plus de 10 secondes. Attendez que le voyant clignote 3 fois en bleu avant de relâcher le bouton marche/arrêt. Ensuite, suivez les instructions indiquées dans l'application.

Mon Lumea est en mode erreur après la mise à jour du micrologiciel et le voyant Bluetooth clignote en jaune.

Lumea est en mode erreur. Veuillez d'abord essayer d'éteindre l'appareil et de le débrancher. Attendez quelques instants, branchez-le et rallumez-le. Si Lumea est toujours en mode erreur, effectuez une réinitialisation aux paramètres par défaut :

1. Assurez-vous que Lumea est éteint.
 2. Assurez-vous que Lumea est branché et que l'adaptateur secteur est branché à la prise murale.
 3. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant.
 4. Le voyant Bluetooth restera bleu pendant 10 secondes, puis clignotera lentement en bleu à plusieurs reprises. Continuez à maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 20 secondes supplémentaires (soit 30 secondes au total).
 5. Relâchez le bouton marche/arrêt.
 6. Le voyant Bluetooth commencera à clignoter en violet.
 7. Attendez que le processus de réinitialisation aux paramètres par défaut soit terminé, ce qui prendra environ 5 minutes. Ne débranchez pas votre Lumea.
 8. Lumea s'allumera une fois la réinitialisation aux paramètres par défaut terminée.
-

Problème

Je souhaite effectuer une réinitialisation aux paramètres par défaut.

Solution

1. Assurez-vous que Lumea est éteint.
2. Assurez-vous que Lumea est branché et que l'adaptateur secteur est branché à la prise murale.
3. Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant.
4. Le voyant Bluetooth restera bleu pendant 10 secondes, puis clignotera lentement en bleu à plusieurs reprises. Continuez à maintenir le bouton marche/arrêt enfoncé pendant 20 secondes supplémentaires (soit 30 secondes au total).
5. Relâchez le bouton marche/arrêt.
6. Le voyant Bluetooth commencera à clignoter en violet.
7. Attendez que le processus de réinitialisation aux paramètres par défaut soit terminé, ce qui prendra environ 5 minutes. Ne débranchez pas votre Lumea.
8. Lumea s'allumera une fois la réinitialisation aux paramètres par défaut terminée.

Que faire si vous ne suivez pas le calendrier de séances :

Phase	Problème	Solution
Phase de traitement	Séance manquée. <i>J'ai effectué ma séance plus de 3 jours après la date prévue.</i>	Essayez de faire votre séance proche de la date prévue. Vous pouvez continuer à suivre le calendrier initialement prévu. Vous pouvez ajouter une séance bimensuelle supplémentaire à votre phase de traitement. Si vous ne suivez pas le calendrier de séances, vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés.
	Dernière séance bimensuelle. <i>J'ai terminé ma phase de traitement, mais j'ai l'impression de ne pas avoir obtenu les résultats escomptés.</i>	Vous pouvez choisir d'ajouter une séance bimensuelle supplémentaire à votre phase de traitement, mais les résultats escomptés reposent sur le calendrier de traitement indiqué et les résultats varient selon les personnes.
Phase de retouche	Séance manquée. <i>Je n'ai pas effectué la séance dans les 4 jours suivant la date prévue.</i>	Veuillez suivre le calendrier. Si vous ne suivez pas le calendrier de séances, vous risquez de ne pas obtenir les résultats escomptés. Vous pouvez continuer à suivre le calendrier initialement prévu ou vous pouvez choisir de recommencer la phase de traitement, mais les résultats escomptés reposent sur le calendrier de traitement indiqué et varient selon les personnes.

Informations supplémentaires

Garantie de deux ans complète

Philips garantit ses produits pendant une période déterminée à compter de la date d'achat. Si le produit est acheté aux États-Unis, Philips North America LLC (États-Unis) ou, s'il est acheté au Canada, Philips Electronics Ltd, garantit ce nouveau produit contre tout défaut matériel ou vice de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat (comme l'atteste une preuve d'achat valide), et s'engage à remplacer n'importe quel produit défectueux sans frais. Philips remboursera le prix d'achat s'il ne parvient pas à remplacer le produit. Les pièces sujettes à l'usure normale, les accessoires, les piles de rechange et les consommables tels que les têtes de brosse à dents ne sont pas couverts par cette garantie.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une utilisation incorrecte ou abusive, une négligence, l'ajout de tout embout non fourni avec le produit, la perte de pièces ou l'utilisation d'un voltage autre que celui spécifié pour le produit.*

AUCUNE RESPONSABILITÉ N'EST PRISE EN CHARGE POUR LES DOMMAGES PARTICULIERS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. Pour obtenir plus d'informations et pour bénéficier du service de garantie, il vous suffit d'accéder au site www.philips.com/support.

REMARQUE : Cette garantie vous permet de bénéficier de droits spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits, en fonction des différents états, provinces et pays. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Ainsi, les limitations ou exclusions ci-avant peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie est transférable.

*Lisez attentivement les instructions fournies.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES CAS SUIVANTS :

- Dommages indirects ou consécutifs tels que la perte de temps, la perte de données ou la perte de revenu. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Par conséquent, il est possible que la limitation présentée ci-dessus ne s'applique pas à votre cas.
- Compensation pour des activités effectuées par vous-même, telles qu'une maintenance régulière, l'installation de mises à jour du micrologiciel ou la sauvegarde de données.

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX CAS SUIVANTS :

- Si la preuve d'achat, le numéro de modèle, le numéro de série ou le code de date de production du produit a été rendu illisible.
- Si le produit a été acheté en provenance d'un stock défectueux.
- Si le défaut est le résultat d'une utilisation abusive ou excessive, en dehors de l'objectif prévu.
- Si le défaut est dû aux conditions environnementales, à la connexion de périphériques, d'équipements supplémentaires ou d'accessoires (y compris le logiciel) qui ne sont pas conformes au mode d'emploi.
- Si l'unité a été endommagée, y compris mais sans s'y limiter, par des animaux, des éclairs, une tension anormale, un incendie, une catastrophe naturelle, un transport ou de l'eau (à moins que le mode d'emploi n'ait expressément indiqué que le produit peut être rincé).

- Pour les composants non électriques, l'usure normale, les accessoires, les piles de rechange ou le remplacement de pièces consommables telles que les têtes de brosse à dents.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, car il n'a pas été conçu à l'origine pour le pays où il est utilisé, ce qui peut arriver s'il est importé.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement en raison de problèmes de connexion avec des fournisseurs de services, tels qu'Internet.

Garantie de remboursement de 90 jours

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de l'appareil, retournez-le et Philips vous remboursera intégralement. Le produit doit être expédié port payé par poste assurée avec assurance prépayée, et l'envoi doit comprendre le reçu original indiquant le prix et la date de l'achat. Philips n'assume aucune responsabilité en cas de perte par la poste. L'envoi de l'appareil doit être fait au plus tard 90 jours suivant la date d'achat, le cachet de la poste en faisant foi. Philips se réserve le droit de vérifier le prix d'achat de l'appareil et de limiter le montant du remboursement au prix de détail suggéré. Pour obtenir le service de garantie de remboursement, visitez le site www.philipsmoneyback.com et suivez le processus simple en trois étapes. Le chèque de remboursement sera envoyé de 6 à 8 semaines après réception du produit retourné.

Mise au rebut

Votre appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site www.recycle.philips.com.

Compatibilité électromagnétique

Cet appareil a été testé et déclaré conforme à la norme CEI 60601-1-2 relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) en tant qu'appareil de classe B au titre de la CISPR 11. Les niveaux d'essai sont indiqués dans les tableaux ci-après. Seul l'adaptateur secteur fourni avec Lumea doit être utilisé avec votre appareil.

Directive et déclaration du fabricant sur les émissions et l'immunité électromagnétiques

Lumea est destiné à être utilisé dans l'environnement électromagnétique indiqué ici. La personne qui utilise l'appareil doit veiller à le faire dans un environnement adapté à son bon fonctionnement.

Émissions	Conformité	Environnement électromagnétique – Directives
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1	Lumea n'utilise pas l'énergie radiofréquence pour remplir la fonction pour laquelle il a été conçu. Par conséquent, ses émissions de radiofréquences se révèlent très faibles et ne sont pas susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques situés à proximité.
Émissions RF CISPR 11	Classe B	Lumea peut être utilisé dans tous les milieux résidentiels et les établissements directement raccordés au réseau d'alimentation public basse tension qui alimente les bâtiments résidentiels.
Émissions de courants harmoniques IEC 61000-3-2	Classe A	
Norme CEI 61000-3-3 sur les fluctuations de tension et les papillonnements	Conforme	

Essai d'immunité	Niveau d'essai d'immunité	Environnement électromagnétique – Directives
Norme CEI 61000-4-2 sur les décharges électrostatiques	±8 kV de décharge au contact ±15 kV de décharge dans l'air	Les sols peuvent être la source d'électricité statique. Lorsque l'air est très sec (< 20 % d'humidité relative), il est conseillé d'utiliser Lumea dans une pièce dont le plancher est en béton ou en bois (et non en matière synthétique).
Champs EM de radiofréquences rayonnées CEI 61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	Lumea est protégé contre les appareils de communication sans fil à RF, tels que les smartphones et les appareils Wi-Fi ou Bluetooth à partir d'une distance de 30 cm ou plus.
Champs de proximité d'équipement de communication sans fil à RF CEI 60601-1-2	385 (27), 450 (28), 710 (9), 745 (9), 780 (9), 810 (28), 870 (28), 930 (28), 1720 (28), 1845 (28), 1970 (28), 2450 (28), 5240 (9), 5500 (9), 5785 (9) MHz (V/m)	Évitez les distances plus rapprochées, car elles peuvent causer un mauvais fonctionnement.
Champs magnétiques à la fréquence du réseau CEI 61000-4-8	30 A/m 50 ou 60 Hz	

Essai d'immunité	Niveau d'essai d'immunité	Environnement électromagnétique – Directives
Champs rayonnés à proximité IEC 61000-4-39	30 kHz, CW, 8 A/m 134,2 kHz, modulation d'impulsions 2,1 kHz, 65 A/m 13,56 MHz, modulation d'impulsions 50 kHz, 7,5 A/m	
Norme CEI 61000-4-4 sur les transitoires électriques rapides en salves	Fréquence de répétition de 100 kHz $\pm$ 2 kV	Qualité de l'alimentation secteur d'un environnement commercial ou domestique classique.
Surtensions IEC 61000-4-5	$\pm$ 0,5 kV, $\pm$ 1 kV entre phases	
Perturbations conduites provoquées par les champs de RF IEC 61000-4-6	3 V r.m.s., avant l'application de la modulation 0,15 MHz – 80 MHz 6 V r.m.s., avant application de la modulation, dans les bandes ISM et de radioamateurs comprises entre 0,15 MHz et 80 MHz 80 % AM à 1 kHz	
Norme CEI 61000-4-11 sur les creux de tension, les coupures brèves et les variations de tension sur les lignes d'alimentation électrique	0 % UT; cycle de 0,5 à 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° et 315° 0 % UT; 1 cycle et 70 % UT; 25/30 cycles Monophasé à 0° 0 % UT; 250/300 cycles	Qualité de l'alimentation secteur d'un environnement commercial ou domestique classique. En cas de coupure de courant, Lumea s'éteint.

Remarque : UT désigne la tension secteur en c.a. avant l'application du niveau de test. Si, dans le cas peu probable où Lumea ne fonctionne plus en raison de perturbations provenant d'autres appareils au-delà des niveaux indiqués dans le tableau ci-dessus, Lumea s'arrête complètement et doit être redémarré en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Dans une telle situation, veillez à éloigner l'appareil causant les perturbations.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes et réglementations relatives à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Déclaration de conformité du fournisseur

Informations sur la conformité à la norme

47 CFR § 2.1077

Identifiant unique : BRC332, BRC344

Partie responsable – Coordonnées aux États-Unis

Philips Personal Health
une division de Philips North America LLC
P.O. Box 10313
Stamford, CT 06904
États-Unis d'Amérique

Déclaration de conformité FCC

À l'issue des tests dont il a fait l'objet, cet appareil a été déclaré conforme à l'article 15 de la réglementation FCC applicable aux appareils numériques de classe B. Ces limites sont conçues pour fournir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles dans les radiocommunications s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Dans le cas où cet appareil créerait des interférences nuisibles avec la réception radio ou télévisée, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'appareil, il est conseillé d'essayer de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit secteur différent de celui du récepteur.
- Consultez le détaillant ou un technicien de radiotélévision expérimenté.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas émettre d'interférence nuisible, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, même si cette interférence est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Aucune modification ne doit être apportée à l'équipement sans l'autorisation du fabricant, car cela pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques	L'adaptateur secteur et Lumea sont considérés comme : ÉQUIPEMENT EM de classe II
Accessoire	Partie appliquée de type BF la partie appliquée (accessoire) peut devenir chaude pendant l'utilisation < 60 °C. Le cas échéant, laissez l'appareil refroidir et limitez la durée du contact à moins de 1 minute.
Mode de fonctionnement	Fonctionnement continu
Opérateur prévu	L'utilisateur est l'opérateur prévu
Classe IP de l'adaptateur secteur	IP22
Puissance lumineuse	
Groupe de risque	Exempt
Longueur d'onde du rayonnement optique émis	Accessoires Corps et Précision : 520 nm – 1200 nm Accessoire Visage : 590 nm – 1200 nm
Taille du point	Accessoire Corps : 4,1 cm ² (32,7 mm x 12,6 mm) Accessoire Précision : 3 cm ² (30,0 mm x 10,0 mm) Accessoire Visage : 2 cm ² (25,0 mm x 8,0 mm)
Exposition optique	Réglage 1 : 2,5 ± 0,80 J/cm ² Réglage 2 : 3,1 ± 0,85 J/cm ² Réglage 3 : 3,8 ± 0,91 J/cm ² Réglage 4 : 4,4 ± 0,96 J/cm ² Réglage 5 : 5,0 ± 1,00 J/cm ²
Énergie optique maximale	Accessoire Corps : 23,0 J Accessoire Précision : 16,8 J Accessoire Visage : 11,2 J
Homogénéité optique	Écart max. de +/- 30 % par rapport à l'exposition optique moyenne dans la zone d'application
Séquence d'impulsions	Impulsion unique pour tous les réglages
Intervalle entre les pulsations	0,6 à 2,4 s, pour tous les réglages
Largeur de l'impulsion	1,25 +/- 0,4 ms (FWHM)
Conditions de transport et de stockage	Lumea reste opérationnel lorsqu'il est utilisé dans des CONDITIONS NORMALES D'UTILISATION dans le cadre de ses spécifications de transport ou de stockage dans la plage environnementale suivante : - une température comprise entre -25 °C et 70 °C; et - une humidité relative maximale de 95 %, sans condensation; et - plage de pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1 060 hPa. Si l'appareil a été entreposé dans un environnement chaud ou froid, placez-le dans une pièce à 20° C pendant 30 minutes afin qu'il atteigne une température conforme aux conditions d'utilisation (entre 5 et 40 °C) avant de l'utiliser.

Environnement d'utilisation	Lumea est conforme à ses spécifications dans le cadre d'une UTILISATION NORMALE dans les conditions environnementales suivantes : - température comprise entre 5 °C et 40 °C; - humidité relative comprise entre 15 % et 90 % (sans condensation); et - plage de pression atmosphérique comprise entre 700 hPa et 1 060 hPa.
Adaptateur d'alimentation	
Entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Sortie de l'adaptateur secteur	19,5 V $\equiv$ 3,33 A 65,0 W
Efficacité active moyenne	$\geq 88,0$ %
Efficacité à faible charge (10 %)	$\geq 79,0$ %
Consommation électrique hors charge	< 0,21 W
Poids	Adaptateur secteur ~ 310 g (0,7 lb) Appareil ~ 430 g (0,9 lb)
Dimensions	Adaptateur d'alimentation ~ 10,8 x 6,5 x 6,8 cm Appareil ~ 20,0 x 14,5 x 9,5 cm
Durée de vie utile	5 ans, sur la base du programme de traitement Lumea qui inclut 14 séances du corps entier par an.
Matériaux	
Boîtier	Polycarbonate, acrylonitrile butadiène styrène, polyamide
Câble	Élastomère thermoplastique
Niveau de caractérisation de la cybersécurité	SL-C 1
Caractéristiques Bluetooth	
Fréquence	2,4 GHz
Puissance de transmission	0 dBm
Distance d'exploitation	2 m

Garantie et assistance

Philips offre une garantie de 2 ans. Des exceptions de garantie s'appliquent. Cette garantie n'a aucune incidence sur vos droits prévus par la loi en tant que consommateur.

Pour en savoir plus, visitez le site www.philips.com/support ou appelez-nous.

Explication des symboles

Les signes et les symboles de sécurité sont indispensables pour garantir une utilisation sûre et correcte de ce produit, ainsi que pour protéger les utilisateurs. Vous trouverez ci-dessous la signification des signes et symboles de sécurité qui se trouvent sur l'étiquette et dans le mode d'emploi.



IEC 60417-5333 Partie appliquée de type BF

Ce symbole identifie la partie appliquée de type BF conforme à la norme IEC 60601-1.



ISO 7000-2620 Limite d'humidité

Ce symbole indique les limites supérieure et inférieure acceptables d'humidité relative pour le transport et le stockage.



ISO 7000-2621 Limite de pression atmosphérique

Ce symbole indique les limites supérieure et inférieure acceptables de pression atmosphérique pour le transport et le stockage.



ISO 7000-0632 Limite de température

Ce symbole indique les limites de température maximale et minimale de stockage, de transport ou d'utilisation de l'article.



ISO 7000-0626 Tenir au sec

Ce symbole indique que l'appareil doit être maintenu au sec.

IP22

Ce symbole indique la protection contre la pénétration de corps étrangers solides $\geq 12,5$ mm et une étanchéité à l'eau de ruissellement sur un plan incliné à 15 degrés.



IEC 60417-5172 Équipement de classe II

Ce symbole indique « Équipement de classe II ». L'adaptateur secteur est doté d'une double isolation.



ISO 7000-3082 Fabricant

Ce symbole indique le fabricant du produit.



IEC 60417-6049 Pays de fabrication

Ce symbole indique le pays de fabrication et la date de fabrication. « CC » est le code pays à deux lettres.



ISO 7000-2492 Numéro de lot

Ce symbole indique le numéro de lot du fabricant.



ISO 7000-2493 Référence catalogue

Ce symbole indique la référence catalogue du fabricant.



IEC 60417-5032 Courant alternatif

Ce symbole indique le courant alternatif.



IEC 60417-5031 Courant continu

Ce symbole indique le courant continu.



ISO 7000-1641 Consulter le mode d'emploi

Ce symbole indique que les instructions d'utilisation doivent être suivies lors de l'utilisation de l'appareil.



ISO 7010-W017 Avertissement; surface chaude

Ce symbole met en garde contre une surface chaude. Le fond est jaune et le symbole est noir.



IEC 61558-1 Température ambiante maximale recommandée

Ce symbole indique la température ambiante maximale à laquelle le transformateur peut fonctionner en continu dans des conditions normales d'utilisation.



IEC 60417-5957 Usage intérieur uniquement

Ce symbole signifie que l'appareil est conçu pour une utilisation à l'intérieur.



IEC 60417-5947 Transformateur d'isolement de sécurité, résistant aux courts-circuits

Ce symbole signifie que le transformateur est conçu pour résister aux courts-circuits.



IEC 60417-6190 Alimentation à découpage

Ce symbole signifie que le transformateur est considéré comme une alimentation à découpage.



IEC 60417-6343 Altitude maximale

Ce symbole indique que l'appareil est prévu pour être utilisé jusqu'à 3 000 m d'altitude.



ISO 7000-3706 Utilisation multiple pour un seul patient

Ce symbole indique que l'appareil peut être utilisé plusieurs fois par la même personne.



Technologie SenselIQ Pro

Ce symbole indique que l'appareil est équipé de la technologie SenselIQ Pro.



Ce symbole indique que l'appareil est doté de l'application Philips Lumea IPL pour des résultats optimaux.



Ce symbole indique que l'appareil est doté d'un système de guidage audio en temps réel.



ISO/IEC 16022 Technologies de l'information – Technologies d'identification automatique et de saisie de données – Spécification de la symbologie des codes à barres matriciels. Les codes-barres Data Matrix (codes QR) servent à capturer des informations sous une forme lisible par une machine.



ISO 15223-1 Identifiant unique de l'appareil

Indique l'identifiant unique de l'appareil utilisé pour identifier un produit spécifique.



ISO 7010-W001 Avertissement général

Ce symbole signifie que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour prendre connaissance d'informations de sécurité importantes, telles que des contre-indications et des avertissements. Sur l'appareil, le fond est jaune et le symbole est noir.



ISO 7000-0434A Attention

Ce symbole signifie que l'utilisateur doit consulter le mode d'emploi pour prendre connaissance d'informations de sécurité importantes sur les précautions à prendre.



Ce symbole de recyclage permet d'identifier le matériau de fabrication d'un objet afin de faciliter son recyclage ou tout autre retraitement. Le symbole comprend un numéro permettant d'identifier le code du matériau.



IEC 60417-5009 Mode veille

Ce symbole identifie l'interrupteur ou la position de l'interrupteur au moyen duquel une partie de l'équipement est mise sous tension pour activer le mode veille. Il identifie également la commande à actionner ou indique l'état de faible consommation d'énergie.



Ce symbole représente le Forest Stewardship Council® (conseil de bonne gestion des forêts). Les marques FSC permettent aux consommateurs d'opter pour des produits qui soutiennent la sauvegarde des forêts, garantissent des avantages sociaux et permettent au marché de contribuer à une meilleure gestion des forêts.

**ISO 15223-1 Dispositif médical**

Ce symbole indique qu'il s'agit d'un dispositif médical.



Le mot-symbole Bluetooth® ainsi que les logos qui y sont associés sont des marques de commerce enregistrées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Royal Philips est sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



La marque FCC est une marque volontaire, qui indique que le rayonnement électromagnétique de l'appareil est inférieur aux limites spécifiées par la Federal Communications Commission.



GET IT ON
Google Play

Ce symbole indique qu'une application peut être utilisée avec cet appareil. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.



Download on the
App Store

Ce symbole indique qu'une application peut être utilisée avec cet appareil. App Store® est une marque de service d'Apple Inc.



MÉDICAL —
ÉQUIPEMENT
MÉDICAL GÉNÉRAL
PHILIPS Lumière
Intense Pulsée
ÉPILATION EN CE
QUI CONCERNE LES
CHOCS ÉLECTRIQUES,
LES INCENDIES ET LES
RISQUES MÉCANIQUES
UNIQUEMENT
CONFORMÉMENT À
LA NORME CSA-C22.2
no 60601-1:2014 et
aux modifications
applicables et/ou aux
normes particulières
et/ou connexes pour
lesquelles le produit
a été jugé conforme
par UL.



© 2026 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.172.1174.1
(20/02/26)



Philips Consumer Lifestyle B.V.
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands

Manufactured for:
Philips Personal Health
a division of
Philips North America LLC
P.O. Box 10313
Stamford, CT 06904
United States of America

In Canada imported for /
au Canada importé pour:
Philips Electronics Ltd. /
Philips Électronique Ltée
1875 Buckhorn Gate, 5th Floor,
Mississauga, Ontario, L4W 5P1
Canada

FSC

www.philips.com