


PHILIPS


ReAura

QUICK START GUIDE
KURZANLEITUNG
GUÍA RÁPIDA
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUIDA RAPIDA ALL'AVVIO
SNELSTARTGIDS
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI
SNABBSTARTSGUIDE

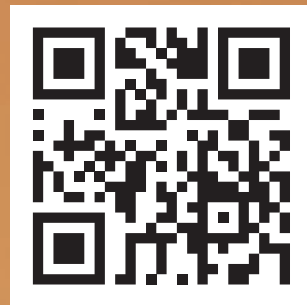

LED MASK LTM7100

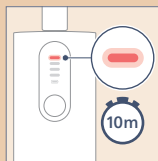


Age care mode (630 nm + 830 nm)

Modus zur Pflege gegen Alterserscheinungen
• Modo de cuidado del envejecimiento • Mode
soin des signes de vieillissement • Modalità
cura dell'età • Modus voor verzorging voor de
rijpere huid • Tryb pielęgnacji przeciw oznakom
starzenia • Age Care-läget

Every other day • Alle
zwei Tage • Cada
dos días • Un jour
sur deux • A giorni
alterni • Om de dag
• Co drugi dzień
• Varannan dag

At least 8 weeks • Mindestens
8 Wochen • Al menos
8 semanas • Au moins
8 semaines • Almeno
8 settimane • Minstens
8 weken • Co najmniej
8 tygodnie • Minst 8 veckor

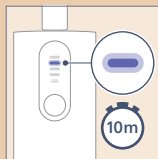


Blemish care mode (415 nm + 630 nm)

Hautunreinheitenpflege • Modo de cuidado de
imperfecciones • Mode soin des imperfections
• Modalità cura delle imperfezioni • Modus
voor verzorging van een onzuivere huid • Tryb
pielęgnacji skóry z niedoskonałościami • Läget
för skönhetsfläckar

Every other day • Alle
zwei Tage • Cada
dos días • Un jour
sur deux • A giorni
alterni • Om de dag
• Co drugi dzień
• Varannan dag

At least 4 weeks • Mindestens
4 Wochen • Al menos
4 semanas • Au moins
4 semaines • Almeno
4 settimane • Minstens
4 weken • Co najmniej
4 tygodni • Minst 4 veckor

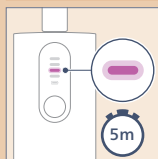

Daily glow mode (415 nm + 630 nm + 830 nm)


Daily Glow-Modus • Modo de luminosidad
diaria • Mode éclat • Modalità luce quotidiana
• Dagelijkse glow-modus • Tryb codziennego
rozświetlenia skóry • Dagligt ljusläge

Every other day • Alle
zwei Tage • Cada
dos días • Un jour
sur deux • A giorni
alterni • Om de dag
• Co drugi dzień
• Varannan dag


As long as you like • Solange Sie
möchten • Todo el tiempo que
desees • Aussi longtemps que
vous le souhaitez • Per tutto
il tempo desiderato • Zolang
u maar wilt • Tak długo, jak
chcesz • Så länge du vill

Only use the
mask for one
light session
every other day
• Verwenden Sie
das Gerät nicht
für mehr als eine

Lichtbehandlung pro Tag • Utilice
la máscara solo una vez cada dos
días • N'utilisez le masque que
pour une seule séance de lumière
tous les deux jours • Utilizzate la
maschera per una sola sessione
di luce a giorni alterni • Gebruik
het masker niet vaker dan één
keer per twee dagen • Stosuj
tylko jedną sesję terapii światłem
w masce co drugi dzień • Använd
endast masken för en ljussession
varannan dag



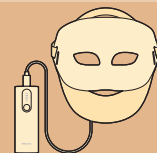


1

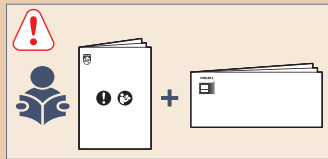


Read all safety information before use • Lesen Sie sich alle Sicherheitsinformationen vor dem Gebrauch durch • Lea toda la información de seguridad antes de usar el producto • Lisez toutes les informations relatives à la sécurité avant utilisation. • Prima dell'uso, leggete tutte le informazioni di sicurezza • Lees vóór gebruik alle veiligheidsinformatie • Przed użyciem zapoznaj się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa • Läs all säkerhetsinformation före användning

2

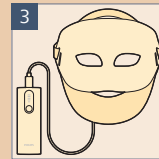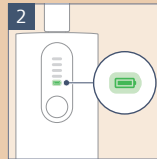
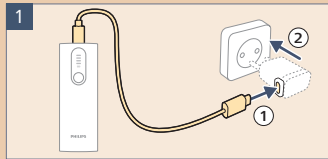


3



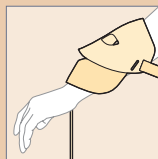


Perform the skin test as described in the user manual • Den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Hauttest durchführen • Realiza la prueba de la piel tal y como se describe en el manual de usuario • Effectuez le test cutané comme décrit dans le mode d'emploi • Eseguite il test cutaneo come descritto nel manuale d'uso • Voer de huidtest uit zoals beschreven in de gebruikershandleiding • Wykonaj test na skórze zgodnie z instrukcją obsługi • Utför hudtestet enligt beskrivningen i bruksanvisningen

4

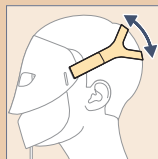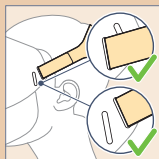

5

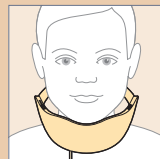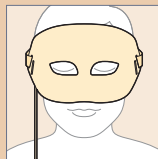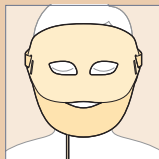

6

